

Ultrasonic & Powder Combination System

Varios Combi Pro



OPERATION
MANUAL

Thank you for purchasing Varios Combi Pro. Please read this Operation Manual carefully before use for operating instructions and care and maintenance guidelines so that you can use it for many years to come through a correct use. Keep this Operation Manual within easy reach of users for future reference.




The reference number of the Operation Manual of the related products is as follows:

| Operation Manual Title | Operation Manual No. |
|---|----------------------|
| Cleaning Adaptor CLA-20 For Prophy Handpiece / For Perio Handpiece | OM-DE0906MA |

– Contents –

| | |
|---|----|
| 1. User and Intended Use | 1 |
| 2. Precautions for handling and operation | 1 |
| 3. Accessory List | 5 |
| 4. Names of Components | 6 |
| 5. Installation | 8 |
| 6. Check before treatment | 11 |
| 7. Using the Ultrasonic Mode | 12 |
| 8. Using the Powder Mode | 16 |
| 9. Post-use Maintenance | 21 |
| 10. Care and Maintenance | 39 |
| 11. Other Functions | 44 |
| 12. Periodical Maintenance Checks | 45 |
| 13. Error Code | 45 |
| 14. Troubleshooting | 46 |
| 15. Specifications | 48 |
| 16. Classification of Equipment | 49 |
| 17. Operation Principle | 49 |
| 18. Symbol | 50 |
| 19. Warranty | 50 |
| 20. Option Parts List | 51 |
| 21. Spare Parts List | 51 |
| 22. Disposing product | 52 |
| 23. EMC Information (Electromagnetic Compatibility Information) | 52 |

* Some sections are indicated with the mark(s) below to show the mode(s) related to the section.

-  **ULTRASONIC** Description regarding Ultrasonic Mode
-  **POWDER PROPHY** Description regarding Prophy Mode under Powder Mode
-  **POWDER PERIO** Description regarding Perio Mode under Powder Mode



1 User and Intended Use

User: Dentist, dental hygienist

Intended Use: Tooth surface cleaning, removal of plaque or calculus, tooth resection, expansion or cleaning of root canal, removal of foreign substances, root canal obturation, enhancing adhesion of fixed restorations, incision or removal of periodontal tissue

2 Precautions for handling and operation

- Please read these precautions carefully and use only as intended or instructed.
- Safety instructions are intended to avoid potential hazards that could result in personal injury or damage to the device. Safety instructions are classified as follows in accordance with the seriousness of the risk.

| Class | Degree of Risk |
|--|---|
|  WARNING | Hazard that could result in serious injury or damage to the device if the safety instructions are not correctly followed. |
|  CAUTION | Hazard that could result in light or moderate injury or damage to the device if the safety instructions are not correctly followed. |
| NOTICE | General product specification information highlighted to avoid product malfunction and performance reduction. |

⚠ WARNING

<Ultrasonic Mode and Powder Mode>



- Do not handle the power cord with wet hands. Wet hand contact with electricity may result in an electric shock.
- Keep away from explosive substances and flammable materials.
- If the product overheats or smells of burning, immediately turn off the power and disconnect the main power cord. Contact your Authorized NSK Dealer.
- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, use a main electrical outlet that is earthed.
- Do not operate close to patients with cardiac pacemakers as there is a danger that it may affect the pacemaker.
- The system functions normally in the environment where the temperature is at 0 - 40°C (32 - 104°F), humidity at 35 - 75% RH, and no moisture condensation in the Control Unit. Using in conditions outside these limits may cause malfunction.
- Be careful not to get water or liquid disinfectant in the Control Unit. This could cause short circuits and lead to fire and/or electric shock.
- Repeatedly turning the Main Power Switch ON and OFF may blow a fuse.
- If water droplets, chemicals, solvents or antiseptic solution come into contact with the Control Unit, Handpiece, Handpiece Cord, Handpiece Hose, etc., wipe them off immediately. Failure to do so may result in discoloration or deformation.
- Connect to a public water system that provides drinkable water at a water pressure between 0.1 and 0.3MPa. Using with an incorrect water pressure may result in insufficient water supply, inoperability, or malfunction.
- Use a water softener, etc. to lower the hardness of the water, because using water with a high degree of hardness may cause mineral or limescale deposits in the water circuit, which can lead to problems such as insufficient water levels, operation problems, or breakdown. When doing so, use a Water Tube with a Water Filter to prevent device breakdown due to the foreign material in tap water, and refer to "10-3 Changing the Water Filter" to replace the Water Filter as required.
- Do not sterilize using ultraviolet light. Doing so may result in discoloration of the Handpiece.
- Hold the plug when pulling out the Handpiece Cord or Handpiece Hose. Pulling the Cord or Hose may cause disconnection or damage.

<Ultrasonic Mode>



- Always use the water supply. Insufficient water supply results in overheating, which may damage the surface of the patient's tooth.
- Do not allow the patient or assistant to look directly into the LED of the Handpiece or Handpiece Cord. Doing so may damage eyesight.

<Powder Mode>



- Do not use on the following patients.
 - Those with medical complications or allergies
 - Those who have pre existing conditions (Eg Cardiac, Pulmonary, Renal disturbance or High blood pressure)
 - Those with respiratory diseases.
 - Those with pathologically deep periodontal pockets (6mm or more) or mucosal lesions. Prolonged application of the spray to soft tissue or salivary glands may cause powder air to enter soft tissue or salivary glands, resulting in emphysema.
 - Those with severe digestive ulcers.
 - Those with renal dysfunction.
 - Those with lung or cardiac disturbance or ventilatory impairment.
 - Those with an artificial heart valve or artificial joint
 - Those with allergies. Depending on the patient's constitution, allergy symptoms or stomatitis may be caused in very rare cases. If such symptoms are detected, stop using the product immediately and seek medical attention.
- During use, both the operator and the assistant should always wear protective glasses and protective face masks. Also, continuously vacuum and collect ejected powder during use. If any powder gets into the eyes, eyes wash out immediately with copious amount of water and consult an ophthalmologist.
- Set the supply air pressure to 0.55 - 0.75MPa and use clean, dry air. Using with the incorrect pressure may result in insufficient spray pressure (power), inoperability or malfunction.

<Prophy Mode>



- Do not spray directly onto the cement in the root canal, decalcified enamel, filling, margin of a prosthesis or filling.

⚠ WARNING

<Perio Mode>



- When using Perio Mode, pay attention not to cause emphysema as air containing powder is sprayed into periodontal pockets. If emphysema is caused by treatment using Perio Mode, stop using this product immediately and seek medical attention.
- Do not use on the following patients. Using on periodontal pockets for these patients may result in bacteremia.
 - Patients with endocardial inflammation
 - Patients who have a contagious illness or disease
 - Patients with an immune deficiency disease (neutropenia, granulocytopenia, agranulocytosis, diabetes, hemophilia)
 - Patients undergoing irradiation treatment, chemotherapy, or antibiotic treatment
- Do not use on the following patients. (Excluding the using without the Nozzle Tip)
 - Those with damage or abnormality in the oral cavity.
 - Those with hyperemia, hemorrhage or inflammation in the oral cavity.
 - Those that tend to develop inflammation or sores in the oral mucous membrane.
- Use this product only for maintenance after basic periodontal treatment. Never use it for other purposes.
- Use Perio Mode only on periodontal pockets that meet the following conditions:
 - Periodontal pockets caused by gum disease
 - Periodontal pockets of less than 6mm that have undergone basic periodontal treatment
- Check the depth of periodontal pockets with a measurement probe or photography before use.
- Use the designated cleaning powder only. Use of other powders may result in malfunction, substandard performance or damage to the substantia ossea and dentine, or may cause emphysema. NSK cannot accept any liability for issues that occur as a result of the use of powder other than those designated.
- Nozzle Tip for Perio Mode included in the product package is a sterile item. When using these products, follow the instructions below.
 - Nozzle Tip is a single-use item. Do not reuse nor resterilize it as product breakage or infection could occur.
 - Check before use that the package is NOT open nor damaged. If the package is open or damaged, do not use that Nozzle Tip as it may be damaged or contaminated.
 - Observe the use-by date written on the Nozzle Tip package label. Do not use expired products as product breakage or infection could occur.

⚠ CAUTION

<Ultrasonic Mode and Powder Mode>



- Read this Operation Manual before use to fully understand the product functions and file for future reference.
- When operating the product always consider the safety of the patient.
- The end user shall be responsible for any judgment that relates to the application of this product to a patient.
- Users are responsible for the operational control, maintenance and continual inspection of this product.
- This device is for indoor use only.
- Keep the Control Unit on a level surface.
- Do not attempt to disassemble the product nor tamper with the mechanism except as recommended by NSK in this Operation Manual.
- Do not allow any impact on to the product. Do not drop the product. The Glass Rod and Handpiece may be damaged if the Ultrasonic Handpiece is dropped.
- Operators and all others in the area must wear eye protection and a mask while using this product.
- Should the product function abnormally, cease operation immediately and contact your Authorized NSK Dealer.
- Push the Handpiece securely and fully onto the Handpiece Cord or Handpiece Hose when connecting.
- Do not autoclave the Handpiece Cord or the Handpiece Hose.
- Do not use high acid water or sterilizing solutions to wipe, immerse or clean the product.
- This product is not delivered in a sterile condition, except for the Nozzle Tip (option) and must be autoclaved prior to use. Refer to “9-2 Sterilization” for details.
- Perform regular function and maintenance checks.
- If the product is not used for a long period check it is functioning correctly before using on a patient.
- To avoid clinical downtime it is recommended that a spare be kept on hand in case of a breakdown during treatment.
- Always replace the fuse with the same specified rating.
- This product is rated Medical Electrical equipment. EMC (Electromagnetic compatibility) is described in the documentation included.
- Installation and use of this product requires special precautions regarding EMC according to the EMC information.
- Portable and mobile RF communications equipment can affect Medical Electrical equipment. Do not use RF equipment near the product.
- The use of ACCESSORIES such as handpieces and cables, other than those specified by the manufacturer, with the exception of handpieces and cables sold by the manufacturer of this product as replacement parts for internal components, may result in increased EMISSIONS or decreased IMMUNITY of this product.
- This product should not be used adjacent to, or stacked with, other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, this product should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

⚠ CAUTION

- The system may present a possibility of malfunction when used in the presence of an electromagnetic interference wave. Do not install the system in the vicinity of any device which emits magnetic waves. Turn off the Main Power Switch of the system as an ultrasonic oscillation device or an electrode knife is located close to the vicinity of use.
- For safety's sake, install the Control Unit in a place where the AC Power Cord can be easily removed. (It is possible to disconnect the control unit from the power source by removing the AC Power Cord.)

<Ultrasonic Mode>



- The temperature of the Tip surface may reach 65°C without using coolant water. To avoid this event, be sure to use coolant water.

<Powder Mode>

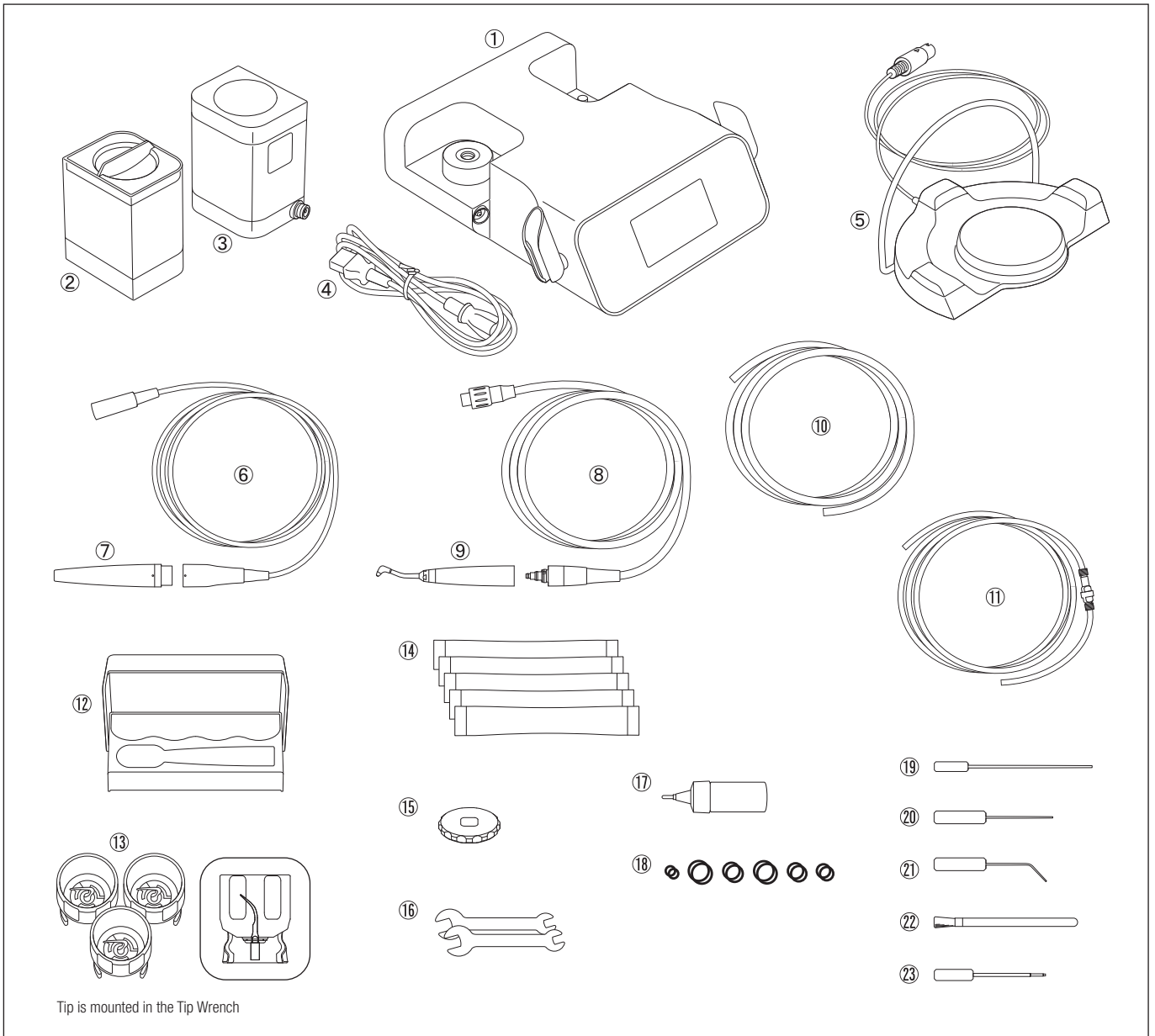


- Be very careful to ensure cleaning powder does not enter the patient's mucosal areas (eyes, nose, etc.) other than the oral cavity. Also, protect the face with a towel or protective glasses, etc., to prevent the cleaning powder from getting into the patient's eyes.
* If the patient wears contact lenses, have the patient wear safety glasses or remove his/her contact lenses before treatment.
- Before connecting the Handpiece Hose, Chamber and Handpiece, or the Chamber and Control Unit, be sure to blow off all water from the connections of the Hose and the Chamber with dry air. Failure to do so may result in moisture entering the air supply, causing solidification of the cleaning powder inside the product.
- Depending on the use environment, the temperature of the Powder Handpiece surface may reach 50°C.
- If too much cleaning powder is put into the Chamber, the proper amount of powder may not be sprayed at the start of use.
- Powder scatters easily because it is very fine. Fill the Chamber slowly and be sure to prevent the powder from scattering.
- Powder stored for a long time in opened packaging may become moist and clog. Always use new, dry powder. When using bottled powder (option), securely fasten the bottle lid after use.
- Apply Vaseline, etc., to the patient's lips to prevent drying or chapping at the corners of the mouth.

NOTICE

- No special training is required for this device.
- Repeated autoclaving may cause the Ultrasonic Handpiece to become discolored due to heat. However, this is due to properties of the product and is not a problem in terms of quality.
- To prevent powder from clogging the pipes, perform the periodical cleaning and maintenance of the vacuum hose, saliva ejector, and separator.

3 Accessory List




| No. | Part Name | Quantity | No. | Part Name | Quantity |
|-----|-----------------------------------|----------|-----|---|----------|
| 1 | Control Unit | 1 | 14 | FLASH pearl | 5 |
| 2 | Irrigation Bottle | 1 | 15 | Ring Wrench | 1 |
| 3 | Chamber (For Prophy use) | 1 | 16 | Spanner Wrench (5×8) | 2 |
| 4 | AC Power Cord | 1 | 17 | Turbine Oil | 1 |
| 5 | Foot Control | 1 | 18 | Spare O-Ring | 6 types |
| 6 | Handpiece Cord | 1 | 19 | Cleaning Wire (L) | 1 |
| 7 | Ultrasonic Handpiece | 1 | 20 | Cleaning Wire (S) | 1 |
| 8 | Handpiece Hose (For Prophy use) | 1 | 21 | Cleaning File | 1 |
| 9 | Powder Handpiece (For Prophy use) | 1 | 22 | Cleaning Brush | 1 |
| 10 | Air Hose | 1 | 23 | Unlocking tool | 1 |
| 11 | Water Filter Set | 1 | 24 | Operation Manual (This manual)* | 1 |
| 12 | Sterilization case | 1 | 25 | Tip-Power Guide* | 1 |
| 13 | Tip and Tip Wrench | 3 | 26 | Tip Card* | 1 |
| | | | 27 | Varios Combi Pro Quick Operation Guide* | 1 |

* Not shown in the illustrations above


NOTICE

- FLASH pearl and Perio-Mate powder (option) used in Powder Mode are referred to as “Powder” in this Operation Manual unless otherwise specified.
- Optional Perio Kit need to be purchased separately in order to use Perio Mode. Refer to “20 Option Parts List” for details of Perio Kit.

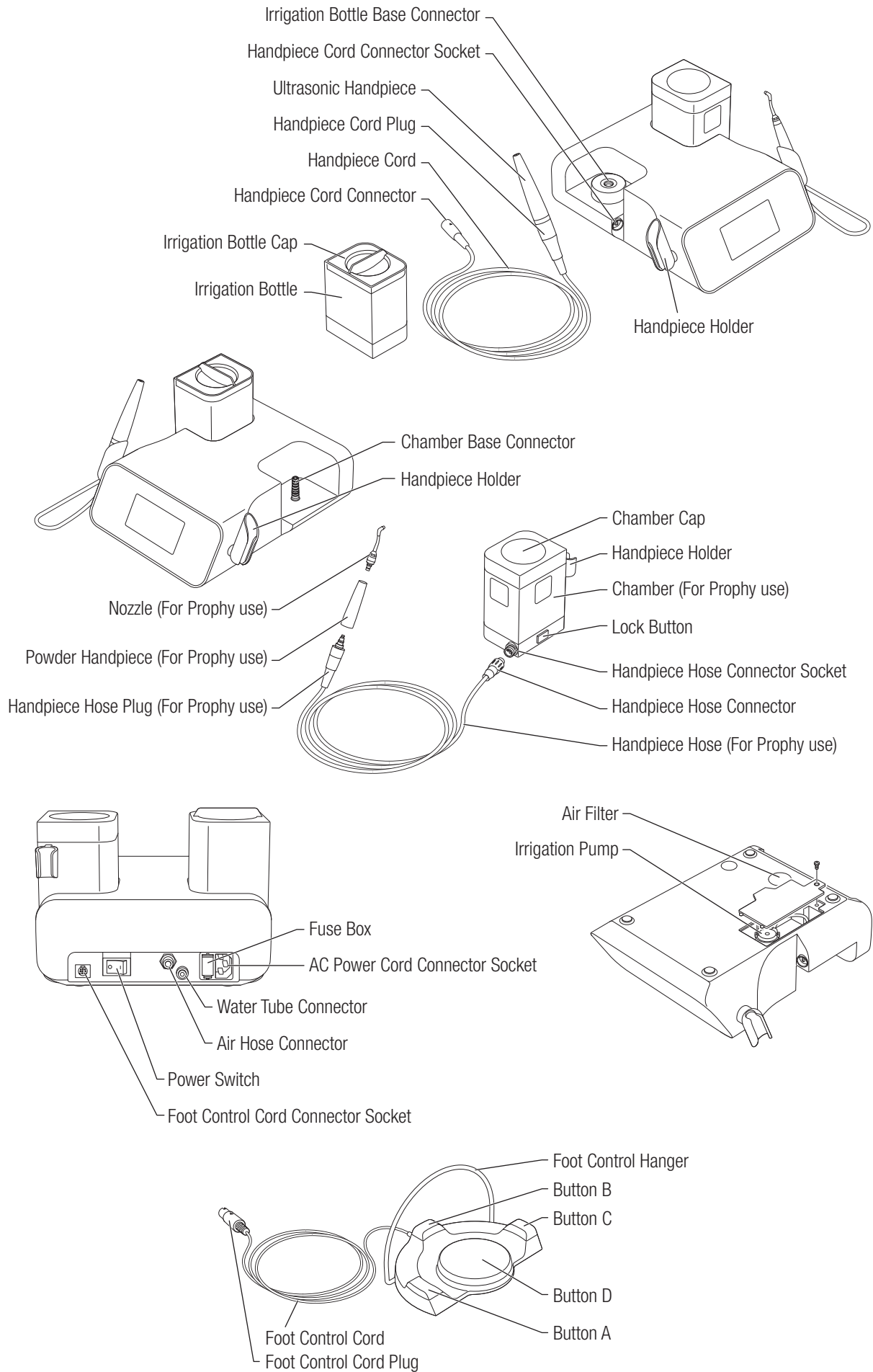4 Names of Components




4-1 Operation Panel

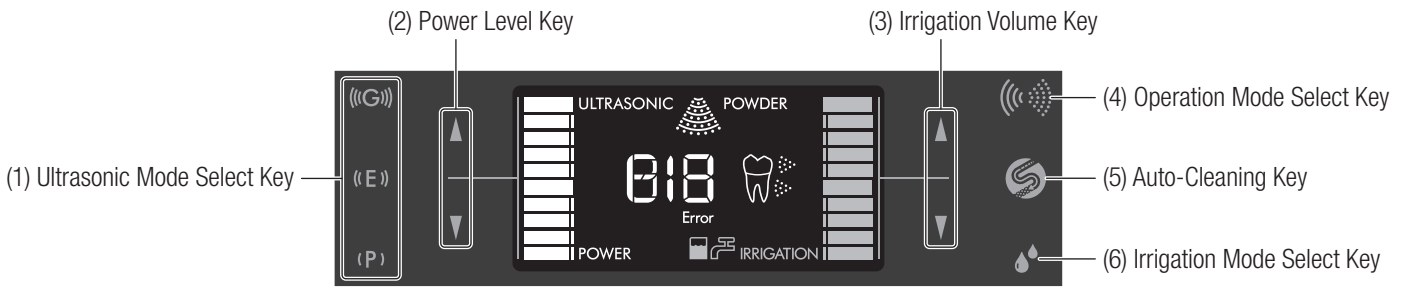


- | | |
|---|---|
| <p>(1) Ultrasonic Mode Select Key Switches the Ultrasonic Mode between P (Perio), E (Endo), G (General). The strongest power level is G, followed by E and P. Power Level, Irrigation Level, and Irrigation Mode can be set for each mode.</p> <p>(2) Power Level Key Sets the power level using the ▲/▼ keys.</p> <p>(3) Irrigation Volume Key Sets the irrigation volume using the ▲/▼ keys.</p> <p>(4) Operation Mode Select Key Switches between “Ultrasonic Mode” and “Powder Mode.”</p> | <p>(5) Auto-Cleaning Key Starts Auto-Cleaning. Refer to “9-1-1-2 Auto-cleaning” (Ultrasonic Handpiece) or “9-1-4-2 Auto-cleaning” (Powder Handpiece) for details. Ultrasonic Mode: Sprays tap water for 15 seconds, then sprays water from the Irrigation Bottle for 30 seconds to clean the Ultrasonic Handpiece. Powder Mode: Sprays air and water at the same time for 10 seconds and then sprays only air for 35 seconds.</p> <p>(6) Irrigation Mode Select Key Switches the Irrigation Mode (Bottle or tap water) for Ultrasonic Mode. Tap water is always used for Powder Mode.</p> |
|---|---|

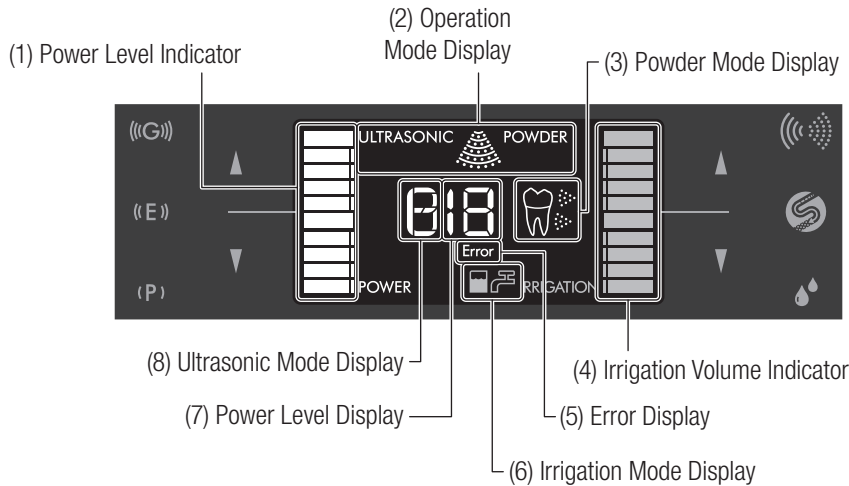4-2 LCD Panel



- | | |
|--|---|
| <p>(1) Power Level Indicator Displays the current power on the Bar Graph Indicator.</p> <p>(2) Operation Mode Display Displays the current Operation Mode (Ultrasonic or Powder).</p> <p>(3) Powder Mode Display Displays the set Chamber (Prophy or Perio) (only when Powder Mode is in use).</p> <p>(4) Irrigation Volume Indicator Displays the selected Irrigation Level on the Bar Graph Indicator.</p> | <p>(5) Error Display Displayed when an error occurs. Refer to “13 Error Code” for details.</p> <p>(6) Irrigation Mode Display Displays the Irrigation Mode (Bottle or tap water) for Ultrasonic Mode. Tap water is always used for Powder Mode.</p> <p>(7) Power Level Display Displays the current Power Level as a number.</p> <p>(8) Ultrasonic Mode Display Displays the current Ultrasonic Mode (P/E/G).</p> |
|--|---|

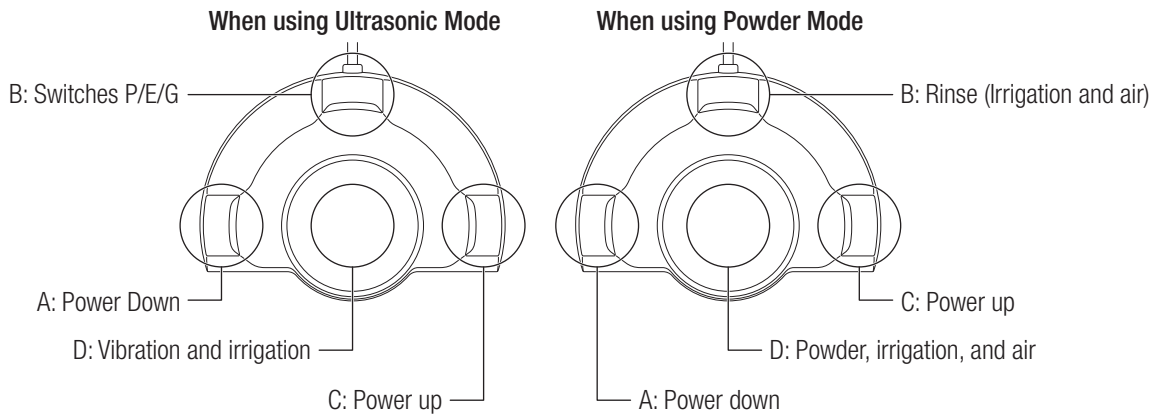4-3 Foot Control



Ultrasonic Mode

- A: Power Down
Reduces the power level.
- B: Switches P/E/G (Ultrasonic Mode)
Toggles Ultrasonic Mode in the order of P (Perio) → E (Endo) → G (General) → P (Perio)... every time the button is depressed.
- C: Power up
Increases the power level.
- D: Vibration and irrigation
Vibrates and irrigates while the button is depressed.

Powder Mode

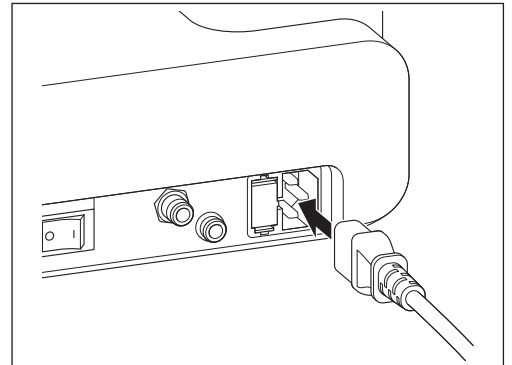
- A: Power Down
Reduces the power level.
- B: Rinse (Irrigation and air)
Sprays water and air while the button is depressed.
- C: Power up
Increases the power level.
- D: Powder, irrigation, and air
Sprays powder, water, and air while the button is depressed.

5 Installation

5-1 Connecting the AC power cord


- 1) Turn the Power Switch to OFF before connecting the AC power cord.
- 2) Insert the AC Power Cord so that it correctly fits into the AC Power Cord Connector Socket at the back of the Control Unit.
- 3) Plug the AC power cord into a wall outlet specified for medical use.

- CAUTION**
- Do not tug the AC power cord by holding and pulling its cord.
 - Make sure that the device has completely stopped before removing or inserting the AC power cord.




5-2 Connecting the Air Hose

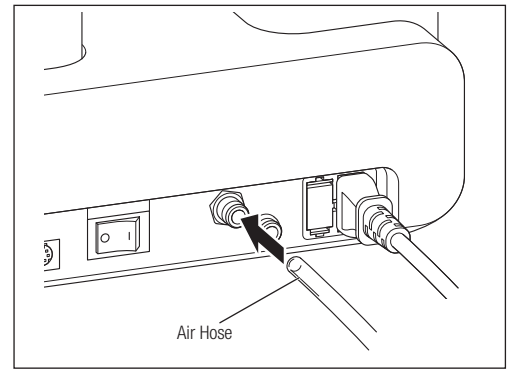1) Insert one end of the Air Hose deep into the Air Hose Connector.



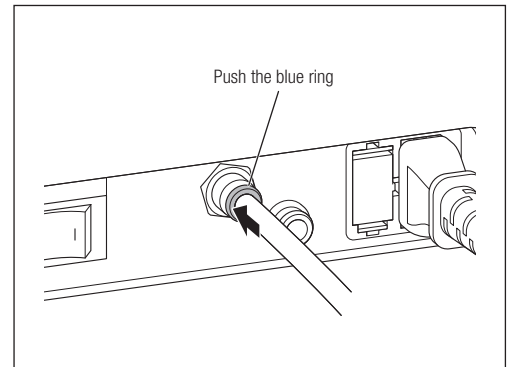
- 2) Pull the Air Hose gently and check that the Hose does not come out.
 3) To remove the Air Hose, pull the Air Hose out while pushing the blue ring toward the Control Unit.




CAUTION • Use clean dry air. Powder may clog if the air contains moisture or oil.

5-3 Connecting the Foot Control

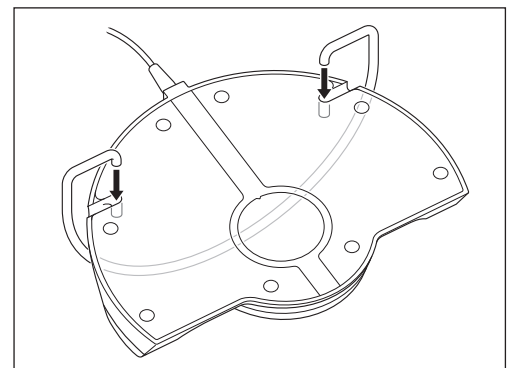1) Insert the Foot Control Hanger so that it fits correctly into the holes at the rear of the Foot Control.



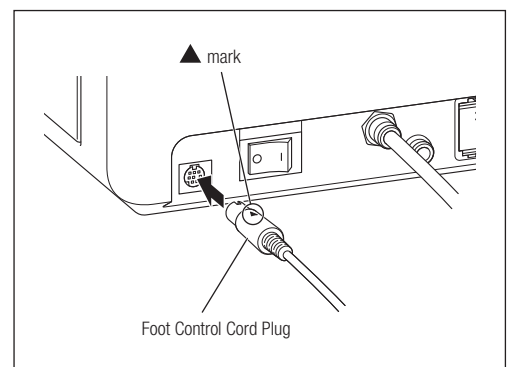
2) Insert the Foot Control Plug into the Foot Control Cord Connector Socket with the ▲ mark facing upwards.



5-4 Connecting the Handpiece Cord (Ultrasonic Handpiece)


Connect the Handpiece Cord Connector to the Handpiece Cord Connector Socket with the ▲ mark facing upwards. Push it in all the way.

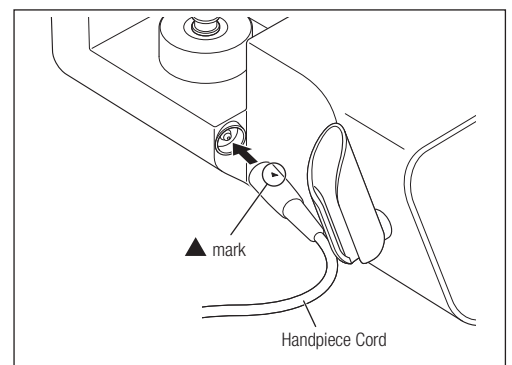CAUTION • Check that the Handpiece Cord Plug is clean and dry before connection.



5-5 Connecting the Handpiece Hose (Powder Handpiece)

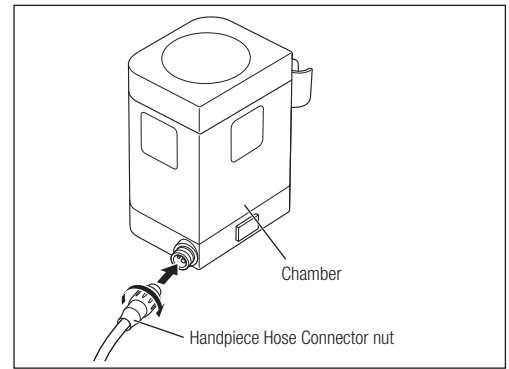- 1) Use air to dry the Handpiece Hose Connector Socket and Handpiece Hose Connector.
- 2) Insert the Handpiece Hose Connector so that it fits correctly into the hole on the Handpiece Hose Connector Socket and fasten the Connector nut.




5-6 Connecting and disconnecting the Handpiece

CAUTION • Be sure to only use the supplied Handpiece.

ULTRASONIC

5-6-1 Ultrasonic Handpiece

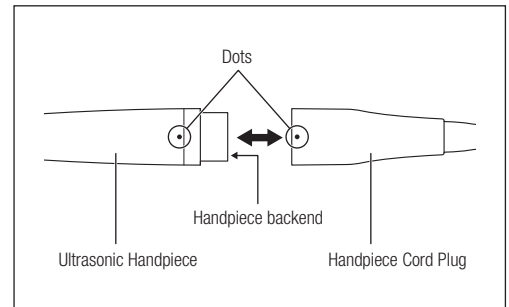- (1) Connection
Align the dots on the Ultrasonic Handpiece and the Handpiece Cord Plug. Push the Handpiece straight into the connector.
- (2) Disconnection
Hold the Ultrasonic Handpiece and the Handpiece Cord Plug and pull the Handpiece out.




WARNING • To avoid an electric shock, do not touch the electrical contacts of the handpiece backend and the handpiece cord.

CAUTION • Do not twist the Handpiece or Handpiece Cord when removing the Handpiece. Doing so may damage the Connector electrical contacts, resulting in malfunction.
• Before connecting the handpiece cord to the handpiece, face the handpiece connector side so light shines into it and check the end of the handpiece. If the light transmitted by the Optic Fiber End Face at the end is uniformly bright, it is functioning normally. If part or all is dark, the Optic Fiber End Face may be cracked or broken.


5-6-2 Powder Handpiece

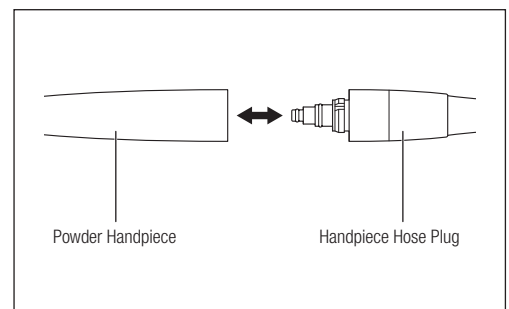- (1) Connection
 - 1) Use air to dry the connection between the Handpiece and Handpiece Hose Plug.
 - 2) Push the Powder Handpiece straight into the Handpiece Hose Plug.
- (2) Disconnection
Hold the Powder Handpiece and the Handpiece Hose Plug, and pull the Handpiece out.




5-7 Connecting the Water Tube

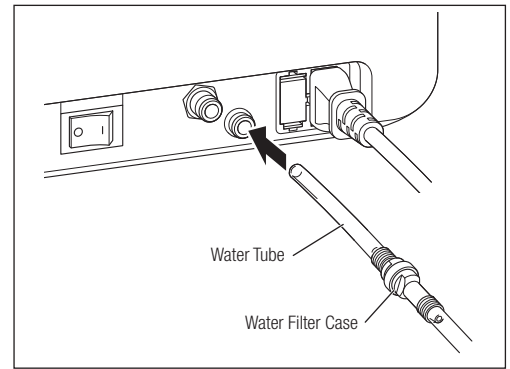- 1) Insert one end of the Water Tube (the end with the water filter) deep into the Water Tube Connector.
- 2) Connect the other end of the Water Tube to the water outlet on the dental unit.
- 3) Pull the Water Tube gently and check that the Tube does not come out.



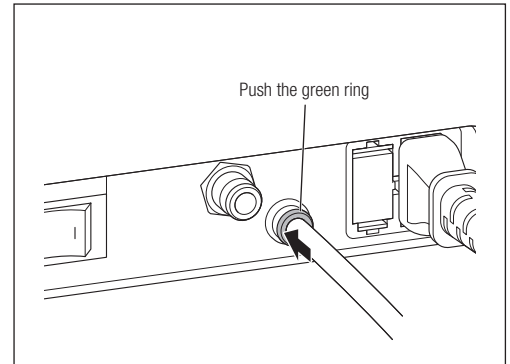- 4) To remove the Water Tube from the Water Tube Connector, pull the Water Tube out while pushing the green ring toward the Control Unit.



WARNING

- Use a water softener, etc. to lower the hardness of the water, because using water with a high degree of hardness may cause mineral or limescale deposits in the water circuit, which can lead to problems such as insufficient water levels, operation problems, or breakdown. When doing so, use a Water Tube with a Water Filter to prevent device breakdown due to the foreign material in tap water, and refer to "10-3 Changing the Water Filter" to replace the Water Filter as required.

CAUTION

- If the water outlet on the dental unit has not been used for a long time, water may contain rust, etc. when it is run for the first time. Make sure that the water is clear before connecting the Water Tube.
- Insert the Water Tube firmly into the Water Tube Connector when connecting it to the Control Unit. Water may leak if the Tube is not inserted correctly.

6 Check before treatment

Before use, operate the product without a patient present to confirm there is no abnormal vibration, noise, heat, etc. Also check the following points.

- Ultrasonic Handpiece: LED lights and water flows.
- Powder Handpiece: Powder, air and water are supplied correctly.

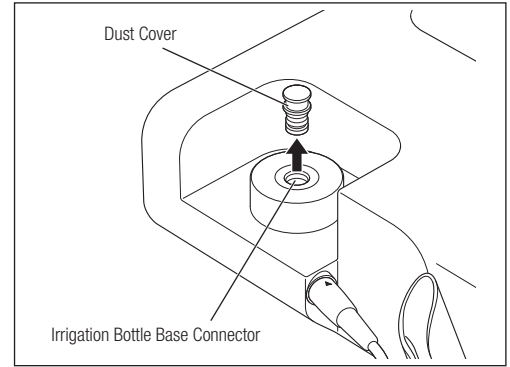
If you notice anything unusual when checking or operating this product, stop using it immediately and contact your authorized NSK dealer. When you perform Auto-Cleaning, the water inside the Handpiece Cord/Hose is ejected, which may make stop water from flowing when using the Control Unit the next time. If that happens, set the Irrigation Volume to 10, and operate the Handpiece for about 30 seconds after water starts to come out. Refer to "14 Troubleshooting" if water does not start to come out after more than 20 seconds, even if you set the Irrigation Volume to 10.

7 Using the Ultrasonic Mode


7-1 Water System Setup

Using the Bottle

- 1) Remove the Dust Cover from the Irrigation Bottle Base Connector.
- 2) Remove the Irrigation Bottle Cap and fill the Bottle water or disinfectant solution to the desired level.



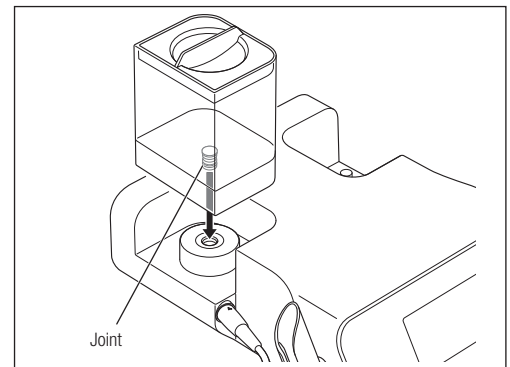- 3) Close the Irrigation Bottle Cap securely and insert the Bottle Joint straight into the Irrigation Bottle Base Connector. Pull the Irrigation Bottle straight up to remove it.



CAUTION

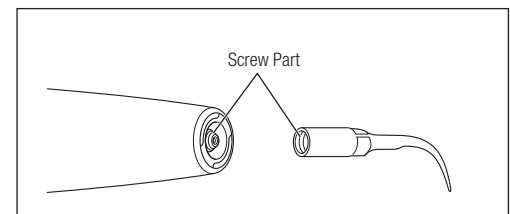
- Only use the dedicated Varios Combi Pro series bottle.
- Insert the Irrigation Bottle straight. Failure to do so may damage the O-ring.
- Clean the Irrigation Bottle and the Irrigation Bottle Cap with clean water after use and before storage.
- Attach the Dust Cover to the Irrigation Bottle Base Connector when the Irrigation Bottle is not mounted.
- Ensure the liquid temperature is below 35°C.
- Do not put strong acids (such as highly acidic water, superacid water, or electrolysis water) or hypochlorous acid water in the Irrigation Bottle as they may cause water clogging or metal corrosion.

Using Tap Water


- 1) Make sure that the Water Tube is firmly connected to the Water Tube Connector of the Control Unit. Refer to “5-7 Connecting the Water Tube” for details.
- 2) Open the water valve of the dental unit and set the water pressure between 0.1 - 0.3MPa (1.0 - 3.0kgf/cm²). If the water pressure exceeds 0.3MPa, use a Water Pressure Reducing Valve (option) to adjust the water pressure to within the specified range. Refer to “20 Option Parts List” for details about the water pressure reducing valve.

7-2 Mounting the Tip


- 1) Check that the screw parts of the Handpiece and Tip are clean.



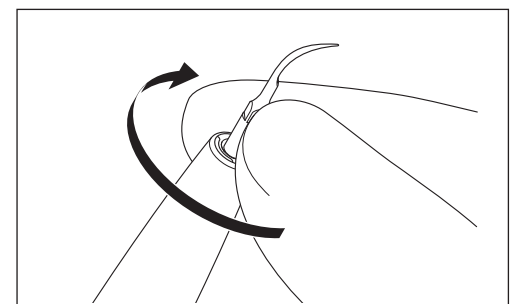- 2) Push the Tip into the distal end of the Handpiece and screw the Tip until it is lightly tightened.




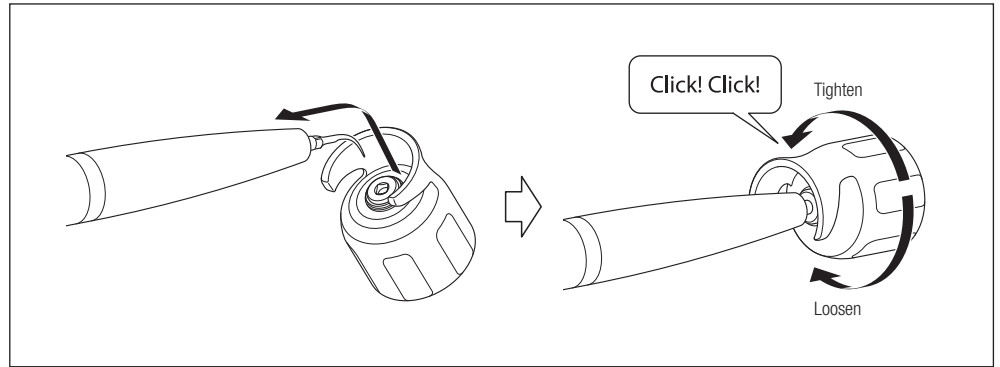- 3) Match the square shape of the Tip with the hole of the Tip Wrench, then insert the Tip into the hole. Rotate the Wrench until it makes a click sound and cannot rotate any further. During this procedure, hold the Handpiece so that the Handpiece Cord does not become twisted. When removing the Tip, rotate the Wrench in the direction of the "Loosen" arrow.



WARNING

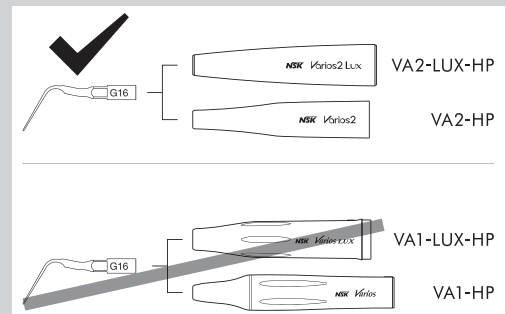- Do not allow contact with gingival, mucosa and/or skin. Doing so may result in injury or burns.
- USE ONLY NSK genuine tips when using this product. Problems including Handpiece damage, failure and accidents resulting from the use of non-NSK tips are not covered in the warranty. The following types of issues may occur when using Non-NSK Tips:
 - Inappropriate vibration caused by incompatible screws.
 - Accidental ingestion of broken tips by the patient.
 - Damage or premature wear of the Handpiece screw
- Do not connect the supplied G16 Tip to a handpiece other than a Varios2 handpiece (VA2-LUX-HP / VA2-HP). Doing so may cause fracturing of the Tip or scratches on the surface of the dentition, prosthesis, etc. due to an increase in vibration amplitude.



CAUTION

- Be careful not to twist the Handpiece Cord when tightening the Tip.
- Be careful when attaching or removing a Tip that is longer than the Tip Wrench, as there is a risk of injury from the point of the Tip.
- Do not use a Tip which has been damaged, bent or corroded as it may break during use.
- To avoid damaging the Tip thread or disengagement of the Tip, always make sure that the Tip is inserted at the correct angle and firmly tightened.
- If debris is found on the Tip thread, clean the Tip immediately. Failure to do so may result in noise or insufficient vibration.
- Do not attempt to sharpen or bend the Tip as doing so may result in the Tip breaking during use, noise or insufficient vibration.
- The Tip is a wear item. Worn Tips have an increased risk of noise, breakage or insufficient vibration. Replace the Tip if noise or insufficient vibration occurs.
- Use the supplied Tip Wrench to mount the Tip. Rotate the Wrench until it makes a click sound and cannot rotate any further. If the Tip is not tightened sufficiently, insufficient vibration or noise may occur.
- When mounting a Tip, always wear sterile surgical gloves and use a sterilized Tip, Handpiece and Tip Wrench.
- Ensure that the power setting does not exceed the recommended Power Level. Failure to do so may result in noise, tip breakage or injury to the patient.
- Do not use Tips that are not designed for removing metal or prosthetic crowns for this purpose. Doing so may result in the tip breaking and falling into the patient's mouth.
- Remove the Tip before attaching or removing the Handpiece or the Handpiece Cord to avoid to avoid injury with the Tip.
- If insufficient vibration is observed during operation, remove the Handpiece from the patient's mouth, and depress the Foot Control again. If this does not improve the condition, the Tip may have loosened during use. Check that the Tip is securely mounted.
- If the Tip becomes loose, makes noise, or does not vibrate sufficiently even though it has been tightened until it makes a click sound, the Tip Wrench may be worn out. The Tip Wrench is a wear item and should be replaced once a year.

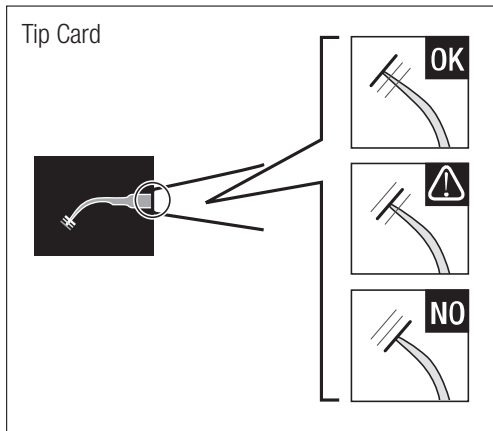
■ Using the Tip Card



- Tips are wear items. Use the supplied Tip Card to check the Tip condition and replace the Tip if necessary.

CAUTION

Place the neck of the Tip in the cut out of the Tip Card. Measure the length of the Tip and check the replacement timing. To guarantee safe and effective use, it is recommended that Tips be replaced with the Tip meets the yellow line (1mm of wear).



Green: No wear - Tip is OK
Tip replacement is not necessary.

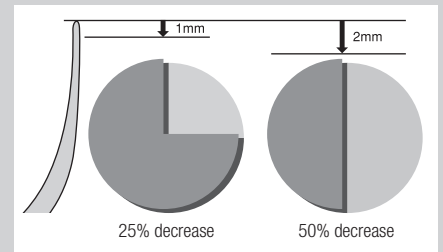
Yellow: Wear of 1mm - Tip is showing some wear
Tip replacement is recommended.

Red: Wear of 2mm - Tip is badly worn
Tip must be replaced.




CAUTION

- Tips are consumables. The efficiency of dental scaling decreases approximately 25% when the top of the Tip wears 1mm and approximately 50% when it wears 2mm. In addition, the vibration condition changes owing to the wear, which may damage a patient's tooth surface. Periodically check the Tip wear condition using the Tip Card, and replace the Tip with a new one in good time.




7-3 Power Level Setting

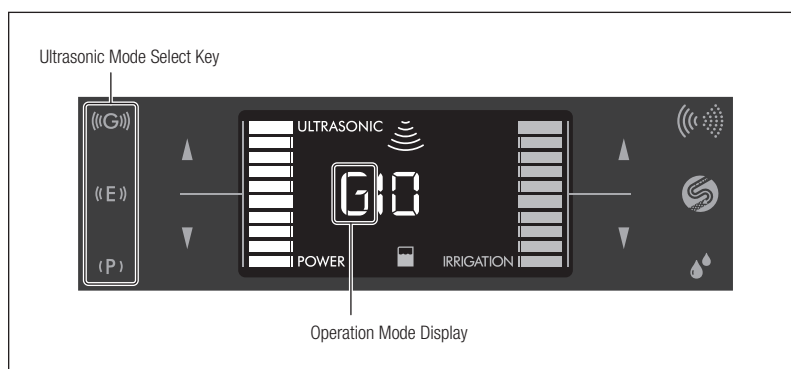- 1) Touch the Ultrasonic Mode Select Key to select the Mode. The selected Mode is displayed on the LCD Panel as P/E/G.



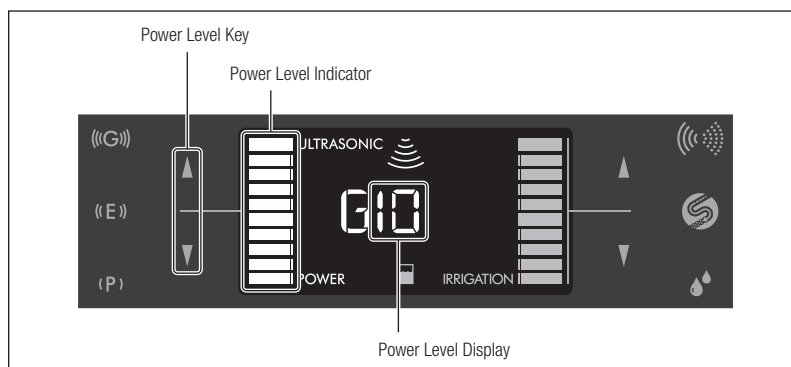- 2) Touch the Power Level Key (▲/▼) to set the Power Level. The Power Level Display and the Power Level Indicator increase or decrease in accordance with the selected level.



CAUTION

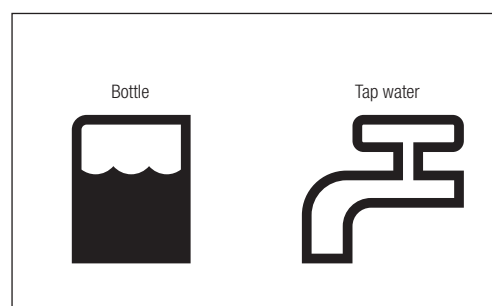
- Ensure the power setting does not exceed the recommended Power Level. (Refer to the supplied "Tip-Power Guide" or the "Tip case label" for the maximum power of each Tip.)

NOTICE

- Touch and hold the Power Level Key to increase or decrease the Power Level continuously. An alarm is heard when the maximum or minimum level is reached.
- To irrigate without vibrating the Tip, set the Power Level to "0 (zero)" and the Irrigation Volume to 1 bar or more.

7-4 Irrigation setting

Touch the Irrigation Mode Select Key to select the Irrigation Mode (Bottle or tap water). The selected Mode is displayed on the LCD Panel as an icon.



7-5 Operation

- 1) Depress the desired button on the Foot Control. A "beep" sound is heard, the Tip starts vibrating and the LED on the Handpiece lights up.
- 2) Adjust the Irrigation Volume by touching the Irrigation Volume Keys (▲/▼) while checking the irrigation from the Tip.

CAUTION

- As a safety feature, this product does not operate when the power switch is turned on while the Foot Control is depressed. In this case, an alarm sound is heard and the Ultrasonic Mode Display (P/E/G) and "ULTRASONIC" blinks alternately. Release the Foot Control and depress it again.
- Always use irrigation. If there is insufficient irrigation the Handpiece will overheat and may injure the surface of the patient's tooth.
- Check that clean water is spraying adequately before use.
- Water may not spray smoothly if the Irrigation Volume is set to a low level. In this case, temporarily increase the Irrigation Volume temporarily and depress the Foot Control. Check that water is spraying smoothly from the Tip and adjust the Irrigation Volume again.
- Do not forcibly rotate the Handpiece Holder as doing so may damage the Holder.

- NOTICE**
- The LED of the Handpiece stays lit for about 5 seconds after the Foot Control is released (Afterglow function).
 - Ultrasonic Mode (P/E/G), Power Level, Irrigation Mode settings and Irrigation Volume are stored after the power is turned off and the same settings are applied when the power is turned on next time (Last Memory function).
 - If the Irrigation Volume is too low with the Irrigation Volume set to 10 or the Irrigation Volume is too high with the Irrigation Volume set to 1 while the Irrigation Mode is set to tap water, adjust the basic Irrigation Level. Refer to “11-3 Basic Water Level Setting” for details.
 - A buzzing sound may be emitted, but this does not indicate a malfunction.

■ During the Handpiece operation :

You can: Adjust the Power Level and Irrigation Volume

You cannot: Change the Ultrasonic Mode or Irrigation Mode settings and perform Auto-Cleaning

7-6 After treatment

Perform maintenance after use on each patient. Refer to “9 Post-use Maintenance” for details.



- This product may malfunction if correct maintenance is not performed.

CAUTION

7-7 Protection Circuit

This product may overheat internally if the control unit is used at power 8 or higher in G mode for an extended amount of time. In this case, the Protection Circuit reduces the Power automatically (Power 7). Bar Graph Indicator flashes from 8 to 10. The indicator stops flashing when the protection circuit is released. However, in this case the Power Level does not increase automatically. Increase the Power Level manually if required.



- NOTICE**
- The Power Level cannot be increased to 8 or higher when the protection circuit has operated (while the bar graph indicator is flashing).
 - The Bar Graph Indicator stops flashing when the Power Level is reduced below 7. It starts flashing again if the Power Level is increased to 7 while the Protection Circuit function is active.



8 Using the Powder Mode

The optional Perio Kit must be purchased in order to use the Perio Mode. Refer to “20 Option Parts List” for details about the Perio Kit.

8-1 Water System Setup

- 1) Make sure that the Water Tube is firmly connected to the Water Tube Connector of the Control Unit. Refer to “5-7 Connecting the Water Tube” for details.
- 2) Open the water valve of the dental unit and set the water pressure between 0.1 - 0.3MPa (1.0 - 3.0kgf/cm²). If the water pressure exceeds 0.3MPa, use a Water Pressure Reducing Valve (option) to adjust the water pressure to within the specified range. Refer to “20 Option Parts List” for details about the water pressure reducing valve.




- Only use drinkable water for irrigation.

CAUTION



8-2 Powder Preparation

- 1) Select the Chamber and powder to be used with this Mode. Fill the Chamber with powder up to the "MAX" line (approximately 80g of FLASH pearl or approximately 50g of Perio-Mate powder).

| Mode | Chamber | Powder |
|-------------|----------------|-------------------|
| Prophy Mode | For Prophy use | FLASH pearl |
| Perio Mode | For Perio use | Perio-Mate powder |

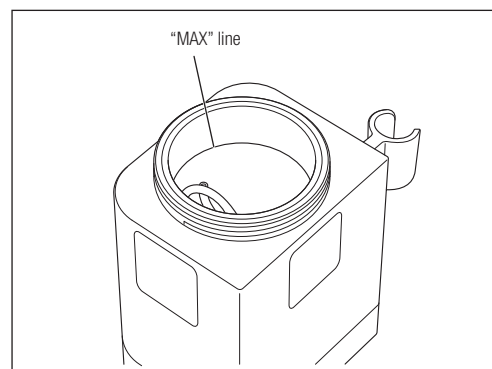

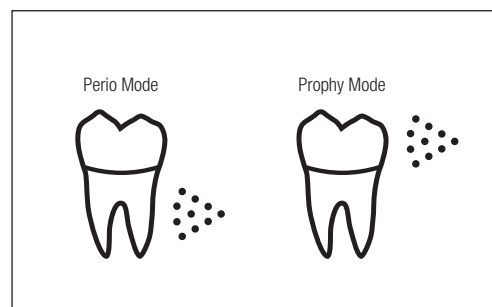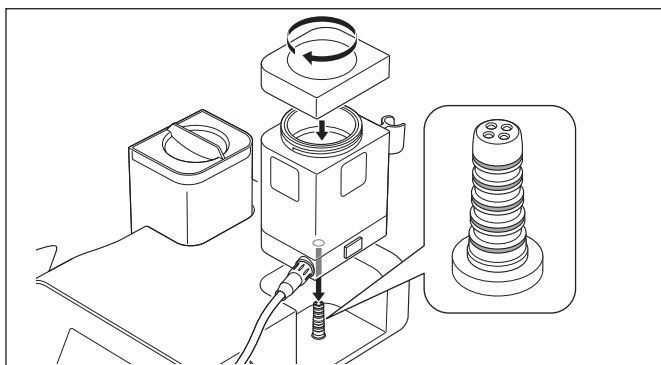- 2) Close the Chamber Cap securely until it fits the Chamber completely and insert the Chamber straight to the Control Unit. The type of inserted Chamber is displayed on the LCD Panel as one of the following icons.



WARNING

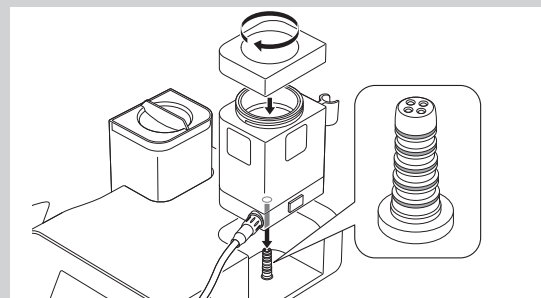
- Use the designated powder only. Using other powders may lead to product failure, damage to the tooth or may cause emphysema. In addition, it may also cause performance reduction of the product. We cannot accept any liability for failures caused by using other powders.

CAUTION

- Securely attach the Chamber Cap to prevent the Chamber Cap from being blown off, which may lead to an injury.



- Before inserting the Chamber into Control Unit, make sure the O-Rings of the Chamber Base Connector are not damaged or torn. Damaged or torn O-Rings could lead to poor operation or malfunction.




- Insert the Chamber into the Control Unit straight. Inserting at an angle could damage the O-Rings, leading to malfunction.
- If too much cleaning powder is put into the Chamber, the correct amount of powder may not be sprayed immediately after starting use.
- Do not use powder that has been stored in an open package or leftover powder. Using such powder may cause clogging of the Nozzle. Do not mix leftover powder with new powder.
- Before inserting the Chamber, check the Chamber Base Connector for water, etc., and wipe it clean if it is wet. Failing to do so may cause powder clogging.
- Do not use discolored powder.
- Always securely close the powder container lid. Failure to do so will attract moisture which may cause clogging.
- If powder adheres to the Chamber and/or the Chamber Cap, clean it immediately or the Cap will become difficult to close.
- Do not invert the Chamber while it contains powder inside. Inverting the Chamber could lead to powder clogging.
- As a safety feature, this product does not operate if the Foot Control is depressed when the Chamber is mounted incorrectly. An alarm sounds heard and the tooth icon and "POWDER" flash alternately. Mount the Chamber correctly.
- The Perio-Mate Powder (option) scatters easily because it is made of very fine particles. Fill the Chamber slowly to prevent the powder from scattering, and be careful not to swallow the powder or allow it to get into eyes.
- FLASH pearl is almost insoluble in water. To avoid clogging of the pipes by using FLASH pearl, periodical cleaning and maintenance of the vacuum hose, saliva ejector and separator are necessary.

8-3 Attaching/removing the Nozzle Tip

8-3-1 Attaching the Nozzle Tip

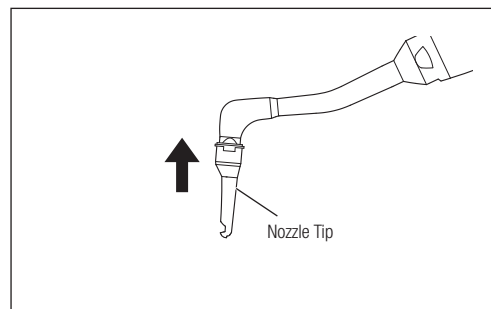Attach the Nozzle Tip (option) securely and firmly to the Nozzle of the Powder Handpiece (for Perio use).




WARNING

- Do not use a deformed or damaged Nozzle Tip. It may detach during use.


CAUTION

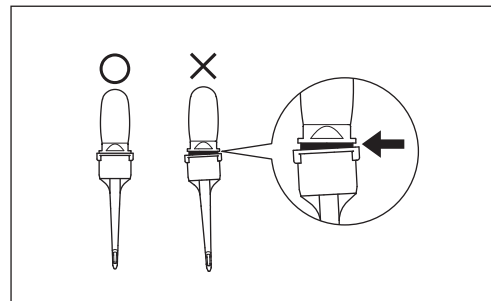- Be sure to attach the Nozzle Tip securely and firmly as illustrated. If the Tip is attached incorrectly, it will fall off and may be accidentally ingested by the patient.
- When attaching a Nozzle Tip to the Powder Handpiece, always wear sterile surgical gloves and make sure that the Powder Handpiece is sterilized.



8-3-2 Removing the Nozzle Tip

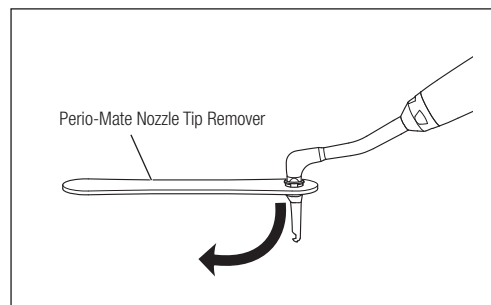Use the Perio-Mate Nozzle Tip Remover (option) to remove the Nozzle Tip and dispose of the Nozzle Tip when removed.




WARNING

- The Nozzle Tip can only be used once. Do not reuse or sterilize the Nozzle Tip as it may be damaged or contaminated. If the Nozzle Tip is reused, it may not operate correctly due to deformation during removal, or it may detach during use resulting in accidental ingestion by the patient. The same applies to a Tip that has been accidentally removed.

8-4 Power Level Setting

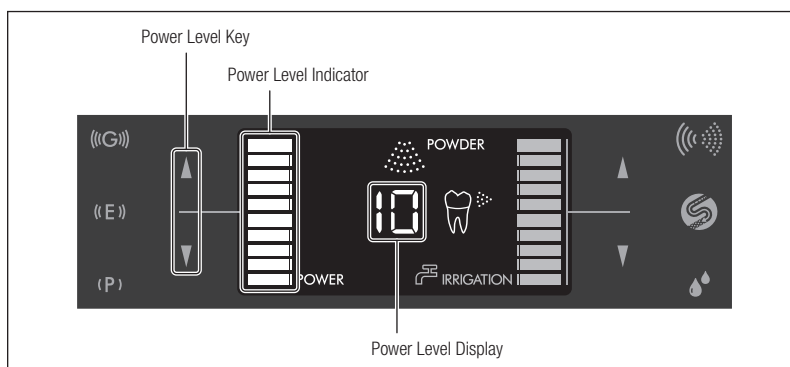Touch the Power Level Keys (▲/▼) to set the Power Level. The Power Level Display and the Power Level Indicator increase or decrease in accordance with the selected Power Level.



NOTICE

- If you specify this setting without attaching the Chamber, the Power Level when using the Prophy mode is set.

8-5 Irrigation setting


- 1) Touch the Irrigation Volume Keys (▲/▼) to adjust the Irrigation Volume.
- 2) Depress the Foot Control to spray powder into a spittoon, etc., to confirm that powder, air and water are appropriately sprayed.
- 3) Adjust the Irrigation Volume while checking the irrigation from the Nozzle.


NOTICE

- If the Irrigation Volume is too low with the Irrigation Volume set to 10 or the Irrigation Volume is too high with the Irrigation Volume set to 1, adjust the basic Irrigation Level. Refer to "11-3 Basic Water Level Setting" for details.
- If you perform adjustment without attaching the Chamber, the Irrigation Volume when using the Prophy mode is set.

8-6 Operation

Powder, water, and air are supplied when the Foot Control button D is depressed. Water and air are supplied when the Foot Control button B is depressed. Observe the operating instructions explained in “8-6-1 Using Prophy Mode” and “8-6-2 Using Perio Mode.”

- WARNING** 
- Never spray powder toward a human body including the operator and the assistant other than to the tooth surface.
 - Stop use immediately if the hose swells or air or powder leaks from connections between the Chamber and Hose during use.
 - Spray water while using this product.
 - Be sure to use a vacuum tube (and a saliva discharge tube together if necessary) to prevent the patient from ingesting a large amount of powder. Avoid continuous use over long periods and allow the patient to rinse out the mouth whenever necessary.

- CAUTION** 
- As a safety feature, this product will not switch on when the Power Switch is turned to ON while the Foot Control is depressed. An alarm sound is heard and the tooth icon and “POWDER” flash alternately. Release the Foot Control then depress it again.
 - Before treatment, adjust the Power Level and the Irrigation Level before using on the patient.
 - Reduce the Power Level when treating around marginal gingiva.
 - Do not spray vertically onto the tooth surface.
 - Maintain the distance between the tip of the Nozzle of the Handpiece to the tooth surface as explained in “8-6-1 Using Prophy Mode” and “8-6-2 Using Perio Mode.”
 - Do not rotate the Handpiece Holder forcibly as it may damage the Holder.

- NOTICE** • A buzzing sound may be emitted, but this does not indicate a malfunction.

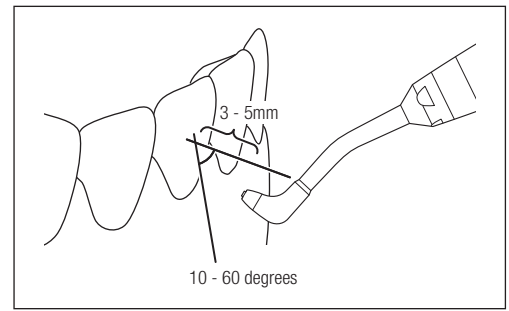


8-6-1 Using Prophy Mode

Keep the Nozzle at a distance of 3 - 5mm from the tooth surface and at an angle of 10 - 60 degrees.

- WARNING** 
- Never point toward soft tissue, gum, or the subgingival area.

- CAUTION** 
- Spray from the root to the incisal edge of the tooth.





8-6-2 Using Perio Mode

■ Using with the Nozzle Tip

Insert the Nozzle Tip deeper than 3mm into the periodontal pocket. Powder may not be sprayed efficiently into the periodontal pocket if the depth is less than 3mm.

■ Using without the Nozzle Tip

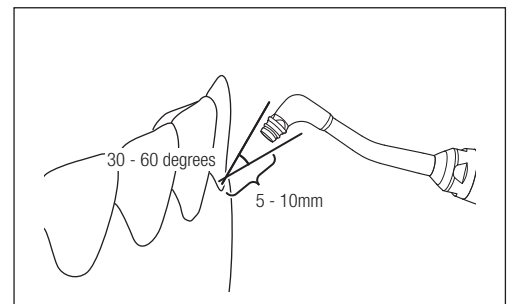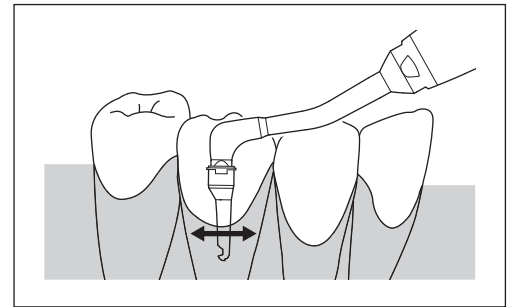Remove the Nozzle Tip from the Nozzle of the Handpiece to remove plaque at the supragingival area and gingival margin, or to remove biofilm and light stains. Keep the Nozzle at a distance of 5 - 10mm from the tooth surface and at an angle of 30 - 60 degrees. Never point the Nozzle directly toward the oral mucous membrane or in periodontal pockets.



**WARNING**

- When using without the Nozzle Tip, never point toward the oral mucous membrane.
- Do not use this product in an area immediately after scaling the tooth surface in a periodontal pocket. Doing so may cause bacteremia.
- Do not insert the Nozzle Tip more than once into the same periodontal pocket during the same treatment.
- Powder may be sprayed for a maximum of 5 seconds in the same periodontal pocket (maximum 20 seconds for one tooth). Never spray powder for longer than the specified time.
- Do not force the Nozzle Tip into a periodontal pocket.
- Do not spray powder while the Nozzle Tip end is located at the bottom of a periodontal pocket. Doing so may cause emphysema.
- Do not use the Nozzle Tip in any places other than periodontal pockets.
- Setting the Power Level too high may cause emphysema. Adjust the Power Level to an adequate level while checking the patient's condition.

**CAUTION**

- The alarm sound is heard every 5 seconds when using Perio Mode.
- In Perio Mode, the Power Level is automatically reduced to a weaker level compared to the same setting for Prophy Mode.

8-6-3 During Handpiece operation

You can: Adjust the Power Level and Water Volume

You cannot: Change Irrigation Mode settings and perform Auto-Cleaning

8-6-4 Releasing residual pressure

The Chamber Cap cannot be opened after operation due to buildup of air pressure inside the Chamber increasing during operation.

Release the pressure remaining in the Chamber before putting powder in the Chamber or removing the Chamber from the Control Unit.

**CAUTION**

- The remaining powder and water comes out of the Handpiece while releasing the residual pressure. Prepare a container such as a cup to catch the powder and water.

- 1) Take the Powder Handpiece out of the Handpiece Holder.
- 2) Place the Handpiece into the container to catch powder and water.
- 3) Touch and hold the Auto-Cleaning Key for about 1 second. Beeps are heard and the residual pressure starts to be released.
- 4) The operation stops when all the residual pressure is released from the Chamber.

8-7 After treatment

Perform maintenance after use on each patient. Refer to "9 Post-use Maintenance" for details.

If the Nozzle Tip (option) is attached to the Nozzle, remove and dispose of it before maintenance.

**CAUTION**

- Failure to perform maintenance may result in malfunction.

NOTICE

- The Power Level and Irrigation Mode settings are stored after the power is turned off (Last Memory function).

9 Post-use Maintenance

Perform the following maintenance after use on each patient.

The following reprocessing instructions are created on the basis of the requirements of ISO 17664.

The effectiveness of the reprocessing through the following procedure has been verified.

Wear eye protection, protective mask, and gloves for safety and infection prevention.

WARNING

- To remove residues, conduct the following maintenance immediately (within 30 minutes) after the treatment. Omitting the maintenance may cause infection, premature failure, and thermal injury resulted from overheating.
- Always obey the local directives, standards, guidelines, etc., as to the cleaning, disinfection, and sterilization of the product.

CAUTION

- Use only the cleaning and disinfection agent products specified in this operation manual.
- Wear eye protection, protective mask, and gloves for safety and infection prevention before starting the maintenance.
- For reprocessing of Tips and the Tip Wrench, refer to the operation manual of the tips (refer to OM-Z0314E).
- For cleaning and disinfection, use disinfectant ethanol or disinfectant isopropanol that does not contain any additives (hereinafter referred to as disinfectant alcohol). Use of disinfectants other than disinfectant alcohol may cause discoloration or cracking.
- Use appropriate disinfectant alcohol according to the regulations and guidelines of each country.
- Do not use solvents such as electrolyzed-oxidizing water (strong acidic water or super acidic water), strong acidic or alkaline chemical, chlorine-containing solvent, benzene and thinner when cleaning, immersing, or wiping.
- After the thermo disinfection, take the product out of the washer-disinfector immediately (within an hour). Failure to do so causes corrosion.
- After the thermo disinfection, dry the product completely. Remaining moisture causes internal corrosion.
- Before the disinfection, be sure to clean the product to remove any residues. If blood remains in the product, it coagulates causing a malfunction of the product.
- Be sure to use the Tip Wrench to mount and remove tips.
- Do not use ultrasonic cleaning to clean Ultrasonic Handpieces.
- Use clean and dry compressed air for cleaning.

9-1 Cleaning and disinfection (each patient)

9-1-1 Ultrasonic Handpiece

CAUTION

- Be sure to perform the auto-cleaning (cleaning of the irrigation tube) after use. If the auto-cleaning is omitted, the irrigation tube may be clogged or metal parts may be rusted.
- Be sure to put distilled water or purified water without impurities into the Irrigation Bottle. The use of water containing impurities causes clogging of the irrigation tube or other problem.
- Make sure that the Ultrasonic Handpiece and Handpiece Cord are securely connected.
- After removing the Irrigation Bottle, dispose of the liquid in it immediately. If liquid remains in the Irrigation Bottle, the liquid may leak from the Irrigation Bottle through the joint section.

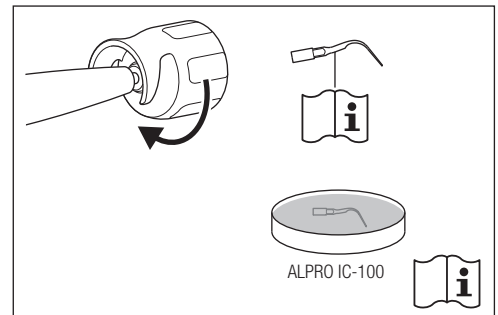
- NOTICE** • The Ultrasonic Handpiece LED does not turn on during auto-cleaning.

9-1-1-1 Removing tip


- 1) Remove the Tip from the Ultrasonic Handpiece.

Remove the Tip from the Tip Wrench.

For reprocessing of Tips and the Tip Wrench, refer to the operation manual that comes with the Tips (refer to OM-Z0314E).



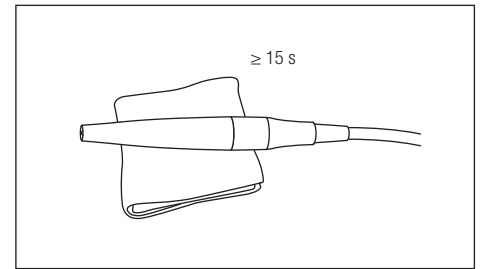- Wipe off dirt from the Ultrasonic Handpiece surface using a lint-free cloth dampened with water.




9-1-1-2 Auto-cleaning


CAUTION

- During auto-cleaning, water used for cleaning comes out of the tip of the Ultrasonic Handpiece. Prepare a container such as a cup to catch the water.

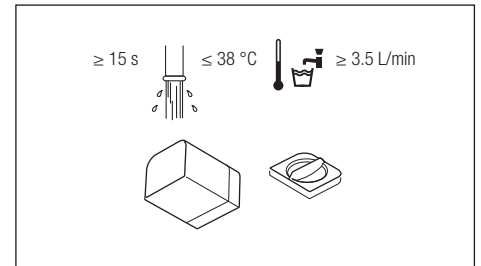
- Select the Irrigation Mode to the tap water irrigation mode and adjust the Irrigation Volume to the maximum.
- Remove the Irrigation Bottle, and then clean the inside of the Irrigation Bottle and the Irrigation Bottle Cap with running water.



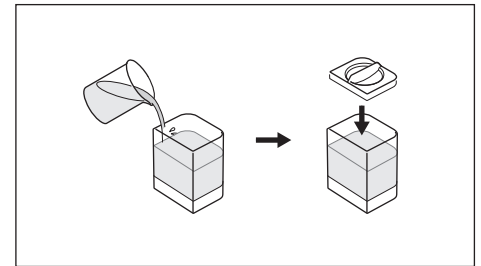
- Fill the Irrigation Bottle to the half or more with distilled water or purified water, and then close the Irrigation Bottle Cap securely. (Do not use saline solution.)




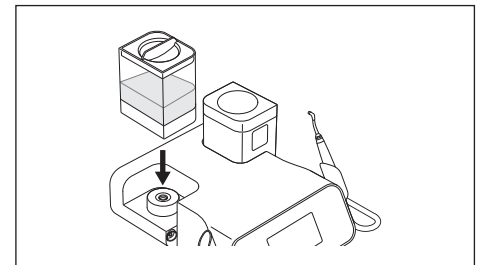- Insert the Irrigation Bottle straight into the Irrigation Bottle Base Connector.





* If there is a gap between the Irrigation Bottle and the Control Unit, water may leak.

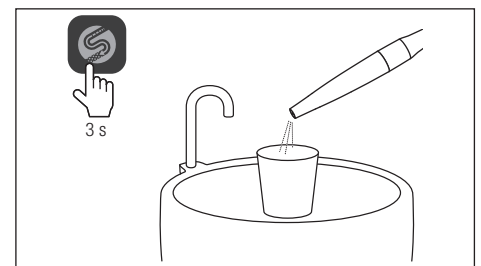- Point the tip of the Ultrasonic Handpiece at a container for catching water, and then touch  for three seconds. Then auto-cleaning starts. (Cleaning time is 45 seconds.)




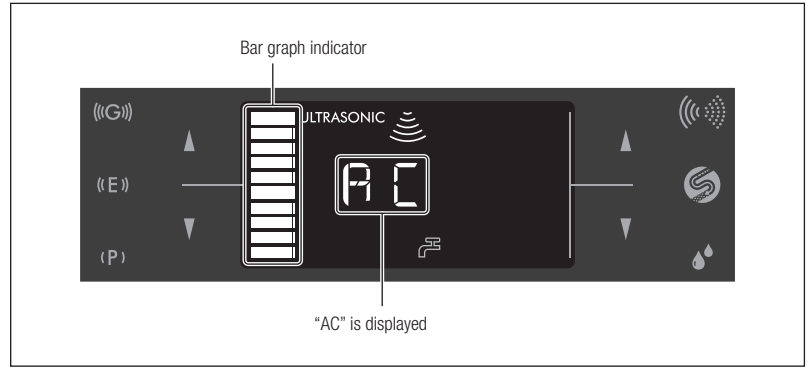- 6) During the auto-cleaning, "AC" is shown on the LCD.
The bar graph indicator shows the progress.




- * To cancel the auto-cleaning, touch  again.
When the auto-cleaning is complete, the control unit returns to the state before the auto-cleaning.

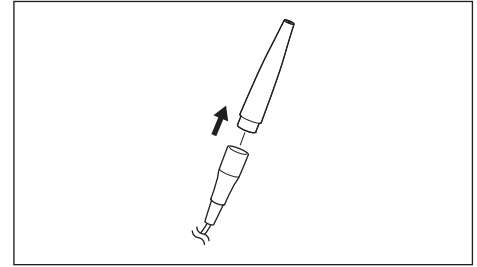- 7) Disconnect the Ultrasonic Handpiece from the Handpiece Cord.




9-1-1-3 Pre-cleaning

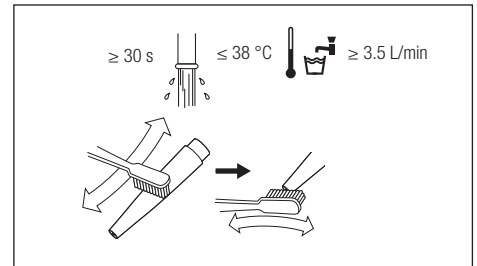
- 1) Clean the Ultrasonic Handpiece using running water and a soft bristle brush.



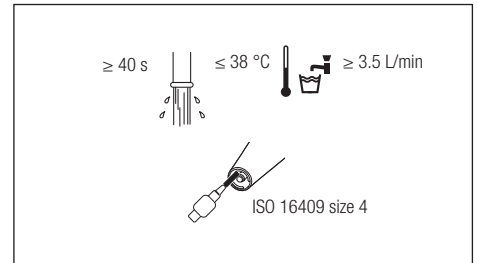
- 2) Clean the tip of the Ultrasonic Handpiece using running water and a brush.



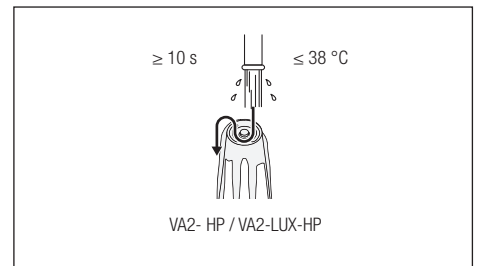
- 3) Rinse the end face of the Ultrasonic Handpiece.



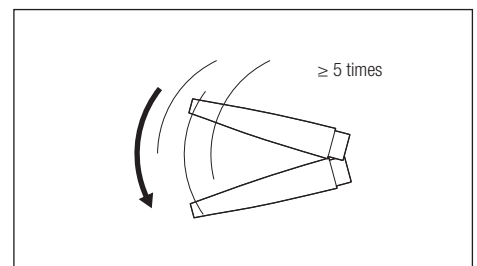- 4) Lightly shake the water off of the Ultrasonic Handpiece.



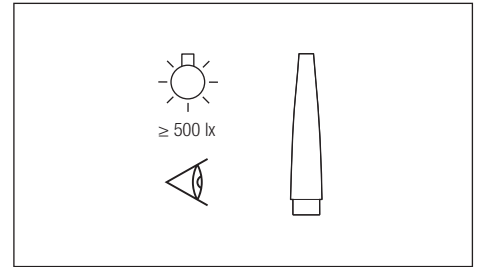5) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 1) until it is removed.



9-1-1-4 Cleaning and disinfection

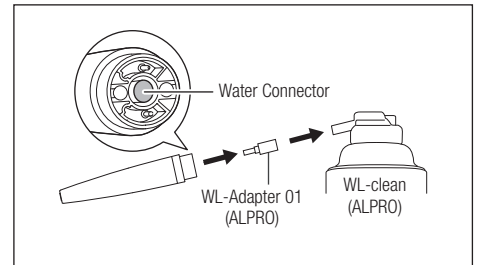
CAUTION

- Be sure to do pre-cleaning before cleaning and disinfection.
- Be sure to carry out disinfection within two hours after cleaning.
- After disinfection, be sure to sterilize the Ultrasonic Handpiece (refer to “9-2 Sterilization”).
- When using any spray (ALPRO), be sure to cover the tip of the Ultrasonic Handpiece with a cloth to prevent detergent and disinfection agent from scattering. We recommend that you use the spray mist absorber (Y900084).
- When spraying the ALPRO spray, keep holding the Ultrasonic handpiece and the WL-Adapter 01.
- When using ALPRO products, refer to the manual of the manufacturer.


Manual

■ Cleaning


1) Attach the WL-Adapter 01 (ALPRO) on to the WL-clean (ALPRO) and connect the Water Connector on the Ultrasonic Handpiece to the end of the WL-Adapter 01 (ALPRO).



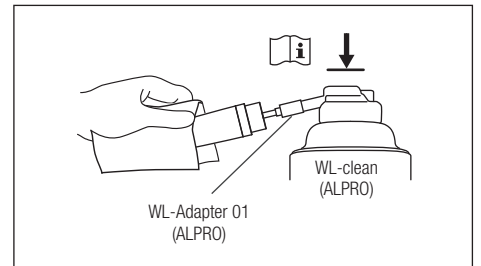2) Spray the WL-clean (ALPRO) while holding the WL-clean (ALPRO) and Ultrasonic Handpiece.




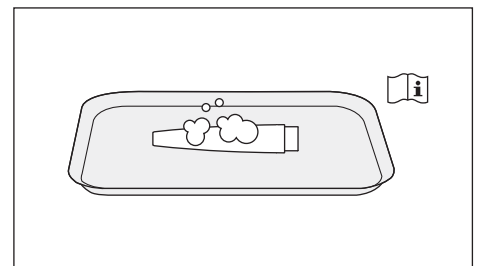3) Remove the Water Connector on the Ultrasonic Handpiece from the WL-Adapter 01 (ALPRO) and remove the WL-Adapter 01 (ALPRO) from the WL-clean (ALPRO) and then put the Ultrasonic Handpiece on the disinfected tray. Spray the WL-clean (ALPRO) on to the Ultrasonic Handpiece surface, and then wait for the WL-clean (ALPRO) to take effect.




■ Disinfection

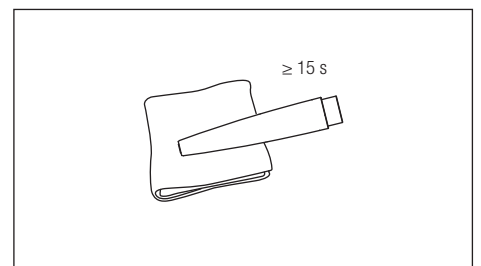
1) Wipe the Ultrasonic Handpiece surface using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.



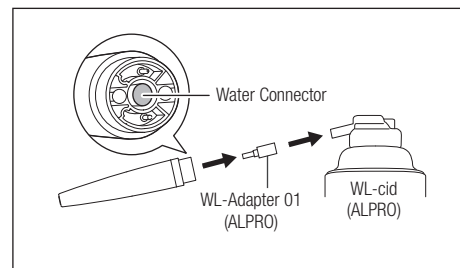2) Attach the WL-Adapter 01 (ALPRO) to the WL-cid (ALPRO) and connect the Water Connector on the Ultrasonic Handpiece to the end of the WL-Adapter 01 (ALPRO).



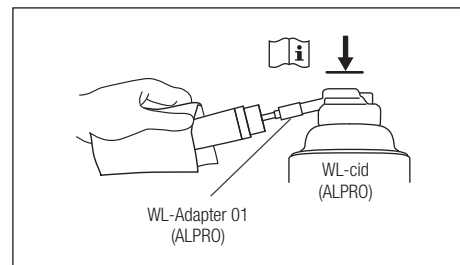
3) Spray the WL-cid (ALPRO) into the Water Connector on the Ultrasonic Handpiece while holding the Ultrasonic Handpiece and the WL-cid (ALPRO).




4) Remove the WL-Adapter 01 (ALPRO) and Ultrasonic Handpiece from the WL-cid (ALPRO).

5) Remove the Ultrasonic Handpiece from the WL-Adapter 01 (ALPRO), and then put the Ultrasonic Handpiece on the disinfected tray.

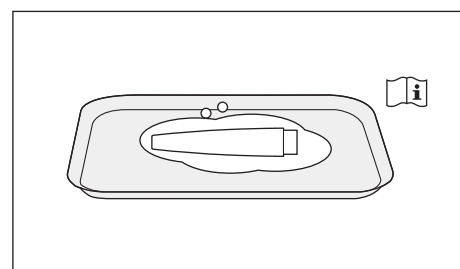6) Spray the WL-cid (ALPRO) to the Ultrasonic Handpiece surface, and then wait for the WL-cid (ALPRO) to take effect.




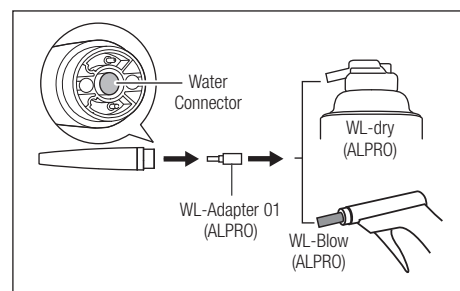7) Attach the WL-Adapter 01 (ALPRO) to the WL-dry (ALPRO) or WL-Blow (ALPRO), and then attach the rear of the Ultrasonic Handpiece to the WL-Adapter 01 (ALPRO).




8) Drain disinfectant from the Ultrasonic Handpiece while holding the WL-dry (ALPRO) or WL-Blow (ALPRO) and the Ultrasonic Handpiece.

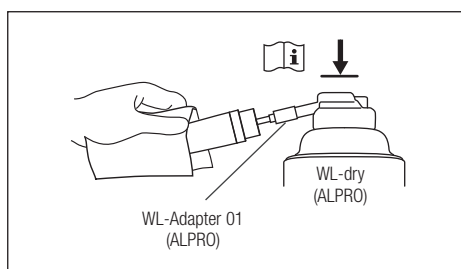· When using WL-dry (ALPRO):




· When using WL-Blow (ALPRO):

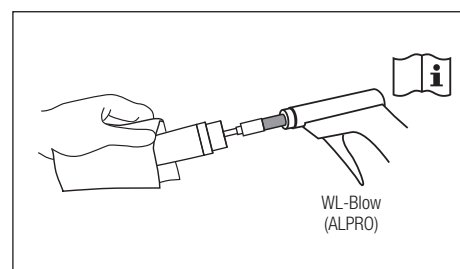

9) Remove the WL-Adapter 01 (ALPRO) and Ultrasonic Handpiece from the WL-dry (ALPRO) or WL-Blow (ALPRO).

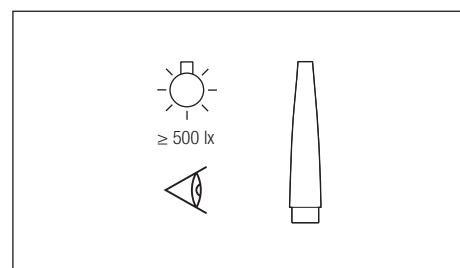10) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 1) until it is removed.



11) Proceed to the sterilization (refer to "9-2 Sterilization").

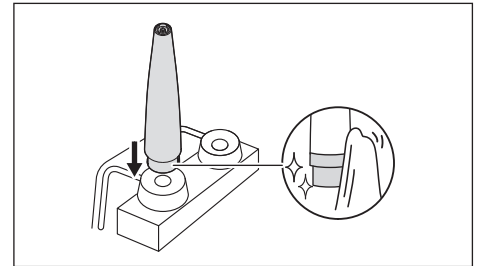
Auto

CAUTION

- Use a washer-disinfector that complies with DIN EN ISO 15883.
- Read the manual of your washer-disinfector.
- Since the glass rod is fragile, pay attention not to let the tip of the Ultrasonic Handpiece sustain an impact during cleaning.
- After the thermal disinfection and dry cycle are complete, take the product out of the washer-disinfector immediately (within an hour), and then dry it. Moisture remaining in the product causes internal corrosion or other problems.
- When using a washer-disinfector, use the adaptor compatible with the washer-disinfector (to be prepared by the user) to clean and disinfect the Ultrasonic Handpiece.
- For auto-cleaning and disinfection, follow the instructions in the manual of the manufacturer of the washer-disinfector.

■ Cleaning and disinfection (outside and inside)


1) Wipe the connection part of the Ultrasonic Handpiece using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol, and then attach the Ultrasonic Handpiece to the adaptor of the washer-disinfector.




Adaptor compatible with the washer-disinfector (to be purchased by the user)

| Manufacturer | REF | Connection approx. | Color |
|--------------|-----------|--------------------|-------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Green |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Green |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Black |

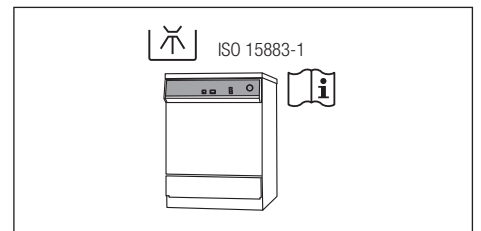
2) Perform the thermo disinfection following the manual of the washer-disinfector.



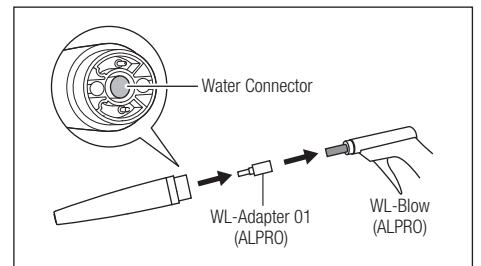
3) Take the Ultrasonic Handpiece out of the washer-disinfector.
 4) Attach the WL-Adapter 01 (ALPRO) to WL-Blow (ALPRO), and then attach the rear of the Ultrasonic Handpiece to the WL-Adapter (ALPRO).



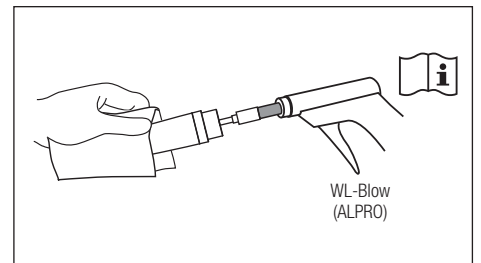5) Drain moisture from the Ultrasonic Handpiece while holding WL-Blow (ALPRO) and the Ultrasonic Handpiece.




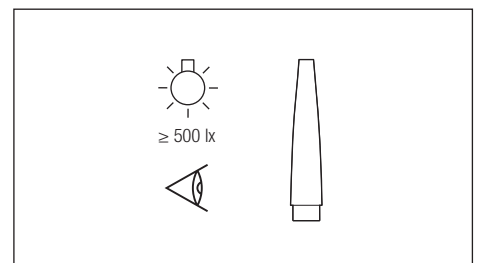6) Remove the WL-Adapter 01 (ALPRO) and Ultrasonic Handpiece from the WL-Blow (ALPRO).
 7) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 2) until it is removed.



9-1-1-5 Glass rod

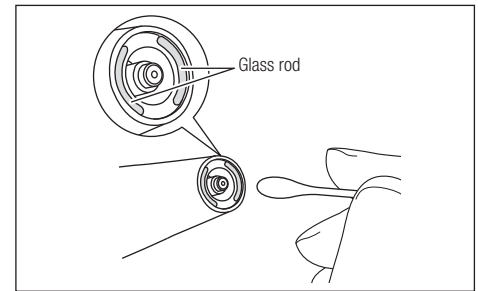If dust or debris adheres to the glass rod, carefully wipe it off using a cotton swab dampened with disinfectant alcohol.




CAUTION

- Do not use a needle or knife to clean the glass rod. Doing so damages the glass rod reducing its transmittance.


9-1-2 Handpiece Cord

Cleaning and disinfection

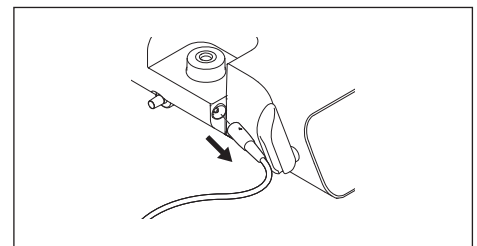
- 1) Disconnect the Handpiece Cord from the control unit.



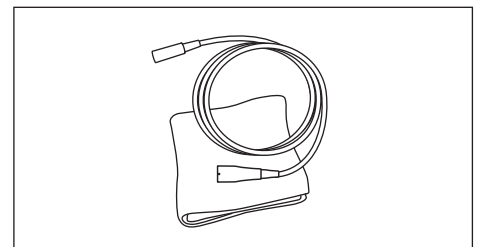
- 2) Wipe the Handpiece Cord surface using a lint-free cloth dampened with water.



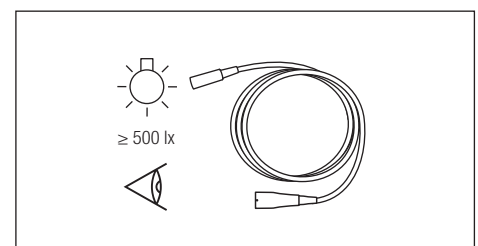- 3) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 2) until it is removed.




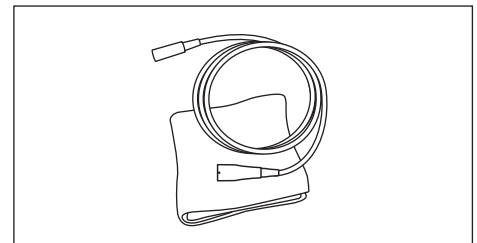- 4) Wipe the Handpiece Cord surface using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.



- 5) Wipe the connection part using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.

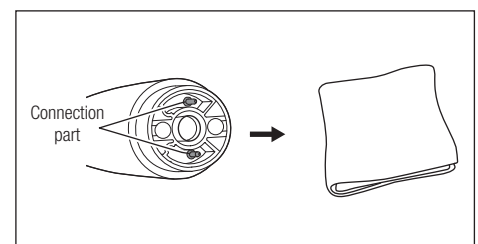If a cotton swab is too thick to clean the connection part, wrap wet tissue paper or the like around a thin stick and use it to wipe the connection part carefully.




CAUTION

- When cleaning the connection part, do not use a stick with a sharp point nor pick the terminal. Doing so may damage the contacts causing poor contact.


9-1-3 Irrigation Bottle

9-1-3-1 Cleaning and disinfection

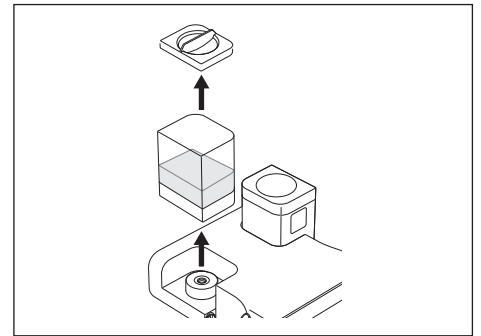
1) Remove the Irrigation Bottle from the Irrigation Bottle Base Connector then remove the Irrigation Bottle Cap from the Irrigation Bottle.



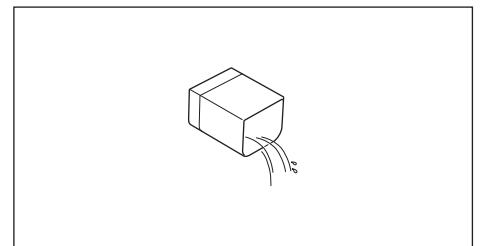
2) Drain the water or disinfectant remaining in the Irrigation Bottle.



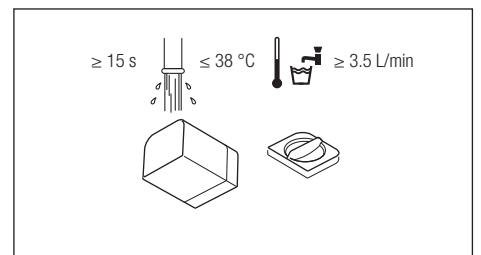3) Rinse the Irrigation Bottle and Irrigation Bottle Cap using running water.



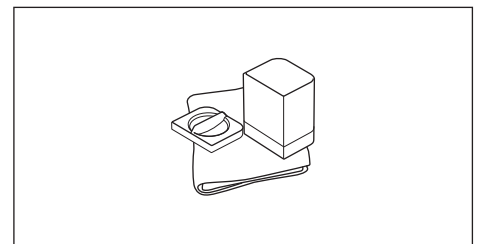4) Wipe the surfaces of the Irrigation Bottle and Irrigation Bottle Cap using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.




5) Attach the Irrigation Bottle to the Irrigation Bottle Base Connector.


9-1-4 Powder Handpiece

9-1-4-1 Removing nozzle tip

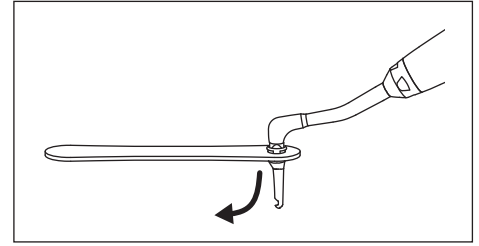1) Use the Perio Mate Nozzle Tip Remover to remove the Perio Mate Nozzle Tip.



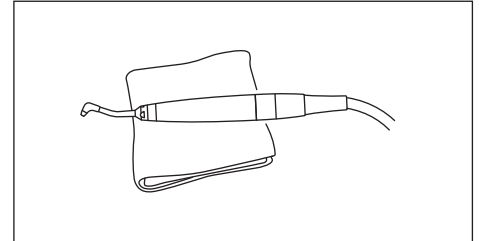2) Wipe off dirt from the Powder Handpiece surface using a lint-free cloth dampened with water.




WARNING

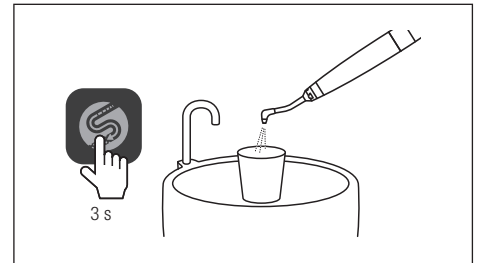
- A nozzle tip can be used only once. Do not reuse it. Doing so causes infection.
- Dispose of used Perio Mate Nozzle Tips as medical waste.

9-1-4-2 Auto-cleaning


CAUTION

- During auto-cleaning, water used for the cleaning comes out of the tip of the Powder Handpiece. Prepare a container such as a cup to catch the water.
- Before starting auto-cleaning, touch the Irrigation Volume Keys (▲) to adjust the Water Level to L5 (refer to "11-3 Basic Water Level Setting").

1) Point the tip of the Powder Handpiece at a container for catching water, and then touch  for three seconds.
The auto-cleaning starts. (Cleaning time is 45 seconds.)



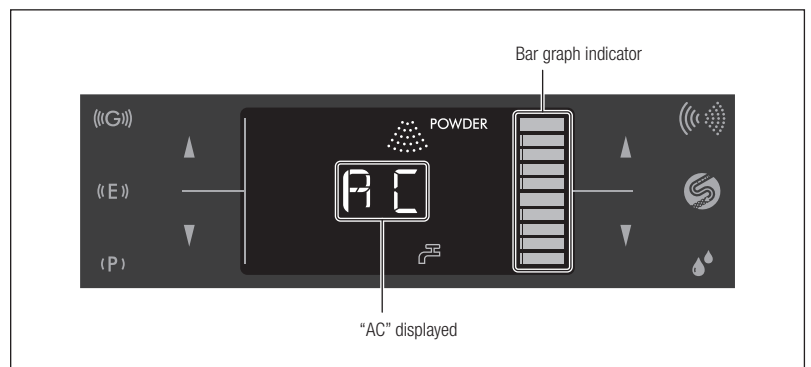
2) During the auto-cleaning, "AC" is shown on the LCD.
The bar graph indicator shows the progress.



* To cancel auto-cleaning, touch  again.


When auto-cleaning is complete, the control unit returns to the state before the auto-cleaning cycle began.

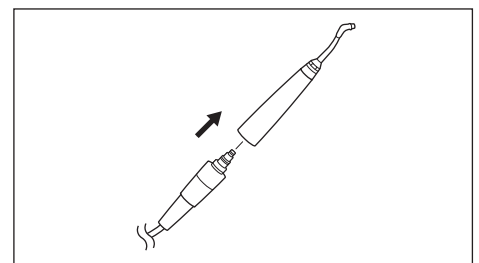3) Disconnect the Powder Handpiece from the Handpiece Hose.




9-1-4-3 Removing powder

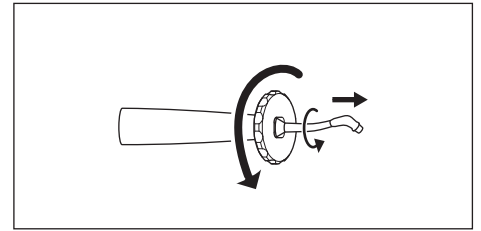1) Remove the Nozzle from the Powder Handpiece using the Ring Wrench (accessory).



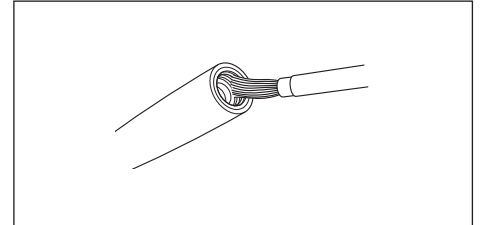2) Remove the powder adhering to the inside of the connection part of the Powder Handpiece using the Cleaning Brush (accessory).




WARNING


- Be sure to clean the inside of the Powder Handpiece after use. Powder remaining in the Powder Handpiece may harden causing clogging.

9-1-4-4 Pre-cleaning

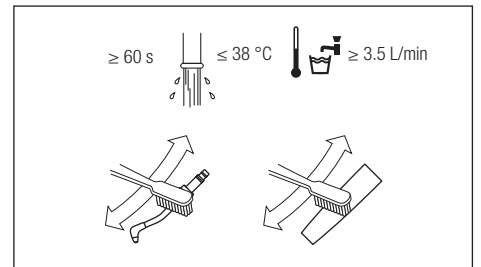
1) Clean the Powder Handpiece and Nozzle using running water and a soft bristle brush.



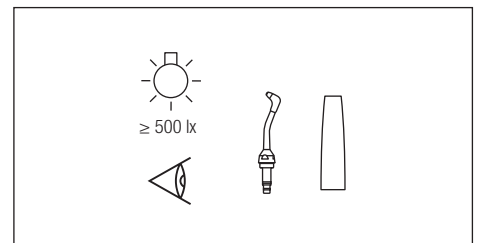2) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 1) until it is removed.



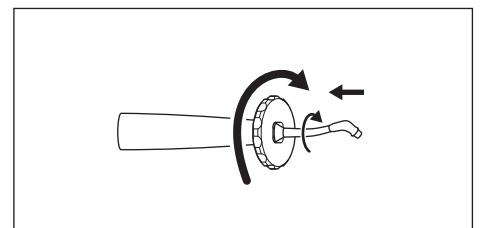3) Attach the Nozzle to the Powder Handpiece.



CAUTION

- Perform ultrasonic cleaning at least once every week to prevent powder from clogging. Perform ultrasonic cleaning before performing auto-cleaning or after applying the remedy described in "14 Troubleshooting" ("9-3 Ultrasonic cleaning (weekly)").
- Be sure to use the supplied Ring Wrench to attach and remove Nozzles. When attaching or removing a Nozzle, do not hold its distal end. Doing so may deform the Nozzle.
- Do not use ultrasonic cleaning to clean Powder Handpieces.

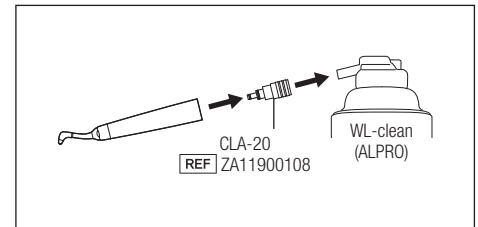
CAUTION

- If the O-ring on the CLA-20 is deteriorated or damaged, replace it with a new one before use.
- Be sure to do pre-cleaning before cleaning.
- After disinfection, be sure to sterilize the Powder Handpiece (refer to “9-2 Sterilization”).
- Be sure to carry out disinfection within two hours after cleaning.
- When using any spray (ALPRO), be sure to cover the Powder Handpiece head with a cloth to prevent detergent and disinfection agent from scattering. We recommend that you use the spray mist absorber (Y900084).
- When using ALPRO products, refer to the manual of the manufacturer.


Manual

■ Cleaning

1) Attach the CLA-20 (REF ZA11900108) to the WL-clean (ALPRO), and then attach the Powder Handpiece to the CLA-20.




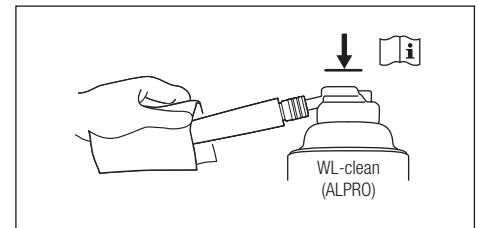2) Spray the WL-clean (ALPRO) while holding the WL-clean (ALPRO) the Powder Handpiece.




3) Remove the CLA-20 and Powder Handpiece from WL-clean (ALPRO).

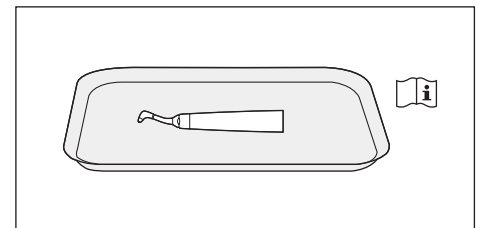4) Wait for the WL-clean (ALPRO) to take effect.




■ Disinfection

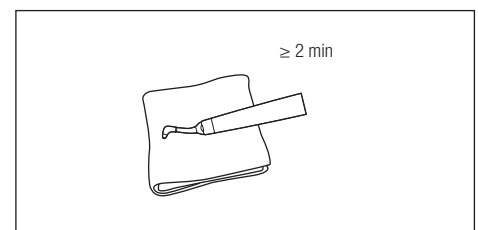
1) Wipe the Powder Handpiece surface using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.



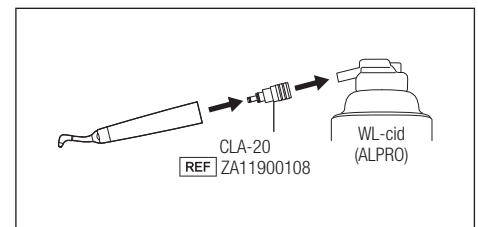
2) Attach the CLA-20 (REF ZA11900108) to WL-cid (ALPRO), and then attach the Powder Handpiece to the CLA-20.



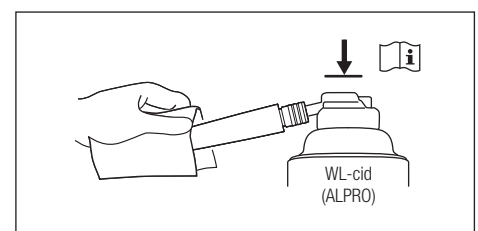
3) Spray WL-cid (ALPRO) to the Powder Handpiece while holding WL-cid (ALPRO) and the Powder Handpiece.



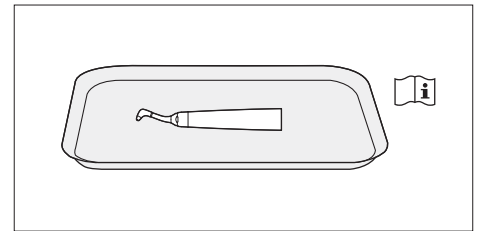- 4) Remove the CLA-20 and Powder Handpiece from WL-cid (ALPRO).
- 5) Wait for the WL-cid (ALPRO) to take effect.




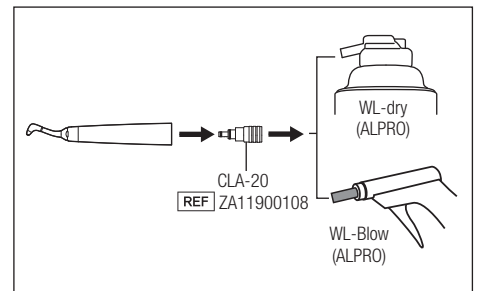- 6) Attach the CLA-20 to WL-dry (ALPRO) or WL-Blow (ALPRO), and then attach the Powder Handpiece to the CLA-20.




- 7) Drain disinfectant from the Powder Handpiece while holding WL-dry (ALPRO) or WL-Blow (ALPRO) and the Powder Handpiece.

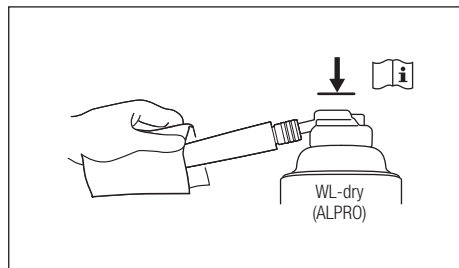
· When using WL-dry (ALPRO):



· When using WL-Blow (ALPRO):

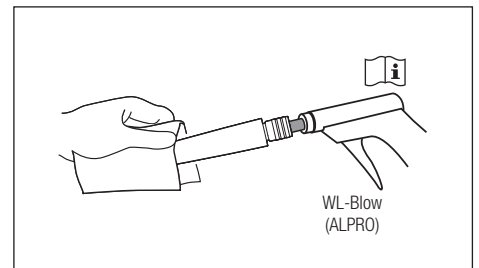

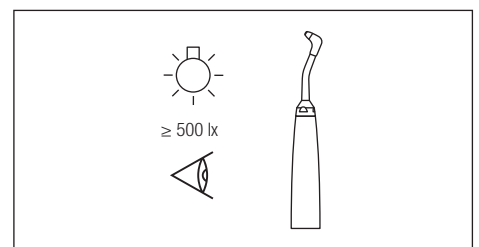- 8) Remove the Powder Handpiece from WL-dry (ALPRO) or WL-Blow (ALPRO).
- 9) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 1) until there is no dirt.



- 10) Proceed to the sterilization (refer to "9-2 Sterilization").

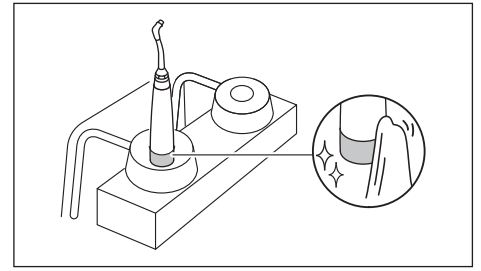
Auto

CAUTION

- Use a washer-disinfector that complies with ISO 15883.
- Read the manual of your washer-disinfector.
- Sufficiently dry the Powder Handpiece after cleaning with a washer-disinfector. Remaining moisture causes internal corrosion and poor lubrication.
- After the thermal disinfection and dry cycle are complete, take the product out of the washer-disinfector immediately (within an hour), and then dry it. Moisture remaining in the product causes internal corrosion and poor lubrication.
- When using a washer-disinfector, use the adaptor compatible with the washer-disinfector (to be prepared by the user) to clean and disinfect the Powder Handpiece.
- For the auto-cleaning and disinfection, follow the instructions in the manual of the manufacturer of the washer-disinfector.

■ Cleaning and disinfection


- 1) Wipe the connection part of the Powder Handpiece using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol, and then attach the Powder Handpiece to the adaptor of the washer-disinfector.




Adaptor compatible with the washer-disinfector (to be purchased by the user)

| Manufacturer | REF | Connection approx. | Color |
|--------------|-----------|--------------------|-------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Green |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Green |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Black |

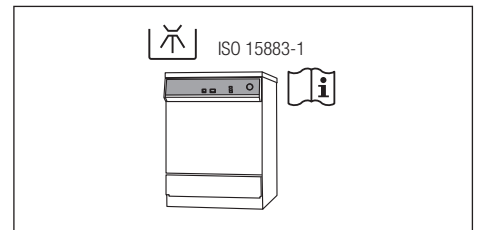
- 2) Perform the thermo disinfection following the manual of the washer-disinfector.



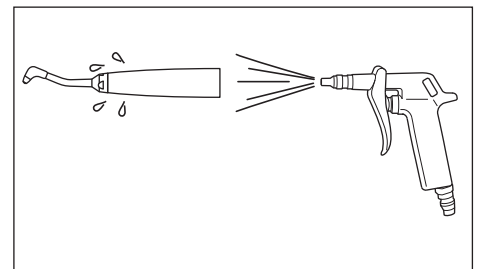- 3) Remove the moisture from the surface and inside of the Powder Handpiece using an air blow gun or similar tool.



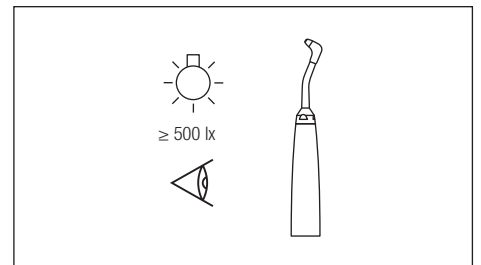- 4) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 2) until there is no dirt.




- 5) Proceed to the sterilization (refer to "9-2 Sterilization").

9-1-5 Chamber and Handpiece Hose


Perform the following maintenance at the end of the day.

9-1-5-1 Removing powder

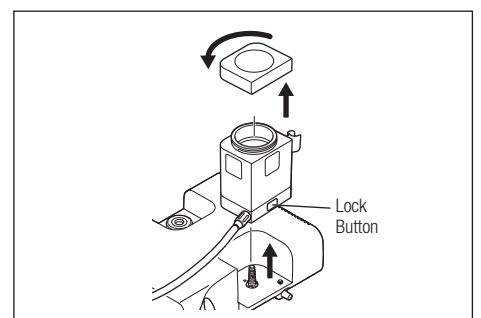- 1) Release the residual pressure from the Chamber (refer to "8-6-4 Releasing residual pressure").
- 2) Push the Lock Button, and then remove the Chamber from the Chamber Base Connector.
Remove the Chamber Cap.




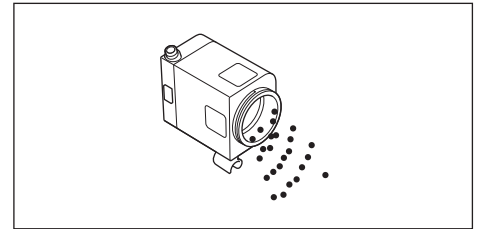3) Dispose of the powder in the Chamber (refer to “22 Disposing product”).




4) Close the Chamber Cap firmly, and then insert the Chamber straight into the Chamber Base Connector.

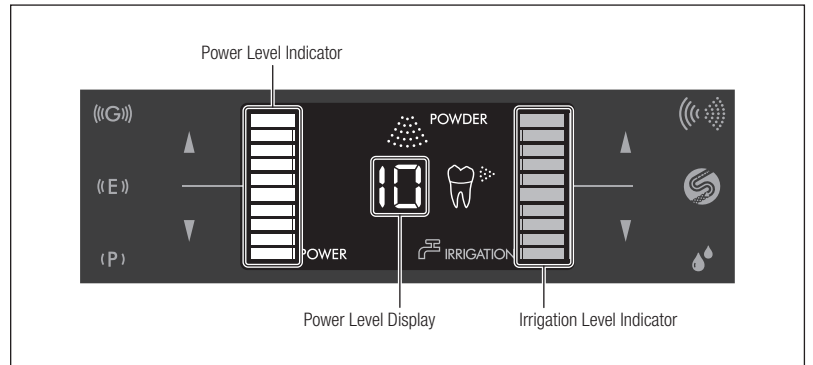5) Set the power level and the irrigation level to “10” and the maximum, respectively.



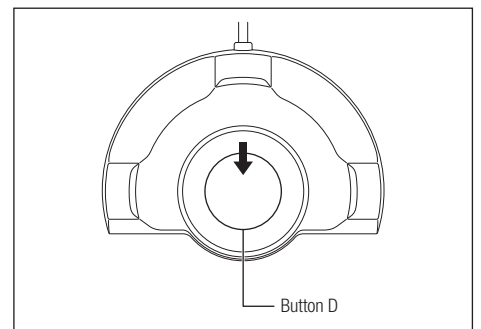
6) Point the Handpiece Hose at a spittoon or sink and depress the button D of the Foot Control to run 5 times for more than a second.




7) Perform auto-cleaning to drain the remaining powder and water from the Handpiece Hose (refer to 9-1-4-2 Auto-cleaning).

9-1-5-2 Cleaning and disinfection

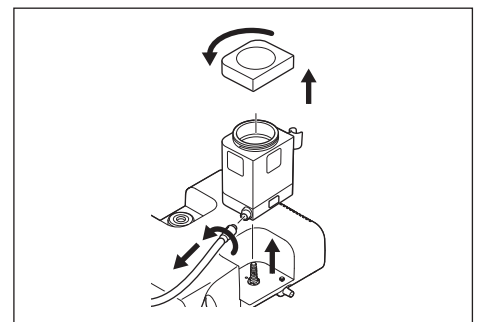
- 1) Release the residual pressure from the Chamber (refer to “8-6-4 Releasing residual pressure”).
- 2) Push the Lock Button, and then remove the Chamber from the Chamber Base Connector.
Remove the Chamber Cap and disconnect the Handpiece Hose.
* If the Chamber cannot be removed even though you pushed the Lock Button, release the Lock Button (refer to “9-1-5-3 Releasing Lock Button”).



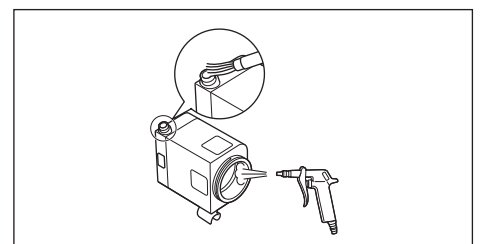3) Remove the powder remaining in the Chamber and Handpiece Hose Connector Socket using an air blow gun or similar tool.




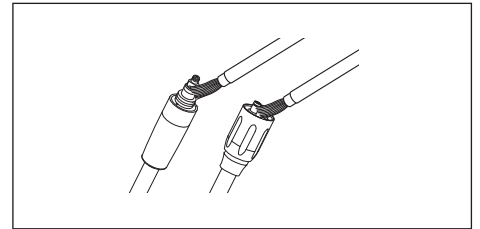4) Remove the remaining powder from both ends of the Handpiece Hose using the Cleaning Brush (accessory).




5) Make sure that no powder remains on the threads of the Chamber Cap. If any powder remains, clean it off. (Refer to “Cleaning Chamber Cap”)

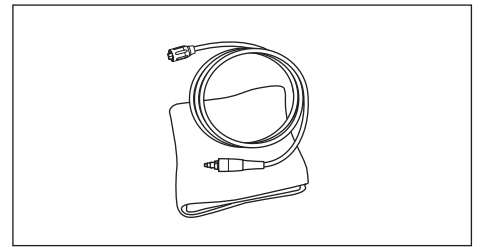
6) Wipe the Handpiece Hose surface using a lint-free cloth dampened with water.



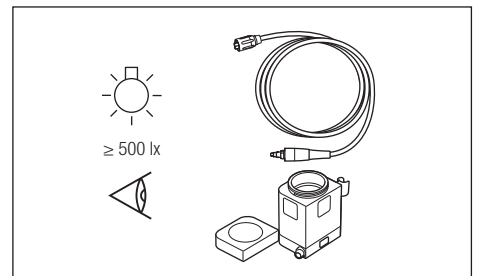7) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat from step 3) until it is removed.



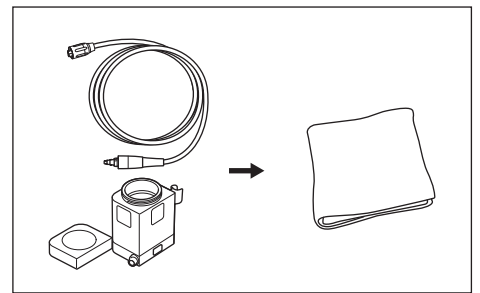8) Wipe the surfaces of the Chamber, Chamber Cap, and Handpiece Hose using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.



9) Proceed to the storage (refer to “9-4 Storage”) or insert the Chamber straight into the Chamber Base Connector.

WARNING

- Securely attach the Chamber Cap. Otherwise, the Chamber Cap may be blown off during use, which may lead to damage to the device or an injury.



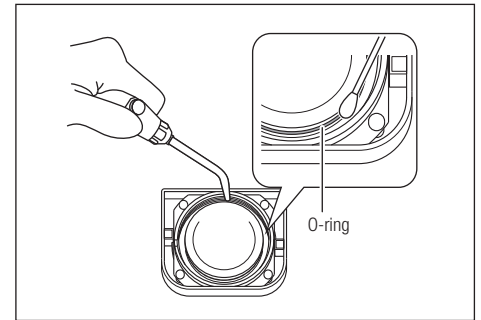
CAUTION

- If powder adheres to the threads of the Chamber and/or the Chamber Cap, the cap will become difficult to close. Cleaning the Chamber and Chamber Cap makes it easy to open and close the cap (refer to “Cleaning Chamber Cap”).
- If the Chamber malfunctions, be sure to request your authorized NSK dealer to repair it.
- After using, remove the powder adhering to the inside of the Chamber completely and clean the Chamber before storing it.
- Do not wash the Chamber with water. Doing so solidifies powder causing clogging. The air pressure in the Chamber may be high making it difficult to open the cap for awhile just after use. In such a case, wait awhile or release the residual pressure before opening the cap (refer to “8-6-4 Releasing residual pressure”).
- Before connecting the Handpiece Hose, Chamber and Handpiece, or the Chamber and Control Unit, be sure to blow off all water from the connections of the Hose and the Chamber with dry air. Failure to do so may result in moisture entering the air supply, causing the cleaning powder inside the product to solidify.

Cleaning Chamber Cap

If powder adheres to the threads of the Chamber and/or the Chamber Cap, the Chamber Cap will become difficult to close. Cleaning the Chamber and Chamber Cap following the procedure shown below makes it easy to open and close the cap.

- 1) Remove the Chamber Cap.
- 2) Clean the inside of the Chamber, threads, and the fringe of the O-Ring of the Chamber Cap using a brush or dry cotton swab.




- 3) Remove the adhering powder by blowing air.
- 4) Proceed to storage (refer to "9-4 Storage") or insert the Chamber straight into the Chamber Base Connector.

9-1-5-3 Releasing Lock Button

If the Lock Button cannot be pushed making it impossible to remove the Chamber, follow the procedure shown below to release the Lock Button and remove the Chamber.

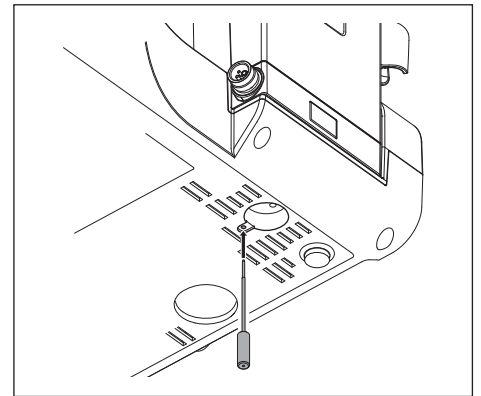- 1) Insert the Unlocking tool (accessory) fully into the hole on the bottom of the control unit to release the Lock Button.



- 2) Pull out the Unlocking tool.
 - 3) Push the Lock Button, and then remove the Chamber.
- If the procedure shown above fails to release the Lock Button, contact your authorized NSK dealer.

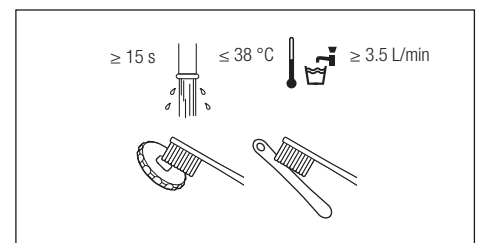


- Do not invert the control unit when releasing the Lock Button. Inverting the Chamber could lead to powder clogging.
- Do not twist the Unlocking tool when inserting it.


9-1-6 Ring Wrench and Perio Mate Nozzle Tip Remover

9-1-6-1 Cleaning and disinfection


- 1) Clean the Ring Wrench and Perio Mate Nozzle Tip Remover for 15 seconds or more using running water and a soft bristle brush.



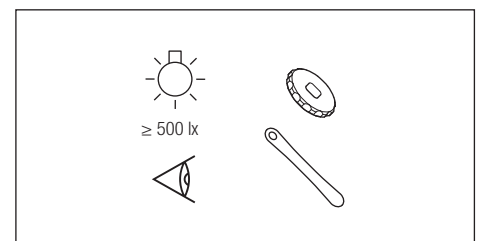- 2) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more).



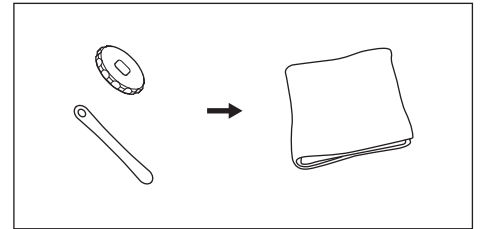- 3) Wipe the Ring Wrench and Perio Mate Nozzle Tip Remover using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.




- 4) Proceed to sterilization (refer to “9-2 Sterilization”).

9-1-7 Control Unit and Foot Control

9-1-7-1 Cleaning

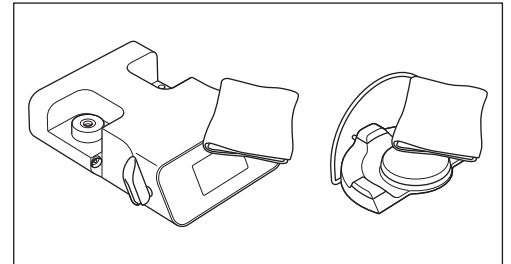- 1) Turn off the power.
- 2) Wipe off dirt from the surfaces of the Control Unit and Foot Control using a lint-free cloth dampened with water.
- 3) Wipe the surfaces of the Control Unit and Foot Control using a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol.



- 4) Proceed to storage (refer to “9-4 Storage”).

CAUTION

- Do not use solvents such as electrolyzed-oxidizing water (strong acidic water or super acidic water), strong acidic or alkaline chemical, chlorine-containing solvent, benzene, and thinner when cleaning, immersing, or wiping.

9-2 Sterilization


The effectiveness of the following sterilization procedure has been verified complying with ISO17665.

Sterilizable items:

Ultrasonic Handpiece, Powder Handpiece, Ring Wrench, Perio Mate Nozzle Tip Remover

- 1) Put the items into a sterilization pouch that complies with ISO 11607-1, and then seal the pouch.
- 2) Sterilize them with the following conditions.

| Type | Gravity displacement (Class N) | Pre-vacuum (Class B) |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| Temperature | 132 °C | 134 °C |
| Sterilization time | ≥15 min | 3-18 min |

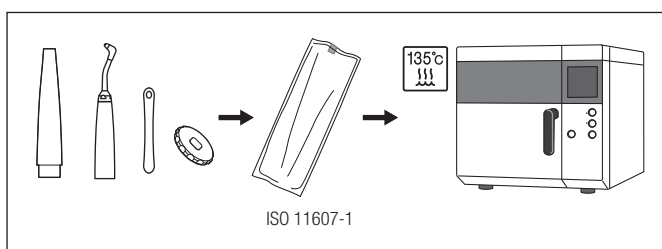

- 3) Proceed to storage (refer to “9-4 Storage”).

CAUTION

- Always obey the local directives, standards, guidelines, etc., as to the reprocessing of equipment.
- Use a sterilization pouch that complies with ISO 11607- 1.
- Do not place other instruments together with the items of this product in a sterilization pouch to perform the autoclave sterilization. Doing so discolors the product surface and affects internal parts. In addition, pay attention not to let chemicals enter the product during the autoclave process.
- Be sure to use sterilizers that can perform sterilization up to 135 °C.
Do not use a sterilizer that exceeds 135 °C during the dry cycle. It may cause the product to fail. For details, consult the manufacturer of the sterilizer.
- Store the product in a location where there is no risk of adverse effects of the atmospheric pressure, temperature, humidity, ventilation, sunlight, dust, salt, and sulfuric atmosphere.
- Do not heat or cool the product rapidly during the sterilization. Rapid changes in the temperature deteriorate the product.
- Do not touch the product just after the sterilization because it is hot.
- As to this product, the effectiveness of sterilization methods (such as the plasma sterilization and EOG sterilization) other than the steam sterilization is not verified.
- After the sterilization is complete, take the product out of the sterilizer within an hour. Failure to do so may cause corrosion.
- Do not sterilize the parts other than the sterilizable items.

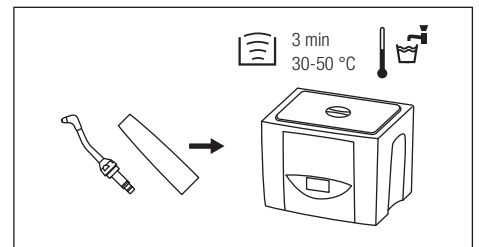
NOTICE

- We recommend the class B sterilizer stipulated in EN13060.
For details, refer to the operation manual issued by the manufacturer of the sterilizer.
- Although the handpiece may discolor due to the heat after repetitions of the autoclave sterilization, it is due to the characteristics of the product and does not indicate any problem in the quality of the product.


9-3 Ultrasonic cleaning (weekly)

Be sure to perform the cleaning and disinfection before ultrasonic cleaning (refer to “9-1-4 Powder Handpiece”).


- 1) Clean the Powder Handpiece and Nozzle using ultrasonic cleaning.



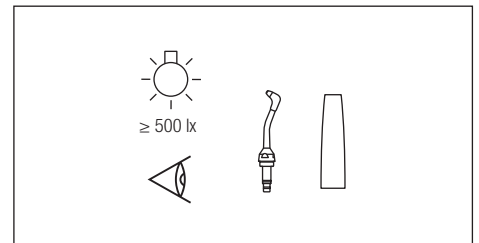
- 2) Check for dirt under appropriate illumination (500 lx or more). If there is dirt, repeat step 1) until the dirt is removed.



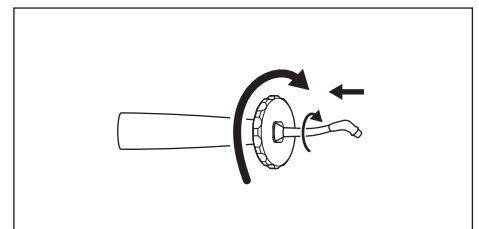- 3) Attach the Nozzle to the Powder Handpiece using the Ring Wrench (accessory).



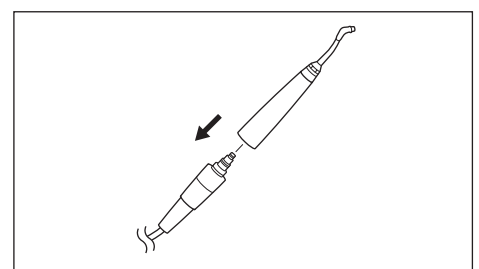- 4) Insert the Powder Handpiece straight into the Handpiece Hose Plug.



- 5) Perform the auto-cleaning and sterilization (refer to “9-1-4-2 Auto-cleaning” and “9-2 Sterilization”).

- CAUTION**
- After ultrasonic cleaning, perform auto-cleaning to remove internal moisture, and then dry the product sufficiently.
 - After auto-cleaning, be sure to perform sterilization.
 - Do not use ultrasonic cleaning to clean Ultrasonic Handpieces. It causes failure.

9-4 Storage

Store the product in an environment where the product is kept disinfected and sterilized until the next use.

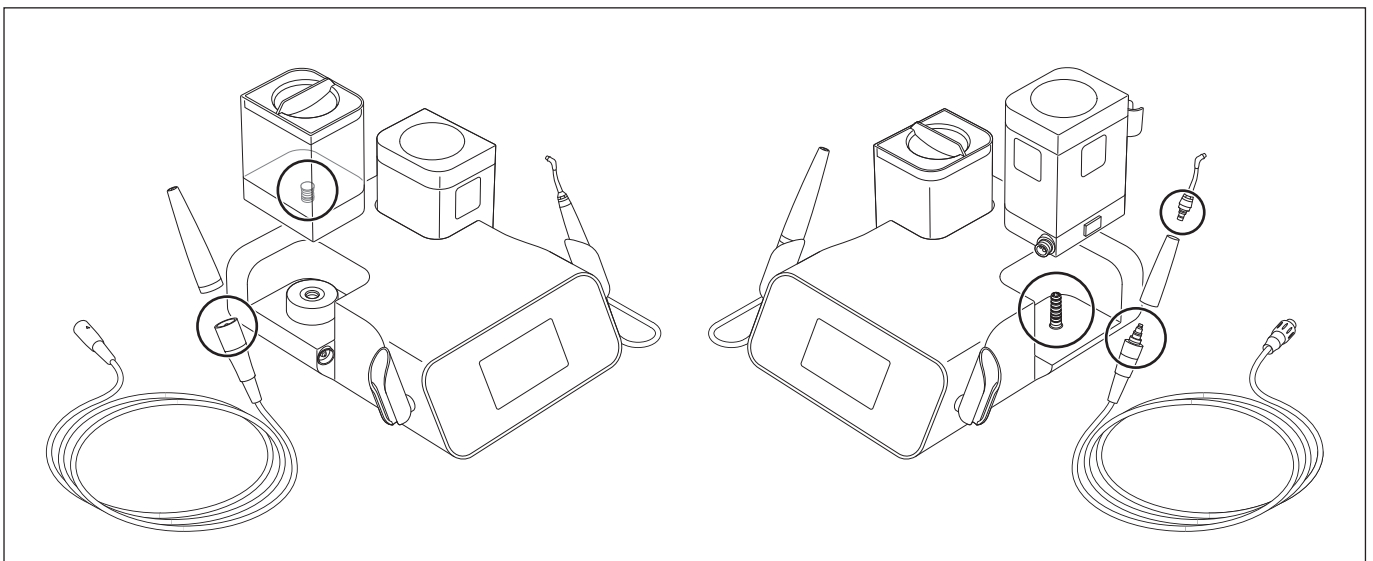
- CAUTION**
- Store the product in a location where there is no risk of adverse effects of the atmospheric pressure, temperature, ventilation, sunlight, dust, salt, and sulfuric atmosphere.

10 Care and Maintenance

10-1 Maintenance of the O-rings

Perform maintenance to reduce wear of the O-rings on the target parts and prevent leakage of water or air.


* For replacing the O-ring of the Chamber Cap, contact your Authorized NSK Dealer.



10-1-1 Handpiece Cord

- 1) Remove the Handpiece Cord from the Control Unit.
 - 2) Remove the O-ring to be replaced using a needle, etc.
 - 3) Place the new O-ring in the groove from where the old O-ring was removed.
- * Refer to "21 Spare Parts List" for details about replacement O-rings.

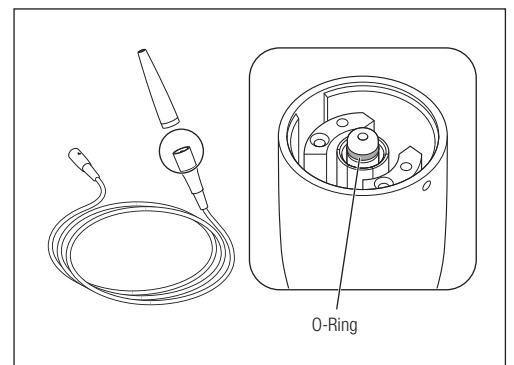REF Y1003546




10-1-2 Handpiece Hose (for Prophy use and Perio use)

- 1) Remove the Hose from the Powder Handpiece and Chamber.
 - 2) Remove the O-rings from the Handpiece Hose Plug using a needle, etc. If there is powder in the O-ring grooves, clean the groove before inserting the new O-ring.
 - 3) Place the new O-rings in the grooves from where the old O-rings were removed.
 - 4) Apply a drop of the supplied turbine oil and rub it in with your finger.
- * Refer to "21 Spare Parts List" for details about replacement O-rings.

REF Y1003500



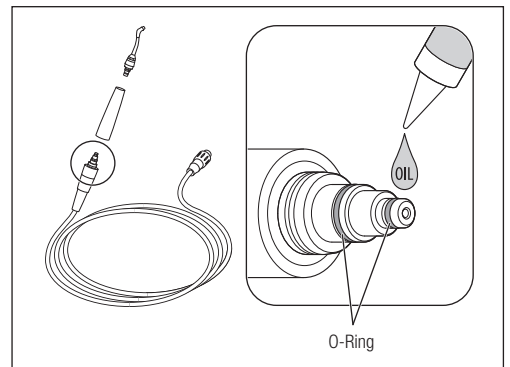
- Failure to lubricate the O-ring section on the Handpiece side may cause damage to the Joint section, resulting in difficulty in rotating the Handpiece connection. It may also cause water leakage.



10-1-3 Nozzle (for Prophy use and Perio use)

- 1) Pass through the supplied Ring Wrench from the Nozzle end, loosen the Nozzle, and remove the Nozzle from the Handpiece.
 - 2) Remove the O-rings from the root of the Nozzle using a needle, etc. If there is powder in the O-ring grooves, clean the groove before inserting the new O-ring.
 - 3) Place the new O-rings in the grooves from where the old O-rings were removed.
- * Refer to "21 Spare Parts List" for details about replacement O-rings.

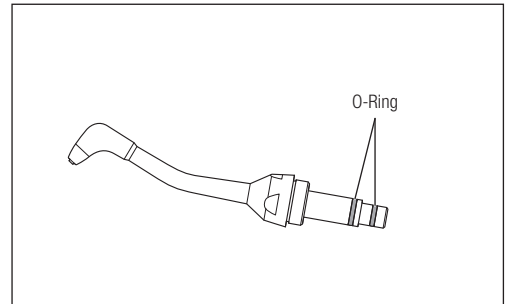REF Y1003501




10-1-4 Irrigation Bottle

- 1) Remove the O-rings from the Irrigation Bottle Joint using a needle, etc.
 - 2) Place the new O-rings in the grooves from where the old O-rings were removed.
- * Refer to "21 Spare Parts List" for details about replacement O-rings.

REF Y1003544



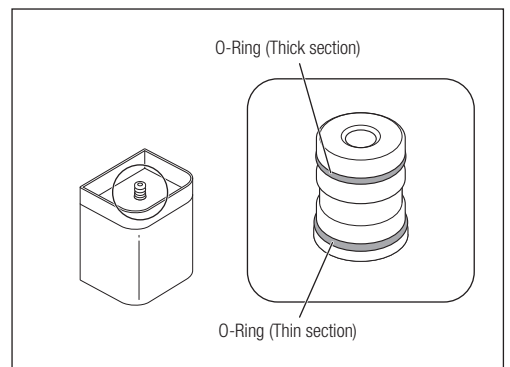- The O-rings are of different thicknesses. Be sure to place them in the correct groove.




10-1-5 Chamber Base Connector

- 1) Remove the O-rings from the Chamber Base Connector using a needle, etc.
 - 2) Place the new O-rings in the grooves from where the old O-rings were removed.
- * Refer to "21 Spare Parts List" for details about replacement O-rings.

REF Y1003435




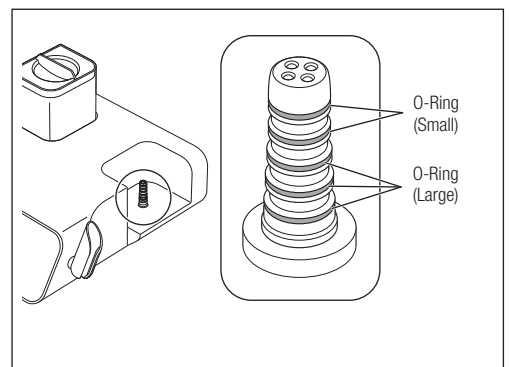- Since the size of the O-Rings differ, make sure to replace them in the correct location.




10-2 Changing the Irrigation Pump

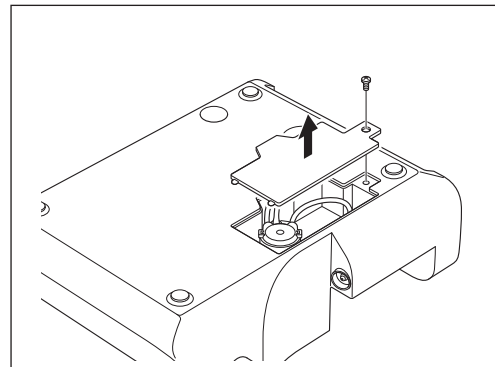
- 1) Remove the Irrigation Bottle, the Chamber, Power Cord, Handpiece Cord and Foot Control from the Control Unit.
- 2) Turn over the Control Unit. Use a cross-head screwdriver to remove the screw on the Irrigation Pump Cover and remove the Cover.



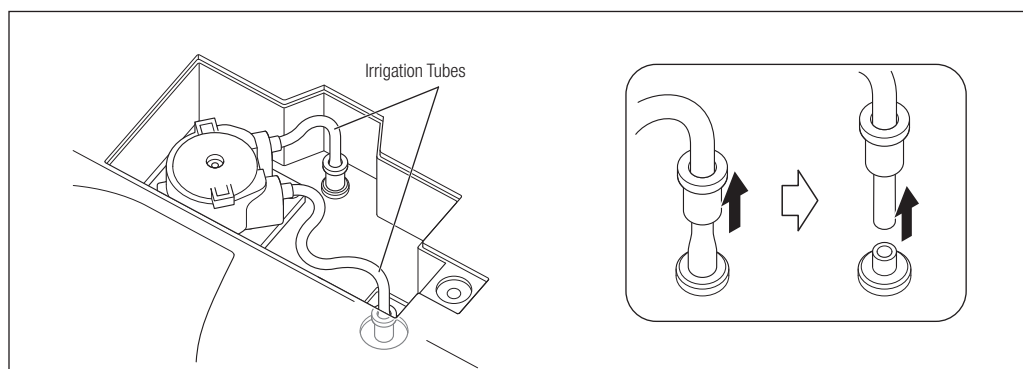
- 3) Remove two Irrigation Tubes from the Control Unit.



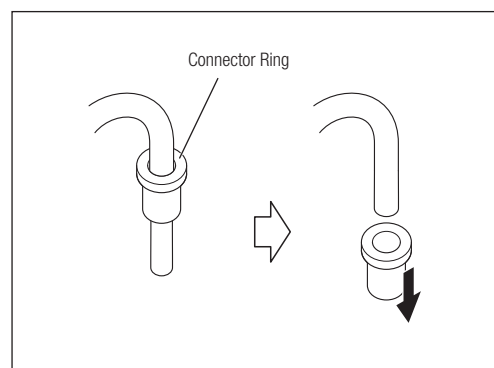
- 4) Remove the Connector Ring from the Irrigation Tube. Do not dispose of it. You can use the Ring on the replacement Irrigation Pump.



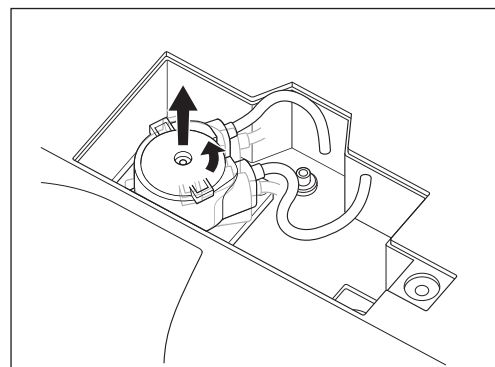
- 5) Turn the Irrigation Pump counterclockwise until it clicks, and then pull it out.



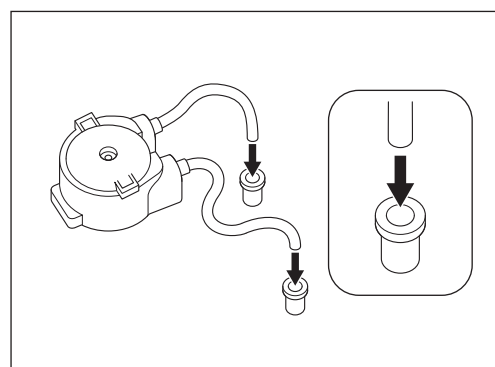
- 6) Mount the Connector Rings in the Irrigation Tubes of the new Irrigation Pump (option). Make sure the Ring is oriented correctly.



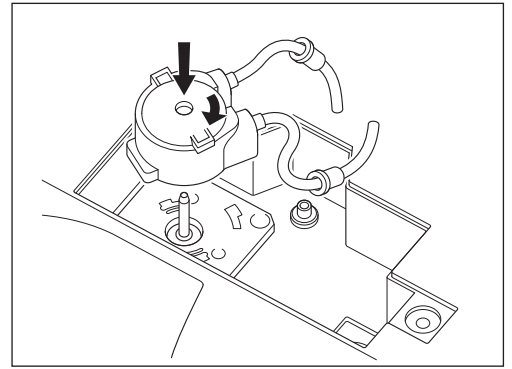7) Align the new Irrigation Pump (option) with the Drive Shaft. Turn clockwise until it clicks.



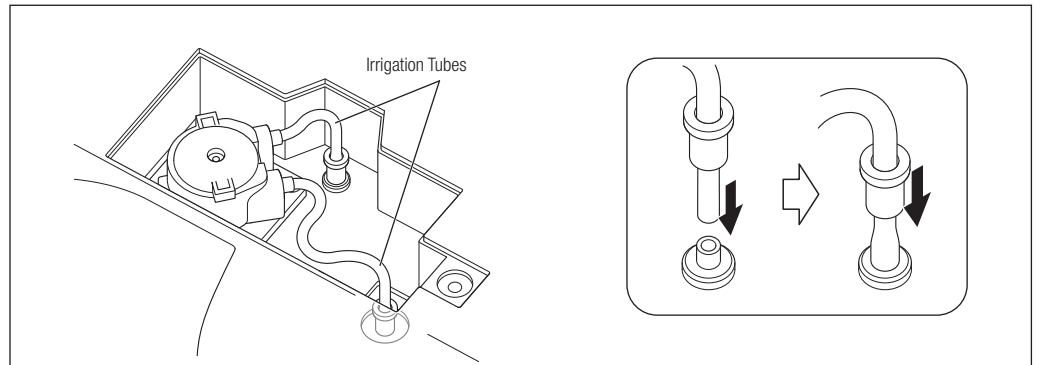8) Mount the Irrigation Tube. Press the Connector Ring firmly into the Control Unit until it is fully pressed on.




9) Align the Irrigation Pump Cover Hook and hole on the Control Unit. Mount the Cover.

* For details on the Optional Irrigation Pump, refer to "21 Spare Parts List."

CAUTION

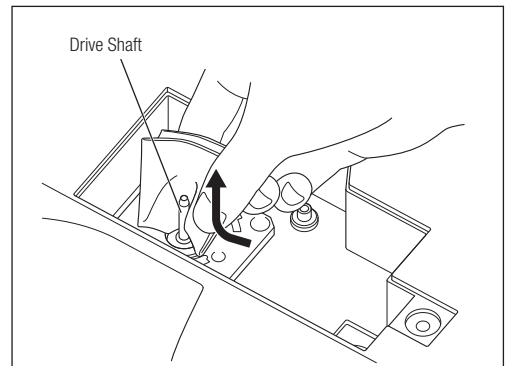- Before replacing the Irrigation Pump, wipe off excess water from the pump and Drive Shaft. Wet drive shaft and rollers can be slippery and cause improper operation.
- Wipe dirt and water off the Drive Shaft from the bottom up.
- Insert the replacement Irrigation Pump straight into the Drive Shaft in a slow and gentle manner to prevent damaging the pump rollers.
- After replacing the Irrigation Pump, run this product for about 10 seconds with Irrigation Mode set to Bottle and Irrigation Volume set to maximum so the Irrigation Tube adapts to the new Pump.
- Ensure there are no kinks or twists in the Irrigation tube. If tube is set incorrectly, Irrigation Water may not be supplied.
- Make sure that the Tube is not caught under the Irrigation Pump Cover when closing the Irrigation Pump Cover.
- Only use the dedicated Irrigation Pump for Varios Combi Pro. Other pumps cannot be used.



NOTICE

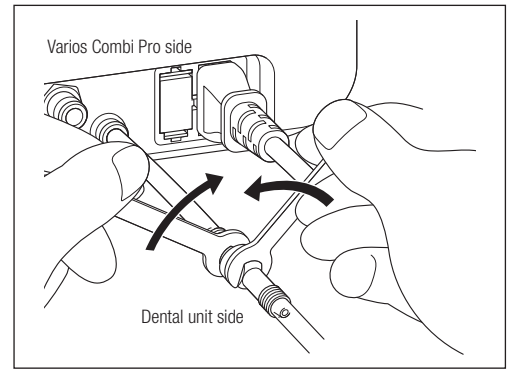
- Clean the Drive Shaft periodically with a lint-free cloth dampened with disinfectant alcohol. Debris on Drive Shaft may cause incorrect pump operation.
- The pump is a wear item. If the irrigation volume decreases markedly, replace the pump.

10-3 Changing the Water Filter

If you use Tap Water, change the Water Filter once a year.

If you feel that the water volume has dropped, change the Water Filter before a year has elapsed.

- 1) Close the water valve of the dental unit.
- 2) Place the Control Unit on a cloth, etc. in case water leaks.
- 3) Use two spanners (5x8) and turn in the directions shown in the figure.
- 4) Remove the Water Filter Case and take out the Water Filter.




- 5) Place the new Water Filter with the O-ring on the Varios Combi Pro side and reassemble by following the disassembly steps in reverse.

* Refer to "21 Spare Parts List" for details about the optional Water Filter.



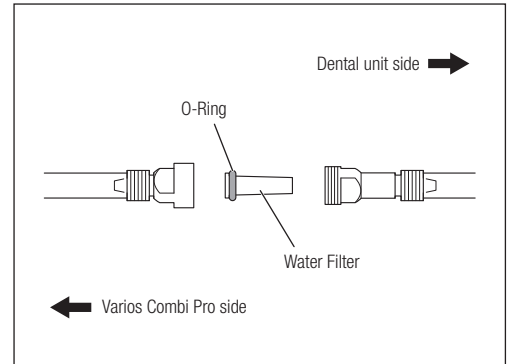
- Make sure that the Water Filter is placed in the correct orientation. Otherwise the Filter will not work effectively.



10-4 Checking the Air Filter

When symptoms such as reduced Power Level or frequent clogging of powder are observed, release water by pressing the tip of the Air Filter at the bottom of the Control Unit.

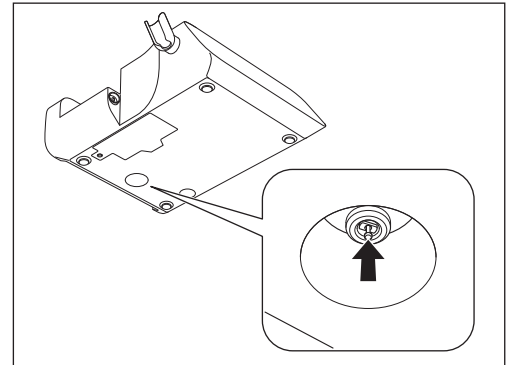
If sufficient Power Level cannot be obtained as a result of prolonged use, the VCP Element may have clogged. If this happens, contact your Authorized NSK Dealer.



10-5 Replacing the fuse

- 1) Turn OFF the Power Switch.
- 2) Unplug the AC power cord from the wall outlet.
- 3) Remove the Fuse Holder located at the back of the Control Unit while keeping the nails at both ends pushed inward.
- 4) Replace the fuse with a new one.
- 5) Push the Fuse Holder back into the place.

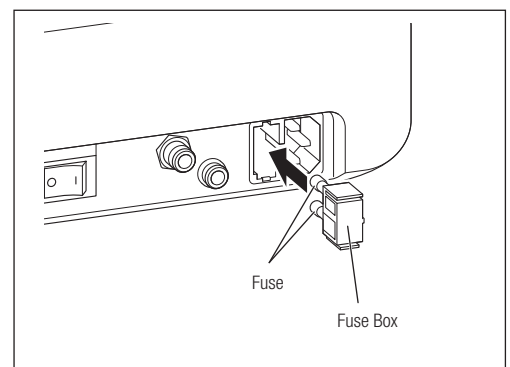* Refer to "21 Spare Parts List" for details about replacement Fuses.



- Only use NSK recommended fuses. Failure may occur if other fuses are used.
- If a fuse blows but you cannot establish the reason, contact your Authorized NSK Dealer.

NOTICE • If the Fuse Box does not come out easily, use a hard-tipped implement to push the nails while pulling the Fuse Box out.

11 Other Functions

11-1 Initialized Program (Factory Setting)

The setting value for each of the modes are stored in this product. These values can be initialized to the factory settings.


- 1) Turn the POWER switch ON while depressing the Foot Control button B.
- 2) "Clr" is displayed on the LCD Panel. While "Clr" is displayed, release the Foot Control button B and then depress the button D to start initializing.
- 3) "Fin" is displayed on the LCD Panel when the initialization is complete. An alarm sound is heard and the product starts in the normal mode. (Refer to the table below for the initial settings.)

| | Ultrasonic Mode | Powder Mode | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| | | Prophy Mode | Perio Mode |
| Ultrasonic Mode selection | Perio | - | |
| Power Level | 1 | 1 | 1 |
| Irrigation Mode | Bottle | - (fixed to tap water) | |
| Irrigation Volume | 10 | 10 | 10 |

ULTRASONIC

11-2 Using the Tip Holder (for Ultrasonic Tip, option)

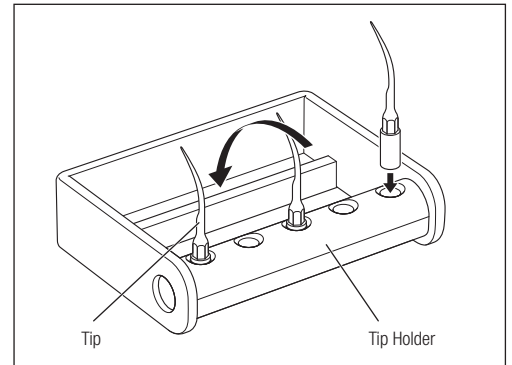
- Use the Tip Holder to store the Tips after removing them from the Handpiece.
- The Tip Holder is autoclavable. Up to 5 Tips can be sterilized at the same time. Rotate the Holder in the direction of the arrow so the Tips are set in the frame for sterilization.



11-3 Basic Water Level Setting

Basic Water Level can be adjusted depending on the supply water pressure in the usage environment. If the Irrigation Volume is too large or too small even when adjusted by the Irrigation Volume Keys, follow the procedure below to adjust the Basic Water Level.

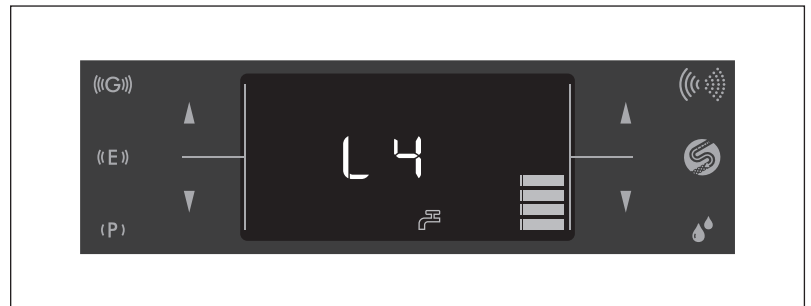
- 1) Turn the POWER switch of the Control Unit to ON.
- 2) Touch the Operation Mode Select Key to select Powder Mode.
- 3) Touch and hold the Irrigation Mode Select Key for 2 seconds. Alarm sounds are heard and the LCD panel switches to the Basic Water Level adjustment mode.
- 4) Touch the Irrigation Volume Keys (▲/▼) to change the Basic Water Level ("L1" - "L5"). Adjust the Level as necessary.
- 5) Touch and hold the Irrigation Mode Select Key for 2 seconds to save the selected level to memory. An alarm sound is heard and the selected level is saved, and then the LCD Panel switches back to normal mode.



Basic Water Level adjustment mode [Water Level 4]

NOTICE • Basic Water Level returns to "L4" when this product is initialized to the factory defaults. Set the Basic Water Level again after initializing.

Reference

| Level | Water volume |
|--------------------|--|
| L5 |  Large |
| L4 (Initial value) | |
| L3 | |
| L2 | |
| L1 | |

12 Periodical Maintenance Checks

Refer to the check sheet below and perform periodical maintenance checks every three months. Contact your Authorized NSK Dealer if any abnormalities are found.

| Points to Check | Details |
|---|--|
| Ultrasonic Handpiece | Operate the Ultrasonic Handpiece to confirm there is no abnormal vibration, noise, heat, etc. Also check that the LED lights and water flows. |
| Chamber Cap | Check that there are no large/deep scratches. |
| Powder Spray | After filling the powder chamber, spray powder into a spittoon, etc., and confirm that powder is not leaking from connections other than the Nozzle Tip connection. |
| Water Spray | After filling the powder chamber, spray powder into a spittoon, etc., and confirm that water is not leaking from connections other than the Nozzle Tip connection. |
| Chamber | Check that there are no large/deep scratches. |
| Attaching/removing the Handpiece, Handpiece Hose, Irrigation Bottle and Chamber | Check that they can be attached and removed smoothly. If they are too loose or too tight, the O-rings may be damaged or deteriorated. Replace O-rings. (Refer to "10 Care and Maintenance.") |

Additional safety information:

Periodical safety testing shall be performed every two years following IEC 62353 (EN 62353), in accordance with test procedure OM-DE0947EN. As periodical safety testing is limited exclusively to professional dental installers who have been trained and qualified under the control of NSK, contact your authorized NSK dealer.

13 Error Code

"Error" and an Error Code are displayed on the LCD Panel of the Control Unit if this product stops operating due to malfunction, excessive pressure, disconnection, or incorrect operation. Depress the Foot Control button D to perform the error check again. If the problem is not detected, the error status is released and this product become operable. If the Error Code is still displayed, refer to the table below and take the necessary steps to resolve the problem.

| Error Code | Description of Error | Check/Remedy |
|------------|--|---|
| 0 | System Error | Turn on the Control Unit power again. Contact your Authorized NSK Dealer if the error does not disappear. |
| 1 | 24V voltage abnormality | |
| 2 | 12V voltage abnormality | |
| 3 | Pump current abnormality | Check the connection of the Irrigation Pump. If the problem still persists, contact your Authorized NSK Dealer. |
| 4 | Air pressure abnormality | Check the incoming air pressure. If the problem still persists, contact your Authorized NSK Dealer. |
| 5 | Heater voltage abnormality | Turn on the Control Unit power again. Contact your Authorized NSK Dealer if the error does not disappear. |
| 6 | Heater current abnormality | |
| 7 | Heater temperature abnormality | Check the water circuit and supply water to the Control Unit. Leave the Control Unit until it cools down before using it. Contact dealer if the error does not disappear. |
| 8 | Foot Control communication abnormality | Check the connection of the Foot Control. If the problem still persists, contact your Authorized NSK Dealer. |
| 9 | Ultrasonic Handpiece abnormality | Check the connection of the Handpiece. If the problem still persists, contact your Authorized NSK Dealer. |
| 12 | Touch sensor communication abnormality | Turn the POWER switch to OFF and then to ON. If the problem still persists, contact your Authorized NSK Dealer. |
| 13 | Error in self-check of the Ultrasonic Unit | |
| 14 | Ultrasonic Unit system error | |

14 Troubleshooting

If you are experiencing problems, please check the following before contacting your Authorized NSK Dealer.

(Ultrasonic Mode and Powder Mode)



| Problem | Cause | Remedy |
|---|---|---|
| Beeping sound | Power was turned on while the Foot Control was depressed. | Release the Foot Control and turn the POWER switch to ON. |
| | Abnormal heating of the Control Unit. | Stop operation and leave until Control Unit cools. |
| Touch panel does not react well or touched key is not recognized correctly. | Calibration is slightly misaligned due to static electricity, exogenous noise, etc. | Turn the POWER switch to OFF and then to ON. |
| | Key was not touched at the center. | Touch the center of the key. |
| <ul style="list-style-type: none"> Water does not stop The water level cannot be adjusted | Damage or wear of the O-Ring. | Follow the procedure in "10-1-5 Chamber Base Connector" to replace the O-Ring. |
| | Foreign material has become clogged in the water route. | Perform Auto-Cleaning. If the symptom is still not resolved, contact your Authorized NSK Dealer. |

(Ultrasonic Mode)



| Problem | Cause | Remedy |
|---|---|--|
| Alarm sounds are heard, and the Ultrasonic Mode Display (P/E/G) and "ULTRASONIC" blink alternately when the Foot Control button D is depressed. | The sensor built in to the Handpiece Holder is dirty and mistakenly detects mounting of the Handpiece. | Wipe the sensor clean. |
| No/Poor vibration. | The AC power cord plug is not connected to the wall socket or electricity is not supplied to the wall socket. | Check the connection. |
| | The Fuse is burned out. | Refer to "10-5 Replacing the fuse" and replace the fuse. |
| | The Tip is not tightened firmly. | Rotate the Tip Wrench until it makes a click sound and cannot rotate any further. If the problem still persists, replace the Tip Wrench as it may be worn out. |
| | Worn Tip. | Replace the Tip. |
| | The screw parts of the Handpiece and Tip are not clean. | Wipe them clean. |
| | The screw parts of the Handpiece are worn out as a result of a long time of use. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| | Power has not been correctly adjusted for the Tip. | Adjust the power so it does not exceed the maximum power level mentioned in Tip-Power Guide or on the Tip case label. |
| | The Foot Control is disconnected. | Connect the Foot Control Cord Plug correctly. |
| | Failure of vibration device in the Handpiece. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| | Failure of internal components of the Foot Control. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| The Tip is bent or broken. | The sensor built in to the Handpiece Holder is dirty and mistakenly detects mounting of the Handpiece. | Wipe the sensor clean. |
| | Power has not been properly adjusted for the Tip. | Adjust the power so it does not exceed the maximum power level mentioned in Tip-Power Guide or the Tip case label. |
| The Tip falls off. | The Tip is not tightened firmly. | Tighten the Tip until the Tip Wrench clicks. |

| Problem | Cause | Remedy |
|--|--|--|
| Noise from the Handpiece. | Power has not been properly adjusted for the Tip. | Adjust the power so it does not exceed the maximum power level mentioned in Tip-Power Guide or the Tip case label. |
| | The Tip is not tightened firmly. | Rotate the Tip Wrench until it makes a click sound and cannot rotate any further. If the problem still persists, replace the Tip Wrench as it may be worn out. |
| | Failure of vibration in the Handpiece or the Control Unit. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| The Handpiece is overheating. | Power has not been properly adjusted for the Tip. | Adjust the power so it does not exceed the maximum power level mentioned in Tip-Power Guide or the Tip case label. |
| | The Tip is not tightened firmly. | Rotate the Tip Wrench until it makes a click sound and cannot rotate any further. If the problem still persists, replace the Tip Wrench as it may be worn out. |
| | The screw parts of the Handpiece and Tip are not clean. | Wipe them clean. |
| | The screw parts of the Handpiece are worn out as a result of a long time of use. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| | The Irrigation Volume is insufficient or irrigation has stopped. | Irrigate at an adequate volume. |
| | Vibration failure in the Handpiece or the Control Unit. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| No Irrigation supply and/or unstable Irrigation supply (when using the Bottle) | The Irrigation Tube is twisted. | Straighten the twisted Irrigation Tube. |
| | Time to replace the Irrigation Pump. | Replace with a new Irrigation Pump (Refer to 10-2 Changing the Irrigation Pump). |
| No/Poor water supply. (when using Tap Water) | Water is not supplied to the Control Unit. | Check the water circuit so that water is supplied to the Control Unit. Supply water pressure: 0.1 - 0.3MPa |
| | The Irrigation Volume is set to "0." | Adjust to the adequate Irrigation Volume using the Irrigation Volume setting. |
| | Water supply may be unstable when the Irrigation Volume is insufficient. | This is not a malfunction. Increase the Irrigation Volume in the Irrigation Volume setting. |
| | Water Filter is clogged with foreign substances. | Replace the water filter with a new one. |
| Water leakage. | The Irrigation Tube is not connected correctly. | Firmly insert the Irrigation Tube all the way into the Irrigation Connector. |
| | O-Ring at the Handpiece Cord is worn or damaged. | Replace with a new O-ring by following the procedures in "10-1-1 Handpiece Cord." |
| | The water circuitry in the Control Unit is damaged. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| Handpiece LED does not light. | The Handpiece is not connected to the Handpiece Cord correctly. | Firmly insert the Handpiece all the way into the Handpiece Cord. |
| | Failure in the Control Unit. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |

(Powder Mode)



| Problem | Cause | Remedy |
|---|--|--|
| Alarms are heard, and "POWDER" and the tooth icon blink alternately when the Foot Control button D or B is depressed. | The sensor built in to the Handpiece Holder is dirty and mistakenly detects mounting of the Handpiece. | Wipe the sensor clean. |
| | Chamber is not attached securely. | Attach the Chamber securely until the confirmation sound is heard. |
| Confirmation sound cannot be heard, or the icon that indicates Prophy Mode or Perio Mode is not displayed when the Chamber is attached. | Failure in the Control Unit (disconnection). | Contact your Authorized NSK Dealer.* |

| Problem | Cause | Remedy |
|--|---|---|
| Air and powder are not supplied. Or air and powder are supplied but the pressure is not strong enough and cleaning power is also weak. | The inside of the Nozzle Tip is clogged with powder. | Replace the Nozzle Tip. |
| | The inside of the Handpiece is clogged with powder. | Clean the Nozzle base with the supplied Cleaning wire (small) and Nozzle end with the cleaning file. In addition, clean the inside of the Handpiece with the Cleaning wire (large). If powder and air do not flow after being cleaned as described above, perform Ultrasonic Cleaning with warm water. (Refer to "9-3 Ultrasonic cleaning (weekly).") |
| | The inside of the Chamber is clogged with powder. | Remove powder from inside the Chamber by following the procedures in "9-1-5 Chamber and Handpiece Hose". |
| | Powder has partially solidified with water, etc., in the air passage. | Remove powder from inside the passage by following the procedures in "9-1-4-2 Auto-Cleaning." |
| | Powder container has been left open exposing powder to the air. | Dispose of the powder and use new powder. |
| | Water is mixed in supply air. | Open the filter in the air supply circuit to drain the compressor, and check that water has not accumulated inside the air filter and compressor drain. |
| | The VCP Element is clogged. | Contact your Authorized NSK Dealer.* |
| Water leaks from between the Handpiece and Handpiece Hose. | The O-ring is scratched. | Replace the O-ring in the Handpiece joint section, apply the supplied turbine oil and rub it in with your finger. (Refer to "10-1-2 Handpiece Hose (for Prophy use and Perio use).") |
| Cannot remove the Chamber because the Lock Button cannot be pressed | The button is locked | Follow the procedure in "Releasing the Lock Button" in "9-1-5 Chamber and Handpiece Hose" to release the Lock. If the symptom is not resolved, contact your Authorized NSK Dealer.* |
| Cannot close the Chamber Cap. | Powder is adhered to the threads of the Chamber and/or the Chamber Cap. | Clean the threads of the Chamber Cap (Refer to "Cleaning Chamber Cap" in "9-1-5-2 Cleaning and disinfection"). |

* Cannot be fixed at clinics, etc.

15 Specifications

<Control Unit>

| | |
|-------------------------------------|---|
| Model | Varios Combi Pro |
| Power source | AC100V - 240V 50/60Hz |
| Drive frequency | 28 - 32kHz |
| Power input | 78 - 98VA |
| Maximum output | 11W |
| Supply air pressure | 0.55 - 0.75MPa (5.5 - 7.5kgf/cm ²) |
| Supply water pressure | 0.1 - 0.3MPa (1.0 - 3.0kgf/cm ²) |
| Bottle volume | 400ml |
| Irrigation Volume (Ultrasonic Mode) | 5.0 - 70.0mL/min (Irrigation Mode: Bottle/Tap water, Supply water pressure: 0.2MPa) |
| Dimension | W225 × D290 × H162mm (Including the Irrigation Bottle and Chamber) |
| Weight | 2.7kg (Irrigation Bottle and Chamber not included) |

<Foot Control>

| | |
|-------------|---|
| Model | FC-79 |
| Cord length | 2.5m |
| Dimensions | W204 × D157 × H128mm (including Hanger) |
| Weight | 415g (including Hanger) |

<Ultrasonic Handpiece>

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Model | VA2-LUX-HP |
| Cord length | 1.8m (Connector not included) |
| Type of oscillation | Piezo type |
| Light | White LED |
| Dimensions | φ20 × 103mm (cord not included) |
| Weight | 54g (cord not included) |

<Powder Handpiece>


| | |
|-------------|---------------------------------|
| Model | PROPHY-HP/PERIO-HP |
| Hose length | 1.8m (Connector not included) |
| Dimensions | φ16 × 107mm (cord not included) |
| Weight | 33g (cord not included) |

| | Temperature | Humidity | Atmospheric pressure |
|--|-------------|------------|----------------------|
| Use environment*2 | 0 - 40°C | 35 - 75%*1 | – |
| Transportation and Storage environment | –10 - 50°C | 10 - 85% | 500 - 1,060hPa |

*1 Without condensation

*2 The use of this product under conditions other than specified above may cause malfunction.

16 Classification of Equipment

- Type of protection against electric shock:
 - Class I equipment
- Degree of protection against electric shock:
 - Type B applied part:  (Applied parts: Ultrasonic Tip, Ultrasonic Handpiece, Nozzle Tip, Powder Handpiece)
- Method of sterilization or disinfection recommended by the manufacturer:
 - Refer to 9. Post-use Maintenance
- Degree of protection against ingress of water as detailed in the current edition of IEC 60529:
 - Foot Control: IPX1 (Protected against vertically falling water drops)
- Degree of safety of application in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide:
 - Equipment NOT suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
- Mode of operation:
 - Continuous operation

17 Operation Principle


































Ultrasonic Mode

A sinusoidal electrical signal is delivered by the generator at ultrasonic frequency ($f > 20\text{kHz}$). This signal is applied to the 'piezoelectric ceramic' located inside the transducer. Piezoelectric ceramic converts this signal into mechanical vibrations. These vibrations are at the same ultrasonic frequency as the electrical signal. The mechanical vibrations are propagated towards the distal end of the transducer. The "TIP" insert, which is attached at the distal end of the transducer, vibrates at ultrasonic frequencies and to achieve the purpose of the equipment.

Powder Mode

Sprays powder using air pressure to clean the tooth surface.

18 Symbol

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | This product can be sterilized in a steam sterilizer at 135°C. |  | Batch Code |
|  | Conforms to CE European Directive of "Medical device directive 93/42/EEC." |  | Serial number |
|  | Authorized representative in the European community. |  | Caution |
|  | Consult operation instructions. |  | Temperature |
|  | Protected against dripping |  | Drinkable tap water |
|  | Marking on the outside of Equipment or Equipment parts that include RF transmitters or that apply RF electromagnetic energy for diagnosis or treatment |  | Lamp / lighting / illumination |
|  | Do not reuse. |  | Visual check |
|  | Keep Dry. |  | Ultrasonic bath |
|  | EOG sterilization |  | Humidity limitation |
|  | GS1 DataMatrix for Unique Device Identifier. |  | Atmospheric pressure limitation |
|  | This product can be washed using a washer-disinfector. |  | Catalog number (Order code) |
|  | Manufacturer. |  | Medical Device |
|  | Follow the waste of electric and electronic equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) for product and accessory disposal |  | Unique Device Identifier |
|  | Type B applied part. |  | Authorized representative for Switzerland |
|  | For indoor use only. |  | Date of manufacture |
|  | Temperature limitation |  | Importer |
|  | Use-by date | | |

19 Warranty

NSK products are warranted against manufacturing errors and defects in materials. NSK reserves the right to analyze and determine the cause of any problem. Warranty is voided should the product be not used correctly or for the intended purpose or has been tampered with by unqualified personnel or has had non NSK parts installed. Replacement parts are available for seven years beyond discontinuation of the model.

20 Option Parts List

| Model | REF | Remarks |
|----------------------------------|------------|--|
| MG-4H Multi Gauge | Z109400 | |
| Tip Holder | Z221080 | |
| Perio Set | Y1003042 | Powder Handpiece (For Perio use) Chamber (For Perio use) Handpiece Hose (For Perio use) Perio-Mate powder Perio-Mate Nozzle Tip (40 pieces) Perio-Mate Nozzle Tip Remover |
| Powder Handpiece (For Perio use) | T1077001 | |
| Chamber (For Perio use) | U1135019 | |
| Handpiece Hose (For Perio use) | T1053001 | |
| Nozzle (For Perio use) | T1077012 | |
| Perio-Mate powder | Y900938 | 2 bottles, each bottle contains 160g |
| Perio-Mate Nozzle Tip | Y1002741 | 40 pieces |
| Perio-Mate Nozzle Tip Remover | T1043751 | |
| Water Pressure Reducing Valve | U1135093 | |
| CLA-20 | ZA11900108 | Cleaning Adaptor for Perio Handpiece / Prophy Handpiece. |

21 Spare Parts List

| Model | REF | Remarks |
|-------------------------------------|----------|---|
| FC-79 | Z1256001 | Foot Control |
| VCP Bottle Set | U1135017 | Bottle and Cap (Irrigation Bottle, Irrigation Bottle Cap) |
| VCP Bottle Cap | U1135116 | Cap only (Irrigation Bottle Cap) |
| VCP Bottle (Bottle only) | U1135099 | Bottle only (Irrigation Bottle) |
| O-ring set (Irrigation Bottle) | Y1003544 | One each of Thick and Thin O-ring |
| O-ring | Y1003546 | 1 for the Handpiece Cord |
| O-ring set (Chamber Base Connector) | Y1003435 | |
| O-ring set (Handpiece Hose) | Y1003500 | One each of Thick and Thin O-ring Common Parts for Prophy use and Perio use |
| O-ring set (Nozzle) | Y1003501 | One each of Thick and Thin O-ring Common Parts for Prophy use and Perio use |
| O-ring | Y1003545 | For Chamber Cap |
| Handpiece Cord | E351054 | |
| Ultrasonic Handpiece | E351050 | |
| Sterilization case | Z1035001 | For Ultrasonic parts |
| Tip Wrench (CR-10) | Z221076 | |
| Water Filter Set | U1135078 | |
| Water Filter | U387042 | |
| Spanner Wrench (5x8) | Y1001301 | 2 |
| Irrigation Pump | U1135079 | Connector ring excluded |
| FLASH pearl | Y900698 | 4 bottles, each bottle contains 300g |
| Prophy Set | Y1003771 | Powder Handpiece (For Prophy use) Chamber (For Prophy use) Handpiece Hose (For Prophy use) FLASH pearl (5 sachets) Replacement O-ring |
| Chamber (For Prophy use) | U1135018 | |
| Handpiece Hose (For Prophy use) | T1051001 | |
| Powder Handpiece (For Prophy use) | T1074001 | |
| Nozzle (For Prophy use) | T1074012 | |
| Chamber Cap | U1135089 | Cap only |
| Cleaning File | T798092 | For the distal end and inside the Nozzle |
| Cleaning Wire (S) | T798095 | For the root of the Nozzle |
| Cleaning Wire (L) | T798091 | For parts other than those above |
| Cleaning Brush | T798093 | |

| Model | REF | Remarks |
|----------------|-------------|----------------------|
| Unlocking tool | U1135256 | |
| Ring Wrench | T1074601 | |
| Turbine Oil | Z016112 | |
| Air Hose | D0914406036 | |
| Fuse | D1202220010 | Rated value T2AH250V |


22 Disposing product

In order to avoid the health risks of operators handling the disposal of medical equipment, as well as the risks of environmental contamination caused thereof, a surgeon or a dentist is required to confirm the equipment is sterile. Ask specialist firms who are licensed to dispose of specially controlled industrial wastes, to dispose the product for you.

23 EMC Information (Electromagnetic Compatibility Information)

| Guidance and manufacturer's declaration - Electromagnetic Emissions | | |
|---|------------------------|--|
| The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the product should assure that it is used in such an environment. | | |
| Emissions test | Compliance | Electromagnetic environment - guidance |
| RF emissions CISPR11/EN55011 | Group 1 Class B | The product uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. The product is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. |
| RF emissions CISPR11/EN55011 | Group 1 Class B | |
| Harmonic emissions EN/IEC61000-3-2 | class A (except 120V) | |
| Voltage fluctuations/flicker emissions EN/IEC61000-3-3 | Complies (except 120V) | |

| Guidance and manufacturer's declaration - Electromagnetic Immunity | | | |
|---|---|---|--|
| The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the product should assure that it is used in such an environment. | | | |
| Immunity test | EN/IEC60601 test level | Compliance level | Electromagnetic environment - guidance |
| Electrostatic discharge (ESD) EN/IEC61000-4-2 | ±(2,4)6kV contact ±(2,4)8kV air | ±(2,4)6kV contact ±(2,4)8kV air | Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. |
| Electrical fast transient/burst EN/IEC61000-4-4 | ±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines | ±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. |
| Surge EN/IEC61000-4-5 | ±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth | ±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. |
| Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines EN/IEC61000-4-11 | <5% Ut (>95% dip in Ut) for 0.5 cycles 40% Ut (60% dip in Ut) for 5 cycles 70% Ut (30% dip in Ut) for 0.5 cycles <5% Ut (>95% dip in Ut) for 5 sec | <5% Ut (>95% dip in Ut) for 0.5 cycles 40% Ut (60% dip in Ut) for 5 cycles 70% Ut (30% dip in Ut) for 0.5 cycles <5% Ut (>95% dip in Ut) for 5 sec | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the product requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the product be powered from an uninterruptible power supply or a battery. |
| Power frequency (50/60Hz) magnetic field EN/IEC61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment. |
| NOTE: 'Ut' is the AC mains voltage prior to application of the test level. | | | |

| Guidance and manufacturer's declaration - Electromagnetic Immunity | | | |
|--|--------------------------|------------------|---|
| The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the product should assure that it is used in such an environment. | | | |
| Immunity test | EN/IEC60601 test level | Compliance level | Electromagnetic environment - guidance |
| Conducted RF EN/IEC61000-4-6 | 3Vrms 150kHz to 80MHz | 3Vrms | Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the product, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80MHz to 800MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800MHz to 2.5GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer, and (d) is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters as determined by an electromagnetic site survey(a) should be less than the compliance level in each frequency range(b). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:  |
| Radiated RF EN/IEC61000-4-3 | 3V/m 80MHz to 2.5GHz | 3V/m | |
| NOTE 1: At 80MHz and 800MHz, the higher frequency range applies. | | | |
| NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. | | | |
| a: Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the product is used exceeds the applicable RF compliance level stated above, the product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the product. | | | |
| b: Over the frequency range 150kHz to 80MHz, the field strength should be less than 3V/m. | | | |

| Cables and accessories | Maximum length | Complies with |
|------------------------|-------------------|---|
| Handpiece Cord | 2.0m (Unshielded) | RF emissions, CISPR11 ClassB/Group1 |
| Foot Control Cord | 2.5m (Unshielded) | Harmonic emissions, (except 120V) EN/IEC61000-3-2 |
| AC Power Cord | 3.0m (Unshielded) | Voltage fluctuations/flicker emission, (except 120V) EN/IEC61000-3-3 Electrostatic discharge (ESD): EN/IEC61000-4-2 Electrical fast transient/burst: EN/IEC61000-4-4 Surge: EN/IEC61000-4-5 Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines: EN/IEC61000-4-11 Power frequency(50/60Hz) magnetic field: EN/IEC61000-4-8 Conducted RF: EN/IEC61000-4-6 Radiated RF: EN/IEC61000-4-3 |

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the product

The product is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the product can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the product as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

| Rated maximum output power of transmitter | Separation distance according to frequency of transmitter m | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| | 150kHz to 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ | 80MHz to 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800MHz to 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance “d” in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where “P” is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80MHz and 800MHz, the higher frequency range applies.

NOTE2 : These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Vielen Dank für den Kauf des Varios Combi Pro. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung mit Anweisungen zur Bedienung, Handhabung und Wartung vor der Benutzung sorgfältig durch, sodass Sie das Produkt durch eine ordnungsgemäße Benutzung über viele Jahre benutzen können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als künftige Referenz in greifbarer Reichweite der Benutzer auf. Die Bedienungsanleitungen der verbundenen Produkte haben die folgenden Referenznummern:

| Titel der Bedienungsanleitung | Nr. der Bedienungsanleitung |
|---|-----------------------------|
| Cleaning Adaptor CLA-20 For Prophy Handpiece / For Perio Handpiece | OM-DE0906MA |

– Inhalt –

| | |
|--|-----|
| 1. Benutzer und Verwendungszweck | 55 |
| 2. Sicherheitsanweisungen für die Handhabung und Bedienung | 55 |
| 3. Zubehörteile-Liste | 59 |
| 4. Bezeichnung der Komponenten | 60 |
| 5. Installation | 62 |
| 6. Überprüfung vor der Behandlung | 65 |
| 7. Verwendung des Ultrasonic-Modus | 66 |
| 8. Verwendung des Powder-Modus | 70 |
| 9. Wartung nach der Behandlung | 75 |
| 10. Pflege und Wartung | 93 |
| 11. Weitere Funktionen | 98 |
| 12. Regelmäßige Wartungsprüfungen | 98 |
| 13. Fehlercode | 99 |
| 14. Problembehandlung | 100 |
| 15. Technische Daten | 102 |
| 16. Geräteklassifikation | 103 |
| 17. Funktionsprinzip | 103 |
| 18. Symbol | 104 |
| 19. Garantie | 104 |
| 20. Zubehörliste | 105 |
| 21. Ersatzteilliste | 105 |
| 22. Entsorgung des Produkts | 106 |
| 23. EMV Informationen (Elektromagnetische Verträglichkeit) | 106 |

* Manche Abschnitte sind mit den nachfolgenden Symbolen gekennzeichnet, um zu verdeutlichen, auf welchen Modus der Abschnitt Bezug nimmt.

 Beschreibung mit Bezug auf den Ultrasonic-Modus

 Beschreibung des Prophy-Modus unter Powder-Modus

 Beschreibung des Perio-Modus unter Powder-Modus



1 Benutzer und Verwendungszweck

Benutzer: Zahnärzte, Zahnhygieniker

Verwendungszweck: Reinigen der Zahnoberfläche, Entfernen von Plaque und Zahnstein, Zahnresektion, Erweitern oder Reinigen des Wurzelkanals, Entfernen von Fremdstoffen, Obturation des Wurzelkanals, Haftungsoptimierung von festsitzendem Zahnersatz, Inzision oder Entfernen von parodontalem Gewebe

2 Sicherheitsanweisungen für die Handhabung und Bedienung

- Lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch und benutzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs und entsprechend der Anweisungen.
- Die Sicherheitsanweisungen sind dafür vorgesehen, mögliche Gefahren zu verhindern, die Körperverletzungen oder Beschädigungen am Gerät verursachen können.
Die Sicherheitsanweisungen werden gemäß der Schwere des Risikos wie folgt klassifiziert.

| Klasse | Ausmaß und Schwere der Gefährdung oder Schädigung |
|---|---|
|  WARNUNG | Risiko, das zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. |
|  VORSICHT | Ein mögliches Risiko, das zu leichten bis mittleren Personen- oder Sachschäden führen kann, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. |
| HINWEIS | Allgemeine Produktinformationen, die besonders hervorgehoben werden, um Störungen oder Leistungsminderungen zu vermeiden. |

⚠️ WARNUNG

<Ultrasonic-Modus und Powder-Modus>



- Berühren Sie das Stromkabel nicht mit feuchten Händen. Der Kontakt mit feuchten Händen kann Stromschläge verursachen.
- Von explosiven Stoffen und entflammbarem Material fernhalten.
- Bei Überhitzung des Produkts oder wenn Brandgeruch am Produkt festgestellt wird, ist umgehend der Strom abzuschalten und der Netzstecker zu ziehen. Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose ZUR VERMEIDUNG EINES STROMSCHLAGS.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Patienten mit Herzschrittmachern, da die Gefahr besteht, dass das Gerät Auswirkungen auf den Herzschrittmacher hat.
- Das System ist für einen einwandfreien Betrieb bei einer Temperatur von 0 - 40 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 - 75% und ohne Kondenswasser in der Steuereinheit ausgelegt. Der Einsatz außerhalb der angegebenen Umgebungsbedingungen kann zu Störungen führen.
- Lassen Sie kein Wasser oder flüssige Desinfektionsmittel ins Innere des Steuergerätes gelangen. Dies könnte Kurzschlüsse, Feuer und/oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Ein wiederholtes Ein- und Ausschalten des Netzschalters kann zu einem Durchbrennen der Sicherung führen.
- Wenn sich Wassertropfen, Chemikalien, Lösungsmittel oder antiseptische Lösung an der Steuereinheit, dem Handstück, dem Handstückkabel, dem Handstückschlauch etc. befinden, reinigen Sie diese sofort. Anderenfalls kann es zu Verfärbungen oder Verformungen kommen.
- Schließen Sie das Gerät an eine Wasserversorgung für Trinkwasser mit einem Wasserdruck zwischen 0,1 und 0,3 MPa an. Bei falschem Wasserdruck kann es zu unzureichender Wasserversorgung, Ausfällen oder Funktionsstörungen kommen.
- Verwenden Sie einen Wasserenthärter, etc., um den Härtegrad des Wassers zu senken, da die Verwendung von Wasser mit einem hohen Härtegrad Mineral- oder Kalkablagerungen im Wasserkreislauf verursachen könnte, was zu Problemen wie unzureichender Wassermenge, Betriebsproblemen oder einem Ausfall führen kann. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie einen mit einem Wasserfilter ausgestatteten Wasserschlauch, um einem durch Fremdkörper im Leitungswasser bedingten Geräteausfall vorzubeugen, und befolgen Sie „10-3 Austauschen des Wasserfilters“ in der Bedienungsanleitung zum erforderlichen Auswechseln des Wasserfilters.
- Führen Sie keine Sterilisierung mittels UV-Licht aus. Anderenfalls kann es zu Verfärbungen des Handstücks kommen.
- Halten Sie beim Entfernen des Handstückkabels oder Handstückschlauchs den Stecker fest. Beim Ziehen am Kabel oder Schlauch kann es zu Verbindungsfehlern oder Schäden kommen.

<Ultrasonic-Modus>



- Verwenden Sie immer die Wasserversorgung. Unzureichende Wasserversorgung kann zu Überhitzung führen, wodurch es zu Schäden an der Zahnoberfläche Ihres Patienten kommen kann.
- Lassen Sie Ihren Patienten oder Assistenten nicht direkt in die LED am Handstück oder Handstückkabel schauen. Anderenfalls kann es zu Schäden des Sehvermögens kommen.

<Powder-Modus>



- Benutzen Sie das Gerät nicht bei den folgenden Patienten.
 - Patienten mit medizinischen Komplikationen oder Allergien
 - Patienten mit Vorerkrankungen (z.B. Herz-, Lungen- und Nierenfunktionsstörungen oder Bluthochdruck)
 - Patienten mit Atemwegserkrankungen.
 - Patienten mit pathologisch tiefen Alveolartaschen (6 mm oder mehr) oder Schleimhautläsionen. Bei längerer Anwendung des Sprays auf Schleimhäuten oder Speicheldrüsen kann pulverhaltige Luft in die Schleimhäute oder Speicheldrüsen eindringen und zu einem Emphysem führen.
 - Patienten mit schweren Geschwüren im Verdauungstrakt.
 - Patienten mit Nierenfunktionsstörungen.
 - Patienten mit Lungen- oder Herzfunktionsstörungen oder Atembeschwerden.
 - Patienten mit einer künstlichen Herzklappe oder einem künstlichen Gelenk.
 - Patienten mit Allergien. Je nach Verfassung des Patienten kann es in sehr seltenen Fällen zu Allergiesymptomen und Stomatitis kommen. Wenn diese Symptome auftreten, stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein und ziehen Sie einen Arzt hinzu.
- Während der Verwendung sollten der Anwender und sein Assistent immer Schutzbrillen und Gesichtsschutz tragen. Zudem muss während der Verwendung das ausgesprühte Pulver durchgehend abgesaugt werden. Wenn Pulver in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen sofort mit reichlich Wasser aus und ziehen Sie einen Augenarzt hinzu.
- Stellen Sie den Versorgungsluftdruck auf 0,55 - 0,75 MPa ein und verwenden Sie saubere, trockene Luft. Bei falschem Luftdruck kann es zu unzureichendem Spray-Druck (Leistung), Funktionsunfähigkeit oder -störungen kommen.

<Prophy-Modus>



- Sprühen Sie nicht direkt auf den Zement im Wurzelkanal, auf entkalkten Zahnschmelz, Füllungen und auf die Ränder von Zahnprothesen oder -füllungen.

⚠ WARNUNG

<Perio-Modus>



- Achten Sie bei der Verwendung des Perio-Modus darauf, kein Emphysem zu verursachen, indem Sie pulverhaltige Luft in die Alveolartaschen sprühen. Wenn durch die Behandlung im Perio-Modus ein Emphysem verursacht wird, stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein und ziehen Sie einen Arzt hinzu.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei den folgenden Patienten. Bei diesen Patienten kann die Anwendung an den Alveolartaschen zu Bazillämie führen.
 - Patienten mit endokardialer Entzündung
 - Patienten mit einer ansteckenden Krankheit oder Erkrankung
 - Patienten mit einer Immunschwächekrankheit (Neutropenie, Granulozytopenie, Agranulozytose, Diabetes, Hämophilie)
 - Patienten, die einer Strahlenbehandlung, Chemotherapie oder Antibiotikabehandlung ausgesetzt sind
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei den folgenden Patienten. (Ausnahme: Verwendung ohne den Einmal-Düsenaufsatz.)
 - Patienten mit Verletzungen oder Unregelmäßigkeiten in der Mundhöhle.
 - Patienten mit Hyperämien, Blutungen oder Entzündungen in der Mundhöhle.
 - Patienten, die zu Entzündungen oder Wunden an den Mundschleimhäuten neigen.
- Verwenden Sie dieses Produkt allein zur Wartung nach einer Parodontalgrundbehandlung. Verwenden Sie es niemals zu anderen Zwecken.
- Verwenden Sie den Perio-Modus ausschließlich bei Alveolartaschen mit den folgenden Eigenschaften:
 - Alveolartaschen, die auf einer Zahnfleischerkrankung basieren
 - Alveolartaschen unter 6 mm, an denen eine Parodontalgrundbehandlung durchgeführt wurde
- Vor der Verwendung überprüfen Sie die Tiefe der Alveolartaschen mit einer Tiefenmesser oder fotografisch.
- Verwenden Sie ausschließlich das vorgesehene Reinigungspulver. Bei der Verwendung anderer Pulver kann es zu Funktionsstörungen, verringerter Leistung oder Schäden am Wurzelzement und Dentin oder zu einem Emphysem kommen. NSK übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Verwendung anderer als der angegebenen Pulver entstanden sind.
- Der im Produktpaket enthaltene Düsenaufsatz für den Perio-Modus ist steril. Beim Gebrauch dieser Produkte müssen Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen.
 - Der Düsenaufsatz ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Benutzen oder sterilisieren Sie es kein weiteres Mal, da ansonsten Bruchschäden oder Infektionen entstehen können.
 - Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Verpackung NICHT geöffnet oder beschädigt ist. Wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, verwenden Sie den enthaltenen Düsenaufsatz nicht, da er beschädigt oder nicht mehr steril sein kann.
 - Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum auf dem Verpackungsetikett des Düsenaufsatzes. Benutzen Sie keine Produkte, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist, da ansonsten Bruchschäden oder Infektionen entstehen können.

⚠ VORSICHT

<Ultrasonic-Modus und Powder-Modus>



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Bedienungsfunktionen vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung so auf, dass sie für die zukünftige Verwendung leicht auffindbar ist.
- Berücksichtigen Sie beim Betrieb des Produkts immer die Sicherheit des Patienten.
- Der Endnutzer haftet für jegliche Sach- und Personenschäden, die im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Produkts entstehen.
- Der Benutzer ist für die Funktionsprüfung, Wartung und ständige Überprüfung dieses Produkts verantwortlich.
- Dieses Gerät ist nur für die Anwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Stellen Sie die Steuereinheit auf eine ebene Fläche.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen, und nehmen Sie keine Änderungen am Mechanismus vor, es sei denn, dies wird von NSK in dieser Bedienungsanleitung empfohlen.
- Schützen Sie das Produkt vor Stößen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Wenn das Ultraschallhandstück fallen gelassen wird, können der Glasstab oder das Handstück beschädigt werden.
- Bediener und alle anderen Personen in der Umgebung müssen während der Benutzung dieses Produkts Augenschutz und Maske tragen.
- Sollte das Produkt nicht einwandfrei funktionieren, stellen Sie den Einsatz sofort ein und kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.
- Drücken Sie das Handstück beim Anschließen fest und vollständig auf das Handstückkabel und den Handstückschlauch.
- Autoklavieren Sie nicht das Handstückkabel und den Handstückschlauch.
- Benutzen Sie kein Wasser mit hohem Säuregehalt oder Sterilisationslösungen zum Abwischen, Eintauchen oder Reinigen des Produkts.
- Dieses Produkt wird, abgesehen vom Düsenaufsatz, im unsterilen Zustand ausgeliefert und muss vor dem Gebrauch autoklaviert werden. Genauere Angaben finden Sie in „9-2 Sterilisation“.
- Führen Sie in regelmäßigen Abständen Funktionsprüfungen und Wartungen durch.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde, müssen Sie zunächst prüfen, ob es einwandfrei funktioniert, bevor Sie es am Patienten anwenden.
- Es wird empfohlen, ein Reservegerät für den Fall eines Ausfalls während der Behandlung verfügbar zu haben.
- Verwenden Sie ausschließlich Sicherungen mit den angegebenen Werten.
- Dieses Produkt ist als medizinisches elektrisches Gerät eingestuft. Die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) wird in der zugehörigen Dokumentation beschrieben.
- Für die Installation und Benutzung dieses Produkts müssen spezielle Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die EMV gemäß den EMV-Angaben beachtet werden.
- Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können medizinisch elektrische Geräte beeinträchtigen. Benutzen Sie keine HF-Geräte in der Nähe des Produkts.
- Die Verwendung von anderen als den hier beschriebenen ZUBEHÖRTEILEN, wie etwa Handstücken und Kabeln, kann zu erhöhten EMISSIONEN oder zu einer verringerten STÖRFESTIGKEIT dieses Produkts führen. Ausnahme sind diejenigen Handstücke und Kabel, die vom Hersteller dieses Produkts als Ersatz für Innenteile verkauft werden.
- Dieses Produkt sollte nicht direkt an oder auf anderen Geräten benutzt werden. Sollte dies jedoch in Ausnahmefällen erforderlich sein, so muss bei diesem Produkt genau beobachtet werden, ob es noch normal gemäß seiner Beschreibung und Bestimmung funktioniert.

⚠ VORSICHT

- Das System kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn es in der Nähe von elektromagnetischen Störwellen eingesetzt wird. Installieren Sie das System nicht in der Nähe eines Geräts, das magnetische Wellen ausstößt. Schalten Sie den Stromschalter der Steuereinheit aus, wenn ein Ultraschallschwingungsgerät oder ein HF-Skalpell in der Umgebung benutzt wird.
- Montieren Sie die Bedieneinheit aus Sicherheitsgründen an eine Stelle, an der das AC-Stromversorgungskabel einfach entfernt werden kann. (Es ist möglich, die Bedieneinheit von der Stromversorgung zu trennen, indem das AC-Stromversorgungskabel entfernt wird.)

<Ultrasonic-Modus>



- Die Temperatur der Düsenoberfläche kann ohne Verwendung von Kühlwasser 65°C erreichen. Verwenden Sie stets Kühlwasser, um dies zu verhindern.

<Powder-Modus>

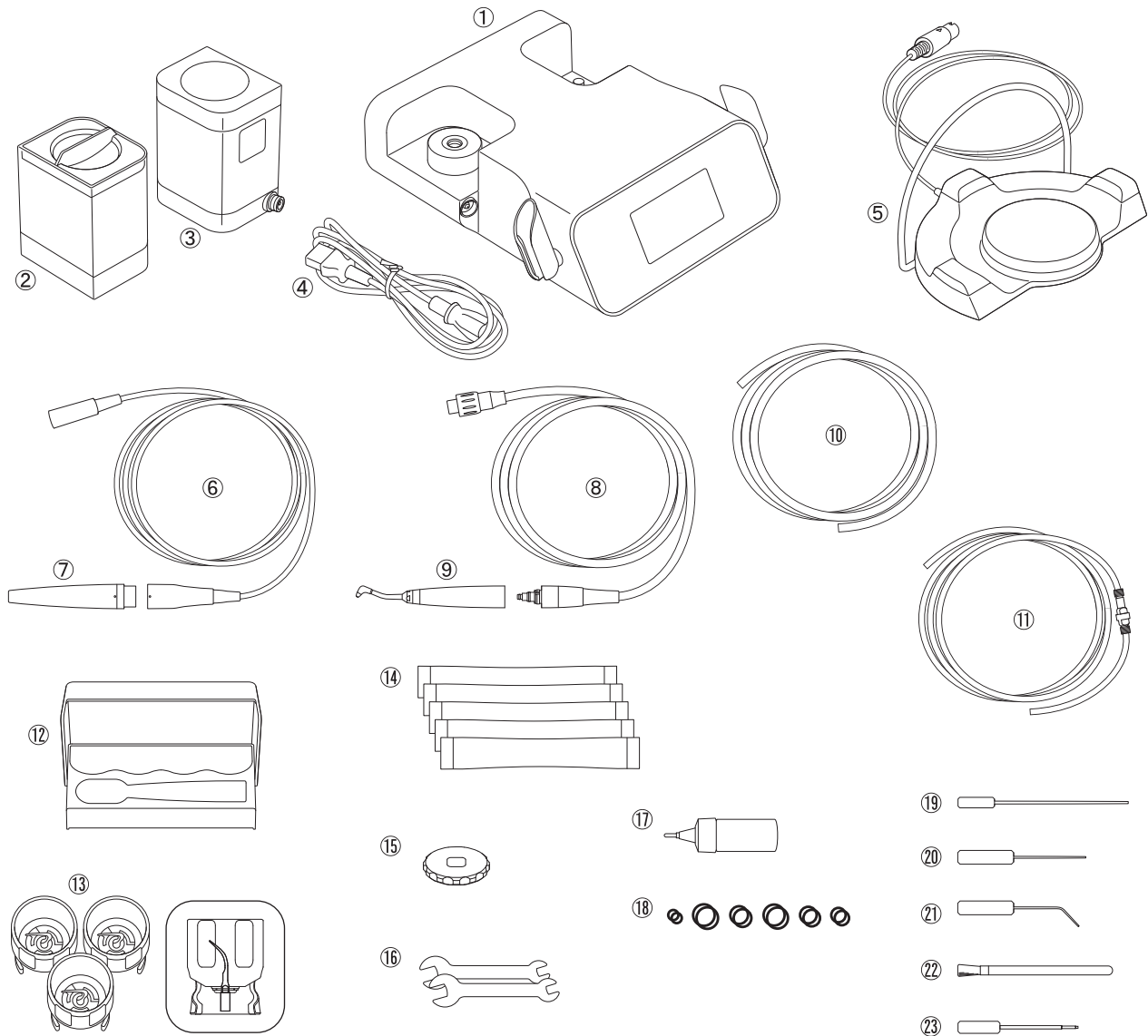


- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Reinigungspulver nicht in Kontakt mit anderen Schleimhäuten (Augen, Nase etc.) als der Mundhöhle kommt. Schützen Sie das Gesicht mit einem Handtuch oder einer Schutzbrille etc., um zu vermeiden, dass Reinigungspulver in die Augen Ihres Patienten gerät.
* Falls Ihr Patient Kontaktlinsen trägt, sorgen Sie dafür, dass er eine Schutzbrille trägt oder dass er die Kontaktlinsen vor der Behandlung entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Verbinden von Handstückschlauch, Kammer und Handstück, bzw. Kammer und Steuereinheit, das gesamte Wasser mit trockener Luft aus den Anschlüssen des Schlauchs und der Kammer blasen. Anderenfalls kann Feuchtigkeit in die Luftversorgung eindringen und zum Verfestigen des Reinigungspulvers im Inneren des Produkts führen.
- Abhängig von der Betriebsumgebung kann die Temperatur der Pulverhandstück-Oberfläche 50°C erreichen.
- Wenn sich in der Kammer zu viel Reinigungspulver befindet, wird zu Beginn der Anwendung möglicherweise nicht die korrekte Menge an Pulver gesprüht.
- Da das Pulver sehr fein ist, wird es leicht verstreut. Füllen Sie die Kammer langsam und achten Sie darauf, dass kein Pulver verstreut wird.
- Wenn Pulver längere Zeit in einer offenen Packung aufbewahrt wird, kann es feucht werden und verklumpen. Verwenden Sie nur neues trockenes Pulver. Bei Verwendung von Pulver aus der Flasche (Option) schließen Sie den Flaschendeckel nach der Verwendung wieder fest.
- Vermeiden Sie mit Hilfe von Vaseline und dergleichen, dass die Lippen Ihres Patienten im Mundwinkel trocken werden und aufplatzen.

HINWEIS

- Für dieses Produkt ist keine spezielle Schulung erforderlich.
- Das wiederholte Autoklavieren kann dazu führen, dass sich das Ultraschallhandstück durch die Hitze verfärbt. Dies ist jedoch auf die Eigenschaften des Produkts zurückzuführen und stellt kein Qualitätsproblem dar.
- Um zu verhindern, dass das Pulver die Leitungen verstopft, sollten Sie den Vakuumschlauch, Speichelsauger und Abscheider regelmäßig reinigen und warten.

3 Zubehörteile-Liste



Der Aufsatz befindet sich im Drehmomentschlüssel (CR-10)

| Nr. | Bezeichnung der Teile | Anzahl |
|-----|--|--------|
| 1 | Steuereinheit | 1 |
| 2 | Spülbehälter | 1 |
| 3 | Kammer (für Prophy-Anwendungen) | 1 |
| 4 | Anschlusskabel | 1 |
| 5 | Fußschalter | 1 |
| 6 | Handstückkabel | 1 |
| 7 | Ultraschallhandstück | 1 |
| 8 | Handstückschlauch (für Prophy-Anwendungen) | 1 |
| 9 | Pulverhandstück (für Prophy-Anwendungen) | 1 |
| 10 | Luftschlauch | 1 |
| 11 | Wasserschlauch | 1 |
| 12 | Sterilisierbox | 1 |
| 13 | Aufsatz und Drehmomentschlüssel (CR-10) | 3 |


| Nr. | Bezeichnung der Teile | Anzahl |
|-----|---|---------|
| 14 | FLASH pearl | 5 |
| 15 | Ringschlüssel | 1 |
| 16 | Schraubenschlüssel (5x8) | 2 |
| 17 | Turbinenöl | 1 |
| 18 | Ersatz-O-Ring | 6 Arten |
| 19 | Reinigungsfeile (lang) | 1 |
| 20 | Reinigungsfeile (kurz) | 1 |
| 21 | Reinigungsnadel | 1 |
| 22 | Reinigungsbürste | 1 |
| 23 | Entriegelungs-Dorn | 1 |
| 24 | Bedienungsanleitung (diese Anleitung)* | 1 |
| 25 | Leistungsrichtlinie für Aufsätze* | 1 |
| 26 | Aufsatzkarte* | 1 |
| 27 | Varios Combi Pro Quick Bedienungsanleitung* | 1 |

* In den obigen Abbildungen nicht enthalten.


HINWEIS

- Die im Powder-Modus verwendeten Pulver „FLASH pearl“ und „Perio Mate Powder“ (Option) werden in dieser Bedienungsanleitung als „Pulver“ bezeichnet, wenn nicht anders angegeben.
- Um den Perio-Modus zu verwenden, muss das optionale Perio-Set separat erworben werden. Genauere Angaben zum Perio-Set finden Sie in „20 Zubehörliste“.

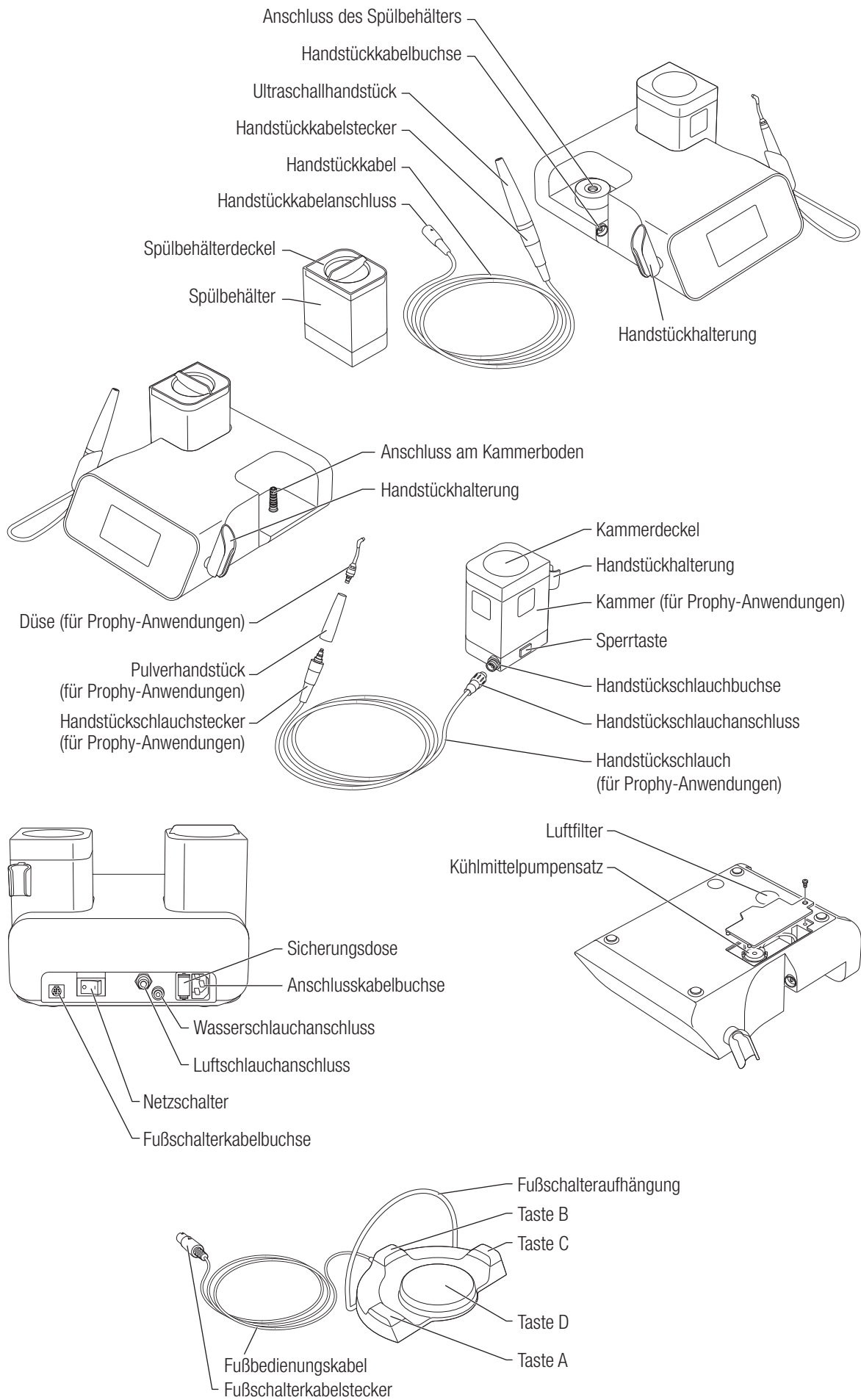4 Bezeichnung der Komponenten




4-1 Bedienfeld

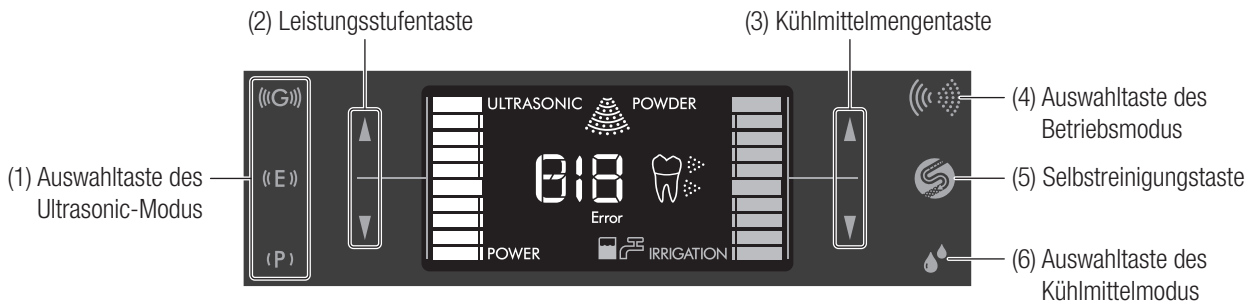


- | | |
|---|--|
| <p>(1) Auswahltaste des Ultrasonic-Modus Stellt den Ultrasonic-Modus zwischen P (Perio), E (Endo), G (Generell) um. Die höchste Leistung wird bei G erreicht, darauf folgt E und dann P. Leistungsstufe, Spülstärke und Spülmodus sind jeweils für jeden Modus einstellbar.</p> <p>(2) Leistungsstufentaste Stellt die Leistungsstufe mit den Tasten ▲/▼ ein.</p> <p>(3) Kühlmittelmengentaste Stellt die Kühlmittelmenge mit den Tasten ▲/▼ ein.</p> <p>(4) Auswahltaste des Betriebsmodus Schaltet zwischen „Ultrasonic-Modus“ und „Powder-Modus“ um.</p> | <p>(5) Selbstreinigungstaste Startet die Selbstreinigung. Genauere Angaben finden Sie in „9-1-1-2 Selbstreinigung“ (Ultraschallhandstück) bzw. „9-1-4-2 Selbstreinigung“ (Pulverhandstück). Ultrasonic-Modus: Sprüht zur Reinigung des Ultraschallhandstücks 15 Sekunden lang Leitungswasser und danach 30 Sekunden lang Wasser aus dem Spülbehälter. Powder-Modus: Sprüht 10 Sekunden lang gleichzeitig Luft und Wasser und danach 35 Sekunden lang nur Luft.</p> <p>(6) Auswahltaste des Kühlmittelmodus Auswahl des Kühlmittelmodus (Behälter- oder Leitungswasser) im Ultrasonic-Modus. Im Powder-Modus wird immer Leitungswasser verwendet.</p> |
|---|--|

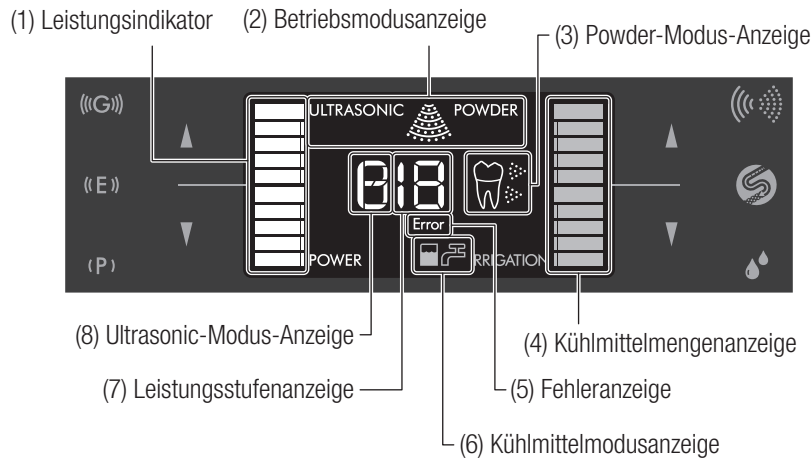4-2 LCD-Anzeige



- | | |
|---|--|
| <p>(1) Leistungsindikator Zeigt die aktuelle Leistung im Balkendiagramm an.</p> <p>(2) Betriebsmodusanzeige Zeigt den aktuellen Betriebsmodus (Ultrasonic- oder Powder-Modus) an.</p> <p>(3) Powder-Modus-Anzeige Zeigt die eingestellte Kammer (Prophy oder Perio) an (nur im Powder-Modus).</p> <p>(4) Kühlmittelmengenanzeige Zeigt die ausgewählte Spülstärke im Balkendiagramm an.</p> | <p>(5) Fehleranzeige Wird angezeigt, wenn ein Fehler auftritt. Genauere Angaben finden Sie in „13 Fehlercode“.</p> <p>(6) Kühlmittelmodusanzeige Zeigt den Kühlmittelmodus (Behälter- oder Leitungswasser) für den Ultrasonic-Modus an. Im Powder-Modus wird immer Leitungswasser verwendet.</p> <p>(7) Leistungsstufenanzeige Zeigt die aktuelle Leistungsstufe als Zahlenwert an.</p> <p>(8) Ultrasonic-Modus-Anzeige Zeigt den aktuellen Ultrasonic-Modus (P/E/G) an.</p> |
|---|--|

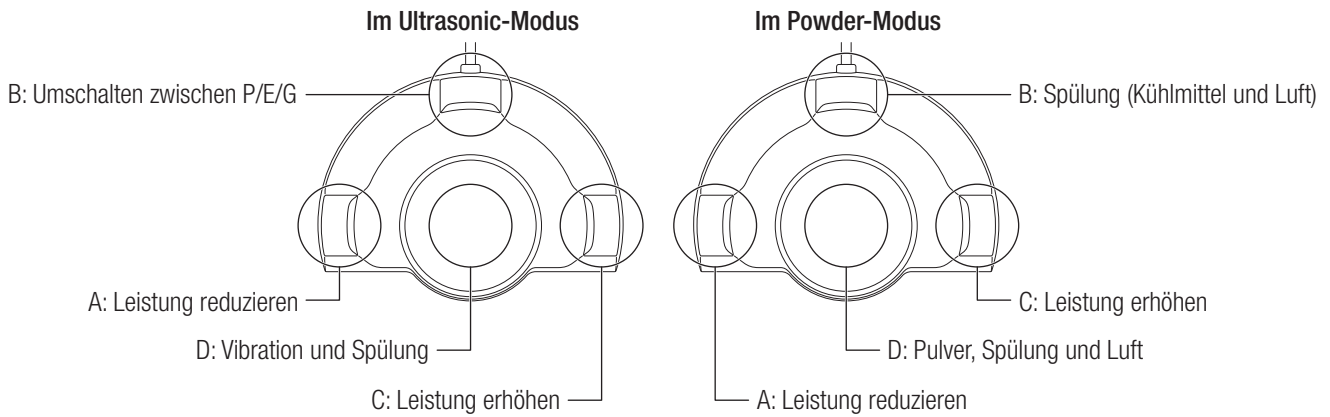4-3 Fußschalter



Ultrasonic-Modus

- A: Leistung reduzieren
Senkt den Leistungsgrad.
- B: Schaltet zwischen P/E/G um (Ultrasonic-Modus)
Wechselt den Ultrasonic-Modus bei jedem Tastendruck in der Reihenfolge P (Perio) → E (Endo) → G (General) → P (Perio) usw.
- C: Leistung erhöhen
Erhöht den Leistungsgrad.
- D: Vibration und Spülung
Vibriert und spült im gedrückten Zustand der Taste.

Powder-Modus

- A: Leistung reduzieren
Senkt den Leistungsgrad.
- B: Spülen (Kühlmittel und Luft)
Sprüht Wasser und Luft, während die Taste gedrückt wird.
- C: Leistung erhöhen
Erhöht den Leistungsgrad.
- D: Pulver, Spülung und Luft
Sprüht Pulver, Wasser und Luft, während die Taste gedrückt wird.

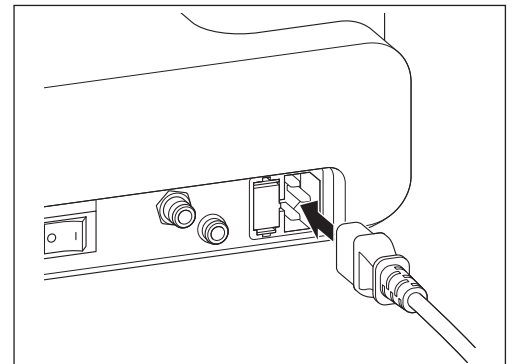
5 Installation

5-1 Anbringen des Anschlusskabels

- 1) Schalten Sie den Netzschalter AUS, bevor Sie das Anschlusskabel trennen.
- 2) Stecken Sie das Anschlusskabel in die Anschlusskabelbuchse an der Rückseite der Steuereinheit.
- 3) Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer für medizinische Anwendungen geeigneten Steckdose.



- Ziehen Sie keinesfalls am Anschlusskabel, während Sie das Kabel selbst festhalten.
- Stellen Sie vor dem Entfernen oder Anschließen des Anschlusskabels sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.





5-2 Anbringen des Luftschlauchs

1) Führen Sie ein Ende des Luftschlauchs tief in den Luftschlauchanschluss ein.

- 2) Überprüfen Sie durch leichtes Ziehen am Luftschlauch, dass dieser sich nicht löst.
3) Um den Luftschlauch zu entfernen, ziehen Sie am Luftschlauch, während Sie den blauen Ring in Richtung der Steuereinheit drücken.

 **VORSICHT**

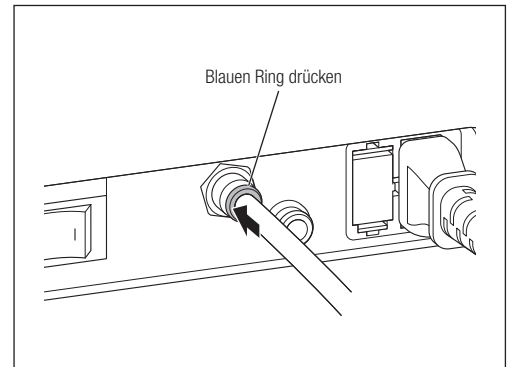
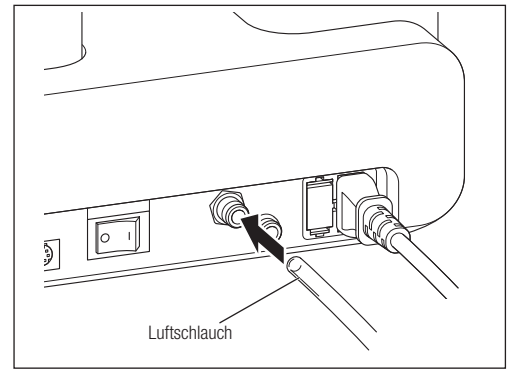
- Verwenden Sie saubere, trockene Luft. Das Pulver kann verklumpen, wenn die Luft Feuchtigkeit oder Öl enthält.



5-3 Anbringen des Fußschalters

1) Führen Sie die Fußschalteraufhängung in die beiden Löcher an der Rückseite des Fußschalters ein.

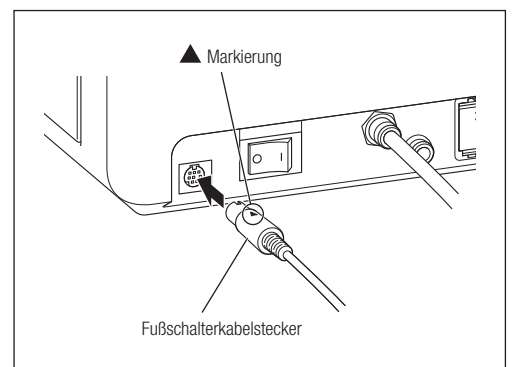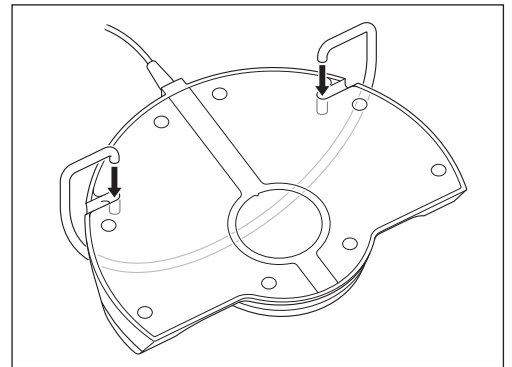2) Führen Sie den Fußschalterstecker so in die Fußschalterkabelbuchse ein, dass die ▲-Markierung nach oben zeigt.




 **ULTRASONIC**

5-4 Handstückkabel anschließen (Ultraschallhandstück)

Führen Sie den Handstückstecker so in die Handstückkabelbuchse ein, dass die ▲-Markierung nach oben zeigt. Führen Sie den Stecker vollständig ein.


 **VORSICHT**

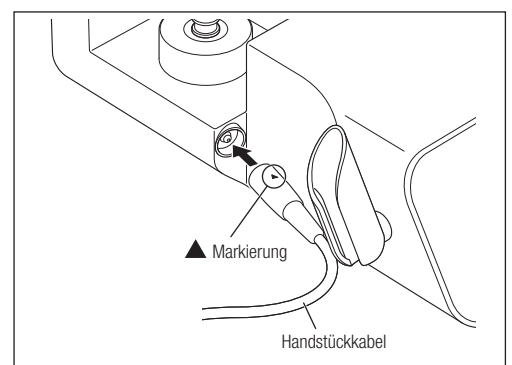- Überprüfen Sie vor dem Anschließen, dass der Stecker des Handstückkabels sauber und trocken ist.



5-5 Anbringen des Handstückschlauchs (Pulverhandstück)

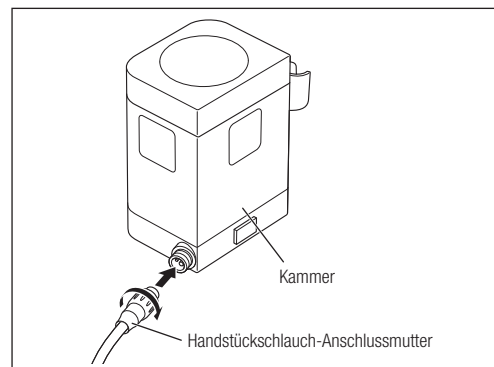- 1) Trocknen Sie die Buchse und den Handstückschlauchstecker mit der zugeführten Luft.
- 2) Führen Sie den Handstückschlauchstecker in die Handstückschlauchbuchse ein und ziehen Sie die Anschlussmutter fest.



5-6 Anbringen und Entfernen des Handstücks



- Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Handstück.

VORSICHT



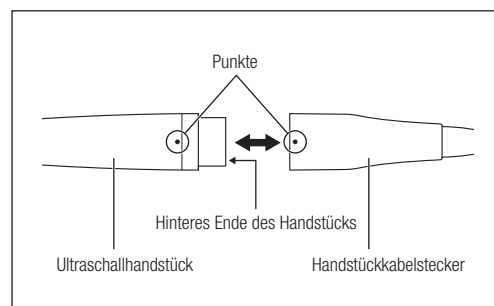
5-6-1 Ultraschallhandstück

(1) Anbringen

Richten Sie die Markierungspunkte am Ultraschallhandstück und am Stecker des Handstückkabels aneinander aus. Drücken Sie das Handstück gerade in den Anschluss.

(2) Entfernen

Halten Sie das Ultraschallhandstück und den Stecker des Handstückkabels fest und ziehen Sie das Handstück heraus.



- Zur Vermeidung eines Stromschlags berühren Sie keinesfalls die elektrischen Kontakte am hinteren Ende und am Handstückkabel.

WARNUNG



- Drehen Sie beim Trennen nicht am Handstück oder am Handstückkabel. Anderenfalls kann es zu Schäden an den elektrischen Kontakten des Anschlusses und dadurch zu Funktionsstörungen kommen.
- Bevor Sie das Handstückkabel an das Handstück anschließen, drehen Sie den Handstückanschluss so zur Seite, dass Licht ins Innere leuchtet und überprüfen Sie das Ende des Handstücks. Wenn das Licht, das durch das Ringlichtende gelassen wird, am Ende gleichmäßig hell ist, funktioniert es einwandfrei. Wenn ein Teil oder alles dunkel ist, könnte das Ringlichtende beschädigt oder kaputt sein.

VORSICHT

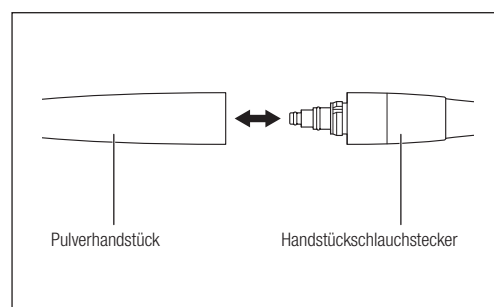
5-6-2 Pulverhandstück

(1) Anbringen

- 1) Trocknen Sie den Anschluss zwischen Handstück und Handstückschlauchstecker mit der zugeführten Luft.
- 2) Drücken Sie das Pulverhandstück gerade in den Handstückschlauchstecker.


(2) Entfernen

Halten Sie das Pulverhandstück und den Stecker des Handstückschlauchs fest und ziehen Sie das Handstück heraus.




5-7 Anbringen des Wasserschlauchs

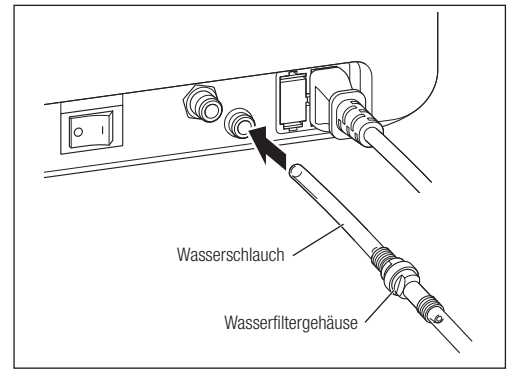- 1) Führen Sie ein Ende des Wasserschlauchs (das Ende mit dem Wasserfilter) tief in den Wasserschlauchanschluss ein.
- 2) Verbinden Sie das andere Ende des Wasserschlauchs mit dem externen Wasseranschluss.
- 3) Überprüfen Sie durch leichtes Ziehen am Wasserschlauch, dass dieser sich nicht löst.



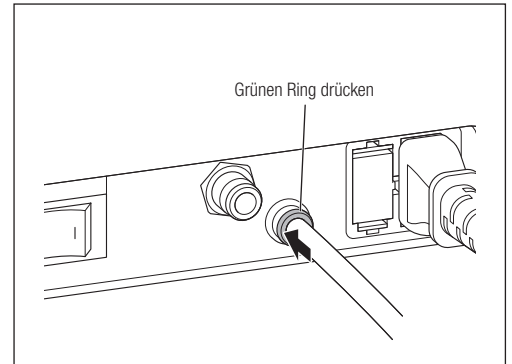- 4) Um den Wasserschlauch vom Wasserschlauchanschluss zu entfernen, ziehen Sie den Wasserschlauch heraus, während Sie den grünen Ring in Richtung der Steuereinheit drücken.



⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie einen Wasserenthärter, etc., um den Härtegrad des Wassers zu senken, da die Verwendung von Wasser mit einem hohen Härtegrad Mineral- oder Kalkablagerungen im Wasserkreislauf verursachen könnte, was zu Problemen wie unzureichender Wassermenge, Betriebsproblemen oder einem Ausfall führen kann. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie einen mit einem Wasserfilter ausgestatteten Wasserschlauch, um einem durch Fremdkörper im Leitungswasser bedingten Geräteausfall vorzubeugen, und befolgen Sie „10-3 Austauschen des Wasserfilters“ in der Bedienungsanleitung zum erforderlichen Auswechseln des Wasserfilters.

⚠️ VORSICHT

- Wenn der externe Wasseranschluss längere Zeit nicht verwendet wurde, kann das Wasser zu Beginn Spuren von Rost etc. enthalten. Schließen Sie den Wasserschlauch erst an, wenn das Wasser sauber ist.
- Führen Sie den Wasserschlauch beim Anschließen an die Steuereinheit fest in den Wasserschlauchanschluss ein. Wenn der Schlauch nicht korrekt eingeführt wird, kann Wasser austreten.

6 Überprüfung vor der Behandlung

Schalten Sie das Produkt vor der Behandlung in Abwesenheit Ihres Patienten ein, um sicherzustellen, dass keine ungewöhnlichen Vibrationen, Geräusche oder Wärme entstehen. Überprüfen Sie zudem folgende Punkte:

- Ultraschallhandstück: LED leuchtet auf und Wasser fließt.
- Pulverhandstück: Pulver, Luft und Wasser werden korrekt zugeführt.

Wenn Sie bei der Überprüfung oder Verwendung dieses Produkts Auffälligkeiten feststellen, stellen Sie die Benutzung sofort ein und kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.

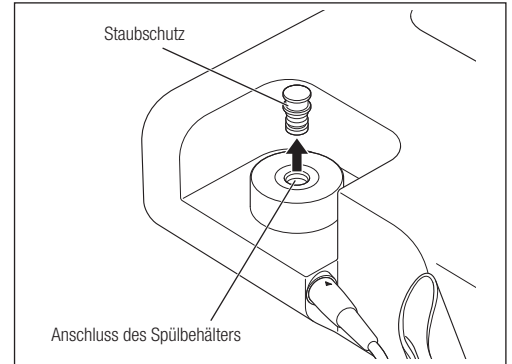
Wenn Sie Auto-Cleaning durchführen, wird Wasser vollständig aus dem Handstückkabel/-schlauch entfernt. Dies kann zur Folge haben, dass bei der nächsten Verwendung der Einheit kein Wasserfluss vorliegt. Sollte dieser Fall eintreten, stellen Sie die Kühlmittelmenge auf 10 und nehmen Sie das Handstück für ca. 30 Sekunden in Betrieb, um die Leitung vollständig mit Wasser zu befüllen. Falls nach mehr als 20 Sekunden trotz Einstellung der Kühlmittelmenge auf Stufe 10 noch kein Wasserfluss vorliegt, beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt „14 Problembehandlung“.

7 Verwendung des Ultrasonic-Modus


7-1 Einrichten des Wassersystems

Verwenden der Flasche

- 1) Nehmen Sie den Staubschutz vom Anschluss des Spülbehälters.
- 2) Entfernen Sie den Spülbehälterdeckel und füllen Sie so viel Wasser oder Spüllösung wie nötig in den Behälter.



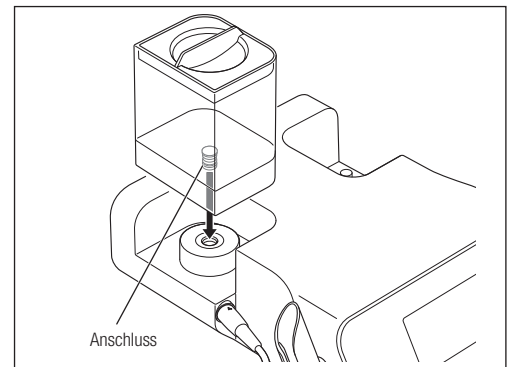- 3) Schließen Sie den Spülbehälterdeckel fest und führen Sie das Behälterverbindungsstück gerade in den Anschluss des Spülbehälters ein. Zum Entfernen ziehen Sie den Spülbehälter gerade nach oben.



VORSICHT

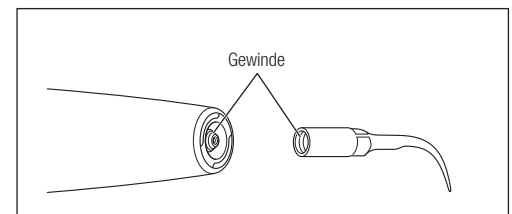
- Verwenden Sie nur den speziellen Behälter aus der Varios Combi Pro Serie.
- Führen Sie den Spülbehälter gerade ein. Anderenfalls kann es zu Schäden am O-Ring kommen.
- Reinigen Sie den Spülbehälter und den Spülbehälterdeckel nach dem Gebrauch und vor dem Einpacken mit sauberem Wasser.
- Wenn der Spülbehälter nicht angeschlossen ist, bringen Sie den Staubschutz am Anschluss des Spülbehälters an.
- Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit die Temperatur von 35 °C nicht übersteigt.
- Füllen Sie den Spülbehälter keinesfalls mit starken Säuren (wie stark saures Wasser, Supersäuren oder elektrolytische Lösungen) oder hypochlorsäurehaltigem Wasser, da diese zu Verstopfungen oder Korrosion führen können.

Verwenden von Leitungswasser


- 1) Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch fest mit dem Wasserschlauchanschluss der Steuereinheit verbunden ist. Genauere Angaben finden Sie in „5-7 Anbringen des Wasserschlauchs“.
- 2) Öffnen Sie das Wasserventil des externen Wasseranschlusses und stellen Sie den Wasserdruck auf 0,1 bis 0,3 MPa (1-3 kgf/cm²) ein. Wenn der Wasserdruck 0,3 MPa übersteigt, verwenden Sie ein Druckminderungsventil (Option), um den Wasserdruck in den zugelassenen Bereich zu bringen. Genauere Angaben zum Druckminderungsventil finden Sie in „20 Zubehörliste“.

7-2 Montieren des Aufsatzes


- 1) Überprüfen Sie, dass die Gewinde am Handstück und Aufsatz sauber sind.



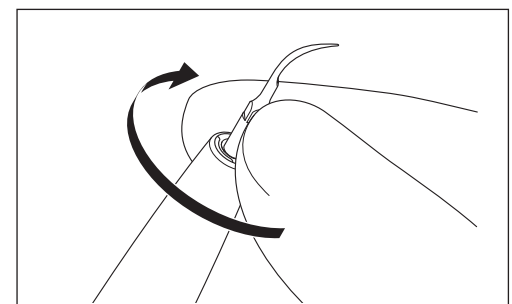- 2) Setzen Sie den Aufsatz auf das distale Ende des Handstücks auf und schrauben Sie ihn fest.




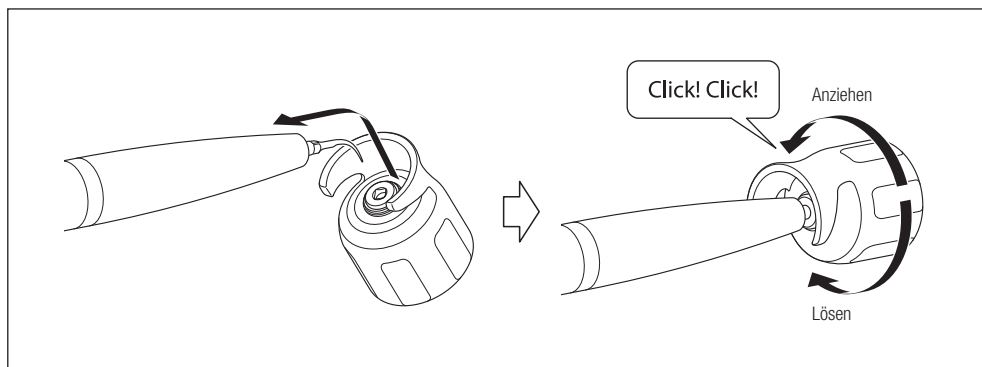- 3) Führen Sie den quadratischen Teil des Aufsatzes in das gleichförmige Loch am Drehmomentschlüssel (CR-10) ein. Drehen Sie den Drehmomentschlüssel, bis er mit einem Klicken einrastet. Halten Sie dabei das Handstück so, dass das Handstückkabel nicht verdreht wird. Zum Entfernen des Aufsatzes drehen Sie den Drehmomentschlüssel in die Richtung des Pfeils „Lösen“.



WARNUNG

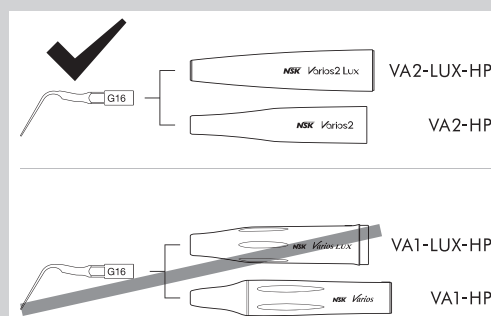- Berühren Sie nicht das Zahnfleisch, die Schleimhäute oder die Haut. Dies kann zu Verletzungen oder Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt NUR AUFSÄTZE VON NSK. Probleme, wie zum Beispiel eine Beschädigung, Funktionsstörungen oder Verletzungen aufgrund der Verwendung von anderen Aufsätzen als NSK-Aufsätzen, werden von der Garantie nicht abgedeckt. Im Folgenden finden Sie mögliche Fehler, die beim Verwenden von anderen Aufsätzen als NSK-Aufsätzen auftreten können.
 - Ungewöhnliche Vibration aufgrund von nicht kompatiblen Schrauben
 - Patient verschluckt versehentlich beschädigte Aufsätze.
 - Beschädigung oder vorzeitige Abnutzung des Gewindes am Handstück
- Schließen Sie den gelieferten G16-Aufsatz nicht an ein anderes Handstück als das Varios2-Handstück an (VA2-LUX-HP/VA2-HP). Andernfalls könnte dies aufgrund einer gesteigerten Vibrationsamplitude zum Bruch des Aufsatzes oder Kratzern auf der Oberfläche von Zähnen, Prothesen etc. führen.



VORSICHT

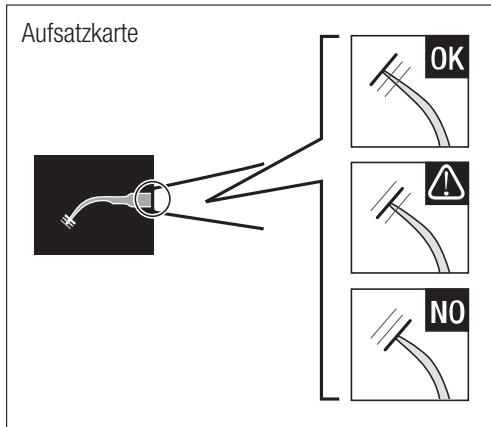
- Achten Sie darauf, das Handstückkabel beim Festziehen des Aufsatzes nicht zu verdrehen.
- Gehen Sie beim Anbringen von Aufsätzen, die die Länge des Drehmomentschlüssel (CR-10) überschreiten, sehr vorsichtig vor. Sie könnten sich an der Spitze des Aufsatzes verletzen.
- Verwenden Sie keine Aufsätze, die beschädigt, verbogen oder verrostet sind, da diese brechen könnten.
- Um Schäden am Aufsatzgewinde und Herauslösen des Aufsatzes zu vermeiden, stellen Sie immer sicher, dass der Aufsatz im richtigen Winkel eingeführt und sicher festgezogen wird.
- Reinigen Sie das Aufsatzgewinde gegebenenfalls von Staub oder anderen Verunreinigungen. Andernfalls kann es zu Geräuschbildung oder unzureichender Schwingung kommen.
- Der Aufsatz darf nicht geschliffen oder verbogen werden. Dies könnte zu Schäden am Aufsatz, Geräuschbildung oder unzureichender Schwingung während der Verwendung führen.
- Der Aufsatz ist ein Verschleißteil. Bei abgenutzten Aufsätzen steigt das Risiko für Geräuschbildung, Schäden oder unzureichende Schwingung. Tauschen Sie den Aufsatz im Falle von Geräuschbildung oder unzureichender Schwingung aus.
- Verwenden Sie zum Anbringen des Aufsatzes den mitgelieferten Drehmomentschlüssel (CR-10). Drehen Sie den Drehmomentschlüssel, bis er mit einem Klicken einrastet. Wenn der Aufsatz nicht ausreichend festgezogen wird, kann es zu unzureichender Schwingung und zu Geräuschbildung kommen.
- Tragen Sie beim Anbringen eines Aufsatzes immer sterile Handschuhe und verwenden Sie einen sterilen Aufsatz, Handstück und Drehmomentschlüssel (CR-10).
- Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Leistung die empfohlene Leistungsstufe nicht überschreitet. Andernfalls kann es zu Geräuschbildung, Beschädigung des Aufsatzes oder zur Verletzung des Patienten kommen.
- Verwenden Sie zum Entfernen von metallischen oder prothetischen Kronen nur Aufsätze, die für diesen Zweck geeignet sind. Der Aufsatz könnte abbrechen und in den Mund Ihres Patienten fallen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, nehmen Sie den Aufsatz immer ab, bevor Sie das Handstück oder das Handstückkabel anbringen bzw. abnehmen.
- Wenn der Aufsatz nicht ausreichend vibriert, nehmen Sie das Handstück aus dem Mund Ihres Patienten und betätigen Sie den Fußschalter erneut. Wenn das Problem dadurch nicht beseitigt wird, hat sich der Aufsatz während der Verwendung möglicherweise gelöst. Überprüfen Sie, dass der Aufsatz fest angezogen ist.
- Wenn sich der Aufsatz lose sitzt, außergewöhnliche Geräusche macht oder unzureichend vibriert, obwohl er bis zum Klicken festgezogen wurde, dann ist der Drehmomentschlüssel (CR-10) möglicherweise abgenutzt. Der Drehmomentschlüssel (CR-10) ist ein Verschleißteil und muss circa einmal pro Jahr ausgewechselt werden.

■ Verwenden der Aufsatzkarte


VORSICHT

- Aufsätze sind Verschleißteile. Mit Hilfe der mitgelieferten Aufsatzkarte können Sie überprüfen, ob der verwendete Aufsatz ausgetauscht werden muss.

Legen Sie den Hals des Aufsatzes in den entsprechenden Ausschnitt der Aufsatzkarte. Messen Sie die Aufsatzlänge, um festzustellen, ob der Aufsatz ausgetauscht werden muss. Für einen sicheren und effizienten Einsatz wird empfohlen, den Aufsatz auszuwechseln, wenn der Aufsatz die gelbe Linie erreicht (Abnutzung 1 mm).




Grün: Kein Verschleiß - Aufsatz ist OK
Aufsatz muss nicht ausgetauscht werden.

Gelb: Abnutzung von 1 mm - Aufsatz weist Abnutzung auf
Austauschen des Aufsatzes wird empfohlen.

Rot: Abnutzung von 2 mm - Aufsatz weist starke Abnutzung auf
Aufsatz muss ausgetauscht werden.



VORSICHT

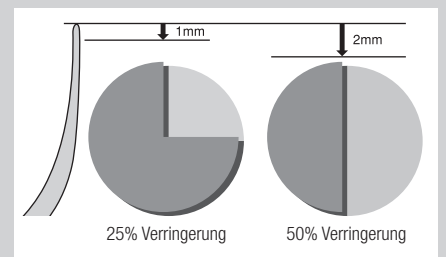- Aufsätze sind Verschleißteile. Die Wirksamkeit der Zahnsteinentfernung verringert sich um circa 25%, wenn der obere Teil des Aufsatzes 1 mm abgenutzt ist, und um circa 50%, wenn er eine Abnutzung um 2 mm aufweist. Außerdem verändert sich das Schwingverhalten aufgrund der Abnutzung, sodass die Zahnoberfläche des Patienten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie die Abnutzung des Aufsatzes regelmäßig anhand der Aufsatzkarte und ersetzen Sie den Aufsatz rechtzeitig durch einen neuen.




7-3 Einstellen der Leistungsstufe

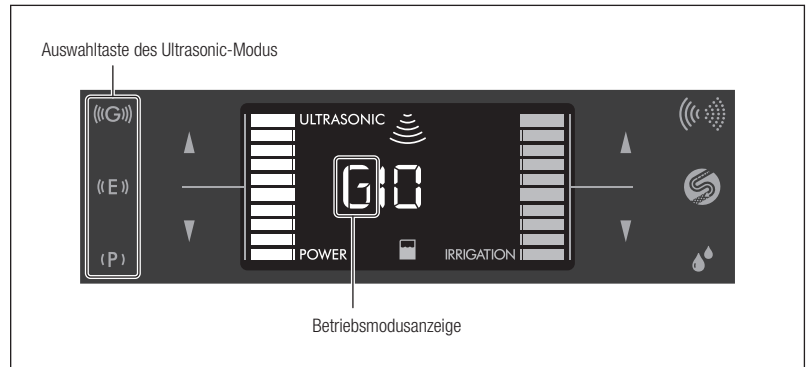- 1) Wählen Sie über die Auswahltaste des Ultrasonic-Modus den Modus aus. Der ausgewählte Modus wird auf dem LCD-Display als P/E/G angezeigt.



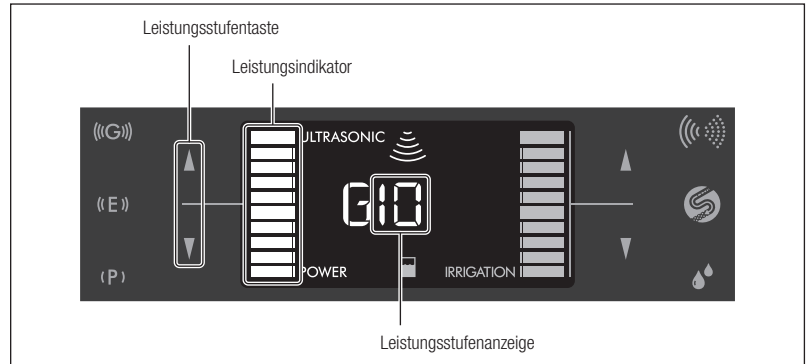- 2) Stellen Sie über die Leistungsstufentaste (▲/▼) die Leistungsstufe ein. Die Leistungsstufenanzeige und der Leistungsindikator steigen oder sinken je nach ausgewählter Leistungsstufe.



VORSICHT

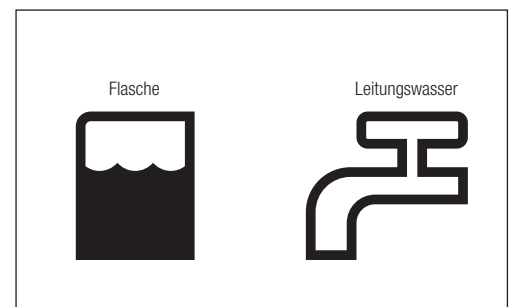
- Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Leistung die empfohlene Leistungsstufe nicht überschreitet. (Angaben zur maximalen Leistung eines jeden Aufsatzes finden Sie in den „Leistungsrichtlinie für Aufsätze“ oder auf der „Verpackung des Aufsatzes“.)

HINWEIS

- Berühren oder Halten Sie die Leistungsstufentaste, um die Leistungsstufe durchgehend zu erhöhen oder zu senken. Wenn die maximale oder minimale Stufe erreicht ist, ertönt ein Alarm.
- Um zu spülen, ohne dass der Aufsatz vibriert, stellen Sie die Leistungsstufe auf „0 (Null)“ und die Kühlmittelmenge auf mindestens 1 Balken.

7-4 Einstellen des Kühlmittels

Berühren Sie zur Auswahl des Kühlmittelmodus (Flasche oder Leitungswasser) die Auswahltaste des Kühlmittelmodus. Der ausgewählte Modus wird auf dem LCD-Display als Symbol angezeigt.



7-5 Bedienung

- 1) Betätigen Sie die gewünschte Taste am Fußschalter. Ein Signalton wird ausgegeben, der Aufsatz beginnt zu vibrieren und die Handstück-LED leuchtet auf.
- 2) Passen Sie die Kühlmittelmenge durch Berühren der Kühlmitteltasten (▲/▼) an, während Sie die Spülung am Aufsatz überprüfen.

VORSICHT

- Als Schutzfunktion nimmt dieses Produkt keinen Betrieb auf, wenn es über den Netzschalter eingeschaltet, aber gleichzeitig der Fußschalter betätigt wird. In diesem Fall wird ein Alarmton ausgegeben und die Ultrasonic-Modus-Anzeige (P/E/G) und „ULTRASONIC“ blinken abwechselnd. Lassen Sie den Fußschalter los und betätigen Sie ihn erneut.
- Verwenden Sie immer die Spülung. Bei unzureichender Kühlmittelzufuhr überhitzt das Handstück und kann zu Verletzungen der Zahnoberfläche führen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass ausreichend Wasser heraus sprüht.
- Wenn die Kühlmittelmenge auf eine niedrige Stufe eingestellt ist, wird das Wasser möglicherweise nicht gleichmäßig versprüht. Erhöhen Sie in diesem Fall die Kühlmittelmenge vorübergehend und betätigen Sie den Fußschalter. Überprüfen Sie, dass das Wasser gleichmäßig aus dem Aufsatz sprüht, und passen Sie die Kühlmittelmenge wieder an.
- Versuchen Sie nicht, die Handstückhalterung mit Gewalt zu drehen. Dies kann die Halterung beschädigen.

- HINWEIS**
- Die Handstück-LED leuchtet nach dem Lösen des Fußschalters etwa 5 Sekunden lang weiter (Nachleuchtefunktion).
 - Nach dem Ausschalten des Geräts werden die Einstellung für Ultrasonic-Modus (P/E/G), Leistungsstufe, Kühlmittelmodus und Kühlmittelmenge gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder angewendet (Istwert-Speicherfunktion).
 - Wenn der Kühlmittelmodus auf Leitungswasser eingestellt ist und die Kühlmittelmenge bei einer Einstellung von 10 zu niedrig und bei einer Einstellung von 1 zu hoch ist, dann passen Sie die Spülstärke an. Genauere Angaben finden Sie in „11-3 Einstellen der Basisspüleistung“.
 - Es kann zu einem brummenden Geräusch kommen. Dies ist jedoch kein Hinweis auf eine Störung.

■ Während der Benutzung des Handstücks:

Möglich: Einstellen von Leistungsstufe und Kühlmittelmenge

Nicht möglich: Ändern von Ultrasonic-Modus und Kühlmittelmodus, Ausführen der Selbstreinigung.

7-6 Nach der Behandlung

Führen Sie nach jeder Behandlung am Patienten die Wartung aus. Genauere Angaben finden Sie in „9 Wartung nach der Behandlung“.



- Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß gewartet wird, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

VORSICHT

7-7 Schutzschaltung

Dieses Produkt kann überhitzen, wenn die Steuereinheit über längere Zeit im Modus G auf Leistungsstufe 8 oder höher verwendet wird. In diesem Fall wird die Leistung automatisch durch die Schutzschaltung reduziert (Leistungsstufe 7). Das Balkendiagramm blinkt von 8 bis 10. Die Anzeige hört auf zu blinken, wenn die Schutzschaltung deaktiviert wird. In diesem Fall wird die Leistungsstufe jedoch nicht automatisch erhöht. Stellen Sie die Leistungsstufe gegebenenfalls manuell höher.



- HINWEIS**
- Wenn die Schutzschaltung aktiv ist (und das Balkendiagramm blinkt), kann die Leistungsstufe nicht auf 8 oder höher eingestellt werden.
 - Das Balkendiagramm hört auf zu blinken, wenn die Leistungsstufe auf einen Wert unter 7 gesenkt wird. Es beginnt erneut zu blinken, wenn die Leistungsstufe auf 7 erhöht wird, während die Schutzschaltung aktiviert ist.



8 Verwendung des Powder-Modus

Um den Perio-Modus zu verwenden, muss der optionale Perio-Set erworben werden. Genauere Angaben zum Perio-Set finden Sie in „20 Zubehörliste“.

8-1 Einrichten des Wassersystems

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch fest mit dem Wasserschlauchanschluss der Steuereinheit verbunden ist. Genauere Angaben finden Sie in „5-7 Anbringen des Wasserschlauchs“.
- 2) Öffnen Sie das Wasserventil des externen Wasseranschlusses und stellen Sie den Wasserdruck auf 0,1 bis 0,3 MPa (1-3 kgf/cm²) ein. Wenn der Wasserdruck 0,3 MPa übersteigt, verwenden Sie ein Druckminderungsventil (Option), um den Wasserdruck in den zugelassenen Bereich zu bringen. Genauere Angaben zum Druckminderungsventil finden Sie in „20 Zubehörliste“.




- Verwenden Sie für die Spülung ausschließlich trinkbares Wasser.

VORSICHT



8-2 Vorbereiten des Pulvers

1) Wählen Sie die Kammer und das Pulver für diesen Modus aus. Füllen Sie die Kammer bis zur „MAX“-Linie mit Pulver (ca. 80 g FLASH pearl oder ca. 50 g Perio Mate Powder).

| Modus | Kammer | Pulver |
|--------------|------------------------|-------------------|
| Prophy-Modus | Für Prophy-Anwendungen | FLASH pearl |
| Perio-Modus | Für Perio-Anwendungen | Perio Mate Powder |

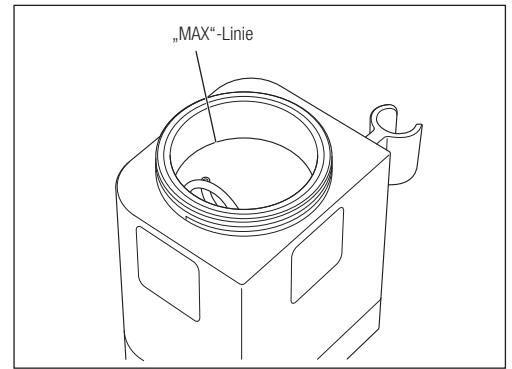

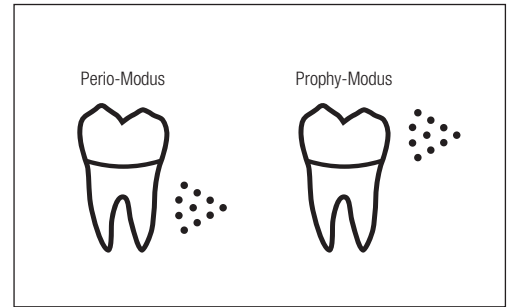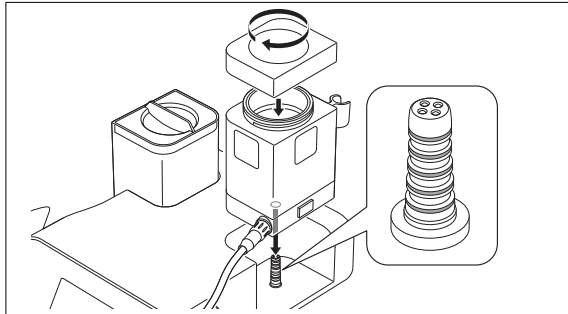2) Schließen Sie den Kammerdeckel komplett, bis er mit der Form der Pulverkammer bündig ist, und setzen Sie die Kammer gerade in die Steuereinheit ein. Für den eingesetzten Kammertyp wird in der LCD-Anzeige eines der folgenden Symbole angezeigt.





⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie ausschließlich das vorgesehene Pulver. Die Verwendung anderer Pulver kann zu Fehlfunktionen des Produkts, Schäden am Zahn oder zu einem Emphysem führen. Außerdem kann es zu Leistungsminderungen des Produkts kommen. NSK übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Verwendung anderer als der angegebenen Pulver entstanden sind.

⚠️ VORSICHT

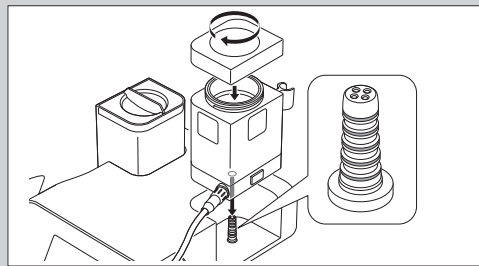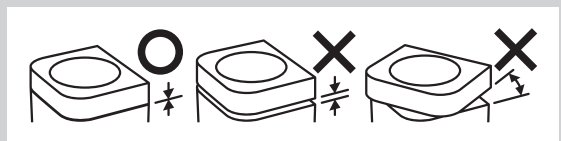- Bringen Sie den Kammerdeckel sicher und fest an um zu verhindern, dass sich der Deckel während des Betriebs unter Einfluss von Druckluft in der Kammer ungewollt abrupt löst, wodurch es zu Verletzungen kommen könnte.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufsetzen der Kammer auf die Steuereinheit, dass die O-Ringe des Anschlussadapters am Kammerboden nicht beschädigt, rissig oder anderweitig verschlissen sind. Beschädigte O-Ringe können die Funktion beeinträchtigen oder zu Störungen führen.



- Setzen Sie die Kammer gerade auf den Adapter an der Steuereinheit auf. Bei schiefem Aufsetzen könnten die O-Ringe beschädigt werden, was zu Störungen führen kann.
- Wenn sich in der Kammer zu viel Reinigungspulver befindet, wird zu Beginn der Anwendung möglicherweise nicht die korrekte Menge an Pulver gesprüht.
- Verwenden Sie kein Pulver aus geöffneten Verpackungen oder Pulverreste. Dies kann zum Verstopfen der Düse führen. Vermischen Sie keine Pulverreste mit neuem Pulver.
- Prüfen Sie den Anschluss am Kammerboden auf Wasser, etc. und trocknen Sie ihn ab, falls er feucht ist, bevor Sie die Kammer aufsetzen. Wenn Sie dies nicht tun, kann das Pulver verklumpen.
- Verwenden Sie kein verfärbtes Pulver.
- Verschließen Sie den Pulverbehälter immer fest. Andernfalls kann Feuchtigkeit eindringen und es kommt zu Verstopfungen.
- Wenn an der Kammer bzw. am Kammerdeckel Pulver haften bleibt, reinigen Sie es sofort. Andernfalls wird der Deckel schwierig verschließbar.
- Drehen Sie die Kammer nicht um, wenn diese noch Pulver enthält. Ein Umdrehen der Kammer kann zu pulverbedingten Blockaden/Verstopfungen führen.
- Als Schutzfunktion nimmt dieses Produkt keinen Betrieb auf, wenn der Fußschalter betätigt wird, während die Kammer nicht korrekt eingesetzt ist. Ein Alarm ertönt und das Zahnsymbol und „POWDER“ blinken abwechselnd. Setzen Sie die Kammer korrekt ein.
- Das Perio Mate Powder (Option) wird leicht verstreut, da es sehr fein ist. Gehen Sie beim Füllen der Kammer langsam vor, um ein Verstreuen des Pulvers zu vermeiden. Zudem darf das Pulver nicht verschluckt werden oder in die Augen geraten.
- FLASH pearl ist nicht wasserlöslich. Um ein Verstopfen der Leitungen durch die Verwendung von FLASH pearl zu vermeiden, müssen Vakuumschlauch, Speichelsauger und Abscheider regelmäßig gereinigt und gewartet werden.

8-3 Anbringen und Entfernen des Düsenaufsatzes

8-3-1 Anbringen des Düsenaufsatzes

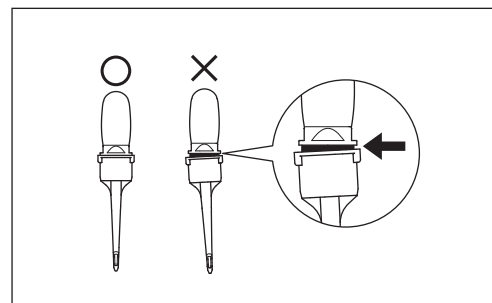
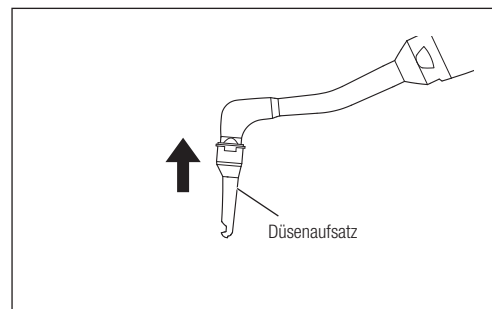
Bringen Sie den Düsenaufsatz (Option) sicher und fest an der Düse des Pulverhandstücks (für die Anwendung mit Perio) an.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine verformten oder beschädigten Düsenaufsätze. Diese könnten sich während der Verwendung lösen.

VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Düsenaufsatz sicher und fest gemäß der Abbildung anbringen. Wenn der Aufsatz nicht korrekt angebracht wird, kann er sich lösen und vom Patienten verschluckt werden.
- Tragen Sie beim Anbringen eines Düsenaufsatzes am Pulverhandstück immer sterile Handschuhe und stellen Sie sicher, dass das Pulverhandstück steril ist.




8-3-2 Entfernen des Düsenaufsatzes

Verwenden Sie zum Entfernen des Düsenaufsatzes den Düsenspitzenentferner Perio Mate (Option) und entsorgen Sie den Düsenaufsatz anschließend.

WARNUNG

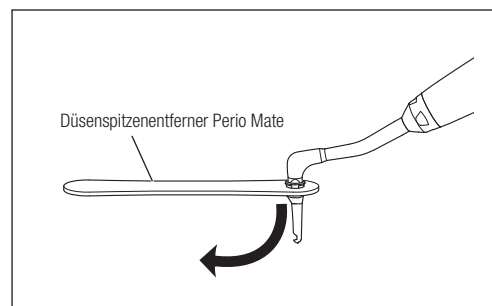- Der Düsenaufsatz kann nur einmal verwendet werden. Versuchen Sie nicht, den Düsenaufsatz erneut zu verwenden oder zu sterilisieren, da er beschädigt oder kontaminiert sein könnte. Wenn ein Düsenaufsatz wiederverwendet wird, funktioniert er möglicherweise nicht ordnungsgemäß, da er während des Entferns verformt wurde. Zudem kann er sich während der Verwendung lösen und vom Patienten verschluckt werden. Dasselbe gilt für Aufsätze, die versehentlich entfernt wurden.




8-4 Einstellen der Leistungsstufe

Stellen Sie über die Leistungsstufentasten (▲/▼) die Leistungsstufe ein. Die Leistungsstufenanzeige und der Leistungsindikator steigen oder sinken je nach ausgewählter Leistungsstufe.

HINWEIS

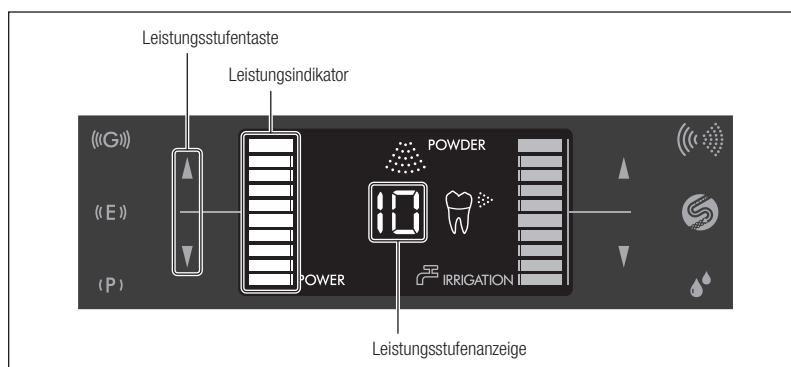- Wenn Sie diese Einstellung vornehmen, ohne die Kammer aufgesetzt zu haben, wird die Leistungsstufe des Prophy-Modus eingestellt.



8-5 Einstellen des Kühlmittels

- 1) Stellen Sie über die Kühlmitteltasten (▲/▼) die Kühlmittelmenge ein.
- 2) Durch Betätigen des Fußschalters können Sie Pulver in ein Speibecken oder dergleichen sprühen und somit überprüfen, dass das Pulver, die Luft und das Wasser korrekt gesprüht werden.
- 3) Stellen Sie die Kühlmittelmenge ein und überprüfen Sie dabei die Spülung an der Düse.

HINWEIS

- Wenn die Kühlmittelmenge bei einer Einstellung von 10 zu niedrig und bei einer Einstellung von 1 zu hoch ist, dann passen Sie die Spülstärke an. Genauere Angaben finden Sie in „11-3 Einstellen der Basisspüleistung“.
- Wenn Sie Anpassungen ausführen, ohne die Kammer eingeführt zu haben, wird das Kühlmittelvolumen des Prophy-Modus eingestellt.

8-6 Bedienung

Durch Betätigen der Fußschaltertaste D werden Pulver, Wasser und Luft zugeführt. Durch Betätigen der Fußschaltertaste B werden Wasser und Luft zugeführt. Beachten Sie die Bedienungsanweisungen in „8-6-1 Verwenden des Prophy-Modus“ und „8-6-2 Verwenden des Perio-Modus“.

- WARNUNG**
- Das Pulver darf keinesfalls auf andere Körperteile als die Zahnoberfläche gesprüht werden.
 - Stellen Sie die Benutzung sofort ein, wenn der Schlauch während der Verwendung anschwillt oder wenn Luft oder Pulver an den Anschlussstellen zwischen Kammer und Schlauch austritt.
 - Sprühen Sie während der Verwendung dieses Produkts Wasser.
 - Verwenden Sie unbedingt einen Vakuumschlauch (gegebenenfalls zusammen mit einem Speichelsauger), um zu vermeiden, dass der Patient größere Mengen Pulver verschluckt. Vermeiden Sie eine durchgehende Anwendung über längere Zeit und ermöglichen Sie es Ihrem Patienten jederzeit, den Mund auszuspülen.

- VORSICHT**
- Als Schutzfunktion kann dieses Produkt nicht eingeschaltet werden, wenn der Netzschalter eingeschaltet wird, während der Fußschalter betätigt wird. Ein Alarm ertönt und das Zahnsymbol und „POWDER“ blinken abwechselnd. Lassen Sie den Fußschalter los und betätigen Sie ihn erneut.
 - Stellen Sie vor der Behandlung am Patienten die Leistungsstufe und die Spülstärke ein.
 - Verringern Sie die Leistungsstufe bei Behandlungen am Zahnfleischrand.
 - Sprühen Sie nicht vertikal auf die Zahnoberfläche.
 - Halten Sie den Abstand zwischen Düsenaufsatz des Handstücks und der Zahnoberfläche gemäß den Anweisungen in „8-6-1 Verwenden des Prophy-Modus“ und „8-6-2 Verwenden des Perio-Modus“.
 - Versuchen Sie nicht, die Handstückhalterung mit Gewalt zu drehen. Dies kann die Halterung beschädigen.

HINWEIS • Es kann zu einem brummenden Geräusch kommen. Dies ist jedoch kein Hinweis auf eine Störung.



8-6-1 Verwenden des Prophy-Modus

Halten Sie die Düse 3 bis 5 mm von der Zahnoberfläche entfernt und in einem Winkel von 10 bis 60 Grad.

- WARNUNG**
- Richten Sie die Düse niemals auf Schleimhäute, Zahnfleisch oder den subgingivalen Bereich.

- VORSICHT**
- Sprühen Sie von der Wurzel zur Schneidekante der Zähne.



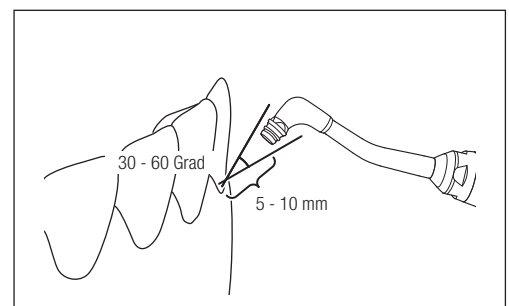
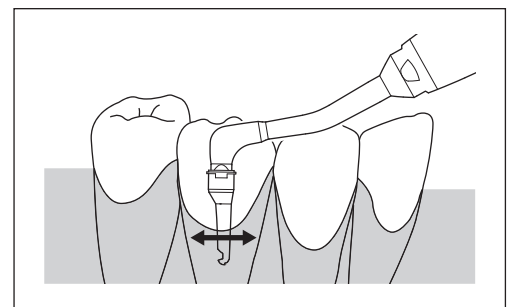
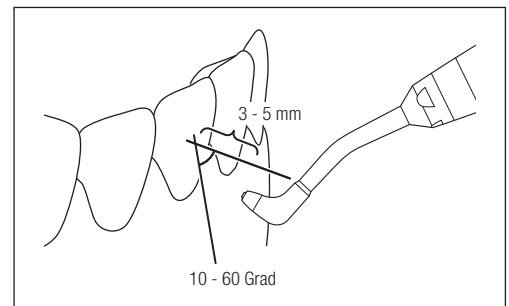
8-6-2 Verwenden des Perio-Modus

■ Mit Düsenaufsatz

Führen Sie den Düsenaufsatz mehr als 3 mm tief in die Zahnfleischtaschen ein. Das Pulver kann nicht effizient in die Zahnfleischtaschen gesprüht werden, wenn der Aufsatz weniger als 3 mm eingeführt wird.

■ Ohne Düsenaufsatz

Entfernen Sie den Düsenaufsatz von der Düse des Handstücks, um Plaque im supragingivalen Bereich und am Zahnfleischrand zu entfernen, oder um Biofilm und leichte Verfärbungen zu entfernen. Halten Sie die Düse 5 bis 10 mm von der Zahnoberfläche entfernt und in einem Winkel von 30 bis 60 Grad. Richten Sie die Düse niemals direkt auf die Mundschleimhaut oder in Zahnfleischtaschen.



**WARNUNG**

- Bei der Verwendung ohne Düsenaufsatz richten Sie die Düse niemals auf die Mundschleimhäute.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht direkt nach der Zahnsteinentfernung auf der Zahnoberfläche in einer Zahnfleischtasche. Dies kann Bakteriämie verursachen.
- Führen Sie den Düsenaufsatz während einer einzigen Behandlung nicht mehr als einmal in dieselbe Zahnfleischtasche ein.
- In dieselbe Zahnfleischtasche darf maximal 5 Sekunden lang Pulver gesprüht werden (maximal 20 Sekunden je Zahn). Sprühen Sie das Pulver niemals länger als die angegebene Zeit ein.
- Versuchen Sie nicht, den Düsenaufsatz mit Gewalt in eine Zahnfleischtasche einzuführen.
- Sprühen Sie kein Pulver, während sich die Spitze des Düsenaufsatzes am Boden einer Zahnfleischtasche befindet. Dies kann zu einem Emphysem führen.
- Verwenden Sie den Düsenaufsatz ausschließlich in Zahnfleischtaschen.
- Eine zu hohe Leistungsstufe kann zu einem Emphysem führen. Passen Sie die Leistungsstufe auf eine geeignete Stufe an. Überprüfen Sie dabei die Verfassung des Patienten.

**VORSICHT**

- Im Perio-Modus wird alle 5 Sekunden ein Alarmton ausgegeben.
- Im Perio-Modus wird im Vergleich zum Prophy-Modus automatisch eine geringere Leistungsstufe eingestellt.

8-6-3 Während der Benutzung des Handstücks

Möglich: Einstellen von Leistungsstufe und Wassermenge

Nicht möglich: Ändern von Kühlmittelmodus, Ausführen der Selbstreinigung

8-6-4 Ablassen des Restdrucks

Nach dem Gebrauch lässt sich der Kammerdeckel nicht öffnen, weil sich durch den Betrieb ein Luftdruck in der Kammer aufgebaut hat. Lassen Sie den restlichen Druck aus der Kammer entweichen, bevor Sie Pulver in die Kammer füllen oder die Kammer von der Steuereinheit entnehmen.

**VORSICHT**

- Während des Ablassens des Restdrucks treten das übrige Pulver und Wasser aus dem Handstück aus. Stellen Sie vorab einen Behälter, z. B. eine Tasse, bereit, um das Pulver und Wasser aufzufangen.

- 1) Nehmen Sie das Pulverhandstück aus der Handstückhalterung.
- 2) Platzieren Sie das Handstück zum Auffangen von Pulver und Wasser im Behälter.
- 3) Berühren und halten Sie die Auto-Cleaning-Taste etwa 1 Sekunde lang. Es ertönen Signaltöne und der Restdruck wird freigesetzt.
- 4) Der Vorgang wird beendet, wenn der gesamte Restdruck aus der Kammer abgelassen wurde.

8-7 Nach der Behandlung

Führen Sie nach jeder Behandlung am Patienten die Wartung aus. Genauere Angaben finden Sie in „9 Wartung nach der Behandlung“. Vor der Wartung entfernen Sie gegebenenfalls den Düsenaufsatz (Option) von der Düse und entsorgen diesen.

**VORSICHT**

- Mangelnde Wartung kann zu Funktionsstörungen führen.

HINWEIS

- Die Einstellungen der Leistungsstufe und des Kühlmittelmodus werden nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert (Istwert-Speicherfunktion).

9 Wartung nach der Behandlung

Führen Sie nach jeder Behandlung am Patienten die folgenden Wartungsschritte aus.

Die folgenden Anweisungen zur Aufbereitung wurden auf der Grundlage der Anforderungen gemäß ISO 17664 erstellt.

Die Wirksamkeit der Aufbereitung anhand des folgenden Verfahrens wurde nachgewiesen.

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Infektionen Augenschutz, Schutzmaske und Handschuhe tragen.

ACHTUNG



- Um Rückstände zu entfernen, führen Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen unmittelbar nach der Behandlung (innerhalb von 30 Minuten) durch. Wenn die Wartung nicht erfolgt, besteht die Gefahr von Infektionen, vorzeitigen Defekten und thermischen Verletzungen durch Überhitzen.
- Beachten Sie immer die lokalen Vorschriften, Normen, Leitlinien usw. bezüglich der Reinigung, Desinfektion und Sterilisierung des Produkts.

VORSICHT



- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung ausgewiesenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Infektionen vor dem Beginn der Wartung Augenschutz, Schutzmaske und Handschuhe anlegen.
- Informationen über die Aufbereitung der Aufsätze und des Drehmomentschlüssels finden Sie in der Bedienungsanleitung der Aufsätze (siehe OM-Z0314E).
- Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion Desinfektionsethanol oder Desinfektionsisopropanol, das keine Zusätze enthält (im Folgenden als Desinfektionsalkohol bezeichnet). Die Verwendung von anderen Desinfektionsmitteln als Desinfektionsalkohol kann zu Verfärbungen oder Rissen führen.
- Verwenden Sie einen geeigneten Desinfektionsalkohol gemäß den Vorschriften und Richtlinien des jeweiligen Landes.
- Verwenden Sie zum Reinigen, Eintauchen oder Abwischen keine Lösungsmittel wie elektrolytisch oxidierendes Wasser (stark saures Wasser oder stark saures Wasser), stark saure oder alkalische Chemikalien, chlorhaltige Lösungsmittel, Benzin oder Verdüner.
- Nehmen Sie das Produkt nach der Thermodesinfektion sofort (innerhalb einer Stunde) aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Anderenfalls tritt Korrosion auf.
- Trocknen Sie nach der Thermodesinfektion das Produkt vollständig ab. Feuchtigkeitsrückstände können interne Korrosion verursachen.
- Vor der Desinfektion muss das Produkt gereinigt werden, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Sollte Blut im Produkt verbleiben, wird es gerinnen und eine Funktionsstörung des Produkts verursachen.
- Verwenden Sie immer den Drehmomentschlüssel zum Einsetzen und Entfernen der Aufsätze.
- Verwenden Sie keine Ultraschallreinigung zur Reinigung von Ultraschallhandstücken.
- Verwenden Sie zum Reinigen saubere und trockene Druckluft.

9-1 Reinigung und Desinfektion (je Patient)

9-1-1 Ultraschallhandstück

VORSICHT



- Führen Sie nach dem Gebrauch unbedingt die automatische Reinigung (Reinigung des Spülschlauchs) durch. Wird die automatische Reinigung unterlassen, kann der Spülschlauch verstopfen oder Metallteile können verrostet.
- Füllen Sie unbedingt destilliertes Wasser oder gereinigtes Wasser ohne Verunreinigungen in den Spülbehälter. Sollten Sie Wasser, das Verunreinigungen enthält, verwenden, führt dies zur Verstopfung des Bewässerungsschlauchs oder zu anderen Problemen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ultraschallhandstück und das Handstückkabel fest verbunden sind.
- Nach Entnahme des Spülbehälters die darin befindliche Flüssigkeit sofort entsorgen. Wenn Flüssigkeit im Spülbehälter verbleibt, kann diese durch den Anschlussbereich aus dem Spülbehälter austreten.

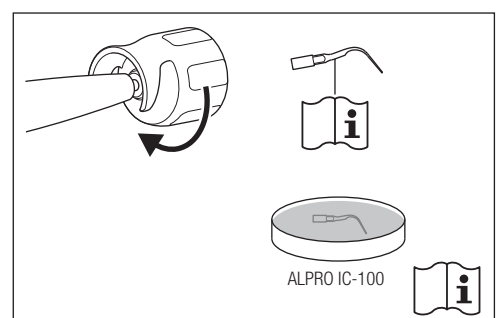
HINWEIS • Die LED-Beleuchtung am Ultraschallhandstück leuchtet während der Selbstreinigung nicht auf.

9-1-1-1 Aufsatz entfernen


1) Entfernen Sie den Aufsatz vom Ultraschallhandstück.

Nehmen Sie den Aufsatz aus dem Drehmomentschlüssel.

Informationen über die Aufbereitung der Aufsätze und des Drehmomentschlüssels finden Sie in der mit den Aufsätzen gelieferten Bedienungsanleitung (siehe OM-Z0314E).



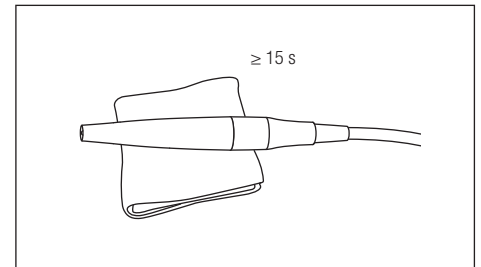- 2) Wischen Sie Verschmutzungen mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch von der Oberfläche des Ultraschallhandstücks ab.




9-1-1-2 Selbstreinigung


VORSICHT

- Während der Selbstreinigung tritt das zur Reinigung verwendete Wasser aus der Spitze des Ultraschallhandstücks aus. Stellen Sie vorab einen Behälter, z. B. eine Tasse, bereit, um das Wasser aufzufangen.

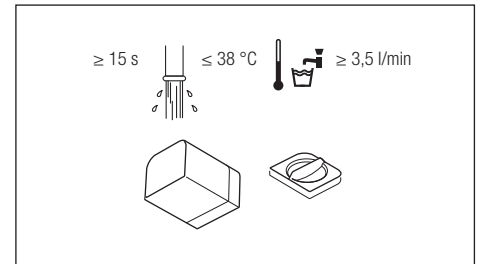
- 1) Wählen Sie als Spülmodus den Leitungswasser-Spülmodus aus und stellen Sie die Spülstärke auf den Höchstwert ein.
- 2) Entfernen Sie den Spülbehälter und reinigen Sie den Spülbehälter und den Spülbehälterdeckel unter laufendem Wasser.



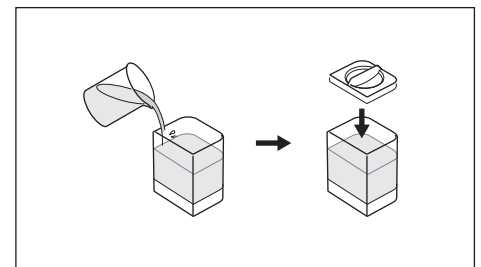
- 3) Füllen Sie den Spülbehälter zur Hälfte oder weiter mit destilliertem oder gereinigtem Wasser und schließen Sie den Spülbehälterdeckel fest. (Verwenden Sie keine Salzlösung).




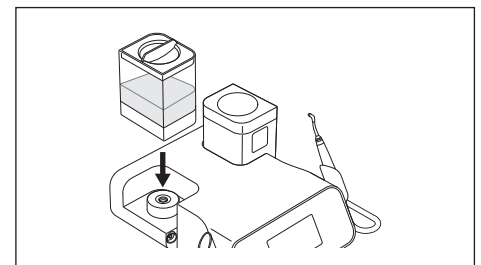- 4) Führen Sie den Spülbehälter gerade in den Anschluss des Spülbehälters ein.




* Wenn ein Spalt zwischen dem Spülbehälter und der Steuereinheit offen bleibt, kann Wasser austreten.

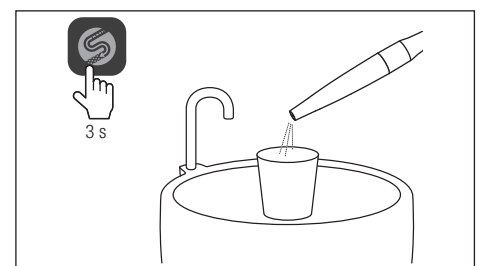- 5) Richten Sie die Spitze des Ultraschallhandstücks auf einen Behälter zum Auffangen des Wassers und drücken Sie dann drei Sekunden lang auf . Die Selbstreinigung startet. (Reinigungsdauer beträgt 45 Sekunden.)



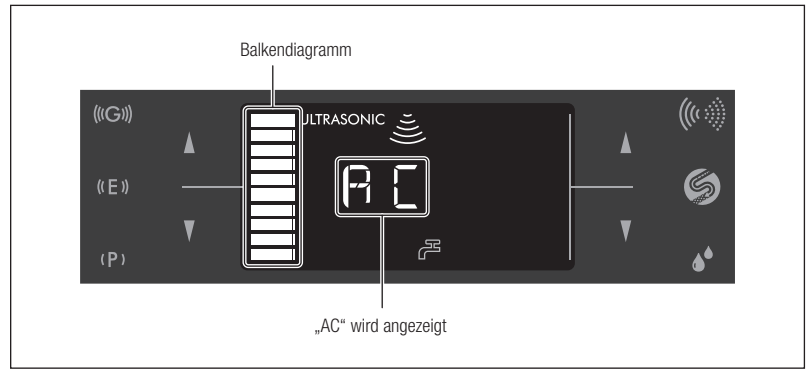
- 6) Während der Selbstreinigung wird auf dem LCD-Display „AC“ angezeigt.
Das Balkendiagramm zeigt den Fortschritt an.



* Um die Selbstreinigung abzubrechen, tippen Sie erneut auf .


Nach Abschluss der Selbstreinigung kehrt die Steuereinheit in den Zustand zurück, in dem sie sich vor der Selbstreinigung befand.

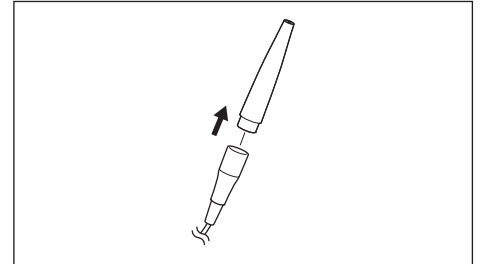- 7) Trennen Sie das Ultraschallhandstück vom Handstückkabel.




9-1-1-3 Vorreinigung

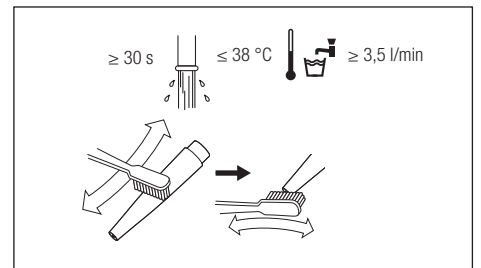
- 1) Reinigen Sie das Ultraschallhandstück mit einer weichen Bürste unter laufendem Wasser.



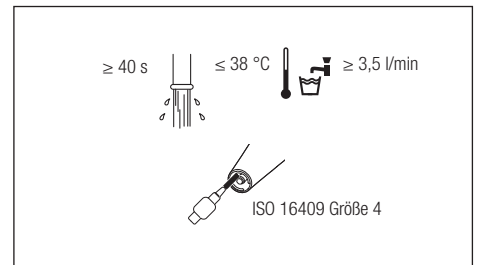
- 2) Reinigen Sie die Spitze des Ultraschallhandstücks mit einer Bürste unter laufendem Wasser.



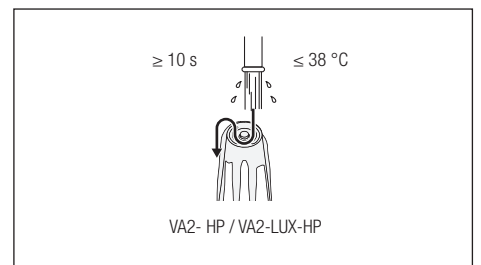
- 3) Spülen Sie die Endfläche des Ultraschallhandstücks ab.



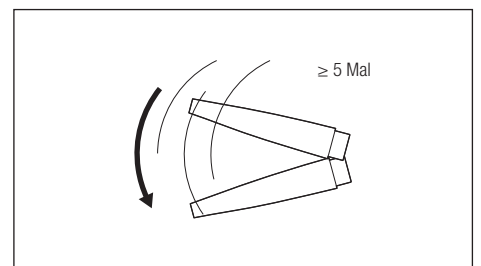- 4) Entfernen Sie verbleibendes Wasser durch leichtes Schütteln vom Ultraschallhandstück.



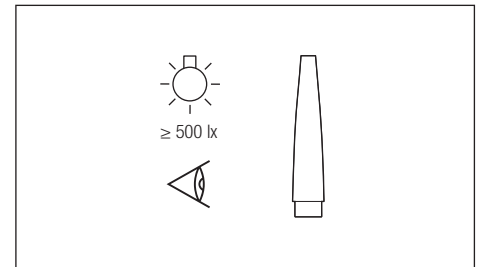- 5) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob weiterhin Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 1 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



9-1-1-4 Reinigung und Desinfektion

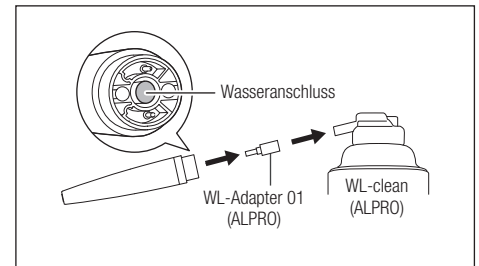
VORSICHT

- Führen Sie vor der Reinigung und Desinfektion unbedingt die Vorreinigung durch.
- Nehmen Sie die Desinfektion unbedingt innerhalb von zwei Stunden nach dem Reinigen vor.
- Nach der Desinfektion muss das Ultraschallhandstück sterilisiert werden (siehe „9-2 Sterilisation“).
- Bei Verwendung eines Sprays (ALPRO) muss die Spitze des Ultraschallhandstücks mit einem Tuch abgedeckt werden, um eine unkontrollierte Verteilung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu vermeiden. Wir empfehlen dafür den Sprühnebelabsorber (Y900084).
- Halten Sie während des Einsprühens des ALPRO-Sprays das Ultraschallhandstück und den WL-Adapter 01.
- Beachten Sie beim Verwenden von ALPRO-Produkten die Anweisungen des Herstellers.


Manuell

■ Reinigung


- 1) Setzen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) auf die WL-clean Dose (ALPRO) und verbinden Sie den Wasseranschluss des Ultraschallhandstücks mit dem Ende des WL-Adapters 01 (ALPRO).



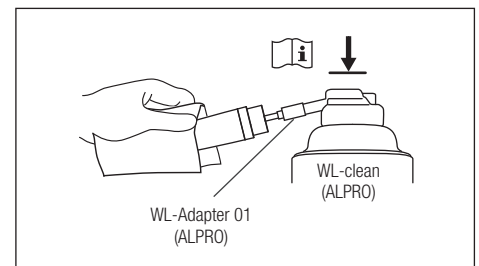- 2) Halten Sie beim Einsprühen von WL-clean (ALPRO) die WL-clean Dose (ALPRO) und das Ultraschallhandstück fest.




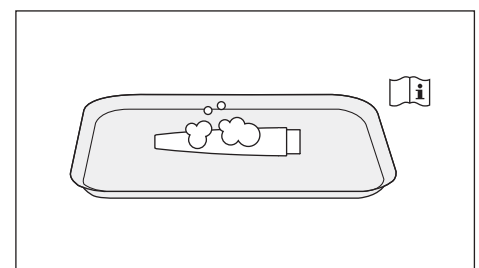- 3) Trennen Sie den Wasseranschluss des Ultraschallhandstücks vom WL-Adapter 01 (ALPRO) und nehmen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) von der WL-clean Dose (ALPRO) ab. Legen Sie danach das Ultraschallhandstück in die Desinfektionswanne. Sprühen Sie WL-clean (ALPRO) auf die Oberflächen des Ultraschallhandstücks und warten Sie dann, bis WL-clean (ALPRO) seine Wirkung entfalten konnte.




■ Desinfektion

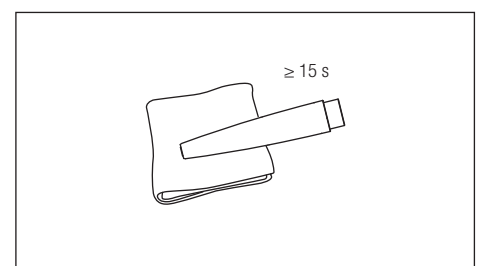
- 1) Wischen Sie die Oberflächen des Ultraschallhandstücks mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.



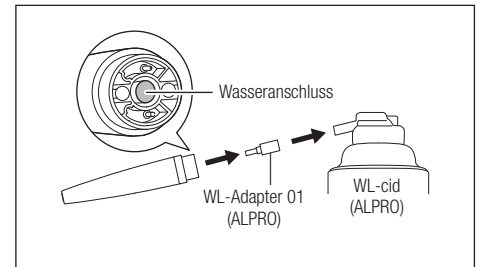2) Setzen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) auf die WL-cid Dose (ALPRO) und verbinden Sie den Wasseranschluss des Ultraschallhandstücks mit dem Ende des WL-Adapter 01 (ALPRO).



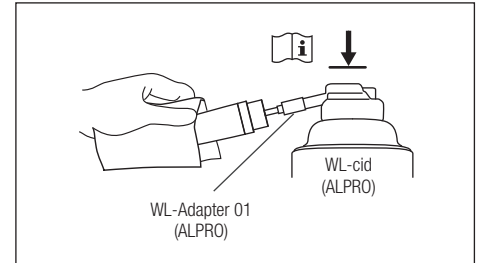
3) Sprühen Sie WL-cid (ALPRO) in den Wasseranschluss des Ultraschallhandstücks, wobei Sie das Ultraschallhandstück und die WL-cid Dose (ALPRO) festhalten.




4) Trennen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) und das Ultraschallhandstück von der WL-cid Dose (ALPRO).

5) Trennen Sie das Ultraschallhandstück vom WL-Adapter 01 (ALPRO) und legen Sie danach das Ultraschallhandstück in die Desinfektionswanne.

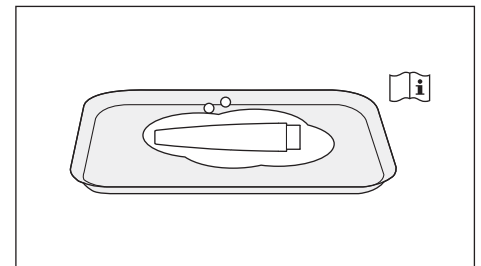6) Sprühen Sie WL-cid (ALPRO) auf die Oberflächen des Ultraschallhandstücks und warten Sie dann, bis WL-cid (ALPRO) seine Wirkung entfalten konnte.




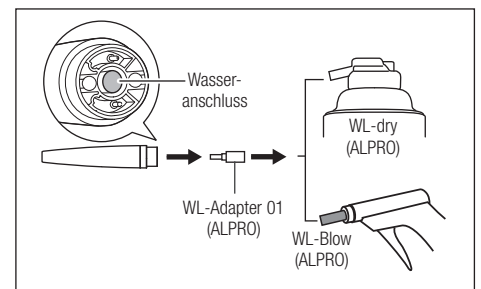7) Setzen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) auf die WL-dry Dose (ALPRO) oder die WL-Blow Pistole (ALPRO) und verbinden Sie dann die Rückseite des Ultraschallhandstücks mit dem WL-Adapter 01 (ALPRO).




8) Blasen Sie das Desinfektionsmittel aus dem Ultraschallhandstück, wobei Sie die WL-dry Dose (ALPRO) Dose oder die WL-Blow Pistole (ALPRO) sowie das Ultraschallhandstück festhalten.

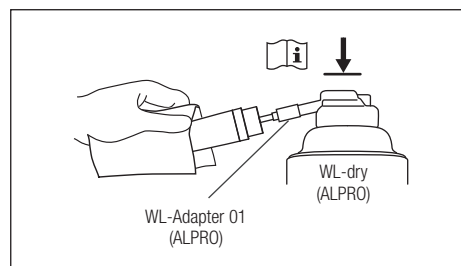Bei Verwendung von WL-dry (ALPRO):




Bei Verwendung von WL-Blow (ALPRO):

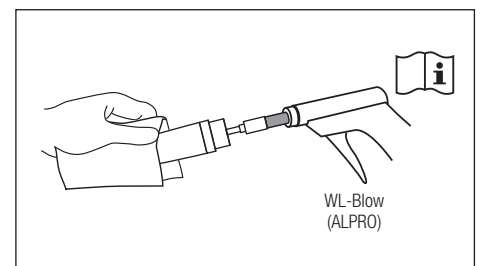

9) Trennen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) und das Ultraschallhandstück von der WL-dry Dose (ALPRO) oder der WL-Blow Pistole (ALPRO).

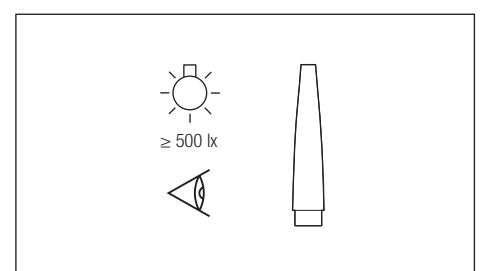10) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob weiterhin Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 1 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



11) Setzen Sie den Vorgang mit der Sterilisierung fort (siehe „9-2 Sterilisation“).

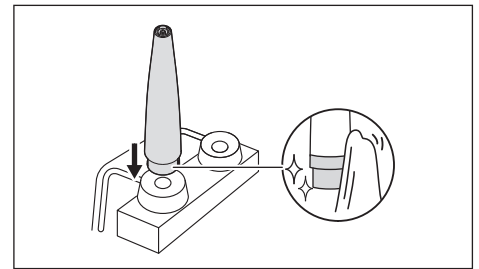
Automatisch

VORSICHT

- Verwenden Sie ein mit DIN EN ISO 15883 konformes Reinigungs- und Desinfektionsgerät.
- Lesen Sie das Handbuch Ihres Reinigungs- und Desinfektionsgeräts durch.
- Weil der Glasstab sehr zerbrechlich ist, müssen Sie die Spitze des Ultraschallhandstücks während der Reinigung unbedingt vor Stößen schützen.
- Nehmen Sie das Produkt unmittelbar (innerhalb einer Stunde) nach Abschluss der thermischen Desinfizierung und Trocknung aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät und trocknen es. Im Produkt verbleibende Feuchtigkeit verursacht interne Korrosion und andere Probleme.
- Verwenden Sie bei Nutzung eines Reinigungs- und Desinfektionsgeräts den mit dem Gerät kompatiblen Adapter (vom Benutzer bereitzustellen), um das Ultraschallhandstück zu reinigen und desinfizieren.
- Befolgen Sie für die automatische Reinigung und Desinfektion die Anweisungen im Handbuch des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts.

■ Reinigung und Desinfektion (außen und innen)

- 1) Wischen Sie das Verbindungsstück des Ultraschallhandstücks mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab, bevor Sie es am Adapter des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts befestigen.




Mit dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät kompatibler Adapter (vom Benutzer zu beschaffen)

| Hersteller | REF | Abschluss ca. | Farbe |
|------------|-----------|---------------|---------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Grün |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Grün |
| Geringe | 502887400 | 16 mm | Schwarz |


- 2) Führen Sie die Thermodesinfektion gemäß dem Handbuch des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts durch.



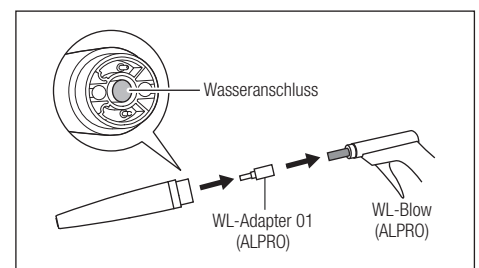
- 3) Nehmen Sie das Ultraschallhandstück aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät.
- 4) Setzen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) auf die WL-Blow Pistole (ALPRO) und verbinden Sie dann die Rückseite des Ultraschallhandstücks mit dem WL-Adapter (ALPRO).



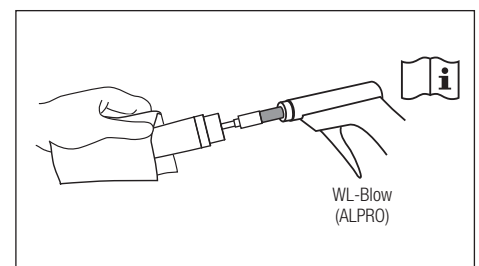- 5) Blasen Sie die Feuchtigkeit aus dem Ultraschallhandstück, wobei Sie die WL-Blow Pistole (ALPRO) sowie das Ultraschallhandstück festhalten.




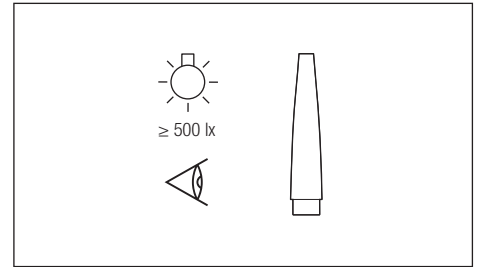- 6) Trennen Sie den WL-Adapter 01 (ALPRO) und das Ultraschallhandstück von der WL-Blow Pistole (ALPRO).
- 7) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob weiterhin Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 2 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



9-1-1-5 Glasstab

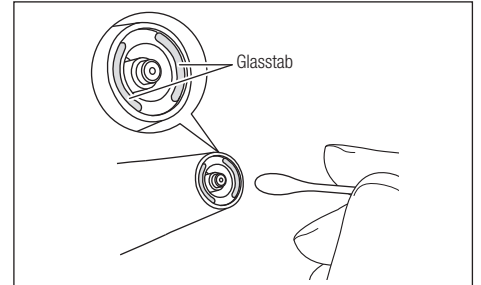Wenn Staub oder Ablagerungen am Glasstab haften, wischen Sie diese vorsichtig mit einem in Desinfektionsalkohol getränkten Wattestäbchen ab.




VORSICHT

- Benutzen Sie keine Nadeln oder Klingen zum Reinigen des Glasstabs. Dies würde den Glasstab beschädigen und seine Leitfähigkeit beeinträchtigen.


9-1-2 Handstückkabel

Reinigung und Desinfektion

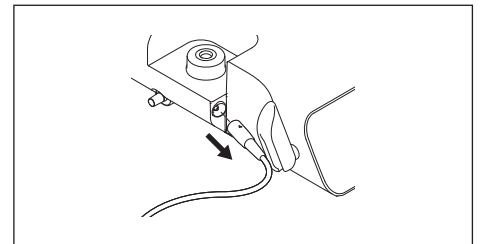
- 1) Trennen Sie das Handstückkabel von der Steuereinheit.



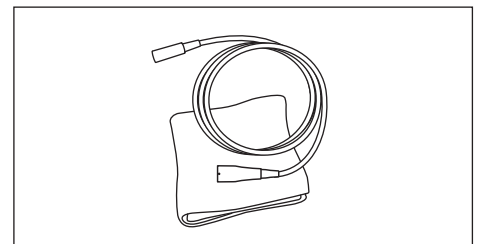
- 2) Wischen Sie die Oberfläche des Handstückkabels mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.



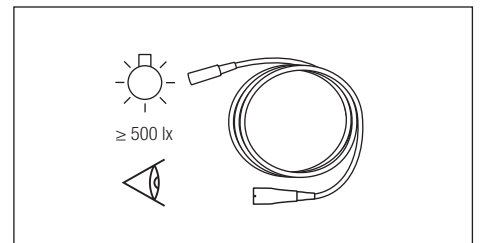
- 3) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob weiterhin Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 2 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



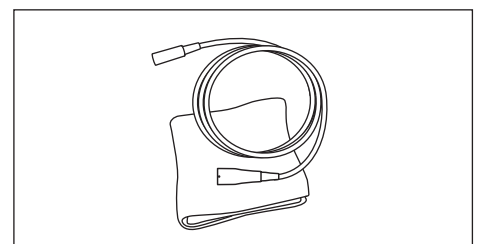- 4) Wischen Sie die Oberfläche des Handstückkabels mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.



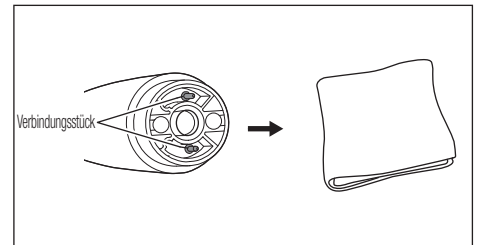- 5) Wischen Sie das Verbindungsstück mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.
 Falls ein Wattestäbchen zu dick für die Reinigung des Verbindungsstücks ist, wickeln Sie ein Feuchttuch oder etwas ähnliches um einen dünnen Stab, um das Verbindungsstück damit vorsichtig abzuwischen.




VORSICHT

- Verwenden Sie zum Reinigen des Verbindungsstücks keinen spitzen Stab und stecken Sie nichts in den Anschluss. Andernfalls könnten die Kontakte beschädigt und ihre Leitfähigkeit beeinträchtigt werden.


9-1-3 Spülbehälter

9-1-3-1 Reinigung und Desinfektion

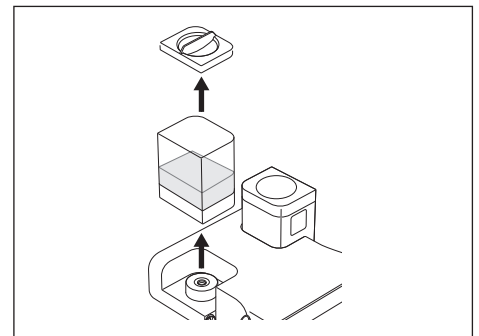
- 1) Nehmen Sie den Spülbehälter vom Anschluss des Spülbehälters und nehmen Sie dann des Spülbehälterdeckel vom Spülbehälter ab.



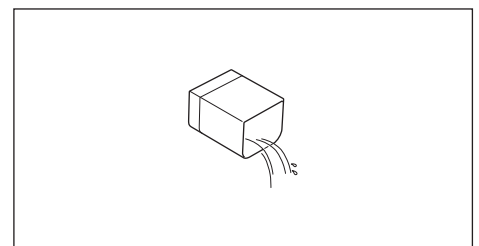
- 2) Leeren Sie das im Spülbehälter verbleibende Wasser oder Desinfektionsmittel aus.



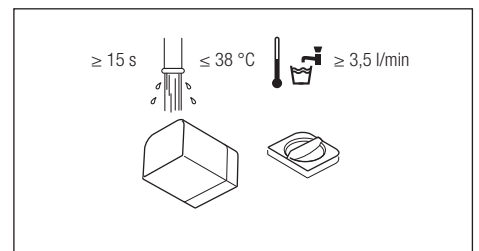- 3) Spülen Sie den Spülbehälter und den Spülbehälterdeckel unter laufendem Wasser ab.



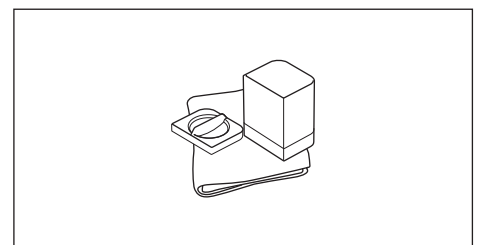- 4) Wischen Sie die Oberflächen des Spülbehälters und den Spülbehälterdeckel mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.




- 5) Setzen Sie den Behälter in den Anschluss des Spülbehälters ein.


9-1-4 Pulverhandstück

9-1-4-1 Entfernen des Düsenaufsatzes

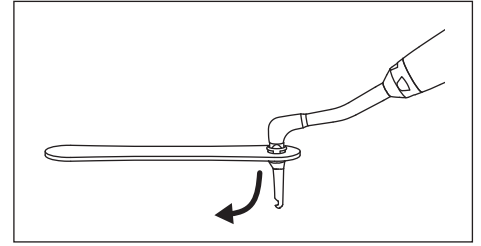1) Nehmen Sie den Perio Mate Düsenaufsatz mit dem Perio Mate Düsenaufsatzentferner ab.



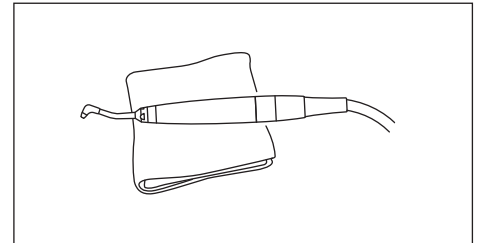2) Wischen Sie Verschmutzungen mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch von der Oberfläche des Pulverhandstücks ab.



ACHTUNG

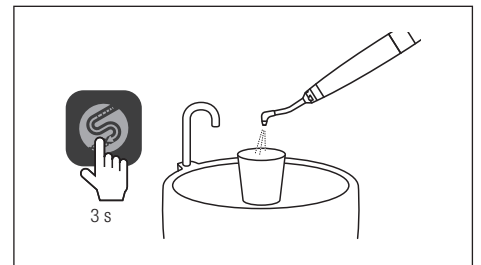
- Ein Düsenaufsatz darf nur einmalig verwendet werden. Nicht wiederverwenden. Ansonsten besteht Infektionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Perio Mate Düsenaufsätze als medizinischen Abfall.

9-1-4-2 Selbstreinigung


VORSICHT

- Während der Selbstreinigung tritt zur Reinigung verwendetes Wasser aus der Spitze des Pulverhandstücks aus. Stellen Sie vorab einen Behälter, z. B. eine Tasse, bereit, um das Wasser aufzufangen.
- Stellen Sie vor dem Starten der Selbstreinigung durch Tippen auf die Spülmittelmengentasten (▲) die Wassermenge auf L5 ein (siehe „11-3 Einstellen der Basisspüleleistung“).

1) Richten Sie die Spitze des Pulverhandstücks auf einen Behälter zum Auffangen des Wassers und drücken Sie dann drei Sekunden lang auf . Die Selbstreinigung startet. (Reinigungsdauer beträgt 45 Sekunden.)



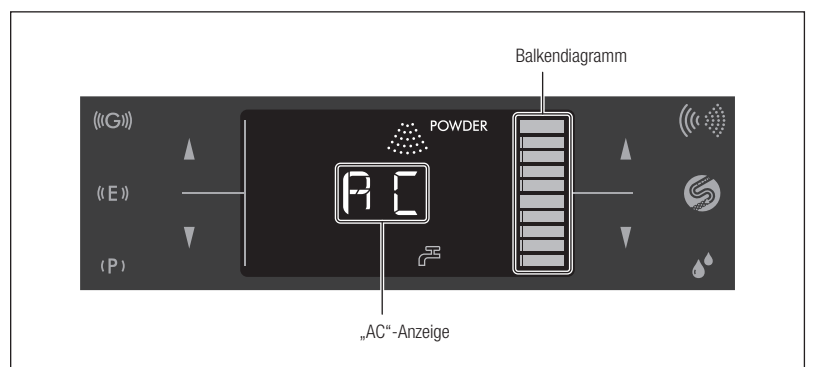
2) Während der Selbstreinigung wird auf dem LCD-Display „AC“ angezeigt. Das Balkendiagramm zeigt den Fortschritt an.



* Um die Selbstreinigung abzubrechen, tippen erneut auf .


Nach Selbstreinigung kehrt die Steuereinheit in den Zustand zurück, in dem sie sich vor Beginn des Selbstreinigungszyklus befand.

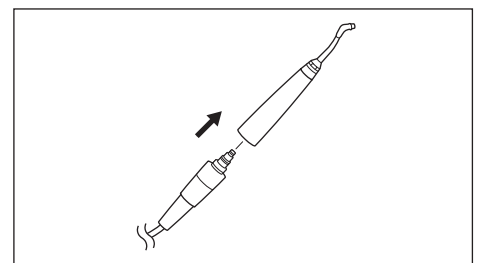3) Trennen Sie das Pulverhandstück vom Handstückschlauch.




9-1-4-3 Pulver entfernen

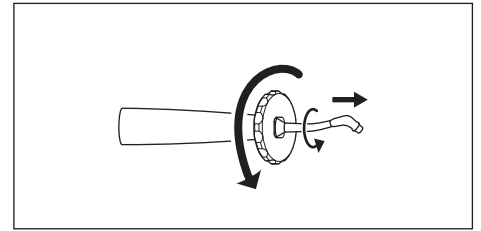1) Nehmen Sie die Düse mit dem Ringschlüssel (Zubehör) vom Pulverhandstück ab.



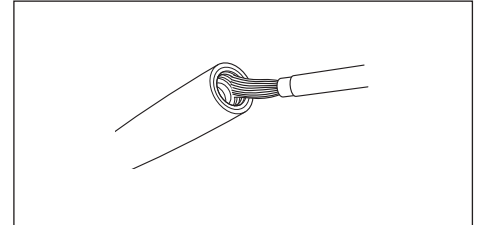2) Entfernen Sie an der Innenseite des Verbindungsstücks vom Pulverhandstück anhaftendes Pulver mit der Reinigungsbürste (Zubehör).




ACHTUNG


- Stellen Sie sicher, dass das Innere des Pulverhandstücks nach der Verwendung gereinigt wird. Im Pulverhandstück zurückbleibendes Pulver kann sich verfestigen und zu Verstopfungen führen.

9-1-4-4 Vorreinigung

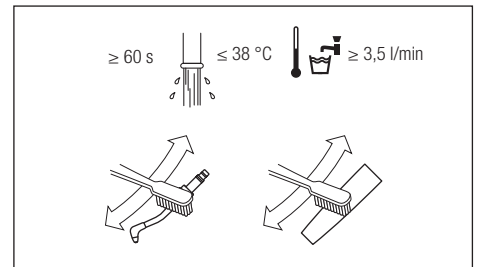
1) Reinigen Sie das Pulverhandstück und die Düse mit einer weichen Bürste unter laufendem Wasser.



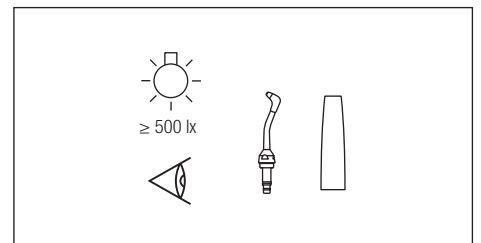2) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob weiterhin Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 1 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



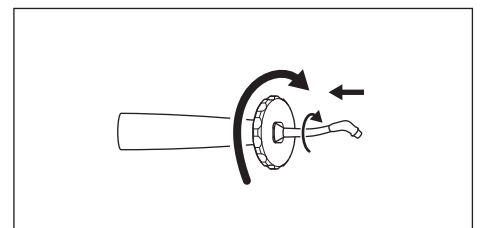3) Befestigen Sie die Düse am Pulverhandstück.



VORSICHT

- Führen Sie die Ultraschallreinigung mindestens einmal pro Woche aus, um Verstopfungen durch Pulverrückstände zu vermeiden. Führen Sie die Ultraschallreinigung vor der Selbstreinigung oder nach Durchführen der unter „14 Problembehandlung“ („9-3 Ultraschallreinigung (wöchentlich)“) beschriebenen Abhilfemaßnahmen durch.
- Verwenden Sie immer den im Lieferumfang enthaltenen Ringschlüssel zum Befestigen und Entfernen von Düsen. Halten Sie Düsen beim Befestigen oder Entfernen nicht an ihrem distalen Ende fest. Dies könnte eine Verformung der Düse verursachen.
- Verwenden Sie keine Ultraschallreinigung zur Reinigung von Pulverhandstücken.

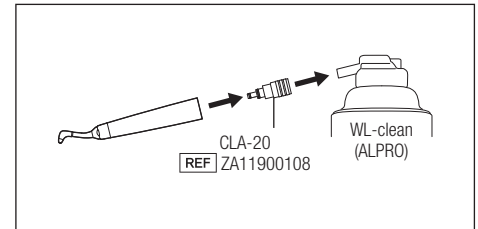
VORSICHT

- Wenn der O-Ring am CLA-20 verschlissen oder beschädigt ist, tauschen Sie ihn vor Gebrauch aus.
- Führen Sie vor der Reinigung unbedingt die Vorreinigung durch.
- Nach der Desinfektion muss das Pulverhandstück sterilisiert werden (siehe „9-2 Sterilisation“).
- Nehmen Sie die Desinfektion unbedingt innerhalb von zwei Stunden nach dem Reinigen vor.
- Bei Verwendung eines Sprays (ALPRO) muss der Kopf des Pulverhandstücks mit einem Tuch abgedeckt werden, um eine unkontrollierte Verteilung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu vermeiden. Wir empfehlen dafür den Sprühnebelabsorber (Y900084).
- Beachten Sie beim Verwenden von ALPRO-Produkten die Anweisungen des Herstellers.


Manuell

■ Reinigung

1) Befestigen Sie den CLA-20 (REF ZA11900108) an der WL-clean Dose (ALPRO) und danach das Pulverhandstück am CLA-20.




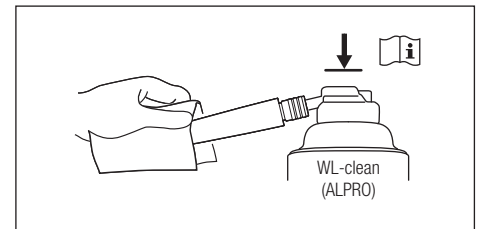2) Halten Sie beim Einsprühen von WL-clean (ALPRO) die WL-clean Dose (ALPRO) und das Pulverhandstück fest.




3) Nehmen Sie den CLA-20 und das Pulverhandstück von der WL-clean Dose (ALPRO) ab.

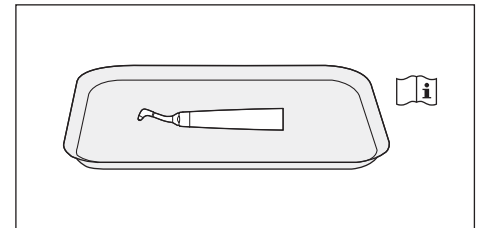4) Warten Sie ab, bis das WL-clean (ALPRO) seine Wirkung entfaltet hat.




■ Desinfektion

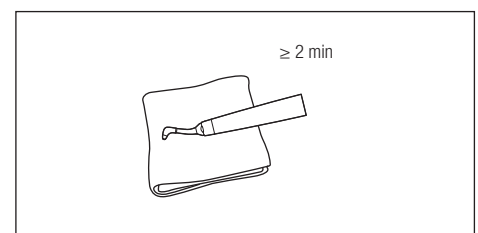
1) Wischen Sie die Oberflächen des Pulverhandstücks mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.



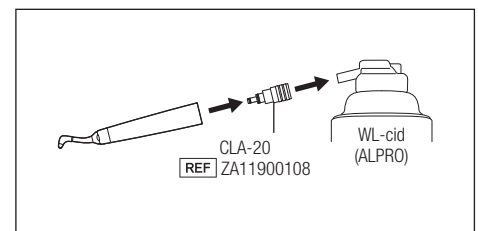
2) Befestigen Sie den CLA-20 (REF ZA11900108) an der WL-cid Dose (ALPRO) und danach das Pulverhandstück am CLA-20.



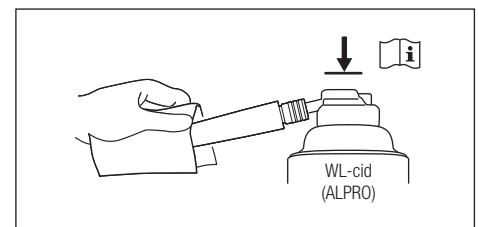
3) Halten Sie beim Einsprühen von WL-cid (ALPRO) die WL-cid Dose (ALPRO) und das Pulverhandstück fest.



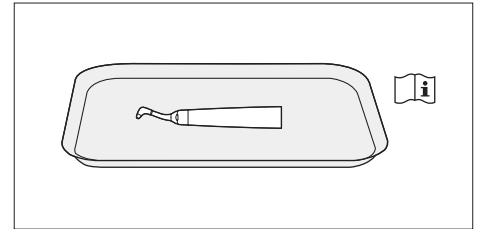- 4) Nehmen Sie den CLA-20 und das Pulverhandstück von der WL-cid Dose (ALPRO) ab.
- 5) Warten Sie ab, bis das WL-cid (ALPRO) seine Wirkung entfaltet hat.




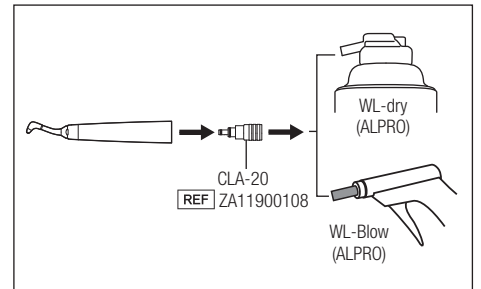- 6) Befestigen Sie den CLA-20 an der WL-dry Dose (ALPRO) oder an der WL-Blow Pistole (ALPRO) und danach das Pulverhandstück am CLA-20.




- 7) Blasen Sie das Desinfektionsmittel aus dem Pulverhandstück, wobei Sie WL-dry Dose (ALPRO) Dose oder die WL-Blow Pistole (ALPRO) sowie das Pulverhandstück festhalten.

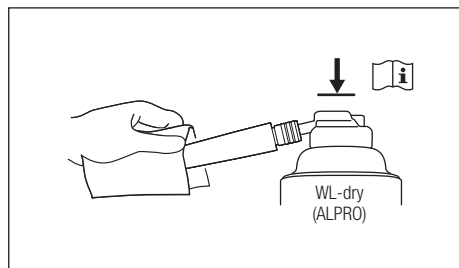
· Bei Verwendung von WL-dry (ALPRO):



· Bei Verwendung von WL-Blow (ALPRO):

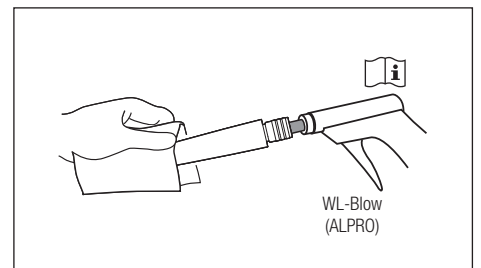

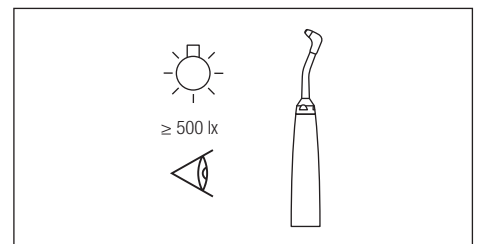- 8) Trennen Sie den Pulverhandstück von der WL-dry Dose (ALPRO) oder der WL-Blow Pistole (ALPRO).
- 9) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob weiterhin Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 1 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



- 10) Setzen Sie den Vorgang mit der Sterilisierung fort (siehe „9-2 Sterilisation“).

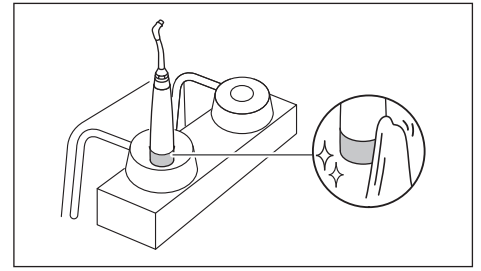
Automatisch

VORSICHT

- Verwenden Sie ein mit ISO 15883 konformes Reinigungs- und Desinfektionsgerät.
- Lesen Sie das Handbuch Ihres Reinigungs- und Desinfektionsgeräts durch.
- Trocknen Sie das Pulverhandstück nach der Reinigung mit einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät gründlich ab. Feuchtigkeitsrückstände können interne Korrosion und eine unzureichende Schmierung verursachen.
- Nehmen Sie das Produkt unmittelbar (innerhalb einer Stunde) nach Abschluss der thermischen Desinfizierung und Trocknung aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät und trocknen es. Im Produkt verbleibende Feuchtigkeit verursacht interne Korrosion und unzureichende Schmierung.
- Verwenden Sie bei Nutzung eines Reinigungs- und Desinfektionsgeräts den mit dem Gerät kompatiblen Adapter (vom Benutzer bereitzustellen), um das Pulverhandstück zu reinigen und desinfizieren.
- Befolgen Sie für die automatische Reinigung und Desinfektion die Anweisungen im Handbuch des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts.

■ Reinigung und Desinfektion


- 1) Wischen Sie das Verbindungsstück des Pulverhandstücks mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab, bevor Sie es am Adapter des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts befestigen.




Mit dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät kompatibler Adapter (vom Benutzer zu beschaffen)

| Hersteller | REF | Abschluss ca. | Farbe |
|------------|-----------|---------------|---------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Grün |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Grün |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Schwarz |

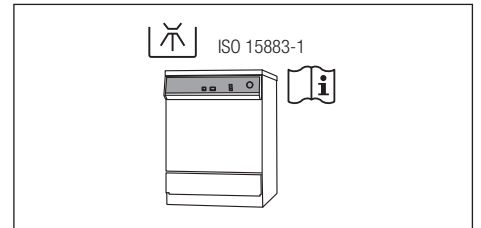
- 2) Führen Sie die Thermodesinfektion gemäß dem Handbuch des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts durch.



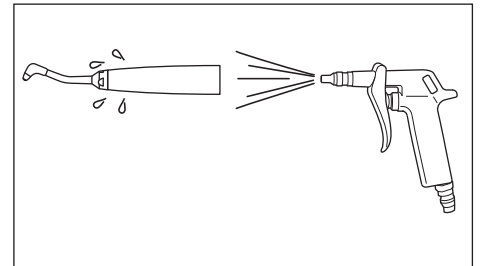- 3) Befreien Sie die Oberflächen und das Innere des Pulverhandstücks mit einer Druckluftpistole oder einem ähnlichen Werkzeug von Feuchtigkeit.



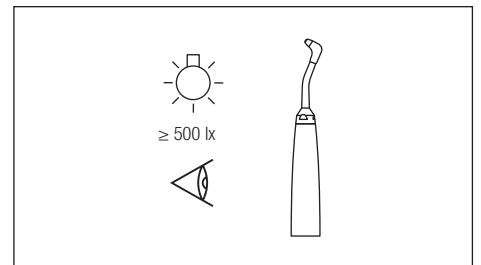- 4) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 2 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.




- 5) Setzen Sie den Vorgang mit der Sterilisierung fort (siehe „9-2 Sterilisation“).

9-1-5 Kammer und Handstückschlauch


Führen Sie am Ende des Tages die folgende Wartung durch.

9-1-5-1 Pulver entfernen

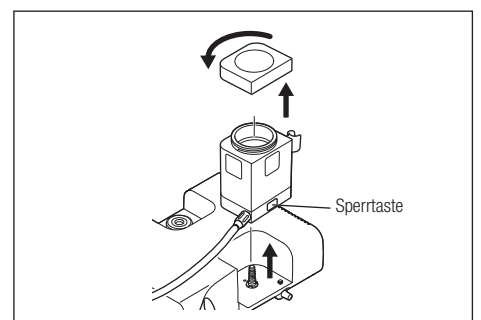- 1) Lassen Sie den Restdruck aus der Kammer ab (siehe „8-6-4 Ablassen des Restdrucks“).
 2) Drücken Sie auf die Sperrtaste und nehmen Sie dann die Kammer aus dem Kammeranschluss.
 Nehmen Sie den Kammerdeckel ab.




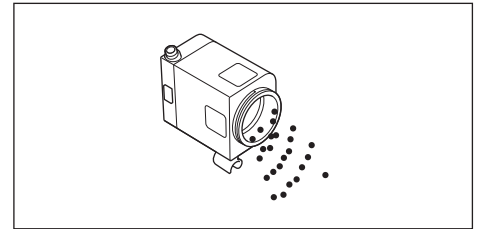3) Entsorgen Sie das Pulver in der Kammer (siehe „22 Entsorgung des Produkts“).




4) Schließen Sie den Kammerdeckel fest und setzen Sie die Kammer gerade in den Kammeranschluss ein.

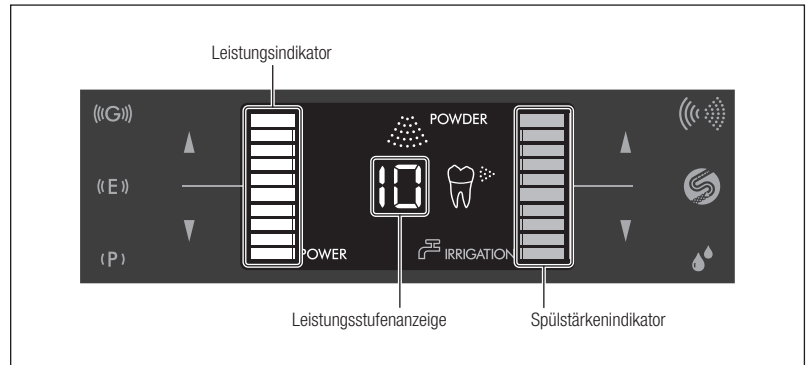5) Stellen Sie die Leistungsstufe und die Spülstärke auf „10“ bzw. den Höchstwert ein.



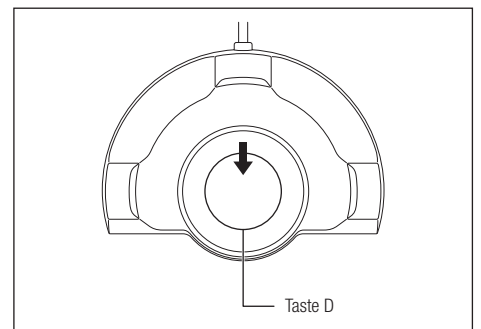6) Richten Sie den Handstückschlauch auf ein Speibecken oder ein Waschbecken und betätigen Sie die Taste D auf dem Fußschalter, um das Gerät 5 Mal für einen längeren Zeitraum als eine Sekunde in Betrieb zu nehmen.



7) Führen Sie die Selbstreinigung aus, um das verbleibende Pulver und Wasser aus dem Handstückschlauch zu entfernen (siehe „9-1-4-2 Selbstreinigung“).

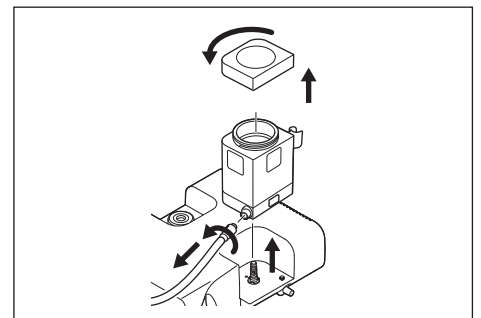
9-1-5-2 Reinigung und Desinfektion

1) Lassen Sie den Restdruck aus der Kammer ab (siehe „8-6-4 Ablassen des Restdrucks“).


2) Drücken Sie auf die Sperrtaste und nehmen Sie dann die Kammer aus dem Kammeranschluss.

Nehmen Sie den Kammerdeckel ab und trennen Sie den Handstückschlauch.


* Wenn sich die Kammer nicht abnehmen lässt, obwohl Sie auf die Sperrtaste gedrückt haben, lösen Sie die Sperrtaste (siehe „9-1-5-3 Sperrtaste lösen“).



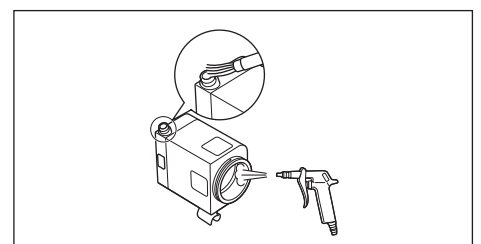
3) Entfernen Sie das in der Kammer und in der Handstückschlauchbuchse verbleibende Pulver mit einer Druckluftpistole oder einem ähnlichen Werkzeug.



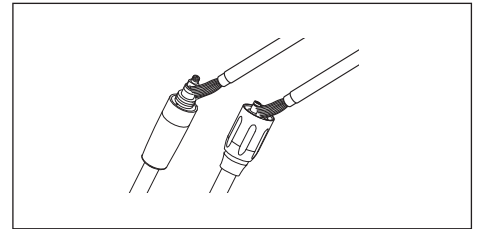
- 4) Entfernen Sie das verbleibende Pulver von beiden Enden des Handstückschlauchs mit der Reinigungsbürste (Zubehör).



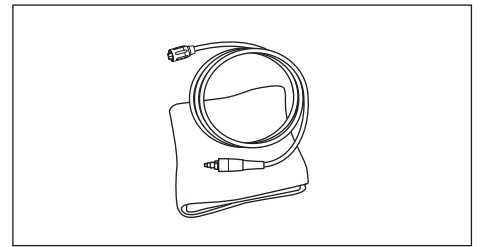
- 5) Stellen Sie sicher, dass kein Pulver im Gewinde des Kammerdeckels zurückbleibt. Sollte das der Fall sein, wischen Sie es ab. (Siehe „Reinigen des Kammerdeckels“)
6) Wischen Sie die Oberfläche des Handstückschlauchs mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.



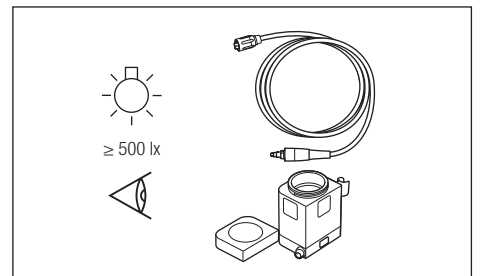- 7) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, Vorgang erneut ab Schritt 3 beginnen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



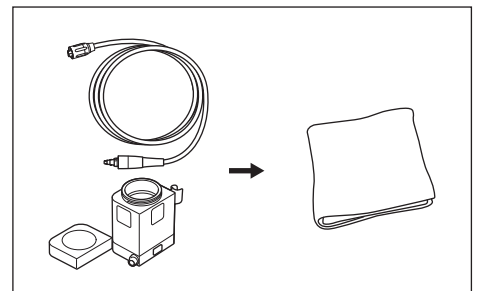- 8) Wischen Sie die Oberflächen der Kammer, des Kammerdeckels und den Handstückschlauch mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.



- 9) Mit der Aufbewahrung fortfahren (siehe „9-4 Aufbewahrung“) oder die Kammer gerade in den Kammeranschluss einsetzen.

ACHTUNG

- Den Kammerdeckel fest anbringen. Ansonsten könnte sich der Kammerdeckel während des Gebrauchs unter Einfluss von Druckluft in der Kammer ungewollt abrupt lösen, wobei die Gefahr von Sachschäden am Gerät und Verletzungsgefahr besteht.



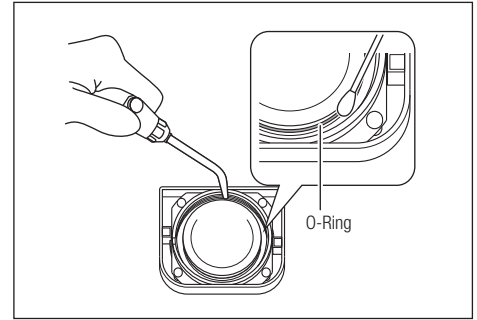
VORSICHT

- Wenn am Gewinde an der Kammer bzw. am Kammerdeckel Pulver haften bleibt, lässt sich der Deckel nur mit Schwierigkeiten schließen. Durch Reinigen der Kammer und des Kammerdeckels lässt sich der Deckel einfach öffnen und schließen (siehe „Reinigen des Kammerdeckels“).
- Bei einer Fehlfunktion an der Kammer ist die Reparatur unbedingt durch einen autorisierten NSK-Fachhändler durchzuführen.
- Entfernen Sie nach dem Gebrauch das an der Innenseite der Kammer haftende Pulver vollständig und reinigen Sie die Kammer, bevor Sie sie aufbewahren.
- Spülen Sie die Kammer nicht mit Wasser aus. Andernfalls verhärtet sich das Pulver und verursacht Verstopfungen. Nach dem Gebrauch kann in der Kammer für einen längeren Zeitraum der Luftdruck erhöht sein, was es schwierig macht, den Deckel zu öffnen. Warten Sie in diesem Fall etwas ab oder lassen Sie den Druck ab, bevor Sie den Deckel öffnen (siehe „8-6-4 Ablassen des Restdrucks“).
- Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Verbinden von Handstückschlauch, Kammer und Handstück, bzw. Kammer und Steuereinheit, das gesamte Wasser mit trockener Luft aus den Anschlüssen des Schlauchs und der Kammer blasen. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Luftversorgung eindringen und zum Verfestigen des Reinigungspulvers im Inneren des Produkts führen.

Reinigen des Kammerdeckels

Wenn an der Kammer bzw. am Kammerdeckel Pulver haften bleibt, reinigen Sie es sofort. Andernfalls wird der Kammerdeckel schwierig verschließbar. Durch das Reinigen der Kammer und des Kammerdeckels anhand des folgenden Verfahrens lässt sich der Deckel einfach öffnen und schließen.

- 1) Nehmen Sie den Kammerdeckel ab.
- 2) Reinigen Sie das Innere der Kammer, die Gewinde und den Rand der O-Rings am Kammerdeckel mit einer Bürste oder einem trockenen Wattestäbchen.




- 3) Entfernen Sie anhaftendes Pulver mit Druckluft.
- 4) Mit der Aufbewahrung fortfahren (siehe „9-4 Aufbewahrung“) oder die Kammer gerade in den Kammeranschluss einsetzen.

9-1-5-3 Sperrtaste lösen

Wenn sich die Sperrtaste nicht eindrücken lässt, wodurch die Kammer nicht abgenommen werden kann, können Sie mit dem folgenden Verfahren die Sperrtaste lösen und die Kammer abnehmen.

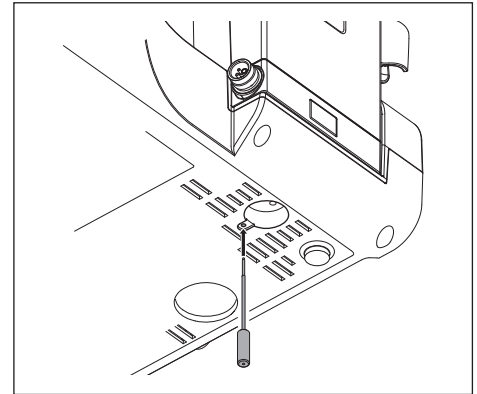- 1) Schieben Sie den Entriegelungs-Dorn (Zubehör) vollständig in die Öffnung an der Unterseite der Steuereinheit, um die Sperrtaste zu lösen.



- 2) Ziehen Sie den Entriegelungs-Dorn wieder heraus.
- 3) Drücken Sie die Sperrtaste und nehmen Sie dann die Kammer ab.
Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler, wenn die Sperrtaste nicht mit dem vorstehenden Verfahren gelöst werden kann.

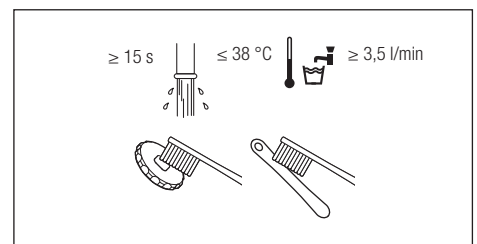
ACHTUNG

- Drehen Sie die Steuereinheit nicht auf den Kopf, wenn Sie die Sperrtaste lösen. Ein Umdrehen der Kammer kann zu pulverbedingten Blockaden/Verstopfungen führen.
- Drehen Sie den Entriegelungs-Dorn beim Einführen nicht.


9-1-6 Ringschlüssel und Perio Mate Düsenaufsatzentferner

9-1-6-1 Reinigung und Desinfektion


- 1) Reinigen Sie den Ringschlüssel und den Perio Mate Düsenaufsatzentferner 15 Sekunden lang oder länger unter laufendem Wasser mit einer weichen Bürste.



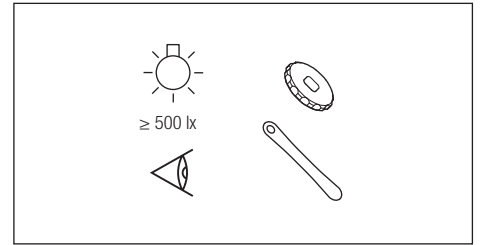2) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob Verschmutzungen vorhanden sind.



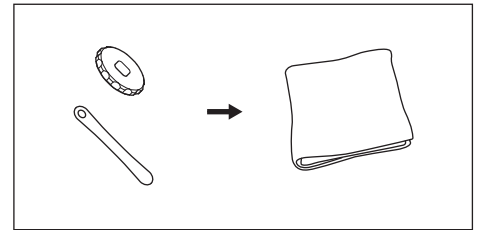3) Wischen Sie die den Ringschlüssel und den Perio Mate Düsenaufsatzentferner mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.




4) Setzen den Vorgang mit der Sterilisation fort (siehe „9-2 Sterilisation“).

9-1-7 Steuereinheit und Fußschalter

9-1-7-1 Reinigung

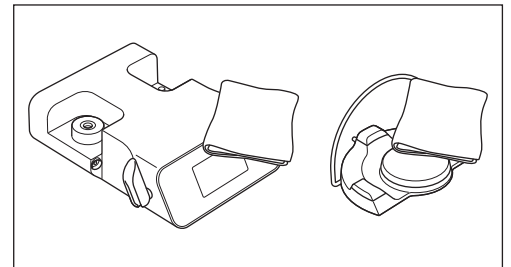- 1) Schalten Sie die Stromversorgung aus.
- 2) Wischen Sie Verschmutzungen von den Oberflächen der Steuereinheit und des Fußschalters mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- 3) Wischen Sie die Oberflächen der Steuereinheit und des Fußschalters mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch ab.



4) Setzen den Vorgang mit der Aufbewahrung fort (siehe „9-4 Aufbewahrung“).

VORSICHT

- Verwenden Sie zum Reinigen, Eintauchen oder Abwischen keine Lösungsmittel wie elektrolytisch oxidierendes Wasser (stark saures Wasser oder stark saures Wasser), stark saure oder alkalische Chemikalien, chlorhaltige Lösungsmittel, Benzin oder Verdüner.


9-2 Sterilisation

Die Wirksamkeit des folgenden Sterilisationsverfahrens wurde in Übereinstimmung mit ISO17665 nachgewiesen.
Zu sterilisierende Elemente:

Ultraschallhandstück, Pulverhandstück, Ringschlüssel, Perio Mate Düsenaufsatzentferner

- 1) Legen Sie die Elemente in einen Sterilisationsbeutel gemäß EN ISO 11607-1 und versiegeln Sie diesen.
- 2) Führen Sie die Sterilisation unter den folgenden Bedingungen durch.

| Typ | Schwerkraftabscheidung (Klasse N) | Vorvakuum (Klasse B) |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Temperatur | 132 °C | 134 °C |
| Sterilisationsdauer | ≥15 min | 3-18 min |

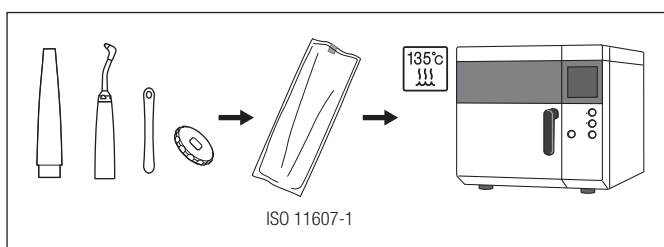

3) Setzen den Vorgang mit der Aufbewahrung fort (siehe „9-4 Aufbewahrung“).

**VORSICHT**

- Beachten Sie immer die lokalen Vorschriften, Normen, Leitlinien usw. bezüglich der Aufbereitung von Geräten ein.
- Verwenden Sie einen mit ISO 11607-1 konformen Sterilisationsbeutel.
- Legen bei der Durchführung der Sterilisation im Autoklaven keine anderen Instrumente zusammen mit den Elementen dieses Produkts in einen Sterilisationsbeutel. Andernfalls können sich die Oberflächen des Produkts verfärben und die innen liegenden Teile beeinträchtigt werden. Achten Sie außerdem darauf, dass während im Autoklaven keine Chemikalien in das Produkt gelangen.
- Verwenden Sie unbedingt ein Sterilisationsgerät, das die Sterilisation bei bis zu 135 °C durchführen kann. Verwenden Sie kein Sterilisationsgerät, das im Trockenzyklus die Temperatur von 135 °C überschreitet. Andernfalls kann das Produkt funktionsunfähig werden. Weitere Informationen beziehen Sie bitte vom Hersteller des Sterilisationsgeräts.
- Lagern Sie das Produkt an einem Ort, an dem es keinen negativen Auswirkungen von atmosphärischem Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Sonnenlicht, Staub, Salz und Schwefelatmosphären ausgesetzt sein könnte.
- Das Produkt bei der Sterilisation nicht schnell erhitzen oder abkühlen. Schnelle Temperaturänderungen können das Produkt beschädigen.
- Das Produkt nicht direkt nach der Sterilisation berühren, weil es heiß ist.
- Für dieses Produkt wurde die Wirksamkeit anderer Sterilisationsmethoden als Dampfsterilisation (z. B. Plasmasterilisation oder EOG-Sterilisation) nicht nachgewiesen.
- Entnehmen Sie das Produkt nach Abschluss der Sterilisation innerhalb von einer Stunde aus dem Sterilisationsgerät. Anderenfalls kann Korrosion auftreten.
- Sterilisieren Sie ausschließlich die sterilisierbaren Geräteteile.

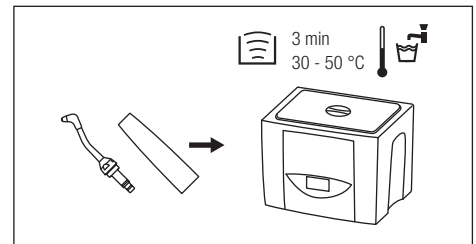
HINWEIS

- Wir empfehlen die Verwendung eines Sterilisationsgeräts der Klasse B gemäß EN13060. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Sterilisationsgeräteherstellers.
- Nach wiederholter Sterilisation im Autoklaven kann es zwar zu hitzebedingten Verfärbungen am Handstück kommen, diese sind aber auf die Beschaffenheit des Produkts zurückzuführen und sind kein Anzeichen für eine minderwertige Qualität des Produkts.


9-3 Ultraschallreinigung (wöchentlich)

Führen Sie vor der Ultraschallreinigung unbedingt die Reinigung und Desinfektion durch (siehe „9-1-4 Pulverhandstück“).


- 1) Reinigen Sie das Pulverhandstück und die Düse mit Ultraschallreinigung.



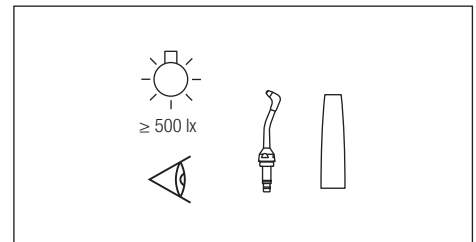
- 2) Prüfen Sie bei angemessener Beleuchtung (500 lx oder stärker), ob Verschmutzungen vorhanden sind. Sollte das Fall sein, Schritt 1 wiederholen, bis keine Verschmutzung mehr vorhanden ist.



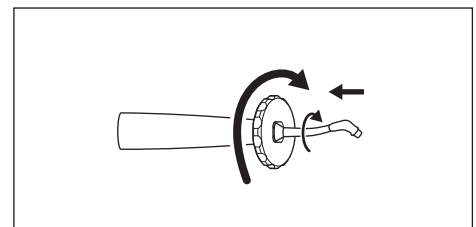- 3) Befestigen Sie die Düse mit dem Ringschlüssel (Zubehör) am Pulverhandstück.



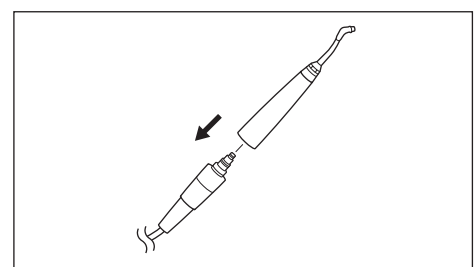- 4) Schieben Sie das Pulverhandstück gerade in den Handstückschlauchstecker.



5) Führen Sie die Selbstreinigung und Sterilisation durch (siehe „9-1-4-2 Selbstreinigung“ und „9-2 Sterilisation“).



VORSICHT

- Führen Sie nach der Ultraschallreinigung eine Selbstreinigung aus, um interne Feuchtigkeit zu entfernen, und trocknen Sie das Produkt danach gründlich ab.
- Führen Sie nach der Selbstreinigung unbedingt eine Sterilisation durch.
- Verwenden Sie keine Ultraschallreinigung zur Reinigung von Ultraschallhandstücken. Das Handstück wird dabei beschädigt.

9-4 Aufbewahrung

Bewahren Sie das Produkt in einer Umgebung auf, die den desinfizierten und sterilisierten Zustand des Produkts bis zum nächsten Gebrauch gewährleistet.



VORSICHT

- Lagern Sie das Produkt an einem Ort, an dem es keinen negativen Auswirkungen von atmosphärischem Druck, Temperatur, Belüftung, Sonnenlicht, Staub, Salz und Schwefelatmosphären ausgesetzt sein könnte.

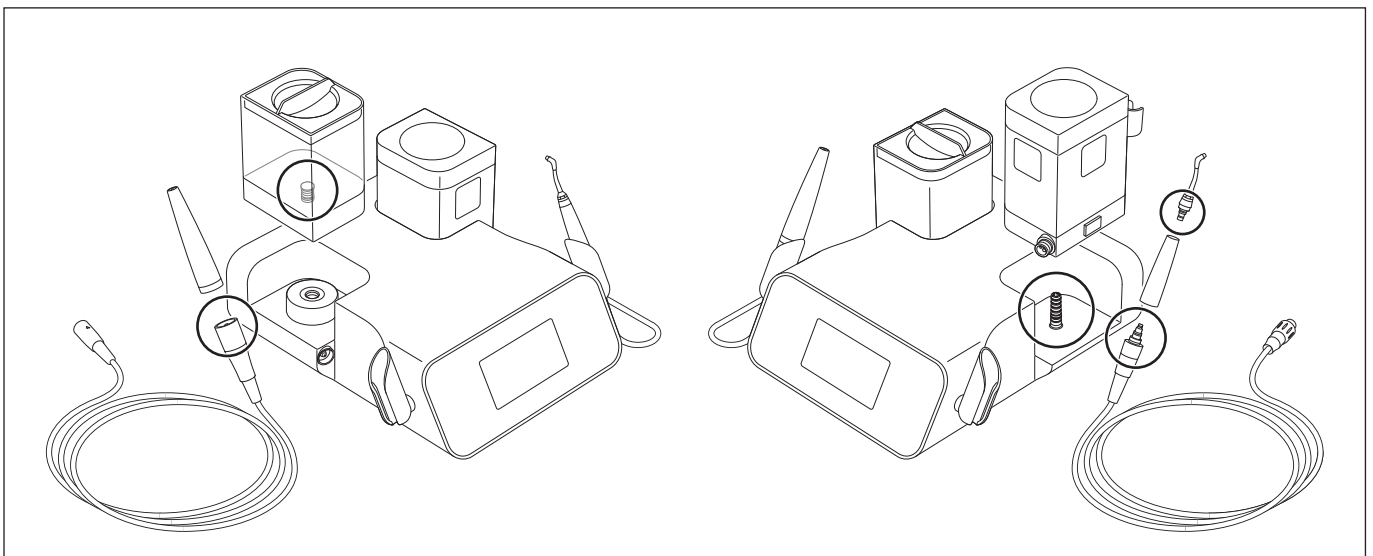
Deutsch

10 Pflege und Wartung

10-1 Wartung der O-Ringe

Führen Sie die Wartung aus, um den Verschleiß der O-Ringe an den Zielteilen zu verringern und das Austreten von Wasser oder Luft zu verhindern.

* Für das Ersetzen des O-Rings des Kammerdeckels wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten NSK-Fachhändler.




10-1-1 Handstückkabel

- 1) Entfernen Sie das Handstückkabel von der Steuereinheit.
- 2) Entfernen Sie den zu ersetzenden O-Ring mit Hilfe einer Nadel oder dergleichen.
- 3) Setzen Sie den neuen O-Ring in die Rille, aus der der alte O-Ring entfernt wurde.

* Genauere Angaben zu Ersatz-O-Ringen finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.

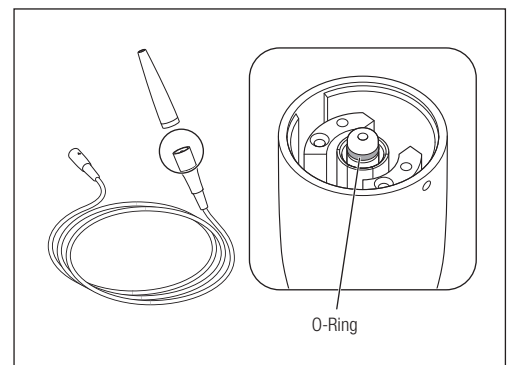REF Y1003546





10-1-2 Handstückschlauch (für Prophy- und Perio-Anwendungen)

- 1) Trennen Sie den Schlauch vom Pulverhandstück und von der Kammer.
- 2) Entfernen Sie die O-Ringe mit einer Nadel oder dergleichen vom Handstückschlauchstecker. Wenn sich in den Rillen des O-Rings Pulver befindet, reinigen Sie diese, bevor Sie den neuen O-Ring einsetzen.
- 3) Setzen Sie die neuen O-Ringe in die Rillen, aus denen die alten O-Ringe entfernt wurden.
- 4) Tragen Sie einen Tropfen des mitgelieferten Turbinenöls auf und verreiben Sie es mit dem Finger.

* Genauere Angaben zu Ersatz-O-Ringen finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.

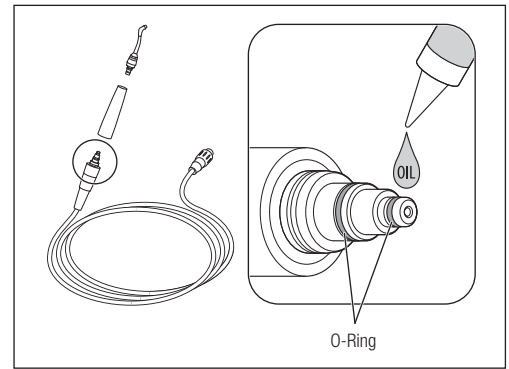REF Y1003500




VORSICHT  • Wenn der handstückseitige O-Ring nicht geschmiert wird, können Schäden am Anschlussbereich entstehen, sodass der Anschluss des Handstücks nicht mehr gedreht werden kann. Zudem kann Wasser auslaufen.

10-1-3 Düse (für Prophy oder Perio Anwendungen)

- 1) Führen Sie den mitgelieferten Ringschlüssel über die Düse, lösen Sie die Düse und trennen Sie sie vom Handstück.
- 2) Entfernen Sie die O-Ringe mithilfe einer Nadel, etc. vom Düsenende. Sollte sich Pulver in den Rillen befinden, entfernen Sie dieses, bevor Sie neue O-Ringe einsetzen.
- 3) Platzieren Sie neue O-Ringe in den Rillen, aus denen die alten O-Ringe entfernt wurden.

* Genauere Angaben zu Ersatz-O-Ringen finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.

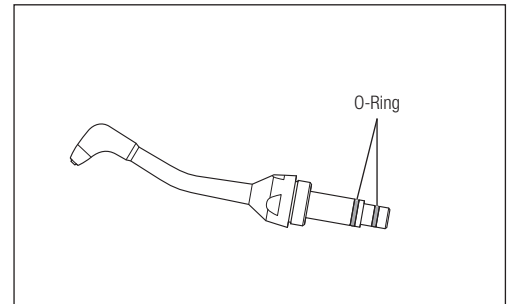REF Y1003501




10-1-4 Spülbehälter

- 1) Entfernen Sie die O-Ringe mit einer Nadel oder dergleichen vom Anschluss des Spülbehälters.
- 2) Setzen Sie die neuen O-Ringe in die Rillen, aus denen die alten O-Ringe entfernt wurden.

* Genauere Angaben zu Ersatz-O-Ringen finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.

REF Y1003544

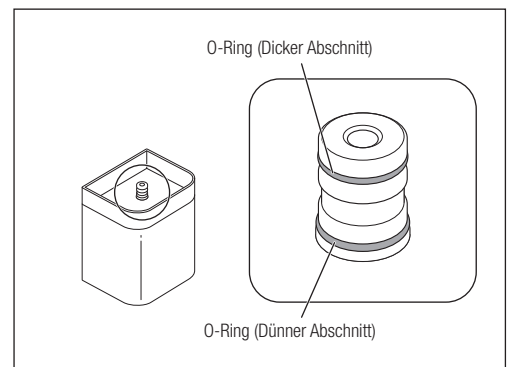VORSICHT  • Die O-Ringe haben verschiedene Stärken. Achten Sie darauf, dass Sie sie jeweils in die korrekte Rille setzen.




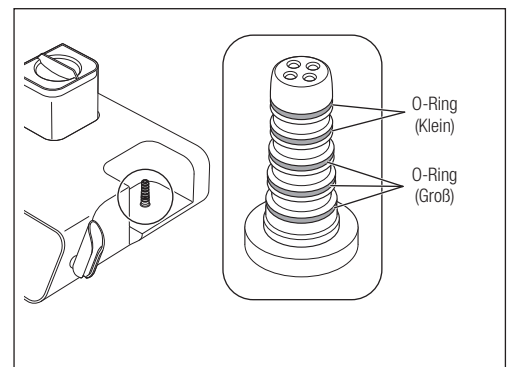
10-1-5 Anschluss am Kammerboden

- 1) Entfernen Sie die O-Ringe mit einer Nadel oder dergleichen vom Anschluss am Kammerboden.
- 2) Setzen Sie die neuen O-Ringe in die Rillen, aus denen die alten O-Ringe entfernt wurden.

* Genauere Angaben zu Ersatz-O-Ringen finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.

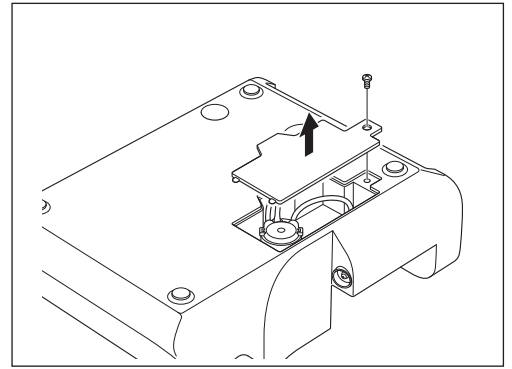
REF Y1003435

VORSICHT  • Da die Größe der O-Ringe unterschiedlich ist, achten Sie darauf, sie an der jeweils richtigen Stelle auszuwechseln.




10-2 Austauschen des Kühlmittelpumpensatzes


- 1) Trennen Sie Spülbehälter, Kammer, Stromkabel, Handstückkabel und Fußschalter von der Steuereinheit.
- 2) Drehen Sie die Steuereinheit herum. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen Sie die Schraube von der Abdeckung des Kühlmittelpumpensatz und entfernen die Abdeckung.



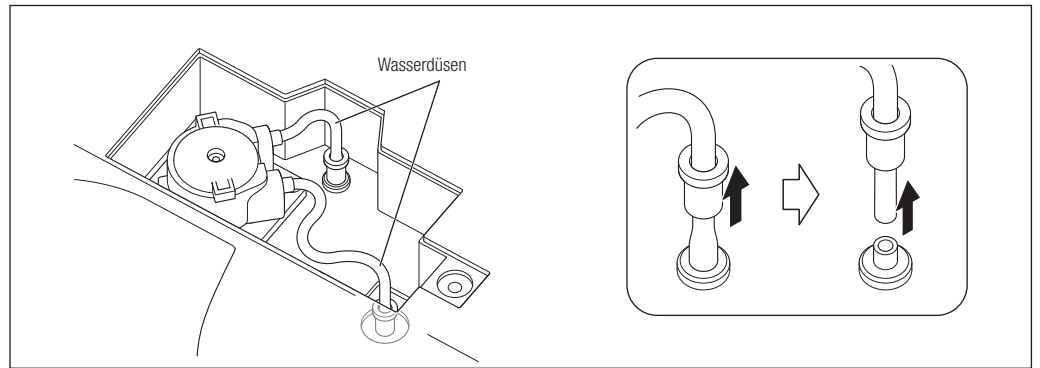
- 3) Trennen Sie die beiden Wasserdüsen von der Steuereinheit.



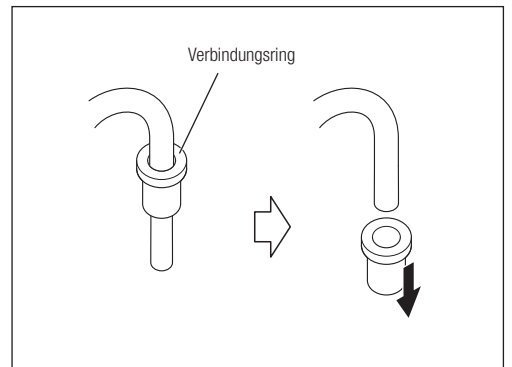
- 4) Entfernen Sie den Verbindungsring von der Wasserdüse. Bewahren Sie diesen auf. Den Ring können Sie am neuen Kühlmittelpumpensatz wieder verwenden.



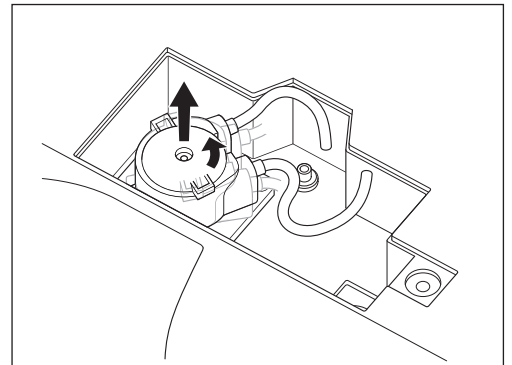
- 5) Drehen Sie den Kühlmittelpumpensatz gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist, und ziehen Sie ihn dann heraus.



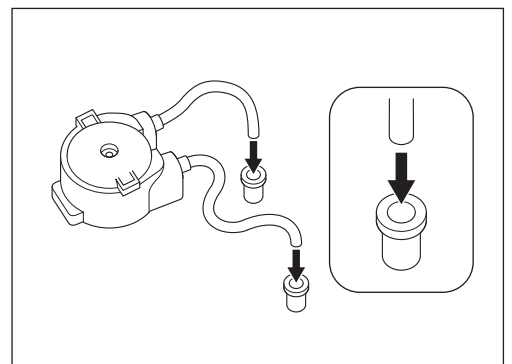
- 6) Bringen Sie die Verbindungsringe in den Wasserdüsen des neuen Kühlmittelpumpensatzes (Option) an. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Ringe.



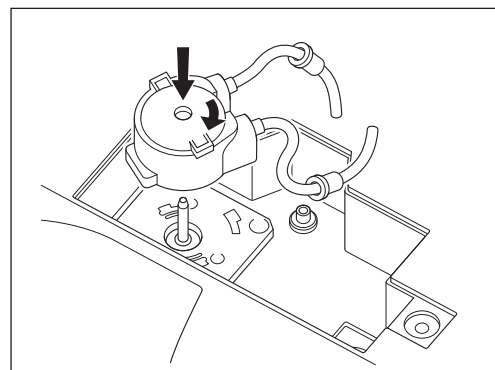- 7) Richten Sie den neuen Kühlmittelpumpensatz (Option) an der Antriebswelle aus. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist.



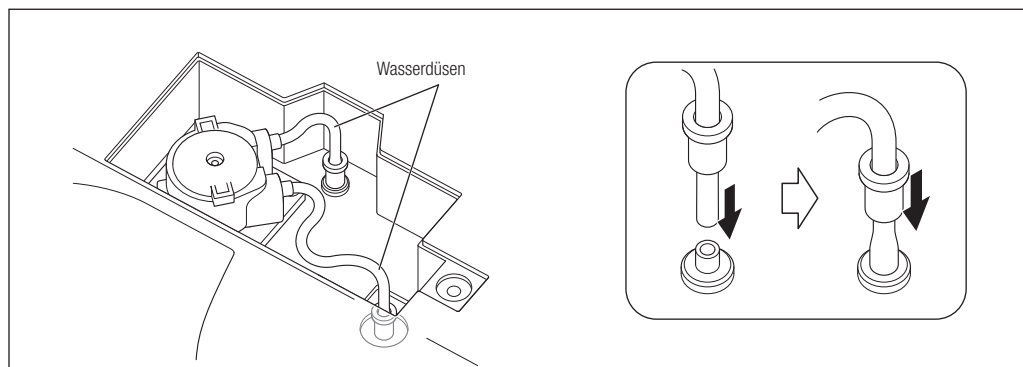- 8) Montieren Sie den Spülschlauch. Drücken Sie den Verbindungsring fest in die Steuereinheit, bis er fest sitzt.




- 9) Richten Sie den Haken an der Abdeckung des Kühlmittelpumpensatzes mit dem Loch an der Steuereinheit aus. Montieren Sie die Abdeckung.

* Genauere Angaben zum optionalen Kühlmittelpumpensatz finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.

VORSICHT

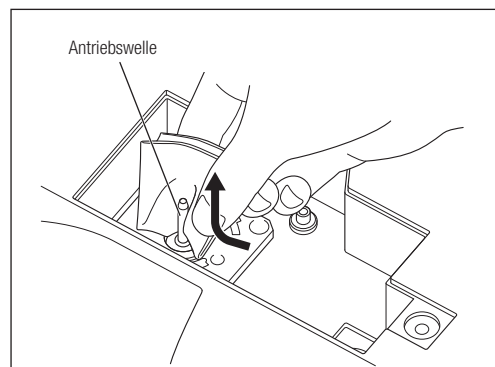- Vor dem Austauschen des Kühlmittelpumpensatzes wischen Sie die Wasserreste von der Pumpe und Antriebswelle. Feuchte Antriebswellen und Walzen können rutschig sein und den Betrieb beeinträchtigen.
- Wischen Sie Schmutz und Wasser von unten nach oben von der Antriebswelle.
- Setzen Sie den neuen Kühlmittelpumpensatz gerade auf die Antriebswelle. Gehen Sie dabei langsam und vorsichtig vor, um die Pumpenwellen nicht zu beschädigen.
- Nach dem Austauschen des Kühlmittelpumpensatzes lassen Sie dieses Produkt ca. 10 Sekunden lang laufen, wobei Sie den Kühlmittelmodus auf die Flasche und die Kühlmittelmenge auf den Höchstwert einstellen. Auf diese Weise kann sich die Wasserdüse an den neuen Pumpensatz anpassen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserdüse keine Knicke oder Schlaufen aufweist. Wenn die Düse falsch eingesetzt wird, kann möglicherweise kein Kühlwasser zugeführt werden.
- Stellen Sie beim Schließen der Abdeckung des Kühlmittelpumpensatzes sicher, dass Sie die Düse nicht unter der Abdeckung einklemmen.
- Verwenden Sie nur den für Varios Combi Pro zugelassenen Kühlmittelpumpensatz. Es dürfen keine anderen Pumpen verwendet werden.



HINWEIS


- Reinigen Sie die Antriebswelle regelmäßig mit einem fusselfreien, mit Desinfektionsalkohol angefeuchteten Tuch. Ablagerungen auf der Antriebswelle können den Pumpenbetrieb beeinträchtigen.
- Die Pumpe ist ein Verschleißteil. Wenn die Kühlmittelmenge deutlich sinkt, muss die Pumpe ausgetauscht werden.

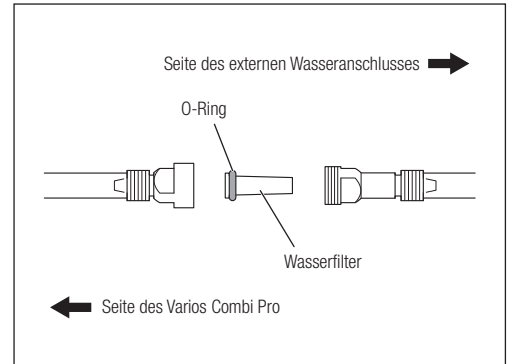
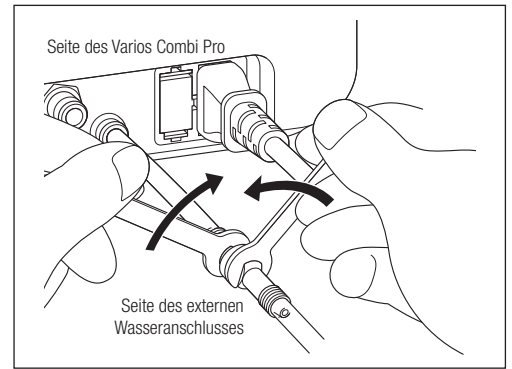
10-3 Austauschen des Wasserfilters

Bei der Verwendung von Leitungswasser tauschen Sie den Wasserfilter einmal im Jahr aus.

Sollten Sie feststellen, dass die Wassermenge reduziert ist, tauschen Sie den Wasserfilter vor Ablauf eines Jahres aus.

- 1) Schließen Sie das Wasserventil am externen Wasseranschluss.
 - 2) Für den Fall, dass Wasser aus der Steuereinheit austritt, legen Sie diese auf einem Tuch oder dergleichen ab.
 - 3) Nehmen Sie die beiden Filterschlüssel (5x8) und drehen Sie diese wie in Abbildung dargestellt.
 - 4) Entfernen Sie das Wasserfiltergehäuse und nehmen Sie den Wasserfilter heraus.
 - 5) Platzieren Sie den neuen Wasserfilter mit dem O-Ring neben den Varios Combi Pro und montieren Sie ihn, indem Sie die Demontageschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
- * Genauere Angaben zum optionalen Wasserfilter finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.


VORSICHT  Stellen Sie sicher, dass der Wasserfilter richtig ausgerichtet ist. Ansonsten wird die Funktionsweise des Filters beeinträchtigt.



10-4 Überprüfen des Luftfilters


Wenn Sie Symptome beobachten, wie eine verringerte Leistung oder häufiges Verklumpen des Pulvers, dann lassen Sie Wasser ab, indem Sie die Spitze des Luftfilters an der Unterseite der Steuereinheit drücken.

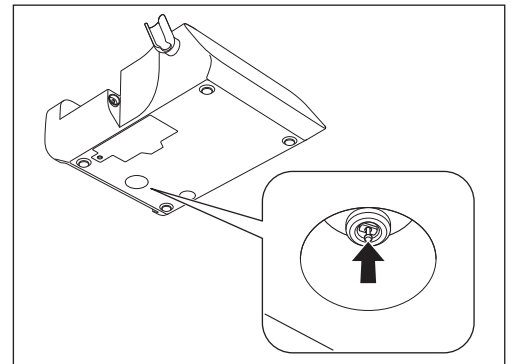
Wenn die erforderliche Leistungsstufe bei längerer Verwendung nicht beibehalten werden kann, dann ist das VCP-Element möglicherweise verstopft. Treten Sie in diesem Fall mit einem autorisierten NSK-Fachhändler in Verbindung.



10-5 Austauschen der Sicherung

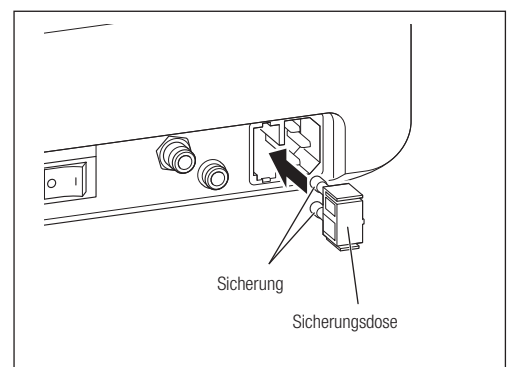- 1) Schalten Sie den Netzschalter aus.
 - 2) Trennen Sie das Anschlusskabel von der Steckdose.
 - 3) Entfernen Sie die Sicherungsfassung von der Rückseite der Steuereinheit, während Sie die Pins an beiden Seiten nach innen gedrückt halten.
 - 4) Tauschen Sie die Sicherung gegen eine neue aus.
 - 5) Setzen Sie die Sicherungsfassung wieder an ihren Platz.
- * Genauere Angaben zu Ersatzsicherungen finden Sie in „21 Ersatzteilliste“.



VORSICHT  Verwenden Sie nur von NSK empfohlene Sicherungen. Bei Verwendung anderer Sicherungen können Funktionsstörungen auftreten.

• Wenn eine Sicherung durchbrennt und Sie die Ursache nicht finden, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.

HINWEIS • Wenn sich die Sicherungsdose nicht einfach entfernen lässt, drücken Sie die Pins mit einem harten spitzen Gegenstand nach innen und ziehen Sie gleichzeitig die Sicherungsdose heraus.

11 Weitere Funktionen

11-1 Initialisierungsprogramm (Werkseinstellungen)

Dieses Produkt speichert die Einstellungswerte der verschiedenen Modi. Diese Werte können auf die Werkseinstellungen initialisiert werden.


- 1) Schalten Sie den Netzschalter ein, während Sie die Fußschaltertaste B betätigen.
- 2) Auf der LCD-Anzeige wird „Clr“ angezeigt. Während „Clr“ angezeigt wird, lassen Sie die Fußschaltertaste B los und betätigen Sie dann die Taste D, um die Initialisierung zu starten.
- 3) Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird auf der LCD-Anzeige „Fin“ angezeigt. Ein Alarm ertönt und das Produkt wird im normalen Modus gestartet. (Die Werkseinstellungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.)

| | Ultrasonic-Modus | Powder-Modus | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | Prophy-Modus | Perio-Modus |
| Auswahl des Ultrasonic-Modus | Perio | – | |
| Leistungsstufe | 1 | 1 | 1 |
| Kühlmittelmodus | Flasche | – (auf Leitungswasser festgelegt) | |
| Spülungsstärke | 10 | 10 | 10 |

ULTRASONIC

11-2 Verwenden des Aufsatzhalters (für Ultraschallaufsatz; Option)

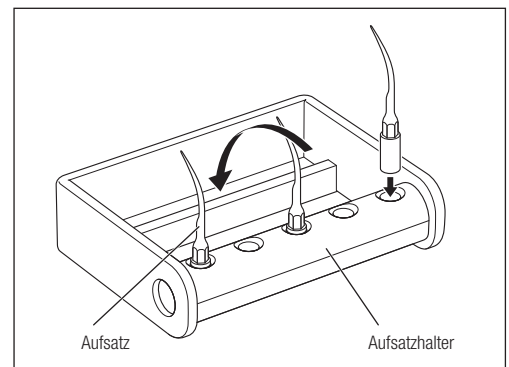- Im Aufsatzhalter können Sie die Aufsätze aufbewahren, nachdem Sie sie vom Handstück abgenommen haben.
- Der Aufsatzhalter ist autoklavierbar. Damit können bis zu 5 Aufsätze gleichzeitig sterilisiert werden. Drehen Sie den Halter in Pfeilrichtung, sodass die Aufsätze für die Sterilisation innerhalb des Kästchens liegen.



11-3 Einstellen der Basisspüleistung

Die Basisspüleistung kann an den Zufuhrwasserdruck der jeweiligen Nutzungsumgebung angepasst werden. Wenn die Kühlmittelmenge auch nach der Anpassung mit den Kühlmitteltasten noch zu groß oder zu klein ist, dann befolgen Sie die nachfolgenden Schritte zur Einstellung der Basisspüleistung.

- 1) Stellen Sie den Netzschalter der Steuereinheit ein.
- 2) Wählen Sie über die Auswahltaste des Betriebsmodus den Powder-Modus aus.
- 3) Berühren und halten Sie die Auswahltaste des Kühlmittelmodus etwa 2 Sekunde lang. Ein Alarm ertönt und die LCD-Anzeige wechselt in den Einstellungsmodus für die Basisspüleistung.
- 4) Ändern Sie den Basiswasserpegel („L1“ - „L5“) durch Berühren der Kühlmitteltasten (▲/▼). Stellen Sie die Leistung gemäß Ihren Anforderungen ein.
- 5) Berühren und halten Sie die Auswahltaste des Kühlmittelmodus etwa 2 Sekunden lang, um den ausgewählten Pegel zu speichern. Ein Alarm ertönt und die ausgewählte Leistung wird gespeichert. Danach wechselt die LCD-Anzeige zurück in den normalen Modus.



Einstellungsmodus der Basisspüleistung [Spüleistung 4]

Referenz

| Leistung | Wassermenge |
|-----------------------|--------------------|
| L5 | Viel ↑ Wenig |
| L4 (Werkseinstellung) | |
| L3 | |
| L2 | |
| L1 | |

HINWEIS • Wenn das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, kehrt die Basisspüleistung auf die Einstellung „L4“ zurück. Nach der Initialisierung stellen Sie die Basisspüleistung erneut ein.

12 Regelmäßige Wartungsprüfungen

Führen Sie alle drei Monate die regelmäßigen Wartungsprüfungen anhand der im Folgenden aufgeführten Prüfpunkte durch. Wenn Sie irgendwelche Auffälligkeiten feststellen, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.

| Prüfpunkte | Beschreibung |
|---|---|
| Ultraschallhandstück | Schalten Sie das Ultraschallhandstück ein und überprüfen Sie, dass keine ungewöhnlichen Vibrationen, Geräusche oder Wärme entstehen. Überprüfen Sie auch, dass die LED leuchtet und das Wasser fließt. |
| Kammerdeckel | Überprüfen Sie, dass keine großen bzw. tiefen Kratzer vorliegen. |
| Pulverspray | Nach dem Füllen der Pulverkammer sprühen Sie Pulver in ein Speibecken oder dergleichen, um zu überprüfen, dass außer am Düsenaufsatz an den Verbindungsstellen kein Pulver austritt. |
| Wasserspray | Nach dem Füllen der Pulverkammer sprühen Sie Pulver in ein Speibecken oder dergleichen, um zu überprüfen, dass außer am Düsenaufsatz an den Verbindungsstellen kein Wasser austritt. |
| Kammer | Überprüfen Sie, dass keine großen bzw. tiefen Kratzer vorliegen. |
| Anbringen und Entfernen von Handstück, Handstückschlauch, Spülbehälter und Kammer | Überprüfen Sie, dass diese Teile ohne Schwierigkeiten angebracht und entfernt werden können. Wenn sie zu locker oder zu fest sitzen, können die O-Ringe beschädigt oder beeinträchtigt werden. Tauschen Sie die O-Ringe aus. (Siehe „10 Pflege und Wartung“.) |

Zusätzliche Sicherheitsinformationen:

Regelmäßige Sicherheitstests sollten alle zwei Jahre gemäß IEC 62353 (EN 62353) und entsprechend des Testverfahrens OM-DE0947EN durchgeführt werden.

Da regelmäßige Sicherheitstests nur von professionellen zahnmedizinischen Installateuren durchgeführt werden können, die unter der Kontrolle von NSK geschult und qualifiziert wurden, ist der autorisierte NSK-Fachhändler zu kontaktieren.

13 Fehlercode

Wenn dieses Produkt den Betrieb aufgrund einer Funktionsstörung, übermäßigem Druck, loser Anschlüsse oder falscher Bedienung unterbricht, dann wird „Error“ mit einem Fehlercode auf der LCD-Anzeige der Steuereinheit angezeigt. Betätigen Sie die Fußschaltertaste D, um die Fehlerprüfung erneut auszuführen. Wenn kein Problem erkannt wird, wird der Fehlerstatus aufgehoben und das Produkt kann wieder betrieben werden. Wenn der Fehlercode weiterhin angezeigt wird, konsultieren Sie die nachfolgende Tabelle und ergreifen Sie die entsprechenden Abhilfemaßnahmen.

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Überprüfung/Abhilfemaßnahme |
|------------|---|--|
| 0 | Systemfehler | Schalten Sie die Steuereinheit wieder ein. Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler, wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird. |
| 1 | Spannungsabweichung 24 V | |
| 2 | Spannungsabweichung 12 V | |
| 3 | Abweichung des Pumpenstroms | Überprüfen Sie den Anschluss des Kühlmittelpumpensatzes. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler. |
| 4 | Abweichung des Luftdrucks | Überprüfen Sie den Druck der Luftzufuhr. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler. |
| 5 | Abweichung der Heizspannung | Schalten Sie die Steuereinheit wieder ein. Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler, wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird. |
| 6 | Abweichung des Heizerstroms | |
| 7 | Abweichung der Heizungstemperatur | Überprüfen Sie den Wasserkreis und führen Sie der Steuereinheit Wasser zu. Lassen Sie die Steuereinheit vor der Verwendung abkühlen. Kontaktieren Sie einen Fachhändler, wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird. |
| 8 | Auffälligkeiten der Fußschalterkommunikation | Überprüfen Sie den Anschluss des Fußschalters. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler. |
| 9 | Auffälligkeiten des Ultraschallhandstücks | Überprüfen Sie den Anschluss des Handstücks. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler. |
| 12 | Auffälligkeiten der Berührungssensorkommunikation | Schalten Sie den Netzschalter aus und dann ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler. |
| 13 | Fehler beim Selbsttest der Ultraschalleinheit | |
| 14 | Systemfehler der Ultraschalleinheit | |

14 Problembehandlung

Wenn Sie Probleme feststellen, konsultieren Sie die folgende Tabelle, bevor Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler kontaktieren.

(Ultrasonic-Modus und Powder-Modus)



| Problem | Fehlerursache | Lösung |
|---|---|---|
| Piepton | Das Gerät wurde bei betätigtem Fußschalter eingeschaltet. | Lassen Sie den Fußschalter los und schalten Sie das Gerät erneut ein. |
| | Übermäßige Erwärmung der Steuereinheit. | Unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie die Steuereinheit abkühlen. |
| Sensorbildschirm reagiert nicht oder die berührte Taste wird nicht korrekt erkannt. | Kalibrierung ist leicht fehlausgerichtet aufgrund statischer Elektrizität, exogener Störströme etc. | Schalten Sie den Netzschalter aus und dann ein. |
| | Taste wurde nicht mittig berührt. | Berühren Sie die Tastenmitte. |
| <ul style="list-style-type: none"> Das Kühlmittel hört nicht auf zu laufen. Die Kühlmittelmenge kann nicht angepasst werden | Beschädigung oder Verschleiß des O-Rings. | Folgen Sie der Prozedur in „10-1-5 Anschluss am Kammerboden“, um den O-Ring zu ersetzen. |
| | Es befindet sich eine Ansammlung von Fremdpartikeln in der Kühlmittelleitung. | Führen Sie eine Selbstreinigung aus. Wenn das Symptom dadurch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie Ihren autorisierten NSK-Fachhändler. |

(Ultrasonic-Modus)



| Problem | Fehlerursache | Lösung |
|--|---|---|
| Ein Alarm ertönt und die Ultrasonic-Modus-Anzeige (P/E/G) sowie „ULTRASONIC“ blinken abwechselnd, wenn die Fußschaltertaste D betätigt wird. | Der integrierte Sensor der Handstückhalterung ist verschmutzt und stellt fälschlicherweise ein montiertes Handstück fest. | Säubern Sie den Sensor. |
| Keine/schwache Schwingung. | Der Stecker des Anschlusskabels ist nicht an die Steckdose angeschlossen oder die Steckdose erhält keinen Strom. | Überprüfen Sie die Verbindung. |
| | Die Sicherung ist durchgebrannt. | Tauschen Sie die Sicherung gemäß den Anweisungen in „10-5 Austauschen der Sicherung“ aus. |
| | Der Aufsatz ist nicht fest angezogen. | Drehen Sie den Drehmomentschlüssel (CR-10), bis er mit einem Klicken einrastet. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Drehmomentschlüssel (CR-10), da dieser vermutlich abgenutzt ist. |
| | Abgenutzter Aufsatz. | Tauschen Sie den Aufsatz aus. |
| | Das Gewinde am Handstück und der Aufsatz sind verschmutzt. | Säubern Sie die Teile. |
| | Das Gewinde am Handstück ist infolge einer langen Verwendungsdauer abgenutzt. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| | Die Leistung wurde nicht korrekt an den Aufsatz angepasst. | Passen Sie die Leistung so an, sodass sie die maximale Leistungsstufe nicht überschreitet, die in der Leistungsrichtlinie für Aufsätze oder auf der Verpackung des Aufsatzes angegeben ist. |
| | Der Fußschalter ist nicht angeschlossen. | Schließen Sie den Stecker des Fußschalterkabels korrekt an. |
| | Funktionsstörung der Vibrationsvorrichtung im Handstück. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| | Funktionsstörung interner Komponenten des Fußschalters. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| Der Aufsatz ist verbogen oder abgebrochen. | Der integrierte Sensor der Handstückhalterung ist verschmutzt und stellt fälschlicherweise ein montiertes Handstück fest. | Säubern Sie den Sensor. |
| | Die Leistung wurde nicht korrekt an den Aufsatz angepasst. | Passen Sie die Leistung so an, sodass sie die maximale Leistungsstufe nicht überschreitet, die in der Leistungsrichtlinie für Aufsätze oder auf der Verpackung des Aufsatzes angegeben ist. |
| Der Aufsatz fällt ab. | Der Aufsatz ist nicht fest angezogen. | Ziehen Sie den Aufsatz fest, bis der Drehmomentschlüssel (CR-10) klickt. |

| Problem | Fehlerursache | Lösung |
|---|--|---|
| Geräuschbildung am Handstück. | Die Leistung wurde nicht korrekt an den Aufsatz angepasst. | Passen Sie die Leistung so an, sodass sie die maximale Leistungsstufe nicht überschreitet, die in der Leistungsrichtlinie für Aufsätze oder auf der Verpackung des Aufsatzes angegeben ist. |
| | Der Aufsatz ist nicht fest angezogen. | Drehen Sie den Drehmomentschlüssel (CR-10), bis er mit einem Klicken einrastet. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Drehmomentschlüssel (CR-10), da dieser vermutlich abgenutzt ist. |
| | Schwingungsausfall im Handstück oder in der Steuereinheit. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| Das Handstück überhitzt. | Die Leistung wurde nicht korrekt an den Aufsatz angepasst. | Passen Sie die Leistung so an, sodass sie die maximale Leistungsstufe nicht überschreitet, die in der Leistungsrichtlinie für Aufsätze oder auf der Verpackung des Aufsatzes angegeben ist. |
| | Der Aufsatz ist nicht fest angezogen. | Drehen Sie den Drehmomentschlüssel (CR-10), bis er mit einem Klicken einrastet. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Drehmomentschlüssel (CR-10), da dieser vermutlich abgenutzt ist. |
| | Das Gewinde am Handstück und der Aufsatz sind verschmutzt. | Säubern Sie die Teile. |
| | Das Gewinde am Handstück ist infolge einer langen Verwendungsdauer abgenutzt. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| | Die Kühlmittelmenge ist unzureichend oder die Kühlmittelzufuhr wurde unterbrochen. | Spülen Sie mit einer angemessenen Kühlmittelmenge. |
| | Schwingungsausfall im Handstück oder in der Steuereinheit. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| Keine bzw. instabile Kühlmittelzufuhr (bei Verwendung der Flasche) | Die Wasserdüse ist verdreht. | Richten Sie die verdrehte Wasserdüse gerade aus. |
| | Der Kühlmittelpumpensatz muss ausgetauscht werden. | Tauschen Sie ihn gegen einen neuen Kühlmittelpumpensatz aus (siehe „10-2 Austauschen des Kühlmittelpumpensatzes“). |
| Keine/geringe Wasserversorgung. (bei Verwendung von Leitungswasser) | Die Steuereinheit wird nicht mit Wasser versorgt. | Überprüfen Sie den Wasserkreis, um der Steuereinheit Wasser zuzuführen. Zufuhrwasserdruck: 0,1 - 0,3 MPa |
| | Die Kühlmittelmenge ist auf „0“ eingestellt. | Passen Sie die Kühlmittelmenge über die Kühlmittelmengeneinstellung an. |
| | Bei unzureichender Kühlmittelmenge kann die Wasserversorgung instabil sein. | Dies ist keine Funktionsstörung. Erhöhen die Kühlmittelmenge über die Kühlmittelmengeneinstellung. |
| | Der Wasserfilter ist durch Fremdkörper verstopft. | Tauschen Sie den Wasserfilter gegen einen neuen Filter aus. |
| Auslaufendes Wasser. | Die Wasserdüse ist nicht korrekt angeschlossen. | Führen Sie die Wasserdüse fest und vollständig in den Kühlmittelanschluss ein. |
| | Der O-Ring am Handstückkabel ist abgenutzt oder beschädigt. | Tauschen Sie ihn gemäß den Anweisungen in „10-1-1 Handstückkabel“ gegen einen neuen O-Ring aus. |
| | Der Wasserkreislauf in der Steuereinheit ist beschädigt. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| Die Handstück-LED leuchtet nicht. | Das Handstück ist nicht korrekt mit dem Handstückkabel verbunden. | Führen Sie das Handstückkabel fest und vollständig in das Handstück ein. |
| | Fehlfunktion der Steuereinheit. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |

(Powder-Modus)



| Problem | Fehlerursache | Lösung |
|---|---|--|
| Ein Alarm ertönt und „POWDER“ sowie das Zahnsymbol blinken abwechselnd, wenn die Fußschaltertaste D oder B betätigt wird. | Der integrierte Sensor der Handstückhalterung ist verschmutzt und stellt fälschlicherweise ein montiertes Handstück fest. | Säubern Sie den Sensor. |
| | Die Kammer ist nicht fest angebracht. | Befestigen Sie die Kammer bis zum Bestätigungston. |
| Es ertönt kein Bestätigungston oder das Symbol für den Prophy-Modus bzw. Perio-Modus wird nicht angezeigt, während die Kammer montiert ist. | Fehlfunktion der Steuereinheit (Verbindungsfehler). | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |

| Problem | Fehlerursache | Lösung |
|---|--|--|
| Keine Luft- und Pulverzufuhr. Luft und Pulver werden mit zu niedrigem Druck zugeführt und die Reinigungsleistung ist ebenfalls niedrig. | Der Düsenaufsatz ist im Inneren mit Pulver verstopft. | Tauschen Sie den Düsenaufsatz aus. |
| | Das Handstück ist im Inneren mit Pulver verstopft. | Reinigen Sie die Düsenbasis mit dem mitgelieferten Reinigungsdraht (kurz) und das Düsenende mit der Reinigungsnadel. Reinigen Sie außerdem das Handstückinnere mit dem Reinigungsdraht (lang). Wenn Pulver und Luft nach der oben beschriebenen Reinigung immer noch nicht fließen, führen Sie die Ultraschallreinigung mit warmem Wasser aus. (Siehe „9-3 Ultraschallreinigung (wöchentlich)“.) |
| | Die Kammer ist im Inneren mit Pulver verstopft. | Entfernen Sie das Pulver aus dem Kammerinneren, indem Sie die Schritte in „9-1-5 Kammer und Handstückschlauch“ ausführen. |
| | Im Luftdurchlass hat sich Pulver teilweise mit Wasser verklumpt. | Entfernen Sie das Pulver aus dem Luftdurchlass, indem Sie die Schritte in „9-1-4-2 Selbstreinigung“ ausführen. |
| | Der Pulverbehälter wurde nicht verschlossen, sodass das Pulver mit Luft in Kontakt gekommen ist. | Entsorgen Sie das Pulver und verwenden Sie neues Pulver. |
| | In der Luftzufuhr befindet sich Wasser. | Öffnen Sie zum Entlasten des Kompressors den Filter im Luftzufuhrkreis und überprüfen Sie, dass sich im Luftfilter- und Kompressorabfluss kein Wasser angesammelt hat. |
| | Das VCP Element ist verstopft. | Kontaktieren Sie einen autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| Zwischen Handstück und Handstückschlauch tritt Wasser aus. | Der O-Ring weist Kratzer auf. | Tauschen Sie den O-Ring im Anschlussbereich des Handstücks aus, tragen Sie einen Tropfen des mitgelieferten Turbinenöls auf und verreiben Sie es mit dem Finger. (Siehe „10-1-2 Handstückschlauch (für Prophy- und Perio-Anwendungen)“.) |
| Die Kammer kann nicht entnommen werden, da die Sperrtaste nicht gedrückt werden kann | Die Taste ist blockiert | Folgen Sie der Prozedur in „Die Sperrtaste lösen“ unter „9-1-5 Kammer und Handstückschlauch“, um die Sperre zu lösen. Wenn das Symptom dadurch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie Ihren autorisierten NSK-Fachhändler.* |
| Kammerdeckel kann nicht geschlossen werden. | Pulver haftet am Gewinde der Kammer und/oder des Kammerdeckels. | Reinigen Sie das Gewinde des Kammerdeckels (siehe „Reinigen des Kammerdeckels“ unter „9-1-5-2 Reinigung und Desinfektion“). |

* Direkt in der Klinik etc. nicht reparierbar.

15 Technische Daten

<Steuereinheit>

| | |
|-----------------------------------|---|
| Modell | Varios Combi Pro |
| Stromquelle | AC 100 V - 240 V 50/60 Hz |
| Antriebsfrequenz | 28 - 32 kHz |
| Stromeingang | 78 - 98VA |
| Maximalleistung | 11 W |
| Zufuhrluftdruck | 0,55 - 0,75 MPa (5,5 - 7,5 kgf/cm ²) |
| Zufuhrwasserdruck | 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm ²) |
| Behältervolumen | 400 ml |
| Spülungsstärke (Ultrasonic-Modus) | 5,0 - 70,0 mL/min (Kühlmittelmodus: Flasche/Leitungswasser, Zufuhrwasserdruck: 0,2 MPa) |
| Maße | 225 × 290 × 162 mm (BxTxH) (inkl. Spülbehälter und Kammer) |
| Gewicht | 2,7 kg (ohne Spülbehälter und Kammer) |

<Fußschalter>

| | |
|------------|---|
| Modell | FC-79 |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Maße | 204 × 157 × 128 mm (BxTxH) (inkl. Aufhängung) |
| Gewicht | 415 g (inkl. Aufhängung) |

<Ultraschallhandstück>

| | |
|----------------|---------------------------|
| Modell | VA2-LUX-HP |
| Kabellänge | 1,8 m (ohne Anschluss) |
| Schwingungstyp | Piezotyp |
| Beleuchtung | Weiß LED |
| Maße | φ20 × 103 mm (ohne Kabel) |
| Gewicht | 54 g (ohne Kabel) |

<Pulverhandstück>

| | |
|---------------|---------------------------|
| Modell | PROPHY-HP/PERIO-HP |
| Schlauchlänge | 1,8 m (ohne Anschluss) |
| Maße | φ16 × 107 mm (ohne Kabel) |
| Gewicht | 33 g (ohne Kabel) |

| | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Benutzungsumgebung*2 | 0 - 40 °C | 35 - 75%*1 | – |
| Transport und Lagerort | -10 - 50 °C | 10 - 85% | 500 - 1.060 hPa |

*1 Ohne Kondensation

*2 Wenn dieses Produkt anders als oben angegeben verwendet wird, können Funktionsstörungen auftreten.

16 Geräteklassifikation

- Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag:
 - Schutzklasse I
- Grad des Schutzes vor Stromschlag:
 - Anwendungsteil Typ B: ⚡ (Anwendungsteile: Ultraschallaufsatz, Ultraschallhandstück, Düsenaufsatz, Pulverhandstück)
- Vom Hersteller empfohlene Sterilisations- oder Desinfektionsmethode:
 - Siehe Punkt 9. Wartung nach der Behandlung
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser gemäß der aktuellen Fassung IEC 60529:
 - Fußschalter: IPX1 (Schutz gegen vertikal tropfendes Wasser)
- Grad der sicheren Verwendung in der Nähe von entzündlichen Anästhesiemischungen mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoffdioxid:
 - Gerät ist nicht geeignet für die Anwendung in Gegenwart einer entzündlichen Mischung von Anästhesiegasen mit Luft oder Sauerstoff oder Stickstoffdioxid.
- Betriebsart:
 - Dauerbetrieb

17 Funktionsprinzip




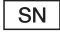





























Ultrasonic-Modus

Ein sinusförmiges elektrisches Signal wird vom Generator auf Ultraschallfrequenz zugeführt ($f > 20$ kHz). Dieses Signal wird auf die „piezoelektrische Keramik“ übertragen, die sich im Signalwandler befindet. Durch die piezoelektrische Keramik wird das Signal in mechanische Schwingung umgewandelt. Diese Schwingungen liegen auf derselben Ultraschallfrequenz wie das elektrische Signal. Die mechanischen Schwingungen werden an das distale Ende des Signalwandlers weitergeleitet. Das Anschlussstück für den Aufsatz, das sich am distalen Ende des Signalwandlers befindet, vibriert auf Ultraschallfrequenzen und ermöglicht somit die Funktion des Geräts.

Powder-Modus

Sprüht Pulver mittels Luftdruck zur Reinigung der Zahnoberfläche.

18 Symbol

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Dieses Produkt kann in einem Dampfsterilisator bei 135 °C sterilisiert werden. |  | LOT-Code |
|  | Die EU-Richtlinie 93/42/EEC wurde bei der Entwicklung und Herstellung dieses medizinischen Gerätes angewendet. |  | Seriennummer |
|  | Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Gemeinschaft. |  | Vorsicht |
|  | Siehe Betriebsanleitung. |  | Temperatur |
|  | Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. |  | Trinkbares Leitungswasser |
|  | Markierung an der Außenfläche von Ausrüstung oder Ausrüstungsteilen, die RF-Sender einschließen oder die RF elektromagnetische Energie für Diagnose oder Behandlung anwenden. |  | Beleuchtung / Licht |
|  | Nicht wiederverwenden. |  | Visuelle Kontrolle |
|  | Trockenhalten. |  | Ultraschallbad |
|  | Ethylenoxidsterilisation |  | Feuchtigkeitsbegrenzung |
|  | GS1 DataMatrix für Unique Device Identifier (UDI-Produktkennzeichnungssystem). |  | Atmosphärische Druckbegrenzung |
|  | Dieses Produkt kann in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät gewaschen werden. |  | Bestellnummer (Bestell code) |
|  | Hersteller. |  | Medizinprodukt |
|  | Dieses Gerät und sein Zubehör sind gemäß Verfahren zu entsorgen, die für elektronische Vorrichtungen zugelassen sind und der Richtlinie 2012/19/EU entsprechen. |  | Eindeutige Geräteidentifikation |
|  | Anwendungsteil Typ B. |  | Autorisierter Vertreter in der Schweiz |
|  | Nur für den Einsatz im Innenbereich. |  | Herstellungsdatum |
|  | Temperaturgrenzen. |  | Importeur |
|  | Zu verwenden bis | | |

19 Garantie

Für alle NSK-Produkte gilt eine Garantie für Fabrikationsfehler und Mängel an Materialien. NSK behält sich das Recht vor, die Ursache von Problemen zu analysieren und zu ermitteln. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß oder nicht sachgemäß verwendet wurde, das Produkt von unqualifiziertem Personal verändert wurde oder Fremtteile (Nicht-NSK-Teile) eingebaut wurden. Ersatzteile sind bis zu sieben Jahre, nachdem die Produktion des Modells eingestellt wurde, erhältlich.

20 Zubehörliste

| Modell | REF | Bemerkungen |
|---|------------|--|
| MG-4H Multi Gauge | Z109400 | |
| Aufsatzhalter | Z221080 | |
| Perio-Set | Y1003042 | Pulverhandstück (für Perio-Anwendungen) Kammer (für Perio-Anwendungen) Handstückschlauch (für Perio-Anwendungen) Perio Mate Powder Perio Mate Düsen Spitze (40 Stück) Düsen Spitzenentferner Perio Mate |
| Pulverhandstück (für Perio-Anwendungen) | T1077001 | |
| Kammer (für Perio-Anwendungen) | U1135019 | |
| Handstückschlauch (für Perio-Anwendungen) | T1053001 | |
| Düse (für Perio-Anwendungen) | T1077012 | |
| Perio Mate Powder | Y900938 | 2 Flaschen zu je 160g |
| Perio Mate Düsen Spitze | Y1002741 | 40 Stück |
| Düsen Spitzenentferner Perio Mate | T1043751 | |
| Wasserdruckminderungsventil | U1135093 | |
| CLA-20 | ZA11900108 | Reinigungsadapter für Perio Handstück/Prophy Handstück. |

21 Ersatzteilliste

| Modell | REF | Bemerkungen |
|--|----------|---|
| FC-79 | Z1256001 | Fußschalter |
| VCP-Behältersatz | U1135017 | Behälter und Deckel (Spülbehälter, Spülbehälterdeckel) |
| VCP-Behälterdeckel | U1135116 | Nur Deckel (Spülbehälterdeckel) |
| VCP-Behälter (nur Behälter) | U1135099 | Nur Behälter (Spülbehälter) |
| O-Ring-Satz (Kühlmittelflasche) | Y1003544 | Je ein dicker und ein dünner O-Ring |
| O-Ring | Y1003546 | 1 für Handstückkabel |
| O-Ring Set (Anschluss am Kammerboden) | Y1003435 | |
| O-Ring Set (Handstückschlauch) | Y1003500 | Je ein dicker und ein dünner O-Ring. (sowohl für Prophy- als auch Perio-Handstückschlauch) |
| O-Ring Set (Düse) | Y1003501 | Je ein dicker und ein dünner O-Ring. (sowohl für Prophy- als auch Perio-Handstück) |
| O-ring | Y1003545 | Für den Kammerdeckel |
| Handstückkabel | E351054 | |
| Ultraschallhandstück | E351050 | |
| Sterilisierbox | Z1035001 | Für Ultraschallteile |
| Drehmomentschlüssel (CR-10) | Z221076 | |
| Wasserschlauch | U1135078 | |
| Wasserfilter | U387042 | |
| Schraubenschlüssel (5x8) | Y1001301 | 2 |
| Kühlmittelpumpensatz | U1135079 | Inkl. Verbindungsring |
| FLASH pearl | Y900698 | 4 Flaschen zu je 300g |
| Prophy-Set | Y1003771 | Pulverhandstück (für Prophy-Anwendungen) Kammer (für Prophy-Anwendungen) Handstückschlauch (für Prophy-Anwendungen) FLASH pearl (5 Packungen) Ersatz-O-Ring |
| Kammer (für Prophy-Anwendungen) | U1135018 | |
| Handstückschlauch (für Prophy-Anwendungen) | T1051001 | |
| Pulverhandstück (für Prophy-Anwendungen) | T1074001 | |
| Düse (für Prophy-Anwendungen) | T1074012 | |
| Kammerdeckel | U1135089 | Nur Deckel |
| Reinigungsnadel | T798092 | Für das distale Ende und Innere der Düse |
| Reinigungsfeile (kurz) | T798095 | Für das Düsenende |

| Modell | REF | Bemerkungen |
|------------------------|-------------|---|
| Reinigungsfeile (lang) | T798091 | Für andere Teile als die oben genannten |
| Reinigungsbürste | T798093 | |
| Entriegelungs-Dorn | U1135256 | |
| Ringschlüssel | T1074601 | |
| Turbinenöl | Z016112 | |
| Luftschlauch | D0914406036 | |
| Sicherung | D1202220010 | Sollwert T2AH250V |

22 Entsorgung des Produkts

Zur Vermeidung von Risiken der Gesundheit des Benutzers bei der Entsorgung der medizinischen Ausrüstung sowie des Risikos der Umweltverschmutzung durch die Entsorgung der medizinischen Ausrüstung muss ein Chirurg oder ein Zahnarzt bestätigen, dass die Ausrüstung steril ist. Beauftragen Sie eine Fachfirma, die über eine Zulassung zur Entsorgung von speziell kontrollierten industriellen Abfällen verfügt, mit der Entsorgung des Produkts.

23 EMV Informationen (Elektromagnetische Verträglichkeit)


| Richtlinien und Konformitätserklärung des Herstellers - Elektromagnetische Emissionen | | |
|---|------------------------|---|
| Dieses Produkt ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde bzw. Anwender des Produkts muss sicherstellen, dass das Produkt nur in einer solchen Umgebung verwendet wird. | | |
| Emissionsprüfung | Konformität | Elektromagnetische Umgebung - Anleitung |
| RF-Emissionen CISPR11/EN55011 | Gruppe 1 Klasse B | Dieses Produkt verwendet HF-Energie nur für geräteinterne Funktionen. Demzufolge sind die RF-Emissionen sehr niedrig und dürften keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen. Das Produkt ist zur Verwendung in allen Gebäuden geeignet, die direkt an das öffentliche Niederspannungsstromnetz angeschlossen sind, mit dem auch Privathaushalte versorgt werden. |
| RF-Emissionen CISPR11/EN55011 | Gruppe 1 Klasse B | |
| Oberwellenaussendung EN/IEC61000-3-2 | Klasse A (außer 120 V) | |
| Spannungsschwankungen/ Flackeremissionen EN/IEC61000-3-3 | Konform (außer 120 V) | |

| Richtlinien und Konformitätserklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit | | | |
|---|--|--|---|
| Dieses Produkt ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde bzw. Anwender des Produkts muss sicherstellen, dass das Produkt nur in einer solchen Umgebung verwendet wird. | | | |
| Störsicherheitsprüfung | EN/IEC60601 Prüfpegel | Konformitätspegel | Elektromagnetische Umgebung - Anleitung |
| Elektrostatische Entladung (ESD) EN/IEC61000-4-2 | ±(2,4) 6 kV Berührung ±(2,4) 8 kV Luft | ±(2,4) 6 kV Berührung ±(2,4) 8 kV Luft | Der Untergrund sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Ist der Boden mit synthetischem Material ausgelegt, muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen. |
| Spannungsspitzen/-stöße EN/IEC61000-4-4 | ±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Input/Output | ±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Input/Output | Die Qualität der Netzversorgung sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| Überspannung EN/IEC61000-4-5 | ±1 kV bei Gegentakt ±2 kV bei Gleichtakt | ±1 kV bei Gegentakt ±2 kV bei Gleichtakt | Die Qualität der Netzversorgung sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| Spannungsschwankungen, kurze Unterbrechungen und Spannungsveränderungen bei Stromversorgungsleitungen EN/IEC61000-4-11 | <5% Ut (>95% Einbruch in Ut) für 0,5 Zyklen 40% Ut (60% Einbruch in Ut) für 5 Zyklen 70% Ut (30% Einbruch in Ut) für 0,5 Zyklen <5% Ut (>95% Einbruch in Ut) für 5 Sekunden | <5% Ut (>95% Einbruch in Ut) für 0,5 Zyklen 40% Ut (60% Einbruch in Ut) für 5 Zyklen 70% Ut (30% Einbruch in Ut) für 0,5 Zyklen <5% Ut (>95% Einbruch in Ut) für 5 Sekunden | Die Qualität der Netzversorgung sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn das Produkt auch bei Unterbrechungen der Stromzufuhr ununterbrochen in Betrieb bleiben muss, sollte es an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine Batterie angeschlossen werden. |

| | | | |
|--|------|------|--|
| Netzfrequenz mit (50/60 Hz) Magnetfeld EN/IEC61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | Die Magnetfelder der Netzfrequenz sollten Pegel aufweisen, die denen einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| HINWEIS: „Ut“ ist die AC-Netzspannung vor dem Einsatz der Testebene. | | | |

Richtlinien und Konformitätserklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit

Dieses Produkt ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde bzw. Anwender des Produkts muss sicherstellen, dass das Produkt nur in einer solchen Umgebung verwendet wird.

| Störsicherheitsprüfung | EN/IEC60601 Prüfpegel | Konformitätspegel | Elektromagnetische Umgebung - Anleitung |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| Über Leitung RF EN/IEC61000-4-6 | 3 Ueff 150 kHz bis 80 MHz | 3 Ueff | Tragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an irgendeinem Teil des Produkts, einschließlich Kabeln, verwendet werden als durch den empfohlenen Abstand vorgegeben wird, der durch die Gleichung für die Frequenz des Senders berechnet wird. Empfohlener Abstand $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz Dabei entspricht „P“ der maximalen Leistungsabgabe in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und (d) bezieht sich auf den empfohlenen Abstand in Metern (m). Feldstärken von festen RF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Feldprüfung ermittelt werden(a), sollten unter dem Konformitätspegel in jedem Frequenzbereich liegen(b). Es kann Störungen in der Nähe von Geräten geben, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind:  |
| Über Strahlung RF EN/IEC61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz | 3 V/m | |

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz trifft der höhere Frequenzbereich zu.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien treffen möglicherweise nicht in allen Situationen zu. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen hängt von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen ab.

a: Die Feldstärke von festen Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobil-/schnurlose Telefone) sowie Landmobilfunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radiosendern und Fernsehsendern kann nicht mit Sicherheit theoretisch vorhergesagt werden. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung stationärer HF-Sender sollte unter Umständen ein elektromagnetisches Standortgutachten durchgeführt werden. Überschreitet die gemessene Feldstärke am Standort, an dem das Produkt verwendet wird, die entsprechende HF-Konformitätsstufe (siehe oben), muss das Gerät auf normale Betriebstätigkeit hin kontrolliert werden. Wird eine anomale Leistung festgestellt, sind eventuell zusätzliche Maßnahmen wie eine Neuausrichtung bzw. Umstellung des Gerätes notwendig.

b: Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke unter 3 V/m liegen.

| Kabel und Zubehör | Maximale Länge | Entspricht | |
|--------------------|---------------------------|--|---|
| Handstückkabel | 2,0 m (Nicht abgeschirmt) | RF-Emissionen, CISPR11 Oberwellenaussendung, (außer 120 V) | Klasse B/Gruppe 1 EN/IEC61000-3-2 |
| Fußbedienungskabel | 2,5 m (Nicht abgeschirmt) | Spannungsschwankungen/Flackeremissionen, (außer 120 V) Elektrostatische Entladung (ESD): | EN/IEC61000-3-3 EN/IEC61000-4-2 |
| Anschlusskabel | 3,0 m (Nicht abgeschirmt) | Spannungsspitzen/-stöße: Überspannung: Spannungsschwankungen, kurze Unterbrechungen und Spannungsveränderungen bei Stromversorgungsleitungen: Netzfrequenz (50/60Hz) Magnetfeld: RF über Leitungen: RF über Strahlung: | EN/IEC61000-4-4 EN/IEC61000-4-5 EN/IEC61000-4-11 EN/IEC61000-4-8 EN/IEC61000-4-6 EN/IEC61000-4-3 |

Empfohlener Abstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten und dem Produkt

Das Produkt ist für die Verwendung in einer Umgebung vorgesehen, in der HF-Störstrahlungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. Anwender des Produktes kann zur Verhinderung von elektromagnetischen Störungen beitragen, indem er gemäß der Empfehlung unten, die sich nach der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsausrüstung richtet, einen minimalen Abstand zwischen der tragbaren und mobilen HF-Ausrüstung (Sender) und dem Gerät einhält.

| Maximale Leistungsabgabe des Senders | Abstand gemäß der Frequenz des Senders in m | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| | 150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 80 MHz bis 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Bei Sendern mit einer oben nicht angeführten maximalen Leistungsabgabe kann der empfohlene Abstand „d“ in Metern (m) durch Verwendung der Gleichung für die Frequenz von Sendern geschätzt werden, wobei „P“ der maximalen Leistungsabgabe des Senders in Watt (W) nach Auskunft des Senderherstellers entspricht.

HINWEIS1: Bei 80 MHz und 800 MHz trifft der höhere Frequenzbereich zu.

HINWEIS2: Diese Richtlinien treffen möglicherweise nicht in allen Situationen zu. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen hängt von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen ab.

Merci d'avoir acheté le Varios Combi Pro. Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien du présent mode d'emploi de manière à garantir une utilisation appropriée du produit pendant de nombreuses années. Conservez ce mode d'emploi à portée de main des utilisateurs pour toute consultation ultérieure.




Le numéro de référence du Mode d'emploi des produits associés est tel qu'indiqué ci-après :

| Intitulé du mode d'emploi | Numéro du mode d'emploi |
|---|-------------------------|
| Cleaning Adaptor CLA-20 For Prophy Handpiece / For Perio Handpiece | OM-DE0906MA |

– Table des matières –

| | |
|---|-----|
| 1. Utilisateur et finalité d'utilisation | 109 |
| 2. Précautions à prendre lors de la manipulation et du fonctionnement | 109 |
| 3. Liste des accessoires | 113 |
| 4. Nom des composants | 114 |
| 5. Installation | 116 |
| 6. Vérification avant utilisation | 119 |
| 7. Utilisation du mode ultrasons | 120 |
| 8. Utilisation du mode poudre | 124 |
| 9. Entretien après usage | 129 |
| 10. Suivi et entretien | 147 |
| 11. Autres fonctions | 152 |
| 12. Contrôles d'entretien périodique | 153 |
| 13. Code d'erreur | 153 |
| 14. Dépannage | 154 |
| 15. Caractéristiques | 156 |
| 16. Classification de l'équipement | 157 |
| 17. Principe de fonctionnement | 157 |
| 18. Symboles | 158 |
| 19. Garantie | 158 |
| 20. Liste des pièces en option | 159 |
| 21. Liste des pièces de rechange | 159 |
| 22. Mise au rebut du produit | 160 |
| 23. Informations CEM (compatibilité électromagnétique) | 160 |

* Certains chapitres sont signalés par le(s) pictogramme(s) ci-dessous afin d'indiquer quel(s) mode(s) y est/sont utilisé(s).

-  **ULTRASONIC** Descriptif concernant le mode ultrasons
-  **POWDER PROPHY** Descriptif concernant le mode prophylactique en mode poudre
-  **POWDER PERIO** Descriptif concernant le mode parodontal en mode poudre

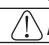
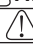
1 Utilisateur et finalité d'utilisation

Utilisateur : Dentiste, hygiéniste dentaire

Finalité d'utilisation : Nettoyage de la surface des dents, élimination de la plaque dentaire et du tartre, résection apicale, élargissement ou nettoyage du canal radiculaire, élimination de corps étrangers, obturation du canal radiculaire, amélioration de l'adhésion des restaurations fixes, incision ou élimination de tissu parodontal

2 Précautions à prendre lors de la manipulation et du fonctionnement

- Lisez soigneusement ces précautions et n'utilisez l'appareil qu'à des fins indiquées et uniquement selon les instructions données.
- Les instructions de sécurité ont pour but d'écartier tout danger potentiel pouvant déboucher sur des blessures corporelles ou endommager l'appareil.
Les instructions de sécurité sont classées comme suit, selon la gravité du risque.

| Classification | Niveau de danger ou danger et gravité |
|--|---|
|  AVERTISSEMENT | Le non-respect des instructions de sécurité risque de provoquer des blessures graves ou d'endommager l'appareil. |
|  ATTENTION | Le non-respect des instructions de sécurité risque de provoquer des blessures légères ou d'endommager l'appareil. |
| REMARQUE | Informations générales relatives aux caractéristiques du produit entrant ainsi un dysfonctionnement ou une diminution des performances. |

⚠ AVERTISSEMENT

<Mode ultrasons ou mode poudre>



- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains humides pour éviter tout risque de décharge électrique.
- Tenez à l'écart de substances explosives et de matériaux inflammables.
- Si le produit chauffe ou dégage une odeur de brûlé, coupez immédiatement le courant et débranchez la câble d'alimentation principale. Contactez votre distributeur NSK agréé.
- POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, utilisez une prise électrique principale reliée à la terre.
- Ne l'utilisez pas à proximité de patients porteurs de stimulateurs cardiaques pour ne pas provoquer d'interférences.
- Le système fonctionne normalement dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C (32 à 104 °F), dont le taux d'humidité se situe entre 35 et 75 % HR et en l'absence de condensation dans le boîtier de contrôle. Son utilisation en dehors de ces limites peut entraîner un dysfonctionnement.
- Assurez-vous que de l'eau ou du désinfectant liquide ne pénètre pas dans le boîtier de contrôle. Cela pourrait provoquer un court-circuit et entraîner un incendie et/ou un choc électrique.
- Mettre à plusieurs reprises le commutateur principal en marche et à l'arrêt peut faire sauter un fusible.
- Si des gouttelettes d'eau, de produit chimique, de solvant ou de solution antiseptique entrent en contact avec le boîtier de contrôle, la pièce à main, le cordon de la pièce à main, le tuyau de la pièce à main, etc., essuyez-les immédiatement. Ne pas le faire peut provoquer une décoloration ou une déformation.
- Raccordez-le à un réseau public d'alimentation en eau fournissant de l'eau potable à une pression comprise entre 0,1 et 0,3 MPa. Une pression d'eau incorrecte peut provoquer une carence d'alimentation en eau ou un dysfonctionnement général ou partiel.
- Utilisez un adoucisseur d'eau, etc. pour diminuer la dureté de l'eau, car l'utilisation d'une eau à dureté élevée risque d'entraîner des dépôts minéraux ou calcaires dans le circuit hydraulique, ce qui pourrait entraîner des problèmes tels que des niveaux d'eau insuffisants, des problèmes de fonctionnement ou une panne. Dans ce cas, utilisez un tube d'irrigation avec un filtre à eau pour empêcher une panne du dispositif en raison de corps étrangers dans l'eau du robinet et reportez-vous à « 10-3 Remplacement du filtre à eau » pour remplacer le filtre à eau comme indiqué.
- N'effectuez pas de stérilisation utilisant des rayons ultraviolets. Cela peut provoquer une décoloration de la pièce à main.
- Tenez la fiche de connexion lorsque vous retirez le cordon de la pièce à main ou le tuyau de la pièce à main. Tirer sur le cordon ou le tuyau peut provoquer un débranchement ou endommager l'appareil.

<Mode ultrasons>



- N'utiliser jamais le mode ultrasons sans irrigation. L'absence d'eau pourrait provoquer une surchauffe pouvant endommager la surface des dents du patient.
- Ne permettez pas au patient ou à l'assistant de regarder directement la LED de la pièce à main ou du cordon de la pièce à main. Cela peut nuire à ses capacités visuelles.

<Mode poudre>



- N'utilisez pas le mode poudre sur les patients ci-après.
 - Patients présentant des complications médicales ou des allergies
 - Patients présentant des affections préexistantes (notamment cardiaques, pulmonaires, rénales ou hypertension artérielle)
 - Patients souffrant de maladies respiratoires.
 - Patients présentant des poches parodontales profondes (6 mm ou plus) ou des lésions de la muqueuse pathologiques. Une application prolongée du pulvérisateur sur le tissu mou ou les glandes salivaires peut entraîner une infiltration d'air pulvérisé dans ce même tissu mou ou les glandes salivaires et provoquer un emphysème.
 - Patients souffrant d'ulcères digestifs sévères.
 - Patients présentant un dysfonctionnement rénal.
 - Patients présentant un trouble respiratoire ou cardiaque ou une insuffisance ventilatoire.
 - Patients dotés d'une prothèse valvulaire cardiaque ou articulaire.
 - Patients souffrant d'allergies. Selon la constitution du patient, des symptômes d'allergie ou de stomatite peuvent apparaître dans de très rares cas. Si de tels symptômes sont détectés, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, l'opérateur et son assistant sont tenus de toujours porter des lunettes et un masque de protection. En outre, veillez à aspirer et récupérer constamment la poudre éjectée durant l'utilisation de l'appareil. Si de la poudre pénètre dans les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau et consultez un ophtalmologiste.
- Réglez la pression d'alimentation en air sur 0,55 - 0,75 MPa et utilisez un air propre et sec. Une utilisation avec une pression incorrecte peut causer une insuffisance de la pression de pulvérisation (puissance) ou un dysfonctionnement général ou partiel.

<Mode prophylactique>



- Ne pulvériser pas directement sur le ciment du canal radiculaire, l'émail décalcifié, un amalgame dentaire ou le bord d'une prothèse ou d'un amalgame.

⚠ AVERTISSEMENT

<Mode parodontal>



- Lorsque vous utilisez le mode parodontal, veillez à ne pas provoquer d'emphysème du fait de la pulvérisation d'air chargé en poudre à l'intérieur des poches parodontales. Si un traitement utilisant le mode parodontal provoque un emphysème, cessez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez un médecin.
- Ne l'utilisez pas sur les patients ci-après. L'utilisation sur les poches parodontales de ces patients peut entraîner une bactériémie.
 - Patients présentant une inflammation de l'endocarde
 - Patients souffrant d'une maladie ou affection contagieuse
 - Patients présentant un déficit immunitaire (neutropénie, granulocytopenie, agranulocytose, diabète, hémophilie)
 - Patients suivant un traitement par radiothérapie, chimiothérapie ou antibiotique
- Ne l'utilisez pas sur les patients suivants. (Sauf utilisation sans insert)
 - Patients présentant une cavité buccale endommagée ou anormale.
 - Patients présentant une congestion sanguine, une hémorragie ou une inflammation de la cavité buccale.
 - Patients présentant un risque d'apparition d'inflammations ou de plaies sur la muqueuse buccale.
- Utilisez ce produit exclusivement pour l'entretien après un traitement parodontal de base. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Utilisez le mode parodontal uniquement sur les poches parodontales répondant aux critères suivants :
 - Poches parodontales provoquées par une maladie gingivale
 - Poches parodontales d'une profondeur inférieure à 6 mm et ayant subi un traitement parodontal de base
- Vérifiez la profondeur des poches parodontales à l'aide d'une sonde de mesure ou d'une photographie avant utilisation.
- Utilisez exclusivement la poudre de nettoyage indiquée. L'utilisation d'autres poudres peut entraîner un dysfonctionnement, une insuffisance de fonctionnement, endommager le ciment et la dentine ou provoquer un emphysème. NSK rejette toute responsabilité concernant les problèmes survenus du fait de l'utilisation d'une poudre autre que celles indiquées.
- L'insert destiné au mode parodontal livré dans l'emballage du produit est stérile. Pour utiliser ces produits, procédez comme ci-dessous.
 - L'insert est à usage unique. Ne pas le réutiliser ou le restériliser pour ne pas provoquer le bris du produit ou l'infection.
 - Avant utilisation, vérifiez que l'emballage n'a PAS été ouvert ou endommagé. Si l'emballage est ouvert ou endommagé, n'utilisez pas l'insert, car il peut être endommagé ou contaminé.
 - Respectez la date de péremption figurant sur l'étiquette d'emballage de l'insert. Ne pas utiliser de produits périmés pour éviter le bris du produit ou l'infection.

⚠ ATTENTION

<Mode ultrasons ou mode poudre>



- Lisez ce mode d'emploi avant utilisation pour bien comprendre les fonctions du produit et conservez-le.
- Lorsque vous utilisez le produit, veillez à toujours vous assurer de la sécurité du patient.
- L'utilisateur final sera responsable pour tout jugement qui concerne l'application de ce produit sur un patient.
- Les utilisateurs sont responsables des vérifications opérationnelles, de l'entretien et de l'inspection permanente de cet appareil.
- Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Le boîtier de contrôle doit reposer sur une surface plane.
- N'essayez pas de démonter le produit ou de modifier son mécanisme, sauf si NSK vous le recommande dans ce mode d'emploi.
- Veillez à ce que le produit ne soit soumis à aucun impact. Ne faites pas tomber le produit. Le barreau de quartz et la pièce à main peuvent être endommagés si vous avez fait tomber la pièce à main à ultrasons.
- Les opérateurs et toutes les autres personnes présentes dans la pièce doivent porter des lunettes de protection et un masque lors de l'utilisation de ce produit.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez votre distributeur NSK agréé.
- Insérez la pièce à main correctement et complètement sur le cordon ou le tuyau de la pièce à main lors du branchement.
- N'effectuez pas de stérilisation en autoclave du cordon ou du tuyau de la pièce à main.
- N'essuyez pas, ne nettoyez pas ou n'immergez pas le produit dans de l'eau fortement acide ou des solutions de stérilisation.
- Ce produit n'est pas livré dans un état stérile, à l'exception de l'insert (option) et doit être autoclavé avant utilisation. Reportez-vous à « 9-2 Stérilisation » pour plus de détails.
- Réalisez régulièrement des contrôles d'entretien et fonctionnels.
- Si le produit n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, vérifiez son bon fonctionnement avant de l'utiliser sur un patient.
- Pour éviter les périodes d'indisponibilité, il est recommandé de conserver un appareil de réserve en cas de panne pendant le traitement.
- Remplacez toujours le fusible par un autre fusible de la puissance spécifiée.
- Ce produit est classé équipement médical électrique. La CEM (compatibilité électromagnétique) est décrite dans la documentation jointe.
- L'installation et l'utilisation de ce produit exigent des précautions particulières en matière de CEM. Se conformer aux informations CEM.
- Les équipements de communication RF mobiles et portables peuvent interférer avec l'équipement électrique médical. N'utilisez pas d'équipement RF à proximité du produit.
- L'utilisation d'ACCESSOIRES, comme des pièces à main et des câbles, autres que ceux spécifiés par le fabricant (exception faite des pièces à main et des câbles vendus par le fabricant de ce produit en tant que pièces de rechange des composants internes) peut déboucher sur une augmentation des EMISSIONS ou une diminution de l'IMMUNITÉ de ce produit.
- Ce produit ne peut pas être utilisé ni entreposé à proximité d'autres équipements. Si l'utilisation ou le stockage à proximité s'impose, ce produit doit être contrôlé pour vérifier son bon fonctionnement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.

⚠ ATTENTION

- Le système peut présenter des dysfonctionnements s'il est utilisé en présence d'interférences électromagnétique. N'installez pas le système dans le voisinage d'un appareil qui émet des ondes magnétiques. Coupez l'interrupteur principal du système lorsqu'un appareil d'oscillation ultrasonique se situe à proximité du lieu d'utilisation.
- Pour des raisons de sécurité, installez le boîtier de contrôle dans un endroit où le cordon d'alimentation CA peut facilement être enlevé. (Il est possible de déconnecter le boîtier de contrôle de la source d'alimentation en enlevant le cordon d'alimentation CA)

<Mode ultrasons>



- La température de la surface de l'extrémité peut atteindre 65 °C si de l'eau de refroidissement n'est pas utilisée. Afin d'éviter cette situation, veillez à utiliser de l'eau de refroidissement.

<Mode poudre>

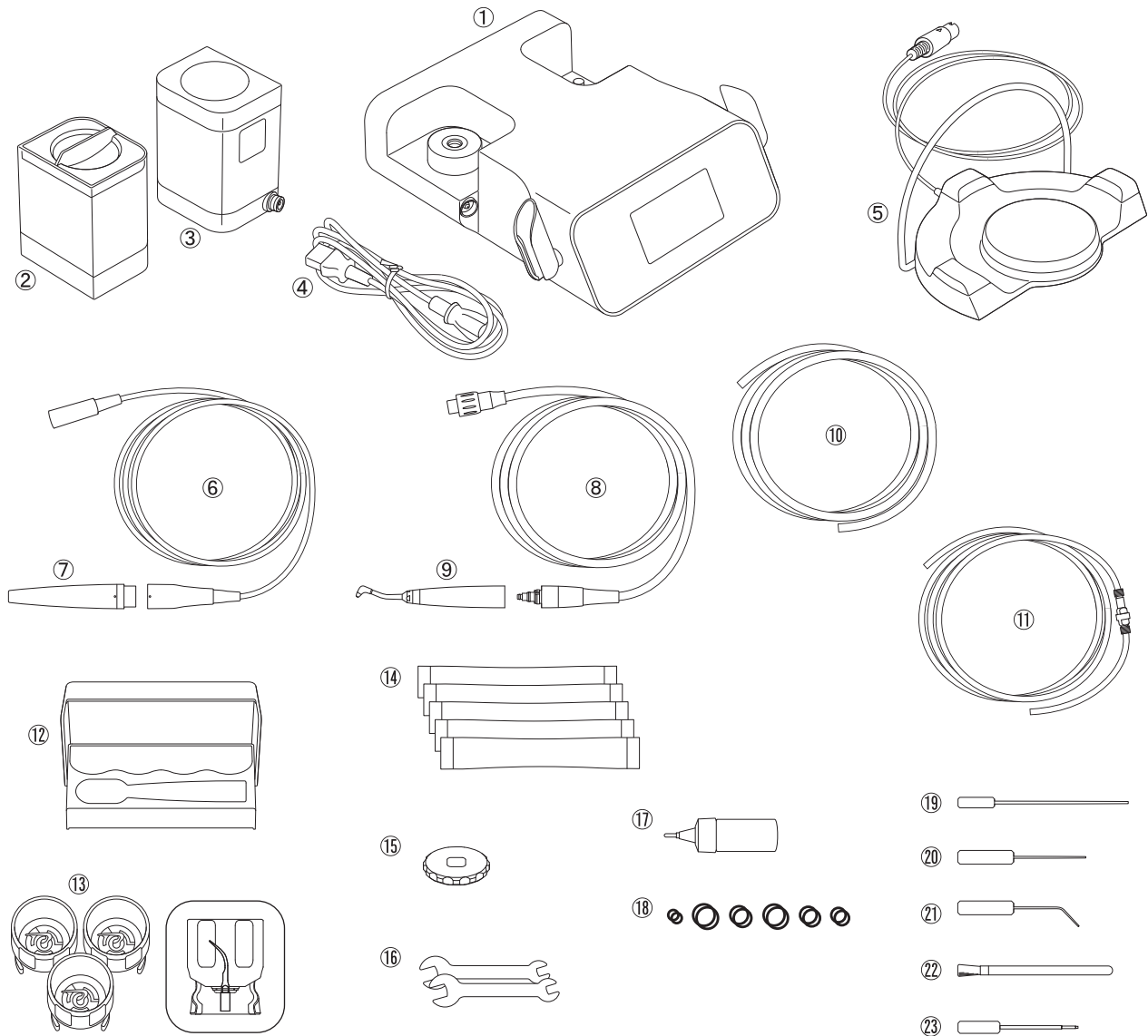


- Veillez attentivement à ce que de la poudre de nettoyage ne pénètre pas d'autres muqueuses du patient (yeux, nez, etc.) que celle de la cavité buccale. Aussi, protégez le visage du patient avec une serviette, des lunettes de protection, etc. afin d'éviter que de la poudre de nettoyage ne s'introduise dans ses yeux.
* Si le patient porte des lentilles de contact, remettez-lui des lunettes de protection ou demandez-lui de retirer ses lentilles de contact avant traitement.
- Avant de raccorder le tuyau de la pièce à main, la chambre et la pièce à main ou la chambre et le boîtier de contrôle, veillez à éliminer toute l'eau présente aux raccords du tuyau et de la chambre en y insufflant de l'air sec. Si cela n'est pas fait, de l'humidité peut pénétrer dans l'alimentation d'air, provoquant la solidification de la poudre de nettoyage à l'intérieur du produit.
- En fonction de l'environnement d'utilisation, la température de la surface de la pièce à main à poudre peut atteindre 50 °C.
- Si de la poudre de nettoyage est présente en quantité excessive dans la chambre, il se peut que la quantité de poudre pulvérisée en début d'utilisation soit inappropriée.
- La poudre se disperse facilement du fait de la finesse de ses particules. Par conséquent, remplissez la chambre lentement et avec précaution pour empêcher la poudre de se disperser.
- La poudre stockée dans des emballages ouverts depuis longtemps peut devenir humide et s'agglomérer. Utilisez toujours une poudre neuve et sèche. Si vous utilisez de la poudre en flacon (option), veillez à bien fermer le couvercle du flacon après utilisation.
- Appliquez de la vaseline, etc. sur les lèvres du patient pour éviter que la commissure ne sèche ou ne gerce.

REMARQUE

- Aucune formation spéciale n'est requise pour utiliser cet appareil.
- En raison de la chaleur, la stérilisation par autoclave répétée peut entraîner la décoloration de la pièce à main ultrasonique. Cependant, ceci est dû aux propriétés du produit et n'est pas un problème lié à la qualité.
- Afin d'empêcher la poudre d'obstruer les tuyaux, nettoyez et entretenez régulièrement le tuyau d'aspiration, l'éjecteur de salive et le séparateur.

3 Liste des accessoires



L'insert est monté à l'intérieur de la Clé dynamométrique (CR-10).


| N° | Nom de la pièce | Quantité | N° | Nom de la pièce | Quantité |
|----|--|----------|----|--|----------|
| 1 | Boîtier de contrôle | 1 | 14 | FLASH pearl | 5 |
| 2 | Bouteille d'irrigation | 1 | 15 | Clé dynamométrique anneau | 1 |
| 3 | Chambre (pour utilisation prophylactique) | 1 | 16 | Clé pour écrou (5 x 8) | 2 |
| 4 | Cordon d'alimentation CA | 1 | 17 | Huile pour turbine | 1 |
| 5 | Pédale | 1 | 18 | Joints de rechange | 6 types |
| 6 | Cordon de la pièce à main | 1 | 19 | Lime de nettoyage Longue | 1 |
| 7 | Pièce à main à ultrasons | 1 | 20 | Lime de nettoyage Courte | 1 |
| 8 | Tuyau de la pièce à main (pour utilisation prophylactique) | 1 | 21 | Fil de nettoyage | 1 |
| 9 | Pièce à main à poudre (pour utilisation prophylactique) | 1 | 22 | Brosse de nettoyage | 1 |
| 10 | Tuyau d'air | 1 | 23 | Outil de déverrouillage | 1 |
| 11 | Ensemble de filtre à eau | 1 | 24 | Mode d'emploi (le présent mode d'emploi)* | 1 |
| 12 | Boîtier de stérilisation | 1 | 25 | Guide puissance insert* | 1 |
| 13 | Insert et clé dynamométrique | 3 | 26 | Carte insert* | 1 |
| | | | 27 | Guide d'installation rapide de Varios Combi Pro* | 1 |

* Non représentés dans les figures ci-dessus


REMARQUE

- Les poudres FLASH pearl et Perio-Mate (option), utilisées en mode poudre, sont, sauf indication contraire, dénommées « poudre » dans le présent mode d'emploi.
- Le kit parodontal optionnel doit être acheté séparément pour pouvoir utiliser le mode parodontal. Reportez-vous à « 20 Liste des pièces en option » pour plus de détails sur le kit parodontal.

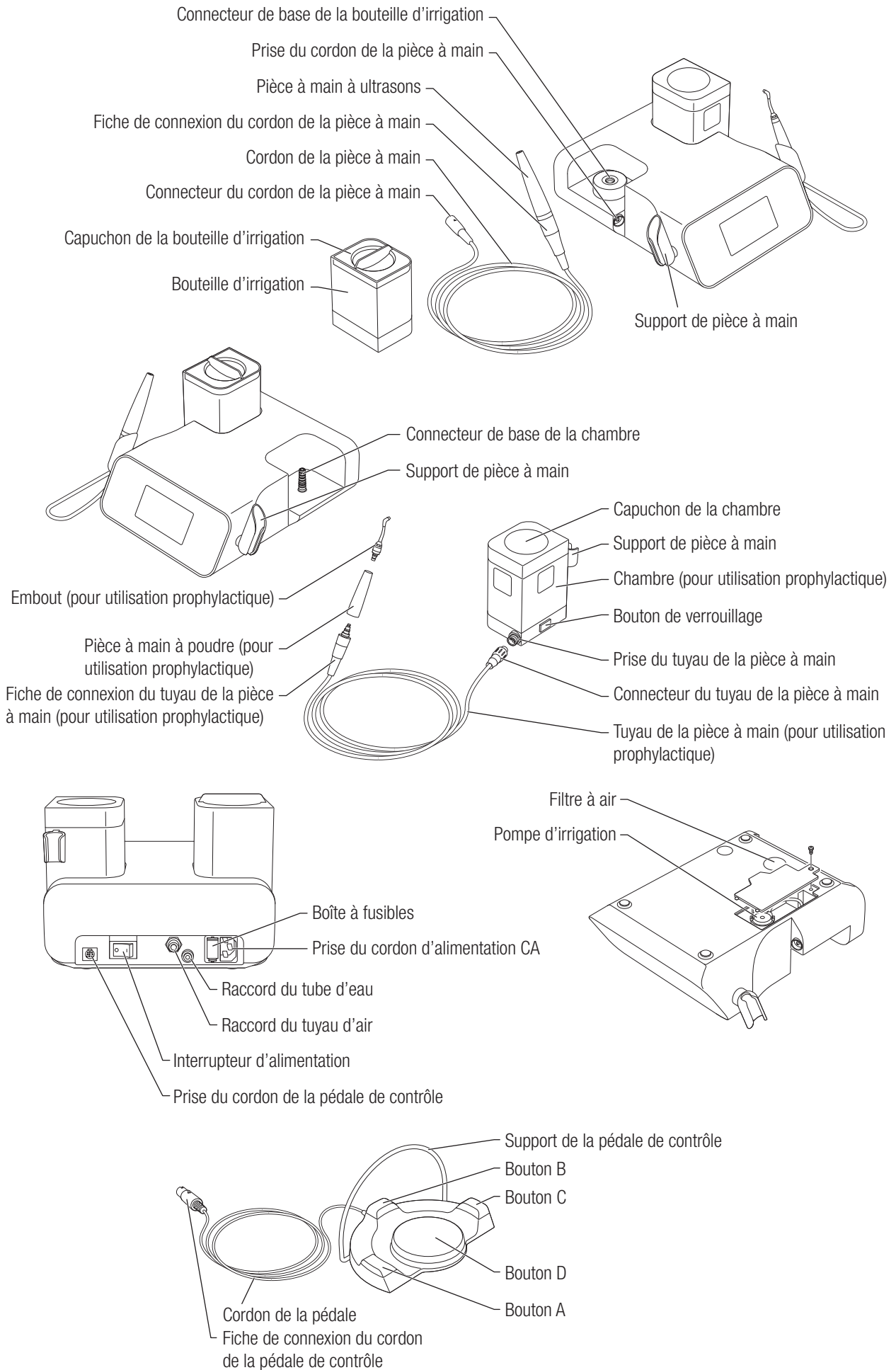4 Nom des composants



4-1 Panneau de commande

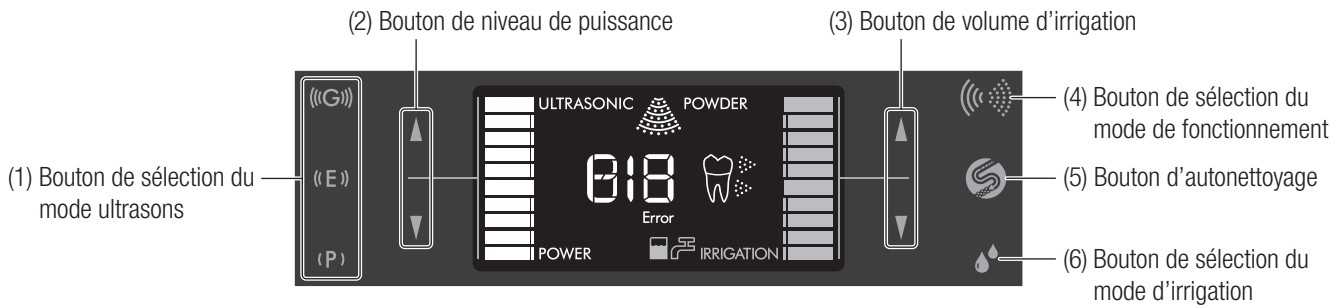

(1) Bouton de sélection du mode ultrasons

Bascule le mode ultrasons sur P (parodontal), E (endodontique) ou G (général). Le niveau de puissance le plus élevé est G, suivi de E et de P. Le niveau de puissance ainsi que le niveau et le mode d'irrigation peuvent être paramétrés pour chaque mode.

(2) Bouton de niveau de puissance

Définit le niveau de puissance à l'aide des touches ▲/▼.

(3) Bouton de volume d'irrigation

Définit le volume d'irrigation à l'aide des touches ▲/▼.

(4) Bouton de sélection du mode de fonctionnement

Bascule en « mode ultrasons » ou en « mode poudre ».

(5) Bouton d'autonettoyage

Démarre l'autonettoyage. Reportez-vous à « 9-1-1-2 Autonettoyage » (pièce à main à ultrasons) ou à « 9-1-4-2 Autonettoyage » (pièce à main à poudre) pour plus de détails.

Mode ultrasons :

Vaporise de l'eau du robinet pendant 15 secondes, puis de l'eau provenant de la bouteille d'irrigation pendant 30 secondes pour nettoyer la pièce à main à ultrasons.

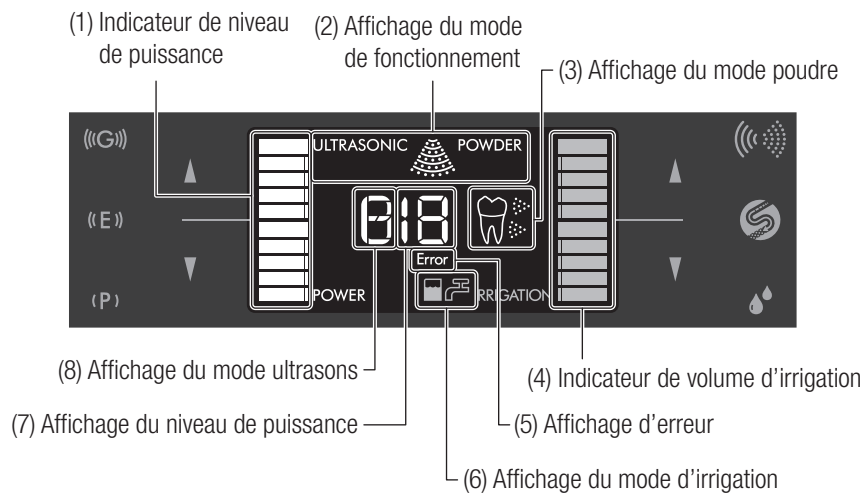
Mode poudre :

Vaporise simultanément de l'air et de l'eau pendant 10 secondes, puis uniquement de l'air pendant 35 secondes.

(6) Bouton de sélection du mode d'irrigation

Sélectionne le mode d'irrigation (bouteille ou eau du robinet) pour le mode ultrasons. L'eau du robinet est toujours utilisée pour le mode poudre.

4-2 Écran LCD



(1) Indicateur de niveau de puissance

Affiche le niveau de puissance actuel sous forme de barres.

(2) Affichage du mode de fonctionnement

Affiche le mode de fonctionnement actuel (ultrasons ou poudre).

(3) Affichage du mode poudre

Affiche la chambre définie (prophylactique ou parodontale) (uniquement lorsque le mode poudre est utilisé).

(4) Indicateur de volume d'irrigation

Affiche le niveau d'irrigation sélectionné sous forme de barres.

(5) Affichage d'erreur

S'affiche lorsqu'une erreur survient. Reportez-vous à « 13 Code d'erreur » pour plus de détails.

(6) Affichage du mode d'irrigation

Affiche le mode d'irrigation (bouteille ou eau du robinet) pour le mode ultrasons. L'eau du robinet est toujours utilisée pour le mode poudre.

(7) Affichage du niveau de puissance

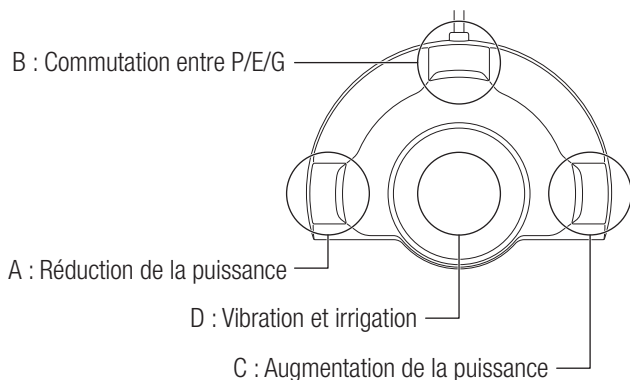
Affiche le niveau de puissance actuel sous forme numérique.

(8) Affichage du mode ultrasons


Affiche le mode ultrasons actuel (P/E/G).

4-3 Pédale de contrôle

Lors de l'utilisation du mode ultrasons



Lors de l'utilisation du mode poudre

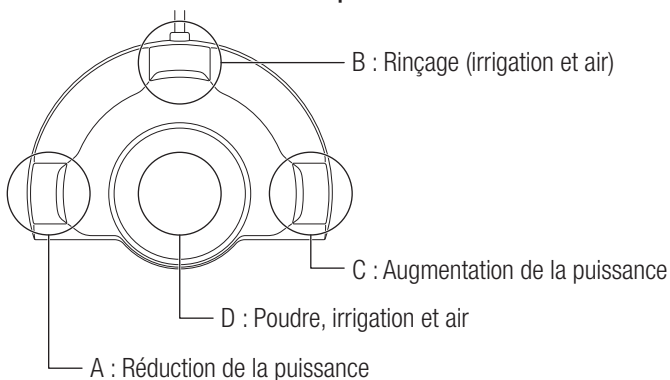

Mode ultrasons

- A : Baisse de puissance
Réduit le niveau de puissance.
- B : Sélectionne P/E/G (mode ultrasons)
Règle le mode ultrasons sur P (parodontal) → E (endodontique)
→ G (général) → P (parodontal)... à chaque pression sur le bouton.
- C : Hausse de puissance
Augmente le niveau de puissance.
- D : Vibration et irrigation
Vibre et irrigue pendant que le bouton est enfoncé.

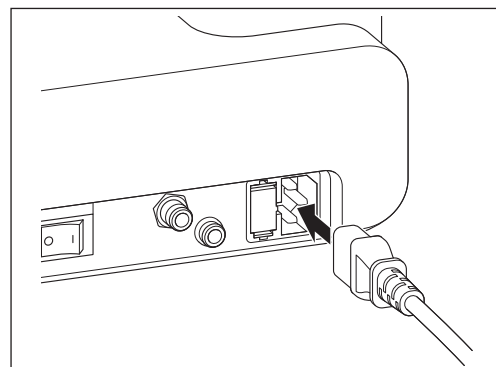
Mode poudre

- A : Baisse de puissance
Réduit le niveau de puissance.
- B : Rinçage (irrigation et air)
Vaporise de l'eau et de l'air pendant que le bouton est enfoncé.
- C : Hausse de puissance
Augmente le niveau de puissance.
- D : Poudre, irrigation et air
Vaporise de la poudre, de l'eau et de l'air pendant que le bouton est enfoncé.

5 Installation

5-1 Raccordement du cordon d'alimentation CA

- 1) Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension avant de brancher le cordon d'alimentation CA.
- 2) Insérez le cordon d'alimentation CA correctement dans la prise qui lui est destinée à l'arrière du boîtier de contrôle.
- 3) Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise murale spécialement destinée à un usage médical.




ATTENTION


- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation CA.
- Assurez-vous que le produit a été totalement arrêté avant de retirer ou d'insérer le cordon d'alimentation CA.

5-2 Raccordement du tuyau d'air

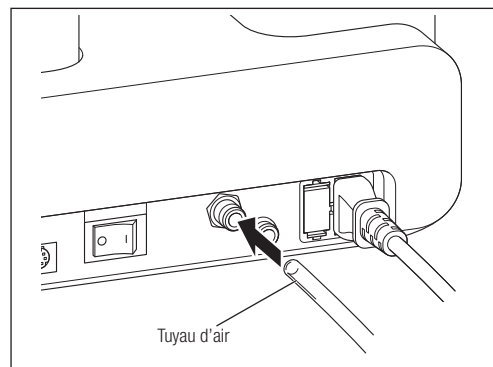1) Insérez profondément l'une des extrémités du tuyau d'air dans le raccord.



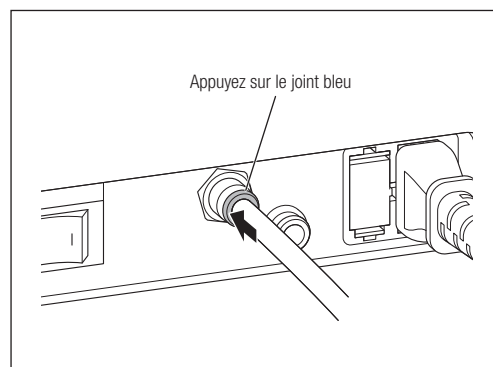- 2) Tirez doucement sur le tuyau d'air et vérifiez qu'il ne sorte pas.
3) Pour retirer le tuyau d'air, tirez dessus en poussant le joint bleu en direction du boîtier de contrôle.




 **ATTENTION**

- Utilisez de l'air propre et sec. La poudre peut s'agglomérer si l'air contient de l'humidité ou de l'huile.


Français

5-3 Raccordement de la pédale de contrôle

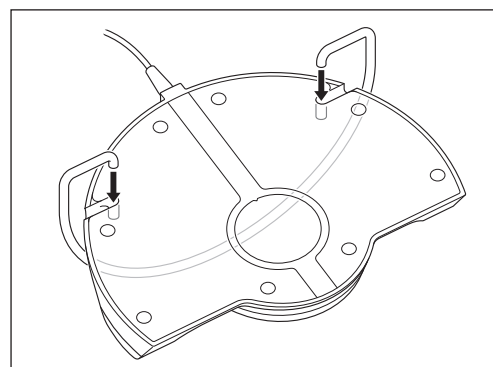1) Insérez le support de la pédale de contrôle de manière à ce qu'il pénètre correctement dans les orifices placés au verso de la pédale de contrôle.



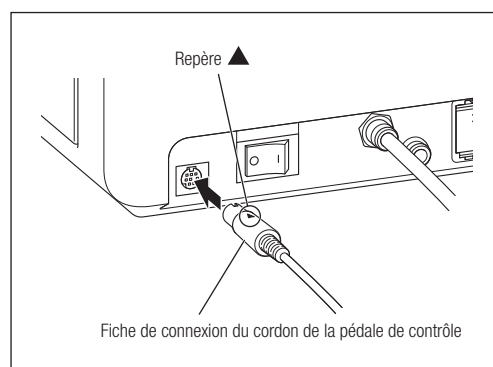2) Insérez la fiche de connexion de la pédale de contrôle dans la prise qui lui est destinée en gardant le repère ▲ dirigé vers le haut.




 **ULTRASONIC**

5-4 Raccordement du cordon de la pièce à main (pièce à main à ultrasons)

Insérez le cordon de la pièce à main dans la prise qui lui est destinée en gardant le repère ▲ dirigé vers le haut. Insérez-la complètement.


 **ATTENTION**

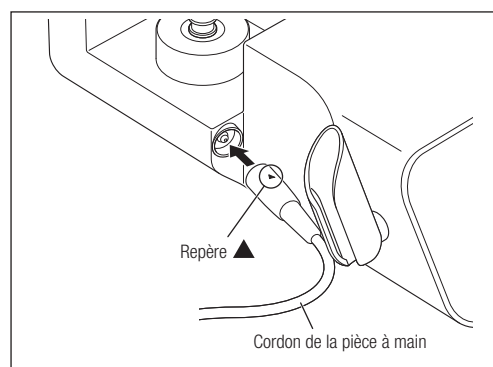- Vérifiez que la fiche de connexion du cordon de la pièce à main soit propre et sèche avant le branchement.



5-5 Raccordement du tuyau de la pièce à main (Pièce à main à poudre)

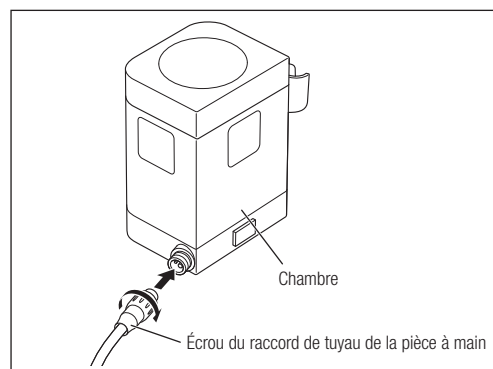- 1) Utilisez de l'air pour faire sécher la prise ainsi que le tuyau de la pièce à main.
- 2) Insérez le raccord du tuyau de la pièce à main de manière à ce qu'il pénètre correctement dans l'orifice de la prise qui lui est destinée et serrez son écrou.



5-6 Connexion et déconnexion de la pièce à main



- Veillez à utiliser exclusivement la pièce à main fournie.

ATTENTION



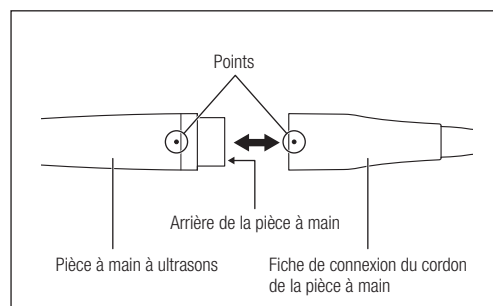
5-6-1 Pièce à main à ultrasons

(1) Connexion

Alignez les points placés sur la pièce à main à ultrasons et la fiche de connexion du cordon de la pièce à main. Insérez la pièce à main directement dans la prise.

(2) Déconnexion

Tenez la pièce à main à ultrasons et la fiche de connexion du cordon de la pièce à main, puis retirez la pièce à main.



AVERTISSEMENT

- Pour éviter les chocs électriques, ne touchez pas les contacts électriques de l'extrémité de la pièce à main ni le cordon de la pièce à main.



ATTENTION

- Ne tordez pas la pièce à main ou le cordon de la pièce à main lorsque vous la retirez. Cela peut endommager les contacts électriques de la prise et entraîner un dysfonctionnement.
- Avant de connecter le cordon de la pièce à main à la pièce à main, orientez le connecteur de la pièce à main sur le côté afin qu'il soit éclairé et vérifiez l'extrémité de la pièce à main. Si la lumière transmise par l'extrémité de la fibre optique brille de manière uniforme à l'extrémité, elle fonctionne normalement. Si elle est en partie ou complètement sombre, il se peut que l'extrémité de la fibre optique soit fissurée ou cassée.



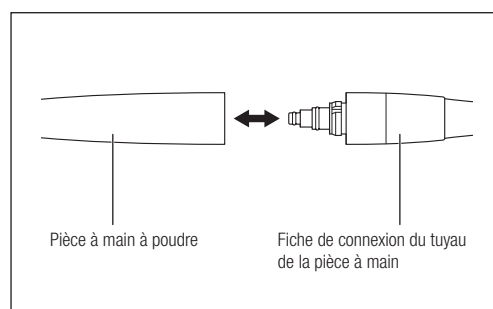
5-6-2 Pièce à main à poudre

(1) Connexion

- 1) Utilisez de l'air pour faire sécher le raccord entre la pièce à main et la fiche de connexion du tuyau de la pièce à main.
- 2) Insérez la fiche de connexion du tuyau de la pièce à main dans la pièce à main à poudre.


(2) Déconnexion

Tenez la pièce à main à poudre et la fiche de connexion du tuyau de la pièce à main, puis retirez la pièce à main.




5-7 Raccordement du tube d'eau

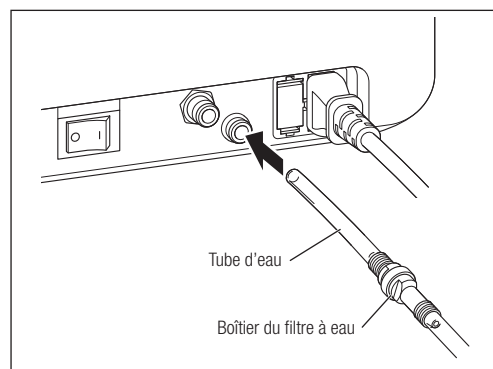- 1) Insérez profondément une des extrémités (celle dotée d'un filtre à eau) dans le raccord du tube d'eau.
- 2) Raccordez l'autre extrémité du tube d'eau à la sortie d'eau de l'unité dentaire.
- 3) Tirez doucement sur le tube d'eau et vérifiez qu'il ne sorte pas.



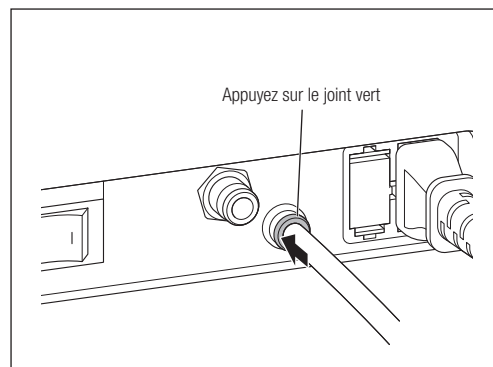- 4) Pour retirer le tube d'eau du raccord, tirez dessus en poussant le joint vert en direction du boîtier de contrôle.



AVERTISSEMENT

- Utilisez un adoucisseur d'eau, etc. pour diminuer la dureté de l'eau, car l'utilisation d'une eau à dureté élevée risque d'entraîner des dépôts minéraux ou calcaires dans le circuit hydraulique, ce qui pourrait entraîner des problèmes tels que des niveaux d'eau insuffisants, des problèmes de fonctionnement ou une panne. Dans ce cas, utilisez un tube d'irrigation avec un filtre à eau pour empêcher une panne du dispositif en raison de corps étrangers dans l'eau du robinet et reportez-vous à « 10-3 Remplacement du filtre à eau » pour remplacer le filtre à eau comme indiqué.



ATTENTION

- Si la sortie d'eau de l'unité dentaire n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, l'eau peut contenir de la rouille, etc. lorsqu'elle coule pour la première fois. Assurez-vous que l'eau soit claire avant de raccorder le tube d'eau.
- Insérez le tube d'eau fermement dans le raccord lorsque vous le branchez au boîtier de contrôle. Une fuite d'eau peut se produire si le tube n'est pas inséré correctement.

6 Vérification avant utilisation

Avant utilisation, faites fonctionner le produit en l'absence de patient pour vérifier qu'il ne produit ni vibrations, ni bruit, ni chaleur, etc. anormaux. Vérifiez également les points suivants :

- Pièce à main à ultrasons : La LED s'allume et l'eau coule.
- Pièce à main à poudre : L'alimentation en poudre, en air et en eau s'effectue correctement.

Si vous remarquez la moindre anomalie pendant que vous testez ou faites fonctionner le produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez votre distributeur NSK agréé.

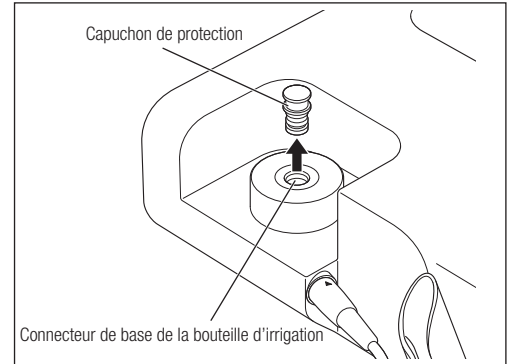
Lorsque vous effectuez un autonettoyage, l'eau à l'intérieur du cordon/tuyau de la pièce à main est évacuée, ce qui risque de provoquer un arrêt de la sortie d'eau la prochaine fois que vous utiliserez le boîtier de contrôle. Si cela se produit, réglez le volume d'irrigation sur 10 et faites fonctionner la pièce à main pendant environ 30 secondes après que l'eau a commencé à sortir. Reportez-vous à « 14 Dépannage » si l'eau ne commence pas à sortir après plus de 20 secondes, même si vous réglez le débit d'irrigation sur 10.

7 Utilisation du mode ultrasons


7-1 Réglage du système d'alimentation en eau

Utilisation de la bouteille

- 1) Retirez le capuchon de protection du connecteur de base de la bouteille d'irrigation.
- 2) Retirez le capuchon de la bouteille d'irrigation et remplissez-la d'eau ou de solution désinfectante jusqu'au niveau souhaité.



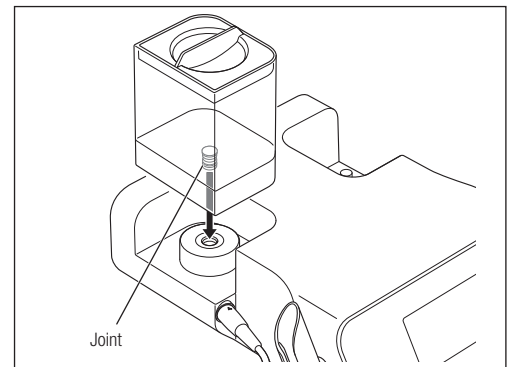- 3) Fermez bien le capuchon de la bouteille d'irrigation et insérez le joint dans le connecteur de base de la bouteille d'irrigation. Soulevez la bouteille d'irrigation pour la retirer.



ATTENTION

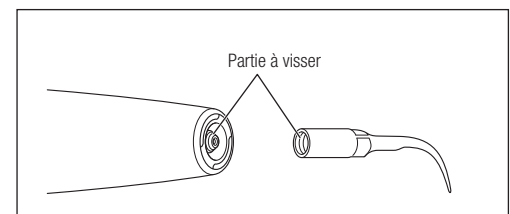
- Utilisez exclusivement des bouteilles de la série Varios Combi Pro.
- Insérez la bouteille d'irrigation de manière à ce qu'elle soit bien droite. Si ce n'est pas le cas, cela peut endommager le joint.
- Nettoyez la bouteille d'irrigation et son capuchon à l'eau propre après utilisation et avant de la ranger.
- Fixez le capuchon de protection au connecteur de base de la bouteille d'irrigation lorsqu'aucune bouteille n'est installée.
- Assurez-vous que la température du liquide soit inférieure à 35 °C.
- Ne versez pas d'acides puissants (comme de l'eau fortement acide, de l'eau super acide ou de l'eau électrolysée acide) ou de solution d'acide hypochloreux dans la bouteille d'irrigation car ces substances peuvent provoquer un engorgement de l'alimentation en eau ou corroder le métal.

Utilisation d'eau de ville


- 1) Assurez-vous que le tube d'eau est fermement raccordé au connecteur de tube d'eau du boîtier de contrôle. Reportez-vous à « 5-7 Raccordement du tube d'eau » pour plus de détails.
- 2) Ouvrez la vanne de l'unité dentaire et réglez la pression d'eau sur une valeur comprise entre 0,1 et 0,3 MPa (1,0 à 3,0 kgf/cm²). Si la pression d'eau dépasse 0,3 MPa, utilisez un détendeur de pression d'eau (option) afin de ramener celle-ci dans la fourchette spécifiée. Reportez-vous à « 20 Liste des pièces en option » pour plus de détails sur le détendeur de pression d'eau.

7-2 Installation de l'insert


- 1) Vérifiez que les parties à visser de la pièce à main et de l'insert sont propres.



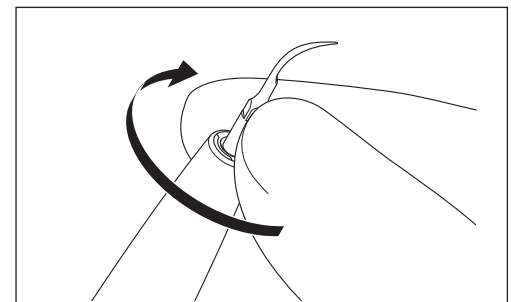- 2) Faites pénétrer l'insert dans l'extrémité distale de la pièce à main et vissez-le jusqu'à ce qu'il soit légèrement serré.




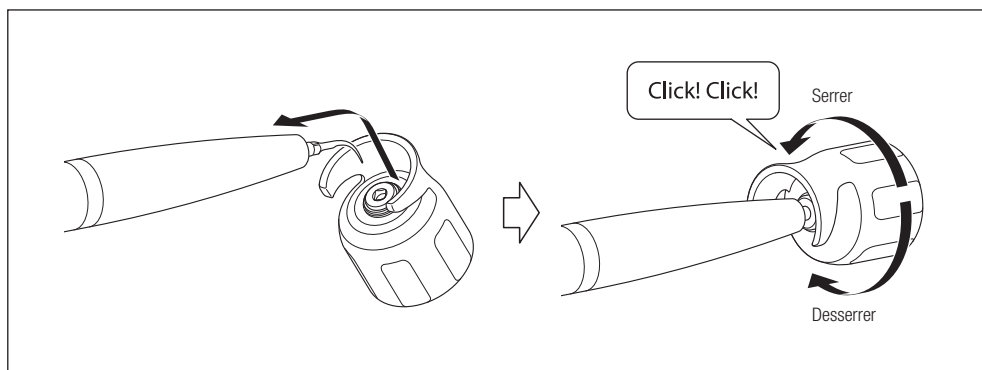- 3) Faites coïncider la partie carrée de l'insert avec l'orifice de la clé dynamométrique (CR-10), puis insérez-la dans ce même orifice. Faites tourner la clé jusqu'à entendre un déclic et que toute rotation supplémentaire soit impossible. Durant la procédure, maintenez la pièce à main de manière à éviter que le cordon de la pièce à main ne se torde. Pour retirer l'insert, faites tourner la clé dans le sens de la flèche « Desserrer ».



AVERTISSEMENT

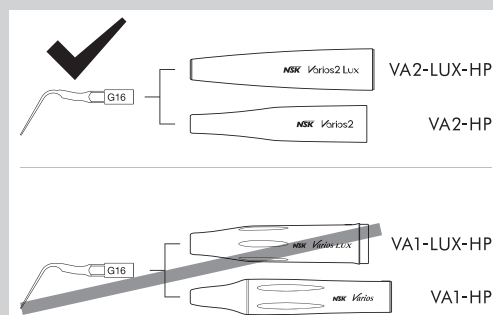- Ne permettez aucun contact avec les gencives, les muqueuses ou la peau. Cela peut provoquer des lésions ou des brûlures.
- **RECOUREZ EXCLUSIVEMENT** à des inserts NSK authentiques lorsque vous utilisez ce produit. Les problèmes entraînés par l'utilisation d'inserts qui ne sont pas fabriqués par NSK, comme des dommages ou des pannes de la pièce à main, voire des accidents, ne sont pas couverts par la garantie. Les problèmes suivants peuvent survenir si vous utilisez des inserts qui ne sont pas fabriqués par NSK :
 - Vibrations gênantes provoquées par des vis incompatibles.
 - Ingestions accidentelles d'inserts cassés par les patients.
 - Dommages ou usure prématurée du filetage de la pièce à main.
- Ne connectez pas l'insert G16 fourni à une pièce à main autre que la Varios2 (VA2-LUX-HP / VA2-HP). Cela peut provoquer une cassure de l'insert ou des rayures sur la surface dentaire ou prothétique etc, en raison d'une augmentation de l'amplitude des vibrations.



ATTENTION

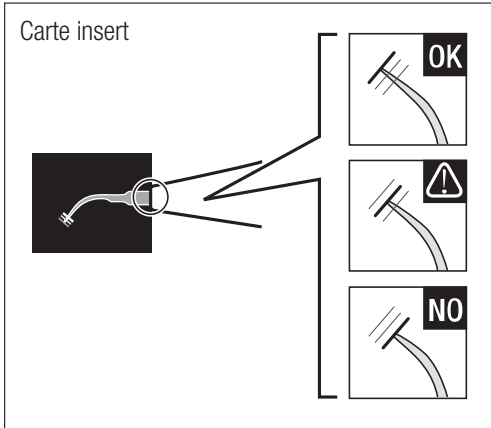
- Veillez bien à ne pas tordre le cordon de la pièce à main lorsque vous serrez l'insert.
- Faites attention lorsque vous installez ou retirez un insert plus long que la clé dynamométrique (CR-10), car la pointe de l'insert peut provoquer des blessures.
- N'utilisez pas un insert endommagé, plié ou corrodé, car il peut se casser en cours d'utilisation.
- Afin d'éviter d'abîmer le filetage et l'extrémité à visser de l'insert, veillez toujours à ce que ce dernier soit inséré selon l'angle correct et fermement fixé.
- Si vous trouvez des débris dans le filetage de l'insert, car nettoyez-le immédiatement. Ne pas le faire peut provoquer un bruit ou une vibration insuffisante.
- N'essayez pas d'aiguiser ou de plier l'insert car cela peut provoquer une cassure, un bruit ou une vibration insuffisante.
- L'insert est un élément d'usure. Les inserts usés connaissent un risque accru de bruit, de cassure ou de vibration insuffisante. Remplacez l'insert si du bruit ou une vibration insuffisante apparaissent.
- Utilisez la clé dynamométrique (CR-10) fournie pour installer l'insert. Faites tourner la clé jusqu'à entendre un déclic et que toute rotation supplémentaire soit impossible. Si l'insert n'est pas suffisamment serré, un bruit ou une vibration insuffisante peuvent apparaître.
- Lors de l'installation de l'insert, portez toujours des gants chirurgicaux stériles et utilisez un insert, une pièce à main ainsi qu'une clé dynamométrique (CR-10) préalablement stérilisés.
- Assurez-vous que le réglage de puissance n'excède pas le niveau de puissance recommandé. Ne pas le faire peut provoquer un bruit, une cassure de l'insert ou une blessure sur le patient.
- N'utilisez pas d'inserts qui ne sont pas destinés à retirer des couronnes en métal ou des prothèses dans ce but. Cela peut entraîner la cassure de l'insert et sa chute dans la bouche du patient.
- Retirez l'insert avant de fixer ou de retirer la pièce à main ou le cordon de la pièce à main afin d'éviter de vous blesser avec.
- Si une vibration insuffisante est observée en cours d'utilisation, retirez la pièce à main de la bouche du patient et appuyez de nouveau sur la pédale. Si cela n'entraîne aucune amélioration, l'insert peut s'être desserré en cours d'utilisation. Vérifiez que l'insert est bien installé.
- Si l'insert se desserre, génère du bruit ou ne vibre pas suffisamment alors même qu'il a été serré jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, cela peut être dû à l'usure de la clé dynamométrique (CR-10). La clé dynamométrique (CR-10) est un élément d'usure et doit être remplacée chaque année.

■ Utilisation de la carte insert

ATTENTION

- Les inserts sont des éléments d'usure. Utilisez la carte insert fournie pour vérifiez l'état d'un insert et le remplacer si nécessaire.

Placez le col de l'insert dans la découpe de la carte insert. Mesurez la longueur de l'insert et vérifiez l'échéance de remplacement. Afin de garantir une utilisation efficace et en toute sécurité, il est recommandé de remplacer les inserts lorsque leur extrémité atteint la ligne jaune (usure d'1 mm).




Vert : Aucune usure - l'insert est en bon état
Le remplacement de l'insert n'est pas nécessaire.

Jaune : Usure d'1 mm - l'insert présente des signes d'usure
Le remplacement de l'insert est recommandé.

Rouge : Usure de 2 mm - l'insert est très usé
L'insert doit être remplacé.


ATTENTION

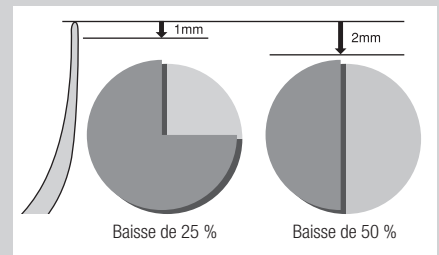- Les inserts sont des consommables. L'efficacité du détartrage dentaire décroît d'environ 25 % lorsque l'extrémité de l'insert perd 1 mm du fait de l'usure et environ 50 % lorsqu'elle en perd 2 mm. De plus, les conditions de vibration sont modifiées par l'usure, ce qui peut causer des dommages à la surface des dents du patient. Contrôlez périodiquement l'état d'usure de l'insert à l'aide de la carte insert et remplacez-le au moment opportun.




7-3 Réglage du niveau de puissance.

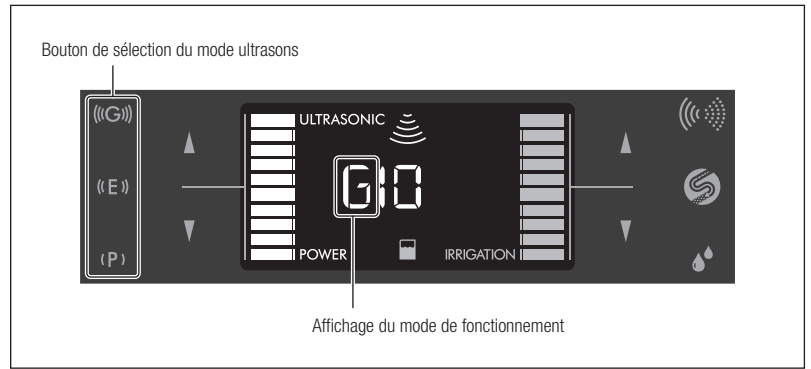1) Appuyez sur le bouton de sélection du mode ultrasons pour choisir le mode. Le mode sélectionné s'affiche sur l'écran LCD sous la forme P/E/G.



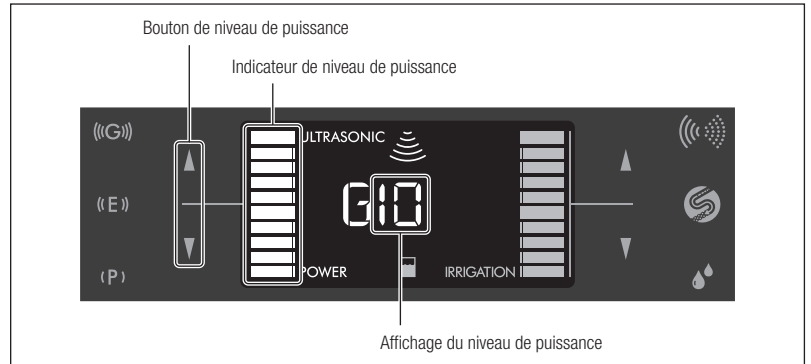2) Appuyez sur le bouton de niveau de puissance (▲/▼) pour régler le niveau de puissance. L'affichage et l'indicateur de niveau de puissance augmentent ou décroissent en fonction du niveau sélectionné.




ATTENTION

- Assurez-vous que le réglage de puissance n'excède pas le niveau de puissance recommandé. (Reportez-vous au « Guide puissance insert » ou à l'« Étiquette du boîtier de l'insert » pour connaître la puissance maximale pouvant être appliquée à chaque insert.)

- REMARQUE**
- Appuyez sur le bouton de niveau de puissance et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou réduire le niveau de puissance en continu. Une alerte retentit quand les niveaux maximum et minimum sont atteints.
 - Pour irriguer sans faire vibrer l'insert, réglez le niveau de puissance sur « 0 (zéro) » et le volume d'irrigation sur une barre ou plus.

7-4 Réglage de l'irrigation

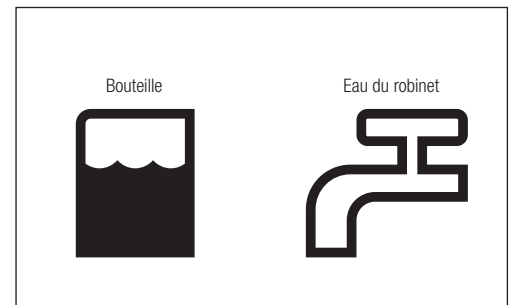Appuyez sur le bouton de sélection du mode d'irrigation pour sélectionner le mode (bouteille ou eau du robinet). Le mode sélectionné s'affiche sur l'écran LCD sous forme de pictogramme.



7-5 Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton souhaité sur la pédale. Un bip retentit, l'insert commence à vibrer et la LED de la pièce à main s'allume.
- Réglez le volume d'irrigation en appuyant sur les boutons d'ajustement du volume d'irrigation (▲/▼) tout en vérifiant l'irrigation au niveau de l'insert.

ATTENTION

- Par mesure de sécurité, ce produit ne fonctionne pas quand l'interrupteur d'alimentation est placé sous tension alors que la pédale est enfoncée. Dans ce cas, une alarme sonore retentit et l'affichage de mode ultrasons (P/E/G) et « ULTRASONIC » clignotent en alternance. Relâchez la pédale puis enfoncez-la de nouveau.
- Utilisez toujours l'irrigation. Si l'irrigation est insuffisante, la pièce à main surchauffera et pourra endommager la surface des dents du patient.
- Vérifiez que l'eau propre est vaporisée correctement avant utilisation.
- La vaporisation de l'eau peut ne pas s'effectuer de manière fluide si le volume d'irrigation est réglé à un niveau trop bas. Dans ce cas, augmentez momentanément le volume d'irrigation et appuyez sur la pédale. Vérifiez que l'insert vaporise l'eau de manière fluide et réglez à nouveau le volume d'irrigation.
- Ne forcez pas la rotation du support de la pièce à main car cela peut l'endommager.

- REMARQUE**
- La LED de la pièce à main reste allumée environ 5 secondes après que la pédale a été relâchée (fonction de persistance).
 - Les réglages concernant le mode ultrasons (P/E/G), le niveau de puissance ainsi que le mode et le volume d'irrigation sont sauvegardés après la mise hors tension et sont appliqués lors de la mise sous tension suivante (fonction dernière sauvegarde).
 - Si, tandis que le mode d'irrigation est défini sur eau du robinet, le volume d'irrigation est trop bas alors qu'il est réglé sur 10 ou trop élevé alors qu'il est réglé sur 1, ajustez le niveau d'irrigation de base. Reportez-vous à « 11-3 Réglage du niveau d'eau de base » pour plus de détails.
 - Un bourdonnement peut se faire entendre mais cela n'indique pas un dysfonctionnement.

■ Pendant le fonctionnement de la pièce à main :

Vous pouvez : Régler le niveau de puissance et le volume d'irrigation

Vous ne pouvez pas : Modifier les paramètres des modes ultrasons et d'irrigation ou effectuer un autonettoyage

7-6 Après le traitement

Procédez à l'entretien après chaque utilisation sur un patient. Reportez-vous à « 9 Entretien après usage » pour plus de détails.

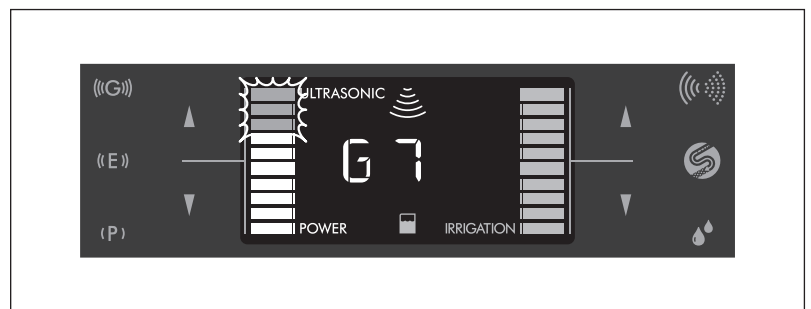


- Ce produit peut connaître un dysfonctionnement si un entretien correct n'est pas effectué.

ATTENTION

7-7 Circuit de protection

Ce produit peut subir une surchauffe interne si le boîtier de contrôle est utilisé avec une puissance de 8 en mode G pendant une période prolongée. Dans ce cas, le circuit de protection réduit automatiquement la puissance (niveau 7). L'affichage en barres clignote et passe de 8 à 10. Cet indicateur cesse de clignoter lorsque le circuit de protection est libéré. Néanmoins, dans ce cas, le niveau de puissance n'augmente pas automatiquement. Augmentez manuellement le niveau de puissance si nécessaire.



- REMARQUE**
- Le niveau de puissance ne peut pas être porté à une valeur supérieure ou égale à 8 lorsque le circuit de protection a fonctionné (pendant que l'affichage en barres clignote).
 - L'affichage en barres cesse de clignoter lorsque le niveau de puissance est devenu inférieur à 7. Il recommence à clignoter si le niveau de puissance est porté à 7 alors que le circuit de protection est activé.



8 Utilisation du mode poudre

Le kit parodontal optionnel doit être acheté pour pouvoir utiliser le mode parodontal. Reportez-vous à « 20 Liste des pièces en option » pour plus de détails sur le kit parodontal.

8-1 Réglage du système d'alimentation en eau

- 1) Assurez-vous que le tube d'eau est fermement raccordé au connecteur de tube d'eau du boîtier de contrôle. Reportez-vous à « 5-7 Raccordement du tube d'eau » pour plus de détails.
- 2) Ouvrez la vanne d'alimentation en eau de l'unité dentaire et réglez la pression d'eau sur une valeur comprise entre 0,1 et 0,3 MPa (1,0 à 3,0 kgf/cm²). Si la pression d'eau dépasse 0,3 MPa, utilisez un détendeur de pression d'eau (option) afin de ramener celle-ci dans la fourchette spécifiée. Reportez-vous à « 20 Liste des pièces en option » pour plus de détails sur le détendeur de pression d'eau.




- Utilisez exclusivement de l'eau potable pour l'irrigation.

ATTENTION



8-2 Préparation de la poudre

1) Sélectionnez la chambre et la poudre qui seront utilisés avec ce mode. Remplissez la chambre de poudre jusqu'à la ligne « MAX » (soit environ 80 g de FLASH pearl ou 50 g de poudre Perio-Mate).

| Mode | Chambre | Poudre |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Mode prophylactique | Pour utilisation prophylactique | FLASH pearl |
| Mode parodontal | Pour utilisation parodontale | Poudre Perio-Mate |

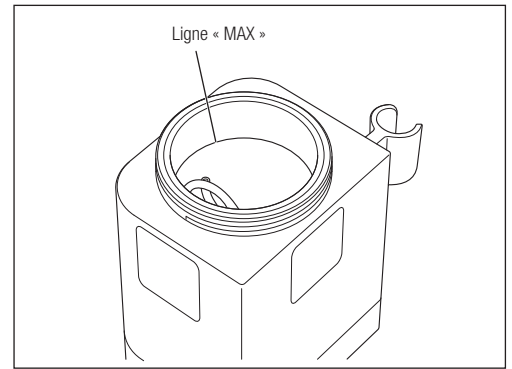

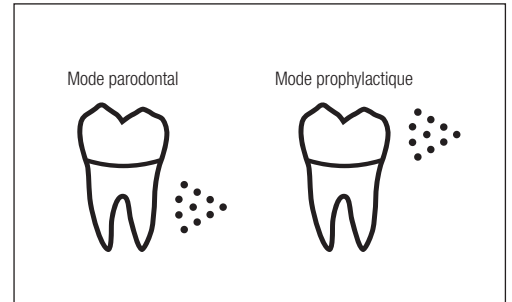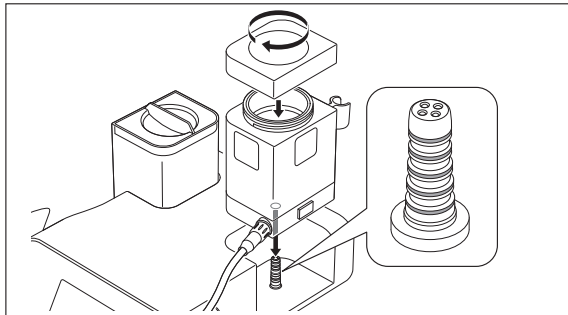2) Fermez bien le capuchon de la chambre jusqu'à ce qu'il s'adapte complètement à la chambre et insérez-la bien droit sur le boîtier de contrôle. Le type de chambre insérée est affiché sur l'écran LCD sous la forme d'une des icônes suivantes.



AVERTISSEMENT

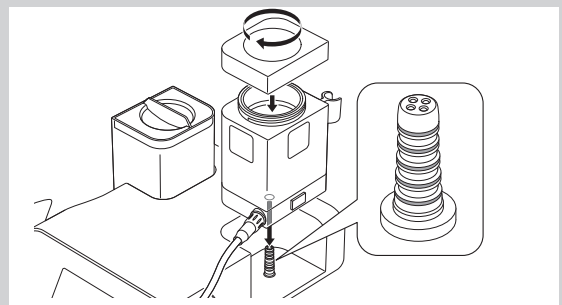
- Utilisez exclusivement la poudre indiquée. L'utilisation d'autres poudres peut provoquer une panne du produit, des dommages à la dent ou causer un emphysème. De plus, cela peut entraîner une diminution des performances du produit. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des pannes causées par l'utilisation d'autres poudres.

ATTENTION

- Fermez fermement le capuchon de la chambre pour éviter que celui-ci ne soit expulsé, ce qui pourrait entraîner une blessure.



- Avant d'insérer la chambre dans le boîtier de contrôle, assurez-vous que les joints du connecteur de base de la chambre ne sont pas endommagés ou déchirés. Des dommages/déchirures pourraient provoquer un mauvais fonctionnement ou un dysfonctionnement.



- Insérez la chambre dans le boîtier de contrôle de manière droite. Si vous l'insérez de manière inclinée, cela pourrait endommager les joints et provoquer un dysfonctionnement.
- Si de la poudre de nettoyage est présente en quantité excessive dans la chambre, il se peut que la quantité de poudre appropriée ne soit pas pulvérisée immédiatement après le début de l'utilisation.
- N'utilisez pas de poudre qui a été stockée dans un emballage ouvert ou de restes de poudre. L'utilisation d'une telle poudre peut provoquer l'obstruction de l'embout. Ne mélangez pas de restes de poudre à de la poudre neuve.
- Avant d'insérer la chambre, vérifiez le connecteur de base de la chambre pour l'eau, etc. et essuyez-le s'il est mouillé. Ne pas procéder ainsi peut provoquer une obstruction de poudre.
- N'utilisez pas de poudre décolorée.
- Refermez bien le couvercle du flacon de poudre après chaque utilisation. Si cela n'est pas fait, de l'humidité pénétrera et la poudre pourra s'agglomérer.
- Si de la poudre adhère à la chambre et/ou au capuchon de la chambre, nettoyez-la immédiatement sinon le capuchon deviendra difficile à fermer.
- Ne retournez pas la chambre tant qu'elle contient de la poudre. Cela provoquerait une obstruction de poudre.
- Par mesure de sécurité, ce produit ne fonctionne pas si la pédale est enfoncée alors que la chambre est installée de manière incorrecte. Une alarme sonore retentit et les icônes dent et « POWDER » clignotent en alternance. Installez la chambre correctement.
- La poudre Perio-Mate (option) se disperse facilement du fait de la finesse de ses particules. Remplissez la chambre lentement de manière à éviter que la poudre ne se disperse et veillez à ne pas en avaler ni à la laisser pénétrer dans vos yeux.
- FLASH pearl est presque insoluble dans l'eau. Pour éviter que l'utilisation de FLASH pearl n'obstrue les tuyaux, un nettoyage et un entretien périodiques du tuyau d'aspiration, de l'éjecteur de salive et du séparateur sont nécessaires.

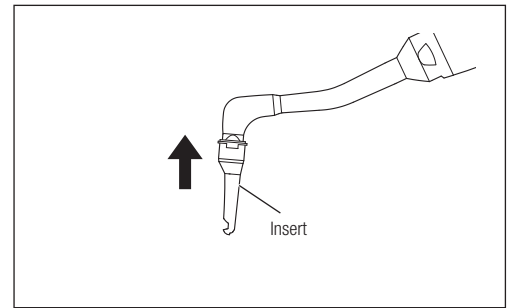
8-3 Fixation/retrait de l'insert

8-3-1 Fixation de l'insert

Fixez fermement l'insert (option) sur l'embout de la pièce à main à poudre (pour une utilisation parodontale).


AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'insert déformé ou endommagé. Il pourrait se détacher en cours d'utilisation.



ATTENTION

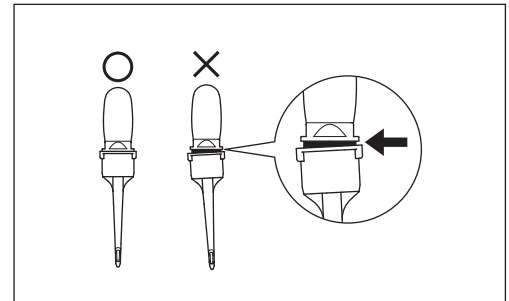- Veillez à bien fixer fermement l'insert comme indiqué sur la figure. Si l'insert n'est pas fixé correctement, il se détachera et pourra être accidentellement ingéré par le patient.
- Lorsque vous fixez un insert sur la pièce à main à poudre, portez toujours des gants chirurgicaux stériles et veillez à ce que la pièce à main à poudre ait été stérilisée.




8-3-2 Retrait de l'insert

Utilisez l'extracteur d'insert Perio-Mate (option) pour retirer l'insert et mettez-le au rebut une fois retiré.

AVERTISSEMENT

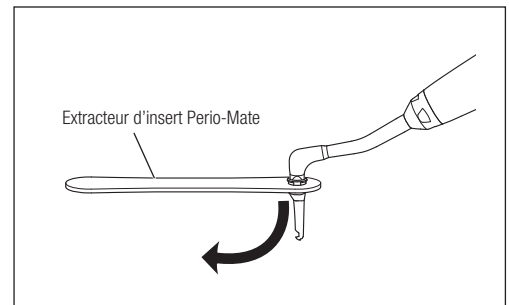
- Un insert ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ne réutilisez pas ou ne stérilisez pas à nouveau un insert car il peut être endommagé ou contaminé. Si un insert est réutilisé, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement du fait d'une déformation due à son retrait ou qu'il se détache en cours d'utilisation, causant une ingestion accidentelle par le patient. Cela vaut également pour un insert qui a été accidentellement retiré.



8-4 Réglage du niveau de puissance

Appuyez sur les boutons de niveau de puissance (▲/▼) pour régler le niveau de puissance. L'affichage et l'indicateur de niveau de puissance augmentent ou décroissent en fonction du niveau de puissance sélectionné.

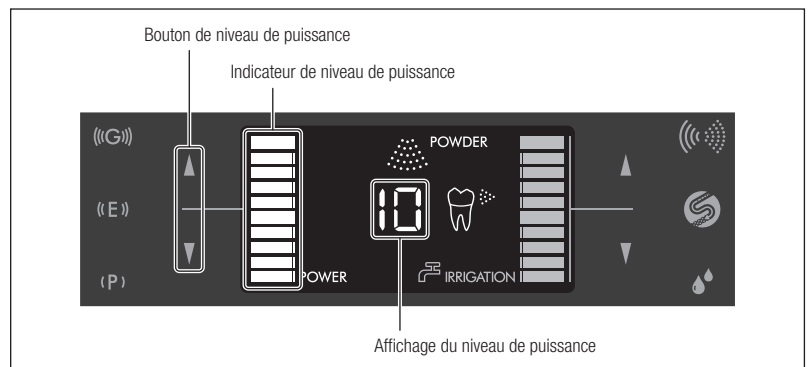- REMARQUE** • Si vous spécifiez ce réglage sans fixer la chambre, le niveau de puissance sera réglé lors de l'utilisation du mode prophylactique.



8-5 Réglage de l'irrigation

- 1) Appuyez sur les boutons de volume d'irrigation (▲/▼) pour régler le volume d'irrigation.
- 2) Appuyez sur la pédale afin de pulvériser de la poudre dans un crachoir, etc. et de vérifier que la poudre, l'air et l'eau sont correctement vaporisés.
- 3) Réglez le volume d'irrigation en vérifiant l'irrigation au niveau de l'embout.

- REMARQUE** • Si le volume d'irrigation est trop bas alors qu'il est réglé sur 10 ou trop élevé alors qu'il est réglé sur 1, ajustez le niveau d'irrigation de base. Reportez-vous à « 11-3 Réglage du niveau d'eau de base » pour plus de détails.
- Si vous effectuez ce réglage sans fixer la chambre, le volume d'irrigation sera réglé lors de l'utilisation du mode prophylactique.

8-6 Fonctionnement

L'alimentation en poudre, en eau et en air s'effectue quand le bouton D de la pédale est enfoncé. L'alimentation en eau et en air s'effectue quand le bouton B de la pédale est enfoncé. Suivez les instructions d'utilisation expliquées dans « 8-6-1 Utilisation du mode prophylactique » et « 8-6-2 Utilisation du mode parodontal ».

AVERTISSEMENT

- Ne vaporisez jamais de poudre en direction d'un corps humain, opérateur et assistant compris, mais uniquement à la surface des dents.
- Cessez immédiatement le fonctionnement si le tuyau se gonfle ou si de l'air ou de la poudre fuient des raccords entre la chambre et le tuyau en cours d'utilisation.
- Vaporisez de l'eau pendant que vous utilisez ce produit.
- Veillez à utiliser un tube d'aspiration (associé à un tube d'aspiration salivaire si nécessaire) pour éviter que le patient n'ingère une grande quantité de poudre. Évitez une utilisation en continu sur de longues périodes et permettez au patient de se rincer la bouche autant de fois que nécessaire.

ATTENTION

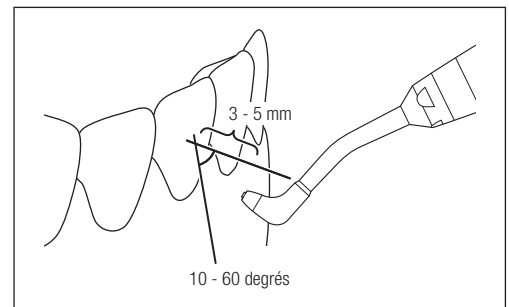
- Par mesure de sécurité, ce produit ne s'allume pas quand l'interrupteur d'alimentation est placé sous tension alors que la pédale est enfoncée. Une alarme sonore retentit et les icônes dent et « POWDER » clignotent en alternance. Relâchez la pédale puis enfoncez-la de nouveau.
- Avant le traitement, réglez les niveaux de puissance et d'irrigation en préalable à l'utilisation sur le patient.
- Réduisez le niveau de puissance lorsque vous traitez la région autour de la gencive marginale.
- Ne pulvérisez pas à la verticale de la surface des dents.
- Maintenez la distance entre l'extrémité de l'embout de la pièce à main et la surface des dents, comme il est expliqué dans « 8-6-1 Utilisation du mode prophylactique » et « 8-6-2 Utilisation du mode parodontal ».
- Ne forcez pas la rotation du support de la pièce à main, car cela peut l'endommager.

REMARQUE • Un bourdonnement peut se faire entendre mais cela n'indique pas un dysfonctionnement.



8-6-1 Utilisation du mode prophylactique

Maintenez l'embout à une distance de 3 à 5 mm de la surface de la dent et à un angle compris entre 10 et 60 degrés.




AVERTISSEMENT

- Ne le dirigez jamais vers les tissus mous, la gencive ou la région subgingivale.

ATTENTION

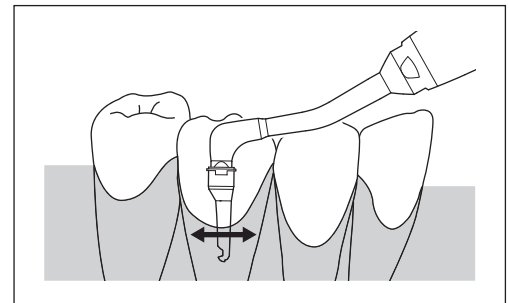- Vaporisez de la racine vers le bord incisif de la dent.



8-6-2 Utilisation du mode parodontal

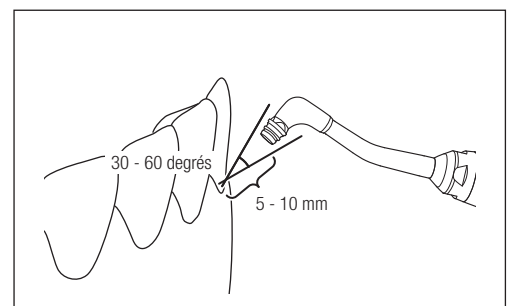
■ Utilisation avec insert

Introduisez l'insert dans la poche parodontale à une profondeur supérieure à 3 mm.

Il se peut que la poudre ne soit pas pulvérisée efficacement dans la poche parodontale si la profondeur est inférieure à 3 mm.

■ Utilisation sans insert

Retirez l'insert de l'embout de la pièce à main pour éliminer la plaque dentaire dans la région supragingivale et sur la gencive marginale ou le biofilm et les taches superficielles. Maintenez l'embout à une distance de 5 à 10 mm de la surface de la dent et à un angle compris entre 30 et 60 degrés. Ne dirigez jamais l'embout directement vers la muqueuse buccale ou dans les poches parodontales.



**AVERTISSEMENT**

- Lorsque vous l'utilisez sans insert, ne le dirigez jamais vers la muqueuse buccale.
- N'utilisez pas ce produit dans une zone immédiatement après que la surface de la dent y a été détartrée dans une poche parodontale. Procéder ainsi peut provoquer une bactériémie.
- N'introduisez pas l'insert plus d'une fois dans la même poche parodontale au cours d'un même traitement.
- La poudre peut être pulvérisée pendant une durée maximale de 5 secondes dans une même poche parodontale (20 secondes au maximum pour une même dent). Ne pulvériser jamais de poudre plus longtemps que la durée spécifiée.
- Ne forcez pas l'introduction de l'insert dans une poche parodontale.
- Ne pulvériser pas de poudre lorsque l'extrémité de l'insert se situe au fond d'une poche parodontale. Procéder ainsi peut provoquer un emphysème.
- N'utilisez pas l'insert dans d'autres régions que les poches parodontales.
- Un niveau de puissance trop élevé peut provoquer un emphysème. Réglez la puissance à un niveau adapté tout en vérifiant l'état du patient.

**ATTENTION**

- L'alarme sonore retentit toutes les 5 secondes lorsque vous utilisez le mode parodontal.
- En mode parodontal, le niveau de puissance est automatiquement réduit par rapport à un réglage comparable pour le mode prophylactique.

8-6-3 Pendant le fonctionnement de la pièce à main

Vous pouvez : Régler le niveau de puissance et le volume d'eau

Vous ne pouvez pas : Modifier les paramètres du mode d'irrigation ou effectuer un autonettoyage

8-6-4 Libération de la pression résiduelle

Le capuchon de la chambre ne peut pas être ouvert après utilisation du fait de l'augmentation de la pression d'air à l'intérieur de la chambre pendant l'utilisation. Relâchez la pression résiduelle dans la chambre avant d'y verser de la poudre ou de retirer la chambre du boîtier de contrôle.

**ATTENTION**

- La poudre et l'eau restantes sortent de la pièce à main lorsque vous relâchez la pression résiduelle. Préparez un récipient, un gobelet par exemple, pour récupérer la poudre et l'eau.

- 1) Retirez la pièce à main à poudre du support de pièce à main.
- 2) Placez la pièce à main dans le récipient pour récupérer la poudre et l'eau.
- 3) Appuyez sur le bouton d'autonettoyage et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Des bips retentissent et la pression résiduelle commence à être relâchée.
- 4 L'opération est terminée quand toute la pression résiduelle accumulée dans la chambre est libérée.

8-7 Après le traitement

Procédez à l'entretien après chaque utilisation sur un patient. Reportez-vous à « 9 Entretien après usage » pour plus de détails.

Si un insert (option) est fixé à l'embout, retirez-le et mettez-le au rebut avant d'effectuer l'entretien.

**ATTENTION**

- L'absence d'entretien peut provoquer un dysfonctionnement.

REMARQUE • Les réglages concernant le niveau de puissance et le mode d'irrigation sont sauvegardés après la mise hors tension (fonction dernière sauvegarde).

9 Entretien après usage

Procédez à l'entretien suivant après chaque utilisation sur un patient.

Les instructions de retraitement suivantes ont été établies conformément à la norme ISO 17664.

L'efficacité du retraitement via la procédure suivante a été vérifiée.

Par souci de sécurité et pour éviter toute infection, portez une protection oculaire, un masque et des gants.

AVERTISSEMENT

- Pour éliminer les résidus, procédez à l'entretien suivant immédiatement (dans un délai de 30 minutes) après le traitement. L'oubli de l'entretien pourrait provoquer une infection, une défaillance prématurée et des brûlures découlant d'une surchauffe.
- Suivez toujours les directives, normes, consignes locales, etc. concernant le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du produit.

ATTENTION

- Utilisez uniquement les agents de nettoyage et de désinfection indiqués dans ce mode d'emploi.
- Avant de commencer l'entretien, par souci de sécurité et pour éviter toute infection, portez une protection oculaire, un masque et des gants.
- Pour retraiter les inserts et la clé dynamométrique, reportez-vous au mode d'emploi des inserts (consultez OM-Z0314E).
- Pour le nettoyage et la désinfection, utilisez de l'éthanol désinfectant ou de l'isopropanol désinfectant sans additifs (désigné ci-après par « alcool désinfectant »). L'utilisation de désinfectants autres que l'alcool désinfectant risque de provoquer une décoloration ou des fissures.
- Utilisez un alcool désinfectant adéquat, conformément aux réglementations et aux consignes appliquées dans chaque pays.
- Ne nettoyez, ne plongez ou n'essuyez pas avec des solvants tels que de l'eau électrolysée oxydante (eau fortement acide, eau super acide), des produits chimiques très alcalins ou acides, des solvants contenant du chlore, du benzène ou un diluant.
- Après la thermodésinfection, retirez immédiatement le produit du laveur-désinfecteur (dans un délai d'une heure). Ne pas procéder ainsi provoque de la corrosion.
- Séchez complètement le produit après la thermodésinfection. Une humidité résiduelle provoquerait une corrosion interne.
- Avant de désinfecter, nettoyez le produit pour éliminer tout résidu. Tout résidu de sang dans le produit coagulerait et provoquerait un dysfonctionnement de ce dernier.
- Utilisez uniquement la clé dynamométrique pour installer et retirer les inserts.
- N'utilisez pas le nettoyage par ultrasons pour nettoyer les pièces à main à ultrasons.
- Nettoyez avec de l'air comprimé propre et sec.

9-1 Nettoyage et désinfection (chaque patient)

9-1-1 Pièce à main à ultrasons

ATTENTION

- Effectuer l'autonettoyage (nettoyage du tube d'irrigation) après chaque utilisation. Ceci évitera tout risque d'obstruction du tube d'irrigation, et d'oxydation des pièces métalliques.
- Assurez-vous de remplir la bouteille d'irrigation avec de l'eau distillée ou purifiée, sans impuretés. Si vous utilisez de l'eau contenant des impuretés, le tube d'irrigation s'obstruera ou d'autres problèmes surviendront.
- Assurez-vous que la pièce à main à ultrasons et le cordon de la pièce à main sont fermement raccordés.
- Après avoir retiré la bouteille d'irrigation, jetez immédiatement le liquide qu'elle contient. S'il reste du liquide dans la bouteille d'irrigation, il risque de fuir au niveau du raccord de la bouteille.

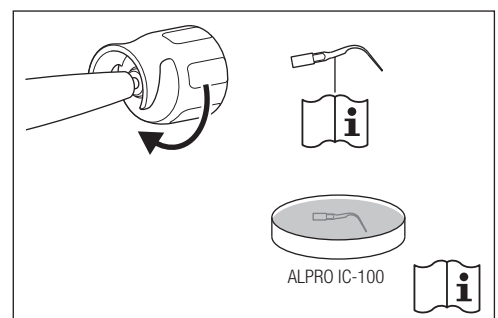
REMARQUE • La LED de la pièce à main à ultrasons ne s'allume pas pendant l'autonettoyage.

9-1-1-1 Retrait de l'insert


1) Retirez l'insert de la pièce à main à ultrasons.

Retirez l'insert de la clé dynamométrique.

Pour retraiter les inserts et la clé dynamométrique, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec les inserts (consultez OM-Z0314E).



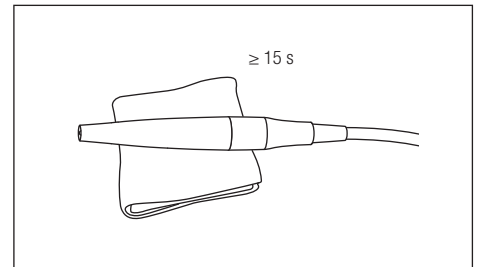- 2) Essuyez toute saleté de la surface de la pièce à main à ultrasons à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'eau.




9-1-1-2 Autonettoyage


ATTENTION

- Pendant l'autonettoyage, l'eau utilisée à cette fin sort de l'insert de la pièce à main à ultrasons. Préparez un récipient, un gobelet par exemple, pour récupérer l'eau.

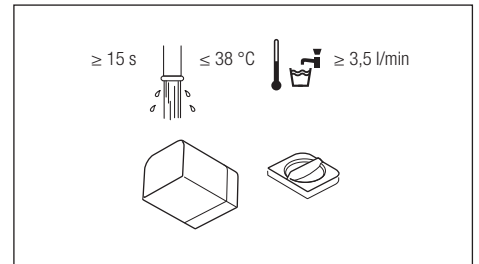
- 1) Configurez le mode d'irrigation sur l'irrigation à l'eau du robinet et réglez le volume d'irrigation au maximum.
- 2) Retirez la bouteille d'irrigation, puis nettoyez l'intérieur de la bouteille d'irrigation et le capuchon de la bouteille d'irrigation à l'eau courante.



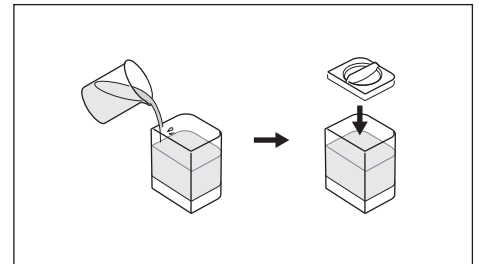- 3) Remplissez la bouteille d'irrigation au moins jusqu'à la moitié avec de l'eau distillée ou purifiée, puis fermez bien le capuchon de la bouteille d'irrigation. (N'utilisez pas de solution saline.)




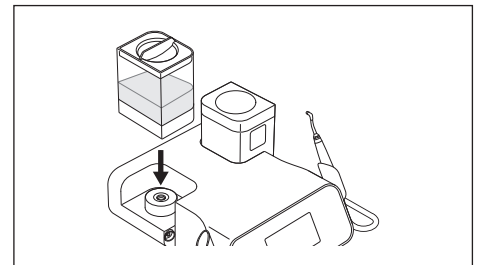- 4) Insérez la bouteille d'irrigation bien droit sur le connecteur de base de la bouteille d'irrigation.




* S'il reste un espace entre la bouteille d'irrigation et le boîtier de contrôle, l'eau risque de fuir.

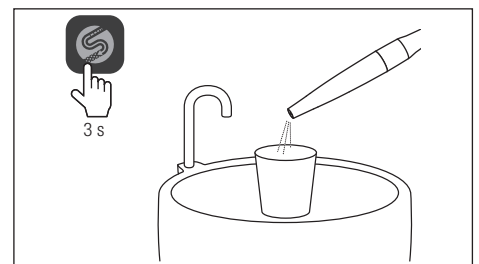- 5) Dirigez l'insert de la pièce à main à ultrasons au-dessus d'un contenant destiné à récupérer l'eau, puis touchez  pendant trois secondes. L'autonettoyage démarre. (Le nettoyage dure 45 secondes.)



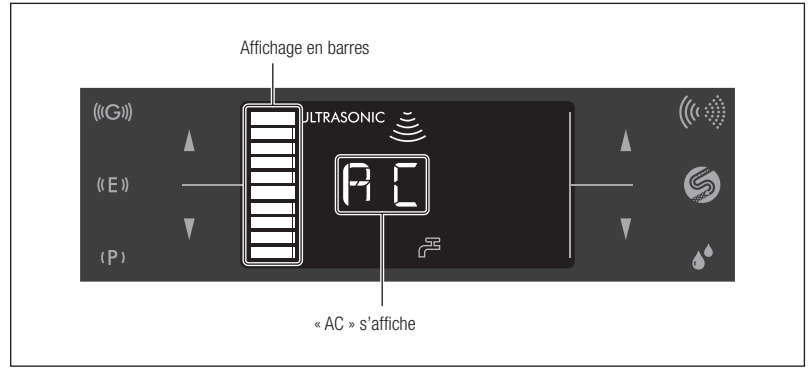
- 6) Pendant l'autonettoyage, « AC » s'affiche sur l'écran LCD.
L'affichage en barres indique l'avancée du processus.



* Pour annuler l'autonettoyage, touchez à nouveau .


Lorsque l'autonettoyage est achevé, le boîtier de contrôle retrouve les réglages antérieurs à l'autonettoyage.

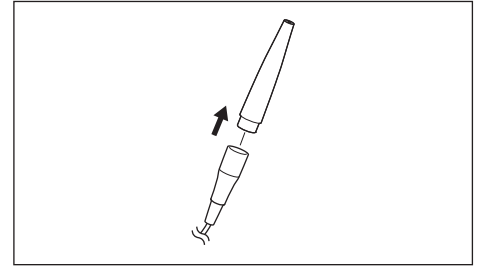- 7) Débranchez la pièce à main à ultrasons du cordon de la pièce à main.




9-1-1-3 Pré-nettoyage

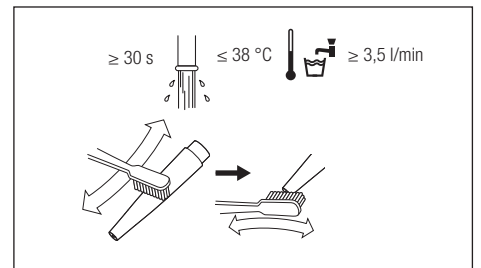
- 1) Nettoyez la pièce à main à ultrasons à l'eau courante et avec une brosse à poils souples.



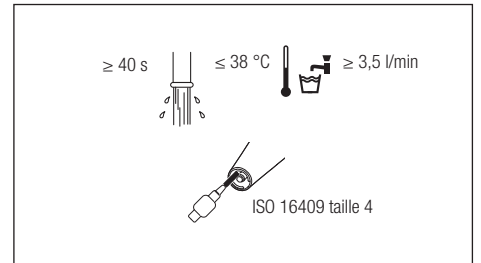
- 2) Nettoyez l'insert de la pièce à main à ultrasons à l'eau courante et avec une brosse.



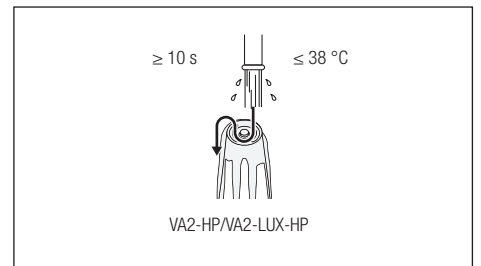
- 3) Rincez l'extrémité de la pièce à main à ultrasons.



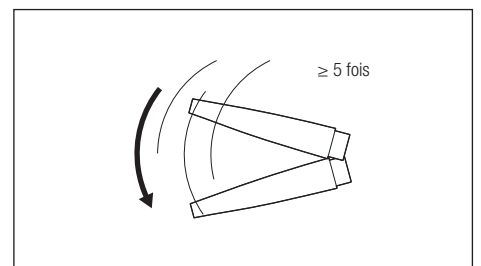- 4) Secouez légèrement la pièce à main à ultrasons pour éliminer l'eau.



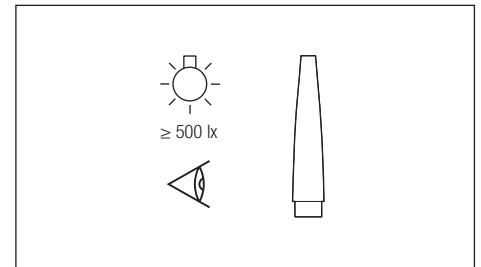5) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 1) jusqu'à tout éliminer.



9-1-1-4 Nettoyage et désinfection

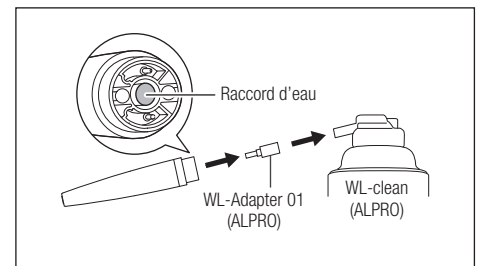
ATTENTION

- Veillez à effectuer un pré-nettoyage avant le nettoyage et la désinfection.
- Veillez à désinfecter dans les deux heures suivant le nettoyage.
- Après avoir désinfecté, stérilisez la pièce à main à ultrasons (reportez-vous à « 9-2 Stérilisation »).
- Si vous utilisez un spray (ALPRO), veillez à couvrir l'insert de la pièce à mains à ultrasons d'un chiffon pour empêcher toute éclaboussure de détergent et d'agent de désinfection. Nous vous conseillons d'utiliser le « Spray Mist Absorber » (Y900084).
- Lorsque vous pulvérisiez du spray ALPRO, maintenez la pièce à main à ultrasons et WL-Adapter 01.
- Si vous utilisez des produits ALPRO, reportez-vous au manuel du fabricant.


Manuel

■ Nettoyage


1) Fixez le WL-Adapter 01 (ALPRO) sur le WL-clean (ALPRO) et branchez le raccord d'eau de la pièce à main à ultrasons sur l'extrémité du WL-Adapter 01 (ALPRO).



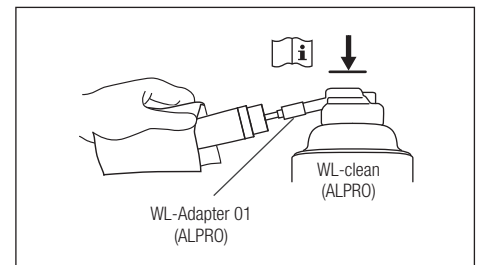2) Pulvérisiez le WL-clean (ALPRO) tout en maintenant le WL-clean (ALPRO) et la pièce à main à ultrasons.




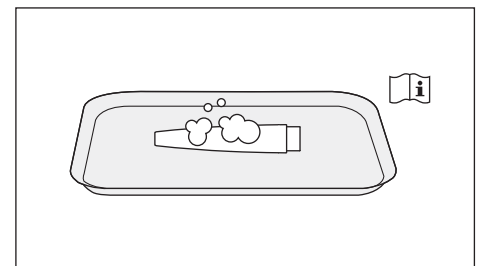3) Retirez le raccord d'eau situé sur la pièce à main à ultrasons du WL-Adapter 01 (ALPRO) et retirez le WL-Adapter 01 (ALPRO) du WL-clean (ALPRO), puis placez la pièce à main à ultrasons dans le bac désinfecté. Pulvérisiez le WL-clean (ALPRO) sur la surface de la pièce à main à ultrasons et attendez que le WL-clean (ALPRO) fasse effet.




■ Désinfection

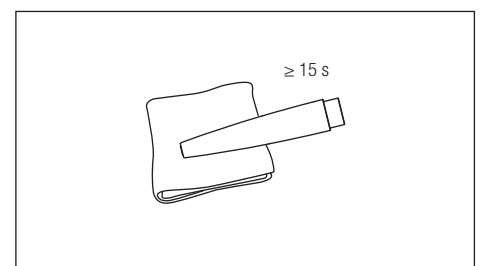
1) Essuyez la surface de la pièce à main à ultrasons à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.



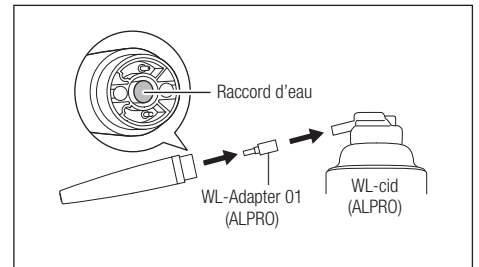2) Fixez le WL-Adapter 01 (ALPRO) sur le WL-cid (ALPRO) et branchez le raccord d'eau de la pièce à main à ultrasons sur l'extrémité du WL-Adapter 01 (ALPRO).



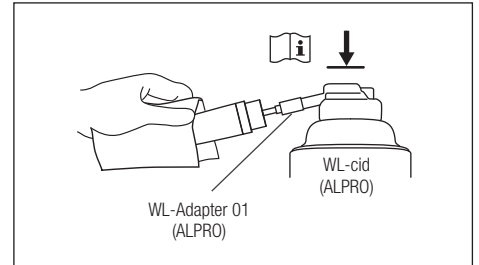
3) Pulvérisez le WL-cid (ALPRO) dans le raccord d'eau situé sur la pièce à main à ultrasons tout en maintenant la pièce à main à ultrasons et le WL-cid (ALPRO).




4) Retirez le WL-Adapter 01 (ALPRO) et la pièce à main à ultrasons du WL-cid (ALPRO).

5) Retirez la pièce à main à ultrasons du WL-Adapter 01 (ALPRO), puis placez la pièce à main à ultrasons dans le bac désinfecté.

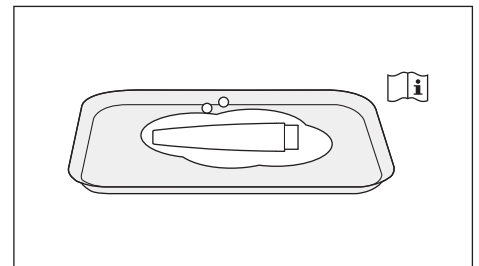6) Pulvérisez le WL-cid (ALPRO) sur la surface de la pièce à main à ultrasons et attendez que le WL-cid (ALPRO) fasse effet.




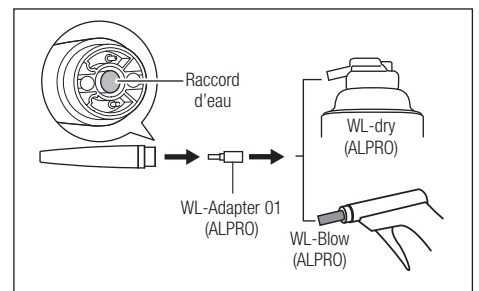7) Fixez le WL-Adapter 01 (ALPRO) sur le WL-dry (ALPRO) ou le WL-Blow (ALPRO) et fixez l'arrière de la pièce à main à ultrasons au WL-Adapter 01 (ALPRO).




8) Évacuez le désinfectant de la pièce à main à ultrasons tout en maintenant le WL-dry (ALPRO) ou le WL-Blow (ALPRO) et la pièce à main à ultrasons.

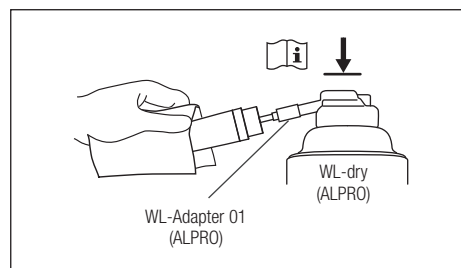· Avec le WL-dry (ALPRO) :




· Avec le WL-Blow (ALPRO) :

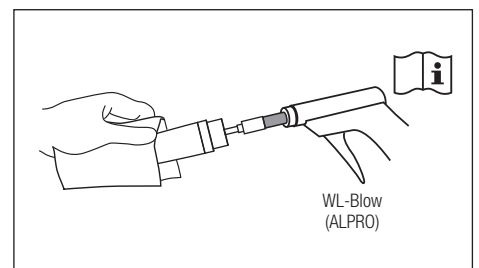

9) Retirez le WL-Adapter 01 (ALPRO) et la pièce à main à ultrasons du WL-dry (ALPRO) ou du WL-Blow (ALPRO).

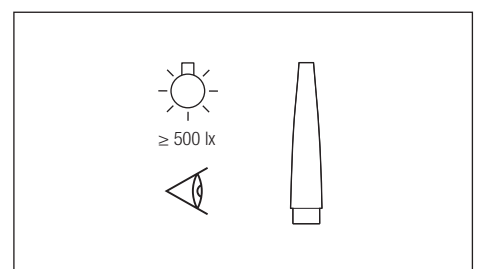10) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 1) jusqu'à tout éliminer.



11) Passez à la stérilisation (reportez-vous à « 9-2 Stérilisation »).

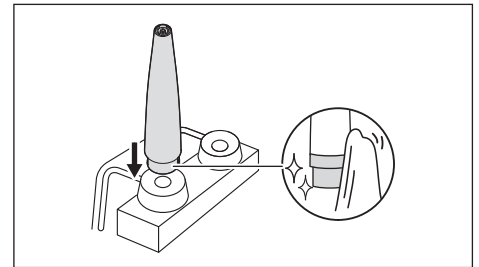
Automatique

ATTENTION

- Utilisez un laveur-désinfecteur conforme à DIN EN ISO 15883.
- Lisez le mode d'emploi de votre laveur-désinfecteur.
- Le barreau de quartz étant fragile, veillez à protéger l'insert de la pièce à main à ultrasons de tout choc pendant le nettoyage.
- Lorsque la thermodésinfection et le cycle de séchage sont terminés, retirez immédiatement le produit du laveur-désinfecteur (dans un délai d'une heure), puis séchez-le. Toute humidité résiduelle dans le produit provoquerait une corrosion interne ou d'autres problèmes.
- Lorsque vous utilisez un laveur-désinfecteur, servez-vous de l'adaptateur compatible avec ce dernier (à préparer par l'utilisateur) pour nettoyer et désinfecter la pièce à main à ultrasons.
- Pour l'autonettoyage et la désinfection, suivez les instructions du manuel du fabricant du laveur-désinfecteur.

■ Nettoyage et désinfection (extérieur et intérieur)

- 1) Essuyez le raccord de la pièce à main à ultrasons avec un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant, puis fixez la pièce à main à ultrasons sur l'adaptateur du laveur-désinfecteur.




Adaptateurs compatibles avec le laveur-désinfecteur (à acheter par l'utilisateur)

| Fabricant | REF | Raccord approx. | Couleur |
|-----------|-----------|-----------------|---------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Vert |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Vert |
| Geringe | 502887400 | 16 mm | Noir |


- 2) Exécutez la thermodésinfection conformément au manuel du laveur-désinfecteur.



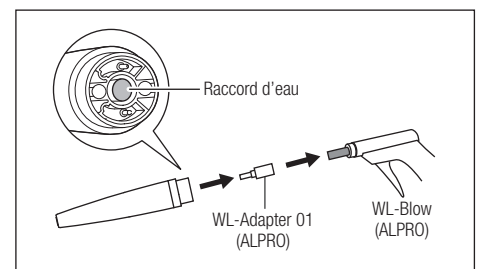
- 3) Retirez la pièce à main à ultrasons du laveur-désinfecteur.
- 4) Fixez le WL-Adapter 01 (ALPRO) sur le WL-Blow (ALPRO) et fixez l'arrière de la pièce à main à ultrasons au WL-Adapter (ALPRO).



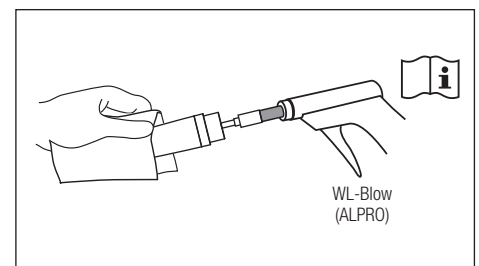- 5) Évacuez l'humidité de la pièce à main à ultrasons tout en maintenant le WL-Blow (ALPRO) et la pièce à main à ultrasons.




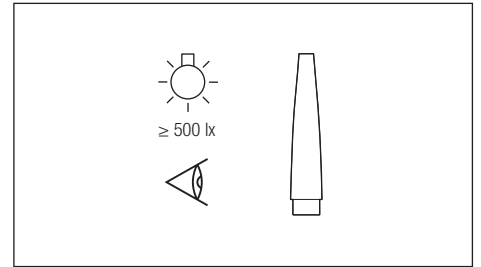- 6) Retirez le WL-Adapter 01 (ALPRO) et la pièce à main à ultrasons du WL-Blow (ALPRO).
- 7) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 2) jusqu'à tout éliminer.



9-1-1-5 Barreau de quartz

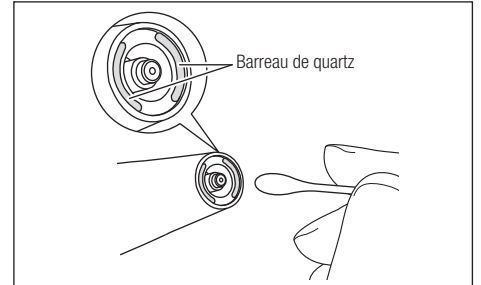Si de la poussière ou des débris ont adhéré au barreau de quartz, essuyez-le délicatement avec un coton-tige humidifié d'alcool désinfectant.




ATTENTION

- N'utilisez pas d'aiguille ou de couteau pour nettoyer le barreau de quartz. Vous risqueriez d'endommager le barreau de quartz et de réduire sa capacité de transmission.


9-1-2 Cordon de la pièce à main

Nettoyage et désinfection

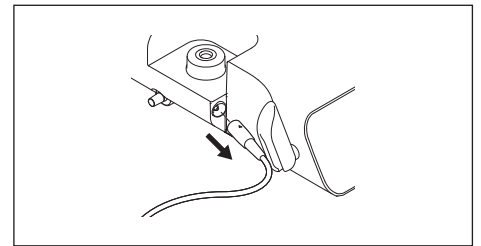
- 1) Débranchez le cordon de la pièce à main du boîtier de contrôle.



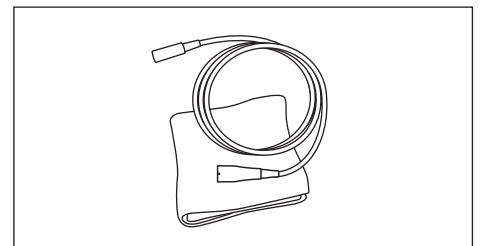
- 2) Essuyez la surface du cordon de la pièce à main à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'eau.



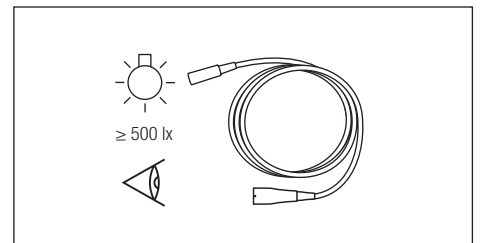
- 3) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 2) jusqu'à tout éliminer.



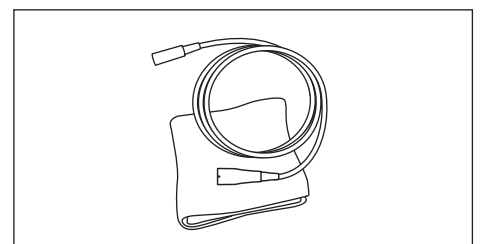- 4) Essuyez la surface du cordon de la pièce à main à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.



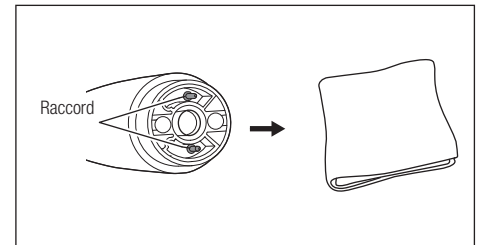- 5) Essuyez le raccord à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.
Si un coton-tige est trop épais pour nettoyer le raccord, enroulez du papier absorbant mouillé, ou similaire, autour d'une tige fine et essuyez délicatement le raccord.




ATTENTION

- Lorsque vous nettoyez le raccord, n'utilisez pas de tige présentant une extrémité pointue et ne piquez pas le terminal. Vous risqueriez d'endommager les contacts et de provoquer une défaillance à ce niveau.


9-1-3 Bouteille d'irrigation

9-1-3-1 Nettoyage et désinfection

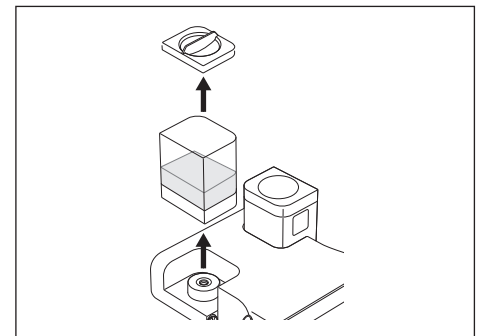
- 1) Retirez la bouteille d'irrigation du connecteur de base de la bouteille d'irrigation, puis retirez le capuchon de la bouteille d'irrigation de cette dernière.



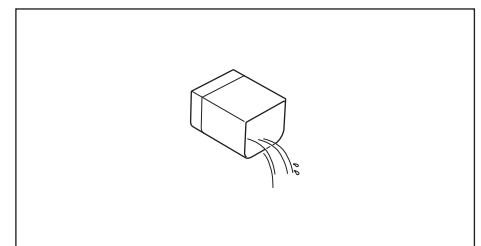
- 2) Évacuez l'eau ou le désinfectant restant dans la bouteille d'irrigation.



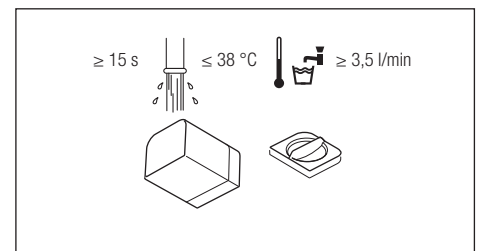- 3) Rincez la bouteille d'irrigation et son capuchon à l'eau courante.



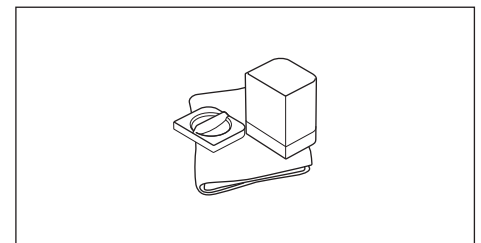- 4) Essuyez les surfaces de la bouteille d'irrigation et de son capuchon à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.




- 5) Fixez la bouteille d'irrigation au connecteur de base de la bouteille d'irrigation.


9-1-4 Pièce à main à poudre

9-1-4-1 Retrait de l'insert

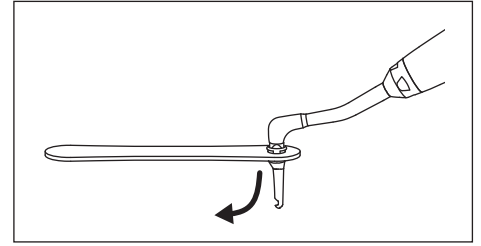1) Utilisez l'extracteur d'insert Perio Mate pour retirer l'insert Perio Mate.



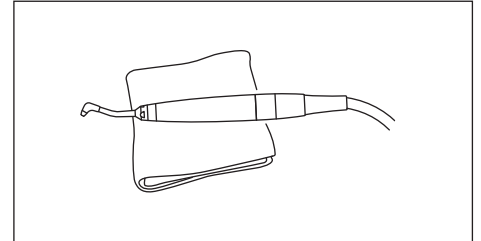2) Essuyez toute saleté de la surface de la pièce à main à poudre à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'eau.



AVERTISSEMENT


- Les inserts sont à usage unique. Ne les réutilisez pas. Cela provoquerait une infection.
- Mettez les inserts Perio Mate au rebut en tant que déchets médicaux.

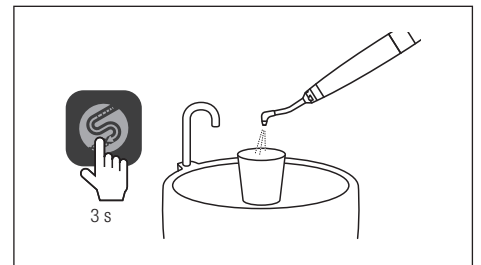
9-1-4-2 Autonettoyage




ATTENTION

- Pendant l'autonettoyage, l'eau utilisée à cette fin sort de l'insert de la pièce à main à poudre. Préparez un récipient, un gobelet par exemple, pour récupérer l'eau.
- Avant de démarrer l'autonettoyage, touchez les boutons de volume d'irrigation (▲) pour régler le niveau d'eau sur L5 (reportez-vous à « 11-3 Réglage du niveau d'eau de base »).

1) Dirigez l'insert de la pièce à main à poudre au-dessus d'un contenant destiné à récupérer l'eau, puis touchez  pendant trois secondes. L'autonettoyage démarre. (Le nettoyage dure 45 secondes.)



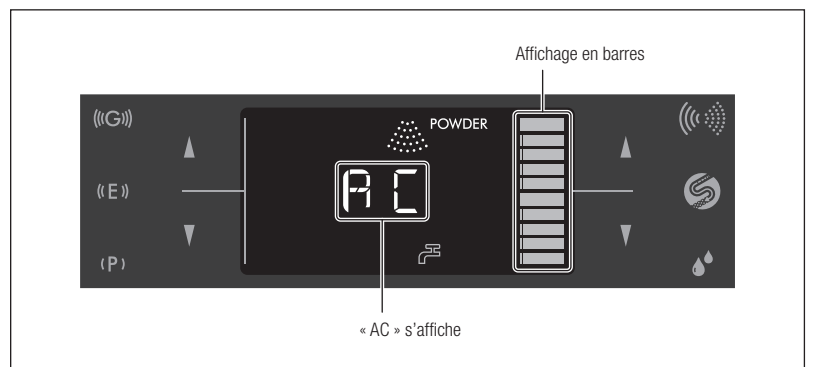
2) Pendant l'autonettoyage, « AC » s'affiche sur l'écran LCD. L'affichage en barres indique l'avancée du processus.



* Pour annuler l'autonettoyage, touchez à nouveau .


Lorsque l'autonettoyage est achevé, le boîtier de contrôle retrouve les réglages antérieurs à l'autonettoyage.

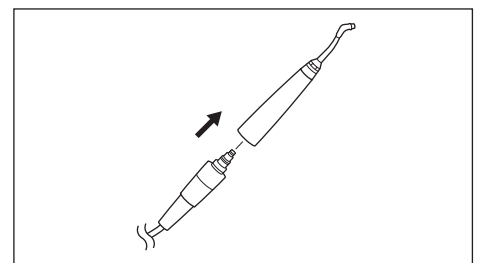3) Débranchez la pièce à main à poudre du tuyau de la pièce à main.




9-1-4-3 Retrait de la poudre

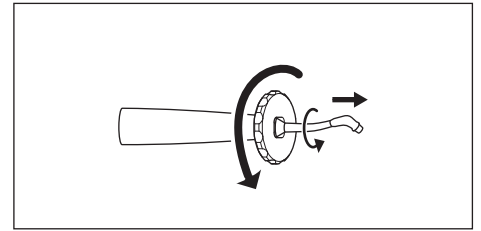1) Retirez l'embout de la pièce à main à poudre à l'aide de la clé dynamométrique anneau (accessoire).



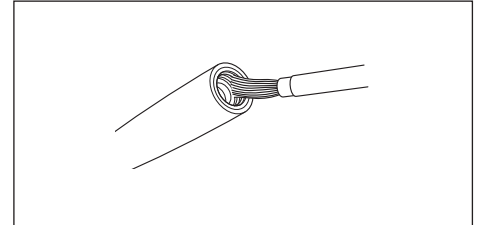2) Retirez la poudre adhérent à l'intérieur du raccord de la pièce à main à poudre avec la brosse de nettoyage (accessoire).




AVERTISSEMENT




- Veillez à nettoyer l'intérieur de la pièce à main à poudre après l'utilisation. La poudre restant dans la pièce à main à poudre peut durcir et provoquer une obstruction.

9-1-4-4 Pré-nettoyage

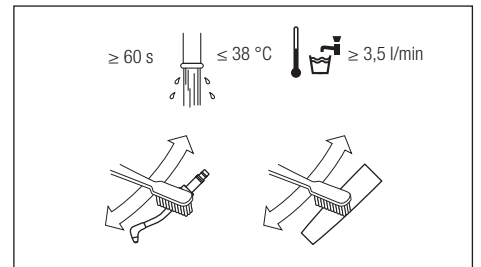
1) Nettoyez la pièce à main à poudre et l'embout à l'eau courante et avec une brosse à poils souples.



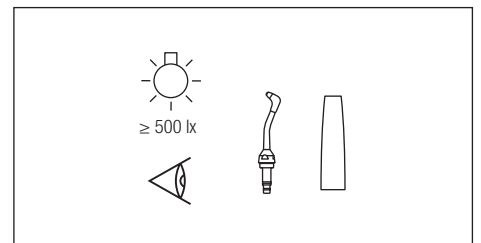2) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 1) jusqu'à tout éliminer.



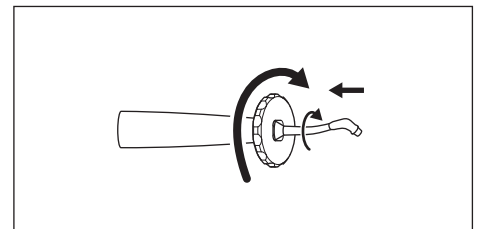3) Fixez l'embout sur la pièce à main à poudre.



ATTENTION



- Procédez au nettoyage par ultrasons au moins une fois par semaine pour éviter l'agglomération de la poudre. Procédez au nettoyage par ultrasons avant d'exécuter l'autonettoyage ou après avoir appliqué la mesure indiquée dans la section « 14 Dépannage » (« 9-3 Nettoyage par ultrasons (hebdomadaire) »).
- Utilisez uniquement la clé dynamométrique anneau fournie pour fixer et retirer les embouts. Lorsque vous fixez ou retirez un embout, ne le tenez pas par son extrémité distale. Vous risqueriez de déformer l'embout.
- N'utilisez pas le nettoyage par ultrasons pour nettoyer les pièces à main à poudre.

9-1-4-5 Nettoyage et désinfection

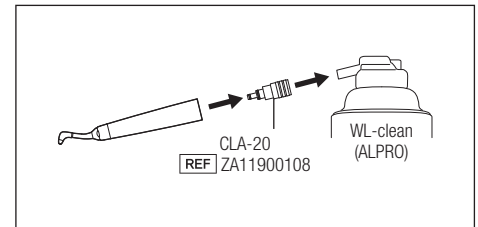
ATTENTION

- Si le joint de CLA-20 s'est détérioré ou est endommagé, remplacez-le par un neuf avant l'utilisation.
- Veillez à effectuer un pré-nettoyage avant le nettoyage.
- Après avoir désinfecté, stérilisez la pièce à main à poudre (reportez-vous à « 9-2 Stérilisation »).
- Veillez à désinfecter dans les deux heures suivant le nettoyage.
- Si vous utilisez un spray (ALPRO), veillez à couvrir la tête de la pièce à mains à poudre d'un chiffon pour empêcher toute éclaboussure de détergent et d'agent de désinfection. Nous vous conseillons d'utiliser le « Spray Mist Absorber » (Y900084).
- Si vous utilisez des produits ALPRO, reportez-vous au manuel du fabricant.


Manuel

■ Nettoyage

1) Fixez CLA-20 (REF ZA11900108) au WL-clean (ALPRO), puis installez la pièce à main à poudre sur CLA-20.




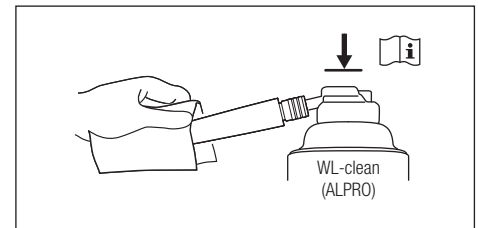2) Pulvérisez le WL-clean (ALPRO) tout en maintenant le WL-clean (ALPRO) et la pièce à main à poudre.




3) Retirez CLA-20 et la pièce à main à poudre du WL-clean (ALPRO).

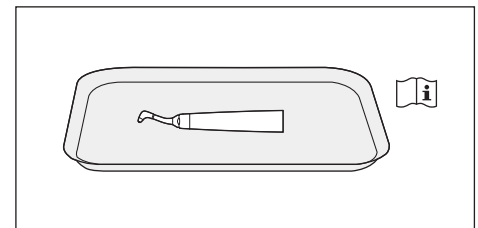4) Attendez que le WL-clean (ALPRO) fasse effet.




■ Désinfection

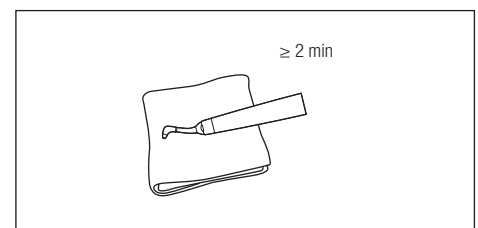
1) Essuyez la surface de la pièce à main à poudre à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.



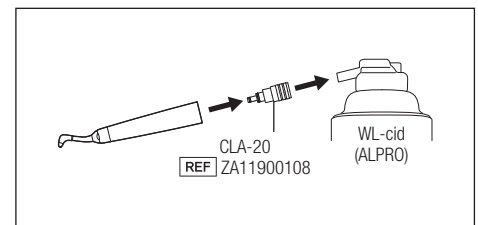
2) Fixez CLA-20 (REF ZA11900108) au WL-cid (ALPRO), puis installez la pièce à main à poudre sur CLA-20.



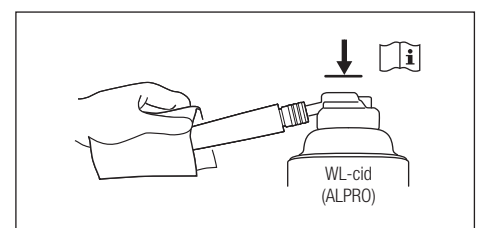
3) Pulvérisez le WL-cid (ALPRO) sur la pièce à main à poudre tout en maintenant le WL-cid (ALPRO) et la pièce à main à poudre.



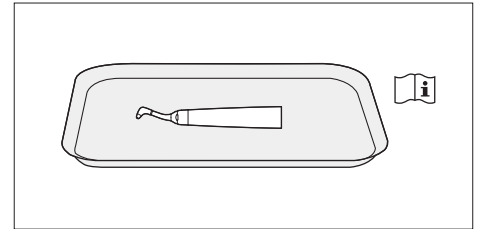- 4) Retirez CLA-20 et la pièce à main à poudre du WL-cid (ALPRO).
- 5) Attendez que le WL-cid (ALPRO) fasse effet.




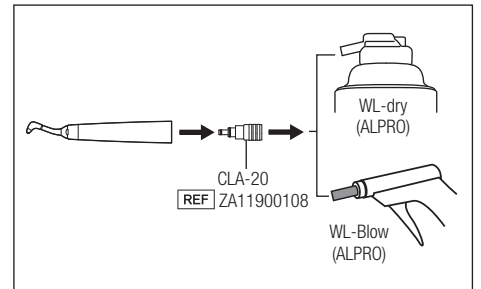- 6) Fixez CLA-20 au WL-dry (ALPRO) ou au WL-Blow (ALPRO), puis installez la pièce à main à poudre sur CLA-20.




- 7) Évacuez le désinfectant de la pièce à main à poudre tout en maintenant le WL-dry (ALPRO) ou le WL-Blow (ALPRO) et la pièce à main à poudre.

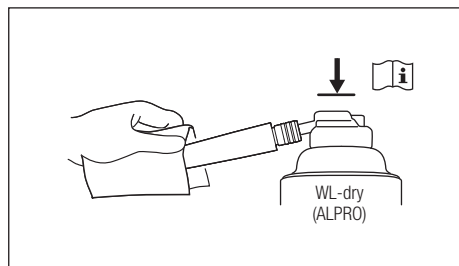
· Avec le WL-dry (ALPRO) :



· Avec le WL-Blow (ALPRO) :

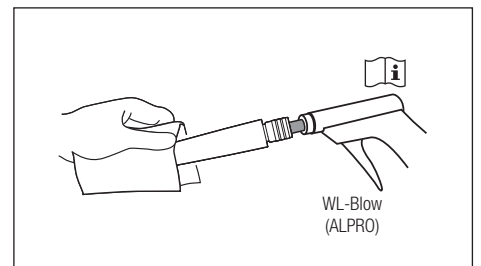

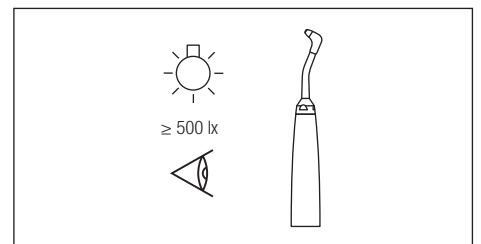- 8) Retirez la pièce à main à poudre du WL-dry (ALPRO) ou du WL-Blow (ALPRO).
- 9) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 1) jusqu'à tout éliminer.



- 10) Passez à la stérilisation (reportez-vous à « 9-2 Stérilisation »).

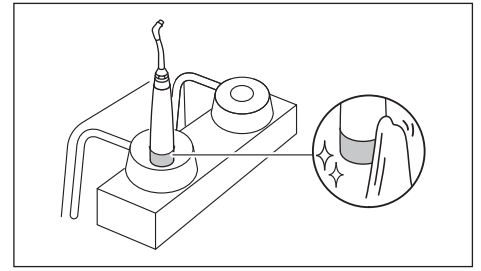
Automatique

ATTENTION

- Utilisez un laveur-désinfecteur conforme à ISO 15883.
- Lisez le mode d'emploi de votre laveur-désinfecteur.
- Séchez suffisamment la pièce à main à poudre après l'avoir nettoyée avec le laveur-désinfecteur. Une humidité résiduelle provoquerait une corrosion interne et une mauvaise lubrification.
- Lorsque la thermodésinfection et le cycle de séchage sont terminés, retirez immédiatement le produit du laveur-désinfecteur (dans un délai d'une heure), puis séchez-le. Toute humidité résiduelle dans le produit provoquerait une corrosion interne et une mauvaise lubrification.
- Lorsque vous utilisez un laveur-désinfecteur, servez-vous de l'adaptateur compatible avec ce dernier (à préparer par l'utilisateur) pour nettoyer et désinfecter la pièce à main à poudre.
- Pour l'autonettoyage et la désinfection, suivez les instructions du manuel du fabricant du laveur-désinfecteur.

■ Nettoyage et désinfection


- 1) Essuyez le raccord de la pièce à main à poudre avec un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant, puis fixez la pièce à main à poudre sur l'adaptateur du laveur-désinfecteur.




Adaptateurs compatibles avec le laveur-désinfecteur (à acheter par l'utilisateur)

| Fabricant | REF | Raccord approx. | Couleur |
|-----------|-----------|-----------------|---------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Vert |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Vert |
| Gétinge | 502887400 | 16 mm | Noir |

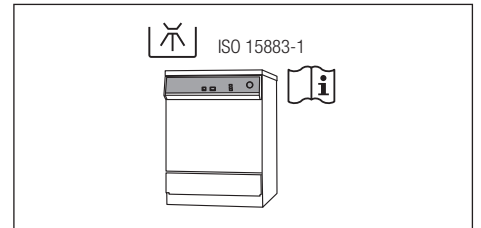
- 2) Exécutez la thermodésinfection conformément au manuel du laveur-désinfecteur.



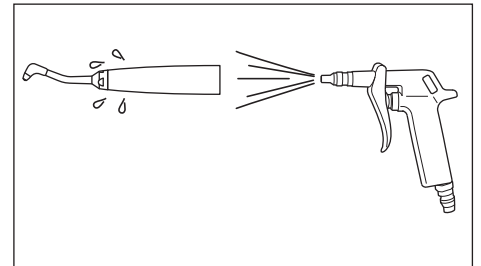- 3) Éliminez l'humidité de la surface et de l'intérieur de la pièce à main à poudre avec un pistolet à air ou outil similaire.



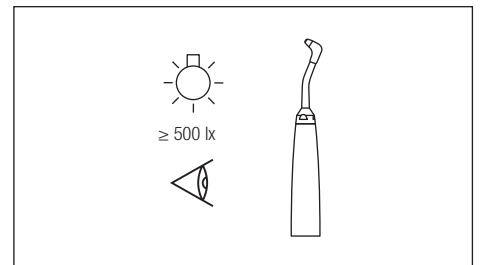- 4) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus).
Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 2) jusqu'à tout éliminer.




- 5) Passez à la stérilisation (reportez-vous à « 9-2 Stérilisation »).

9-1-5 Chambre et tuyau de la pièce à main


Effectuez l'entretien suivant à la fin de la journée.

9-1-5-1 Retrait de la poudre

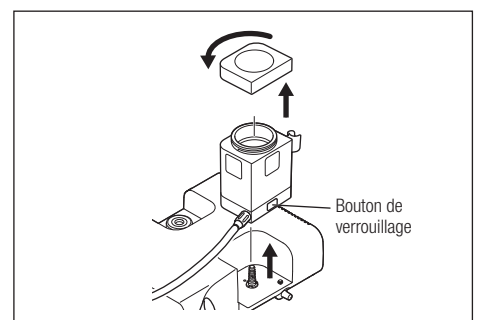
- 1) Évacuez la pression résiduelle de la chambre (reportez-vous à « 8-6-4 Libération de la pression résiduelle »).
2) Poussez le bouton de verrouillage, puis retirez la chambre du connecteur de base de la chambre.
Retirez le capuchon de la chambre.



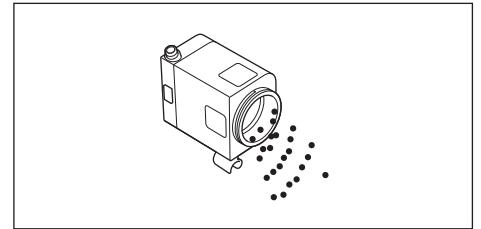
- 3) Mettez au rebut la poudre contenue dans la chambre (reportez-vous à « 22 Mise au rebut du produit »).



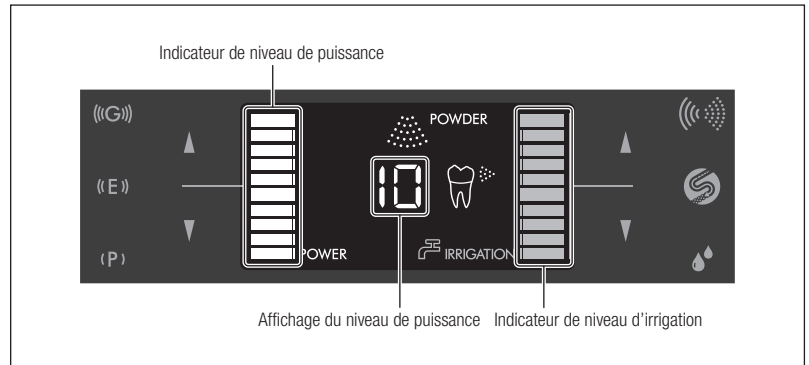- 4) Fermez bien le connecteur de base de la chambre et insérez la chambre directement dans son connecteur de base.
 5) Réglez respectivement le niveau de puissance et le niveau d'irrigation sur « 10 » et le maximum.



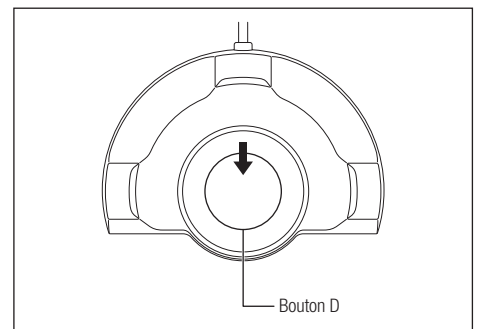
- 6) Dirigez le tuyau de la pièce à main vers un crachoir ou un évier et enfoncez le bouton D de la pédale de contrôle 5 fois pendant plus d'une seconde.




- 7) Effectuez l'autonettoyage pour évacuer toute la poudre et l'eau restant dans le tuyau de la pièce à main (reportez-vous à 9-1-4-2 Autonettoyage).

9-1-5-2 Nettoyage et désinfection

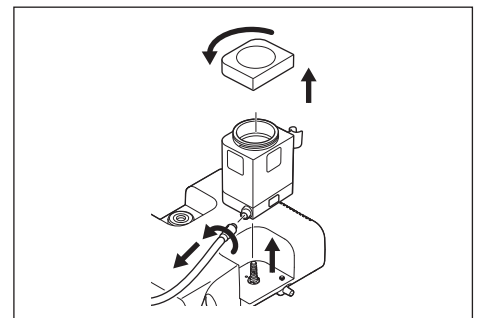
- 1) Évacuez la pression résiduelle de la chambre (reportez-vous à « 8-6-4 Libération de la pression résiduelle »).
- 2) Poussez le bouton de verrouillage, puis retirez la chambre du connecteur de base de la chambre.
 Retirez le capuchon de la chambre et débranchez le tuyau de la pièce à main.
 * Si vous ne parvenez pas à retirer la chambre, bien que vous ayez poussé le bouton de verrouillage, débloquez ce dernier (reportez-vous à « 9-1-5-3 Déblocage du bouton de verrouillage »).



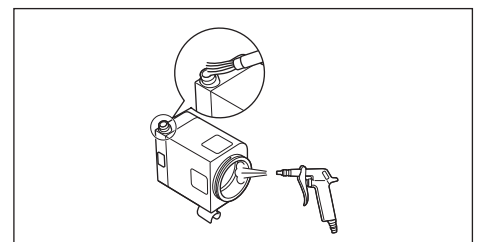- 3) Éliminez toute poudre résiduelle de la chambre et de la prise du tuyau de la pièce à main avec un pistolet à air ou outil similaire.




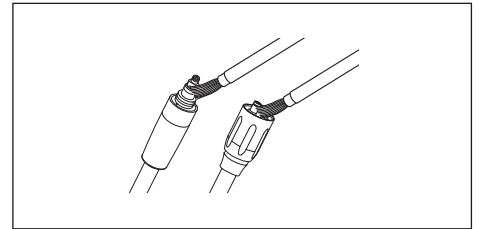4) Retirez toute poudre restante de chaque extrémité du tuyau de la pièce à main avec la brosse de nettoyage (accessoire).




5) Vérifiez qu'il ne reste plus de poudre sur les filetages du capuchon de la chambre. S'il en reste, nettoyez-la. (Reportez-vous à « Nettoyage du capuchon de la chambre »)

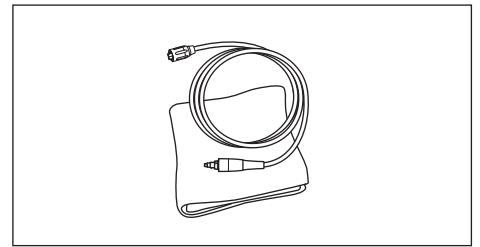
6) Essuyez la surface du tuyau de la pièce à main à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'eau.



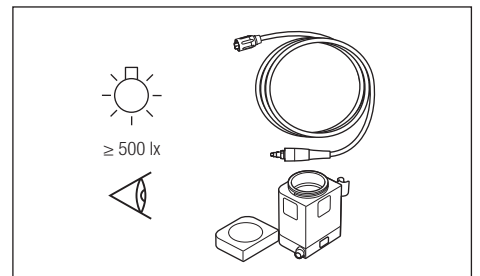7) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez la procédure depuis l'étape 3) jusqu'à tout éliminer.



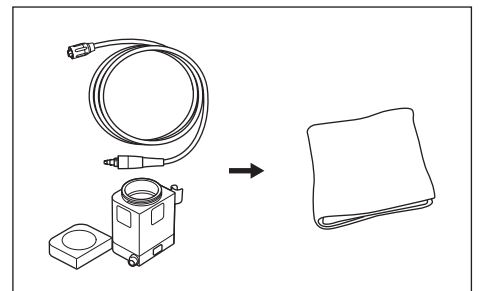8) Essuyez les surfaces de la chambre, de son capuchon et du tuyau de la pièce à main à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.



9) Passez au stockage (reportez-vous à « 9-4 Stockage ») ou insérez la chambre directement dans son connecteur de base.

AVERTISSEMENT



- Fixez fermement le capuchon de la chambre. Sinon, le capuchon de la chambre risque d'être éjecté pendant l'utilisation, endommageant l'appareil ou provoquant des blessures.



ATTENTION

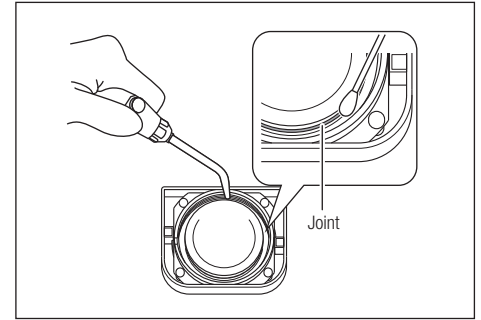


- Si de la poudre adhère aux filetages de la chambre et/ou du capuchon de la chambre, le capuchon deviendra difficile à fermer. Le nettoyage de la chambre et de son capuchon permet d'ouvrir et de fermer facilement ce dernier (reportez-vous à « Nettoyage du capuchon de la chambre »).
- Si la chambre dysfonctionne, demandez une réparation à un distributeur NSK agréé uniquement.
- Après l'utilisation, éliminez complètement la poudre ayant adhéré à l'intérieur de la chambre et nettoyez cette dernière avant le stockage.
- Ne lavez pas la chambre à l'eau. Cela solidifierait la poudre et provoquerait une obstruction. La pression d'air de la chambre peut être élevée, ce qui explique que le capuchon est parfois difficile à ouvrir immédiatement après l'utilisation. Dans ce cas, patientez un moment ou évacuez la pression résiduelle avant d'ouvrir le capuchon (reportez-vous à « 8-6-4 Libération de la pression résiduelle »).
- Avant de raccorder le tuyau de la pièce à main, la chambre et la pièce à main ou la chambre et le boîtier de contrôle, veillez à éliminer toute l'eau présente aux raccords du tuyau et de la chambre en y insufflant de l'air sec. Si cela n'est pas fait, de l'humidité peut pénétrer dans l'alimentation d'air, provoquant la solidification de la poudre de nettoyage à l'intérieur du produit.

Nettoyage du capuchon de la chambre

Si de la poudre adhère aux filetages de la chambre et/ou du capuchon de la chambre, le capuchon deviendra difficile à fermer. Le nettoyage de la chambre et de son capuchon selon la procédure ci-dessous permet d'ouvrir et de fermer facilement le capuchon.

- 1) Retirez le capuchon de la chambre.
- 2) Nettoyez l'intérieur de la chambre, les filetages et la bordure du joint du capuchon de la chambre avec une brosse ou un coton-tige sec.




- 3) Éliminez la poudre ayant adhéré avec de l'air soufflé.
- 4) Passez au stockage (reportez-vous à « 9-4 Stockage ») ou insérez la chambre directement dans son connecteur de base.

9-1-5-3 Déblocage du bouton de verrouillage

Si vous ne parvenez pas à pousser le bouton de verrouillage, empêchant ainsi le retrait de la chambre, suivez la procédure ci-dessous pour débloquer le bouton de verrouillage et retirer la chambre.

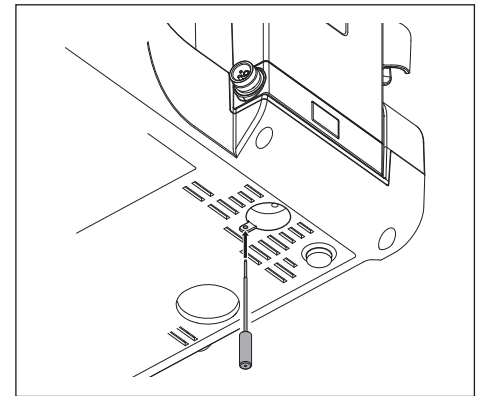- 1) Insérez complètement l'outil de déverrouillage (accessoire) dans l'orifice situé sous le boîtier de contrôle pour débloquer le bouton de verrouillage.



- 2) Retirez l'outil de déverrouillage.
- 3) Appuyez sur le bouton de verrouillage et retirez la chambre.

Si la procédure ci-dessus ne permet pas de débloquer le bouton de verrouillage, contactez votre distributeur NSK agréé.



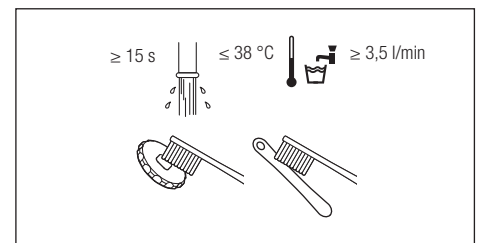
AVERTISSEMENT

- Ne retournez pas le boîtier de contrôle lors du déblocage du bouton de verrouillage. Cela provoquerait une obstruction de poudre.
- N'entortillez pas l'outil de déverrouillage lorsque vous l'insérez.


9-1-6 Clé dynamométrique anneau et extracteur d'insert Perio Mate

9-1-6-1 Nettoyage et désinfection


- 1) Nettoyez la clé dynamométrique anneau et l'extracteur d'insert Perio Mate pendant 15 secondes ou plus avec de l'eau courante et une brosse à poils souples.



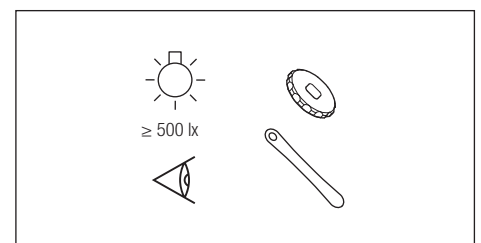- 2) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus).



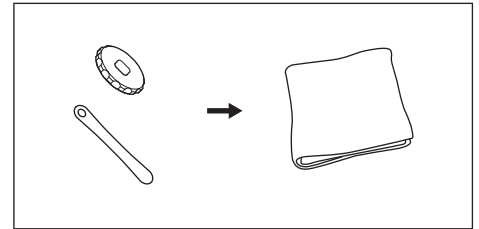- 3) Essuyez la clé dynamométrique anneau et l'extracteur d'insert Perio Mate avec un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.




- 4) Passez à la stérilisation (reportez-vous à « 9-2 Stérilisation »).

9-1-7 Boîtier de contrôle et pédale de contrôle

9-1-7-1 Nettoyage

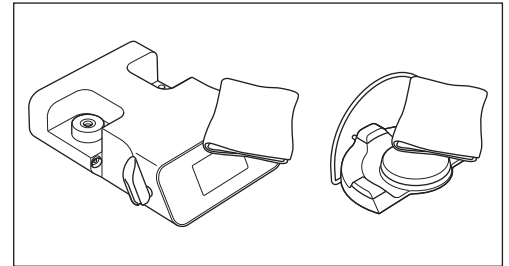- 1) Mettez le produit hors tension.
- 2) Essuyez toute saleté des surfaces du boîtier de contrôle et de la pédale de contrôle à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'eau.
- 3) Essuyez les surfaces du boîtier de contrôle et de la pédale de contrôle à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant.



- 4) Passez au stockage (reportez-vous à « 9-4 Stockage »).

ATTENTION

- Ne nettoyez, ne plongez ou n'essuyez pas avec des solvants tels que de l'eau électrolysée oxydante (eau fortement acide, eau super acide), des produits chimiques très alcalins ou acides, des solvants contenant du chlore, du benzène ou un diluant.

9-2 Stérilisation


L'efficacité et la conformité avec la norme ISO 17665 de la procédure de stérilisation suivante ont été vérifiées.

Éléments pouvant être stérilisés :

Pièce à main à ultrasons, pièce à main à poudre, clé dynamométrique anneau, extracteur d'insert Perio Mate

- 1) Placez les éléments dans un sachet de stérilisation conforme à la norme ISO 11607-1, puis scellez celui-ci.
- 2) Effectuez la stérilisation dans les conditions suivantes.

| Type | Déplacement par gravité (classe N) | Pré-vide (classe B) |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Température | 132 °C | 134 °C |
| Durée de la stérilisation | ≥15 min | 3-18 min |

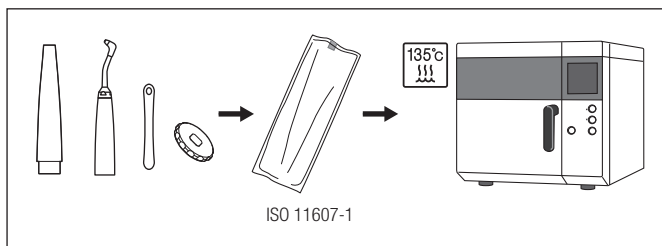

- 3) Passez au stockage (reportez-vous à « 9-4 Stockage »).

ATTENTION

- Suivez toujours les directives, normes, consignes locales, etc. concernant le retraitement de l'équipement.
- Utilisez un sachet de stérilisation conforme à ISO 11607-1.
- Pour la stérilisation en autoclave, n'ajoutez pas d'autres instruments aux éléments du produit dans le sachet de stérilisation. Cela décolorerait la surface du produit et affecterait les pièces internes. De plus, veillez à empêcher tout produit chimique de pénétrer dans le produit pendant la stérilisation en autoclave.
- Assurez-vous d'utiliser des stérilisateur capables d'exécuter la stérilisation jusqu'à 135 °C. N'utilisez pas un stérilisateur dépassant 135 °C pendant le cycle de séchage. Cela pourrait provoquer une défaillance du produit. Pour plus de détails, consultez le fabricant du stérilisateur.
- Stockez le produit dans un endroit protégé des effets nuisibles de la pression atmosphérique, de la température, de l'humidité, de la ventilation, de la lumière du soleil, de la poussière, du sel et de l'atmosphère sulfurique.
- Ne chauffez et ne refroidissez pas rapidement le produit pendant la stérilisation. Des changements rapides de température détériorent le produit.
- Ne touchez pas le produit immédiatement après la stérilisation, car il est brûlant.
- L'efficacité de méthodes de stérilisation (par exemple la stérilisation par plasma et la stérilisation EOG) autres que celle à la vapeur n'a pas été vérifiée pour ce produit.
- Lorsque la stérilisation est terminée, retirez le produit du stérilisateur dans un délai d'une heure. Ne pas procéder ainsi peut provoquer de la corrosion.
- Ne stérilisez pas d'autres pièces que les éléments pouvant être stérilisés.

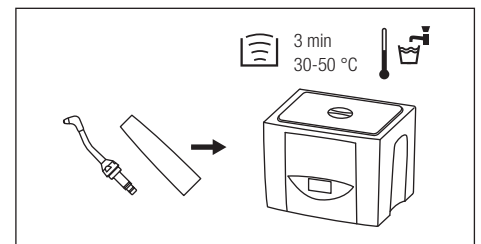
REMARQUE

- Nous vous conseillons le stérilisateur de classe B indiqué par la norme EN 13060. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant du stérilisateur.
- Bien que la pièce à main puisse se décolorer en raison de la chaleur après plusieurs stérilisations en autoclave, ce phénomène est dû aux caractéristiques du produit et n'indique aucun problème de qualité de celui-ci.


9-3 Nettoyage par ultrasons (hebdomadaire)

Veillez à effectuer le nettoyage et la désinfection avant le nettoyage par ultrasons (reportez-vous à « 9-1-4 Pièce à main à poudre »).


1) Nettoyez la pièce à main à poudre et l'embout aux ultrasons.



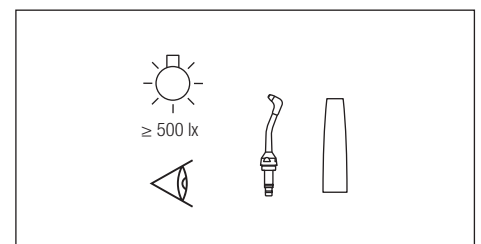
2) Vérifiez qu'il ne reste pas de saleté à l'aide d'un éclairage adéquat (500 lx ou plus). Si vous repérez de la saleté, répétez l'étape 1) jusqu'à tout éliminer.



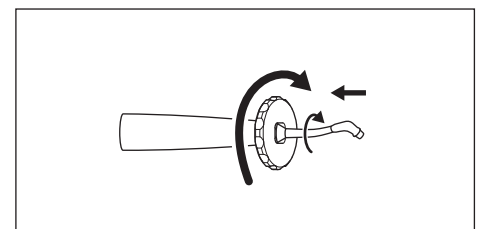3) Fixez l'embout sur la pièce à main à poudre à l'aide de la clé dynamométrique anneau (accessoire).



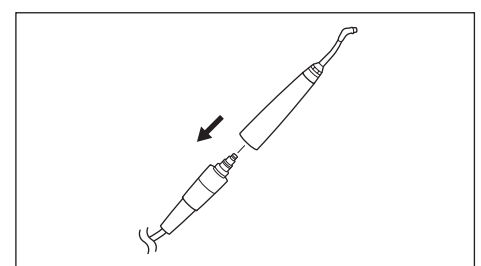4) Insérez la fiche de connexion du tuyau de la pièce à main dans la pièce à main à poudre.



5) Effectuez l'autonettoyage et la stérilisation (reportez-vous à « 9-1-4-2 Autonettoyage » et « 9-2 Stérilisation »).

ATTENTION

- Après le nettoyage par ultrasons, effectuez l'autonettoyage pour éliminer toute humidité interne et séchez bien le produit.
- Après l'autonettoyage, veillez à effectuer la stérilisation.
- N'utilisez pas le nettoyage par ultrasons pour nettoyer les pièces à main à ultrasons. Cela provoquerait une défaillance.

9-4 Stockage

Stockez le produit dans un environnement où il restera désinfecté et stérilisé jusqu'à la prochaine utilisation.

ATTENTION

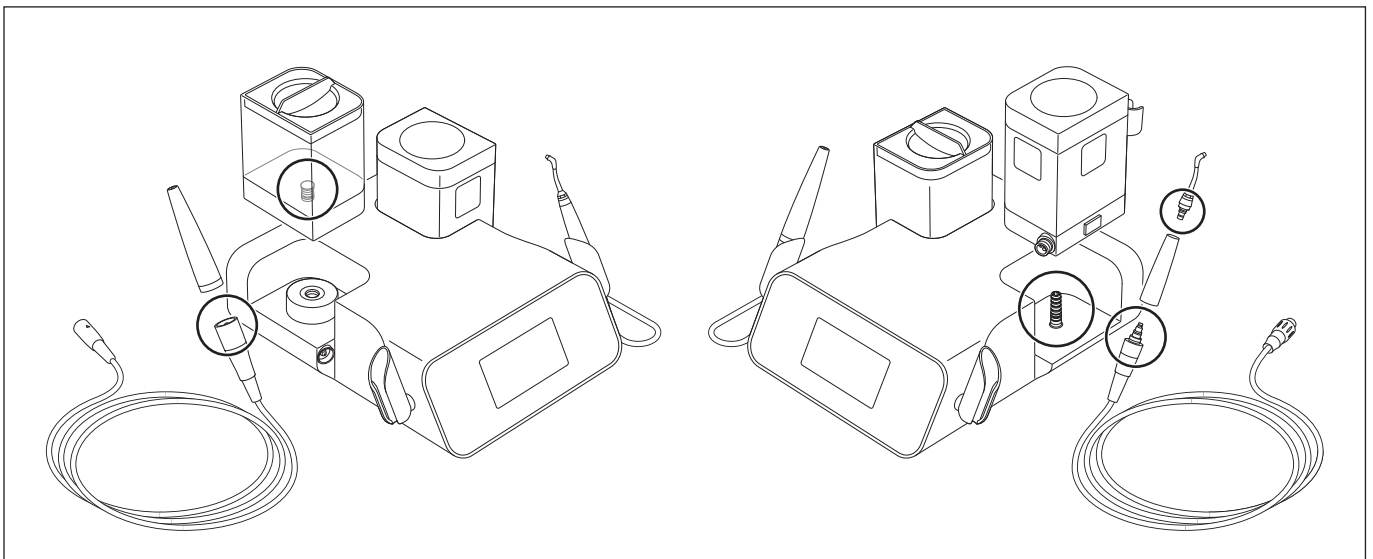
- Stockez le produit dans un endroit protégé des effets nuisibles de la pression atmosphérique, de la température, de la ventilation, de la lumière du soleil, de la poussière, du sel et de l'atmosphère sulfurique.

10 Suivi et entretien

10-1 Entretien des joints

Procédez à l'entretien pour réduire l'usure des joints sur les pièces cibles et prévenir des fuites d'eau ou d'air.

* Pour remplacer le joint du capuchon de la chambre, contactez votre distributeur NSK agréé.




ULTRASONIC

10-1-1 Cordon de la pièce à main

- 1) Retirez le cordon de la pièce à main du boîtier de contrôle.
- 2) Retirez le joint à remplacer à l'aide d'une aiguille, etc.
- 3) Placez le nouveau joint sur les rainures où était placé l'ancien joint.

* Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur les joints de rechange.

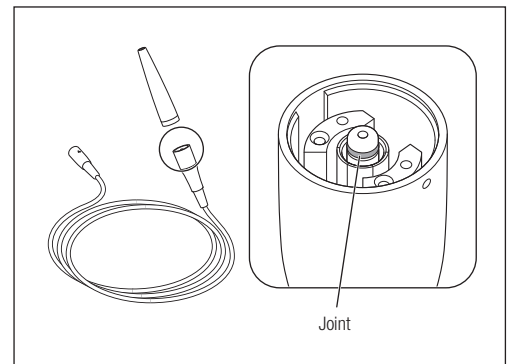
REF Y1003546



10-1-2 Tuyau de la pièce à main (pour utilisation prophylactique ou parodontale)

- 1) Retirez le tuyau de la pièce à main à poudre et de la chambre.
 - 2) Retirez les joints de la fiche de connexion du tuyau de la pièce à main à l'aide d'une aiguille, etc. Si de la poudre est présente sur les rainures du joint, nettoyez-les avant d'y placer un nouveau joint.
 - 3) Placez les nouveaux joints sur les rainures où étaient placés les anciens joints.
 - 4) Appliquez une goutte de l'huile pour turbine fournie et étalez-la avec le doigt.
- * Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur les joints de rechange.

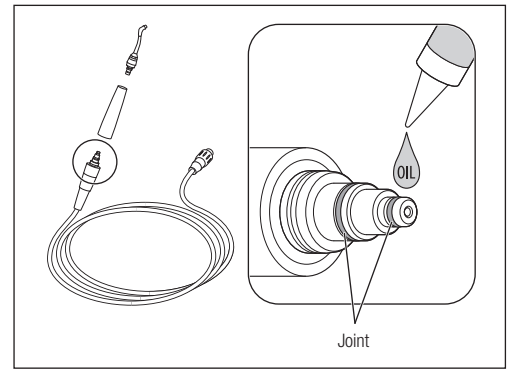REF Y1003500




ATTENTION ⚠ L'absence de lubrification du joint du côté de la pièce à main peut endommager le raccord et rendre difficile la rotation du raccordement de la pièce à main. Cela peut aussi provoquer une fuite d'eau.

10-1-3 Embout (pour utilisation prophylactique ou parodontale)

- 1) Faites passer l'embout à l'intérieur de la clé dynamométrique anneau fournie, desserrez-le et retirez-le de la pièce à main.
 - 2) Retirez les joints de la base de l'embout à l'aide d'une aiguille, etc. S'il y a de la poudre dans les rainures du joint, nettoyez-les avant d'insérer le nouveau joint.
 - 3) Placez les nouveaux joints sur les rainures où étaient placés les anciens joints.
- * Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur les joints de rechange.

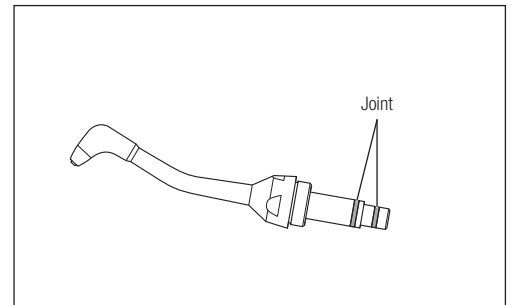
REF Y1003501



10-1-4 Bouteille d'irrigation

- 1) Retirez les joints du joint de la bouteille d'irrigation à l'aide d'une aiguille, etc.
 - 2) Placez les nouveaux joints sur les rainures où étaient placés les anciens joints.
- * Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur les joints de rechange.

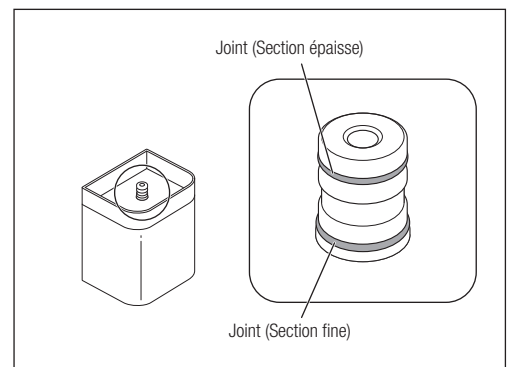REF Y1003544




ATTENTION ⚠ Les joints présentent des épaisseurs différentes. Assurez vous de les disposer sur l'emplacement correct.

10-1-5 Connecteur de base de la chambre

- 1) Retirez les joints du connecteur de base de la chambre à l'aide d'une aiguille, etc.
 - 2) Placez les nouveaux joints sur les rainures où étaient placés les anciens joints.
- * Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur les joints de rechange.

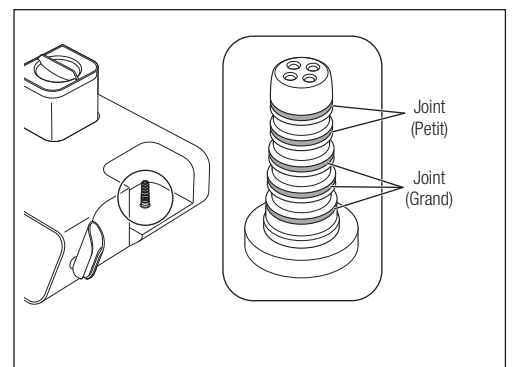
REF Y1003435




ATTENTION ⚠ Étant donné que la taille des joints diffère, veillez à les remettre à l'emplacement correct.

10-2 Remplacement de la pompe d'irrigation

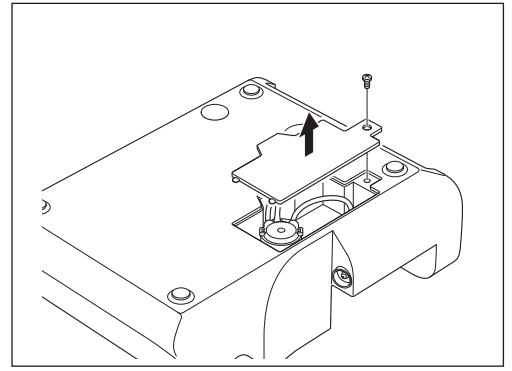
- 1) Retirez la bouteille d'irrigation, la chambre, le cordon d'alimentation, le cordon de la pièce à main et la pédale du boîtier de contrôle.
- 2) Retournez le boîtier de contrôle. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis du couvercle de la pompe d'irrigation, puis retirez le couvercle.



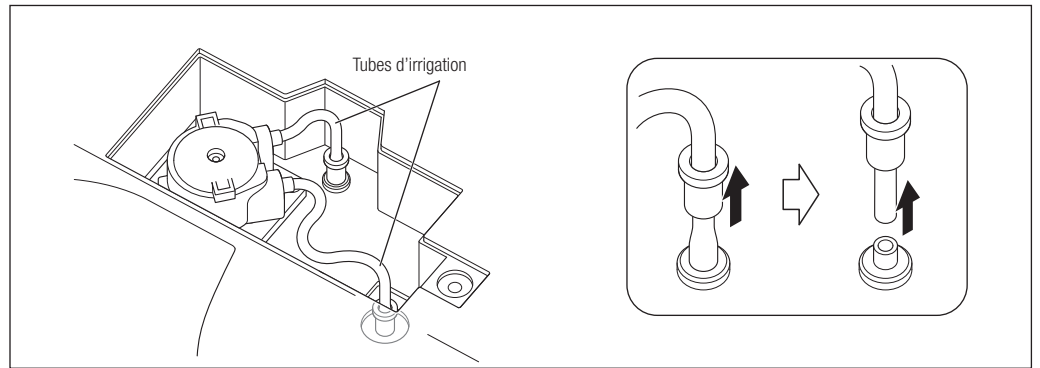
- 3) Retirez les deux tubes d'irrigation du boîtier de contrôle.



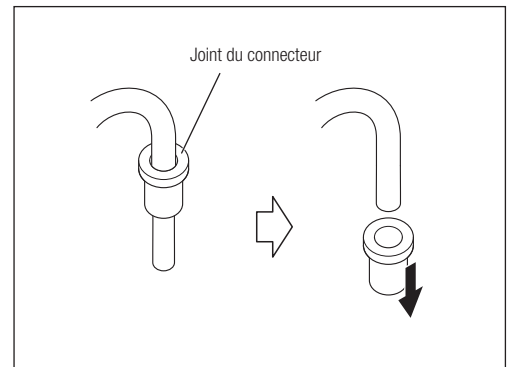
- 4) Enlevez le joint du connecteur du tube d'irrigation. Ne le jetez pas. Vous pouvez utiliser ce joint sur la pompe d'irrigation de rechange.



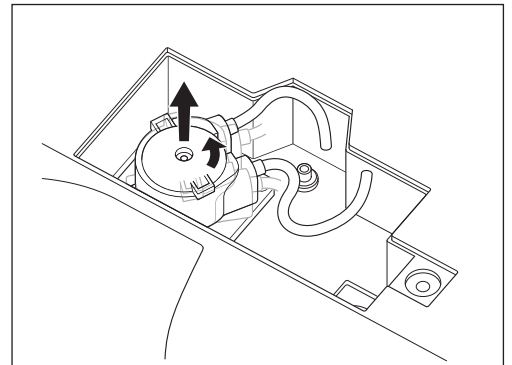
- 5) Tournez la pompe d'irrigation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic se produise et retirez-la.



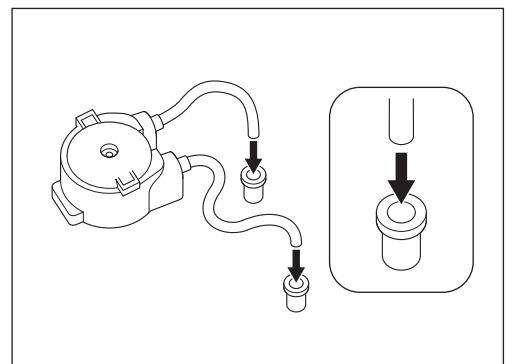
- 6) Installez les joints de connecteur sur les tubes d'irrigation de la nouvelle pompe d'irrigation (option). Assurez-vous que le joint est correctement orienté.



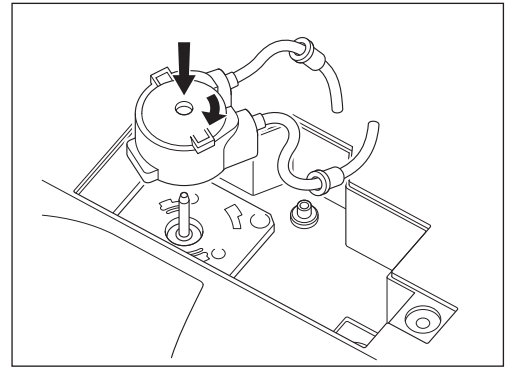7) Insérez la nouvelle pompe d'irrigation (option) sur l'arbre d'entraînement. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic se produise.



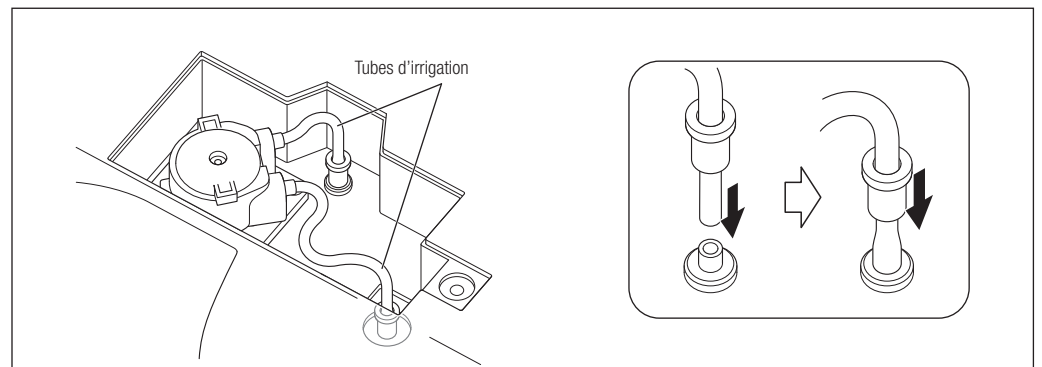8) Insérez le tube d'irrigation. Appuyez fermement sur le joint du connecteur dans le boîtier de contrôle jusqu'à ce qu'il soit totalement en place.




9) Alignez le crochet du couvercle de la pompe d'irrigation et le trou sur le boîtier de contrôle. Installez le couvercle.

* Pour plus de détails sur la pompe d'irrigation en option, référez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange ».

ATTENTION

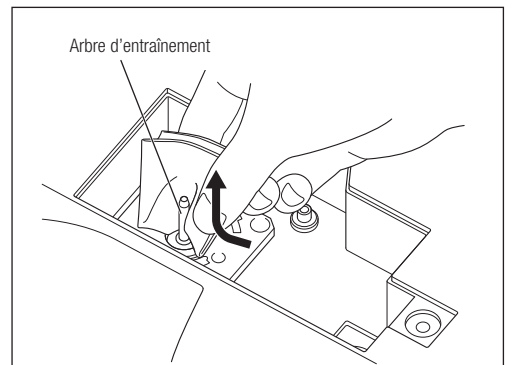- Avant de remplacer la pompe d'irrigation, essuyez l'excès d'eau sur la pompe et l'arbre d'entraînement. Un arbre d'entraînement et des rouleaux humides peuvent être glissants et provoquer un défaut de fonctionnement.
- Essuyez les saletés et l'eau de l'arbre d'entraînement en allant du bas vers le haut.
- Insérez la pompe d'irrigation de rechange bien droit sur l'arbre d'entraînement, lentement et délicatement de manière à éviter d'endommager les rouleaux de la pompe.
- Une fois la pompe d'irrigation remplacée, faites fonctionner ce produit pendant environ 10 secondes avec le mode d'irrigation réglé sur bouteille et le volume d'irrigation réglé au maximum de sorte que le tube d'irrigation s'adapte à la nouvelle pompe.
- Assurez-vous que le tube d'irrigation ne soit ni entortillé, ni tordu. Si le tube est disposé de façon incorrecte, l'alimentation en eau d'irrigation peut être compromise.
- Assurez-vous que le tube n'est pas coincé sous le couvercle lorsque vous refermez le couvercle de la pompe d'irrigation.
- Utilisez exclusivement une pompe d'irrigation destinée aux modèles Varios Combi Pro. Les autres pompes ne peuvent pas être utilisées.



- REMARQUE**
- Nettoyez périodiquement l'arbre d'entraînement avec un tissu non pelucheux humidifié d'alcool désinfectant. Des débris sur l'arbre d'entraînement peuvent compromettre le bon fonctionnement de la pompe.
 - La pompe est un élément d'usure. Si le volume d'irrigation baisse de manière significative, remplacez la pompe.

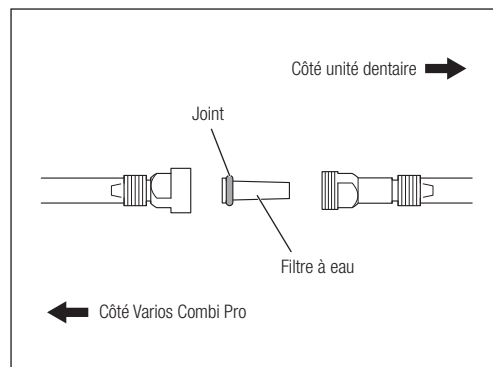
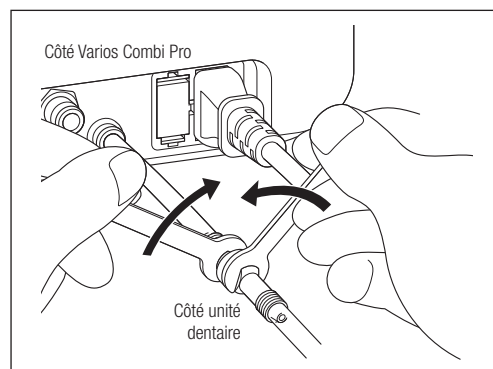
10-3 Remplacement du filtre à eau

Si vous utilisez de l'eau du robinet, changez le filtre à eau une fois par an. S'il vous semble que le volume d'eau a diminué, remplacez le filtre à eau avant que l'année ne se soit écoulée.

- 1) Fermez la vanne d'alimentation en eau de l'unité dentaire.
- 2) Disposez le boîtier de contrôle sur un tissu, etc. en cas de fuite d'eau.
- 3) Utilisez deux clés pour écrou (5 x 8) et tournez-les dans le sens indiqué sur la figure.
- 4) Retirez le boîtier du filtre à eau et enlevez le filtre à eau.

- 5) Placez le nouveau filtre à eau avec le joint du côté du Varios Combi Pro et réinstallez-le en suivant à rebours la procédure de démontage.

* Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur le filtre à eau en option.




ATTENTION

- Veillez à ce que l'orientation du filtre à eau soit correcte. Sinon, le filtre ne fonctionnera pas efficacement.

10-4 Vérification du filtre à air

Lorsque vous observez des symptômes tels qu'un niveau de puissance réduit ou des engorgements fréquents dus à la poudre, purgez l'eau en appuyant sur l'extrémité du filtre à air placée sur la face inférieure du boîtier de contrôle.

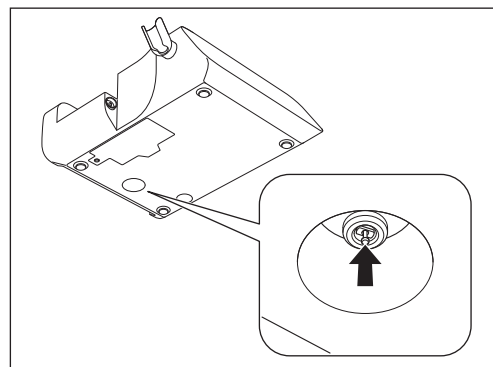
Si un niveau de puissance satisfaisant ne peut pas être atteint du fait d'une utilisation prolongée, il se peut que l'élément Varios Combi Pro soit obstrué. Si cela se produit, contactez votre distributeur NSK agréé.



10-5 Remplacement du fusible.

- 1) Mettez l'interrupteur principal hors tension.
- 2) Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise murale.
- 3) Retirez le porte-fusible à l'arrière du boîtier de contrôle tout en maintenant les pointes poussées vers l'intérieur aux deux extrémités.
- 4) Remplacez le fusible par un nouveau.
- 5) Remettez en place le porte-fusible.

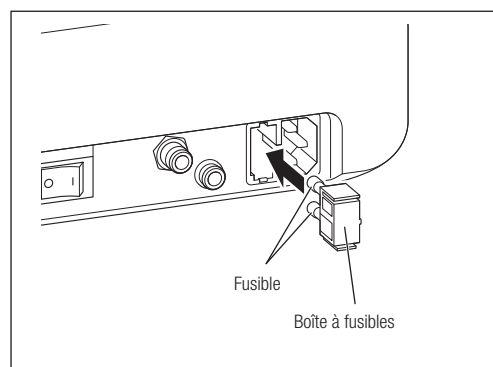* Reportez-vous à « 21 Liste des pièces de rechange » pour plus de détails sur les fusibles de rechange.



ATTENTION

- Utilisez exclusivement des fusibles recommandés par NSK. Une panne peut se produire si d'autres fusibles sont utilisés.
- Si un fusible grille sans que vous puissiez en établir la raison, contactez votre distributeur NSK agréé.

REMARQUE • Si le porte-fusible est difficile à extraire, utilisez un outil muni d'une pointe dure pour pousser les pointes tout en retirant le porte-boîte à fusibles.

11 Autres fonctions

11-1 Programme initialisé (réglages d'usine)

La valeur de réglage de chacun des modes est sauvegardée dans le produit. Ces valeurs peuvent être réinitialisées pour les ramener aux réglages d'usine.


- 1) Mettez l'interrupteur principal sous tension tout en appuyant sur le bouton B de la pédale.
- 2) « Clr » s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque « Clr » s'affiche, relâchez le bouton B de la pédale, puis appuyez sur le bouton D pour démarrer l'initialisation.
- 3) « Fin » s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'initialisation est achevée. Une alarme sonore retentit et le produit démarre en mode normal. (Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages initiaux.)

| | Mode ultrasons | Mode poudre | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Mode prophylactique | Mode parodontal |
| Sélection du mode ultrasons | Parodontal | - | |
| Niveau de puissance. | 1 | 1 | 1 |
| Mode d'irrigation | Bouteille | - (fixé sur eau du robinet) | |
| Volume d'irrigation | 10 | 10 | 10 |

ULTRASONIC

11-2 Utilisation du support pour inserts (pour insert à ultrasons, option)

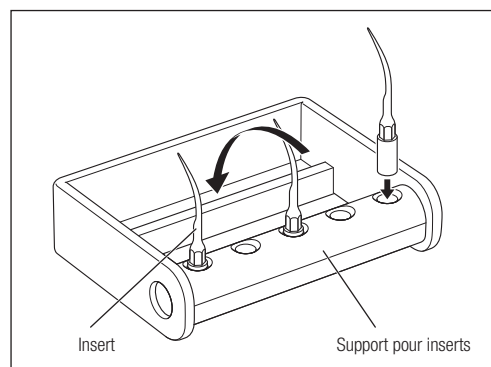- Utilisez le support pour inserts pour ranger les inserts après les avoir retiré de la pièce à main.
- Le support pour inserts peut être stérilisé en autoclave. Jusqu'à 5 inserts peuvent être stérilisés simultanément. Faites tourner le support dans le sens indiqué par la flèche pour que les inserts soient fixés au cadre destiné à la stérilisation.



11-3 Réglage du niveau d'eau de base

Le niveau d'eau de base peut être réglé en fonction de la pression de l'alimentation en eau dans l'environnement d'utilisation. Si le volume d'irrigation est trop important ou trop réduit lorsqu'il est réglé à l'aide des boutons de volume d'irrigation, suivez la procédure suivante pour ajuster le niveau d'eau de base.

- 1) Mettez l'interrupteur principal du boîtier de contrôle sous tension.
- 2) Appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement pour choisir le mode poudre.
- 3) Appuyez sur le bouton de sélection du mode d'irrigation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Des alarmes sonores retentissent et l'écran LCD passe en mode d'ajustement du niveau d'eau de base.
- 4) Appuyez sur les boutons de volume d'irrigation (▲/▼) pour modifier le niveau d'eau de base (« L1 » à « L5 »). Ajustez le niveau si nécessaire.
- 5) Appuyez sur le bouton de sélection du mode d'irrigation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour sauvegarder le niveau sélectionné. Une alarme sonore retentit et le niveau sélectionné est sauvegardé, puis l'écran LCD revient en mode normal.



Mode de réglage du niveau d'eau de base [Niveau d'eau 4]

Référence

| Niveau | Volume d'eau |
|----------------------|--------------------------|
| L5 | Important ↑ Réduit |
| L4 (valeur initiale) | |
| L3 | |
| L2 | |
| L1 | |

REMARQUE • Le niveau d'eau de base revient à « L4 » lorsque le produit est réinitialisé avec les réglages d'usine. Paramétrez de nouveau le niveau d'eau de base après une initialisation.

12 Contrôles d'entretien périodique

Référez-vous à la fiche ci-dessous et procédez à des contrôles d'entretien périodique tous les trois mois. Contactez votre revendeur NSK agréé si des anomalies sont détectées.

| Points à vérifier | Détails |
|---|--|
| Pièce à main à ultrasons | Faites fonctionner la pièce à main à ultrasons afin de vérifier qu'elle ne génère pas une vibration, un bruit, une chaleur, etc. anormaux. Vérifiez également que la LED s'allume et que l'eau coule |
| Capuchon de la chambre | Vérifiez qu'il ne présente pas d'éraflures importantes ou profondes. |
| Vaporisateur de poudre | Après avoir rempli la chambre de poudre, pulvérisez-la dans un crachoir, etc. et vérifiez qu'elle ne fuie d'aucuns raccords autres que celui de l'insert. |
| Vaporisateur d'eau | Après avoir rempli la chambre de poudre, pulvérisez-la dans un crachoir, etc. et vérifiez que l'eau ne fuie d'aucuns raccords autres que celui de l'insert. |
| Chambre | Vérifiez qu'elle ne présente pas d'éraflures importantes ou profondes. |
| Fixation/retrait de la pièce à main, du tuyau de la pièce à main, de la bouteille d'irrigation et de la chambre | Vérifiez qu'ils peuvent être fixés et retirés sans problème. S'ils sont desserrés ou trop serrés, les joints peuvent être endommagés ou détériorés. Remplacez les joints. (Reportez-vous à « 10 Suivi et entretien ».) |

Informations de sécurité complémentaires :

Conformément à la norme IEC 62353 (EN 62353), un contrôle de sécurité électrique doit être réalisé tous les deux ans suivant la procédure de test OM-DE0947EN.

Ce test de sécurité périodique étant exclusivement limité aux installateurs dentaires professionnels formés et agréés sous la supervision de NSK, contactez votre distributeur NSK agréé.

13 Code d'erreur

« Error » et un code d'erreur s'affichent sur l'écran LCD du boîtier de contrôle si ce produit cesse de fonctionner du fait d'un dysfonctionnement, d'une pression excessive, d'un débranchement ou d'une opération incorrecte. Appuyez sur le bouton D de la pédale pour effectuer le nouveau contrôle d'erreurs. Si le problème n'est pas détecté, l'état d'erreur est désactivé et le produit peut fonctionner. Si le code d'erreur est toujours affiché, reportez-vous au tableau ci-dessous et prenez les mesures nécessaires pour résoudre le problème.

| Code d'erreur | Description de l'erreur | Vérification/solution |
|---------------|--|---|
| 0 | Erreur système | Mettez le boîtier de contrôle à nouveau sous tension. Contactez votre distributeur NSK agréé si l'erreur persiste. |
| 1 | Tension anormale 24 V | |
| 2 | Tension anormale 12 V | |
| 3 | Intensité anormale au niveau de la pompe | Vérifiez le raccordement de la pompe d'irrigation. Si le problème persiste, contactez votre distributeur NSK agréé. |
| 4 | Pression d'air anormale | Vérifiez la pression d'air à l'admission. Si le problème persiste, contactez votre distributeur NSK agréé. |
| 5 | Tension anormale du chauffage | Mettez le boîtier de contrôle à nouveau sous tension. Contactez votre distributeur NSK agréé si l'erreur persiste. |
| 6 | Intensité anormale au niveau du chauffage | |
| 7 | Température anormale au niveau du chauffage | Vérifiez le circuit d'eau et l'alimentation en eau du boîtier de contrôle. Laissez le boîtier de contrôle refroidir avant de l'utiliser. Contactez votre distributeur si l'erreur persiste. |
| 8 | Communication anormale avec la pédale. | Vérifiez le raccordement de la pédale. Si le problème persiste, contactez votre distributeur NSK agréé. |
| 9 | Anomalie de la pièce à main à ultrasons | Vérifiez le raccordement de la pièce à main. Si le problème persiste, contactez votre distributeur NSK agréé. |
| 12 | Communication anormale avec le capteur tactile | Mettez l'interrupteur principal hors tension puis sous tension. Si le problème persiste, contactez votre distributeur NSK agréé. |
| 13 | Erreur d'autovérification de l'unité à ultrasons | |
| 14 | Erreur système de l'unité à ultrasons | |

14 Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter votre distributeur NSK agréé.

(Mode ultrasons et mode poudre)



| Problème | Cause | Solution |
|--|---|---|
| Bip | L'alimentation a été activée pendant que la pédale de contrôle était enfoncée. | Relâchez la pédale de contrôle et mettez l'interrupteur principal sous tension. |
| | Chaleur excessive du boîtier de contrôle | Arrêtez l'utilisation et laissez le boîtier de contrôle refroidir. |
| Le pavé tactile ne réagit pas correctement ou le bouton actionné n'est pas reconnu correctement. | La calibration est légèrement perturbée par de l'électricité statique, un bruit exogène, etc. | Mettez l'interrupteur principal hors tension puis sous tension. |
| | Le bouton n'a pas été touché au centre. | Touchez le centre du bouton. |
| <ul style="list-style-type: none"> L'eau n'arrête pas de s'écouler Le niveau d'eau ne peut pas se régler | Dompage ou usure du joint. | Suivez la procédure « 10-1-5 Connecteur de base de la chambre » pour remplacer le joint. |
| | Des corps étrangers peuvent empêcher l'écoulement de l'eau. | Effectuez l'autonettoyage. Si le symptôme ne disparaît toujours pas, contactez votre distributeur NSK agréé. |

(Mode ultrasons)



| Problème | Cause | Solution |
|--|---|---|
| Des alarmes sonores retentissent et l'affichage de mode ultrasons (P/E/G) et « ULTRASONIC » clignotent en alternance lorsque le bouton D de la pédale de contrôle est enfoncé. | Le capteur intégré au support de la pièce à main est sale et détecte par erreur l'installation de la pièce à main. | Essayez le capteur pour le nettoyer. |
| Vibration nulle/réduite | La fiche de connexion du cordon d'alimentation CA n'est pas branchée à la prise murale ou la prise murale n'est pas alimentée en électricité. | Vérifiez le raccordement. |
| | Le fusible a grillé. | Reportez-vous à « 10-5 Remplacement du fusible. » et remplacez le fusible. |
| | L'insert n'est pas fermement serré. | Faites tourner la clé dynamométrique (CR-10) jusqu'à entendre un déclic et que toute rotation supplémentaire soit impossible. Si le problème persiste, remplacez la clé dynamométrique (CR-10) car elle peut être usée. |
| | Insert usé. | Remplacez l'insert. |
| | Les parties à visser de la pièce à main et de l'insert ne sont pas propres. | Essayez-les pour les nettoyer. |
| | Les parties à visser de la pièce à main sont usées du fait d'une longue utilisation. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| | La puissance n'a pas été correctement réglée pour l'insert. | Réglez la puissance de sorte qu'elle n'excède pas le niveau maximal indiqué dans le guide de puissance des inserts ou sur l'étiquette du boîtier de l'insert. |
| | La pédale est débranchée. | Branchez correctement la fiche de connexion du cordon de la pédale. |
| | Panne de l'appareil vibratoire de la pièce à main. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| | Panne des composants internes de la pédale. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| L'insert est déformé ou cassé. | Le capteur intégré au support de la pièce à main est sale et détecte par erreur l'installation de la pièce à main. | Essayez le capteur pour le nettoyer. |
| L'insert se détache. | La puissance n'a pas été correctement réglée pour l'insert. | Réglez la puissance de sorte qu'elle n'excède pas le niveau maximal indiqué dans le guide puissance insert ou sur l'étiquette du boîtier de l'insert. |
| | L'insert n'est pas fermement serré. | Serrez l'insert jusqu'à ce que la clé dynamométrique (CR-10) produise un déclic. |

| Problème | Cause | Solution |
|--|--|---|
| Bruit provenant de la pièce à main. | La puissance n'a pas été correctement réglée pour l'insert. | Réglez la puissance de sorte qu'elle n'excède pas le niveau maximal indiqué dans le guide de puissance insert ou sur l'étiquette du boîtier de l'insert. |
| | L'insert n'est pas fermement serré. | Faites tourner la clé dynamométrique (CR-10) jusqu'à entendre un déclic et que toute rotation supplémentaire soit impossible. Si le problème persiste, remplacez la clé dynamométrique (CR-10) car elle peut être usée. |
| | Panne de vibration dans la pièce à main ou le boîtier de contrôle. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| La pièce à main surchauffe. | La puissance n'a pas été correctement réglée pour l'insert. | Réglez la puissance de sorte qu'elle n'excède pas le niveau maximal indiqué dans le guide puissance insert ou sur l'étiquette du boîtier de l'insert. |
| | L'insert n'est pas fermement serré. | Faites tourner la clé dynamométrique (CR-10) jusqu'à entendre un déclic et que toute rotation supplémentaire soit impossible. Si le problème persiste, remplacez la clé dynamométrique (CR-10) car elle peut être usée. |
| | Les parties à visser de la pièce à main et de l'insert ne sont pas propres. | Essayez-les pour les nettoyer. |
| | Les parties à visser de la pièce à main sont usées du fait d'une longue utilisation. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| | Le volume d'irrigation est insuffisant ou l'irrigation s'est interrompue. | Effectuez une irrigation avec un volume adapté. |
| | Panne de vibration dans la pièce à main ou le boîtier de contrôle. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| Irrigation nulle ou instable (lorsque la bouteille est utilisée) | Le tube d'irrigation est tordu. | Redressez le tube d'irrigation tordu. |
| | Il est temps de remplacer la pompe d'irrigation. | Remplacez-la par une nouvelle pompe d'irrigation (reportez-vous à « 10-2 Remplacement de la pompe d'irrigation »). |
| Alimentation en eau nulle ou faible. (lorsque l'eau de ville est utilisée) | Le boîtier de contrôle n'est pas alimenté en eau. | Vérifiez le circuit d'eau de manière à alimenter en eau le boîtier de contrôle. Pression de l'alimentation en eau : 0,1 à 0,3 MPa |
| | Le volume d'irrigation est réglé sur « 0 ». | Définissez un volume d'irrigation adapté en utilisant le réglage du volume d'irrigation. |
| | L'alimentation en eau peut être instable lorsque le volume d'irrigation est insuffisant. | Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Augmentez le volume d'irrigation adapté en utilisant le réglage du volume d'irrigation. |
| | Le filtre à eau est obstrué par des corps étrangers. | Remplacez le filtre à eau par un nouveau. |
| Fuite d'eau. | Le tube d'irrigation n'est pas raccordé correctement. | Insérez bien complètement le tube d'irrigation dans le connecteur prévu à cet effet. |
| | Le joint ou le cordon de la pièce à main sont usés ou endommagés. | Remplacez le joint par un nouveau en suivant la procédure décrite dans « 10-1-1 Cordon de la pièce à main ». |
| | Le circuit d'eau dans le boîtier de contrôle est endommagé. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| La LED de la pièce à main ne s'allume pas. | La pièce à main n'est pas branchée correctement au cordon de la pièce à main. | Insérez bien complètement la pièce à main dans le cordon de la pièce à main. |
| | Panne dans le boîtier de contrôle. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |

(Mode poudre)



| Problème | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Des alarmes sonores retentissent et « POWDER » et l'icône dent clignotent en alternance lors que les boutons D ou B de la pédale sont enfoncés. | Le capteur intégré au support de la pièce à main est sale et détecte par erreur l'installation de la pièce à main. | Essayez le capteur pour le nettoyer. |
| | La chambre n'est pas fixée correctement. | Fixez la chambre correctement jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore de confirmation. |
| Un signal sonore de confirmation n'est pas audible ou l'icône indiquant le mode prophylactique ou le mode parodontal ne s'affiche pas lorsque la chambre est fixée. | Panne dans le boîtier de contrôle (débranchement). | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |

| Problème | Cause | Solution |
|--|--|--|
| L'alimentation en air et en poudre ne fonctionne pas. Ou bien l'alimentation en air et en poudre fonctionne, mais la pression n'est pas assez forte et la puissance de nettoyage est également faible. | L'intérieur de l'insert est obstrué par de la poudre. | Remplacez l'insert. |
| | L'intérieur de la pièce à main est obstrué par de la poudre. | Nettoyez la base de l'embout avec le fil de nettoyage (court) fourni et son extrémité avec la lime de nettoyage. De plus, nettoyez l'intérieur de la pièce à main avec le fil de nettoyage (long). Si la poudre et l'air ne circulent pas après avoir procédé au nettoyage décrit ci-dessus, procédez à un nettoyage par ultrasons avec de l'eau chaude. (Reportez-vous à « 9-3 Nettoyage par ultrasons (hebdomadaire) ».) |
| | L'intérieur de la chambre est obstrué par de la poudre. | Éliminez la poudre de l'intérieur de la chambre en suivant les procédures décrites dans « 9-1-5 Chambre et tuyau de la pièce à main ». |
| | La poudre s'est partiellement agglomérée avec de l'eau, etc. dans le passage de l'air. | Éliminez la poudre de l'intérieur du passage en suivant les procédures décrites dans « 9-1-4-2 Autonettoyage ». |
| | Le récipient de la poudre a été laissé ouvert, exposant la poudre à l'air. | Jetez la poudre et utilisez-en une nouvelle. |
| | L'air d'admission est mélangé à de l'eau. | Ouvrez le filtre dans le circuit d'alimentation en air pour purger le compresseur et vérifiez que de l'eau ne s'est pas accumulée dans le filtre à air et l'écoulement du compresseur. |
| | L'élément Varios Combi Pro est obstrué. | Contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| De l'eau fuit entre la pièce à main et le tuyau de la pièce à main. | Le joint est endommagé. | Remplacez le joint au niveau du raccord de la pièce à main, appliquez une goutte d'huile pour turbine fournie et étalez-la avec votre doigt. (Reportez-vous à « 10-1-2 Tuyau de la pièce à main (pour utilisation prophylactique ou parodontale) ».) |
| Impossible de retirer la chambre parce le bouton de verrouillage ne peut pas s'enfoncer | Le bouton est verrouillé | Suivez la procédure de « Déblocage du bouton de verrouillage » dans « 9-1-5 Chambre et tuyau de la pièce à main » pour débloquer le verrouillage. Si le problème ne disparaît pas, contactez votre distributeur NSK agréé.* |
| Impossible de fermer le capuchon de la chambre. | De la poudre a adhéré aux filetages de la chambre et/ou du capuchon de la chambre. | Nettoyez les filetages du capuchon de la chambre (reportez-vous à « Nettoyage du capuchon de la chambre » dans « 9-1-5-2 Nettoyage et désinfection »). |

* Ne peut pas être réparé par un dépanneur, etc.

15 Caractéristiques

<Boîtier de contrôle>

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modèle | Varios Combi Pro |
| Source d'alimentation | CA 100 V - 240 V 50/60 Hz |
| Fréquence de fonctionnement | 28 - 32 kHz |
| Alimentation | 78 - 98 VA |
| Sortie maximale | 11 W |
| Pression de l'alimentation en air | 0,55 - 0,75 MPa (5,5 - 7,5 kgf/cm ²) |
| Pression de l'alimentation en eau | 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm ²) |
| Volume de la bouteille | 400 ml |
| Volume d'irrigation (Mode ultrasons) | 5,0 - 70,0 ml/min (Mode d'irrigation : bouteille/eau du robinet, pression de l'alimentation en eau : 0,2 MPa) |
| Dimensions | L225 × P290 × H162 mm (bouteille d'irrigation et chambres comprises) |
| Poids | 2,7 kg (sans la bouteille d'irrigation et la chambre) |

<Pédale>

| | |
|--------------------|---|
| Modèle | FC-79 |
| Longueur du cordon | 2,5 m |
| Dimensions | L204 × P157 × H128 mm (support compris) |
| Poids | 415 g (support compris) |

<Pièce à main à ultrasons>

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Modèle | VA2-LUX-HP |
| Longueur du cordon | 1,8 m (sans le connecteur) |
| Type d'oscillateur | Type piézoélectrique |
| Lumière | LED blanche |
| Dimensions | φ20 × 103 mm (sans le cordon) |
| Poids | 54 g (sans le cordon) |

<Pièce à main à poudre>

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | PROPHY-HP/PERIO-HP |
| Longueur du tuyau | 1,8 m (sans le connecteur) |
| Dimensions | φ16 × 107 mm (sans le cordon) |
| Poids | 33 g (sans le cordon) |

| | Température | Humidité | Pression atmosphérique |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| Environnement d'utilisation*2 | 0 - 40 °C | 35 - 75 %*1 | - |
| Environnement de stockage et de transport | -10 - 50 °C | 10 - 85 % | 500 - 1 060 hPa |

*1 Sans condensation

*2 L'utilisation de ce produit dans des conditions autres que celles spécifiées ci-dessous peut provoquer un dysfonctionnement.

16 Classification de l'équipement

- Type de protection contre les chocs électriques :
 - Équipement de classe 1
- Degré de protection contre les décharges électriques :
 - Partie appliquée de type B : ⚡ (Parties appliquées : Insert à ultrasons, pièce à main à ultrasons, insert, pièce à main à poudre)
- Méthode de stérilisation ou de désinfection recommandée par le fabricant f:
 - Reportez-vous à 9. Entretien après usage
- Indice de protection contre l'infiltration de liquides, comme détaillé dans l'édition actuelle de l'IEC 60529 :
 - Pédale : IPX1 (protégée contre les gouttes d'eau tombant verticalement)
- Niveau de sécurité de l'appareil en présence de mélanges anesthésiants inflammables avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde d'azote :
 - Équipement NON adapté pour une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.
- Utilisation :
 - Opération continue

17 Principe de fonctionnement




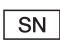





























Mode ultrasons

Un signal électrique sinusoïdal est émis par le générateur à une fréquence ultrasonique ($f > 20$ kHz). Ce signal est appliqué à la céramique piézoélectrique située à l'intérieur du transducteur. Cette céramique piézoélectrique traduit ce signal en vibrations mécaniques. Ces vibrations sont à la même fréquence ultrasonique que le signal électrique. Les vibrations mécaniques sont transmises à l'extrémité distale du transducteur. L'insert « TIP », attaché à l'extrémité distale du transducteur, vibre alors à une fréquence ultrasonique et permet d'atteindre l'objectif visa par cet équipement.

Mode poudre

Vaporise de la poudre à l'aide de la pression de l'air pour nettoyer la surface de la dent.

18 Symboles

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Ce produit peut être stérilisé dans un autoclave à 135 °C. |  | Code en lots |
|  | Le présent appareil est conforme aux directives européennes CE « Directives pour les appareils médicaux 93/42/EEC ». |  | Numéro de série |
|  | Représentant autorisé dans la communauté européenne. |  | Attention |
|  | Cf. Manuel d'utilisation. |  | Température |
|  | Protégé contre l'égouttement. |  | Eau potable du robinet |
|  | Marquage sur l'extérieur des pièces de l'équipement qui comprend les émetteurs RF ou qui s'applique à l'énergie électromagnétique RF pour le diagnostic ou traitement. |  | Lampe / éclairage / illumination |
|  | Ne pas réutiliser. |  | Vérification visuelle |
|  | Conservez au sec. |  | Bain à ultrasons |
|  | Stérilisation EOG |  | Limitation de l'humidité |
|  | Le code DataMatrix de GS1 est un dispositif unique d'identification. |  | Limitation de la pression atmosphérique |
|  | Ce produit peut être nettoyé à l'aide d'un laveur-désinfecteur. |  | Référence catalogue (Code de commande) |
|  | Fabricant. |  | Dispositif médical |
|  | La mise au rebut du présent appareil et de ses accessoires doit se faire conformément aux directives sur la mise au rebut des appareils électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/EU). |  | Identifiant unique des dispositifs |
|  | Partie appliquée de type B. |  | Représentant autorisé pour la Suisse |
|  | Utilisation à l'intérieur uniquement. |  | Date de fabrication |
|  | Limitation de la température. |  | Importateur |
|  | À utiliser par. | | |

19 Garantie

Les produits NSK sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel. NSK se réserve le droit d'analyser et de déterminer la cause de tout problème. La garantie est annulée si l'instrument n'a pas été utilisé correctement ou à d'autres fins que celles stipulées ou qu'il a été modifié par du personnel non qualifié ou que des pièces non NSK ont été installées. Les pièces de rechange sont disponibles pendant sept ans après la fin de la production du modèle.

20 Liste des pièces en option

| Modèle | REF | Remarques |
|---|------------|--|
| Multi Jauge MG-4H | Z109400 | |
| Support pour inserts | Z221080 | |
| Set parodontal | Y1003042 | Pièce à main à poudre (utilisation parodontale) Chambre (utilisation parodontale) Tuyau de la pièce à main (utilisation parodontale) Poudre Perio-Mate Insert Perio-Mate (40 pièces) Extracteur d'insert Perio-Mate |
| Pièce à main pour la poudre (utilisation parodontale) | T1077001 | |
| Chambre (utilisation parodontale) | U1135019 | |
| Tuyau de la pièce à main (utilisation parodontale) | T1053001 | |
| Embout (utilisation parodontale) | T1077012 | |
| Poudre Perio-Mate | Y900938 | 2 flacons d'une capacité respective de 160 g |
| Insert Perio-Mate | Y1002741 | 40 pièces |
| Extracteur d'insert Perio-Mate | T1043751 | |
| Détendeur de pression d'eau | U1135093 | |
| CLA-20 | ZA11900108 | Adaptateur de nettoyage pour pièce à main parodontale/pièce à main prophylactique |

21 Liste des pièces de rechange

| Modèle | REF | Remarques |
|--|----------|--|
| FC-79 | Z1256001 | Pédale |
| Ensemble de bouteille Varios Combi Pro | U1135017 | Bouteille et capuchon (bouteille d'irrigation, capuchon de bouteille d'irrigation) |
| Capuchon de bouteille Varios Combi Pro | U1135116 | Capuchon seul (capuchon de bouteille d'irrigation) |
| Bouteille Varios Combi Pro (bouteille seule) | U1135099 | Bouteille seule (bouteille d'irrigation) |
| Jeu de joints (Bouteille d'irrigation) | Y1003544 | Un joint épais et un joint fin |
| Joint | Y1003546 | 1 pour le cordon de la pièce à main |
| Jeu de joints (Connecteur de base de la chambre) | Y1003435 | |
| Jeu de joints (Tuyau de la pièce à main) | Y1003500 | Inclus un joint épais et un joint mince Parties communes à usage prophylactique et Perio |
| Jeu de joints (Embout) | Y1003501 | Inclus un joint épais et un joint mince Parties communes à usage prophylactique et Perio |
| Joint | Y1003545 | Pour le capuchon de la chambre |
| Cordon de la pièce à main | E351054 | |
| Pièce à main à ultrasons | E351050 | |
| Boîtier de stérilisation | Z1035001 | Pour les parties ultrasoniques |
| Clé dynamométrique (CR-10) | Z221076 | |
| Ensemble de filtre à eau | U1135078 | |
| Filtre à eau | U387042 | |
| Clé pour écrou (5 x 8) | Y1001301 | 2 |
| Pompe d'irrigation | U1135079 | Joint du connecteur exclu |
| FLASH pearl | Y900698 | 4 flacons d'une capacité respective de 300 g |
| Set prophylactique | Y1003771 | Pièce à main à poudre (pour utilisation prophylactique) Chambre (pour utilisation prophylactique) Tuyau de la pièce à main (pour utilisation prophylactique) FLASH pearl (5 sachets) Joint de rechange |
| Chambre (pour utilisation prophylactique) | U1135018 | |
| Tuyau de la pièce à main (pour utilisation prophylactique) | T1051001 | |
| Pièce à main à poudre (utilisation prophylactique) | T1074001 | |
| Embout (pour utilisation prophylactique) | T1074012 | |
| Capuchon de la chambre | U1135089 | Capuchon seul |
| Fil de nettoyage | T798092 | Pour l'extrémité distale et l'intérieur de l'embout |
| Lime de nettoyage Courte | T798095 | Pour la base de l'embout |

| Modèle | REF | Remarques |
|---------------------------|-------------|--|
| Lime de nettoyage Longue | T798091 | Pour les parties autres que celles mentionnées ci-dessus |
| Brosse de nettoyage | T798093 | |
| Outil de déverrouillage | U1135256 | |
| Clé dynamométrique anneau | T1074601 | |
| Huile pour turbine | Z016112 | |
| Tuyau d'air | D0914406036 | |
| Fusible | D1202220010 | Valeur nominale T2AH250V |

22 Mise au rebut du produit

Afin d'éviter tout risque pour la santé des opérateurs en charge de la mise au rebut d'équipements médicaux ainsi que tout risque de contamination environnementale qui pourrait en résulter, le chirurgien ou le dentiste doit obligatoirement confirmer que l'équipement est stérile. Demandez à des entreprises spécialisées agréées pour la mise au rebut de déchets industriels sous contrôle spécifique de se charger de la mise au rebut du produit.

23 Informations CEM (compatibilité électromagnétique)

| Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques | | |
|---|----------------------------|---|
| Le produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du produit doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. | | |
| Tests d'émission | Conformité | Environnement électromagnétique - conseils |
| Émissions Rf CISPR11/EN55011 | Groupe 1 Classe B | Ce produit utilise l'énergie radiofréquence uniquement pour son fonctionnement interne. En conséquence, ses émissions Rf sont très basses et ne causeront probablement pas d'interférences dans les équipements électroniques situés à proximité. |
| Émissions Rf CISPR11/EN55011 | Groupe 1 Classe B | Le produit peut être utilisé dans tous les établissements, dont les établissements à usage domestique et ceux qui sont directement connectés au réseau public d'électricité basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques. |
| Émissions harmoniques EN/IEC61000-3-2 | Classe A (exception 120 V) | |
| Les fluctuations de voltage/ émissions fluctuantes EN/IEC61000-3-3 | Conforme (exception 120 V) | |


| Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique | | | |
|---|--|--|--|
| Le produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du produit doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. | | | |
| Test d'immunité | Niveau de test EN/IEC60601 | Niveau de conformité | Environnement électromagnétique - conseils |
| Décharge électrostatique (ESD) EN/IEC61000-4-2 | ±(2,4) 6 kV contact ±(2,4) 8 kV air | ±(2,4) 6 kV contact ±(2,4) 8 kV air | Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si les sols sont revêtus d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins de 30 %. |
| Explosion/courant transitoire rapide EN/IEC61000-4-4 | ±2kV pour les lignes d'alimentation en énergie ±1kV pour les lignes d'alimentation/de sortie | ±2kV pour les lignes d'alimentation en énergie ±1kV pour les lignes d'alimentation/de sortie | La qualité de l'alimentation principale doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. |
| Surintensité EN/IEC61000-4-5 | ±1kV circuit(s) vers circuit(s) ±2kV circuit(s) vers terre | ±1kV circuit(s) vers circuit(s) ±2kV circuit(s) vers terre | La qualité de l'alimentation principale doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. |
| Chutes de tension, courtes interruptions et variations de voltage sur les lignes d'alimentation EN/IEC61000-4-11 | <5 % Ut (>95 % de chute dans Ut) pour 0,5 cycles 40 % Ut (60 % de chute dans Ut) pour 5 cycles 70 % Ut (30% de chute dans Ut) pour 0,5 cycles <5 % Ut (>95 % de chute dans Ut) pendant 5 secondes | <5 % Ut (>95 % de chute dans Ut) pour 0,5 cycles 40 % Ut (60 % de chute dans Ut) pour 5 cycles 70 % Ut (30% de chute dans Ut) pour 0,5 cycles <5 % Ut (>95 % de chute dans Ut) pendant 5 secondes | La qualité de l'alimentation principale doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du produit nécessite un fonctionnement continu pendant les coupures de courant, il est recommandé d'alimenter le produit depuis une alimentation électrique sans coupure ou une pile. |

| | | | |
|---|------|------|---|
| Champ magnétique à fréquence industrielle (50/60 Hz) EN/IEC61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | Les champs magnétiques de la fréquence de puissance doivent se situer à des niveaux caractéristiques d'un site typique se trouvant dans un environnement commercial ou hospitalier typique. |
|---|------|------|---|

REMARQUE : 'Ut' est la tension de l'alimentation secteur avant l'application du niveau de test.

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Le produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du produit doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

| Test d'immunité | Niveau de test EN/IEC60601 | Niveau de conformité | Environnement électromagnétique - conseils |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| RF conduit EN/IEC61000-4-6 | 3Vrms 150 kHz à 80 MHz | 3Vrms | <p>La distance séparant les équipements de communication RF mobiles et portables et un quelconque composant du produit (câbles compris) ne peut pas être inférieure à la distance de séparation recommandée et calculée à partir de l'équation applicable pour la fréquence du transmetteur.</p> <p>Distance de séparation recommandée $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz</p> <p>Où P est le niveau de puissance maximal du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur et (d) la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ des transmetteurs RF fixes telles que déterminées par une étude(a) de site électromagnétique doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquence(b). Il se peut qu'il y ait des interférences à proximité des équipements arborant le symbole suivant :</p>  |
| RF émis EN/IEC61000-4-3 | 3V/m 80 MHz à 2,5 GHz | 3V/m | |

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

a : Les intensités de champs provenant de transmetteurs fixes, tels que des stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, les radios amateur, la diffusion radio AM et FM et la diffusion TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux transmetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesuré à l'endroit où le produit est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le produit doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des performances anormales sont constatées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que réorienter ou repositionner le produit.

b : Au-delà de la gamme de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité de champ doit être inférieure à 3V/m.

| Câbles et accessoires | Longueur maximale | Compatible avec |
|---------------------------|--------------------|--|
| Cordon de la pièce à main | 2,0 m (non blindé) | Émissions RF, CISPR11 Émissions harmoniques, (exception 120 V) |
| Cordon de la pédale | 2,5 m (non blindé) | Fluctuations de tension/émissions de scintillement, (exception 120 V) |
| Cordon d'alimentation CA | 3,0 m (non blindé) | Décharge électrostatique (ESD) : Explosion/courant transitoire rapide : Surtension : Chutes de tension, courtes interruptions et variations de voltage sur les lignes d'alimentation : Fréquence de puissance (50/60 Hz) champ magnétique : RF conduit : RF émis : |
| | | Classe B/Groupe 1 EN/IEC61000-3-2 EN/IEC61000-3-3 EN/IEC61000-4-2 EN/IEC61000-4-4 EN/IEC61000-4-5 EN/IEC61000-4-11 EN/IEC61000-4-8 EN/IEC61000-4-6 EN/IEC61000-4-3 |

Distances de séparation recommandées entre l'équipement de communication RF mobile et portable et le produit

Le produit est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du produit peuvent contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communications RF portables et mobiles (transmetteurs) et le produit comme recommandé ci-dessous, conformément à la puissance de sortie maximale des équipements de communications.

| Puissance de sortie nominale maximale du transmetteur | Distance de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur m | | |
|---|--|--|---|
| | 150 kHz à 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 80 MHz à 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Pour les transmetteurs dont la puissance maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation « d » recommandée en mètres (m) être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, où « P » est la puissance maximale du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur.

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.




Le agradecemos que haya adquirido Varios Combi Pro. Lea este manual de funcionamiento detenidamente antes de utilizar el aparato para comprender las instrucciones de funcionamiento y las directrices de mantenimiento y cuidado a fin de poder utilizarlo durante muchos años de forma correcta. Conserve este manual de funcionamiento en un lugar de fácil acceso para los usuarios para cualquier futura consulta. A continuación, se muestra el número de referencia del manual de funcionamiento de los productos relacionados:

| Título del manual de funcionamiento | Número del manual de funcionamiento |
|---|-------------------------------------|
| Cleaning Adaptor CLA-20 For Prophy Handpiece / For Perio Handpiece | OM-DE0906MA |

– Contenidos –

| | |
|--|-----|
| 1. Usuario y uso previsto | 163 |
| 2. Precauciones para uso y operación | 163 |
| 3. Lista de accesorios | 167 |
| 4. Nombres de los componentes | 168 |
| 5. Instalación | 170 |
| 6. Verificación antes del tratamiento | 173 |
| 7. Uso del modo Ultrasónica | 174 |
| 8. Uso del modo Powder | 178 |
| 9. Mantenimiento posterior al uso | 183 |
| 10. Cuidado y mantenimiento | 201 |
| 11. Otras funciones | 206 |
| 12. Comprobaciones periódicas de mantenimiento | 206 |
| 13. Código de error | 207 |
| 14. Resolución de problemas | 207 |
| 15. Características técnicas | 210 |
| 16. Clasificación del equipamiento | 211 |
| 17. Principio de funcionamiento | 211 |
| 18. Símbolos | 212 |
| 19. Garantía | 212 |
| 20. Lista de piezas opcionales | 213 |
| 21. Lista de piezas de recambio | 213 |
| 22. Eliminación del producto | 214 |
| 23. Información CEM (Información de compatibilidad electromagnética) | 214 |

* Algunas secciones están indicadas con la(s) siguiente(s) marca(s) para mostrar el (los) modo(s) relacionados con la sección.

| | |
|--|--|
|  ULTRASONIC | Descripción sobre el modo Ultrasónica |
|  POWDER PROPHY | Descripción sobre el modo Prophy en el modo Powder |
|  POWDER PERIO | Descripción sobre el modo Perio en el modo Powder |



1 Usuario y uso previsto

Usuario: dentista, higienista dental

Uso previsto: limpieza de la superficie dental, eliminación de placa o cálculo dental, resección dental, expansión o limpieza del conducto radicular, eliminación de sustancias extrañas, obturación del conducto radicular, mejora de adhesión de restauraciones fijas, incisión o extracción de tejido periodontal

2 Precauciones para uso y operación

- Lea detenidamente estas advertencias y utilice el dispositivo sólo para el fin diseñado y en la forma indicada.
- Las instrucciones de seguridad tienen el fin de evitar cualquier posible peligro que pudiera provocar daños personales o en el dispositivo. Las instrucciones de seguridad se clasifican de la siguiente forma, de acuerdo con la gravedad del riesgo.

| Clasificación | Grado de peligro y gravedad |
|--|--|
|  ADVERTENCIA | En caso de que no se respeten las instrucciones de seguridad, existe el peligro de poder provocar serios daños personales o daños al dispositivo. |
|  PRECAUCIÓN | En caso de que no se respeten las instrucciones de seguridad, existe el peligro de poder provocar pequeños o moderados daños personales o daños en el dispositivo. |
| IMPORTANTE | Información general de producto destacada para evitar un mal funcionamiento del producto y una reducción de su rendimiento. |

⚠ ADVERTENCIA

<Modo Ultrasónica y modo Powder>



- No manipule el cable de potencia con las manos mojadas. Entrar en contacto con la electricidad con las manos mojadas puede provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga siempre el aparato lejos de sustancias explosivas y de materiales inflamables.
- Si el producto se sobrecalienta o huele a quemado, apague la fuente de alimentación inmediatamente y desenchufe el cable. Póngase en contacto con su distribuidor NSK autorizado.
- Utilice un enchufe con toma de tierra para evitar descargas eléctricas.
- No trabaje cerca de pacientes con marcapasos, ya que existe el peligro de que pudieran verse afectados.
- El funcionamiento normal de este sistema se produce en un ambiente con una temperatura de entre 0 y 40 °C (32 - 104 °F), una humedad del 35 - 75 % RH y sin condensación de humedad en la unidad de control. Utilizar el aparato sin tener en cuenta estos límites podría provocar un mal funcionamiento.
- Tenga cuidado de no tirar agua o líquido desinfectante en la unidad de control. Esto podría causar cortocircuitos y provocar un incendio y/o descarga eléctrica.
- Encender y apagar repetidamente el interruptor principal puede hacer que se funda un fusible.
- Si se depositan gotas de agua, sustancias químicas, disolventes o antisépticos en la unidad de control, la pieza de mano, el cable de pieza de mano no apantallado, la manguera de la pieza de mano, etc., límpielos con un paño inmediatamente. De lo contrario, puede producirse decoloración o deformación.
- Conéctese a una red pública de agua que proporcione agua potable a una presión de entre 0,1 y 0,3 MPa. El uso de una presión de agua incorrecta puede tener como resultado un suministro de agua insuficiente, inoperancia o un mal funcionamiento.
- Utilice un descalcificador de agua, etc. para reducir la dureza del agua. Un agua muy dura puede provocar depósitos minerales o de cal en el circuito de agua que pueden producir problemas como un nivel de agua insuficiente, dificultades de funcionamiento o averías. Cuando lo haga, utilice un tubo de agua con un filtro de agua para evitar que se produzcan averías en el dispositivo provocadas por la presencia de material extraño en el agua de grifo. Consulte el apartado "10-3 Cambio del filtro de agua" para sustituir el filtro de agua de forma correcta.
- No esterilice mediante luz ultravioleta. Eso podría causar decoloración en la pieza de mano.
- Sostenga la clavija al extraer el cable de pieza de mano no apantallado o la manguera de la pieza de mano. Al extraer el cable o la manguera estos pueden desconectarse o sufrir daños.

<Modo Ultrasónica>



- Utilice siempre el suministro de agua. Un suministro de agua insuficiente tiene como resultado un sobrecalentamiento, lo que puede provocar daños en la superficie de los dientes del paciente.
- No permita que el paciente o el asistente miren directamente al LED de la pieza de mano ni al cable de la pieza de mano no apantallado. Si lo hacen, podrían sufrir daños en la vista.

<Modo Powder>



- No utilice el producto en los siguientes pacientes.
 - Pacientes con complicaciones médicas o alergias.
 - Pacientes que presenten problemas previos (por ejemplo, trastornos cardíacos, pulmonares o renales, o presión arterial alta).
 - Pacientes con afecciones respiratorias.
 - Pacientes con bolsas periodontales patológicamente profundas (6 mm o más) o con lesiones en la mucosa. Si se dirige durante mucho tiempo el chorro hacia el tejido blando o cerca de las glándulas salivales, puede entrar aire de polvo en estos y provocar enfisema.
 - Pacientes con úlceras graves en los órganos digestivos.
 - Pacientes con disfunción renal.
 - Pacientes con afecciones pulmonares o cardíacas o problemas de ventilación.
 - Pacientes con una válvula cardíaca artificial o articulación artificial.
 - Pacientes que tengan alergia. Dependiendo de la constitución del paciente, este puede desarrollar síntomas de alergia o estomatitis en casos excepcionales. En caso de observar estos síntomas, deje inmediatamente de utilizar el producto y solicite atención médica.
- Durante el uso, tanto el operario como el asistente deben llevar gafas y máscaras de protección en todo momento. Además, se debe aspirar y recoger el polvo expulsado durante el uso continuamente. En caso de que el polvo entre en contacto con los ojos, es preciso aclarar de inmediato los ojos con agua abundante y consultar a un oftalmólogo.
- Ajuste el suministro de presión del aire a 0,55 - 0,75 MPa y utilice aire limpio y seco. El uso de una presión incorrecta puede tener como resultado una presión de pulverización (potencia) insuficiente, inoperancia o un mal funcionamiento.

<Modo Prophy>



- No pulverice directamente sobre el cemento del conducto radicular, esmalte descalcificado, empaste o margen de una prótesis o empaste.

⚠ ADVERTENCIA

<Modo Perio>



- Cuando utilice el modo Perio, preste atención para no provocar enfisema al pulverizar aire que contenga polvo en las bolsas periodontales. Si se produce enfisema por el tratamiento con el modo Perio, deje inmediatamente de utilizar el producto y solicite atención médica.
- No utilice el producto en los siguientes pacientes. Si se utiliza en bolsas periodontales para estos pacientes, el producto puede provocar bacilemia.
 - Pacientes con endocarditis.
 - Pacientes con enfermedades contagiosas.
 - Pacientes con enfermedades inmunodeficientes (neutropenia, granulocitopenia, agranulocitosis, diabetes, hemofilia).
 - Pacientes en tratamiento de radiación, quimioterapia o administración de antibióticos.
- No utilice el producto en los siguientes pacientes. (Excluyendo el uso sin la punta de la boquilla)
 - Pacientes con lesiones o anomalías en la cavidad oral.
 - Pacientes con hiperemia, hemorragia o inflamación en la cavidad oral.
 - Pacientes con tendencia a desarrollar inflamación o úlceras en la membrana mucosa oral.
- Utilice este producto únicamente para el mantenimiento tras un tratamiento periodontal básico. No lo utilice nunca para otros fines.
- Utilice el modo Perio únicamente sobre bolsas periodontales que reúnan las siguientes condiciones:
 - Bolsas periodontales provocadas por una enfermedad de las encías.
 - Bolsas periodontales de menos de 6 mm que se hayan sometido a un tratamiento periodontal básico.
- Compruebe la profundidad de las bolsas periodontales mediante una sonda de medición o radiografía antes de utilizar el producto.
- Utilice únicamente el polvo de limpieza indicado. El uso de otros polvos puede causar un mal funcionamiento o un rendimiento inferior, puede dañar la sustancia ósea y la dentina o provocar enfisema. NSK declina cualquier responsabilidad por problemas producidos como consecuencia del uso de polvos distintos al indicado.
- La punta de la boquilla para el modo Perio incluida en el paquete del producto es un elemento estéril. Cuando se utilicen estos productos, tenga en cuenta las instrucciones siguientes:
 - La punta de la boquilla es un producto desechable. No vuelva a utilizarla ni la esterilice de nuevo ya que podría producirse una rotura de la misma o una infección en el paciente.
 - Antes de usarla, compruebe que el paquete NO esté abierto ni dañado. Si el paquete está abierto o dañado, no utilice la punta de la boquilla, ya que podría estar dañada o contaminada.
 - Tenga en cuenta la fecha de caducidad que figura en el paquete de la punta de la boquilla. No utilice productos caducados ya que podría producirse una rotura de los mismos o una infección en el paciente.

⚠ PRECAUCIÓN

<Modo Ultrasónica y modo Powder>



- Lea este manual de funcionamiento antes de su uso para comprender plenamente las funciones del producto y consérvelo para futuras consultas.
- Al utilizar el producto, piense siempre en la seguridad del paciente.
- El usuario final será responsable de cualquier sentencia referente al uso de este producto en un paciente.
- Los usuarios son responsables del control de operación, mantenimiento e inspección continua de este producto.
- Este equipo es únicamente para uso en interiores.
- Mantenga la unidad de control sobre una superficie plana.
- No intente desmontar el producto ni modificar el mecanismo excepto cuando así lo recomiende NSK en este manual de funcionamiento.
- Evite que el producto sufra cualquier impacto. No deje que se le caiga el producto. La varilla de vidrio y la pieza de mano podrían dañarse si la pieza de mano Ultrasónica se cae.
- Los especialistas y demás personal de la zona deben llevar protectores oculares y máscara cuando utilicen este producto.
- En caso de que este producto funcione de forma anómala, detenga inmediatamente su funcionamiento y póngase en contacto con su distribuidor NSK autorizado.
- Presione la pieza de mano de forma segura y completamente sobre el cable de pieza de mano no apantallado o la manguera de la pieza de mano al conectarlos.
- No esterilice con autoclave el cable de la pieza de mano no apantallado ni la manguera de la pieza de mano.
- No utilice agua muy ácida ni soluciones esterilizantes para limpiar o sumergir el producto.
- Este producto no se entrega esterilizado, a excepción de la punta de la boquilla (opcional), y debe ser esterilizado con autoclave antes de ser utilizado. Consulte “9-2 Esterilización” para obtener más información.
- Lleve a cabo comprobaciones de mantenimiento y funcionamiento regularmente.
- Si el producto lleva tiempo sin utilizarse, compruebe que funcione correctamente antes de usarlo con un paciente.
- Para evitar pérdidas de tiempo durante la operación, se recomienda tener a mano una unidad de repuesto por si ocurriera una avería durante el tratamiento.
- Sustituya siempre el fusible por otro con la misma calificación especificada.
- Este producto es un equipo médico eléctrico con calificación. La CEM (compatibilidad electromagnética) se describe en la documentación anexa.
- La instalación y uso de este producto requiere precauciones especiales con respecto a la CEM de acuerdo con la información de la CEM.
- Un equipo de comunicaciones de RF móvil y portátil puede afectar al equipo médico eléctrico. No utilice el equipo RF cerca del producto.
- El uso de ACCESORIOS, como piezas de mano y cables, que no sean los especificados por el fabricante, excepto las piezas de mano y cables vendidos por el fabricante de este producto como piezas de recambio para componentes internos, puede provocar un aumento de las EMISIONES y una disminución de la INMUNIDAD de este producto.
- Este producto no debe colocarse al lado o encima de otros equipos. Si es necesario utilizarlo cerca o sobre otros equipos, deberá comprobarse que este producto funciona de forma normal en la configuración en la que se utilizará.

⚠ PRECAUCIÓN

- El sistema puede presentar un mal funcionamiento cuando se utiliza en presencia de una onda de interferencia electromagnética. No instale el sistema cerca de ningún dispositivo que emita ondas magnéticas. Apague el interruptor principal de encendido del sistema cuando cerca del lugar de uso haya un dispositivo de oscilación Ultrasónica o un electrobisturí.
- Para mayor seguridad, instale la unidad de control en un lugar donde el cable de alimentación CA se pueda retirar fácilmente. (Es posible desconectar la unidad de control de la fuente de alimentación retirando el cable de alimentación CA.)

<Modo Ultrasónica>



- La temperatura de la superficie de la punta puede alcanzar los 65 °C si no se utiliza agua refrigerante. Utilice agua refrigerante para evitar que esto suceda.

<Modo Powder>

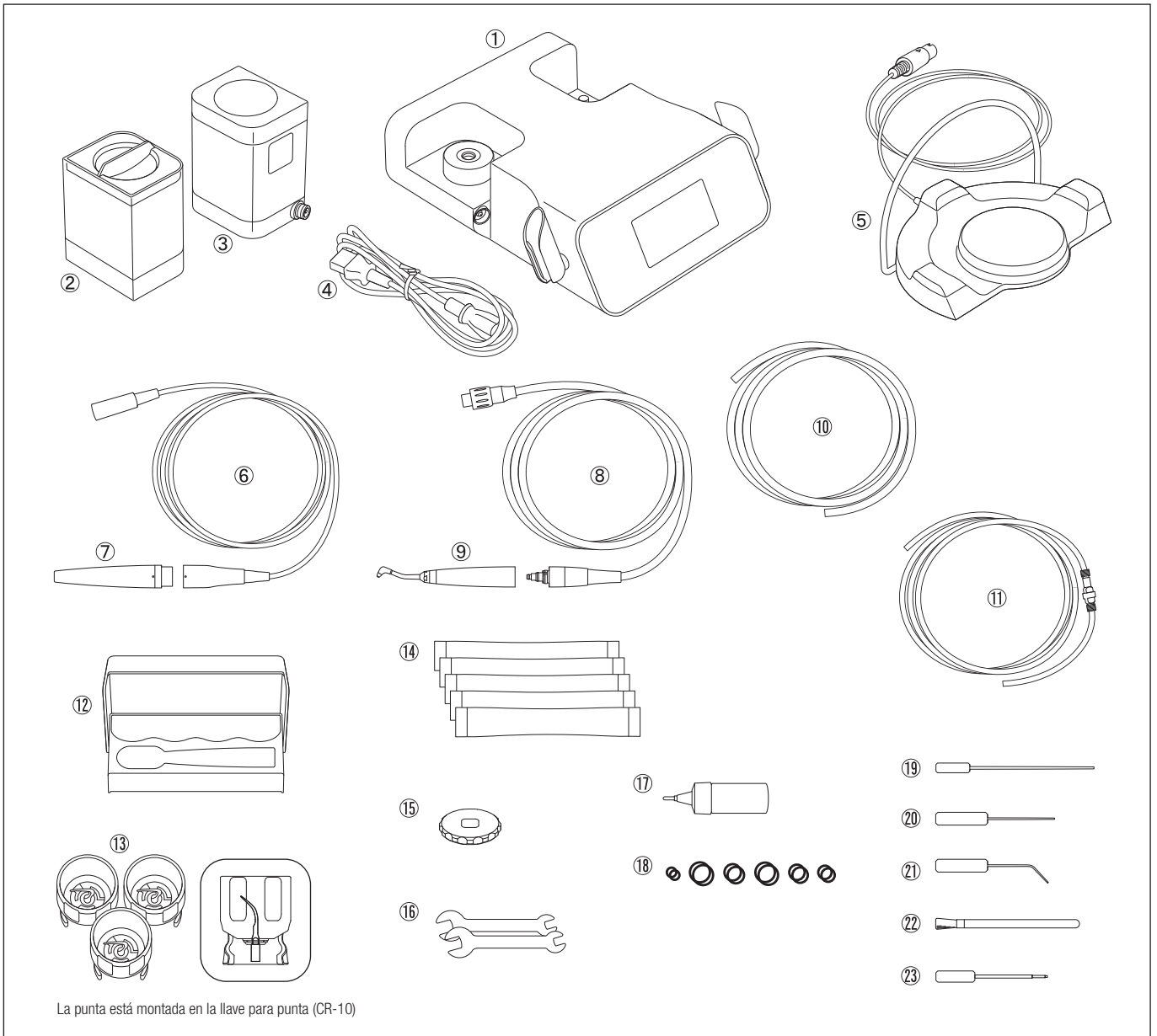


- Tenga especial cuidado para que el polvo de limpieza no entre en contacto con la zona de mucosas del paciente (ojos, nariz, etc.) aparte de las de la cavidad oral. Asimismo, cubra el rostro del paciente con una toalla, gafas de protección, etc. para evitar que le entre polvo de limpieza en los ojos.
 - * Si el paciente lleva lentillas, pídale que se las quite o que se ponga unas gafas de protección antes de iniciar el tratamiento.
- Antes de conectar la manguera de la pieza de mano, el depósito y la pieza de mano, o el depósito y la unidad de control, asegúrese de secar todo el agua que pueda haber en las conexiones de la manguera y el depósito con aire seco. Si no lo hace, puede entrar humedad en el suministro de aire, lo que provocará la solidificación del polvo de limpieza dentro del producto.
- La temperatura de la superficie de la pieza de mano Powder puede alcanzar los 50 °C en función del entorno de uso.
- Si se introduce demasiado polvo de limpieza en el depósito, al comenzar a usarlo es posible que no se pueda pulverizar la cantidad adecuada.
- El polvo se esparce fácilmente porque es muy fino. Realice la operación de llenado del depósito lentamente y asegúrese de evitar que el polvo se disperse.
- Los paquetes de polvo que llevan abiertos mucho tiempo pueden humedecerse y provocar obstrucciones. Utilice siempre polvo nuevo y seco. Cuando utilice polvo embotellado (opcional), asegúrese de cerrar bien la tapa de la botella después de utilizarla.
- Aplique al paciente vaselina o productos similares en los labios para evitar que se sequen o se le agrieten las comisuras.

IMPORTANTE

- No se necesita una formación especial para utilizar este dispositivo.
- La repetida esterilización en un autoclave puede hacer que la pieza de mano Ultrasónica se decolore debido al calor. Sin embargo, esto se debe a las propiedades del producto y no se trata de un problema en términos de calidad.
- Para evitar que el polvo obstruya los conductos, es necesario realizar una limpieza y mantenimiento periódicos de la cánula de aspiración, el eyector de saliva y el separador.

3 Lista de accesorios



La punta está montada en la llave para punta (CR-10)


| N.º | Nombre de la pieza | Cantidad | N.º | Nombre de la pieza | Cantidad |
|-----|---|----------|-----|--|----------|
| 1 | Unidad de control | 1 | 14 | FLASH pearl | 5 |
| 2 | Recipiente de irrigación | 1 | 15 | Llave de aro | 1 |
| 3 | Depósito (para uso de Prophy) | 1 | 16 | Llave inglesa (5x8) | 2 |
| 4 | Cable de potencia CA | 1 | 17 | Aceite para turbina | 1 |
| 5 | Interruptor del pedal | 1 | 18 | Junta tórica de repuesto | 6 tipos |
| 6 | Cable de pieza de mano no apantallado | 1 | 19 | Alambre boquilla (largo) | 1 |
| 7 | Pieza de mano Ultrasónica | 1 | 20 | Alambre boquilla (corto) | 1 |
| 8 | Manguera de la pieza de mano (para uso de Prophy) | 1 | 21 | Alambre para limpieza | 1 |
| 9 | Pieza de mano Powder (para uso de Prophy) | 1 | 22 | Escobilla para limpieza | 1 |
| 10 | Manguera de aire | 1 | 23 | Herramienta de desbloqueo | 1 |
| 11 | Tubo de agua | 1 | 24 | Manual de funcionamiento (este manual)* | 1 |
| 12 | Caja de esterilización | 1 | 25 | Guía de potencia de la punta* | 1 |
| 13 | Punta y llave para punta | 3 | 26 | Tarjeta de la punta* | 1 |
| | | | 27 | Guía rápida de funcionamiento de Varios Combi Pro* | 1 |

* No aparece en las ilustraciones anteriores

IMPORTANTE • El FLASH pearl y el polvo Perio Mate (opcional) utilizados en el modo Powder son referidos como “polvo” en este manual de funcionamiento a menos que se especifique lo contrario.

• Para usar el modo Perio, debe adquirirse por separado el kit Perio opcional. Consulte “20 Lista de piezas opcionales” para obtener más información sobre el kit Perio.

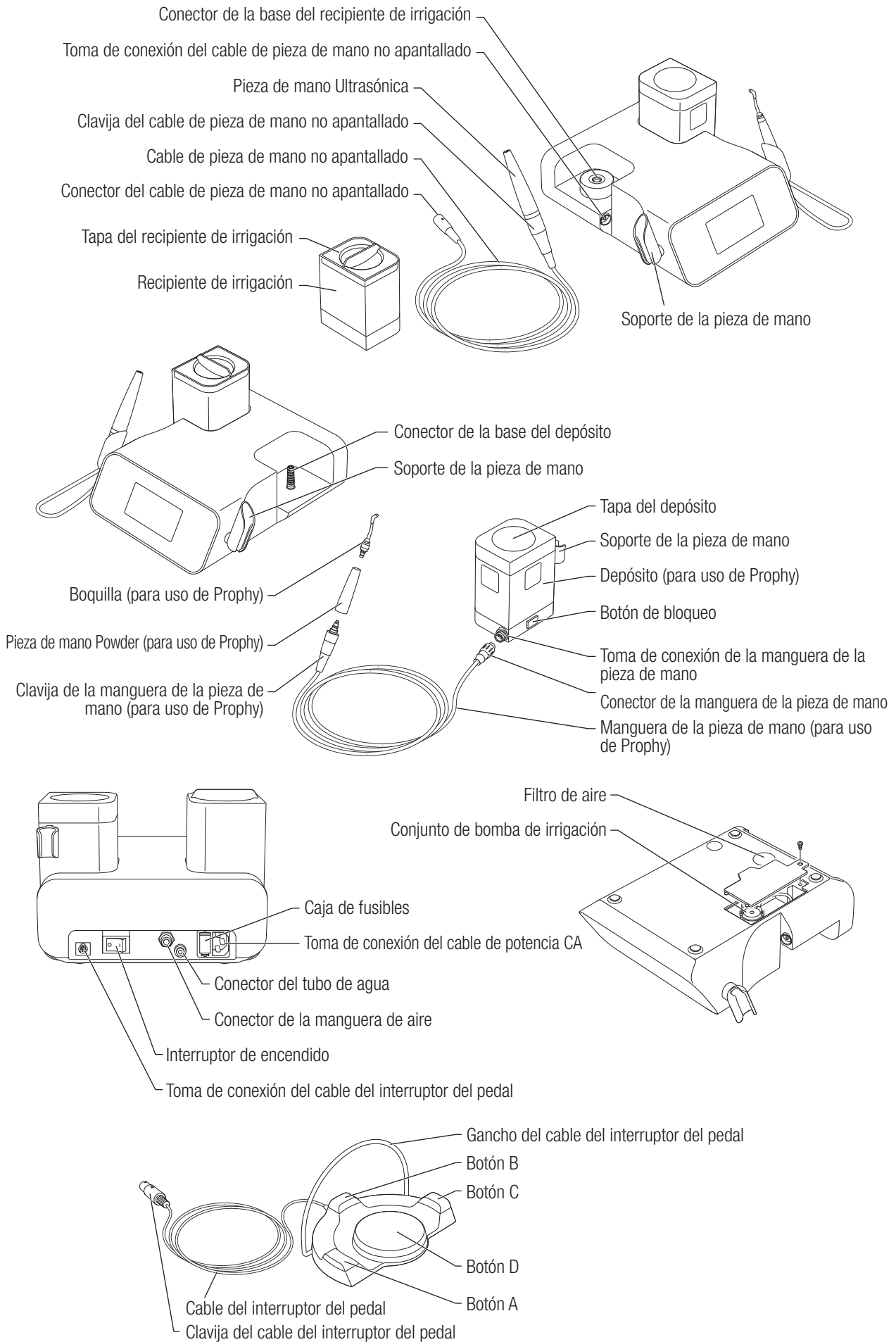4 Nombres de los componentes




4-1 Panel de funcionamiento



- (1) Tecla de selección del modo Ultrasónica
Permite alternar el modo Ultrasónica entre P (Perio), E (Endo) y G (General). El nivel más alto de potencia es G, seguido de E y P. Para cada modo se puede ajustar el nivel de potencia, el nivel de irrigación y el modo de irrigación.
- (2) Tecla de nivel de potencia
Permite ajustar el nivel de potencia utilizando las teclas ▲/▼.
- (3) Tecla de volumen de irrigación
Permite ajustar el volumen de irrigación utilizando las teclas ▲/▼.
- (4) Tecla de selección del modo de funcionamiento
Permite alternar entre “modo Ultrasónica” y “modo Powder”.
- (5) Tecla de autolimpieza
Permite iniciar la autolimpieza. Consulte “9-1-1-2 Autolimpieza” (pieza de mano Ultrasónica) o “9-1-4-2 Autolimpieza” (pieza de mano Powder) para obtener más información.
Modo Ultrasónica:
Permite pulverizar agua de grifo durante 15 segundos. A continuación, se pulveriza agua del recipiente de irrigación durante 30 segundos para limpiar la pieza de mano Ultrasónica.
Modo Powder:
Permite pulverizar aire y agua a la vez durante 10 segundos y, a continuación, se pulveriza solamente aire durante 35 segundos.
- (6) Tecla de selección del modo de irrigación
Permite alternar el modo de irrigación (agua del recipiente o de grifo) en el modo Ultrasónica. En el modo Powder siempre se utiliza agua de grifo.


Español

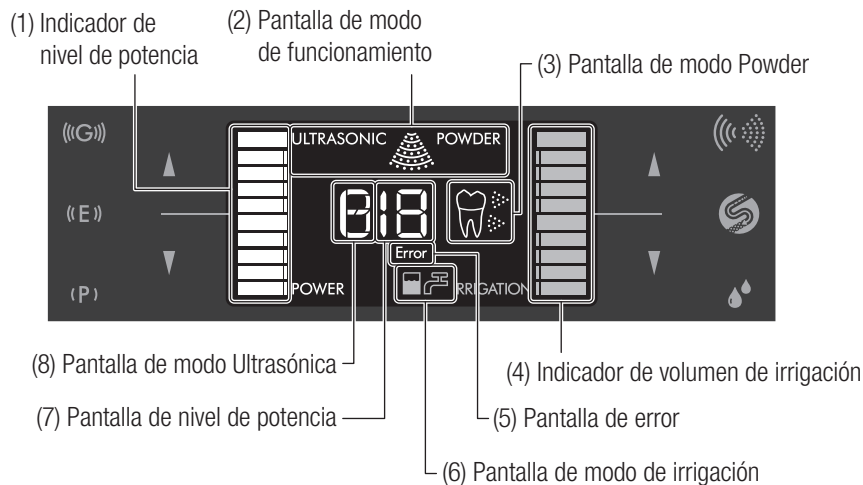4-2 Panel LCD



- (1) Indicador de nivel de potencia
Muestra la potencia actual en el indicador del diagrama de barras.
- (2) Pantalla de modo de funcionamiento
Muestra el modo de funcionamiento actual (Ultrasónica o Powder).
- (3) Pantalla de modo Powder
Muestra el depósito insertado (Prophy o Perio) (solo cuando se utiliza el modo Powder).
- (4) Indicador de volumen de irrigación
Muestra el nivel de irrigación seleccionado en el indicador del diagrama de barras.
- (5) Pantalla de error
Se muestra cuando se produce un error. Consulte “13 Código de error” para obtener más información.
- (6) Pantalla de modo de irrigación
Muestra el modo de irrigación (agua del recipiente o de grifo) en el modo Ultrasónica. En el modo Powder siempre se utiliza agua de grifo.
- (7) Pantalla de nivel de potencia
Muestra el nivel de potencia actual como un número.
- (8) Pantalla de modo Ultrasónica
Muestra el modo Ultrasónica actual (P/E/G).

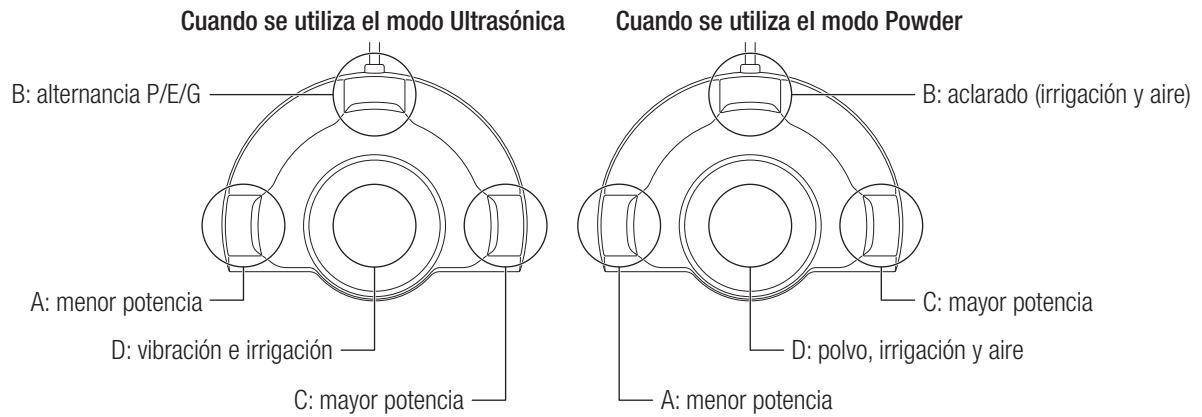4-3 Interruptor del pedal



Modo Ultrasónica

- A: Menor potencia
Permite reducir el nivel de potencia.
- B: Alternancia P/E/G (modo Ultrasónica)
Permite alternar el modo Ultrasónica en el orden de P (Perio) → E (Endo) → G (General) → P (Perio)... cada vez que se pulsa el botón.
- C: Mayor potencia
Permite aumentar el nivel de potencia.
- D: Vibración e irrigación
Permite vibrar e irrigar mientras se presiona el botón.

Modo Powder

- A: Menor potencia
Permite reducir el nivel de potencia.
- B: Aclarado (irrigación y aire)
Permite pulverizar agua y aire mientras se presiona el botón.
- C: Mayor potencia
Permite aumentar el nivel de potencia.
- D: Polvo, irrigación y aire
Permite pulverizar polvo, agua y aire mientras se presiona el botón.

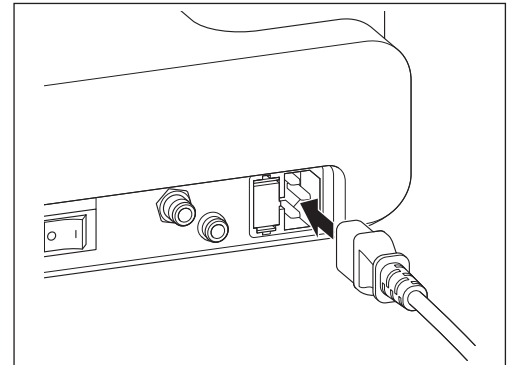
5 Instalación

5-1 Conexión del cable de potencia CA

- 1) Apague el interruptor de encendido antes de conectar el cable de potencia CA.
- 2) Inserte el cable de potencia CA de manera que encaje correctamente en la toma de conexión del cable de potencia CA situada en la parte posterior de la unidad de control.
- 3) Enchufe el cable de potencia CA en una toma de corriente de pared específica para uso médico.

PRECAUCIÓN

- No desconecte el cable de potencia CA agarrando y tirando del mismo.
- Asegúrese de que el dispositivo se haya detenido por completo antes de quitar o insertar el cable de potencia CA.






5-2 Conexión de la manguera de aire

1) Inserte un extremo de la manguera de aire hasta el fondo del conector de la manguera de aire.

2) Tire suavemente de la manguera de aire para comprobar que esta no se sale.

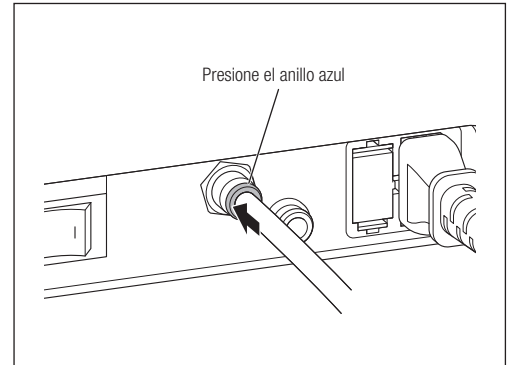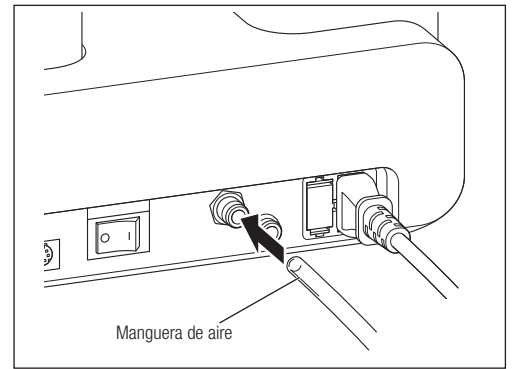
3) Para quitar la manguera de aire, tire de esta mientras presiona el anillo azul hacia la unidad de control.




PRECAUCIÓN  • Use aire limpio y seco. El polvo puede obstruirse si el aire contiene humedad o aceite.

5-3 Conexión del interruptor del pedal

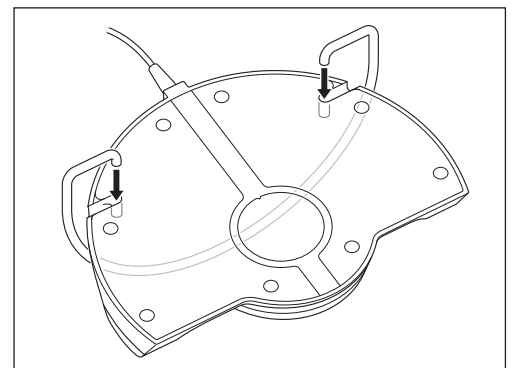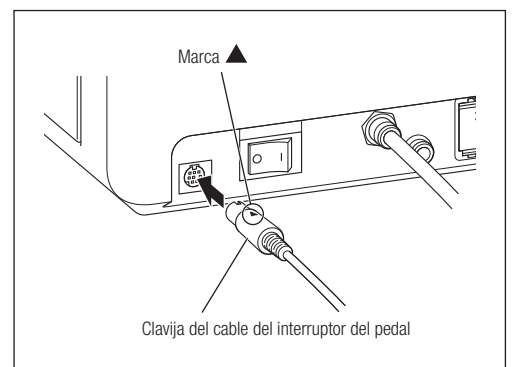1) Inserte el gancho del interruptor del pedal de manera que encaje correctamente en los agujeros situados en la parte posterior del interruptor del pedal.




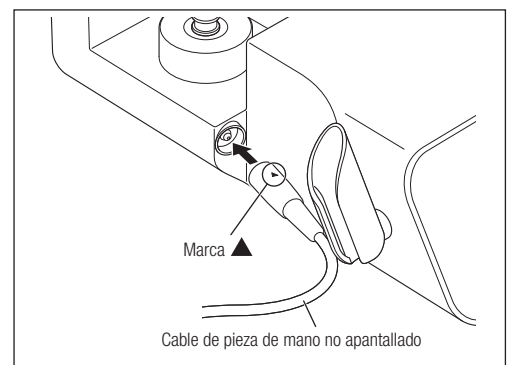
2) Inserte la clavija del interruptor del pedal en la toma de conexión del cable del interruptor del pedal con la marca ▲ hacia arriba.



5-4 Conexión del cable de pieza de mano no apantallado (pieza de mano Ultrasónica)

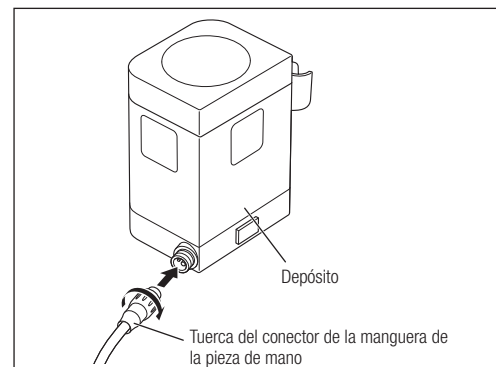
Conecte el conector del cable de pieza de mano no apantallado en la toma de conexión del cable de pieza de mano no apantallado con la marca ▲ hacia arriba. Apriételo hasta el fondo.

PRECAUCIÓN  • Compruebe que la clavija del cable de pieza de mano no apantallado esté limpia y seca antes de conectarla.



5-5 Conexión de la manguera de la pieza de mano (pieza de mano Powder)

- 1) Utilice aire para secar la toma de conexión de la manguera de la pieza de mano y el conector de la manguera de la pieza de mano.
- 2) Inserte el conector de la manguera de la pieza de mano de manera que encaje correctamente en el orificio de la toma de conexión de la manguera de la pieza de mano y apriete la tuerca del conector.



5-6 Conexión y desconexión de la pieza de mano



- Asegúrese de utilizar únicamente la pieza de mano suministrada.

PRECAUCIÓN



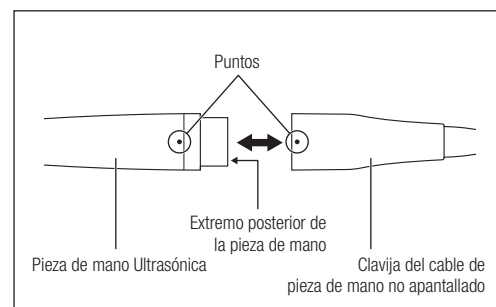
5-6-1 Pieza de mano Ultrasónica

(1) Conexión

Alinee los puntos de la pieza de mano Ultrasónica y de la clavija del cable de pieza de mano no apantallado. Empuje la pieza de mano hacia el conector.

(2) Desconexión

Sostenga la pieza de mano Ultrasónica y la clavija del cable de pieza de mano no apantallado y extraiga la pieza de mano.



ADVERTENCIA

- Para evitar descargas eléctricas, no toque las conexiones eléctricas de la parte posterior de la pieza de mano ni el cable de la pieza de mano.



PRECAUCIÓN

- No gire la pieza de mano ni el cable de pieza de mano no apantallado cuando extraiga la pieza de mano. Si lo hace, se podrían dañar los contactos eléctricos del conector, lo que tendría como resultado un mal funcionamiento.
- Antes de conectar el cable de la pieza de mano a la pieza de mano, gire el conector de la pieza de mano hacia un lado para que la luz lo ilumine y compruebe el extremo de la pieza de mano. Si la luz transmitida por el extremo final de la fibra óptica brilla de manera uniforme en el extremo, funciona con normalidad. Si está parcial o totalmente oscuro, puede que el extremo final de la fibra óptica esté agrietado o roto.

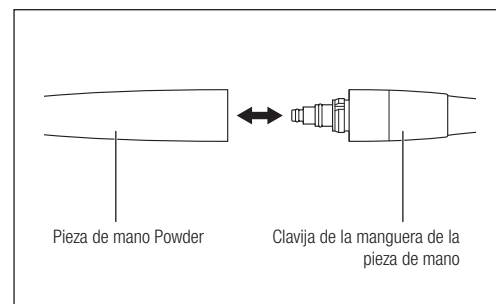
5-6-2 Pieza de mano Powder

(1) Conexión

- 1) Utilice aire para secar la conexión entre la pieza de mano y la clavija de la manguera de la pieza de mano.
- 2) Empuje la pieza de mano Powder en posición recta hacia la clavija de la manguera de la pieza de mano.


(2) Desconexión

Sostenga la pieza de mano Powder y la clavija de la manguera de la pieza de mano y extraiga la pieza de mano.




5-7 Conexión del tubo de agua

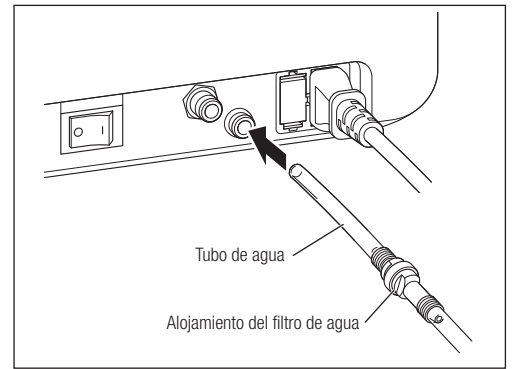- 1) Inserte un extremo del tubo de agua (el extremo con el filtro de agua) hasta el fondo del conector del tubo de agua.
- 2) Conecte el otro extremo del tubo de agua a la salida de agua de la unidad dental.
- 3) Tire suavemente del tubo de agua para comprobar que este no se sale.



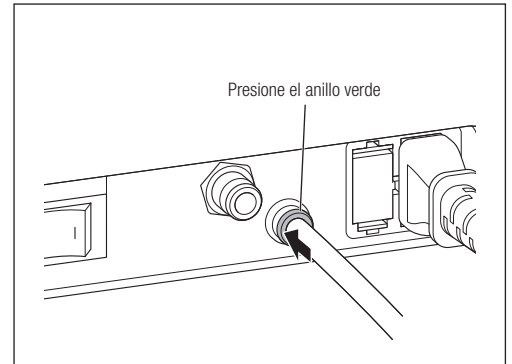- 4) Para quitar el tubo de agua del conector del tubo de agua, tire del tubo de agua mientras presiona el anillo verde hacia la unidad de control.



ADVERTENCIA

- Utilice un descalcificador de agua, etc. para reducir la dureza del agua. Un agua muy dura puede provocar depósitos minerales o de cal en el circuito de agua que pueden producir problemas como un nivel de agua insuficiente, dificultades de funcionamiento o averías. Cuando lo haga, utilice un tubo de agua con un filtro de agua para evitar que se produzcan averías en el dispositivo provocadas por la presencia de material extraño en el agua de grifo. Consulte el apartado "10-3 Cambio del filtro de agua" para sustituir el filtro de agua de forma correcta.

PRECAUCIÓN

- Si la salida de agua de la unidad dental lleva mucho tiempo sin utilizarse, el agua puede contener óxido, etc. cuando circule por primera vez. Asegúrese de que el agua esté limpia antes de conectar el tubo de agua.
- Inserte el tubo de agua firmemente en el conector del tubo de agua cuando lo conecte a la unidad de control. Pueden producirse fugas de agua si el tubo no está insertado correctamente.

6 Verificación antes del tratamiento

Antes de usar el producto con un paciente, verifique el funcionamiento del mismo para confirmar que no presente anomalías en la vibración, ruido, calor, etc. Compruebe también los siguientes aspectos:

- Pieza de mano Ultrasónica: el LED se ilumina y el agua fluye.
- Pieza de mano Powder: el suministro de polvo, aire y agua es correcto.

Si observa algo inusual al verificar o utilizar este producto, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor NSK autorizado.

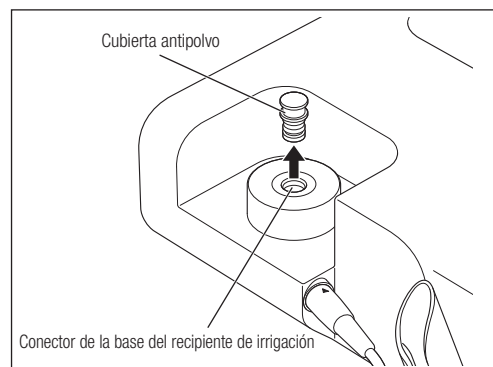
Cuando se lleva a cabo la autolimpieza el agua que encuentra en el interior de la manguera de la pieza de mano se expulsará, lo cual puede ocasionar un retraso en la salida de agua la próxima vez que utilice la unidad de control. Si eso sucede, ajuste el volumen de irrigación a 10 y utilice la pieza de mano durante unos 30 segundos después de que el agua empiece a salir. Consulte la sección "14 Resolución de problemas" si el agua no empieza a salir después de más de 20 segundos, incluso si ha configurado el volumen de irrigación en 10.

7 Uso del modo Ultrasonica


7-1 Configuración del sistema de agua

Uso del recipiente

- 1) Retire la cubierta antipolvo del conector de la base del recipiente de irrigación.
- 2) Retire la tapa del recipiente de irrigación y rellene con agua o solución desinfectante hasta el nivel deseado.



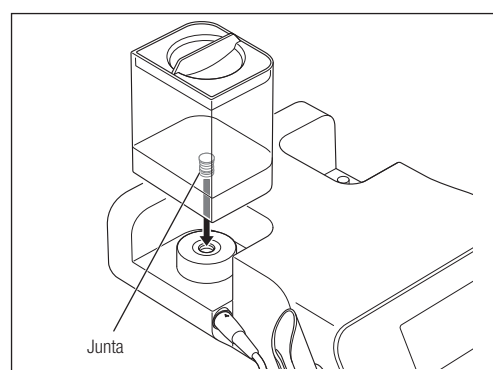- 3) Cierre bien la tapa del recipiente de irrigación e inserte en posición recta la junta del recipiente en el conector de la base del recipiente de irrigación. Tire del recipiente de irrigación hacia arriba para extraerlo.



PRECAUCIÓN

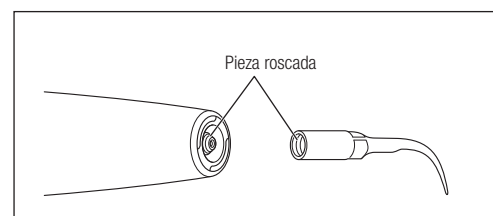
- Utilice únicamente recipientes específicos para la serie Varios Combi Pro.
- Inserte en posición recta el recipiente de irrigación. De lo contrario, pueden producirse daños en la junta tórica.
- Limpie el recipiente de irrigación y la tapa del mismo con agua limpia después de utilizarlos y antes de guardarlos.
- Inserte la cubierta antipolvo en el conector de la base del recipiente de irrigación cuando el recipiente de irrigación no esté montado.
- Asegúrese de que la temperatura del líquido sea inferior a 35 °C.
- No introduzca ácidos fuertes (como agua muy ácida, agua superácida o agua de electrolisis) o agua ácida hipoclorosa en el recipiente de irrigación, ya que pueden causar la obstrucción del agua o corrosión de metal.

Uso de agua de grifo


- 1) Asegúrese de que el tubo de agua esté bien conectado al conector del tubo de agua de la unidad de control. Consulte "5-7 Conexión del tubo de agua" para obtener más información.
- 2) Abra la válvula de agua de la unidad dental y ajuste la presión de agua entre 0,1 y 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm²). Si la presión de agua supera los 0,3 MPa, utilice la válvula de reducción de presión de agua (opcional) para ajustar la presión de agua al rango especificado. Consulte "20 Lista de piezas opcionales" para obtener más información sobre la válvula de reducción de presión de agua.

7-2 Montaje de la punta


- 1) Compruebe que las piezas roscadas de la pieza de mano y la punta estén limpias.



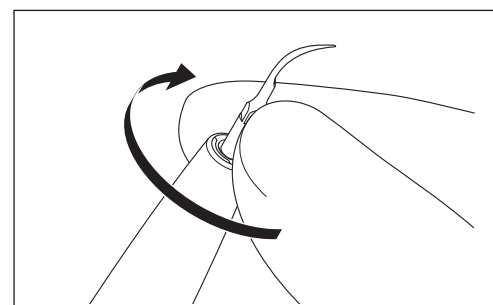- 2) Coloque la punta en el extremo distal de la pieza de mano y enrosque la punta hasta que esté ligeramente apretada.




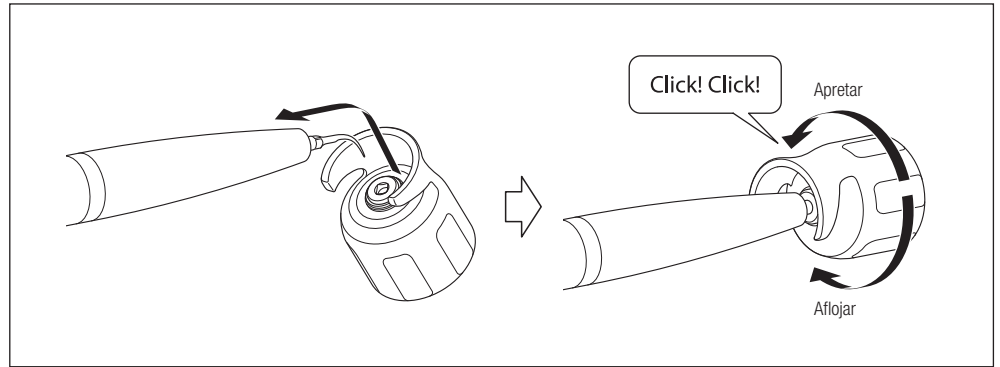- 3) Haga coincidir la forma cuadrada de la punta con el orificio de la llave para punta (CR-10) y, a continuación, inserte la punta en el orificio. Gire la llave hasta que haga clic y ya no pueda girar más. Durante este procedimiento, sostenga la pieza de mano de manera que el cable de pieza de mano no apantallado no se retuerza. Para quitar la punta, gire la llave en la dirección de la flecha "Aflojar".



ADVERTENCIA

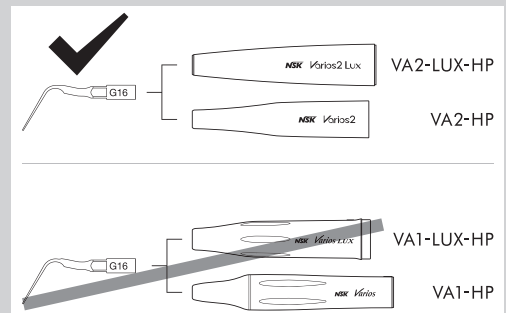- No permita que se produzca contacto con las encías, las mucosas ni la piel. Podrían producirse daños o quemaduras.
- USE SÓLO puntas originales de NSK cuando utilice este producto. Problemas como daños en la pieza de mano, fallos y accidentes derivados del uso de puntas no originales de NSK están excluidos de la garantía. Cuando se utilizan puntas que no son originales de NSK, se pueden producir los siguientes tipos de problemas:
 - Una vibración incorrecta debido a roscas no compatibles.
 - Una ingestión accidental de puntas rotas por parte del paciente.
 - Daño o desgaste prematuro de la rosca de la pieza de mano.
- No conecte la punta G16 a una pieza de mano distinta a la Varios2 (VA2-LUX-HP / VA2-HP). De hacerlo, podría ocasionar la rotura de la punta o arañazos en la superficie de dentición, prótesis, etc. debido a un aumento de la amplitud de vibración.



PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado de no retorcer el cable de pieza de mano no apantallado cuando apriete la punta.
- Tenga cuidado al insertar o retirar una punta que sea más larga que la llave para punta (CR-10), ya que existe el riesgo de que se produzcan lesiones con la punta.
- No utilice una punta que esté dañada, torcida o corroída, ya que podría romperse durante el uso.
- Para evitar dañar la rosca de la punta o que esta se afloje, asegúrese siempre de que la punta esté insertada en el ángulo correcto y bien apretada.
- Si hay suciedad o restos en la rosca de la punta, limpie la punta inmediatamente. De lo contrario, puede producirse ruido o una vibración insuficiente.
- No intente afilar o doblar una punta, ya que podría romperse durante el uso, provocar ruido o producir una vibración insuficiente.
- La punta es una pieza consumible. Las puntas desgastadas suponen un mayor riesgo de ruido, de rotura o de vibración insuficiente. Sustituya la punta si se produce ruido o una vibración insuficiente.
- Utilice la llave para punta (CR-10) suministrada para montar la punta. Gire la llave hasta que haga clic y ya no pueda girar más. Si la punta no está bien apretada, puede producirse ruido o una vibración insuficiente.
- Cuando inserte una punta, lleve siempre guantes quirúrgicos estériles y utilice una punta, pieza de mano y llave para punta (CR-10) esterilizadas.
- Asegúrese de que la potencia no supere el nivel de potencia recomendado. De lo contrario, podría producirse ruido, la rotura de la punta o lesiones en el paciente.
- No utilice puntas que no estén diseñadas para retirar coronas metálicas o protésicas para este fin. De lo contrario, la punta podría romperse y caer en la boca del paciente.
- Extraiga la punta antes de insertar o extraer la pieza de mano o el cable de pieza de mano no apantallado para evitar lesiones con la punta.
- Si se observa una vibración insuficiente durante el funcionamiento, extraiga la pieza de mano de la boca del paciente y vuelva a pulsar el interruptor del pedal. Si la vibración sigue siendo insuficiente, puede que la punta se haya aflojado durante el uso. Compruebe que la punta esté insertada correctamente.
- Si la punta está floja, produce ruido o no vibra lo suficiente pese a haberse apretado hasta hacer clic, es posible que la llave para punta (CR-10) esté desgastada. La llave para punta (CR-10) es una pieza consumible y debe sustituirse una vez al año.

■ Uso de la tarjeta de la punta

 **PRECAUCIÓN**

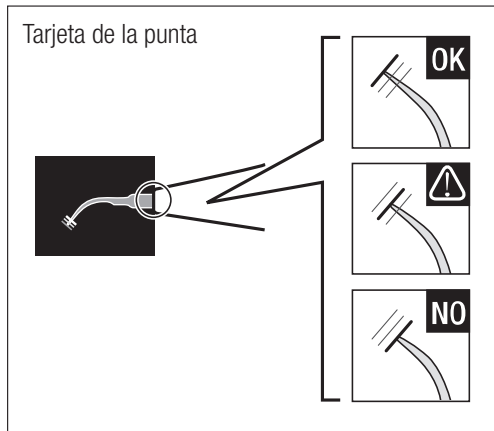- Las puntas se desgastan. Utilice la tarjeta de la punta para comprobar el estado de la punta y sustituya esta última si fuera necesario.

Coloque el cuello de la punta en el corte de la tarjeta de la punta. Mida la longitud de la punta y compruebe si ha de sustituirse. Para garantizar un uso seguro y efectivo, se recomienda sustituir las puntas cuando alcancen la línea amarilla (desgaste de 1 mm).




Verde: No hay desgaste: la punta está en buen estado. No es necesario cambiarla.

Amarillo: Desgaste de 1 mm: la punta está un poco desgastada. Se recomienda cambiarla.

Rojo: Desgaste de 2 mm: la punta está muy desgastada. Es necesario cambiarla.


 **PRECAUCIÓN**

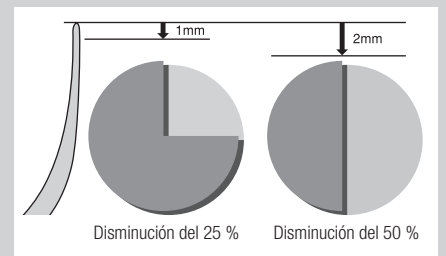- Las puntas son piezas consumibles. La eficiencia del escariado dental disminuye aproximadamente en un 25 % cuando la superficie de la punta tiene un desgaste de un 1 mm y aproximadamente en un 50 % cuando el desgaste es de 2 mm. Además, la vibración varía debido al desgaste, lo que puede dañar la superficie de los dientes del paciente. Compruebe periódicamente el estado del desgaste de la punta utilizando la tarjeta de la punta, y sustitúyala por una nueva en el momento adecuado.




7-3 Configuración del nivel de potencia

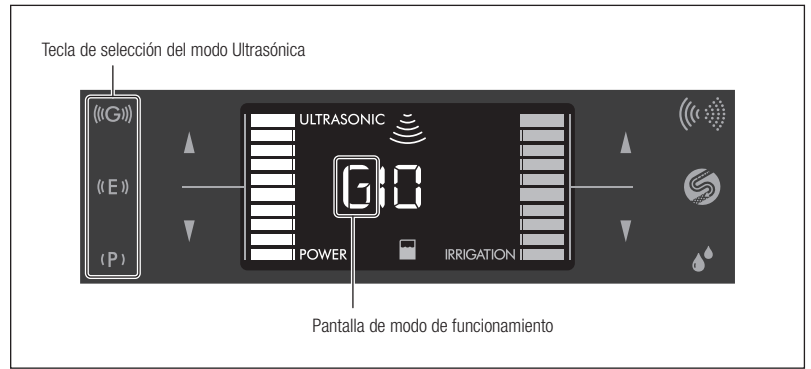1) Toque la tecla de selección del modo Ultrasónica para seleccionar el modo. El modo seleccionado aparece en el panel LCD como P/E/G.



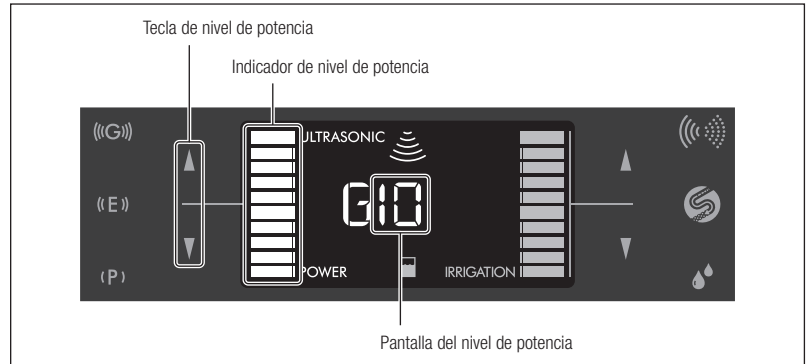2) Toque la tecla de nivel de potencia (▲/▼) para ajustar el nivel de potencia. La pantalla de nivel de potencia y el indicador de nivel de potencia aumentan o disminuyen de acuerdo con el nivel seleccionado.



PRECAUCIÓN

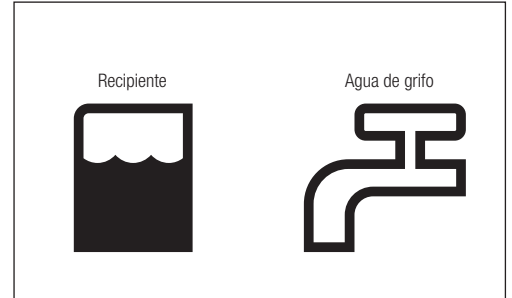
- Asegúrese de que la potencia no supere el nivel de potencia recomendado. (Consulte la “Guía de potencia de la punta” o la “Etiqueta de la caja de la punta” suministradas para conocer la potencia máxima de cada punta).

IMPORTANTE

- Mantenga pulsada la tecla de nivel de potencia para aumentar o disminuir el nivel de potencia continuamente. Se oye una alarma cuando se alcanza el nivel máximo o mínimo.
- Para irrigar sin que la punta vibre, ajuste el nivel de potencia a “0 (cero)” y el volumen de irrigación a 1 bar o más.

7-4 Configuración de irrigación

Toque la tecla de selección del modo de irrigación para seleccionar el modo de irrigación (agua del recipiente o de grifo). El modo seleccionado aparece en el panel LCD como un icono.



7-5 Funcionamiento

1) Pulse el botón deseado en el interruptor del pedal. Se oye un pitido, la punta empieza a vibrar y el LED de la pieza de mano se ilumina.
2) Ajuste el volumen de irrigación tocando las teclas de volumen de irrigación (▲/▼) mientras comprueba la irrigación en la punta.

PRECAUCIÓN

- Como medida de seguridad, este producto no funciona cuando el botón de encendido está activado mientras el interruptor del pedal está pulsado. En ese caso, se oye una alarma y la pantalla del modo Ultrasónica (P/E/G) y “ULTRASÓNICA” parpadean alternativamente. Suelte el interruptor del pedal y vuelva a presionarlo.
- Utilice siempre irrigación. Si la irrigación no es suficiente, la pieza de mano se sobrecalentará, lo que puede producir lesiones en la superficie de los dientes del paciente.
- Antes del uso, compruebe que se pulverice agua limpia adecuadamente.
- Puede que el agua no se pulverice correctamente si el volumen de irrigación está configurado a un nivel bajo. En ese caso, aumente temporalmente el volumen de irrigación y pulse el interruptor del pedal. Compruebe que el agua se pulverice correctamente por la punta y ajuste de nuevo el volumen de irrigación.
- No gire a la fuerza el soporte de la pieza de mano, ya que podría dañarlo.

- IMPORTANTE**
- El LED de la pieza de mano permanece encendido durante unos 5 segundos después de soltar el interruptor del pedal (función de Posluminiscencia).
 - Los ajustes del modo Ultrasónica, nivel de potencia, modo de irrigación y volumen de irrigación se almacenan después de apagar la alimentación y vuelven a aplicarse al volver a encenderla (función de Últimos ajustes memorizados).
 - Si el volumen de irrigación es demasiado bajo (con el volumen de irrigación configurado en 10) o demasiado alto (con el volumen de irrigación configurado en 1), cuando el modo de irrigación esté configurado en agua de grifo, ajuste el nivel de irrigación básico. Consulte "11-3 Ajuste del nivel de agua básico" para obtener más información.
 - Puede que se emita un zumbido, pero eso no indica que exista un mal funcionamiento.

■ Durante el funcionamiento de la pieza de mano:

Puede: ajustar el nivel de potencia y el volumen de irrigación.

No puede: cambiar los ajustes del modo Ultrasónica o el modo de irrigación ni realizar la autolimpieza.

7-6 Después del tratamiento

Después de utilizar el dispositivo con cada paciente, realice un mantenimiento. Consulte "9 Mantenimiento posterior al uso" para obtener más información.

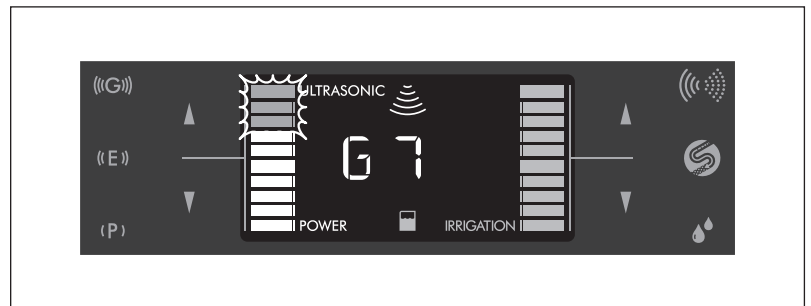


- Este producto puede tener un funcionamiento incorrecto si no se realiza un mantenimiento adecuado.

PRECAUCIÓN

7-7 Circuito de protección

Este producto puede sobrecalentarse internamente si la unidad de control se utiliza a un nivel de potencia 8 o superior en el modo G durante un periodo de tiempo prolongado. En ese caso, el circuito de protección reduce la potencia automáticamente (potencia 7). El indicador del diagrama de barras parpadea del nivel 8 al 10. El indicador deja de parpadear cuando se activa el circuito de protección. Sin embargo, en este caso el nivel de potencia no aumenta automáticamente. Aumente manualmente el nivel de potencia si fuera necesario.



- IMPORTANTE**
- El nivel de potencia no puede aumentarse a 8 o más cuando se ha activado el circuito de protección (cuando el indicador del diagrama de barras está parpadeando).
 - El indicador del diagrama de barras deja de parpadear cuando el nivel de potencia disminuye por debajo de 7. Empieza a parpadear de nuevo si el nivel de potencia se aumenta a 7 mientras la función del circuito de protección está activa.



8 Uso del modo Powder

Para usar el modo Perio, debe adquirirse por separado el kit Perio opcional. Consulte "20 Lista de piezas opcionales" para obtener más información sobre el kit Perio.

8-1 Configuración del sistema de agua

- 1) Asegúrese de que el tubo de agua esté bien conectado al conector del tubo de agua de la unidad de control. Consulte "5-7 Conexión del tubo de agua" para obtener más información.
- 2) Abra la válvula de agua de la unidad dental y ajuste la presión de agua entre 0,1 y 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm²). Si la presión de agua supera los 0,3 MPa, utilice la válvula de reducción de presión de agua (opcional) para ajustar la presión de agua al rango especificado. Consulte "20 Lista de piezas opcionales" para obtener más información sobre la válvula de reducción de presión de agua.




- Utilice solamente agua potable para la irrigación.

PRECAUCIÓN



8-2 Preparación del polvo

- 1) Seleccione el depósito y el polvo que va a utilizar con este modo. Rellene el depósito con polvo hasta la línea "MAX" (aproximadamente 80 g de FLASH pearl o 50 g de polvo Perio Mate).

| Modo | Depósito | Polvos |
|-------------|--------------------|------------------|
| Modo Prophy | Para uso de Prophy | FLASH pearl |
| Modo Perio | Para uso de Perio | Polvo Perio Mate |

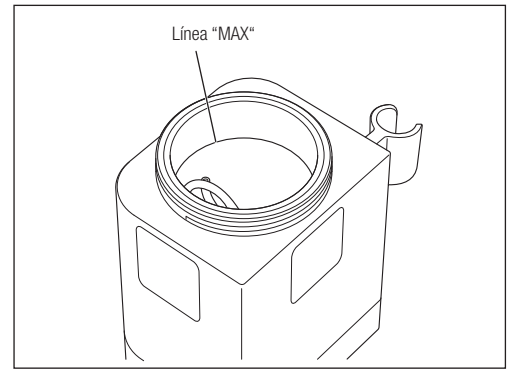

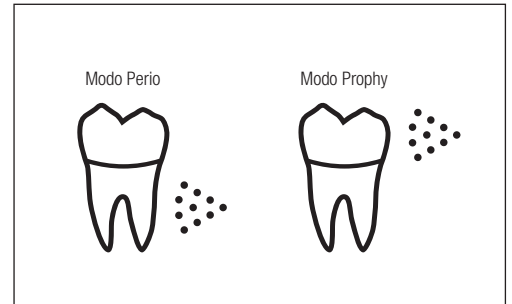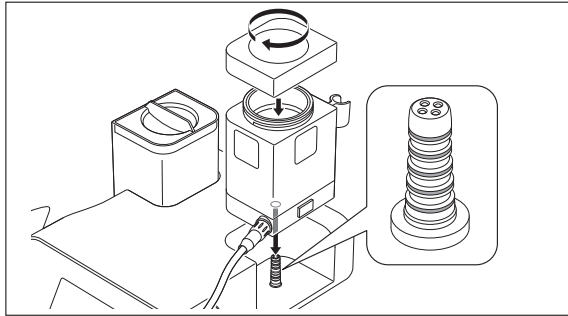- 2) Cierre bien la tapa del depósito hasta que ajuste perfectamente e inserte el depósito en la unidad de control, en posición recta. El tipo de depósito insertado aparece en el panel LCD como uno de los siguientes iconos.



ADVERTENCIA

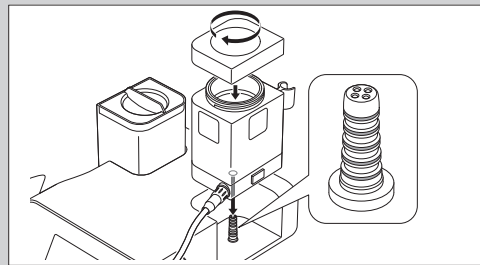
- Utilice únicamente el polvo indicado. El uso de otros polvos puede causar un fallo del producto, dañar los dientes o provocar enfisema. Además, puede provocar una reducción del rendimiento del producto. Declinamos cualquier responsabilidad por problemas derivados del uso de polvos distintos al indicado.

PRECAUCIÓN

- Ajuste firmemente la tapa del depósito para evitar que salga despedida, lo que puede provocar una lesión.



- Antes de insertar el depósito en la unidad de control, asegúrese de que las juntas tóricas del conector de la base del depósito no están dañadas o rotas. Los daños/roturas pueden provocar un mal funcionamiento.




- Inserte el depósito en la unidad de control en posición recta. Si lo inserta en posición inclinada podría dañar las juntas tóricas y provocar un mal funcionamiento.
- Si se introduce demasiado polvo de limpieza en el depósito, es posible que no se pueda pulverizar la cantidad adecuada inmediatamente después de comenzar a usarlo.
- No utilice polvo sobrante o que se haya guardado en un paquete abierto. Si lo hace, puede obstruirse la boquilla. No mezcle polvo sobrante con polvo nuevo.
- Antes de insertar el depósito compruebe si el conector de la base del depósito tiene agua, etc. y séquelo si está húmedo. De lo contrario podría producirse una obstrucción de polvo.
- No utilice polvo descolorido.
- Asegúrese siempre de cerrar bien la tapa del envase de polvo. De lo contrario, atraerá la humedad, lo que puede provocar obstrucciones.
- Si se adhiere polvo al depósito y/o a la tapa del depósito, límpielo inmediatamente. En caso contrario, resultará más difícil cerrar la tapa.
- No le dé la vuelta al depósito si tiene polvo en su interior. Si lo hace, producirá una obstrucción de polvo.
- Como medida de seguridad, este producto no funciona si se pulsa el interruptor del pedal cuando el depósito no está correctamente montado. Se oye una alarma y el icono de diente y "POWDER" parpadean alternativamente. Monte el depósito correctamente.
- El polvo Perio Mate (opcional) se esparce fácilmente porque sus partículas son muy finas. Rellene el depósito lentamente para evitar que el polvo se disperse y tenga cuidado de no ingerir polvo o que este le entre en los ojos.
- El FLASH pearl es prácticamente insoluble en el agua. Para evitar que los conductos se obstruyan cuando utilice FLASH pearl, es necesario realizar una limpieza y mantenimiento periódicos de la cánula de aspiración, el eyector de saliva y el separador.

8-3 Inserción/extracción de la punta de la boquilla

8-3-1 Inserción de la punta de la boquilla

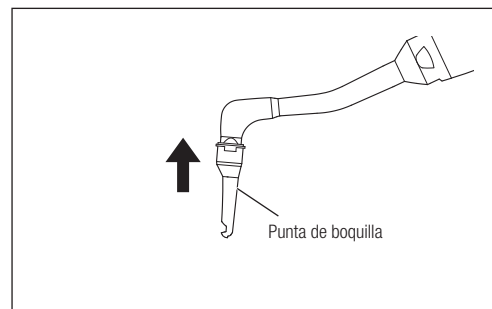Inserte la punta de la boquilla (opcional) correcta y firmemente en la boquilla de la pieza de mano Powder (para uso de Perio).




ADVERTENCIA

- No use una punta de la boquilla deformada o dañada. Puede desmontarse durante el uso.

PRECAUCIÓN

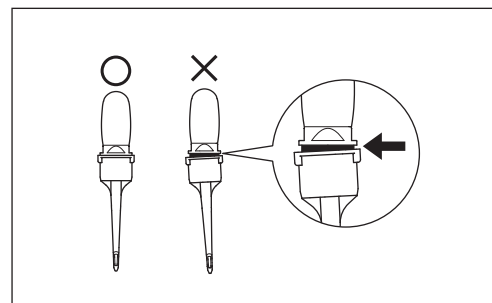- Asegúrese de insertar la punta de la boquilla correcta y firmemente tal y como se muestra en la ilustración. Si la punta se inserta de forma incorrecta, se caerá y podría ser ingerida accidentalmente por el paciente.
- Cuando inserte una punta de boquilla en la pieza de mano Powder, utilice siempre guantes quirúrgicos estériles y asegúrese de que la pieza de mano Powder esté esterilizada.




8-3-2 Extracción de la punta de la boquilla

Use la llave de punta de boquilla (opcional) para extraer la punta de la boquilla y elimine la punta de la boquilla una vez extraída.

ADVERTENCIA

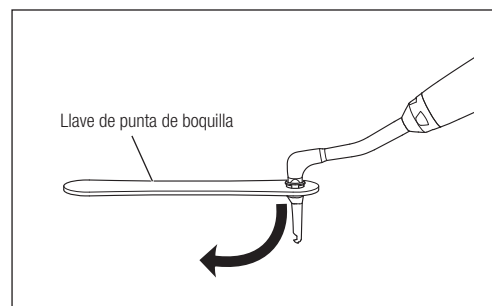- La punta de la boquilla solo puede utilizarse una vez. No reutilice ni esterilice la punta de la boquilla, ya que podría estar dañada o contaminada. Si la punta de la boquilla se reutiliza, es posible que no funcione correctamente por haberse deformado al extraerla, o que se desmonte durante el uso y el paciente la ingiera accidentalmente. Lo mismo se aplica a una punta que se haya desmontado accidentalmente.




8-4 Configuración del nivel de potencia

Toque las teclas de nivel de potencia (▲/▼) para ajustar el nivel de potencia. La pantalla de nivel de potencia y el indicador de nivel de potencia aumentan o disminuyen de acuerdo con el nivel de potencia seleccionado.

IMPORTANTE

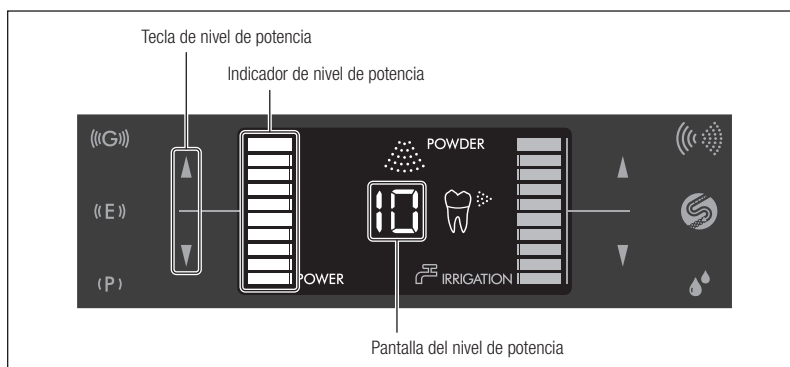- Si especifica este ajuste sin montar el depósito, se establece el nivel de potencia que se utiliza en el modo Prophy.



8-5 Configuración de irrigación

- 1) Toque las teclas de volumen de irrigación (▲/▼) para ajustar el volumen de irrigación.
- 2) Pulse el interruptor del pedal para pulverizar polvo en una escupidera, etc. a fin de comprobar que se pulverice adecuadamente polvo, aire y agua.
- 3) Ajuste el volumen de irrigación mientras comprueba la irrigación en la boquilla.

IMPORTANTE

- Si el volumen de irrigación es demasiado bajo (con el volumen de irrigación configurado en 10) o demasiado alto (con el volumen de irrigación configurado en 1), ajuste el nivel de irrigación básico. Consulte "11-3 Ajuste del nivel de agua básico" para obtener más información.
- Si lleva a cabo el ajuste sin montar el depósito, se establece el flujo de irrigación que se utiliza en el modo Prophy.

8-6 Funcionamiento

Se suministra polvo, agua y aire al pulsar el botón D del interruptor del pedal. Se suministra agua y aire al pulsar el botón B del interruptor del pedal. Consulte las instrucciones de funcionamiento que se describen en “8-6-1 Uso del modo Prophy” y “8-6-2 Uso del modo Perio”.

ADVERTENCIA



- Nunca pulverice polvo hacia el cuerpo de una persona, a excepción de la superficie de los dientes de un paciente, ni a un operario o asistente.
- Deje de utilizar el producto de inmediato si la manguera se hincha o se producen fugas de aire o polvo en las conexiones entre el depósito y la manguera durante el uso.
- Pulverice agua mientras utilice este producto.
- Utilice un aspirador (y un eyector de saliva si fuera necesario) para evitar que el paciente trague una gran cantidad de polvo. Evite el uso continuado durante periodos prolongados de tiempo e indique al paciente que se enjuague cuando lo estime oportuno.

PRECAUCIÓN



- Como medida de seguridad, este producto no se enciende cuando el botón de encendido está activado mientras el interruptor del pedal está pulsado. Se oye una alarma y el icono de diente y “POWDER” parpadean alternativamente. Suelte el interruptor del pedal y, a continuación, vuelva a presionarlo.
- Antes del tratamiento, ajuste el nivel de potencia y el nivel de irrigación antes de comenzar con el paciente.
- Disminuya el nivel de potencia cuando esté tratando los márgenes de las encías.
- No pulverice verticalmente sobre la superficie dental.
- Mantenga la distancia entre la punta de la boquilla de la pieza de mano y la superficie dental indicada en “8-6-1 Uso del modo Prophy” y “8-6-2 Uso del modo Perio”.
- No gire a la fuerza el soporte de la pieza de mano, ya que podría dañarlo.

IMPORTANTE

- Puede que se emita un zumbido, pero eso no indica que exista un mal funcionamiento.



8-6-1 Uso del modo Prophy

Mantenga la boquilla a una distancia de 3 - 5 mm de la superficie dental y en un ángulo de 10 - 60 grados.

ADVERTENCIA

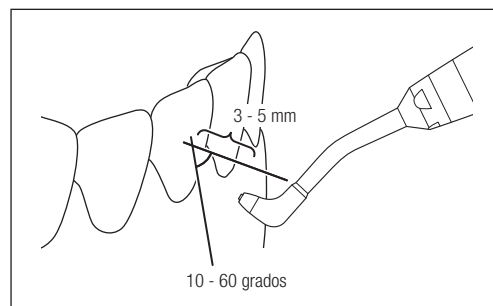


- No apunte nunca hacia tejido blando, las encías o la zona subgingival.

PRECAUCIÓN



- Pulverice desde la raíz hasta el borde incisal del diente.




8-6-2 Uso del modo Perio

■ Uso con la punta de la boquilla


Inserte la punta de la boquilla a una profundidad superior a 3 mm en la bolsa periodontal.

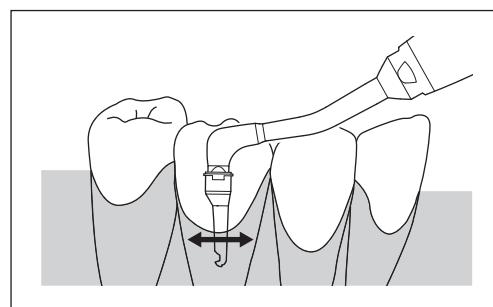Es posible que el polvo no se pulverice de forma eficiente en la bolsa periodontal si la profundidad es inferior a 3 mm.



■ Uso sin la punta de la boquilla

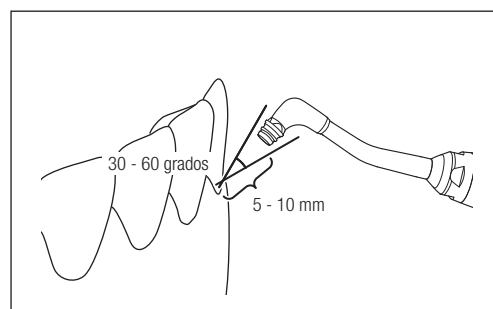Extraiga la punta de la boquilla de la boquilla de la pieza de mano para eliminar la placa de la zona supragingival y el margen gingival, o para eliminar biopelícula y manchas leves. Mantenga la boquilla a una distancia de 5 - 10 mm de la superficie dental y en un ángulo de 30 - 60 grados. No apunte nunca con la boquilla directamente hacia la membrana mucosa oral ni en las bolsas periodontales.



**ADVERTENCIA**

- Cuando utilice el producto sin la punta de la boquilla, nunca apunte hacia la membrana mucosa oral.
- No utilice este producto en una zona inmediatamente después de un tratamiento de escariado de una superficie dental en una bolsa periodontal. Si lo hace, podría producirse bacteriemia.
- No inserte más de una vez la punta de la boquilla en la misma bolsa periodontal durante el mismo tratamiento.
- El polvo puede pulverizarse durante 5 segundos como máximo en la misma bolsa periodontal (20 segundos como máximo por pieza dental). No pulverice polvo durante más tiempo del especificado.
- No fuerce la punta de la boquilla para introducirla en la bolsa periodontal.
- No pulverice polvo mientras el extremo de la punta de la boquilla esté situado en la parte inferior de una bolsa periodontal. Si lo hace, podría provocar un enfisema.
- No utilice la punta de la boquilla más que en bolsas periodontales.
- Si se configura el nivel de potencia demasiado alto, puede producirse enfisema. Ajuste el nivel de potencia a un nivel adecuado al tiempo que comprueba el estado del paciente.

**PRECAUCIÓN**

- La alarma audible se oye cada 5 segundos cuando se utiliza el modo Perio.
- En el modo Perio, el nivel de potencia se reduce automáticamente a un nivel menor en comparación con el mismo ajuste para el modo Prophy.

8-6-3 Durante el funcionamiento de la pieza de mano

Puede: ajustar el nivel de potencia y el volumen de agua.

No puede: cambiar los ajustes del modo de irrigación ni realizar la autolimpieza.

8-6-4 Descarga de la presión residual

Es posible que la tapa del depósito no se abra fácilmente tras el uso del dispositivo debido al aumento de presión de aire dentro del depósito que se genera durante cada operación. Descargue la presión residual del depósito antes de añadir polvo en el mismo o extraer el depósito de la unidad de control.

**PRECAUCIÓN**

- Los restos de polvo y agua son expulsados de la pieza de mano al descargar la presión residual. Prepare un recipiente, como un vaso, para recoger los restos de polvo y agua.

- 1) Extraiga la pieza de mano Powder del soporte de la pieza de mano.
- 2) Coloque la pieza de mano en el recipiente para recoger los restos de polvo y agua.
- 3) Mantenga pulsada la tecla de autolimpieza durante 1 segundo aproximadamente. Se oirán pitidos y la presión residual comenzará a descargarse.
- 4) La operación se detiene una vez descargada toda la presión residual del depósito.

8-7 Después del tratamiento

Después de utilizar el dispositivo con cada paciente, realice un mantenimiento. Consulte “9 Mantenimiento posterior al uso” para obtener más información.

Si la punta de la boquilla (opcional) está insertada en la boquilla, extráigala y deséchela antes de proceder con el mantenimiento.

**PRECAUCIÓN**

- La falta de mantenimiento puede tener como resultado un mal funcionamiento.

IMPORTANTE

- Los ajustes del nivel de potencia y modo de irrigación se guardan después de apagar la alimentación (función de Últimos ajustes memorizados).

9 Mantenimiento posterior al uso

Después de utilizar el dispositivo con cada paciente, realice el siguiente mantenimiento.

Las siguientes instrucciones de reprocesamiento se han creado sobre la base de los requisitos de la norma ISO 17664.

Se ha comprobado la eficacia del reprocesamiento a través del siguiente procedimiento.

Por motivos de seguridad y prevención de infecciones, utilice protectores oculares, máscara de protección y guantes.



ADVERTENCIA

- Para eliminar residuos, realice el siguiente mantenimiento inmediatamente (en el plazo de 30 minutos) después del tratamiento. La omisión del mantenimiento puede provocar infecciones, fallo prematuro y quemaduras por sobrecalentamiento.
- Obedezca siempre las normas, directrices, directivas locales, etc. relativas a la limpieza, desinfección y esterilización del producto.



PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente productos de limpieza y desinfección especificados en este manual de funcionamiento.
- Por motivos de seguridad y prevención de infecciones, utilice protectores oculares, máscara de protección y guantes para realizar el mantenimiento.
- Para el reprocesamiento de puntas y llaves para puntas, consulte el manual de funcionamiento de las puntas (véase OM-Z0314E).
- Para la limpieza y desinfección, utilice etanol desinfectante o isopropanol desinfectante sin aditivos (en lo sucesivo denominado alcohol desinfectante). El uso de desinfectantes distintos del alcohol desinfectante puede producir decoloración o grietas.
- Utilice alcohol desinfectante apropiado conforme a las regulaciones y directrices de cada país.
- No utilice disolventes como agua electrolizada oxidante (agua muy ácida o superácida), productos químicos alcalinos o muy ácidos, disolventes, bencina o diluyente que contengan cloro, para limpiar, sumergir o lavar el producto.
- Después de la termodesinfección, saque inmediatamente el producto de la lavadora-desinfectadora (en el plazo de una hora). Si no lo hace, podría producirse corrosión.
- Después de la termodesinfección, seque completamente el producto. Si queda humedad, podría producirse corrosión interna.
- Antes de la desinfección, asegúrese de limpiar el producto para retirar cualquier posible residuo. Si queda sangre en el producto, esta podría coagularse y provocar un mal funcionamiento del producto.
- Asegúrese de utilizar la llave para puntas para insertar y extraer las puntas.
- No utilice limpieza ultrasónica para limpiar piezas de mano ultrasónicas.
- Utilice aire comprimido limpio y seco para la limpieza.

9-1 Limpieza y desinfección (cada paciente)

9-1-1 Pieza de mano Ultrasónica



PRECAUCIÓN

- Asegúrese de realizar la autolimpieza (limpieza del tubo de irrigación) después del uso. Si se omite la autolimpieza, puede que el tubo de irrigación se obstruya o las piezas metálicas se oxiden.
- Asegúrese de rellenar el recipiente de irrigación con agua destilada o purificada sin impurezas. El uso de agua con impurezas podría obstruir el tubo de irrigación o provocar otro problema.
- Asegúrese de que la pieza de mano Ultrasónica y el cable de la pieza de mano están firmemente conectados.
- Después de retirar el recipiente de irrigación, deseche inmediatamente el líquido de su interior. Si queda líquido en el recipiente de irrigación, pueden producirse fugas de líquido por la sección de la junta del recipiente de irrigación.

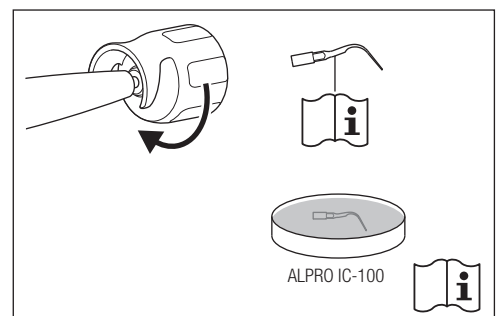
IMPORTANTE • El LED de la pieza de mano Ultrasónica no se enciende durante la autolimpieza.

9-1-1-1 Extracción de la punta


1) Extraiga la punta de la pieza de mano Ultrasónica.

Extraiga la punta de la llave para puntas.


Para el reprocesamiento de puntas y llaves para puntas, consulte el manual de funcionamiento de las puntas (véase OM-Z0314E).



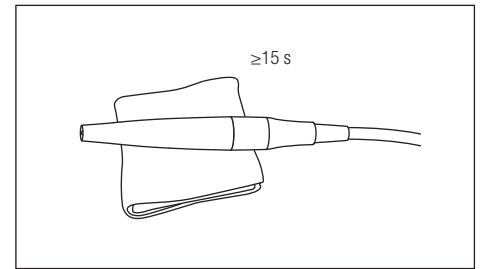
- 2) Limpie la suciedad de la superficie de la pieza de mano Ultrasónica con un paño que no suelte pelusa humedecido con agua.




9-1-1-2 Autolimpieza

PRECAUCIÓN  • Durante la autolimpieza, el agua usada para la limpieza sale por la punta de la pieza de mano Ultrasónica. Prepare un recipiente, como un vaso, para recoger el agua.

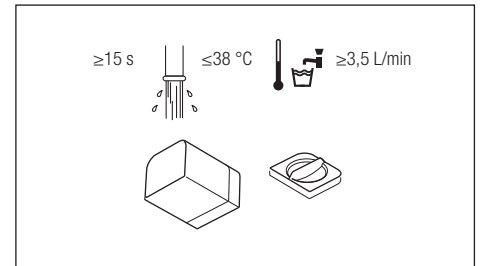
- 1) Seleccione el modo de irrigación de agua del grifo y ajuste el volumen de irrigación al máximo.
2) Retire el recipiente de irrigación y, a continuación, limpie el interior y la tapa del recipiente de irrigación con agua corriente.



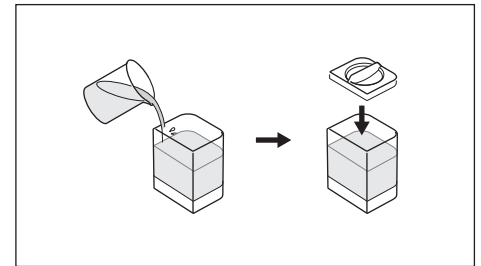
- 3) Rellene el recipiente de irrigación hasta la mitad o más con agua destilada o purificada y, a continuación, cierre firmemente la tapa del recipiente de irrigación (no use solución salina).




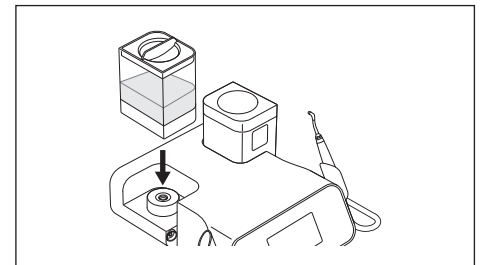- 4) Inserte en posición recta el recipiente de irrigación en el conector de la base del recipiente de irrigación.




* Si queda espacio entre el recipiente de irrigación y la unidad de control puede que se produzcan fugas de agua.

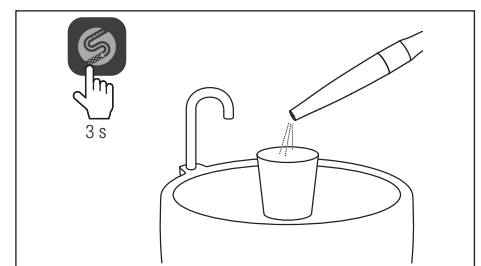- 5) Dirija la punta de la pieza de mano Ultrasónica hacia un recipiente para recoger agua y, a continuación, toque  durante tres segundos. Se inicia la autolimpieza (la limpieza dura 45 segundos).



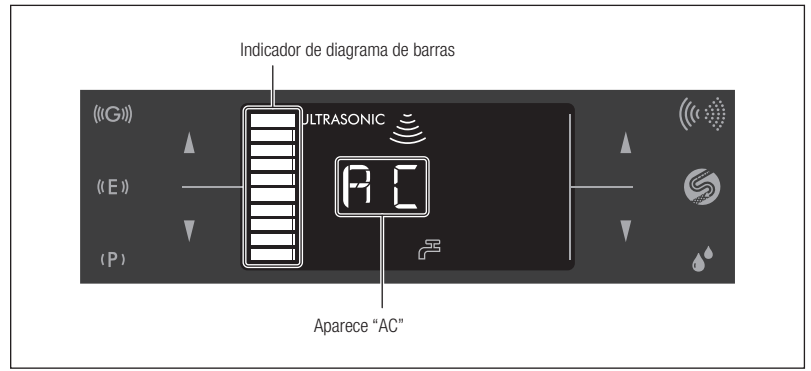
- 6) Durante la autolimpieza aparece "AC" en la pantalla LCD.
El indicador del diagrama de barras muestra el progreso.



* Para cancelar la autolimpieza, vuelva a tocar .


Cuando la autolimpieza ha finalizado, la unidad de control regresa al estado anterior a la autolimpieza.

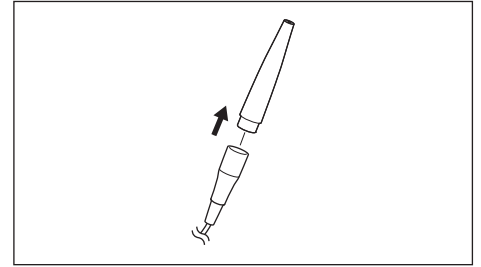- 7) Desconecte la pieza de mano Ultrasónica del cable de la pieza de mano.




9-1-1-3 Limpieza previa

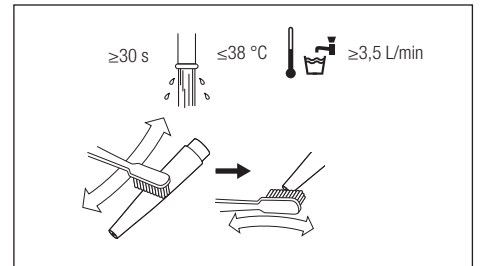
- 1) Limpie la pieza de mano Ultrasónica con agua corriente y un cepillo de cerdas suaves.



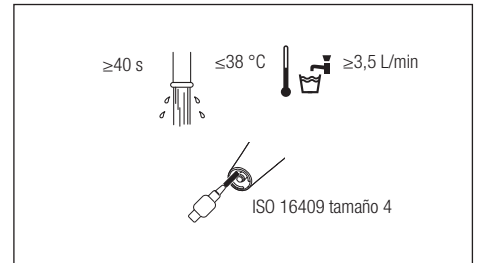
- 2) Limpie la punta de la pieza de mano Ultrasónica con agua corriente y un cepillo.



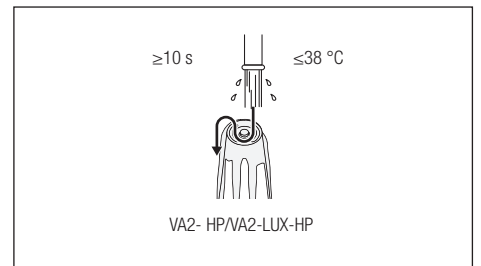
- 3) Enjuague el extremo de la pieza de mano Ultrasónica.



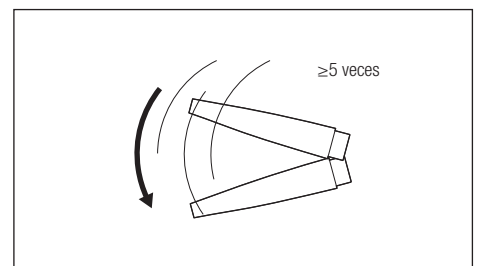- 4) Agite suavemente la pieza de mano Ultrasónica para eliminar el agua.



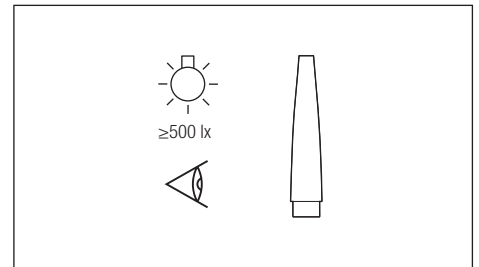5) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 1) hasta que se elimine.



9-1-1-4 Limpieza y desinfección

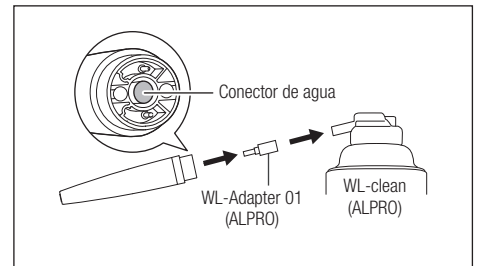
PRECAUCIÓN

- Asegúrese de realizar la limpieza previa antes de la limpieza y desinfección.
- Asegúrese de llevar a cabo la desinfección en un plazo de dos horas después de la limpieza.
- Después de la desinfección, asegúrese de esterilizar la pieza de mano Ultrasónica (consulte “9-2 Esterilización”).
- Cuando utilice un pulverizador (ALPRO), asegúrese de cubrir la punta de la pieza de mano Ultrasónica con un paño para evitar que se disperse el detergente o producto de desinfección. Recomendamos el uso del absorbedor de vapor de spray (Y900084).
- Cuando pulverice el spray ALPRO, siga sujetando la pieza de mano Ultrasónica y el WL-Adapter 01.
- Cuando utilice productos ALPRO, consulte el manual del fabricante.


Manual

■ Limpieza


1) Coloque el WL-Adapter 01 (ALPRO) en el WL-clean (ALPRO) y conecte el conector de agua de la pieza de mano Ultrasónica al extremo del WL-Adapter 01 (ALPRO).



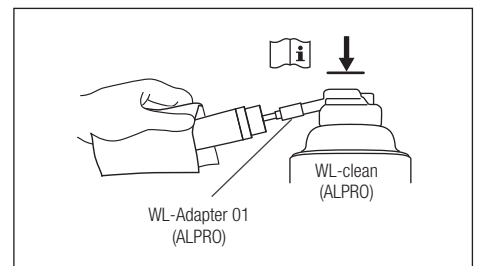2) Pulverice WL-clean (ALPRO) mientras sujeta el WL-clean (ALPRO) y la pieza de mano Ultrasónica.




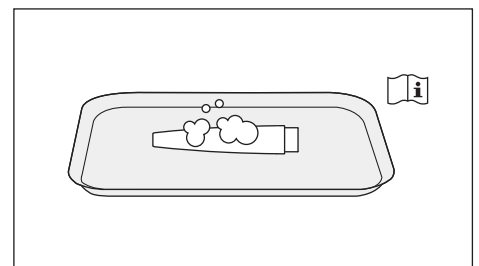3) Retire el conector de agua en la pieza de mano Ultrasónica del WL-Adapter 01 (ALPRO), extraiga el WL-Adapter 01 (ALPRO) del WL-clean (ALPRO) y, a continuación, coloque la pieza de mano Ultrasónica en la bandeja desinfectada. Pulverice WL-clean (ALPRO) sobre la superficie de la pieza de mano Ultrasónica y espere a que el WL-clean (ALPRO) haga efecto.




■ Desinfección

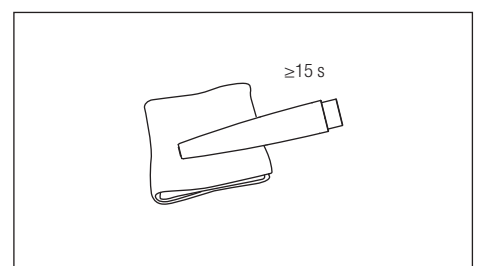
1) Limpie la superficie de la pieza de mano Ultrasónica con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.



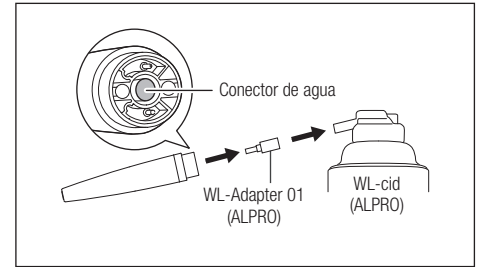2) Coloque el WL-Adapter 01 (ALPRO) en el WL-cid (ALPRO) y conecte el conector de agua de la pieza de mano Ultrasónica al extremo del WL-Adapter 01 (ALPRO).



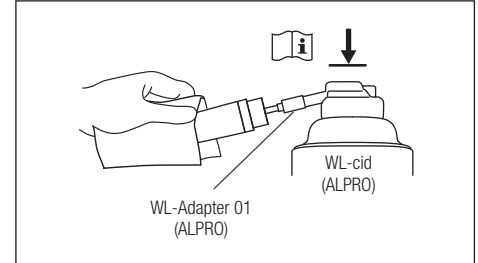
3) Pulverice WL-cid (ALPRO) en el conector de agua de la pieza de mano Ultrasónica mientras sujeta la pieza de mano Ultrasónica y el WL-cid (ALPRO).




4) Extraiga el WL-Adapter 01 (ALPRO) y la pieza de mano Ultrasónica del WL-cid (ALPRO).

5) Retire la pieza de mano Ultrasónica del WL-Adapter 01 (ALPRO) y, a continuación, coloque la pieza de mano Ultrasónica en la bandeja desinfectada.

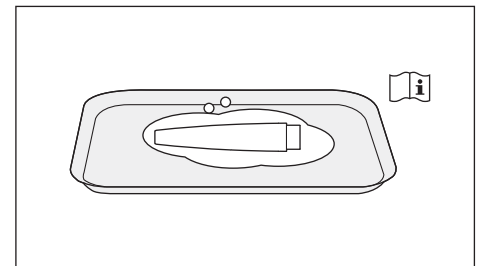6) Pulverice WL-cid (ALPRO) sobre la superficie de la pieza de mano Ultrasónica y espere a que el WL-cid (ALPRO) haga efecto.




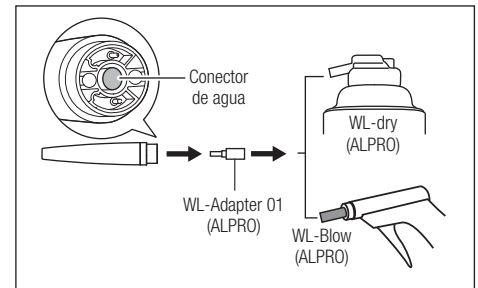7) Coloque el WL-Adapter 01 (ALPRO) en el WL-dry (ALPRO) o WL-Blow (ALPRO) y, a continuación, conecte la parte trasera de la pieza de mano Ultrasónica al WL-Adapter 01 (ALPRO).




8) Drene el desinfectante de la pieza de mano Ultrasónica mientras sujeta el WL-dry (ALPRO) o WL-Blow (ALPRO) y la pieza de mano Ultrasónica.

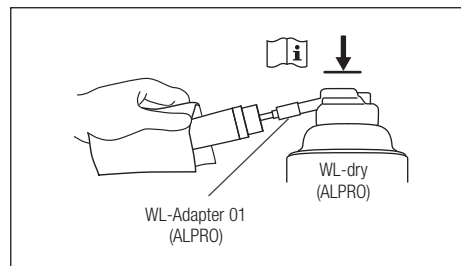- Cuando utilice WL-dry (ALPRO):




- Cuando utilice WL-Blow (ALPRO):

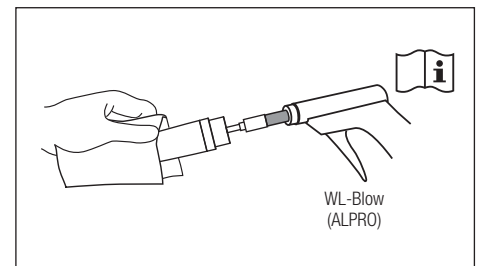

9) Retire el WL-Adapter 01 (ALPRO) y la pieza de mano Ultrasónica del WL-dry (ALPRO) o WL-Blow (ALPRO).

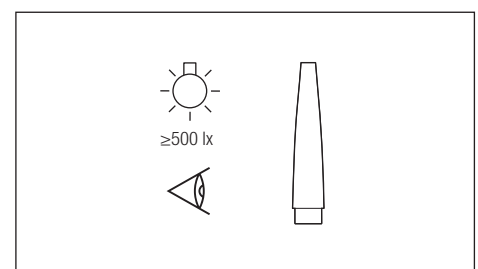10) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 1) hasta que se elimine.




11) Continúe con la esterilización (consulte "9-2 Esterilización").

PRECAUCIÓN

- Utilice una lavadora-desinfectadora que cumpla la norma DIN EN ISO 15883.
- Lea el manual de su lavadora-desinfectadora.
- Debido a la fragilidad de la varilla de vidrio, preste atención para que la punta de la pieza de mano Ultrasónica no reciba un impacto durante la limpieza.
- Cuando la termodesinfección y el ciclo de secado hayan finalizado, saque inmediatamente el producto de la lavadora-desinfectadora (en el plazo de una hora) y, a continuación, séquelo. Si queda humedad en el producto podría producirse corrosión u otro problema.
- Cuando utilice una lavadora-desinfectadora, emplee un adaptador compatible con la lavadora-desinfectadora (que debe preparar el usuario) para limpiar y desinfectar la pieza de mano Ultrasónica.
- Para la autolimpieza y desinfección, siga las instrucciones del manual del fabricante de la lavadora-desinfectadora.

■ Limpieza y desinfección (interior y exterior)

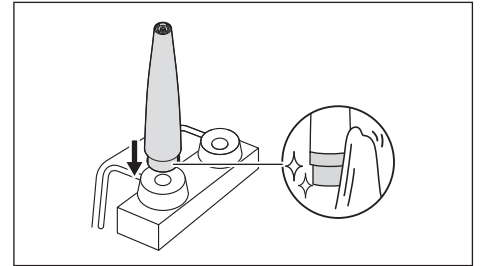
1) Limpie la pieza de conexión de la pieza de mano Ultrasónica con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante y, a continuación, conecte la pieza de mano Ultrasónica al adaptador de la lavadora-desinfectadora.



Adaptador compatible con la lavadora-desinfectadora (comprado por el usuario)


| Fabricante | REF | Conexión aprox. | Color |
|------------|-----------|-----------------|-------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Verde |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Verde |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Negro |

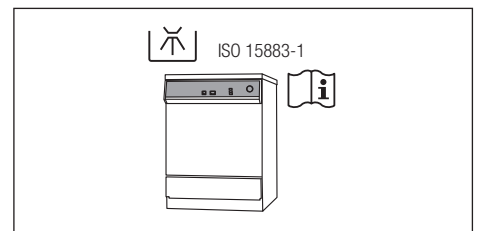2) Realice la termodesinfección siguiendo el manual de la lavadora-desinfectadora.




3) Extraiga la pieza de mano Ultrasónica de la lavadora-desinfectadora.

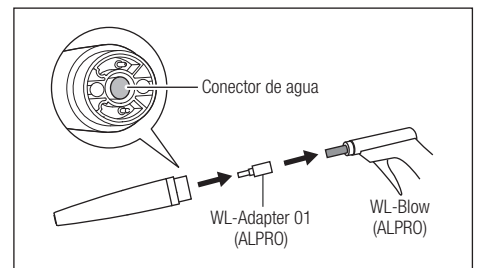
4) Coloque el WL-Adapter 01 (ALPRO) en el WL-Blow (ALPRO) y, a continuación, conecte la parte trasera de la pieza de mano Ultrasónica al adaptador WL (ALPRO).



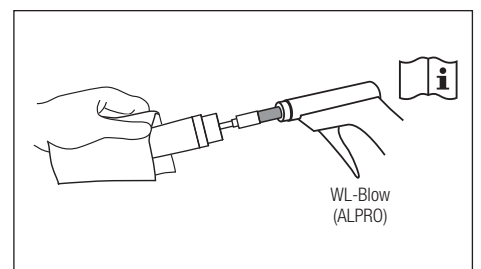5) Drene la humedad de la pieza de mano Ultrasónica mientras sujeta el WL-Blow (ALPRO) y la pieza de mano Ultrasónica.




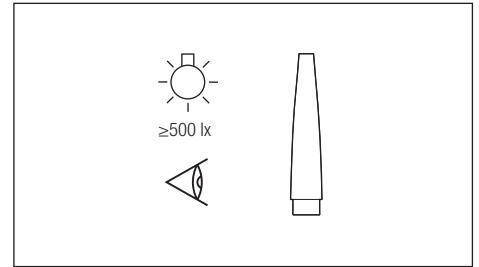- 6) Extraiga el WL-Adapter 01 (ALPRO) y la pieza de mano Ultrasónica del WL-Blow (ALPRO).
- 7) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 2) hasta que se elimine.



9-1-1-5 Varilla de vidrio

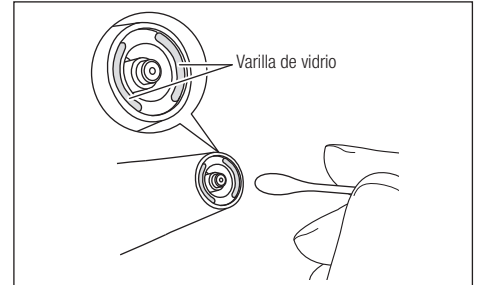Si se adhiere polvo o suciedad a la varilla de vidrio, límpiela cuidadosamente con un hisopo de algodón humedecido con alcohol desinfectante.



PRECAUCIÓN

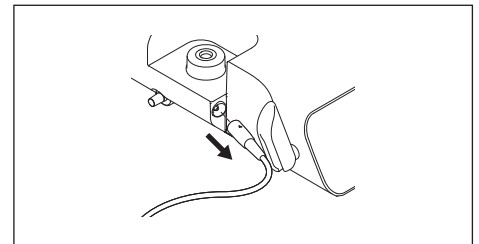


- No utilice una aguja o cuchillo para limpiar la varilla de vidrio. Si lo hace, podría dañar la varilla de vidrio, reduciendo su capacidad de transmisión.


9-1-2 Cable de pieza de mano no apantallado

Limpieza y desinfección


- 1) Desconecte el cable de la pieza de mano de la unidad de control.



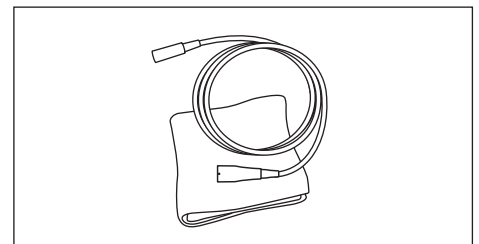
- 2) Limpie la superficie del cable de la pieza de mano con un paño que no suelte pelusa humedecido con agua.



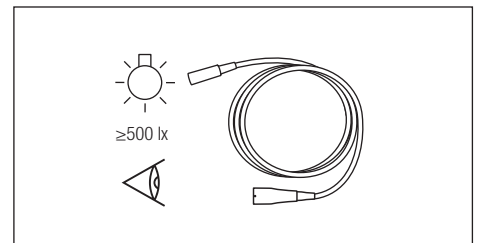
- 3) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 2) hasta que se elimine.



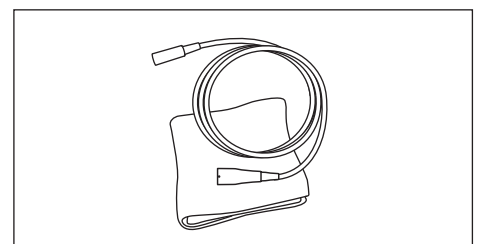- 4) Limpie la superficie del cable de la pieza de mano con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.



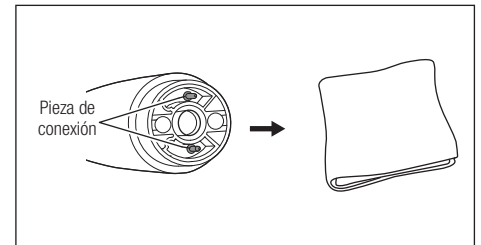- 5) Limpie la pieza de conexión con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.
Si un hisopo de algodón es demasiado grueso para limpiar la pieza de conexión, envuelva un pañuelo de papel mojado o similar alrededor de un palito fino y utilícelo para limpiar cuidadosamente la pieza de conexión.




PRECAUCIÓN

- Cuando limpie la pieza de conexión no utilice un palo con punta afilada ni pellizque el terminal. Si lo hace, podría dañar los contactos, provocando un contacto deficiente.


9-1-3 Recipiente de irrigación

9-1-3-1 Limpieza y desinfección

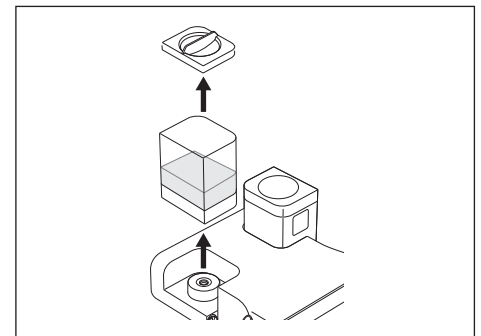
- 1) Retire el recipiente de irrigación del conector de la base del recipiente de irrigación y, a continuación, retire la tapa del recipiente de irrigación del recipiente de irrigación.



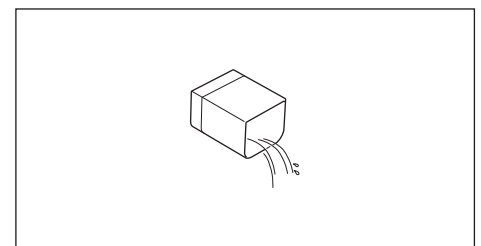
- 2) Drene el agua o desinfectante que quede en el recipiente de irrigación.



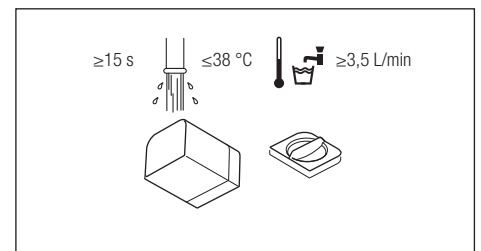- 3) Enjuague el recipiente de irrigación y la tapa del recipiente de irrigación con agua corriente.



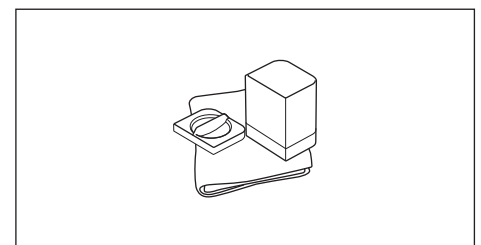- 4) Limpie las superficies del recipiente de irrigación y la tapa del recipiente de irrigación con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.




- 5) Conecte el recipiente de irrigación al conector de la base del recipiente de irrigación.


9-1-4 Pieza de mano Powder

9-1-4-1 Extracción de la punta de la boquilla

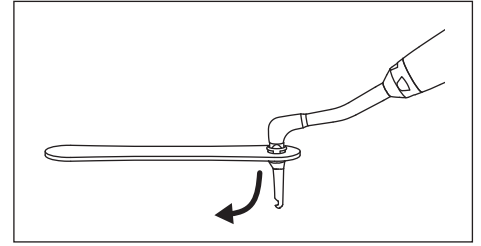- 1) Utilice la llave de punta de boquilla Perio Mate para extraer la punta de boquilla Perio Mate.



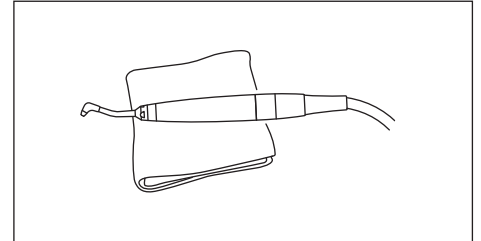- 2) Limpie la suciedad de la superficie de la pieza de mano Powder con un paño que no suelte pelusa humedecido con agua.



ADVERTENCIA

- Las puntas de boquilla son de un solo uso. No las reutilice. Si lo hace, podrían producirse infecciones.
- Deseche las puntas de boquilla Perio Mate como residuo médico.

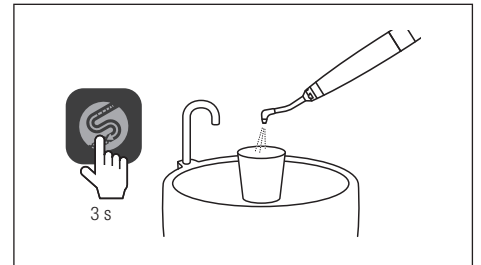
9-1-4-2 Autolimpieza




PRECAUCIÓN

- Durante la autolimpieza, el agua usada para la limpieza sale por la punta de la pieza de mano Powder. Prepare un recipiente, como un vaso, para recoger el agua.
- Antes de comenzar la autolimpieza, toque las teclas de volumen de irrigación (▲) para ajustar el nivel de agua a L5 (consulte "11-3 Ajuste del nivel de agua básico").

- 1) Dirija la punta de la pieza de mano Powder hacia un recipiente para recoger agua y, a continuación, toque durante tres segundos. Se inicia la autolimpieza (la limpieza dura 45 segundos).



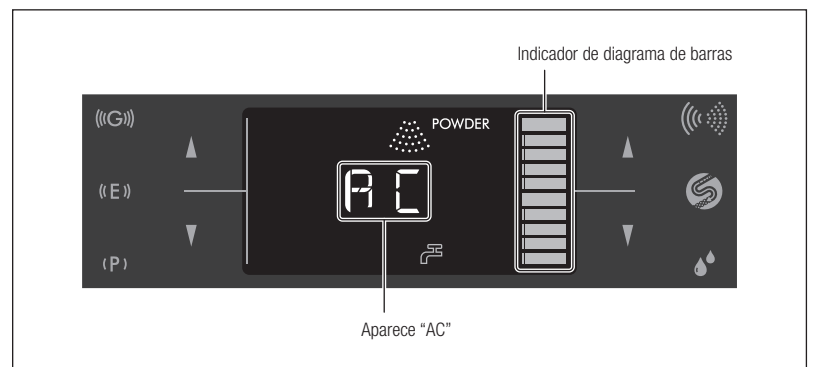
- 2) Durante la autolimpieza aparece "AC" en la pantalla LCD. El indicador del diagrama de barras muestra el progreso.



* Para cancelar autolimpieza, vuelva a tocar .


Cuando la autolimpieza ha finalizado, la unidad de control regresa al estado anterior al ciclo de autolimpieza.

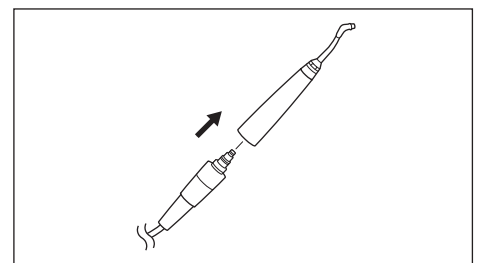- 3) Desconecte la pieza de mano Powder de la manguera de la pieza de mano.




9-1-4-3 Retirada del polvo

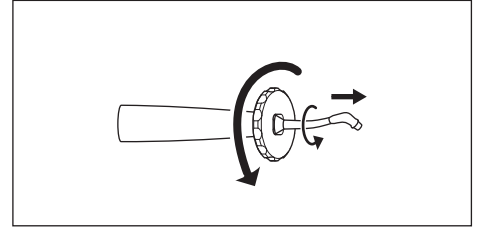1) Extraiga la boquilla de la pieza de mano Powder utilizando la llave de aro (accesorio).



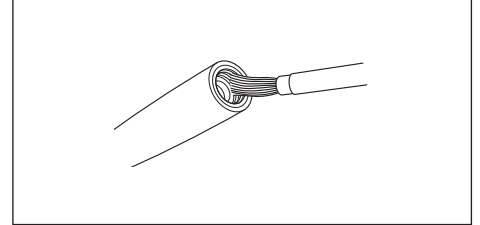2) Limpie el polvo adherido al interior de la pieza de conexión de la pieza de mano Powder utilizando el cepillo de limpieza (accesorio).




ADVERTENCIA


- Asegúrese de limpiar el interior de la pieza de mano Powder después del uso. Los restos de polvo en la pieza de mano Powder pueden solidificarse y provocar obstrucciones.

9-1-4-4 Limpieza previa

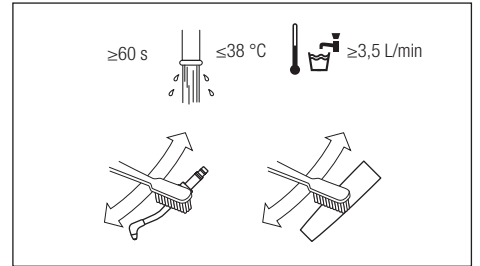
1) Limpie la pieza de mano Powder y la boquilla con agua corriente y un cepillo de cerdas suaves.



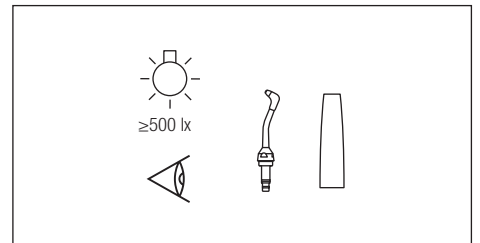2) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 1) hasta que se elimine.



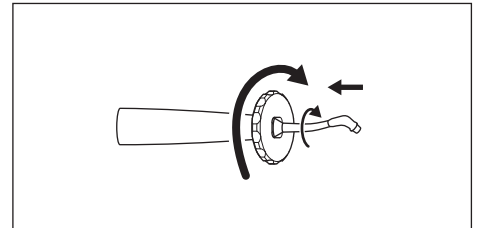3) Coloque la boquilla en la pieza de mano Powder.



PRECAUCIÓN

- Realice la limpieza ultrasónica al menos una vez a la semana para evitar que el polvo provoque obstrucciones. Realice la limpieza ultrasónica antes de la autolimpieza o después de aplicar el remedio descrito en "14 Resolución de problemas" ("9-3 Limpieza ultrasónica (semanal)").
- Asegúrese de utilizar la llave de aro suministrada para insertar y extraer boquillas. Cuando inserte o extraiga una boquilla, no la sujete por su extremo distal. Si lo hace, la boquilla podría deformarse.
- No utilice limpieza ultrasónica para limpiar piezas de mano Powder.

9-1-4-5 Limpieza y desinfección

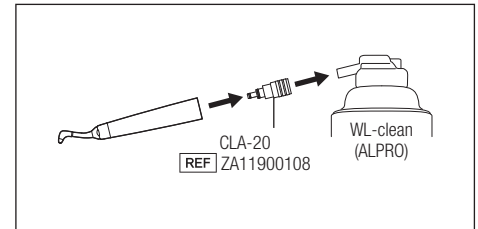
PRECAUCIÓN

- Si la junta tórica del CLA-20 se daña o deteriora, sustitúyala por una nueva antes del uso.
- Asegúrese de realizar la limpieza previa antes de la limpieza.
- Después de la desinfección, asegúrese de esterilizar la pieza de mano Powder (consulte “9-2 Esterilización”).
- Asegúrese de llevar a cabo la desinfección en un plazo de dos horas después de la limpieza.
- Cuando utilice un pulverizador (ALPRO), asegúrese de cubrir el cabezal de la pieza de mano Powder con un paño para evitar que se disperse el detergente o producto de desinfección. Recomendamos el uso del absorbedor de vapor de spray (Y900084).
- Cuando utilice productos ALPRO, consulte el manual del fabricante.


Manual

■ Limpieza

1) Coloque el CLA-20 (REF Z A11900108) en el WL-clean (ALPRO) y, a continuación, conecte la pieza de mano Powder al CLA-20.




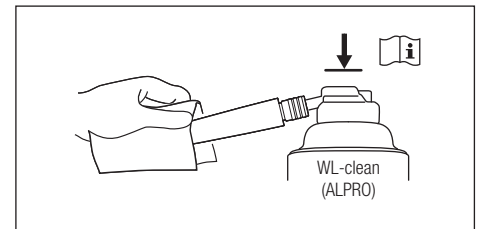2) Pulverice WL-clean (ALPRO) mientras sujeta el WL-clean (ALPRO) y la pieza de mano Powder.




3) Extraiga el CLA-20 y la pieza de mano Powder del WL-clean (ALPRO).

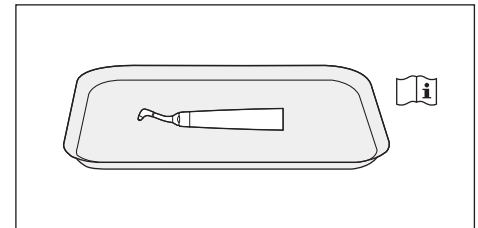4) Espere a que el WL-clean (ALPRO) haga efecto.




■ Desinfección

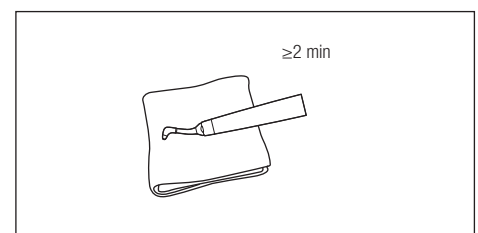
1) Limpie la superficie de la pieza de mano Powder con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.



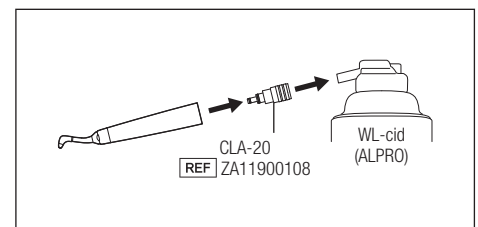
2) Coloque el CLA-20 (REF Z A11900108) en WL-cid (ALPRO) y, a continuación, conecte la pieza de mano Powder al CLA-20.



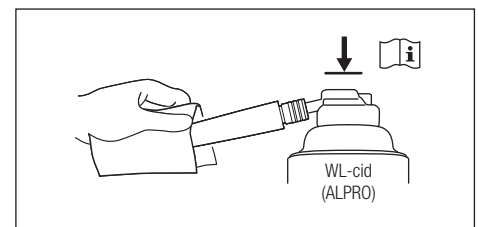
3) Pulverice WL-cid (ALPRO) sobre la pieza de mano Powder mientras sujeta el WL-cid (ALPRO) y la pieza de mano Powder.



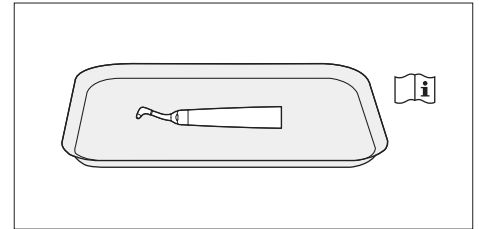- 4) Extraiga el CLA-20 y la pieza de mano Powder del WL-cid (ALPRO).
- 5) Espere a que el WL-cid (ALPRO) haga efecto.




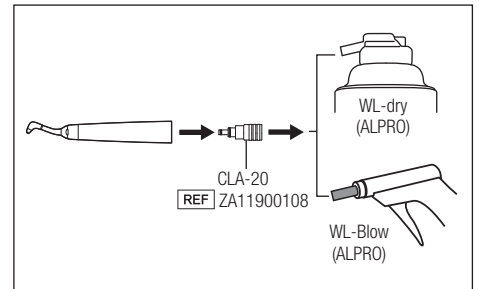- 6) Coloque el CLA-20 en WL-dry (ALPRO) o WL-Blow (ALPRO) y, a continuación, conecte la pieza de mano Powder al CLA-20.




- 7) Drene el desinfectante de la pieza de mano Powder mientras sujeta WL-dry (ALPRO) o WL-Blow (ALPRO) y la pieza de mano Powder.

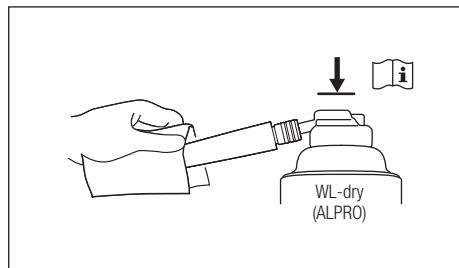
· Cuando utilice WL-dry (ALPRO):



· Cuando utilice WL-Blow (ALPRO):

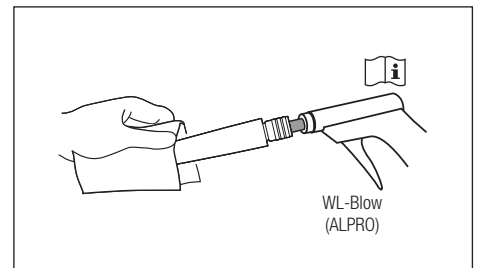

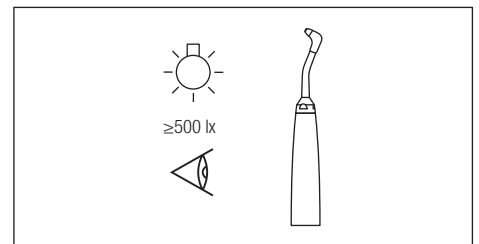- 8) Retire la pieza de mano Powder del WL-dry (ALPRO) o WL-Blow (ALPRO).
- 9) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 1) hasta que se elimine.



- 10) Continúe con la esterilización (consulte “9-2 Esterilización”).

Auto

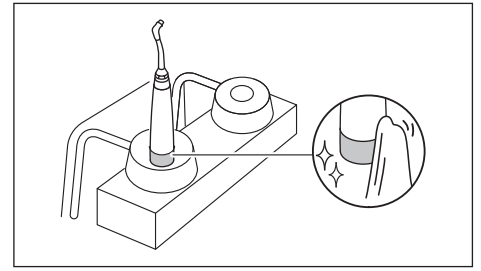
PRECAUCIÓN



- Utilice una lavadora-desinfectadora que cumpla la norma ISO 15883.
- Lea el manual de su lavadora-desinfectadora.
- Seque bien la pieza de mano Powder después la limpieza con una lavadora-desinfectadora. Si queda humedad, podría producirse corrosión interna y falta de lubricación.
- Cuando la termodesinfección y el ciclo de secado hayan finalizado, saque inmediatamente el producto de la lavadora-desinfectadora (en el plazo de una hora) y, a continuación, séquelo. Si queda humedad en el producto podría producirse corrosión interna y falta de lubricación.
- Cuando utilice una lavadora-desinfectadora, emplee un adaptador compatible con la lavadora-desinfectadora (preparado por el usuario) para limpiar y desinfectar la pieza de mano Powder.
- Para la autolimpieza y desinfección, siga las instrucciones del manual del fabricante de la lavadora-desinfectadora.

■ Limpieza y desinfección


- 1) Limpie la pieza de conexión de la pieza de mano Powder con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante y, a continuación, conecte la pieza de mano Powder al adaptador de la lavadora-desinfectadora.




Adaptador compatible con la lavadora-desinfectadora (comprado por el usuario)

| Fabricante | REF | Conexión aprox. | Color |
|------------|-----------|-----------------|-------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Verde |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Verde |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Negro |

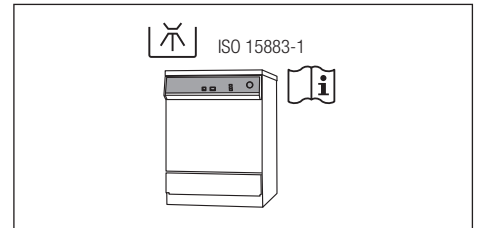
- 2) Realice la termodesinfección siguiendo el manual de la lavadora-desinfectadora.



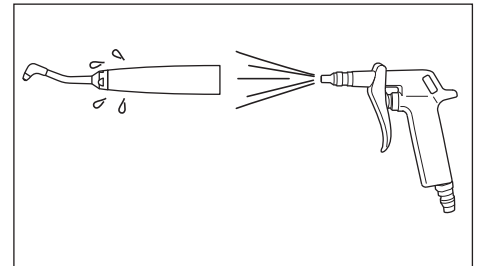- 3) Retire la humedad de la superficie y el interior de la pieza de mano Powder utilizando una pistola de aire comprimido o herramienta similar.



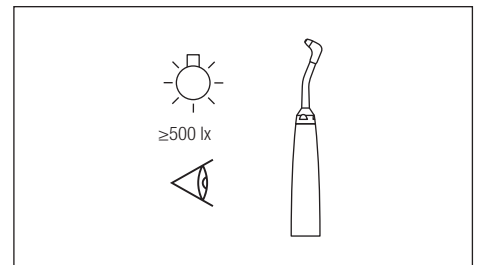- 4) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 2) hasta que se elimine.




- 5) Continúe con la esterilización (consulte "9-2 Esterilización").

9-1-5 Depósito y manguera de la pieza de mano


Realice el siguiente mantenimiento al final del día.

9-1-5-1 Retirada del polvo

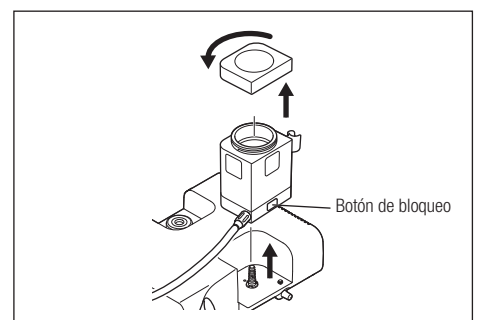- 1) Descargue la presión residual del depósito (consulte "8-6-4 Descarga de la presión residual").
 2) Pulse el botón de bloqueo y, a continuación, extraiga el depósito del conector de la base del depósito.
 Retire la tapa del depósito.




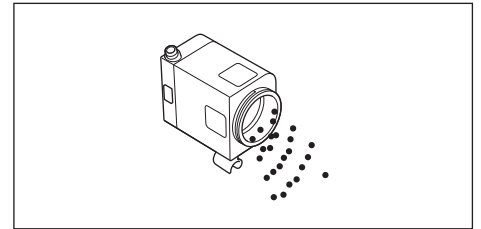3) Deseche el polvo del depósito (consulte “22 Eliminación del producto”).




4) Cierre firmemente la tapa del depósito y, a continuación, inserte en posición recta el depósito en el conector de la base del depósito.

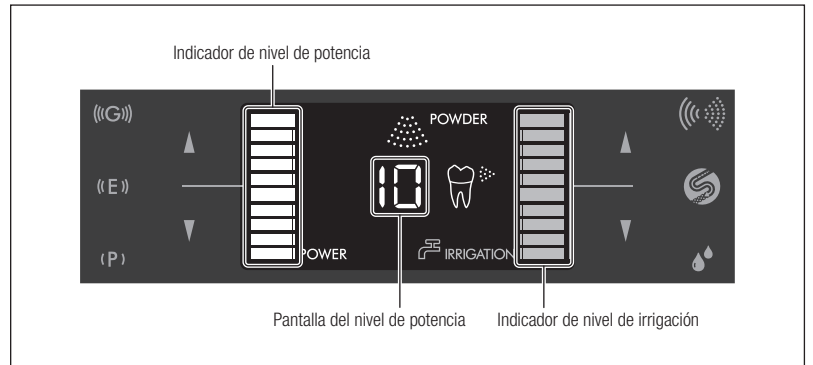5) Ajuste el nivel de potencia y el nivel de irrigación a “10” y al máximo, respectivamente.



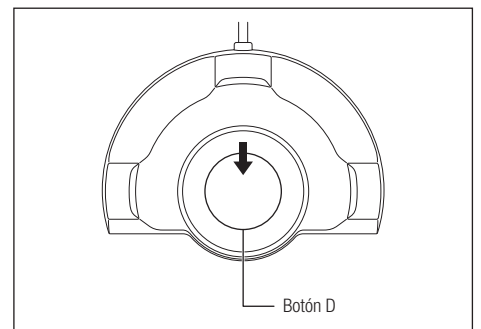6) Dirija la manguera de la pieza de mano hacia una escupidera o fregadero y pulse el botón D del interruptor de pedal para que funcione 5 veces durante más de un segundo.




7) Realice la autolimpieza para drenar los restos de polvo y agua de la manguera de la pieza de mano (consulte 9-1-4-2 Autolimpieza).

9-1-5-2 Limpieza y desinfección


- 1) Descargue la presión residual del depósito (consulte “8-6-4 Descarga de la presión residual”).
- 2) Pulse el botón de bloqueo y, a continuación, extraiga el depósito del conector de la base del depósito.

Retire la tapa del depósito y desconecte la manguera de la pieza de mano.

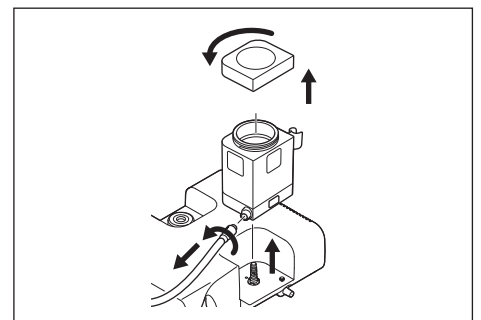
* Si el depósito no puede extraerse aunque haya pulsado el botón de bloqueo, desbloquee el botón de bloqueo (consulte “9-1-5-3 Desbloqueo del botón de bloqueo”).



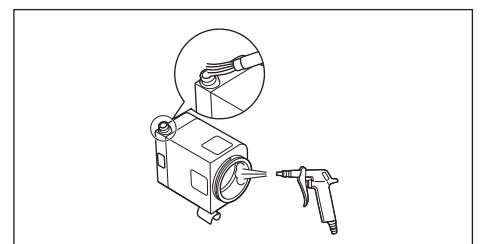- 3) Limpie el polvo que quede en la toma de conexión de la manguera de la pieza de mano y el depósito con una pistola de aire comprimido o herramienta similar.




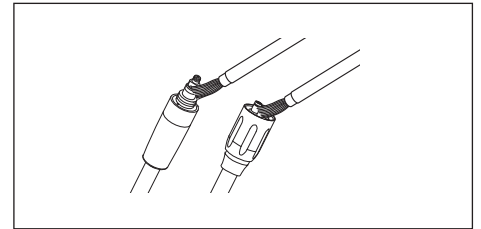4) Limpie los restos de polvo de ambos extremos de la manguera de la pieza de mano con un cepillo de limpieza (accesorio).




5) Asegúrese de que no queda polvo en la rosca de la tapa del depósito. Si quedan restos de polvo, límpielos (consulte "Limpieza de la tapa del depósito").

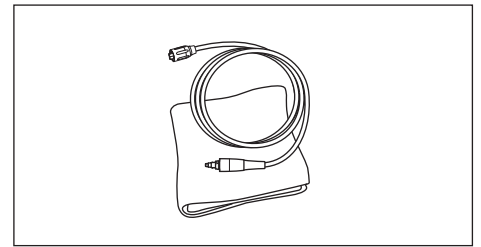
6) Limpie la superficie de la manguera de la pieza de mano con un paño que no suelte pelusa humedecido con agua.



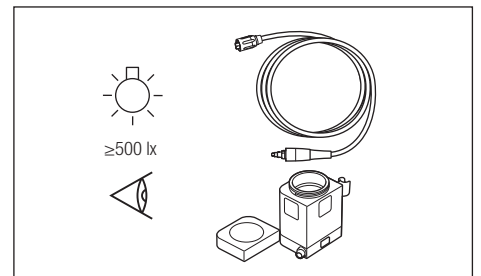7) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 3) hasta que se elimine.



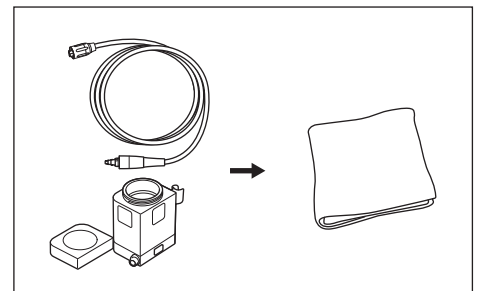8) Limpie las superficies del depósito, la tapa del depósito y la manguera de la pieza de mano con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.



9) Continúe con el almacenamiento (consulte "9-4 Almacenamiento") o inserte en posición recta el depósito en el conector de la base del depósito.

ADVERTENCIA



- Ajuste firmemente la tapa del depósito. Si no lo hace, la tapa del depósito podría salir despedida durante el uso, lo que podría producir daños en el dispositivo o lesiones.



PRECAUCIÓN

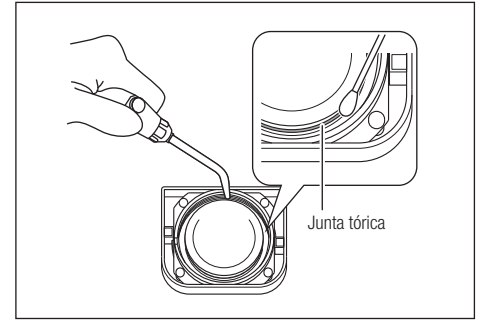


- Si se adhiere polvo a la rosca del depósito y/o a la tapa del depósito, resultará difícil cerrar la tapa. La limpieza del depósito y de la tapa del depósito facilita la apertura y cierre de la tapa (consulte "Limpieza de la tapa del depósito").
- Si el depósito no funciona correctamente, solicite a su distribuidor autorizado NSK que lo repare.
- Después del uso, retire todo el polvo adherido en el interior del depósito y limpie el depósito antes de guardarlo.
- No lave el depósito con agua. Si lo hace, el polvo puede solidificarse y causar obstrucciones. La presión de aire del depósito puede ser elevada y dificultar la apertura de la tapa durante un tiempo justo después del uso. En ese caso, espere un rato o descargue la presión residual antes de abrir la tapa (consulte "8-6-4 Descarga de la presión residual").
- Antes de conectar la manguera de la pieza de mano, el depósito y la pieza de mano, o el depósito y la unidad de control, asegúrese de secar todo el agua que pueda haber en las conexiones de la manguera y el depósito con aire seco. Si no lo hace, puede entrar humedad en el suministro de aire, lo que provocará la solidificación del polvo de limpieza dentro del producto.

Limpeza de la tapa del depósito

Si se adhiere polvo a la rosca del depósito y/o la tapa del depósito, resultará difícil cerrar la tapa del depósito. La limpieza del depósito y la tapa del depósito siguiendo el procedimiento mostrado abajo facilita la apertura y el cierre de la tapa.

- 1) Retire la tapa del depósito.
- 2) Limpie el interior del depósito, la rosca y el borde de la junta tórica de la tapa del depósito con un cepillo o un hisopo de algodón seco.




- 3) Retire el polvo adherido con aire comprimido.
- 4) Continúe con el almacenamiento (consulte "9-4 Almacenamiento") o inserte en posición recta el depósito en el conector de la base del depósito.

9-1-5-3 Desbloqueo del botón de bloqueo

Si el botón de bloqueo no puede pulsarse, imposibilitando la extracción del depósito, siga el procedimiento mostrado abajo para desbloquear el botón de bloqueo y extraer el depósito.

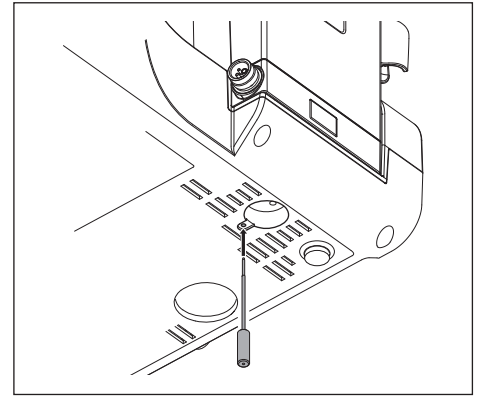- 1) Inserte completamente la herramienta de desbloqueo (accesorio) en el orificio de la parte inferior de la unidad de control para desbloquear el botón de bloqueo.



- 2) Retire la herramienta de desbloqueo.
- 3) Presione el botón de bloqueo y, a continuación, extraiga el depósito.
Si con el procedimiento mostrado arriba no puede desbloquear el botón de bloqueo, póngase en contacto con su distribuidor NSK autorizado.



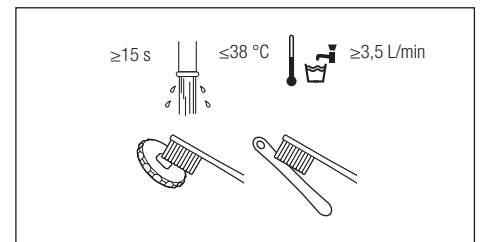
ADVERTENCIA

- No coloque la unidad de control boca abajo cuando esté desbloqueando el botón de bloqueo. Si lo hace, producirá una obstrucción de polvo.
- No gire la herramienta de desbloqueo cuando la inserte.


9-1-6 Llave de aro y llave de punta de boquilla Perio Mate

9-1-6-1 Limpieza y desinfección


- 1) Limpie la llave de aro y llave de punta de boquilla Perio Mate durante 15 segundos o más con agua corriente y un cepillo de cerdas suaves.



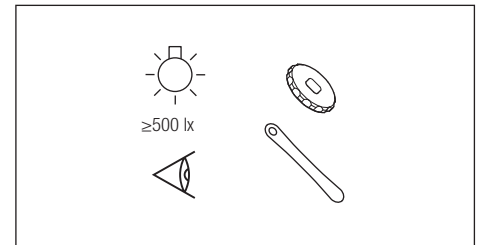2) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más).



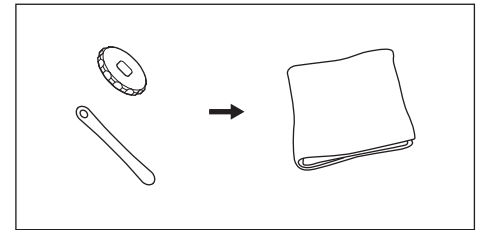3) Limpie la llave de aro y llave de punta de boquilla Perio Mate con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.




4) Continúe con la esterilización (consulte “9-2 Esterilización”).

9-1-7 Unidad de control e interruptor de pedal

9-1-7-1 Limpieza

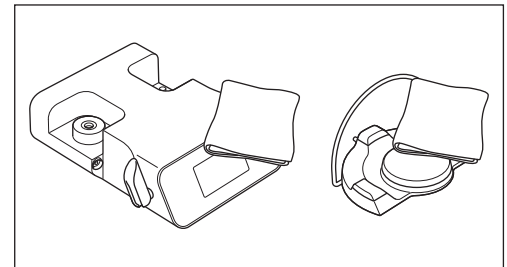- 1) Apague la alimentación.
- 2) Limpie la suciedad de las superficies de la unidad de control y el interruptor de pedal con un paño que no suelte pelusa humedecido con agua.
- 3) Limpie las superficies de la unidad de control y el interruptor de pedal con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante.



4) Continúe con el almacenamiento (consulte “9-4 Almacenamiento”).

PRECAUCIÓN

- No utilice disolventes como agua electrolizada oxidante (agua muy ácida o superácida), productos químicos alcalinos o muy ácidos, disolventes, bencina o diluyente que contengan cloro, para limpiar, sumergir o lavar el producto.

9-2 Esterilización


Se ha comprobado la eficacia del siguiente procedimiento de esterilización de conformidad con la norma ISO 17665.

Elementos esterilizables:

Pieza de mano Ultrasónica, pieza de mano Powder, llave de aro, llave de punta de boquilla Perio Mate

- 1) Introduzca los productos en una bolsa de esterilización que cumpla la norma ISO 11607-1 y selle la bolsa.
- 2) Realice la esterilización en las siguientes condiciones.

| Tipo | Desplazamiento por gravedad (Clase N) | Prevació (Clase B) |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Temperatura | 132 °C | 134 °C |
| Duración de esterilización | ≥15 min | 3-18 min |

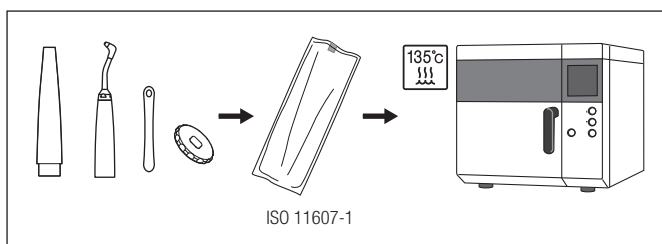

3) Continúe con el almacenamiento (consulte “9-4 Almacenamiento”).



PRECAUCIÓN

- Obedezca siempre las normas, directrices, directivas locales, etc. relativas al reprocesamiento de equipos.
- Utilice una bolsa de esterilización que cumpla la norma ISO 11607-1.
- No coloque otros instrumentos junto a los elementos de este producto en una bolsa de esterilización para realizar la esterilización con autoclave. Si lo hace, se decolorará la superficie del producto y afectará a las piezas internas. Además, preste atención para no dejar que entre ningún producto químico en el producto durante el proceso con autoclave.
- Asegúrese de utilizar esterilizadores que puedan realizar la esterilización hasta 135 °C.
- No utilice un esterilizador que supere los 135 °C durante el ciclo de secado. Podría producirse una avería en el producto. Para obtener más información, consulte al fabricante del esterilizador.
- Almacene el producto en un lugar donde no haya riesgo de efectos adversos de presión atmosférica, temperatura, humedad, ventilación, luz solar, polvo, sal y atmósfera sulfúrica.
- No caliente ni enfríe el producto demasiado rápidamente durante la esterilización. Los cambios rápidos de temperatura deterioran el producto.
- No toque el producto nada más finalizar la esterilización porque está caliente.
- En relación con este producto, no se ha comprobado la eficacia de otros métodos distintos a la esterilización por vapor (como la esterilización por plasma y la esterilización por óxido de etileno (EOG)).
- Cuando haya finalizado la esterilización, saque el producto del esterilizador en el plazo de una hora. Si no lo hace, podría producirse corrosión.
- No esterilice piezas que no sean elementos esterilizables.

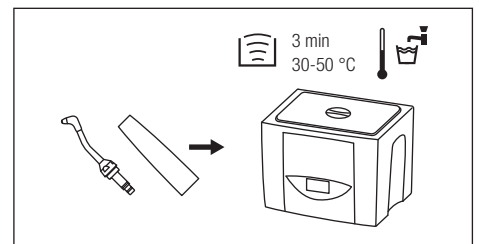
IMPORTANTE

- Recomendamos el esterilizador de clase B estipulado en la norma EN13060.
- Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento publicado por el fabricante del esterilizador.
- Aunque la pieza de mano puede decolorarse debido al calor después de repetidas esterilizaciones con autoclave, esto se debe a las características del producto y no indica ningún problema de calidad del producto.


9-3 Limpieza ultrasónica (semanal)

Asegúrese de realizar la limpieza y desinfección antes de la limpieza ultrasónica (consulte “9-1-4 Pieza de mano Powder”).


- 1) Limpie la pieza de mano Powder y la boquilla utilizando limpieza ultrasónica.



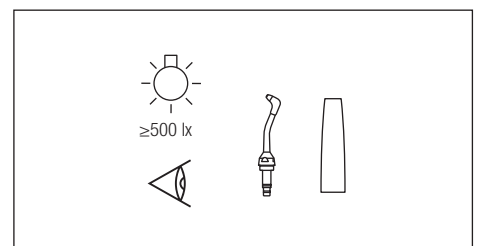
- 2) Compruebe si hay suciedad con una iluminación apropiada (500 lx o más). Si hay suciedad, repita desde el paso 1) hasta que se elimine.



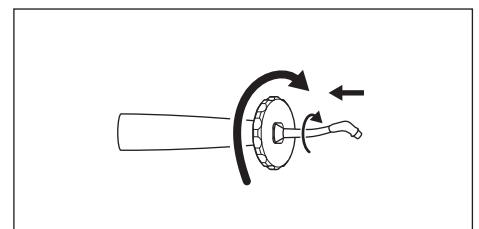- 3) Coloque la boquilla en la pieza de mano Powder utilizando la llave de aro (accesorio).



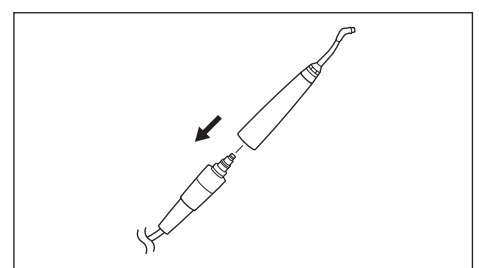- 4) Inserte en posición recta la pieza de mano Powder en la clavija de la manguera de la pieza de mano.



5) Realice la autolimpieza y la esterilización (consulte "9-1-4-2 Autolimpieza" y "9-2 Esterilización").

PRECAUCIÓN

- Después de la limpieza ultrasónica, realice la autolimpieza para eliminar la humedad interna y, a continuación, seque bien el producto.
- Después de la autolimpieza, asegúrese de realizar la esterilización.
- No utilice limpieza ultrasónica para limpiar piezas de mano Ultrasónica. Provoca averías.

9-4 Almacenamiento

Almacene el producto en un entorno donde se mantenga desinfectado y esterilizado hasta el próximo uso.

PRECAUCIÓN

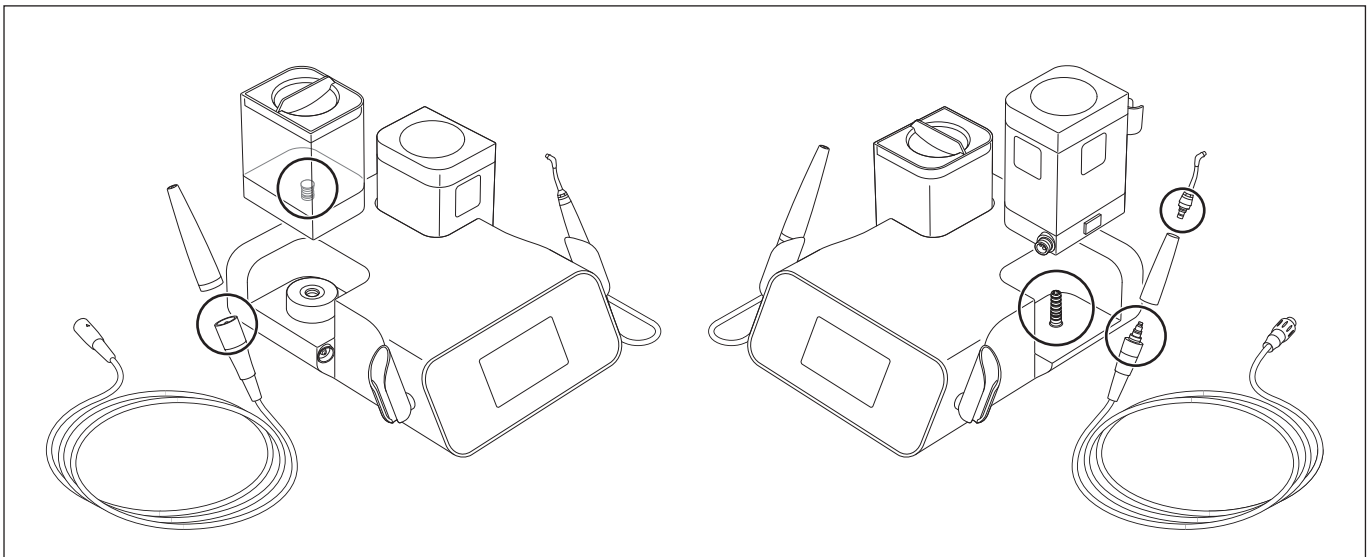
- Almacene el producto en un lugar donde no haya riesgo de efectos adversos de presión atmosférica, temperatura, ventilación, luz solar, polvo, sal y atmósfera sulfúrica.

10 Cuidado y mantenimiento

10-1 Mantenimiento de las juntas tóricas

Realice el mantenimiento para reducir el desgaste de las juntas tóricas en las piezas objetivo y evitar fugas de agua o aire.

* Póngase en contacto con su distribuidor NSK autorizado para la sustitución de la junta tórica de la tapa del depósito.




ULTRASONIC

10-1-1 Cable de pieza de mano no apantallado

- 1) Retire el cable de pieza de mano no apantallado de la unidad de control.
- 2) Retire la junta tórica que desea sustituir con la ayuda de una aguja, etc.
- 3) Coloque la nueva junta tórica en la ranura donde se encontraba la junta tórica usada.

* Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener más información sobre las juntas tóricas de sustitución.

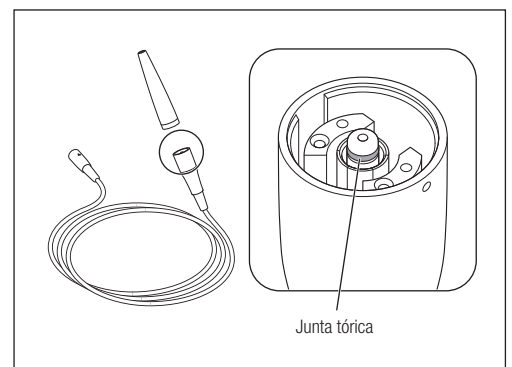
REF Y1003546



10-1-2 Manguera de la pieza de mano (para uso de Prophy y uso de Perio)

- 1) Retire la manguera de la pieza de mano Powder y el depósito.
 - 2) Retire las juntas tóricas de la clavija de la manguera de la pieza de mano con la ayuda de una aguja, etc. Si hay polvo en las ranuras de las juntas tóricas, límpielas antes de colocar las nuevas juntas tóricas.
 - 3) Coloque las nuevas juntas tóricas en las ranuras donde se encontraban las juntas tóricas usadas.
 - 4) Aplique una gota del aceite para turbina suministrado y extiéndalo con el dedo.
- * Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener mas información sobre las juntas tóricas de sustitución.

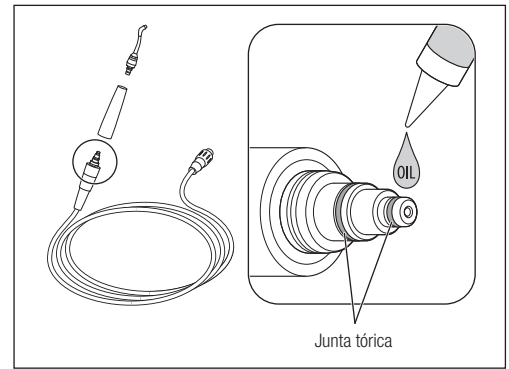REF Y1003500



PRECAUCIÓN

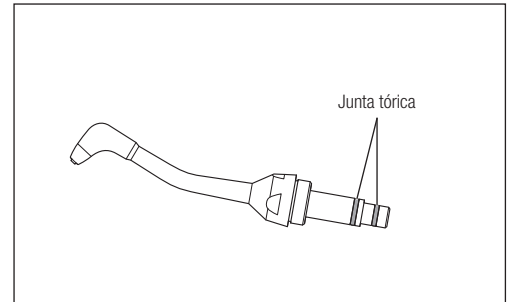


- Si no se lubrica la zona de la junta tórica en la parte de la pieza de mano puede dañarse la sección de la junta, lo que provocará problemas al girar la conexión de la pieza de mano. También puede causar fugas de agua.

10-1-3 Boquilla (para uso de Prophy y uso de Perio)

- 1) Pase la llave de junta suministrada por el extremo de la boquilla, afloje la boquilla, y retírela de la pieza de mano.
 - 2) Retire las juntas tóricas del extremo de la boquilla con una aguja, etc. Si hay polvo en las ranuras de las juntas tóricas limpie la ranura antes de insertar la nueva junta tórica.
 - 3) Coloque las nuevas juntas tóricas en las ranuras de donde se retiraron las usadas.
- * Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener más información sobre reemplazo de Juntas tóricas.


REF Y1003501



10-1-4 Recipiente de irrigación

- 1) Retire las juntas tóricas de la junta del recipiente de irrigación con la ayuda de una aguja, etc.
 - 2) Coloque las nuevas juntas tóricas en las ranuras donde se encontraban las juntas tóricas usadas.
- * Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener más información sobre las juntas tóricas de sustitución.

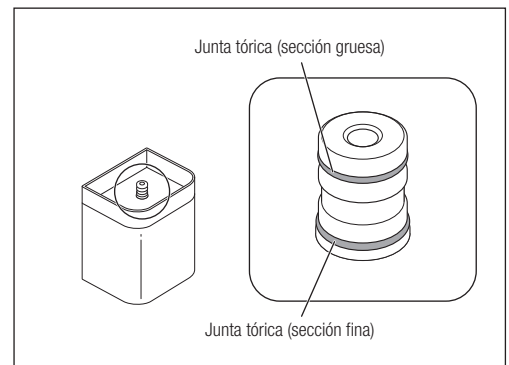REF Y1003544



PRECAUCIÓN

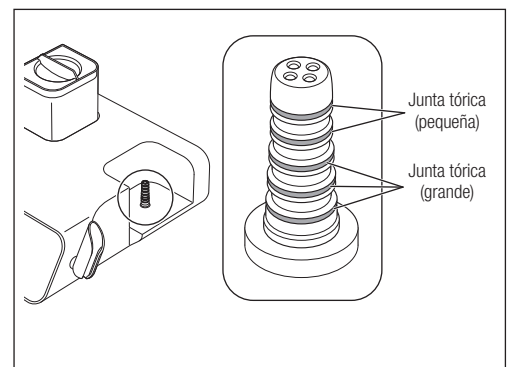


- Las juntas tóricas tienen grosores diferentes. Asegúrese de colocarlas en la ranura correcta.

10-1-5 Conector de la base del depósito

- 1) Retire las juntas tóricas del conector de la base del depósito con la ayuda de una aguja, etc.
 - 2) Coloque las nuevas juntas tóricas en las ranuras donde se encontraban las juntas tóricas usadas.
- * Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener más información sobre las juntas tóricas de sustitución.

REF Y1003435




PRECAUCIÓN




- Asegúrese de sustituir las juntas tóricas en la posición correcta, pues tienen tamaños distintos.

10-2 Cambio del conjunto de bomba de irrigación

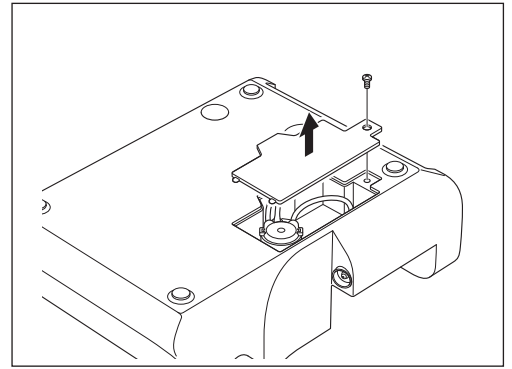
- 1) Retire el recipiente de irrigación, el depósito, el cable de potencia, el cable de pieza de mano no apantallado y el interruptor del pedal de la unidad de control.
- 2) Dé la vuelta a la unidad de control. Use un destornillador de estrella para quitar el tornillo de la cubierta del conjunto de bomba de irrigación y retire la cubierta.



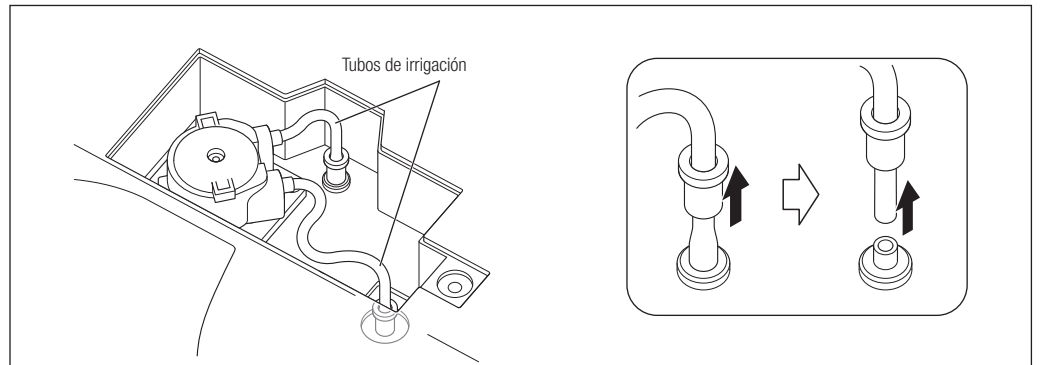
- 3) Retire los dos tubos de irrigación de la unidad de control.



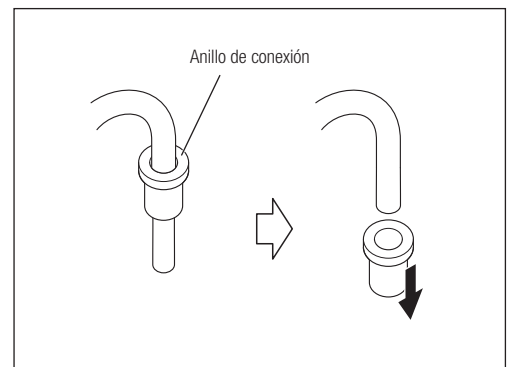
- 4) Retire el anillo de conexión del tubo de irrigación. No lo deseche. Puede utilizar el anillo en el conjunto de bomba de irrigación de sustitución.



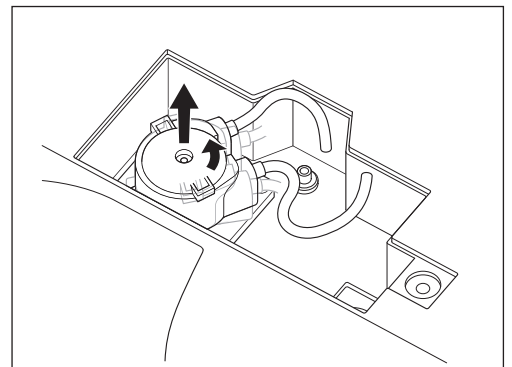
- 5) Gire el conjunto de bomba de irrigación en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic y tire de él.



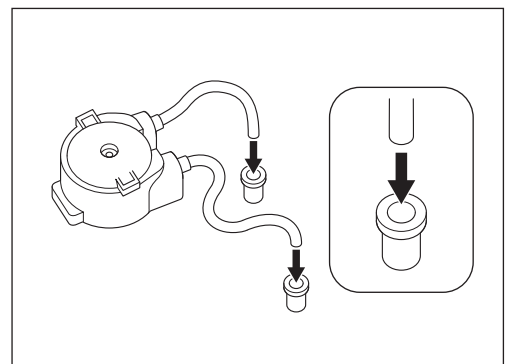
- 6) Monte los anillos de conexión en los tubos de irrigación del nuevo conjunto de bomba de irrigación (opcional). Asegúrese de que el anillo esté orientado correctamente.



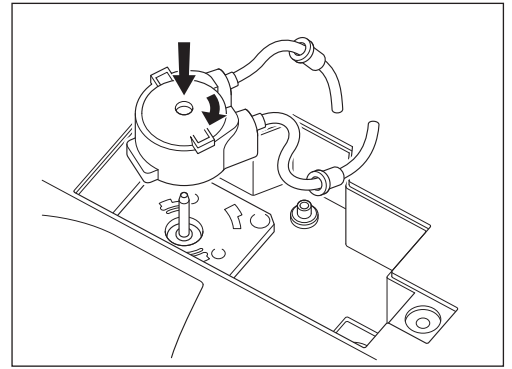- 7) Alinee el nuevo conjunto de bomba de irrigación (opcional) con el eje del motor.
Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic.



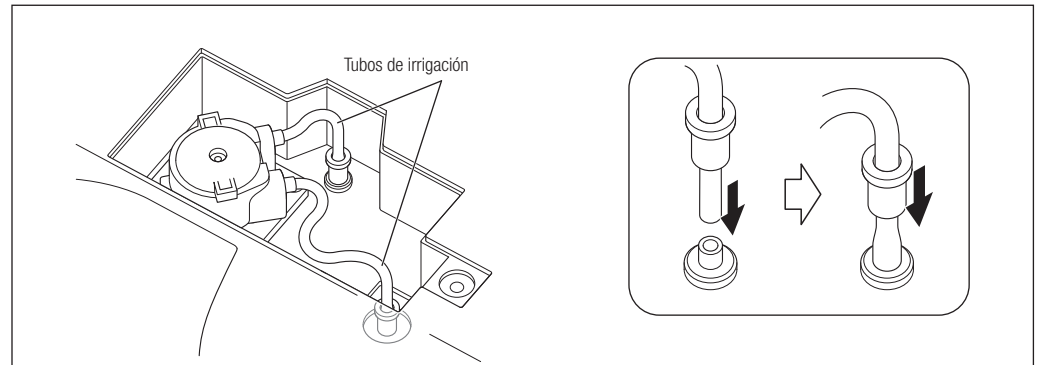
- 8) Monte el tubo de irrigación. Presione firmemente el anillo de conexión hacia la unidad de control hasta el tope.



- 9) Alinee el gancho de la cubierta del conjunto de bomba de irrigación y el orificio de la unidad de control. Monte la cubierta.
* Para más información sobre el conjunto de bomba de irrigación, consulte "21 Lista de piezas de recambio".

PRECAUCIÓN

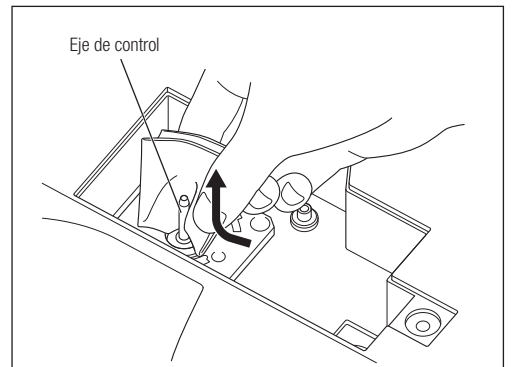- Antes de sustituir el conjunto de bomba de irrigación, pase un paño para eliminar el exceso de agua del conjunto y el eje de control. Unos ejes de control y rodillos mojados pueden estar resbaladizos y provocar un funcionamiento inadecuado.
- Limpie con un paño la suciedad y el agua del eje de control desde abajo.
- Introduzca el conjunto de bomba de irrigación de sustitución en el eje de control de forma recta, despacio y con cuidado para evitar dañar los rodillos de la bomba.
- Después de sustituir el conjunto de bomba de irrigación, haga funcionar este producto durante unos 10 segundos con el modo de irrigación configurado en recipiente y el volumen de irrigación al máximo para que el tubo de irrigación se adapte a la nueva bomba.
- Asegúrese de que el tubo de irrigación no pueda doblarse ni torcerse. Si el tubo se instala de forma incorrecta, es posible que no se suministre agua de irrigación.
- Asegúrese de que el tubo no quede atrapado debajo de la cubierta del conjunto de bomba de irrigación al cerrarla.
- Utilice solo el conjunto de bomba de irrigación específico para Varios Combi Pro. El uso de otras bombas no está permitido.




- IMPORTANTE**
- Realice una limpieza periódica del eje de control con un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol desinfectante. La suciedad en el eje de control puede provocar un funcionamiento incorrecto de la bomba.
 - La bomba es una pieza consumible. Si el volumen de irrigación disminuye de forma considerable, sustituya la bomba.

10-3 Cambio del filtro de agua

Si utiliza agua de grifo, cambie el filtro de agua una vez al año.


Si nota que el flujo de agua ha disminuido, cambie el filtro de agua antes de que trascorra un año.

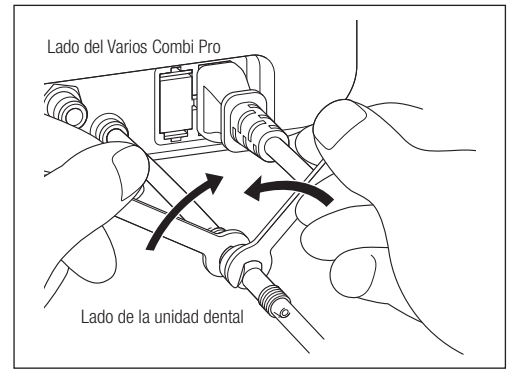- 1) Cierre la válvula de agua de la unidad dental.
- 2) Coloque la unidad de control sobre un paño, etc., por si se produjeran fugas de agua.
- 3) Utilice las dos llaves inglesas (5x8) y gírelas tal y como se muestra en la figura.
- 4) Retire el alojamiento del filtro de agua y extraiga el filtro de agua.



- 5) Coloque el nuevo filtro de agua con la junta tórica en el lado del Varios Combi Pro y vuelva a montar el conjunto siguiendo el procedimiento de desmontaje a la inversa.

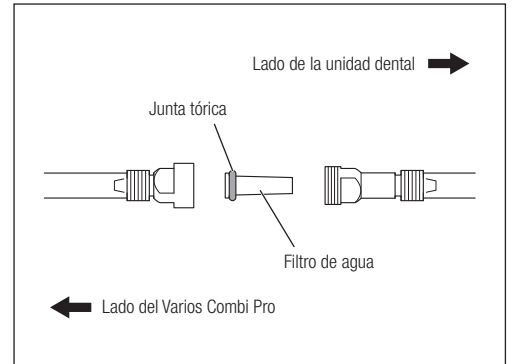* Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener más información sobre el filtro de agua opcional.




PRECAUCIÓN

- Asegúrese de colocar el filtro de agua en la orientación adecuada. De lo contrario, el filtro no funcionará correctamente.

10-4 Comprobación del filtro de aire

Cuando se observen síntomas como reducción del nivel de potencia u obstrucción frecuente del polvo, expulse agua pulsando la punta del filtro de aire situada en la parte inferior de la unidad de control.

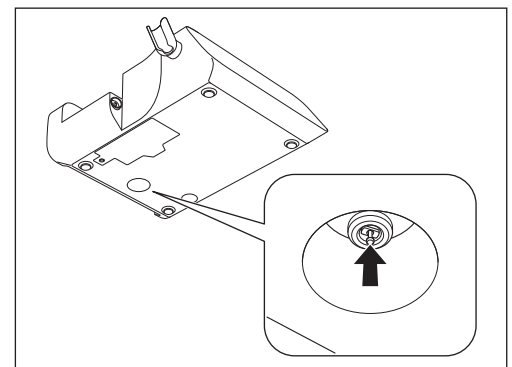
Si no puede obtenerse un nivel de potencia suficiente como resultado de un uso prolongado, puede que el elemento VCP esté obstruido. Si eso sucede, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.



10-5 Sustitución del fusible

- 1) Apague el interruptor de encendido.
- 2) Desconecte el cable de potencia CA de la toma de corriente de pared.
- 3) Extraiga la caja de fusibles situada en la parte posterior de la unidad de control mientras mantiene los clavos situados en ambos extremos presionados hacia dentro.
- 4) Sustituya el fusible por uno nuevo.
- 5) Vuelva a colocar la caja de fusibles en su sitio.

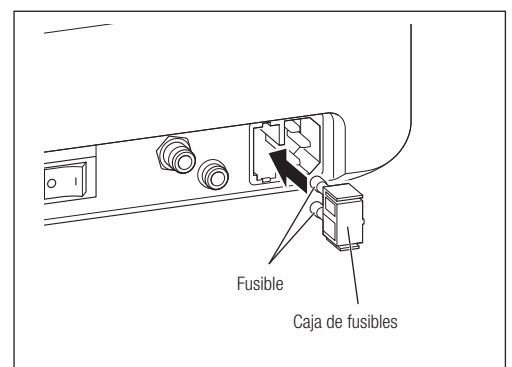* Consulte "21 Lista de piezas de recambio" para obtener más información sobre los fusibles de sustitución.



PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente los fusibles recomendados por NSK. Si se utilizan otros fusibles, podrían producirse fallos.
- Si se ha fundido un fusible y no conoce el motivo, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.

IMPORTANTE

- Si la caja de fusibles no sale con facilidad, utilice una herramienta de punta dura para empujar los clavos mientras extrae la caja de fusibles.

11 Otras funciones

11-1 Restauración de valores (a la configuración de fábrica)

Los valores de ajuste para cada uno de los modos quedan almacenados en este producto. Estos valores pueden restaurarse a la configuración de fábrica.

- 1) Encienda el botón de encendido mientras pulsa el botón B del interruptor del pedal.
- 2) Se muestra "Clr" en el panel LCD. Cuando aparezca "Clr", suelte el botón B del interruptor del pedal y luego pulse el botón D para comenzar con la restauración.
- 3) Una vez que la restauración se ha completado, aparece "Fin" en el panel LCD. Se oye una alarma y el producto comienza en el modo normal. (Consulte la tabla siguiente de los ajustes iniciales).


| | Modo Ultrasónica | Modo Powder | |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------|
| | | Modo Propy | Modo Perio |
| Selección del modo Ultrasónica | Perio | - | |
| Nivel de potencia | 1 | 1 | 1 |
| Modo de irrigación | Recipiente | - | |
| Volumen de irrigación | 10 | 10 | 10 |

(Establecido en agua de grifo)



11-2 Uso del soporte de punta (para punta ultrasónica, opcional)

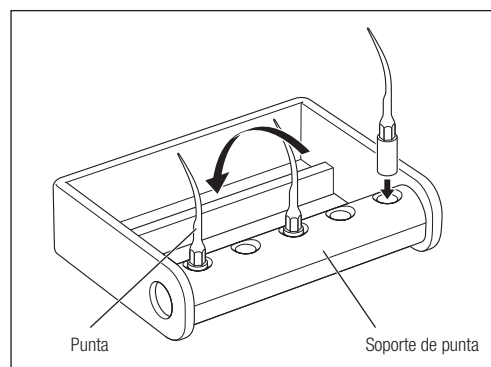
- Use el soporte de punta para guardar las puntas después de desmontarlas de la pieza de mano.
- El soporte de punta puede esterilizarse con autoclave. Puede esterilizarse un máximo de 5 puntas a la vez. Gire el soporte en la dirección de la flecha de modo que las puntas quepan en la caja de esterilización.



11-3 Ajuste del nivel de agua básico

El nivel de agua básico puede ajustarse en función de la presión de suministro de agua en el entorno de uso. Si el volumen de irrigación es demasiado alto o demasiado bajo, incluso al ajustarlo con las teclas de volumen de irrigación, realice el siguiente procedimiento para ajustar el nivel de agua básico.

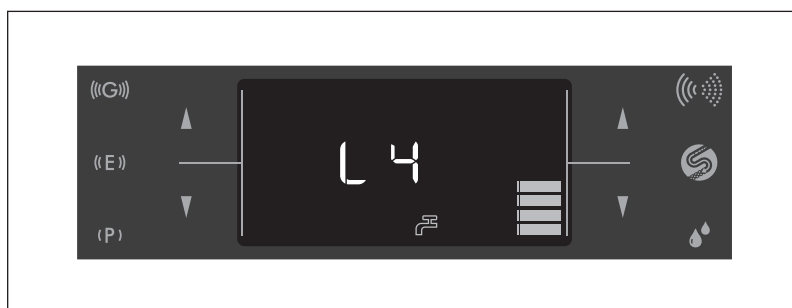- 1) Encienda el interruptor de encendido de la unidad de control.
- 2) Toque la tecla de selección del modo de funcionamiento para seleccionar el modo Powder.
- 3) Mantenga pulsada durante 2 segundos la tecla de selección del modo de irrigación. Se oye una alarma y el panel LCD cambia al modo de ajuste de nivel de agua básico.
- 4) Toque las teclas de volumen de irrigación (▲/▼) para cambiar el nivel de agua básico ("L1" - "L5"). Ajuste el nivel según requiera.
- 5) Mantenga pulsada durante 2 segundos la tecla de selección del modo de irrigación para guardar el nivel seleccionado en la memoria. Se oye una alarma y el nivel seleccionado se guarda. A continuación, el panel LCD cambia al modo normal.



Modo de ajuste de nivel de agua básico [Nivel de agua 4]

IMPORTANTE • El nivel de agua básico regresa a "L4" cuando este producto se restaura a los valores predeterminados de fábrica. Tras dicha restauración, configure de nuevo el nivel de agua básico.

Referencia

| Nivel | Volumen de agua |
|--------------------|-------------------|
| L5 | Alto ↑ Bajo |
| L4 (valor inicial) | |
| L3 | |
| L2 | |
| L1 | |

12 Comprobaciones periódicas de mantenimiento

Consulte la siguiente hoja de verificación y realice comprobaciones de mantenimiento periódicas cada tres meses. En caso de detectar alguna anomalía, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.

| Puntos que comprobar | Detalles |
|---------------------------|---|
| Pieza de mano Ultrasónica | Haga vibrar la pieza de mano Ultrasónica y compruebe que no haya anomalías en la vibración, ruido, calor, etc. Compruebe también que el LED se ilumine y que el agua fluya. |
| Tapa del depósito | Compruebe que no haya arañazos grandes o profundos. |

| Puntos que comprobar | Detalles |
|--|--|
| Pulverización de polvo | Después de cargar el polvo, pulverice polvo en una escupidera o un recipiente similar y verifique que no haya fugas de polvo en las conexiones, exceptuando en la conexión de la punta de la boquilla. |
| Pulverización de agua | Después de cargar el polvo, pulverice polvo en una escupidera o un recipiente similar y verifique que no haya fugas de agua en las conexiones, exceptuando en la conexión de la punta de la boquilla. |
| Depósito | Compruebe que no haya arañazos grandes o profundos. |
| Montaje/desmontaje de la pieza de mano, la manguera de la pieza de mano, el recipiente de irrigación y el depósito | Compruebe que puedan montarse y desmontarse fácilmente. Si están demasiado sueltos o demasiado apretados, es posible que las juntas tóricas estén dañados o deteriorados. Sustituya las juntas tóricas. (Consulte "10 Cuidado y mantenimiento"). |

Información de seguridad adicional:

Los ensayos de seguridad periódicos deben realizarse cada dos años de conformidad con IEC 62353 (EN 62353) y de acuerdo con el procedimiento de ensayo OM-DE0947EN.

Como los ensayos de seguridad periódicos están limitados exclusivamente a instaladores dentales profesionales que han sido formados y cualificados bajo control de NSK, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.

13 Código de error

Si este producto deja de funcionar debido a un mal funcionamiento, una presión excesiva, una desconexión o un funcionamiento incorrecto, en el panel LCD de la unidad de control aparece "Error" y un código de error. Pulse el botón D del interruptor del pedal para volver a realizar la comprobación de errores. Si no se detecta el problema, se anula el estado de error y el producto vuelve a estar operativo. Si todavía se muestra el código de error, consulte la tabla siguiente y siga los pasos necesarios para resolver el problema.

| Código de error | Descripción del error | Comprobación/solución |
|-----------------|---|--|
| 0 | Error de sistema | Vuelva a encender la unidad de control. Si el error no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 1 | Anomalía en la tensión de 24 V | |
| 2 | Anomalía en la tensión de 12 V | |
| 3 | Anomalía en la corriente de la bomba | Compruebe la conexión del conjunto de bomba de irrigación. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 4 | Anomalía en la presión de aire | Compruebe la presión de aire de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 5 | Anomalía en la tensión del calentador | Vuelva a encender la unidad de control. Si el error no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 6 | Anomalía en la corriente del calentador | |
| 7 | Anomalía en la temperatura del calentador | Compruebe el circuito de agua y el suministro de agua a la unidad de control. Deje que la unidad de control se enfríe antes de usarla. Si el error no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor. |
| 8 | Anomalía en la comunicación del interruptor del pedal | Compruebe la conexión del interruptor del pedal. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 9 | Anomalía en la pieza de mano Ultrasónica | Compruebe la conexión de la pieza de mano. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 12 | Anomalía en la comunicación del sensor táctil | Apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |
| 13 | Error en la autocomprobación de la unidad ultrasónica | |
| 14 | Error de sistema de la unidad ultrasónica | |

14 Resolución de problemas

Si está experimentando problemas, compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.

(Modo Ultrasónica y modo Powder)



| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Pitido. | Se ha activado la alimentación mientras se estaba pulsando el interruptor del pedal. | Suelte el interruptor del pedal y encienda el interruptor de encendido. |
| | Calentamiento anormal de la unidad de control. | Detenga el funcionamiento y deje que la unidad de control se enfríe. |
| El panel táctil no responde bien o no se reconoce correctamente la tecla pulsada. | La calibración está ligeramente desalineada debido a electricidad estática, ruido exógeno, etc. | Apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo. |
| | La tecla no se ha pulsado por el centro. | Pulse la tecla por el centro. |

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> El agua no se detiene No se puede ajustar el nivel del agua | La junta tórica está dañada o desgastada. | Siga el procedimiento descrito en “10-1-5 Conector de la base del depósito” para sustituir la junta tórica. |
| | Se ha producido una obstrucción en el circuito del agua debido a algún material extraño. | Lleve a cabo la autolimpieza. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado. |

(Modo Ultrasónica)



| Problema | Causa | Solución |
|---|--|--|
| Se oye una alarma, y la pantalla del modo Ultrasónica (P/E/G) y “ULTRASONIC” parpadean alternativamente cuando se pulsa el botón D del interruptor del pedal. | El sensor integrado en el soporte de la pieza de mano está sucio y detecta por error el montaje de la pieza de mano. | Limpie con un paño el sensor. |
| Vibración escasa/inexistente. | El cable de potencia CA no está conectado a la toma de pared o no hay electricidad en la toma de pared. | Compruebe la conexión. |
| | El fusible se ha fundido. | Consulte “10-5 Sustitución del fusible” y sustituya el fusible. |
| | La punta no se ha ajustado con la suficiente firmeza. | Gire la llave para punta (CR-10) hasta que haga clic y ya no pueda girar más. Si el problema persiste, sustituya la llave para punta (CR-10) ya que puede que esté desgastada. |
| | Punta desgastada. | Sustituya la punta. |
| | Las piezas roscadas de la pieza de mano y la punta no están limpias. | Límpielas con un paño. |
| | Las piezas roscadas de la pieza de mano están desgastadas como resultado de mucho tiempo de uso. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| | La potencia de la punta no se ha ajustado correctamente. | Ajuste la potencia de modo que no supere el nivel de potencia máximo indicado en la guía de potencia de la punta o en la etiqueta de la caja de la punta. |
| | El interruptor del pedal está desconectado. | Conecte correctamente la clavija del cable del interruptor del pedal. |
| | Fallo del vibrador en la pieza de mano. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| | Fallo de los componentes internos del interruptor del pedal. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| La punta está doblada o rota. | La potencia de la punta no se ha ajustado correctamente. | Ajuste la potencia de modo que no supere el nivel de potencia máximo indicado en la guía de potencia de la punta o en la etiqueta de la caja de la punta. |
| La punta se ha salido. | La punta no se ha ajustado con la suficiente firmeza. | Ajuste la punta hasta que la llave para punta (CR-10) haga clic. |
| Ruido de la pieza de mano. | La potencia de la punta no se ha ajustado correctamente. | Ajuste la potencia de modo que no supere el nivel de potencia máximo indicado en la guía de potencia de la punta o en la etiqueta de la caja de la punta. |
| | La punta no se ha ajustado con la suficiente firmeza. | Gire la llave para punta (CR-10) hasta que haga clic y ya no pueda girar más. Si el problema persiste, sustituya la llave para punta (CR-10) ya que puede que esté desgastada. |
| | Fallo de vibración en la pieza de mano o la unidad de control. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |

| Problema | Causa | Solución |
|---|--|--|
| La pieza de mano está excesivamente caliente. | La potencia de la punta no se ha ajustado correctamente. | Ajuste la potencia de modo que no supere el nivel de potencia máximo indicado en la guía de potencia de la punta o en la etiqueta de la caja de la punta. |
| | La punta no se ha ajustado con la suficiente firmeza. | Gire la llave para punta (CR-10) hasta que haga clic y ya no pueda girar más. Si el problema persiste, sustituya la llave para punta (CR-10) ya que puede que esté desgastada. |
| | Las piezas roscadas de la pieza de mano y la punta no están limpias. | Límpielas con un paño. |
| | Las piezas roscadas de la pieza de mano están desgastadas como resultado de mucho tiempo de uso. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| | El volumen de irrigación es insuficiente o la irrigación se ha detenido. | Irrigue a un volumen adecuado. |
| | Fallo de vibración en la pieza de mano o la unidad de control. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| Sin suministro de irrigación y/o suministro de irrigación inestable (cuando se usa el recipiente) | El tubo de irrigación está doblado. | Enderece el tubo de irrigación doblado. |
| | Es hora de sustituir el conjunto de bomba de irrigación. | Sustituya el conjunto de bomba de irrigación por uno nuevo (consulte "10-2 Cambio del conjunto de bomba de irrigación"). |
| Agua escasa/inexistente. (cuando se usa agua de grifo) | No se suministra agua a la unidad de control. | Compruebe el circuito de agua para que se suministre agua a la unidad de control. Presión del suministro de agua: 0,1 - 0,3 MPa |
| | El volumen de irrigación está configurado en "0". | Configure el volumen de irrigación adecuado usando el ajuste de volumen de irrigación. |
| | El suministro de agua puede ser inestable cuando el volumen de irrigación es insuficiente. | No se trata de un mal funcionamiento. Aumente el volumen de irrigación usando el ajuste de volumen de irrigación. |
| | El filtro de agua está obstruido debido a sustancias extrañas. | Sustituya el filtro de agua por uno nuevo. |
| Fuga de agua. | El tubo de irrigación no está conectado correctamente. | Inserte completa y firmemente el tubo de irrigación en el conector de irrigación. |
| | La junta tórica situada en el cable de pieza de mano no apantallado está desgastada o dañada. | Sustituya la junta tórica por una nueva siguiendo los procedimientos descritos en "10-1-1 Cable de pieza de mano no apantallado". |
| | El circuito de agua en la unidad de control está dañado. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| El LED de la pieza de mano no se ilumina. | La pieza de mano no está conectada correctamente al cable de pieza de mano no apantallado. | Inserte completa y firmemente la pieza de mano en el cable de pieza de mano no apantallado. |
| | Fallo de la unidad de control. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |

(Modo Powder)



| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| Se oyen alarmas, y "POWDER" y el icono de diente parpadean alternativamente cuando se pulsa el botón D o B del interruptor del pedal. | El sensor integrado en el soporte de la pieza de mano está sucio y detecta por error el montaje de la pieza de mano. | Limpie con un paño el sensor. |
| | El depósito no está insertado correctamente. | Inserte correctamente el depósito hasta que oiga una señal de confirmación sonora. |
| No se oye la señal de confirmación sonora o no aparece el icono que indica el modo Prophy o el modo Perio cuando se inserta el depósito. | Fallo de la unidad de control (desconexión). | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |

| Problema | Causa | Solución |
|---|--|---|
| No hay suministro de aire y polvo. O hay suministro de aire y polvo, pero la presión no es suficiente y la potencia de limpieza también es débil. | Hay polvo obstruido en el interior de la punta de la boquilla. | Sustituya la punta de la boquilla. |
| | Hay polvo obstruido en el interior de la pieza de mano. | Limpie la base de la boquilla con el alambre boquilla (corto) suministrado y el extremo de la boquilla con el alambre para limpieza. Además, limpie el interior de la pieza de mano con el alambre boquilla (largo). Si el polvo y el aire no fluyen después de haber limpiado como se ha descrito anteriormente, realice la limpieza ultrasónica con agua caliente. (Consulte "9-3 Limpieza ultrasónica (semanal)"). |
| | Hay polvo obstruido en el interior del depósito. | Limpie el polvo del interior del depósito siguiendo el procedimiento descrito en "9-1-5 Depósito y manguera de la pieza de mano". |
| | El polvo se ha solidificado parcialmente con el agua, etc., en el conducto de aire. | Limpie el polvo del interior del conducto siguiendo el procedimiento descrito en "9-1-4-2 Autolimpieza". |
| | El depósito de polvo se ha dejado abierto, así que el polvo ha quedado expuesto al aire. | Deseche el polvo y rellene el depósito con polvo nuevo. |
| | El agua se mezcla con aire. | Abra el filtro situado en el circuito de suministro de aire para drenar el compresor y compruebe que no haya agua acumulada en el interior del filtro de aire ni en el desagüe del compresor. |
| | El elemento VCP está obstruido. | Póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| Fuga de agua entre la pieza de mano y la manguera de la pieza de mano. | La junta tórica está rayada. | Sustituya la junta tórica situada en la sección de la junta de la pieza de mano, aplique una gota del aceite para turbina suministrado y extiéndalo con el dedo. (Consulte "10-1-2 Manguera de la pieza de mano (para uso de Prophy y uso de Perio)"). |
| No se puede extraer el depósito porque no se puede pulsar el botón de bloqueo | El botón está bloqueado | Siga el procedimiento descrito en "Desbloqueo del botón de bloqueo" dentro de "9-1-5 Depósito y manguera de la pieza de mano" para desbloquearlo. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su distribuidor de NSK autorizado.* |
| No se puede cerrar la tapa del depósito. | Hay polvo adherido a la rosca del depósito y/o la tapa del depósito. | Limpie la rosca de la tapa del depósito (consulte "Limpieza de la tapa del depósito" en "9-1-5-2 Limpieza y desinfección"). |

* No puede solucionarse en clínicas, etc.

15 Características técnicas

<Unidad de control>

| | |
|--|---|
| Modelo | Varios Combi Pro |
| Fuente de alimentación | CA 100 V - 240 V 50/60 Hz |
| Frecuencia | 28 - 32 kHz |
| Potencia de entrada | 78 - 98VA |
| Salida máxima | 11 W |
| Presión de suministro de aire | 0,55 - 0,75 MPa (5,5 - 7,5 kgf/cm ²) |
| Presión de suministro de agua | 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm ²) |
| Volumen del recipiente | 400 ml |
| Volumen de irrigación (Modo Ultrasónica) | 5,0 - 70,0 ml/min (Modo de irrigación: agua del recipiente/de grifo, Presión del suministro de agua: 0,2 MPa) |
| Dimensiones | Anch. 225 × Prof. 290 × Alt. 162 mm (recipiente de irrigación y depósito incluidos) |
| Peso | 2,7 kg (recipiente de irrigación y depósito no incluidos) |

<Interruptor del pedal>

| | |
|--------------------|---|
| Modelo | FC-79 |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Dimensiones | Anch. 204 × Prof. 157 × Alt. 128 mm (gancho incluido) |
| Peso | 415 g (gancho incluido) |

<Pieza de mano Ultrasónica>

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Modelo | VA2-LUX-HP |
| Longitud del cable | 1,8 m (conector no incluido) |
| Tipo de oscilación | Tipo piezo |
| Luz | LED blanco |
| Dimensiones | φ20 × 103 mm (cable no incluido) |
| Peso | 54 g (cable no incluido) |

<Pieza de mano Powder>

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Modelo | PROPHY-HP/PERIO-HP |
| Longitud de la manguera | 1,8 m (conector no incluido) |
| Dimensiones | φ16 × 107 mm (cable no incluido) |
| Peso | 33 g (cable no incluido) |

| | Temperatura | Humedad | Presión atmosférica |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Entorno de uso*2 | 0 - 40 °C | 35 - 75 %*1 | – |
| Entorno de transporte y almacenamiento | -10 - 50 °C | 10 - 85 % | 500 - 1.060 hPa |

*1 Sin condensación

*2 El uso de este producto en unas condiciones distintas a las especificadas anteriormente puede provocar un mal funcionamiento.

16 Clasificación del equipamiento

- Tipo de protección contra descargas eléctricas:
 - Equipamiento de clase 1
- Grado de protección contra descargas eléctricas:
 - Pieza aplicada de tipo B: ⚠ (Piezas aplicadas: punta ultrasónica, pieza de mano Ultrasónica, punta de boquilla, pieza de mano Powder)
- Método de esterilización o de desinfección recomendado por el fabricante:
 - Consulte 9. Mantenimiento posterior al uso
- Grado de protección contra la entrada de agua, tal y como se detalla en la edición actual de CEI 60529:
 - Interruptor del pedal: IPX1 (protegido contra gotas de agua de caída vertical)
- Grado de seguridad de la aplicación en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, con oxígeno u óxido nítrico:
 - Equipo NO apropiado para su uso en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, con oxígeno u óxido nítrico.
- Modo de funcionamiento:
 - Funcionamiento continuo

17 Principio de funcionamiento




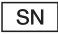



























Modo Ultrasónica

Un generador envía una señal eléctrica sinusoidal, a una frecuencia ultrasónica ($f > 20$ kHz). La señal se aplica a la "cerámica piezoeléctrica" situada dentro del transductor. La cerámica piezoeléctrica convierte esta señal en vibraciones mecánicas. Estas vibraciones se emiten a la misma frecuencia ultrasónica que la señal eléctrica. Las vibraciones mecánicas se propagan hacia el extremo distal del transductor. La inserción de la punta, que se conecta al extremo distal del transductor, vibra a una frecuencia ultrasónica para lograr el propósito del equipo.

Modo Powder

Pulveriza polvo mediante aire a presión para limpiar la superficie dental.

18 Símbolos

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
|  | Este producto se puede esterilizar en un esterilizador de vapor a 135 °C. |  | Código de la serie. |
|  | Se ajusta a la Directiva Europea de "Productos sanitarios 93/42/CEE". |  | Número de serie |
|  | El representante autorizado en la Comunidad Europea. |  | Precaución |
|  | Vea el manual de instrucciones. |  | Temperatura |
|  | Protegido contra el goteo. |  | Agua potable |
|  | Marcas en la parte externa de las piezas del equipo que incluyen transmisores RF o que aplican energía electromagnética RF para diagnóstico o tratamiento. |  | Indicador / luz / iluminación |
|  | No reutilizar. |  | Inspección visual |
|  | Conservar en un lugar seco. |  | Baño ultrasónico |
|  | Esterilización por EOG |  | Límites de humedad |
|  | GS1 DataMatrix identificador exclusivo de dispositivo. |  | Límite de presión atmosférica |
|  | Este producto puede limpiarse utilizando una lavadora-desinfectadora. |  | Número de catálogo (Código de pedido) |
|  | Fabricante. |  | Producto sanitario |
|  | Los productos y los accesorios deben desecharse según la Directiva (2012/19/UE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). |  | Identificador único del dispositivo |
|  | Pieza aplicada de tipo B. |  | Representante autorizado en Suiza |
|  | Solo para uso en interiores. |  | Fecha de fabricación |
|  | Límite de temperatura. |  | Importador |
|  | Caducidad. | | |

19 Garantía

Los productos de NSK están garantizados contra errores y defectos de fabricación en los materiales. NSK se reserva el derecho a analizar y determinar la causa de cualquier problema. La garantía quedará anulada si el producto no se utiliza correctamente o para el uso previsto, o si ha sido manipulado por personal no cualificado o se han instalado piezas que no sean de NSK. Las piezas de repuesto estarán disponibles durante los siete años posteriores a la interrupción en la venta del modelo.

20 Lista de piezas opcionales

| Modelo | REF | Comentarios |
|--|------------|---|
| MG-4H Multi Gauge | Z109400 | |
| Soporte de punta | Z221080 | |
| Set Perio | Y1003042 | Pieza de mano Powder (para uso de Perio) Depósito (para uso de Perio) Manguera de la pieza de mano (para uso de Perio) Polvo Perio Mate Punta de la boquilla Perio Mate (40 unidades) Llave de punta de boquilla |
| Pieza de mano Powder (para uso de Perio) | T1077001 | |
| Depósito (para uso de Perio) | U1135019 | |
| Manguera de la pieza de mano (para uso de Perio) | T1053001 | |
| Boquilla (para uso de Perio) | T1077012 | |
| Polvo Perio Mate | Y900938 | 2 recipientes, cada uno contiene 160 g |
| Punta de la boquilla Perio Mate | Y1002741 | 40 unidades |
| Llave de punta de boquilla | T1043751 | |
| Válvula de reducción de presión de agua | U1135093 | |
| CLA-20 | ZA11900108 | Adaptador de limpieza para pieza de mano Perio/Prophy. |

21 Lista de piezas de recambio

| Modelo | REF | Comentarios |
|--|----------|--|
| FC-79 | Z1256001 | Interruptor del pedal |
| Juego de recipiente VCP | U1135017 | Recipiente y tapa (recipiente de irrigación, tapa de recipiente de irrigación) |
| Tapa de recipiente VCP | U1135116 | Solo tapa (tapa de recipiente de irrigación) |
| Recipiente VCP (solo recipiente) | U1135099 | Solo recipiente (recipiente de irrigación) |
| Juego de juntas tóricas (recipiente de irrigación) | Y1003544 | Una junta tórica fina y una gruesa |
| Junta tórica | Y1003546 | 1 para el cable de pieza de mano no apantallado |
| Junta tórica (set) (Conector de la base del depósito) | Y1003435 | |
| Junta tórica (set) (Manguera de la pieza de mano) | Y1003500 | Una de cada, gruesa y fina. Piezas comunes para uso Prophy y uso Perio |
| Junta tórica (set) (Boquilla) | Y1003501 | Una de cada, gruesa y fina. Piezas comunes para uso Prophy y uso Perio |
| Junta tórica | Y1003545 | Para la tapa del depósito |
| Cable de pieza de mano no apantallado | E351054 | |
| Pieza de mano Ultrasónica | E351050 | |
| Caja de esterilización | Z1035001 | Para piezas ultrasónicas |
| Llave para punta (CR-10) | Z221076 | |
| Tubo de agua | U1135078 | |
| Filtro de agua | U387042 | |
| Llave inglesa (5x8) | Y1001301 | 2 |
| Conjunto de bomba de irrigación | U1135079 | Anillo de conexión no incluido |
| FLASH pearl | Y900698 | 4 recipientes, cada uno contiene 300 g |
| Set Prophy | Y1003771 | Pieza de mano Powder (para uso de Prophy) Depósito (para uso de Prophy) Manguera de la pieza de mano (para uso de Prophy) FLASH pearl (5 s bolsitas) Junta tórica de sustitución |
| Depósito (para uso de Prophy) | U1135018 | |
| Manguera de la pieza de mano (para uso de Prophy) | T1051001 | |
| Pieza de mano Powder (para uso de Prophy) | T1074001 | |
| Boquilla (para uso de Prophy) | T1074012 | |
| Tapa del depósito | U1135089 | Solo tapa |
| Alambre para limpieza | T798092 | Para el extremo distal y el interior de la boquilla |
| Alambre boquilla (corto) | T798095 | Para la base de la boquilla |
| Alambre boquilla (largo) | T798091 | Para piezas distintas a las anteriores |

| Modelo | REF | Comentarios |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| Escobilla para limpieza | T798093 | |
| Herramienta de desbloqueo | U1135256 | |
| Llave de aro | T1074601 | |
| Aceite para turbina | Z016112 | |
| Manguera de aire | D0914406036 | |
| Fusible | D1202220010 | Valor nominal T2AH250V |

22 Eliminación del producto

Con el fin de evitar riesgos para la salud de los operarios que llevan a cabo la eliminación de los equipos médicos, así como riesgos de contaminación ambiental fruto de dicha eliminación, se solicita al cirujano o dentista que confirme que el equipo es estéril. Encargue dicho trabajo a empresas especializadas con licencia para eliminar desechos industriales especialmente controlados.

23 Información CEM (Información de compatibilidad electromagnética)


| Guía y declaración del fabricante - Emisiones Electromagnéticas | | |
|--|------------------------|--|
| El producto ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético definido a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se use en este tipo de entorno. | | |
| Prueba de emisiones | Cumplimiento | Entorno electromagnético - guía |
| Emisiones RF CISPR11/EN55011 | Grupo 1 Clase B | El producto utiliza la energía de RF sólo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no pueden causar interferencias en los equipos electrónicos próximos. |
| Emisiones RF CISPR11/EN55011 | Grupo 1 Clase B | El producto es apropiado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a la red pública de suministro de potencia de bajo voltaje proporcionada en edificios con fines domésticos. |
| Emisiones armónicas EN/CEI61000-3-2 | Clase A (excepto 120V) | |
| Fluctuaciones de voltaje/ emisiones oscilantes EN/CEI61000-3-3 | Cumple (excepto 120V) | |

| Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética | | | |
|--|--|--|--|
| El producto ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético definido a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se use en este tipo de entorno. | | | |
| Prueba de inmunidad | Nivel de prueba EN/CEI60601 | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético - guía |
| Descarga electrostática (ESD) EN/CEI61000-4-2 | Contacto $\pm(2,4)6kV$ Aire $\pm(2,4)8kV$ | Contacto $\pm(2,4)6kV$ Aire $\pm(2,4)8kV$ | El suelo debería ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si el suelo se cubre con material sintético, la humedad relativa debería ser, al menos, de un 30 %. |
| Ráfaga de impulsos/transiente rápido eléctrico EN/CEI61000-4-4 | $\pm 2kV$ para las líneas de suministro de potencia $\pm 1kV$ para las líneas de entrada/salida | $\pm 2kV$ para las líneas de suministro de potencia $\pm 1kV$ para las líneas de entrada/salida | La calidad de la potencia eléctrica debería ser aquella de un entorno comercial u hospitalario convencional. |
| Sobretensión EN/CEI61000-4-5 | Modo diferencial $\pm 1kV$ Modo común $\pm 2kV$ | Modo diferencial $\pm 1kV$ Modo común $\pm 2kV$ | La calidad de la potencia eléctrica debería ser aquella de un entorno comercial u hospitalario convencional. |
| Descenso de voltaje, interrupciones breves y variaciones de voltaje en las líneas de entrada del suministro eléctrico EN/CEI61000-4-11 | $<5\% U_t$ ($>95\%$ descenso en U_t) Para 0,5 ciclos $40\% U_t$ (60% descenso en U_t) Para 5 ciclos $70\% U_t$ (30% descenso en U_t) Para 0,5 ciclos $<5\% U_t$ ($>95\%$ descenso en U_t) Para 5 segundos | $<5\% U_t$ ($>95\%$ descenso en U_t) Para 0,5 ciclos $40\% U_t$ (60% descenso en U_t) Para 5 ciclos $70\% U_t$ (30% descenso en U_t) Para 0,5 ciclos $<5\% U_t$ ($>95\%$ descenso en U_t) Para 5 segundos | La calidad de la potencia eléctrica debería ser aquella de un entorno comercial u hospitalario convencional. Si el usuario del producto requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de potencia eléctrica, se recomienda que el producto cuente con una batería o corriente eléctrica ininterrumpida. |
| Frecuencia de potencia (50/60Hz) del campo magnético EN/CEI61000-4-8 | 3 A/m | 3 A/m | La frecuencia de potencia de los campos magnéticos debería estar a los niveles característicos de una ubicación convencional en un entorno comercial u hospitalario. |

NOTA: "Ut" es el voltaje de la red CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El producto ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético definido a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se use en este tipo de entorno.

| Prueba de inmunidad | Nivel de prueba EN/CEI60601 | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético - guía |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| RF conducido EN/CEI61000-4-6 | 3 Vrms 150 kHz a 80 MHz | 3 Vrms | <p>El equipamiento de comunicaciones portátil y móvil RF debería utilizarse a una distancia de cualquier pieza del producto, incluidos cables, superior a la distancia de separación calculada a partir de la ecuación aplicable para la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>Donde "P" es el máximo de potencia de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y (d) es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las fuerzas de campo de transmisores fijos RF, tal y como lo determina la investigación (a) de un sitio electromagnético, deberían ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia (b). Puede producirse una interferencia cerca del equipamiento marcado con el siguiente símbolo:</p>  |
| RF radiado EN/CEI61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz | 3 V/m | |

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, será de aplicación el rango de frecuencia más elevado.

NOTA 2: Estas directrices no serán de aplicación para todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

a: en teoría, las fuerzas de campo de transmisores fijos, como estaciones de base de teléfonos de radio (celular/inalámbrica) y radios móviles terrestres, radioaficionados, programas de radio AM y FM y programas de televisión, no pueden predecirse con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores fijos RF, debe considerarse la realización de una investigación electromagnética del sitio. Si la fuerza de campo medida en la ubicación en la que se usa el producto supera el nivel de cumplimiento aplicable RF anterior, deberá observarse si el producto funciona normalmente. En caso de observar un rendimiento anormal, será necesario aplicar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del producto.

b: por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la fuerza del campo debería ser inferior a 3 V/m.

| Cables y accesorios | Longitud máxima | Cumple con |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| Cable de pieza de mano no apantallado | 2,0 m (sin blindaje) | Emisiones RF, CISPR11 Emisiones armónicas, (excepto 120V) |
| Cable del interruptor del pedal | 2,5 m (sin blindaje) | Fluctuaciones de voltaje/ emisiones oscilantes, (excepto 120V) Descarga electrostática (ESD): |
| Cable de potencia CA | 3,0 m (sin blindaje) | Ráfaga de impulsos/transiente rápido eléctrico: Sobretensión: Descenso de voltaje, interrupciones breves y variaciones de voltaje en las líneas de entrada del suministro eléctrico: Frecuencia de potencia (50/60 Hz) del campo magnético: RF conducido: RF radiado: |
| | | Clase B/Grupo 1 EN/CEI61000-3-2 EN/CEI61000-3-3 EN/CEI61000-4-2 EN/CEI61000-4-4 EN/CEI61000-4-5 EN/CEI61000-4-11 EN/CEI61000-4-8 EN/CEI61000-4-6 EN/CEI61000-4-3 |

Distancias de separación recomendadas entre el equipamiento de comunicaciones portátil y móvil RF y el producto

El producto ha sido diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las alteraciones radiadas RF. El cliente o el usuario del producto puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipamiento de comunicaciones portátil y móvil RF (transmisores) y el producto, tal y como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipamiento de comunicación.

| Índice de potencia de salida máxima del transmisor | Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m | | |
|--|--|--|---|
| | 150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Para transmisores con un índice de potencia máximo no incluido anteriormente, la distancia de separación recomendada "d" en metros (m) puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde "P" es el índice de potencia de salida máximo del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, será de aplicación el rango de frecuencia más elevado.

NOTA 2: Estas directrices no serán de aplicación para todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Grazie per aver acquistato Varios Combi Pro. Prima di usare il dispositivo, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le direttive per la manutenzione del dispositivo, in modo da utilizzarlo correttamente e garantire una lunga vita del prodotto. Conservare questo manuale d'uso a portata degli utenti per eventuali consultazioni future.




Il numero di riferimento del manuale d'uso dei prodotti correlati è come di seguito riportato:

| Titolo del manuale d'uso | N° del manuale d'uso |
|---|----------------------|
| Cleaning Adaptor CLA-20 For Prophy Handpiece / For Perio Handpiece | OM-DE0906MA |

– Indice –

| | |
|---|-----|
| 1. Utente e destinazione d'uso | 217 |
| 2. Precauzioni di utilizzo e funzionamento | 217 |
| 3. Lista degli accessori | 221 |
| 4. Componenti | 222 |
| 5. Installazione | 224 |
| 6. Controllo prima del trattamento | 227 |
| 7. Uso della modalità Ultrasonic | 228 |
| 8. Uso della modalità Powder | 232 |
| 9. Manutenzione dopo l'uso | 237 |
| 10. Cura e manutenzione | 255 |
| 11. Altre funzioni | 260 |
| 12. Controlli di manutenzione periodici | 261 |
| 13. Codice di errore | 261 |
| 14. Risoluzione dei problemi | 262 |
| 15. Specifiche tecniche | 264 |
| 16. Classificazione del dispositivo | 265 |
| 17. Principio di funzionamento | 265 |
| 18. Simboli | 266 |
| 19. Garanzia | 266 |
| 20. Elenco dei pezzi opzionali | 267 |
| 21. Elenco dei pezzi di ricambio | 267 |
| 22. Smaltimento del prodotto | 268 |
| 23. Informazioni EMC (Compatibilità elettromagnetica) | 268 |

* Alcune sezioni sono indicate con i contrassegni di seguito per mostrare le modalità relative alla sezione.

-  **ULTRASONIC** Descrizione della modalità Ultrasonic
-  **POWDER PROPHY** Descrizione della modalità Prophy in modalità Powder
-  **POWDER PERIO** Descrizione della modalità Perio in modalità Powder



1 Utente e destinazione d'uso

Utente: Dentista, igienista dentale

Destinazione d'uso: Pulizia della superficie dentale, rimozione di placca o tartaro, resezione apicale, espansione o pulizia del canale radicolare, rimozione di corpi estranei, otturazione del canale radicolare, miglioramento dell'adesione di protesi fisse, incisione o rimozione dei tessuti parodontali

2 Precauzioni di utilizzo e funzionamento

- Leggere attentamente le avvertenze e usare il dispositivo solo come da istruzioni e per la destinazione d'uso prevista.
- Le istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di evitare potenziali rischi che potrebbero causare lesioni personali o danni al dispositivo. Le istruzioni di sicurezza sono classificate come segue, a seconda della gravità del rischio.

| Classificazione | Grado di rischio |
|---|---|
|  AVVERTENZA | Illustra i casi in cui, se le istruzioni di sicurezza non vengono seguite, possono verificarsi gravi lesioni alle persone o danni al dispositivo. |
|  ATTENZIONE | Illustra i casi in cui, se le istruzioni di sicurezza non vengono seguite, possono verificarsi lievi o modeste lesioni alle persone o danni al dispositivo. |
| AVVISO | Informazioni sulle specifiche generali del prodotto evidenziate per evitare malfunzionamenti e riduzioni delle prestazioni del prodotto. |

⚠ AVVERTENZA

<Modalità Ultrasonic e modalità Powder>



- Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.
- Tenere lontano da sostanze esplosive e materiali infiammabili.
- Se il prodotto si surriscalda o emette odore di bruciato, disinserire immediatamente l'alimentazione e scollegare la spina di alimentazione principale. Contattare il distributore NSK autorizzato.
- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, usare una presa elettrica principale dotata di messa a terra.
- Non azionare in prossimità di pazienti con pacemaker cardiaci: esiste il pericolo di possibili interferenze con il pacemaker.
- Il dispositivo funziona normalmente in un ambiente con una temperatura di 0 - 40°C (32 - 104°F), un'umidità di 35 - 75% UR e in assenza di condensa da umidità all'interno dell'unità di controllo. L'utilizzo del dispositivo in condizioni non rientranti in tali limiti può essere causa di malfunzionamenti.
- Prestare attenzione a non far entrare acqua o liquidi disinfettanti nell'unità di controllo. Ciò potrebbe causare un corto circuito ed essere causa di incendi e/o scariche elettriche.
- L'accensione e lo spegnimento continuo dell'interruttore di alimentazione principale potrebbero causare la bruciatura di un fusibile.
- Se gocce d'acqua, prodotti chimici, solventi o una soluzione antisettica viene a contatto con l'unità di controllo, il manipolo, il cordone del manipolo, il tubo del manipolo, ecc., pulire immediatamente. In caso contrario, potrebbero comportare scolorimento o deformazione.
- Connettersi ad un sistema idrico pubblico in grado di fornire acqua potabile ad una pressione compresa tra 0,1 e 0,3 MPa. L'utilizzo ad una pressione dell'acqua non corretta potrebbe causare un'insufficiente alimentazione di acqua, inoperabilità o malfunzionamento.
- Usare un addolcitore per ridurre la durezza dell'acqua, in quanto l'utilizzo di acqua molto dura potrebbe generare accumuli di minerali o calcare nel circuito idrico, con conseguenti problemi quali livelli idrici insufficienti, malfunzionamenti o guasti. A tale scopo, usare un tubo dell'acqua dotato di filtro per evitare guasti al dispositivo causati da materiali estranei presenti nell'acqua corrente. Fare riferimento al paragrafo "10-3 Sostituzione del filtro dell'acqua" per sostituire il filtro dell'acqua come richiesto.
- Non sterilizzare con luce ultravioletta. Ciò potrebbe causare lo scolorimento del manipolo.
- Tenere la spina quando si estrae il cordone del manipolo o il tubo del manipolo. Se si tira il cordone o il tubo si potrebbero causare disconnessione o danni.

<Modalità Ultrasonic>



- Utilizzare sempre l'alimentazione di acqua. Un'insufficiente alimentazione di acqua causa surriscaldamento, con conseguenti danni alla superficie dentale del paziente.
- Evitare che il paziente o l'assistente guardi direttamente il LED del manipolo o del cordone del manipolo. Ciò potrebbe causare danni alla vista.

<Modalità Powder>



- Non usare sui seguenti pazienti:
 - Pazienti affetti da complicazioni mediche o allergie
 - Pazienti affetti da patologie preesistenti (disturbi cardiaci, polmonari, renali o ipertensione)
 - Pazienti affetti da malattie respiratorie.
 - Pazienti affetti da tasche parodontali patologicamente profonde (6 mm o più) o lesioni della mucosa. Un getto prolungato sui tessuti molli o in prossimità delle ghiandole salivari potrebbe dar luogo ad enfisemi.
 - Pazienti affetti da ulcere gravi all'apparato digestivo.
 - Pazienti affetti da disfunzioni renali.
 - Pazienti affetti da disturbi cardiaci o polmonari o problemi di ventilazione.
 - Pazienti con protesi valvolare cardiaca artificiale o articolazione artificiale.
 - Pazienti affetti da allergie. A seconda della costituzione del paziente si potrebbero verificare, seppur raramente, sintomi allergici o stomatiti. Se vengono riscontrati tali sintomi, sospendere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.
- Durante il trattamento di pulizia sia l'operatore che l'assistente dovranno indossare sempre occhiali e mascherine di protezione. Si suggerisce inoltre di aspirare la polvere emessa durante il trattamento. Qualora la polvere arrivi a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un oftalmologo.
- Impostare la pressione dell'aria su 0,55 - 0,75 MPa e utilizzare aria secca e pulita. L'utilizzo ad una pressione non corretta potrebbe causare un'insufficiente pressione (potenza) del getto, inoperabilità o malfunzionamento.

<Modalità Prophy>



- Non spruzzare direttamente sul cemento nel canale radicolare, nello smalto decalcificato, nell'otturazione, nel margine di una protesi o di un'otturazione.

⚠ AVVERTENZA

<Modalità Perio>



- Quando si utilizza la modalità Perio, prestare attenzione a non causare enfisema, in quanto l'aria come contenente polvere viene spruzzata nelle tasche parodontali. Se si causa l'enfisema mediante trattamento con la modalità Perio, cessare immediatamente di utilizzare il prodotto e consultare un medico.
- Non usare sui seguenti pazienti, in quanto l'utilizzo nelle tasche parodontali potrebbe causare bacillemia.
 - Pazienti con infiammazione endocardica
 - Pazienti con malattie infettive
 - Pazienti con immunodeficienza (neutropenia, granulocitopenia, agranulocitosi, diabete, emofilia)
 - Pazienti sottoposti a terapia con radiazioni, chemioterapia o antibiotici
- Non usare sui seguenti pazienti (a meno che non si utilizzi senza beccuccio):
 - Pazienti affetti da problemi o anomalie alla cavità orale.
 - Pazienti affetti da iperemia, emorragie o infiammazioni nella cavità orale.
 - Pazienti affetti da infiammazioni o infezioni alla membrana mucosa.
- Utilizzare questo prodotto solo per terapia di mantenimento, dopo il trattamento parodontale di base. Non utilizzarlo per altri scopi.
- Utilizzare la modalità Perio solo su tasche parodontali che presentano le seguenti condizioni:
 - Tasche parodontali causate da una malattia gengivale
 - Tasche parodontali di 6 mm o inferiori sottoposte a trattamento parodontale di base
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare la profondità della tasche parodontali effettuando una misurazione (sonda) o una radiografia.
- Utilizzare solo la polvere di pulizia indicata. L'utilizzo di un'altra polvere potrebbe provocare malfunzionamento, prestazioni inferiori o lesioni al cemento dentale e alla dentina oppure potrebbe causare enfisema. NSK declina ogni responsabilità per danni causati dall'utilizzo di una polvere diversa da quella indicata.
- Il beccuccio per la modalità Perio incluso nella confezione è un prodotto sterile. Per l'uso di tali prodotti, seguire le istruzioni seguenti.
 - Il beccuccio è un prodotto monouso. Non riutilizzare né sterilizzare nuovamente il prodotto: il prodotto potrebbe rompersi o potrebbero verificarsi delle infezioni.
 - Prima dell'uso, controllare che la confezione NON sia aperta né danneggiata. In caso contrario, non utilizzare il beccuccio in quanto potrebbe essere danneggiato o contaminato.
 - Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione del beccuccio. Non usare prodotti scaduti: il prodotto potrebbe rompersi o potrebbero verificarsi delle infezioni.

⚠ ATTENZIONE

<Modalità Ultrasonic e modalità Powder>



- Leggere il presente manuale d'uso prima di procedere all'utilizzo del prodotto per comprenderne appieno le funzioni e conservare per consultazioni future.
- Durante l'utilizzo del prodotto, dare sempre priorità alla sicurezza del paziente.
- L'utente finale sarà responsabile di qualsiasi giudizio in merito all'idoneità dell'applicazione del presente prodotto sul paziente.
- Gli utenti sono responsabili del controllo del corretto funzionamento, della manutenzione e dell'ispezione continua del prodotto.
- Il presente dispositivo è destinato unicamente all'utilizzo in ambienti chiusi.
- Tenere l'unità di controllo su una superficie piana.
- Non tentare di smontare il prodotto o di manometterne il meccanismo. Seguire sempre le raccomandazioni di NSK contenute nel presente manuale d'uso.
- Evitare che l'apparecchio subisca impatti di qualsiasi genere. Non far cadere il prodotto. La fibra ottica in vetro e il manipolo potrebbero danneggiarsi in caso di caduta del manipolo Ultrasonic.
- L'operatore e qualunque altra persona presente nell'area di lavoro dovranno indossare dispositivi di protezione degli occhi e una maschera durante l'utilizzo del presente prodotto.
- In caso di funzionamento anomalo del prodotto, sospenderne immediatamente l'uso e contattare il distributore autorizzato NSK.
- Durante il collegamento, inserire il manipolo in modo saldo e completo nel cordone del manipolo o nel tubo del manipolo.
- Non sterilizzare in autoclave il cordone del manipolo o il tubo del manipolo.
- Non asciugare, pulire o immergere il prodotto in acqua altamente acidificata o soluzioni sterilizzanti.
- Il prodotto viene fornito in condizioni non sterili, ad eccezione del beccuccio (opzionale), e deve essere sterilizzato in autoclave prima dell'uso. Consultare "9-2 Sterilizzazione" per i dettagli.
- Eseguire controlli di funzionamento e manutenzione periodici.
- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, controllarne il corretto funzionamento prima di utilizzarlo su un paziente.
- Per evitare interruzioni durante il trattamento clinico, si raccomanda di tenere un prodotto di ricambio a portata di mano in caso di guasto durante il trattamento.
- Sostituire sempre il fusibile con un fusibile della stessa potenza specificata.
- Il presente prodotto è un apparecchio elettromedicale. La compatibilità elettromagnetica (EMC) è descritta nella documentazione allegata.
- L'installazione e l'uso del presente prodotto richiedono l'adozione di precauzioni speciali riguardanti l'EMC in conformità alle relative informazioni in materia.
- Gli apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e cellulari possono interferire con gli apparecchi elettromedicali. Non utilizzare apparecchi a radiofrequenza in prossimità del prodotto.
- L'uso di ACCESSORI, quali manipoli e cavi, diversi da quelli specificati dal produttore, ad eccezione di manipoli e cavi venduti dal produttore del presente prodotto quali pezzi di ricambio per componenti interni, può causare un aumento delle EMISSIONI o una diminuzione dell'IMMUNITÀ del prodotto.
- Non posizionare altri dispositivi accanto o sopra il prodotto. Qualora se ne rendesse necessario l'uso con dispositivi posizionati accanto o sopra lo stesso, osservare il prodotto per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.

⚠ ATTENZIONE

- Se usato in presenza di interferenze elettromagnetiche, può verificarsi un malfunzionamento del sistema. Non installare il sistema in prossimità di dispositivi che emettono onde magnetiche. Interrompere l'alimentazione del sistema se in prossimità del luogo di utilizzo sono presenti dispositivi a oscillazioni ultrasoniche o elettrobisturi.
- Per ragioni di sicurezza, installare l'unità di controllo in un luogo dove sia possibile estrarre facilmente il cavo di alimentazione CA. (è possibile disinserire l'unità di controllo dalla fonte di alimentazione estraendo il cavo di alimentazione CA)

<Modalità Ultrasonic>



- Se non si utilizza acqua refrigerante la temperatura della superficie della punta potrebbe raggiungere i 65°C. Per evitare che ciò avvenga, utilizzare acqua refrigerante.

<Modalità Powder>

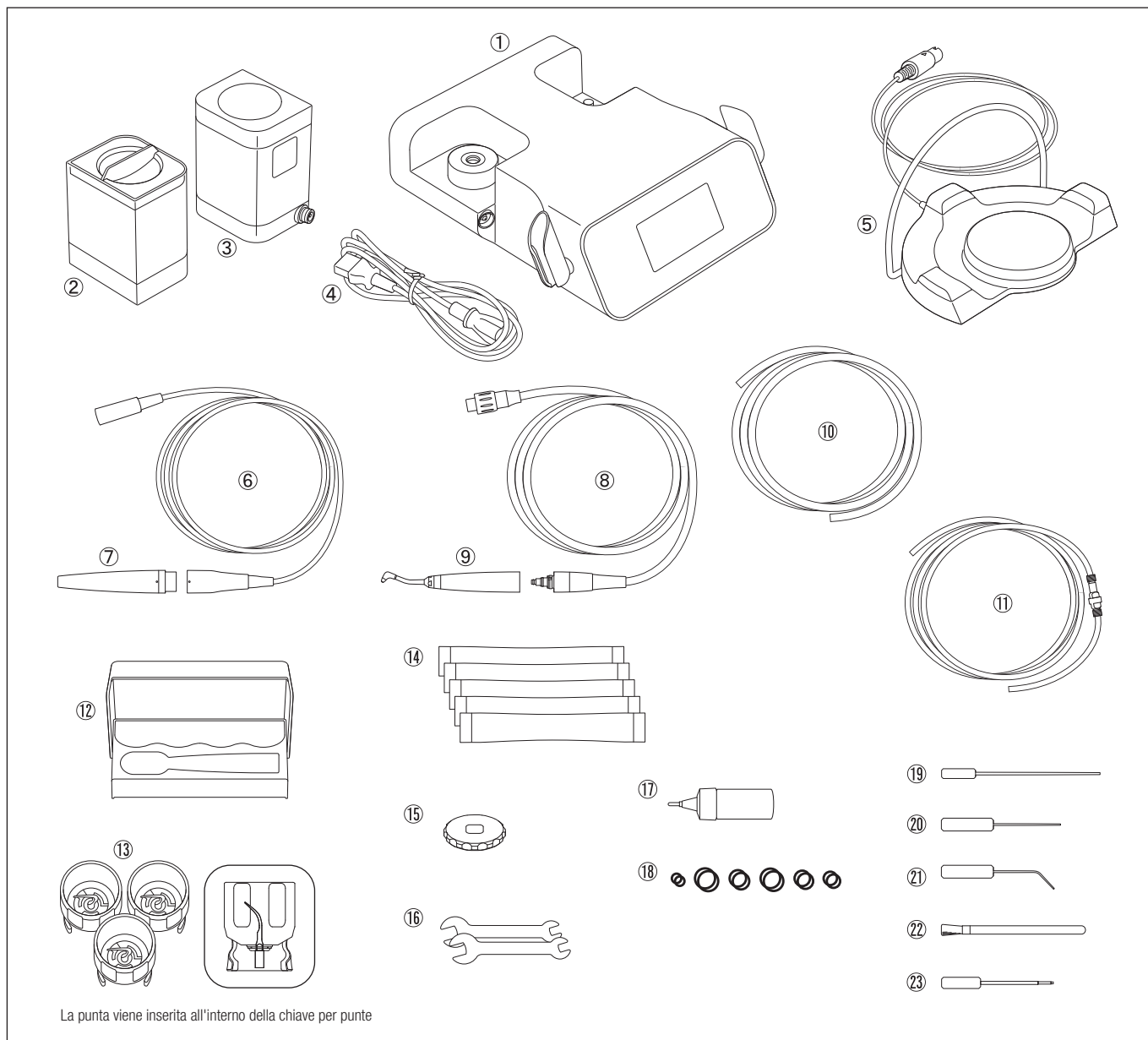


- Prestare molta attenzione per evitare che la polvere di pulizia entri in zone con mucosa (occhi, naso, ecc.) diverse dalla cavità orale. Inoltre, proteggere il viso con un asciugamano o con occhiali protettivi, ecc., per impedire che la polvere entri a contatto con gli occhi del paziente.
* Se il paziente è portatore di lenti a contatto, far indossare occhiali protettivi o far togliere le lenti a contatto prima del trattamento.
- Prima di collegare il tubo del manipolo, il serbatoio e il manipolo e l'unità di controllo, è necessario asciugare bene gli attacchi del flessibile e del serbatoio con un getto di aria asciutta. In caso contrario, eventuali residui d'acqua potrebbe causare ostruzioni all'interno del prodotto.
- A seconda dell'ambiente di utilizzo, la temperatura della superficie del manipolo Powder potrebbe raggiungere i 50°C.
- Inserire solo la giusta quantità di polvere nel serbatoio per evitare che ne venga spruzzata una quantità scorretta all'avvio.
- La polvere si disperde con facilità. Effettuare il rabbocco lentamente.
- La polvere in confezione aperta da molto tempo assorbe umidità e potrebbe causare l'intasamento. Per ogni sessione si raccomanda dunque di utilizzare una confezione nuova. Se si usa polvere in bottiglia (opzionale), chiudere sempre il coperchio della bottiglia dopo l'uso.
- Si consiglia di applicare vasellina, ecc. sulle labbra del paziente per evitare che si secchino o che si creino screpolature agli angoli della bocca.

AVVISO

- L'uso del presente dispositivo non richiede una formazione speciale.
- La ripetuta sterilizzazione in autoclave può causare lo scolorimento del manipolo Ultrasonic a seguito del calore generato. Tuttavia, ciò è dovuto alle proprietà del prodotto e non compromette la qualità dello stesso.
- Per evitare che eventuali residui di polvere possano ostruire i condotti, eseguire interventi periodici di pulizia e manutenzione del tubo di aspirazione, dell'aspirasaliva e del separatore.

3 Lista degli accessori



La punta viene inserita all'interno della chiave per punte


| N. | Denominazione | Quantità | N. | Denominazione | Quantità |
|----|------------------------------------|----------|----|---|----------|
| 1 | Unità di controllo | 1 | 14 | FLASH pearl | 5 |
| 2 | Bottiglia di irrigazione | 1 | 15 | Chiave ad anello | 1 |
| 3 | Serbatoio (per uso Prophy) | 1 | 16 | Chiave inglese (5x8) | 2 |
| 4 | Cavo di alimentazione CA | 1 | 17 | Olio turbina | 1 |
| 5 | Pedale | 1 | 18 | O-ring di ricambio | 6 tipi |
| 6 | Cordone del manipolo | 1 | 19 | Filo di pulizia (L) | 1 |
| 7 | Manipolo Ultrasonic | 1 | 20 | Filo di pulizia (S) | 1 |
| 8 | Tubo del manipolo (per uso Prophy) | 1 | 21 | Lima di pulizia | 1 |
| 9 | Manipolo Powder (per uso Prophy) | 1 | 22 | Spazzola di pulizia | 1 |
| 10 | Tubo aria | 1 | 23 | Strumento di sblocco | 1 |
| 11 | Tubo dell'acqua | 1 | 24 | Manuale d'uso (questo manuale)* | 1 |
| 12 | Astuccio di sterilizzazione | 1 | 25 | Guida alla selezione della potenza delle punte* | 1 |
| 13 | Punta e chiave per punte | 3 | 26 | Tip Card* | 1 |
| | | | 27 | Guida rapida di Varios Combi Pro* | 1 |

* Non raffigurato nelle illustrazioni precedenti

AVISO

- FLASH pearl e la polvere Perio Mate (opzionali) usati in modalità Powder sono indicati come "polvere" nel presente manuale d'uso, se non specificato diversamente.
- Il kit Perio opzionale deve essere acquistato a parte per utilizzare la modalità Perio. Consultare "20 Elenco dei pezzi opzionali" per i dettagli sul kit Perio.

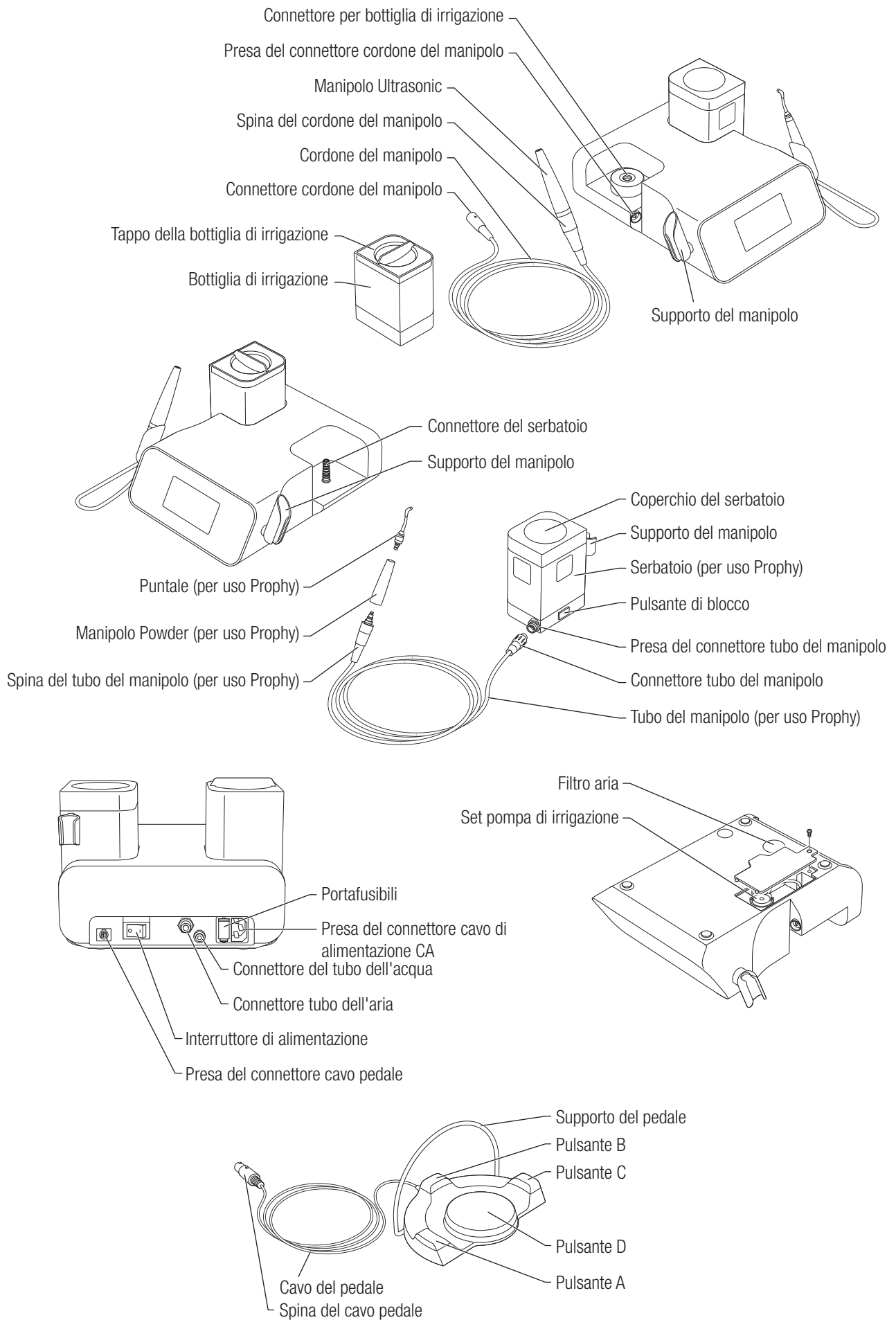4 Componenti




4-1 Pannello operativo




- (1) Tasto di selezione modalità Ultrasonic
Commuta la modalità Ultrasonic tra P (Perio), E (Endo), G (General). Il maggiore livello di potenza è G, seguito da E e P. È possibile impostare il livello di potenza, il volume d'acqua e la modalità di irrigazione di ogni modalità di funzionamento.
- (2) Tasto di selezione del livello di potenza
Imposta il livello di potenza con i tasti ▲/▼.
- (3) Tasto di selezione dell'irrigazione
Imposta il volume di irrigazione con i tasti ▲/▼.
- (4) Tasto di selezione modalità operativa
Commuta tra "Modalità Ultrasonic" e "Modalità Powder".
- (5) Tasto di pulizia automatica
Avvia la pulizia automatica. Consultare "9-1-1-2 Pulizia automatica" (manipolo Ultrasonic) o "9-1-4-2 Pulizia automatica" (manipolo Powder) per i dettagli.
Modalità Ultrasonic:
Spruzza acqua corrente per 15 secondi, quindi acqua dalla bottiglia di irrigazione per 30 secondi, per pulire il manipolo Ultrasonic.
Modalità Powder:
Spruzza contemporaneamente aria e acqua per 10 secondi, quindi solo aria per 35 secondi.
- (6) Tasto di selezione modalità irrigazione
Commuta la modalità di irrigazione (bottiglia o acqua corrente) per la modalità Ultrasonic. Per la modalità Powder viene sempre usata acqua corrente.

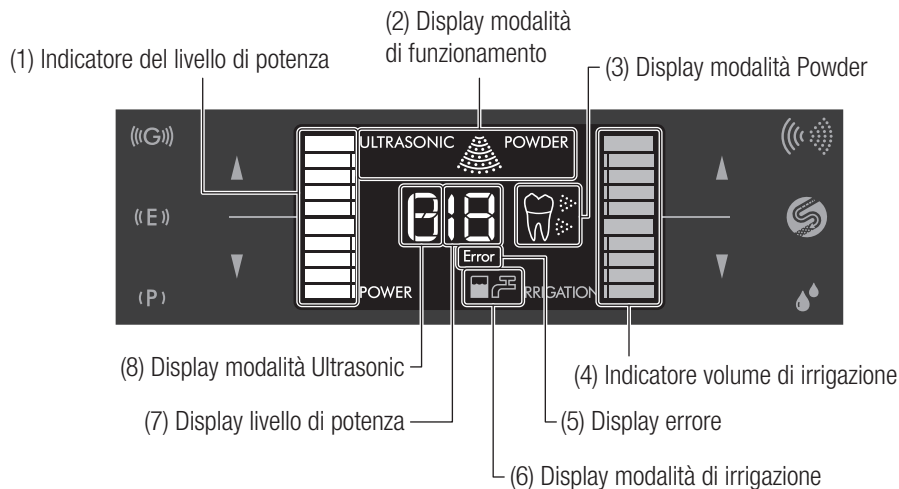4-2 Pannello LCD



- (1) Indicatore del livello di potenza
Visualizza la potenza attuale sulla spia dell'istogramma.
- (2) Display modalità di funzionamento
Visualizza la modalità di funzionamento attuale (Ultrasonic o Powder).
- (3) Display modalità Powder
Visualizza il serbatoio impostato (Prophy o Perio) (solo quando si usa la modalità Powder).
- (4) Indicatore volume di irrigazione
Visualizza il volume d'acqua selezionato sulla spia dell'istogramma.
- (5) Display errore
Visualizzato quando si verifica un errore. Consultare "13 Codice di errore" per i dettagli.
- (6) Display modalità di irrigazione
Visualizza la modalità di irrigazione (bottiglia o acqua corrente) per la modalità Ultrasonic. Per la modalità Powder viene sempre usata acqua corrente.
- (7) Display livello di potenza
Visualizza il livello di potenza attuale in formato numerico.
- (8) Display modalità Ultrasonic
Visualizza la modalità Ultrasonic attuale (P/E/G).

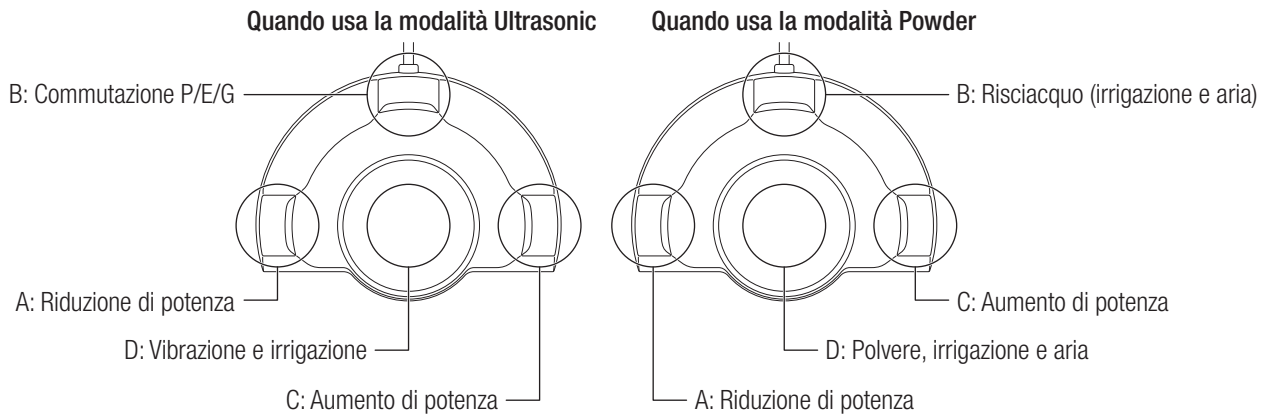4-3 Pedale



Modalità Ultrasonic

- A: Riduzione di potenza
Riduce il livello di potenza.
- B: Commutazione P/E/G (Ultrasonic Mode)
Ad ogni pressione del pulsante, cambia la modalità Ultrasonic Mode nel seguente ordine: P (Perio) → E (Endo) → G (General) → P (Perio)....
- C: Aumento di potenza
Aumenta il livello di potenza.
- D: Vibrazione e irrigazione
Quando si preme il pulsante, effettua la vibrazione e l'irrigazione.


Modalità Powder

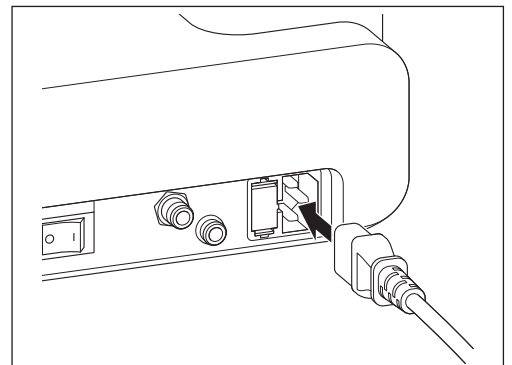
- A: Riduzione di potenza
Riduce il livello di potenza.
- B: Risciacquo (irrigazione e aria)
Quando si preme il pulsante, spruzza acqua e aria.
- C: Aumento di potenza
Aumenta il livello di potenza.
- D: Polvere, irrigazione e aria
Quando si preme il pulsante, spruzza polvere, acqua e aria.

5 Installazione

5-1 Collegamento del cavo di alimentazione CA

- 1) Spegnerne l'interruttore di alimentazione prima di collegare il cavo di alimentazione CA.
- 2) Inserire il cavo di alimentazione CA nell'apposita presa del connettore posta sul retro dell'unità di controllo.
- 3) Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di corrente specifica per uso medico.

- ATTENZIONE** 
- Non scollegare il cavo di alimentazione CA tenendolo e tirandolo.
 - Verificare che il dispositivo sia stato arrestato completamente prima di rimuovere o inserire il cavo di alimentazione CA.





5-2 Collegamento del tubo dell'aria

1) Inserire completamente un'estremità del tubo dell'aria nel relativo connettore.

2) Tirare delicatamente il tubo dell'aria per assicurarsi che non fuoriesca.

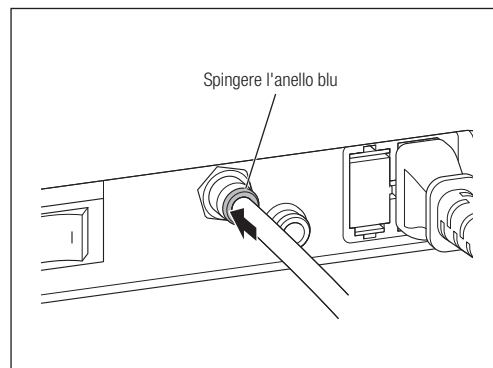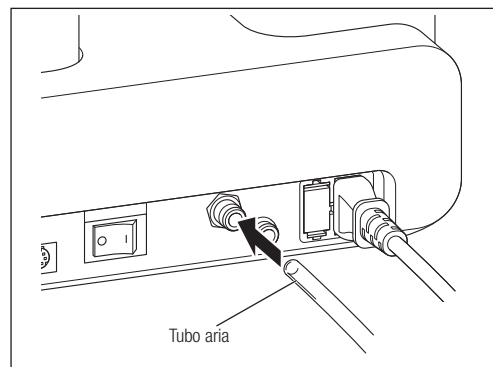3) Per estrarre il tubo dell'aria, rimuoverlo spingendo l'anello blu verso l'unità di controllo.





ATTENZIONE

- Utilizzare aria secca e pulita. Se l'aria contiene umidità o olio, la polvere potrebbe causare intasamento.

5-3 Collegamento del pedale

1) Inserire il supporto del pedale nei fori sul retro del pedale.

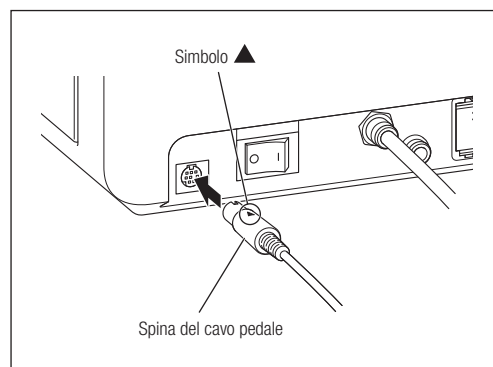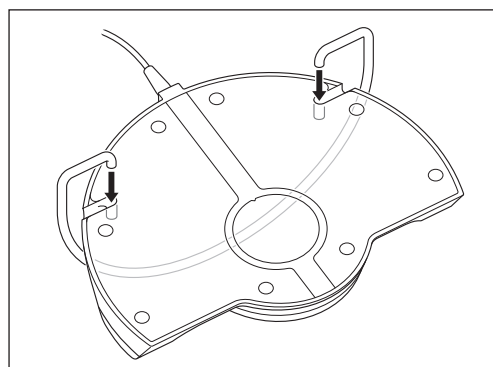2) Collegare la spina del pedale nella presa del connettore del cavo del pedale con il segno ▲ rivolto verso l'alto.




5-4 Collegamento del cordone del manipolo (manipolo Ultrasonic)

Collegare il connettore del cordone del manipolo nell'apposita presa del connettore con il segno ▲ rivolto verso l'alto. Inserirlo completamente.




ATTENZIONE

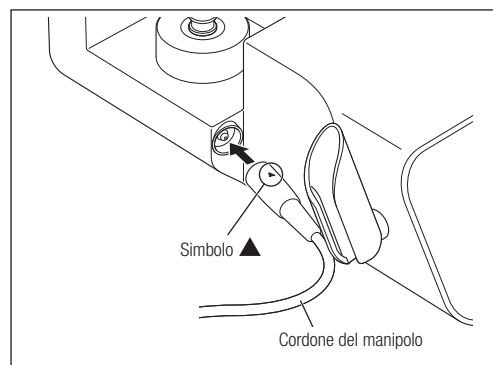- Controllare che la spina del cordone del manipolo sia pulita prima di inserirla.



5-5 Collegamento del tubo del manipolo (manipolo Powder)

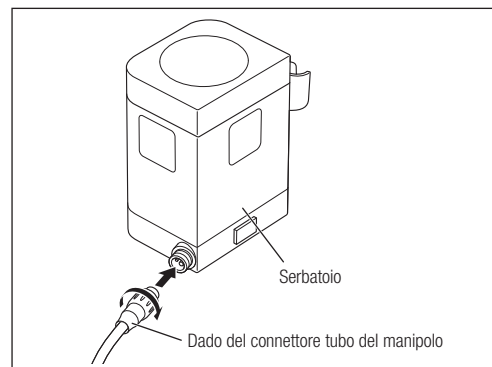- 1) Utilizzare aria per asciugare la presa del connettore e il connettore stesso del tubo del manipolo.
- 2) Inserire il connettore del tubo del manipolo nella relativa presa del connettore e serrare il dado del connettore.



5-6 Collegamento e scollegamento del manipolo



- Assicurarsi di utilizzare esclusivamente il manipolo in dotazione.

ATTENZIONE

ULTRASONIC

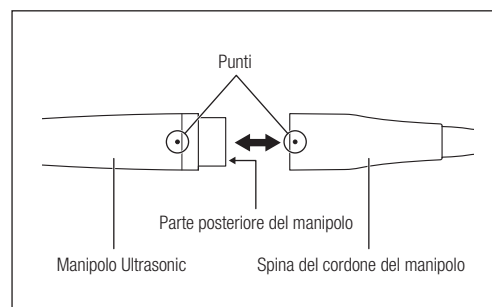
5-6-1 Manipolo Ultrasonic

(1) Collegamento

Allineare tra loro i punti impressi sul manipolo e sulla spina del cordone del manipolo. Premere saldamente.

(2) Scollegamento

Tenere il manipolo Ultrasonic e la spina del cordone del manipolo, quindi tirare per estrarlo.



- Per evitare scosse elettriche, non toccare i collegamenti elettrici sulla parte posteriore del manipolo e il cordone del manipolo.

AVVERTENZA



ATTENZIONE

- Non torcere il manipolo o il cordone del manipolo durante la rimozione del manipolo. Ciò potrebbe danneggiare i collegamenti elettrici del connettore, provocando malfunzionamenti.
- Prima di collegare il cordone del manipolo al manipolo, girare lateralmente il connettore del manipolo in modo da illuminarlo per verificarne l'estremità. Se l'illuminazione trasmessa dall'estremità della fibra ottica alla fine è luminosa in modo uniforme, sta funzionando normalmente. Se è parzialmente o completamente scura, l'estremità della fibra ottica potrebbe presentare crepe o essere rotta.

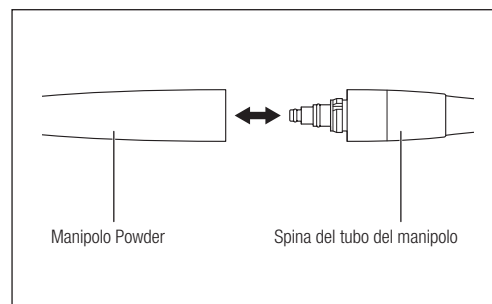
5-6-2 Manipolo Powder

(1) Collegamento

- 1) Utilizzare aria per asciugare il collegamento tra il manipolo e la spina del tubo del manipolo.
- 2) Premere saldamente il manipolo Powder nella spina del tubo del manipolo.


(2) Scollegamento

Tenere il manipolo Powder e la spina del tubo del manipolo, quindi tirare per estrarlo.




5-7 Collegamento del tubo dell'acqua

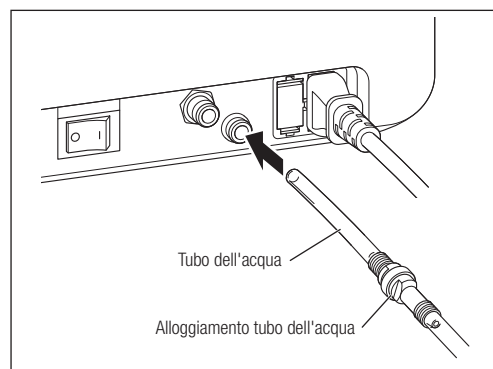- 1) Inserire completamente un'estremità del tubo dell'acqua (l'estremità con il filtro dell'acqua) nel relativo connettore.
- 2) Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua all'apposita presa situata sull'unità di controllo.
- 3) Tirare delicatamente il tubo dell'acqua per assicurarsi che non fuoriesca.



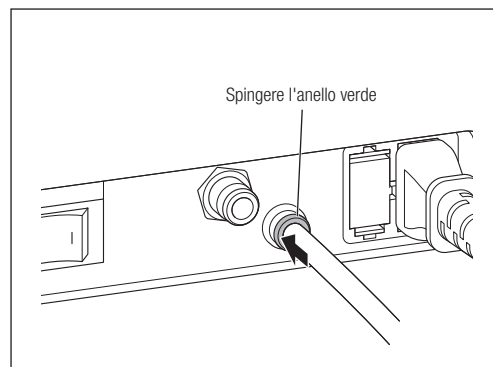- 4) Per estrarre il tubo dell'acqua dal relativo connettore, rimuoverlo spingendo l'anello verde verso l'unità di controllo.



AVVERTENZA

- Usare un addolcitore per ridurre la durezza dell'acqua, in quanto l'utilizzo di acqua molto dura potrebbe generare accumuli di minerali o calcare nel circuito idrico, con conseguenti problemi quali livelli idrici insufficienti, malfunzionamenti o guasti. A tale scopo, usare un tubo dell'acqua dotato di filtro per evitare guasti al dispositivo causati da materiali estranei presenti nell'acqua corrente. Fare riferimento al paragrafo "10-3 Sostituzione del filtro dell'acqua" per sostituire il filtro dell'acqua come richiesto.

ATTENZIONE

- Se nella presa per l'acqua dell'unità non è stata inserita dell'acqua per un lungo periodo di tempo, inizialmente potrebbe essere erogata acqua marronstra. Attendere fino a quando non verrà erogata acqua pulita. Quindi procedere al collegamento.
- Inserire saldamente il tubo dell'acqua nel relativo connettore quando lo si collega all'unità di controllo. Se il tubo non è inserito correttamente, potrebbe verificarsi una perdita di acqua.

6 Controllo prima del trattamento

Prima dell'uso, azionare il prodotto senza la presenza di un paziente per verificare l'assenza di anomalie quali vibrazioni, rumore, calore, ecc. Controllare anche quanto segue.

- Manipolo Ultrasonic: Accensione del LED e flusso di acqua.
- Manipolo Powder: Erogazione corretta di polvere, aria e acqua.

Se si nota qualcosa di insolito durante il controllo o l'utilizzo del prodotto, cessare di usarlo immediatamente e contattare il distributore autorizzato NSK.

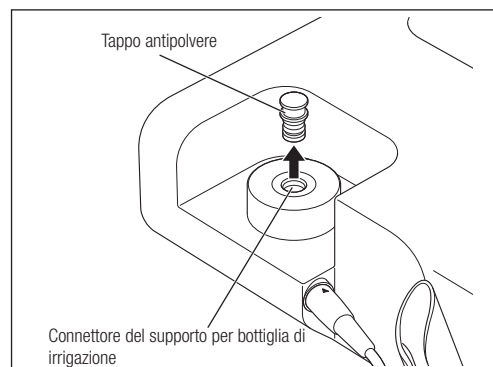
Durante la pulizia automatica, l'acqua all'interno del cordone/tubo del manipolo viene espulsa. L'operazione potrebbe causare un arresto del flusso dell'acqua durante il successivo utilizzo dell'unità di controllo. In tal caso, impostare il volume di irrigazione su 10 e azionare il manipolo per circa 30 secondi non appena l'acqua comincia a fuoriuscire. Se l'acqua non fuoriesce trascorsi i 20 secondi, anche dopo aver regolato il volume di irrigazione a 10, consultare "14 Risoluzione dei problemi".

7 Uso della modalità Ultrasonico

7-1 Impostazione del sistema idrico


Uso della bottiglia

- 1) Rimuovere il tappo antipolvere dal connettore del supporto per bottiglia di irrigazione.
- 2) Rimuovere il tappo della bottiglia di irrigazione e riempire la bottiglia di acqua o una soluzione disinfettante fino a raggiungere il livello desiderato.



- 3) Chiudere il tappo della bottiglia di irrigazione e inserire il giunto della bottiglia nel connettore del supporto per bottiglia.

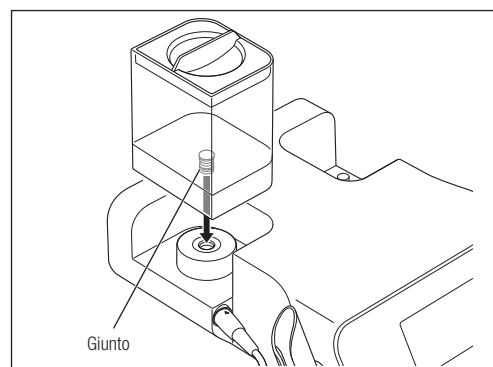Per rimuoverlo, tirare la bottiglia di irrigazione verso l'alto.



ATTENZIONE

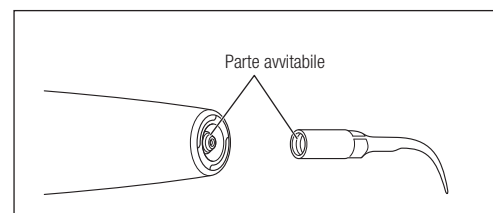
- Usare solo la bottiglia serie Varios Combi Pro dedicata.
- Inserire la bottiglia di irrigazione in verticale. In caso contrario, si potrebbe danneggiare l'O-ring.
- Pulire la bottiglia di irrigazione e il relativo tappo con acqua pulita dopo l'uso e prima di riporli.
- Inserire il tappo antipolvere sul connettore del supporto per bottiglia di irrigazione quando il tubo di irrigazione non è montato.
- Assicurarsi che la temperatura del liquido sia inferiore a 35°C.
- Non inserire acidi forti (come l'acqua altamente acidificata, acqua super acida o acqua elettrolitica) o acqua con acido ipocloroso nella bottiglia di irrigazione in quanto potrebbero provocare intasamento di acqua o corrosione dei metalli.

Uso di acqua corrente


- 1) Assicurarsi che il tubo dell'acqua sia saldamente collegato al relativo connettore dell'unità di controllo. Consultare "5-7 Collegamento del tubo dell'acqua" per i dettagli.
- 2) Aprire la valvola dell'acqua dell'unità e impostare la pressione dell'acqua tra 0,1 e 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm²). Se la pressione dell'acqua è superiore a 0,3 MPa, utilizzare una valvola riduttrice di pressione dell'acqua (opzionale) per regolare la pressione dell'acqua entro l'intervallo specificato. Consultare "20 Elenco dei pezzi opzionali" per i dettagli sulla valvola riduttrice di pressione dell'acqua.

7-2 Inserimento della punta


- 1) Verificare che le parti avvitabili del manipolo e della punta siano pulite.



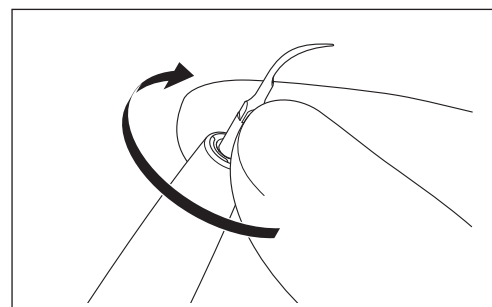- 2) Inserire la punta nell'estremità distale e avvitare finché non è lievemente serrata.




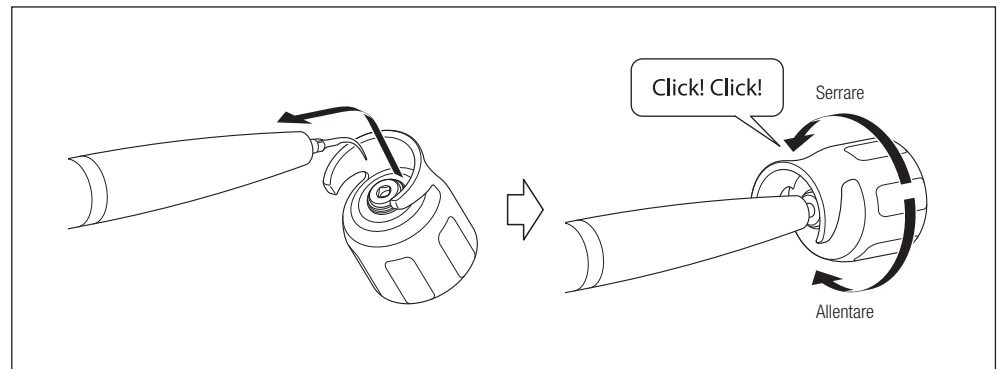3) Inserire la sagoma quadrata della punta nella fessura della chiave per punta (CR-10), quindi inserire la punta nel foro. Ruotare la chiave fino a quando si avverte uno scatto e la chiave comincia a girare senza serrare ulteriormente. Durante questa procedura, tenere il manipoło in modo da non torcere il cordone del manipoło. Per rimuovere la punta, ruotare la chiave in direzione di sblocco in direzione della freccia che indica "Allentare".



AVVERTENZA

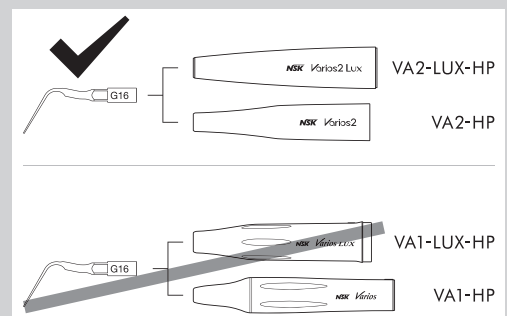- Evitare di toccare gengive, mucose e/o pelle. Si potrebbero causare lesioni e ustioni.
- UTILIZZARE SOLO punte originali NSK. I problemi quali danni al manipoło, guasti e incidenti derivanti dall'uso di punte non originali NSK non sono coperti dalla garanzia. Se si usano punte non originali NSK, potrebbero insorgere i seguenti tipi di problemi:
 - Vibrazioni inappropriate causate da viti incompatibili.
 - Ingestione accidentale di punte rotte da parte del paziente.
 - Danni o usura prematura della vite del manipoło.
- Non collegare la punta G16 in dotazione ad un manipoło diverso dal manipoło Varios2 (VA2-LUX-HP / VA2-HP). Ciò potrebbe provocare la rottura della punta o provocare graffi sulla superficie della dentizione, protesi, ecc. a causa di un aumento dell'ampiezza della vibrazione.



ATTENZIONE

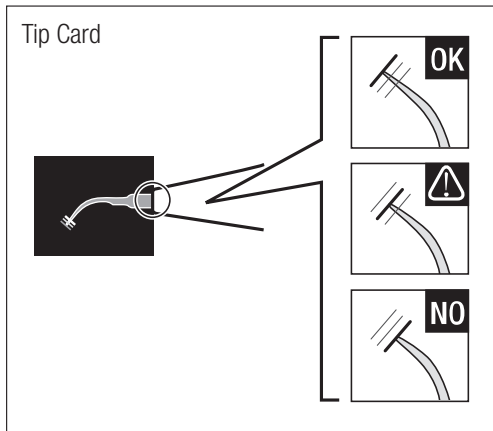
- Fare attenzione a non torcere il cordone del manipoło durante il serraggio della punta.
- Quando si inserisce o si rimuove una punta più lunga della chiave per punta (CR-10), fare attenzione perché la punta che fuoriesce dalla chiave per le punte potrebbe essere causa di lesioni.
- Non usare una punta danneggiata, piegata o arrugginita. La punta potrebbe spezzarsi durante l'uso.
- Se la chiave della punta viene utilizzata con l'angolazione errata, potrebbe danneggiare la filettatura o la punta e impedire che questa sia saldamente collegata e vibri adeguatamente.
- Se sono presenti residui sulla filettatura della punta, pulire immediatamente la punta. In caso contrario, si potrebbe causare rumore oppure la vibrazione potrebbe risultare debole.
- Non affilare la punta o cambiare la sua angolazione piegandola. La punta potrebbe rompersi durante l'uso, si potrebbe causare rumore oppure la vibrazione potrebbe risultare debole.
- La punta è soggetta a usura. Le punte usurate comportano un maggior rischio di rumore, rottura o vibrazione debole. Sostituire la punta in caso di rumore o vibrazione debole.
- Per inserire la punta, usare la chiave per punta in dotazione. Ruotare la chiave fino a quando si avverte uno scatto e la chiave comincia a girare senza serrare ulteriormente. Se la punta non è stretta a sufficienza, la vibrazione potrebbe risultare debole o si potrebbe causare rumore.
- Quando si inserisce una punta, indossare sempre guanti sterili e utilizzare una punta, un manipoło e una chiave per punta sterili.
- Assicurarsi che l'impostazione di potenza non superi il livello di potenza consigliato. In caso contrario, si potrebbe causare rumore, rottura della punta o lesioni del paziente.
- Non utilizzare punte non progettate per la rimozione delle corone in porcellana o metallo per questo scopo. Le punte potrebbero rompersi e cadere all'interno della cavità orale del paziente.
- Rimuovere la punta prima del collegamento o della rimozione del manipoło o del cordone del manipoło per evitare lesioni.
- In caso di vibrazione debole durante il funzionamento, allontanare il manipoło dalla cavità orale del paziente e premere nuovamente il pedale. Se il problema persiste, la punta potrebbe essersi allentata durante l'uso. Verificare che la punta sia inserita saldamente.
- Se la punta si allenta, emette rumore o la vibrazione è debole nonostante sia stata stretta fino ad avvertire uno scatto, la chiave per punta potrebbe essere usurata. La chiave per punta è soggetta a usura e deve essere sostituita una volta l'anno.

■ Uso della Tip Card

ATTENZIONE

- Le punte sono soggette a usura. Utilizzare la Tip Card in dotazione per verificare le condizioni della punta e sostituirla, se necessario.

Posizionare il collo della punta nello spazio rientrante della Tip Card. Misurare la lunghezza della punta e verificare i tempi di sostituzione. Per garantire un uso sicuro ed efficiente, si consiglia la sostituzione delle punte quando la punta raggiunge la linea gialla (usura di 1 mm).




Verde: usura assente - punta perfettamente utilizzabile
Non è necessario sostituire la punta.

Giallo: usura di 1 mm - la punta presenta segni di usura
Si raccomanda di sostituire la punta.

Rosso: usura di 2 mm - punta fortemente usurata
Sostituire la punta.


ATTENZIONE

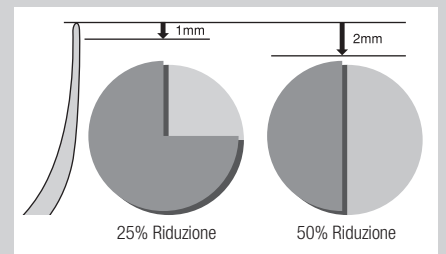- Le punte sono soggette a usura. L'efficienza dell'ablazione dentale diminuisce di circa il 25% quando l'estremità della punta presenta un'usura di 1 mm e di circa il 50% quando lo stato di usura è pari a 2 mm. L'usura può compromettere inoltre l'efficacia della vibrazione danneggiando la superficie dentale dei pazienti. Controllare periodicamente lo stato di usura della punta con l'apposita Tip Card e sostituire la punta non appena necessario.




7-3 Impostazione del livello di potenza

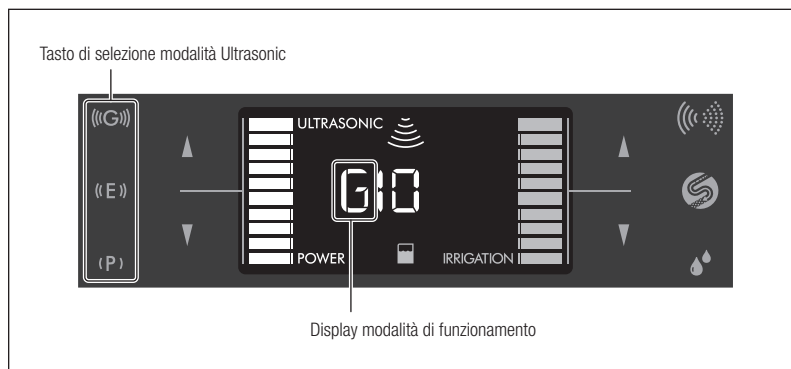1) Toccare il tasto di selezione modalità Ultrasonic per selezionare la modalità. La modalità selezionata viene visualizzata sul pannello LCD come P/E/G.



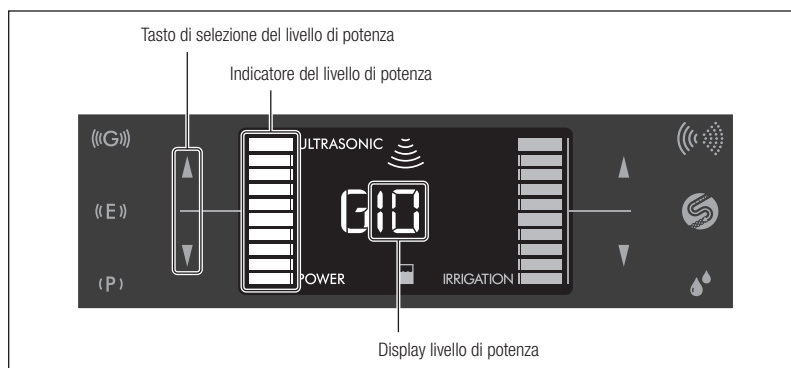2) Toccare il tasto di selezione del livello di potenza (▲/▼) per impostare il livello di potenza. Il display livello di potenza e l'indicatore del livello di potenza aumentano o diminuiscono in base al livello selezionato.



ATTENZIONE

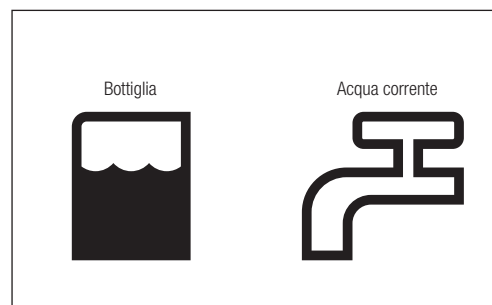
- Assicurarsi che l'impostazione di potenza non superi il livello di potenza consigliato (Consultare "Guida alla selezione della potenza delle punte" o l'"Etichetta sull'astuccio della punta" per la massima potenza di ciascuna punta.)

AVVISO

- Tenere premuto il tasto di selezione del livello di potenza per aumentare o diminuire continuamente il livello di potenza. Quando si raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un allarme.
- Per irrigare senza vibrazione della punta, impostare il livello di potenza su "0 (zero)" e il volume di irrigazione su 1 bar o oltre.

7-4 Impostazione dell'irrigazione

Toccare il tasto di selezione modalità irrigazione per selezionare la modalità di irrigazione (bottiglia o acqua corrente). La modalità selezionata viene visualizzata sul pannello LCD come icona.



7-5 Funzionamento

- 1) Premere il pulsante desiderato sul pedale. Viene emesso un segnale acustico, la punta inizia a vibrare e il LED sul manopolo si illumina.
- 2) Regolare il volume di irrigazione toccando i tasti di selezione dell'irrigazione (▲/▼) mentre si verifica l'irrigazione dalla punta.

ATTENZIONE

- Come misura di sicurezza, questo prodotto non funziona quando si accende l'interruttore di alimentazione, mentre si preme il pedale. In questo caso, viene emesso un allarme e il display modalità Ultrasonic (P/E/G) e "ULTRASONIC" lampeggia alternativamente. Rilasciare il pedale e premerlo di nuovo.
- Utilizzare sempre l'irrigazione. Se l'irrigazione è insufficiente, il manopolo si surriscalda e potrebbe danneggiare la superficie dentale del paziente.
- Verificare che il getto di acqua pulita sia adeguato prima dell'uso.
- L'acqua potrebbe non essere spruzzata uniformemente se il volume di irrigazione è impostato su un livello basso. In tal caso, aumentare temporaneamente il volume di irrigazione e premere il pedale. Verificare che il getto d'acqua dalla punta sia uniforme e regolare nuovamente il volume di irrigazione.
- Non forzare la rotazione del supporto del manopolo per evitare di danneggiarlo.

- AVVISO**
- Il LED del manipo lo rimane acceso per 5 secondi dopo il rilascio del pedale (funzione Afterglow).
 - Le impostazioni della modalità Ultrasonic (P/E/G), del livello di potenza, della modalità di irrigazione e il volume di irrigazione vengono memorizzati dopo lo spegnimento dell'alimentazione e le stesse impostazioni si applicano alla successiva accensione (funzione Last Memory).
 - Se il volume di irrigazione è troppo basso quando impostato su 10 oppure è troppo alto quando impostato su 1 e con la modalità di irrigazione impostata sull'acqua corrente, regolare il livello di irrigazione di base. Consultare "11-3 Impostazione del livello di acqua di base" per i dettagli.
 - Potrebbe essere emesso un suono d'allarme, ma ciò non indica un malfunzionamento.

■ Durante l'uso del manipo lo:

È possibile: Regolare il livello di potenza e il volume di irrigazione

Non è possibile: Modificare le impostazioni della modalità Ultrasonic o della modalità di irrigazione ed effettuare la pulizia automatica

7-6 Dopo il trattamento

Eseguire la manutenzione dopo l'uso su ciascun paziente. Consultare "9 Manutenzione dopo l'uso" per i dettagli.

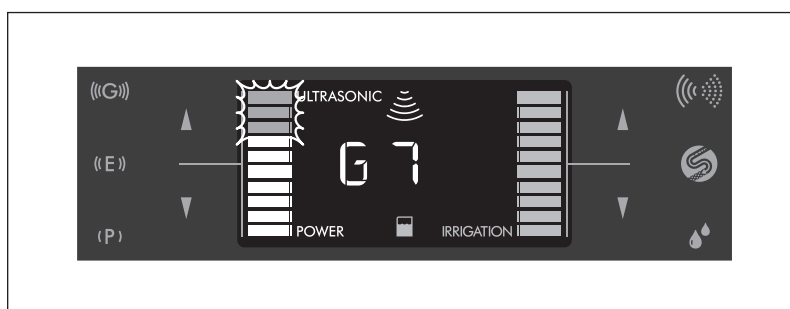


- Se non viene eseguita una manutenzione corretta, potrebbe verificarsi il malfunzionamento del prodotto.

ATTENZIONE

7-7 Circuito di protezione

Se l'unità di controllo viene usata a una potenza pari o superiore a 8 nella modalità G per un lungo periodo di tempo, l'interno del prodotto potrebbe surriscaldarsi. In questo caso, il circuito di protezione ridurrà automaticamente la potenza (potenza 7). La spia dell'istogramma lampeggerà 8-10 volte. Una volta rilasciato il circuito di protezione, la spia smetterà di lampeggiare. Il livello di potenza, tuttavia, non aumenta automaticamente. In caso di necessità, aumentarlo manualmente.



- AVVISO**
- Durante il funzionamento del circuito di protezione (mentre la spia dell'istogramma lampeggia), il livello di potenza non può essere aumentato a 8 o oltre.
 - Se il livello di potenza è inferiore a 7, la spia dell'istogramma smetterà di lampeggiare. Se il livello di potenza aumenta a 7 con la funzione del circuito di protezione attiva, la spia riprenderà a lampeggiare.



8 Uso della modalità Powder

Per utilizzare la modalità Perio, è necessario acquistare il kit Perio opzionale. Consultare "20 Elenco dei pezzi opzionali" per i dettagli sul kit Perio.

8-1 Impostazione del sistema idrico

- 1) Assicurarsi che il tubo dell'acqua sia saldamente collegato al relativo connettore dell'unità di controllo. Consultare "5-7 Collegamento del tubo dell'acqua" per i dettagli.
- 2) Aprire la valvola dell'acqua dell'unità e impostare la pressione dell'acqua tra 0,1 e 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm²). Se la pressione dell'acqua è superiore a 0,3 MPa, utilizzare una valvola riduttrice di pressione dell'acqua (opzionale) per regolare la pressione dell'acqua entro l'intervallo specificato. Consultare "20 Elenco dei pezzi opzionali" per i dettagli sulla valvola riduttrice di pressione dell'acqua.




- Utilizzare solo acqua potabile per l'irrigazione.

ATTENZIONE



8-2 Preparazione della polvere

- 1) Selezionare il serbatoio e la polvere da utilizzare con questa modalità. Riempire il serbatoio con polvere fino alla linea "MAX" (circa 80 g di FLASH pearl o circa 50 g di polvere Perio Mate).

| Modalità | Serbatoio | Polvere |
|-----------------|----------------|--------------------|
| Modalità Prophy | Per uso Prophy | FLASH pearl |
| Modalità Perio | Per uso Perio | Polvere Perio Mate |

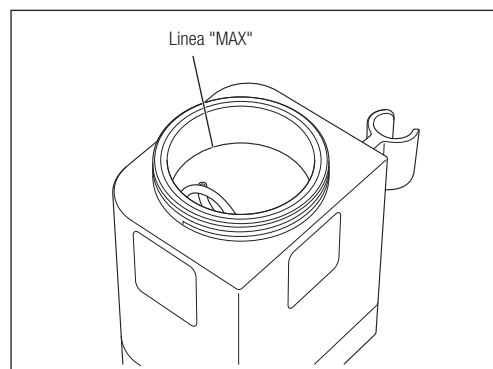

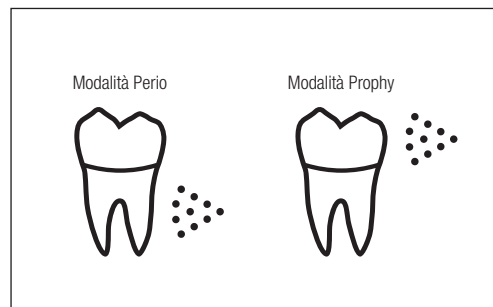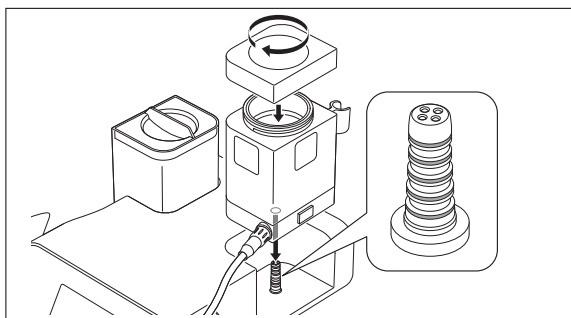- 2) Chiudere saldamente il coperchio del serbatoio e inserire il serbatoio nell'unità di controllo. Il tipo di serbatoio inserito viene visualizzato sul pannello LCD con una delle seguenti icone.



AVVERTENZA

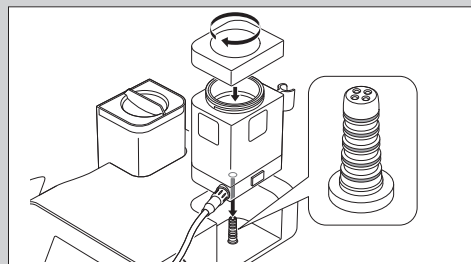
- Utilizzare solo la polvere indicata. L'utilizzo di un'altra polvere potrebbe danneggiare il prodotto, causando danni ai denti o enfisemi. Inoltre, potrebbe causare una riduzione delle prestazioni del prodotto. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall'utilizzo di una polvere diversa da quella indicata.

ATTENZIONE

- Chiudere bene il coperchio del serbatoio per evitare che possa esplodere e provocare lesioni a persone.



- Prima di inserire il serbatoio nell'unità di controllo, verificare che gli O-ring del connettore del supporto del serbatoio non siano danneggiati o lacerati. La presenza di danni o strappi potrebbe causare un funzionamento irregolare o malfunzionamenti.



- Quando si inserisce il serbatoio nell'unità di controllo, inserirlo in maniera perpendicolare all'alloggiamento. Un inserimento non perpendicolare potrebbe danneggiare gli O-ring, provocando malfunzionamenti.
- Inserire solo la giusta quantità di polvere nel serbatoio per evitare che ne venga spruzzata una quantità scorretta all'avvio.
- Non riutilizzare la polvere rimasta né quella eventualmente aperta da tempo in quanto potrebbe inumidirsi e ostruire il puntale. Non mischiare la polvere rimasta con quella nuova.
- Prima di inserire il serbatoio, verificare che non sia presente acqua, ecc. sul connettore del supporto del serbatoio e pulirlo se risulta bagnato. In caso contrario si potrebbe provocare un intasamento della polvere.
- Non utilizzare polvere scolorita.
- Chiudere bene il coperchio del serbatoio della polvere dopo il rabbocco per evitare l'infiltrazione di umidità.
- Rimuovere eventuali residui di polvere nel serbatoio o nel coperchio. La chiusura del tappo potrebbe altrimenti risultare difficoltosa.
- Non capovolgere il serbatoio se contiene polvere. In caso contrario si potrebbe provocare un intasamento della polvere.
- Come misura di sicurezza, questo prodotto non funziona se si preme il pedale quando il serbatoio è montato in modo non corretto. Viene emesso un allarme e l'icona dei denti e "POWDER" lampeggiano alternativamente. Montare correttamente il serbatoio.
- La polvere Perio Mate (opzionale) si disperde con facilità. Effettuare il rabbocco lentamente e fare attenzione a non ingerire la polvere o evitare il contatto con gli occhi.
- FLASH pearl è quasi insolubile nell'acqua. Per evitare l'intasamento dei tubi quando si utilizza FLASH pearl, sono necessarie la pulizia e la manutenzione periodiche del tubo di aspirazione, dell'aspirasaliva e del separatore.

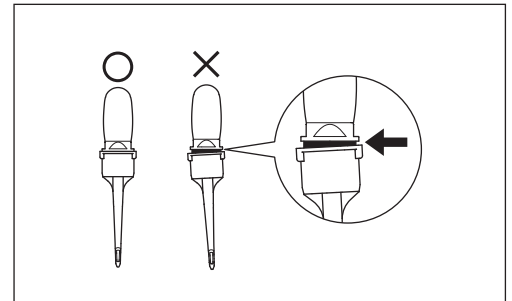
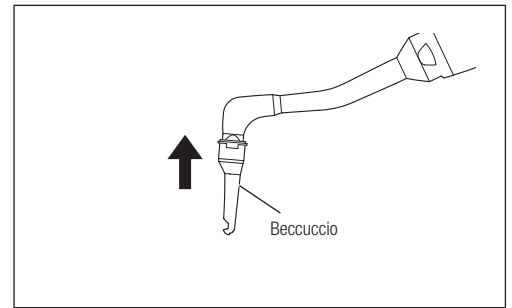
8-3 Inserimento/rimozione del beccuccio

8-3-1 Inserimento del beccuccio

Inserire il beccuccio (opzionale) in modo saldo e sicuro sul puntale del manipolo Powder (per uso Perio).

AVVERTENZA • Non utilizzare un beccuccio deformato o danneggiato. Potrebbe fuoriuscire durante l'uso.


ATTENZIONE • Assicurarsi di inserire il beccuccio in modo saldo e sicuro. Se viene inserito in modo non corretto, può fuoriuscire causando una possibile ingestione accidentale da parte del paziente.
• Quando si inserisce un beccuccio nel manipolo Powder, indossare sempre guanti sterili e assicurarsi che il manipolo Powder sia sterilizzato.



8-3-2 Rimozione del beccuccio

Per rimuovere il beccuccio, utilizzare l'utensile per rimuovere il puntale Perio Mate (opzionale) e procedere allo smaltimento.

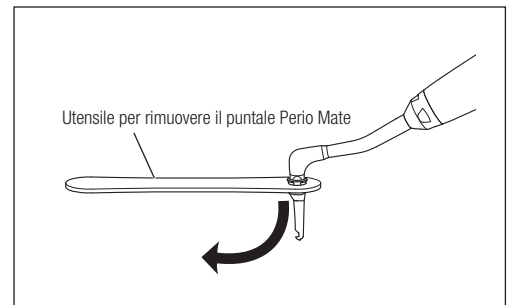
AVVERTENZA • Il beccuccio è un prodotto monouso. Non riutilizzarlo o sterilizzarlo per evitare di danneggiarlo o contaminarlo. Se il beccuccio viene riutilizzato, la prestazione potrebbe risultare inadeguata a causa della deformazione del beccuccio durante la rimozione, oppure potrebbe avvenire un'ingestione accidentale da parte del paziente durante l'utilizzo. Lo stesso vale per una punta rimossa accidentalmente.



8-4 Impostazione del livello di potenza

Toccare i tasti di selezione del livello di potenza (▲/▼) per impostare il livello di potenza. Il display livello di potenza e l'indicatore del livello di potenza aumentano o diminuiscono in base al livello di potenza selezionato.

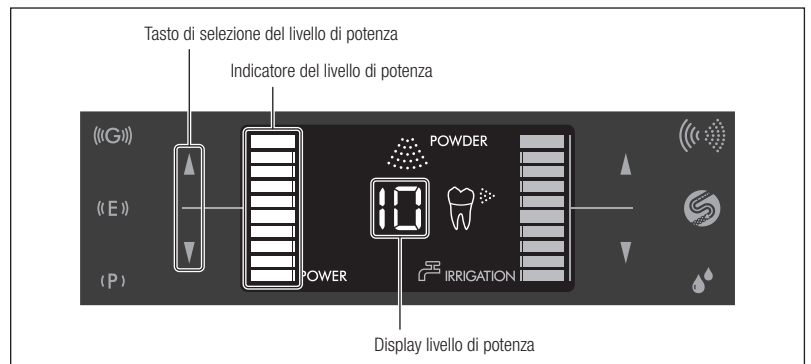AVVISO • Se si specifica questa impostazione senza aver montato il serbatoio, si imposta il livello di potenza durante l'utilizzo della modalità Prophy.



8-5 Impostazione dell'irrigazione

- 1) Toccare i tasti di selezione dell'irrigazione (▲/▼) per impostare il volume di irrigazione.
- 2) Premere il pedale per spruzzare la polvere in una sputacchiera, ecc. e assicurarsi che polvere, aria e acqua fuoriescano correttamente.
- 3) Regolare il volume di irrigazione dal beccuccio.

AVVISO • Se il volume di irrigazione è troppo basso quando impostato su 10 oppure è troppo alto quando impostato su 1, regolare il livello di irrigazione di base. Consultare "11-3 Impostazione del livello di acqua di base" per i dettagli.
• Se si effettua la regolazione senza aver montato il serbatoio, si imposta il volume di irrigazione durante l'utilizzo della modalità Prophy.

8-6 Funzionamento

Polvere, acqua e aria vengono erogate quando si preme il pulsante D del pedale. Acqua e aria vengono erogate quando si preme il pulsante B del pedale. Osservare le istruzioni per l'uso illustrate in "8-6-1 Uso della modalità Prophy" e "8-6-2 Uso della modalità Perio".

- AVVERTENZA**
- Non spruzzare la polvere verso il corpo del paziente, dell'operatore e dell'assistente, ma solo verso la superficie dentale.
 - Se durante il funzionamento il tubo flessibile si gonfia o se c'è una perdita d'aria o di polvere dai collegamenti tra la camera e il tubo, ecc., interrompere l'uso immediatamente.
 - Spruzzare acqua durante l'utilizzo di questo prodotto.
 - Assicurarsi di utilizzare un tubo a vuoto (e anche un tubo di scarico saliva, se necessario) per evitare che il paziente ingerisca una grande quantità di polvere. Evitare l'uso continuo per lunghi periodi e consentire al paziente di sciacquarsi la bocca quando necessario.

- ATTENZIONE**
- Come misura di sicurezza, questo prodotto non funziona quando si accende l'interruttore di alimentazione, mentre si preme il pedale. Viene emesso un allarme e l'icona dei denti e "POWDER" lampeggiano alternativamente. Rilasciare il pedale e premerlo di nuovo.
 - Prima del trattamento e dell'uso sul paziente, regolare il livello di potenza e il livello di irrigazione.
 - Ridurre il livello di potenza nel trattamento attorno al margine della gengiva.
 - Non spruzzare verticalmente sulla superficie dentale.
 - Mantenere la distanza tra la punta del beccuccio del manipolo e la superficie dentale come illustrato in "8-6-1 Uso della modalità Prophy" e "8-6-2 Uso della modalità Perio".
 - Non forzare la rotazione del supporto del manipolo per evitare di danneggiarlo.

AVVISO • Potrebbe essere emesso un suono d'allarme, ma ciò non indica un malfunzionamento.

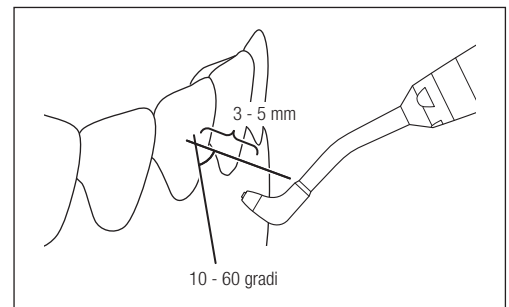


8-6-1 Uso della modalità Prophy

Utilizzare il puntale ad una distanza di 3 - 5 mm dalla superficie dentale, con un'angolazione compresa tra 10 e 60°.

- AVVERTENZA**
- Non puntarlo mai verso i tessuti molli, le gengive o le superfici sottogengivali.

- ATTENZIONE**
- Spruzzare dalla radice al bordo incisale del dente.



8-6-2 Uso della modalità Perio

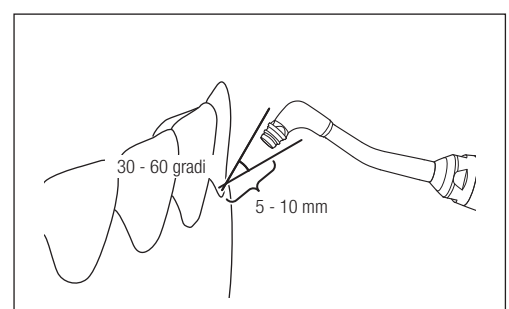
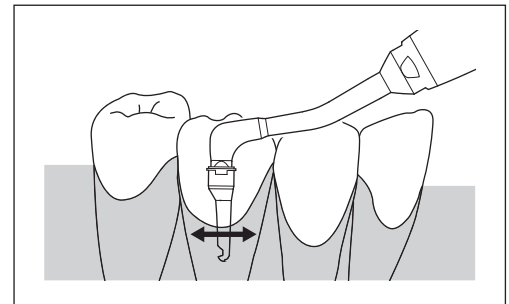
■ Uso con il beccuccio

Inserire il beccuccio in una tasca parodontale di 3 mm o più.

Se il beccuccio viene inserito per meno di 3 mm, la polvere potrebbe non essere spruzzata nella tasca parodontale in modo efficace.

■ Uso senza il beccuccio

Rimuovere il beccuccio dal puntale del manipolo per eliminare la placca dalle superfici sopragengivali e dal margine della gengiva oppure il biofilm e le piccole macchie. Utilizzare il puntale ad una distanza di 5 - 10 mm dalla superficie dentale, con un'angolazione compresa tra 30 e 60°. Non puntare il puntale direttamente sulla mucosa o all'interno delle tasche parodontali.



**AVVERTENZA**

- Quando si usa il beccuccio, non puntarlo verso la mucosa.
- Non utilizzare questo prodotto in una tasca parodontale subito dopo l'ablazione della superficie dentale. Ciò potrebbe causare batteriemia.
- Non inserire il beccuccio nella stessa area della tasca parodontale per più di una volta durante lo stesso trattamento.
- La polvere deve essere spruzzata per 5 secondi al massimo nella stessa tasca parodontale (20 secondi al massimo per singolo dente). Non spruzzare mai la polvere per un tempo superiore a quello indicato.
- Non forzare con violenza il beccuccio in una tasca parodontale.
- Non spruzzare la polvere mentre l'estremità del beccuccio si trova sul fondo di una tasca parodontale. Potrebbe causare un enfisema.
- Utilizzare il beccuccio solo nelle tasche parodontali.
- L'impostazione di un livello di potenza eccessivo potrebbe causare un enfisema. Regolare il livello di potenza adeguato mentre si verificano le condizioni del paziente.

**ATTENZIONE**

- L'allarme viene emesso ogni 5 secondi quando si utilizza la modalità Perio.
- In modalità Perio, il livello di potenza viene automaticamente e significativamente ridotto rispetto alla stessa impostazione della modalità Prophy.

8-6-3 Durante l'uso del manipolo

È possibile: Regolare il livello di potenza e il volume di acqua

Non è possibile: Modificare le impostazioni della modalità di irrigazione ed effettuare la pulizia automatica

8-6-4 Rilascio della pressione residua

Dopo l'uso non è possibile aprire il coperchio del serbatoio a causa dell'aumento della pressione che si genera all'interno durante il funzionamento. Rilasciare la pressione residua prima di inserire la polvere o di rimuovere il serbatoio dall'unità di controllo.

**ATTENZIONE**

- La polvere residua e l'acqua fuoriescono dal manipolo rilasciando la pressione residua. Preparare un contenitore, ad esempio una tazza, per catturare la polvere e l'acqua.

- 1) Estrarre il manipolo Powder dal relativo supporto.
- 2) Inserire il manipolo nel contenitore per catturare la polvere e l'acqua.
- 3) Tenere premuto il tasto di pulizia automatica per circa 1 secondo. Viene emesso un segnale acustico e la pressione residua inizia ad essere rilasciata.
- 4) La procedura si arresta quando tutta la pressione residua viene rilasciata dalla Camera.

8-7 Dopo il trattamento

Eseguire la manutenzione dopo l'uso su ciascun paziente. Consultare "9 Manutenzione dopo l'uso" per i dettagli.

Se il beccuccio (opzionale) è inserito nel puntale, rimuoverlo e smaltirlo prima della manutenzione.

**ATTENZIONE**

- La mancata esecuzione della manutenzione potrebbe causare malfunzionamento.

AVVISO

- Le impostazioni del livello di potenza e della modalità di irrigazione vengono memorizzate dopo lo spegnimento dell'alimentazione (funzione Last Memory).


9 Manutenzione dopo l'uso


Eseguire la seguente manutenzione dopo l'uso su ciascun paziente.

Le seguenti istruzioni di ricondizionamento vengono create in base ai requisiti di ISO 17664.

L'efficacia del ricondizionamento tramite la seguente procedura è stata verificata.


Indossare dispositivi di protezione degli occhi, una maschera protettiva e dei guanti per sicurezza e per prevenire infezioni.

- AVVERTENZA** 
- Per rimuovere i residui, effettuare la seguente manutenzione immediatamente dopo il trattamento (entro 30 minuti). L'omissione della manutenzione potrebbe causare infezioni, guasti precoci e ustioni derivanti da surriscaldamento.
 - Rispettare sempre le direttive locali, gli standard, le linee guida, ecc., in materia di pulizia, disinfezione e sterilizzazione del prodotto.

- ATTENZIONE** 
- Utilizzare esclusivamente i prodotti di pulizia e disinfezione specificati in questo manuale d'uso.
 - Prima di iniziare la manutenzione, indossare dispositivi di protezione degli occhi, una maschera protettiva e dei guanti per sicurezza e per prevenire infezioni.
 - Per il ricondizionamento delle punte e della chiave per punte, consultare il manuale d'uso delle punte (fare riferimento a OM-Z0314E).
 - Per la pulizia e la disinfezione, utilizzare etanolo disinfettante o isopropanolo disinfettante privo di additivi (di seguito denominato alcol disinfettante). L'utilizzo di disinfettanti diversi dall'alcol disinfettante potrebbe causare alterazioni cromatiche o crepe.
 - Utilizzare l'alcol disinfettante adeguato in base alle normative e alle linee guida di ciascun paese.
 - Non utilizzare solventi come acqua ossidante elettrolitica (acqua fortemente acida o acqua super acida), prodotti chimici acidi o alcalini forti, solventi contenenti cloro, benzene o diluenti per la pulizia o l'immersione.
 - Dopo la disinfezione termica, rimuovere immediatamente il prodotto dalla termodisinfettore (entro un'ora). In caso contrario, se ne causerà la corrosione.
 - Dopo la disinfezione termica, asciugare completamente il prodotto. L'umidità residua causa corrosione interna.
 - Prima della disinfezione, accertarsi di pulire il prodotto per rimuovere eventuali residui. Se rimane del sangue nel prodotto, si coagula causando un malfunzionamento del prodotto.
 - Utilizzare la chiave per punte per montare e rimuovere le punte.
 - Non utilizzare la pulizia a ultrasuoni per pulire i manipoli Ultrasonic.
 - Utilizzare aria compressa pulita e asciutta per la pulizia.

9-1 Pulizia e disinfezione (ogni paziente)

9-1-1 Manipolo Ultrasonic

- ATTENZIONE** 
- Accertarsi di eseguire la pulizia automatica (pulizia del tubo di irrigazione) dopo l'uso. Se si salta la pulizia automatica, il tubo di irrigazione potrebbe ostruirsi o le parti di metallo potrebbero arrugginirsi.
 - Accertarsi di riempire la bottiglia di irrigazione con acqua distillata o acqua depurata priva di impurità. L'uso di acqua contenente impurità causa l'ostruzione del tubo di irrigazione o altri problemi.
 - Accertarsi che il manipolo Ultrasonic e il cordone del manipolo siano collegati saldamente.
 - Dopo aver rimosso la bottiglia di irrigazione, smaltire immediatamente il liquido in essa contenuto. Eventuale liquido rimanente nella bottiglia di irrigazione potrebbe fuoriuscire dalla bottiglia stessa attraverso la sezione giunto.

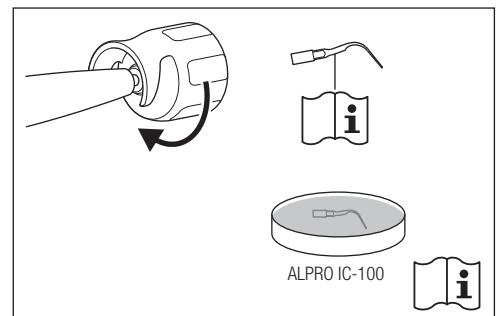
- AVVISO** • Il LED del manipolo Ultrasonic non si accende durante la pulizia automatica.

9-1-1-1 Rimozione della punta


1) Rimuovere la punta dal manipolo Ultrasonic.

Rimuovere la punta dalla chiave per punte.


Per il ricondizionamento delle punte e della chiave per punte, consultare il manuale d'uso in dotazione con le punte (fare riferimento a OM-Z0314E).



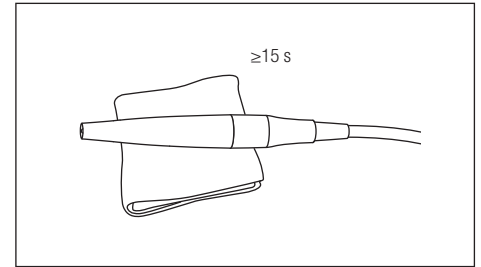
- 2) Eliminare la sporcizia dalla superficie del manipolo Ultrasonic utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con acqua.




9-1-1-2 Pulizia automatica

ATTENZIONE  • Durante la pulizia automatica, l'acqua utilizzata per la pulizia fuoriesce dalla punta del manipolo Ultrasonic. Preparare un contenitore, ad esempio una tazza, per catturare l'acqua.

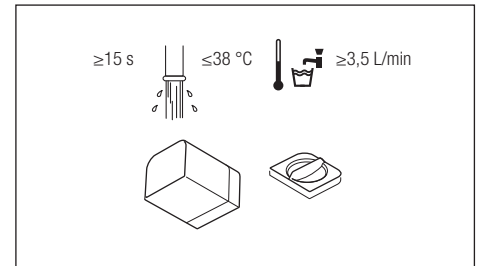
- 1) Seleziona l'acqua corrente per la modalità di irrigazione e regolare il volume di irrigazione al massimo.
2) Rimuovere la bottiglia di irrigazione e quindi pulire l'interno della bottiglia di irrigazione e il tappo della bottiglia di irrigazione con acqua corrente.



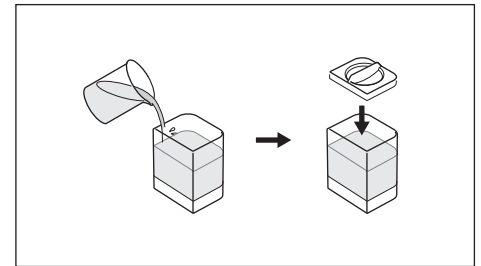
- 3) Riempire la bottiglia di irrigazione fino almeno alla metà con acqua distillata o acqua depurata e quindi chiudere saldamente il tappo della bottiglia di irrigazione. (non usare una soluzione salina).




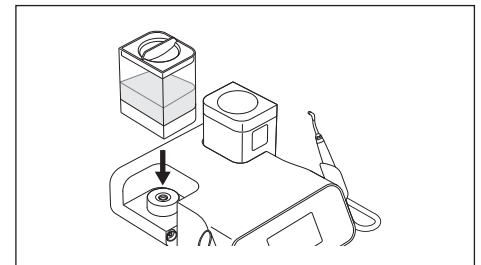- 4) Inserire la bottiglia di irrigazione in verticale nel connettore del supporto per bottiglia di irrigazione.




* Se è presente una separazione tra la bottiglia di irrigazione e l'unità di controllo, l'acqua potrebbe fuoriuscire.

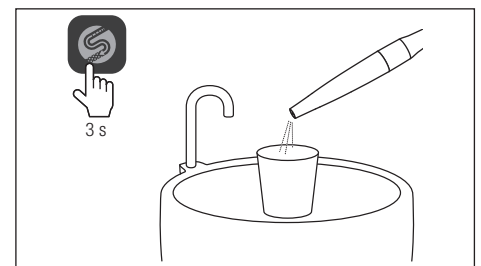- 5) Rivolgere la punta del manipolo Ultrasonic verso un contenitore per catturare l'acqua, quindi toccare  per tre secondi.
A questo punto, la pulizia automatica si avvia. (Il tempo di pulizia è di 45 secondi.)



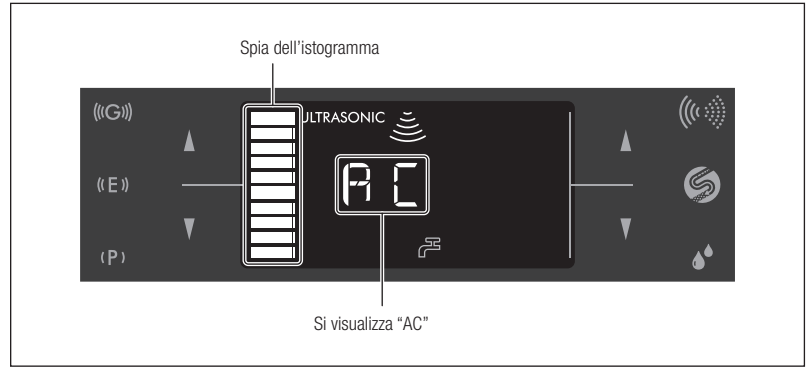
- 6) Durante la pulizia automatica, sull'LCD appare "AC".
La spia dell'istogramma mostra l'avanzamento.



* Per annullare la pulizia automatica, toccare nuovamente .


Al termine della pulizia automatica, l'unità di controllo torna allo stato precedente la pulizia automatica.

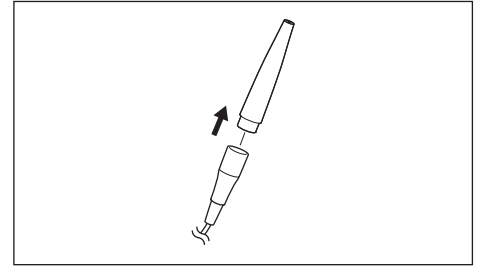- 7) Scollegare il manipolo Ultrasonic dal cordone del manipolo.




9-1-1-3 Pulizia preventiva

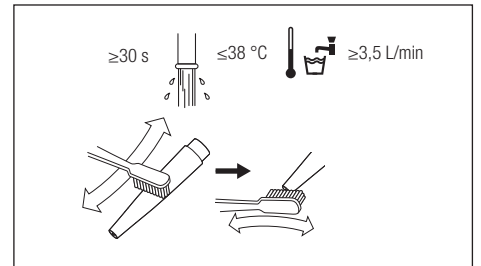
- 1) Pulire il manipolo Ultrasonic con acqua corrente e una spazzola a setole morbide.



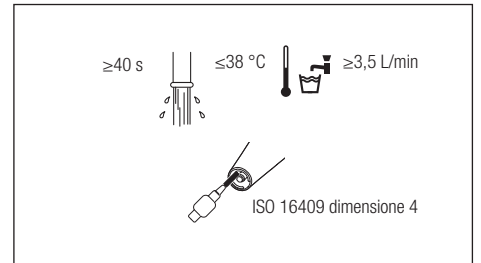
- 2) Pulire la punta del manipolo Ultrasonic con acqua corrente e una spazzola.



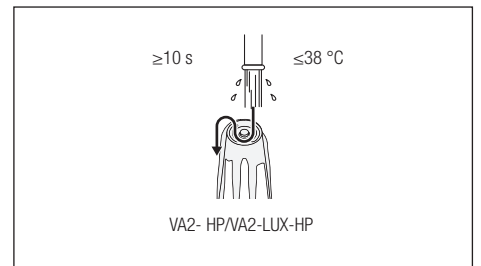
- 3) Sciacquare l'estremità del manipolo Ultrasonic.



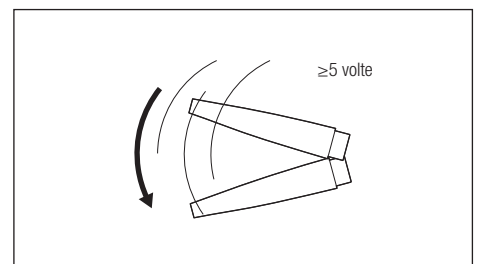- 4) Agitare leggermente il manipolo Ultrasonic per rimuovere l'acqua.



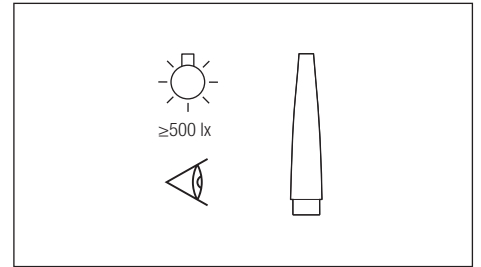- 5) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 1) fino a completa eliminazione.



9-1-1-4 Pulizia e disinfezione

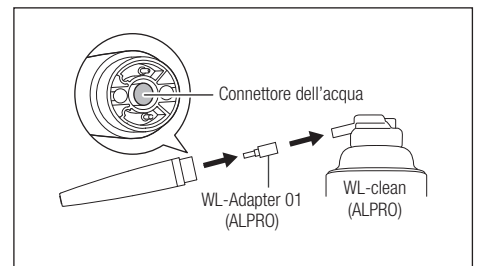
ATTENZIONE

- Accertarsi di eseguire la pulizia preventiva prima della pulizia e della disinfezione.
- Accertarsi di effettuare la disinfezione entro due ore dalla pulizia.
- Dopo la disinfezione, sterilizzare il manipolo Ultrasonic (consultare "9-2 Sterilizzazione").
- Se si utilizza uno spray (ALPRO), accertarsi di coprire la punta del manipolo con un panno per evitare la dispersione del detergente e del prodotto di disinfezione. Consigliamo di utilizzare la sacchetti assorbenti assorbioolio (Y900084).
- Quando si nebulizza lo spray ALPRO, mantenere il manipolo Ultrasonic e WL-Adapter 01.
- Quando si utilizzano prodotti ALPRO, consultare il manuale del produttore.


Manuale

■ Pulizia


- 1) Montare il WL-Adapter 01 (ALPRO) sul WL-clean (ALPRO) e collegare il connettore dell'acqua del manipolo Ultrasonic all'estremità del WL-Adapter 01 (ALPRO).



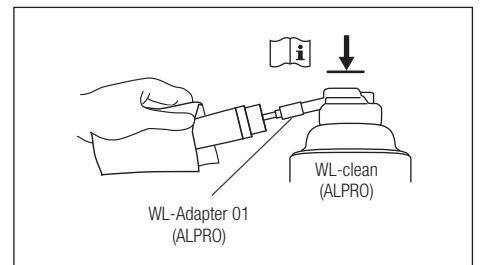- 2) Nebulizzare il WL-clean (ALPRO) mantenendo il WL-clean (ALPRO) e il manipolo Ultrasonic.




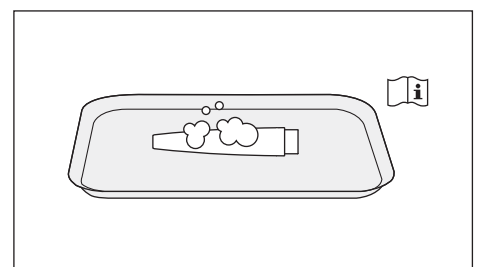- 3) Rimuovere il connettore dell'acqua del manipolo Ultrasonic dal WL-Adapter 01 (ALPRO) e rimuovere il WL-Adapter 01 (ALPRO) dal WL-clean (ALPRO), quindi mettere il manipolo Ultrasonic sul vassoio disinfettato. Nebulizzare il WL-clean (ALPRO) sulla superficie del manipolo Ultrasonic e attendere che il WL-clean (ALPRO) faccia effetto.




■ Disinfezione

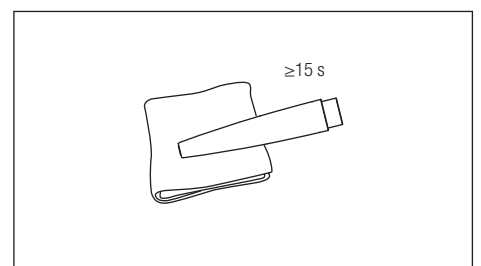
- 1) Pulire la superficie del manipolo Ultrasonic utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.



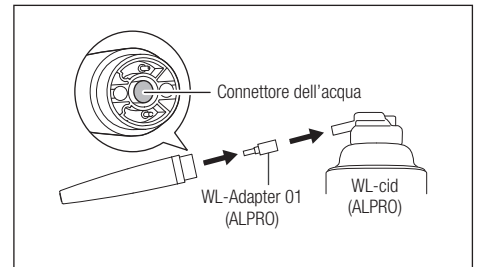2) Montare il WL-Adapter 01 (ALPRO) sul WL-cid (ALPRO) e collegare il connettore dell'acqua del manipolo Ultrasonico all'estremità del WL-Adapter 01 (ALPRO).



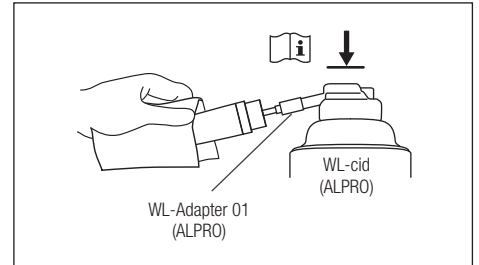
3) Nebulizzare il WL-cid (ALPRO) nel connettore dell'acqua del manipolo Ultrasonico mantenendo il manipolo Ultrasonico e il WL-cid (ALPRO).




4) Rimuovere il WL-Adapter 01 (ALPRO) e il manipolo Ultrasonico dal WL-cid (ALPRO).

5) Rimuovere il manipolo Ultrasonico dal WL-Adapter 01 (ALPRO), quindi mettere il manipolo Ultrasonico sul vassoio disinfettato.

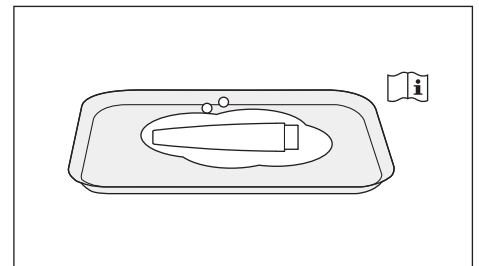6) Nebulizzare il WL-cid (ALPRO) sulla superficie del manipolo Ultrasonico e attendere che il WL-cid (ALPRO) faccia effetto.




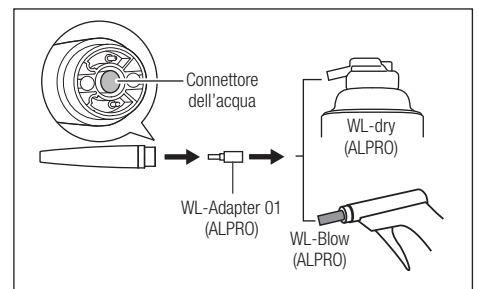7) Montare il WL-Adapter 01 (ALPRO) sul WL-dry (ALPRO) o sul WL-Blow (ALPRO), quindi montare il retro del manipolo Ultrasonico sul WL-Adapter 01 (ALPRO).




8) Far scaricare il disinfettante dal manipolo Ultrasonico mantenendo il WL-dry (ALPRO) o il WL-Blow (ALPRO) e il manipolo Ultrasonico.

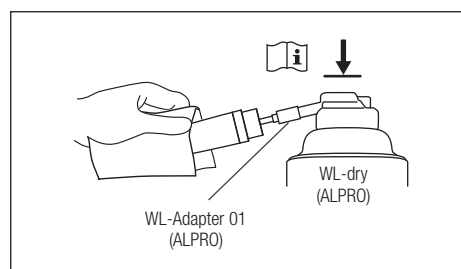· Quando si usa il WL-dry (ALPRO):




· Quando si usa il WL-Blow (ALPRO):

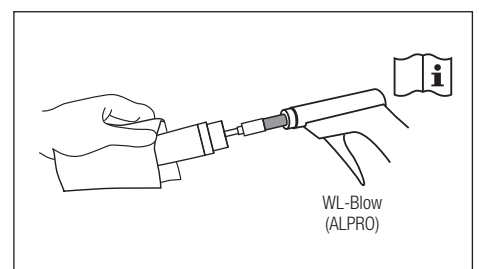

9) Rimuovere il WL-Adapter 01 (ALPRO) e il manipolo Ultrasonico dal WL-dry (ALPRO) o dal WL-Blow (ALPRO).

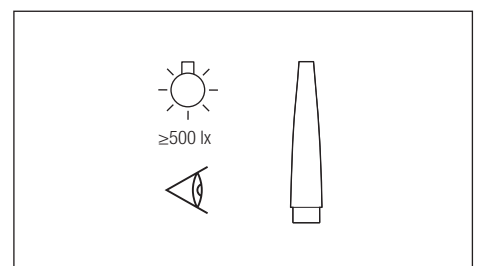10) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 1) fino a completa eliminazione.



11) Procedere con la sterilizzazione (consultare "9-2 Sterilizzazione").

Automatica

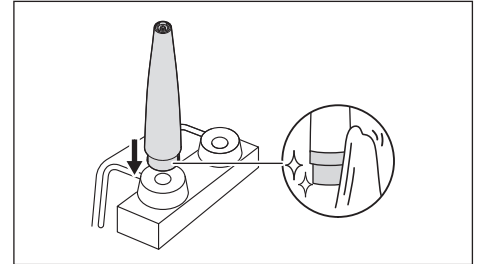


ATTENZIONE

- Utilizzare una lavadisinfettatrice conforme alla norma DIN EN ISO 15883.
- Leggere il manuale della lavadisinfettatrice.
- Il vetro delle fibre ottiche è fragile; prestare pertanto attenzione a non sottoporre la punta del manipolo Ultrasonic a nessun impatto durante la pulizia.
- Al termine della disinfezione termica e del ciclo di asciugatura, estrarre immediatamente il prodotto dalla lavadisinfettatrice (entro un'ora) e asciugarlo. L'eventuale presenza di umidità rimanente nel prodotto è causa di corrosione interna o altri problemi.
- Se si utilizza una lavadisinfettatrice, utilizzare l'adattatore compatibile con la lavadisinfettatrice (a cui dovrà provvedere l'utente) per pulire e disinfettare il manipolo Ultrasonic.
- Per la pulizia automatica e la disinfezione, attenersi alle istruzioni contenute nel manuale del produttore della lavadisinfettatrice.

■ Pulizia e disinfezione (esterno e interno)


- 1) Pulire la porzione di collegamento del manipolo Ultrasonic con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante, quindi montare il manipolo Ultrasonic sull'adattatore della lavadisinfettatrice.




Adattatore compatibile con la termodisinfettore (acquistato dall'utente)

| Produttore | REF | Collegamento di circa | Colore |
|------------|-----------|-----------------------|--------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Verde |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Verde |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Nero |

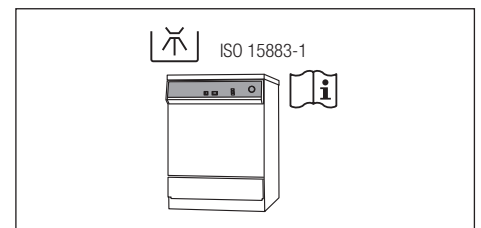
- 2) Eseguire la disinfezione termica facendo riferimento al manuale della lavadisinfettatrice.



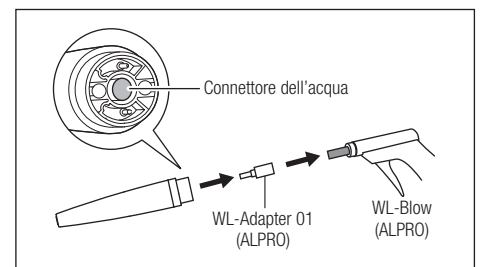
- 3) Estrarre il manipolo Ultrasonic dalla lavadisinfettatrice.
- 4) Montare il WL-Adapter 01 (ALPRO) sul WL-Blow (ALPRO), quindi montare il retro del manipolo Ultrasonic sul WL-Adapter (ALPRO).



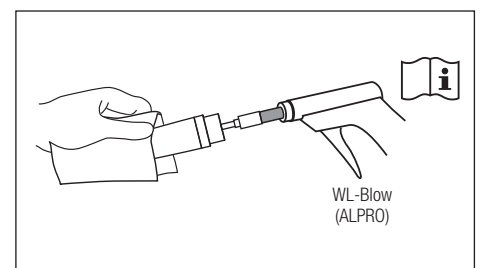- 5) Eliminare l'umidità dal manipolo Ultrasonic mantenendo il WL-Blow (ALPRO) e il manipolo Ultrasonic.




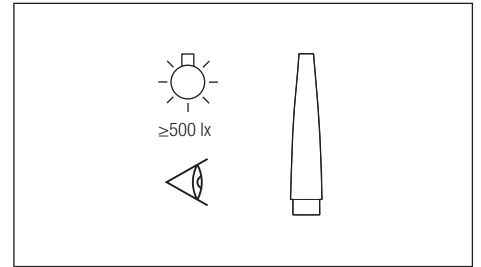- 6) Rimuovere il WL-Adapter 01 (ALPRO) e il manipolo Ultrasonic dal WL-Blow (ALPRO).
- 7) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 2) fino a completa eliminazione.



9-1-1-5 Vetro delle fibre ottiche

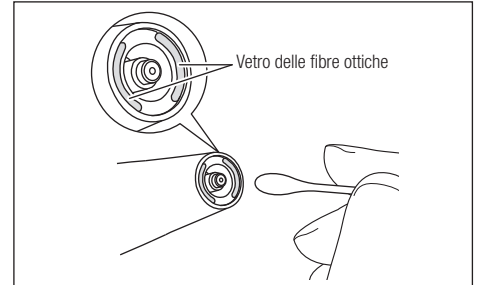Se c'è della polvere o dello sporco che aderisce al vetro delle fibre ottiche, rimuoverlo accuratamente utilizzando un tampone di cotone inumidito con alcol disinfectante.




ATTENZIONE

- Non utilizzare un ago o un coltello per pulire il vetro delle fibre ottiche. In caso contrario, si danneggerà il vetro delle fibre ottiche, riducendone la capacità di trasmissione.


9-1-2 Cordone del manipolo

Pulizia e disinfezione

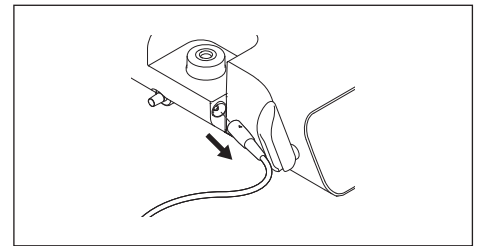
- 1) Scollegare il cordone del manipolo dall'unità di controllo.



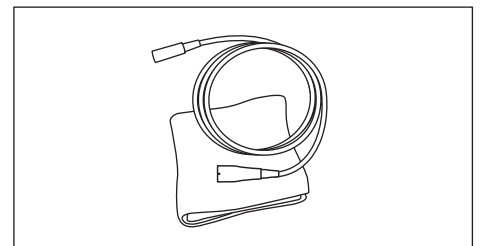
- 2) Pulire la superficie del cordone del manipolo utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con acqua.



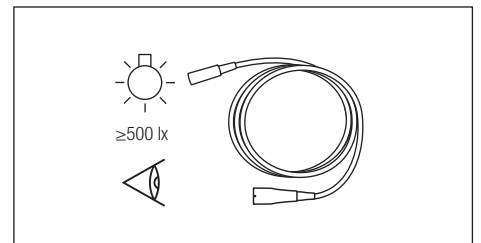- 3) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 2) fino a completa eliminazione.




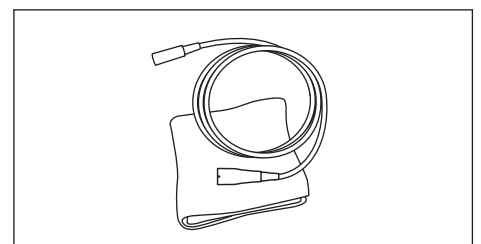- 4) Pulire la superficie del cordone del manipolo utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfectante.



5) Pulire la porzione di collegamento utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.

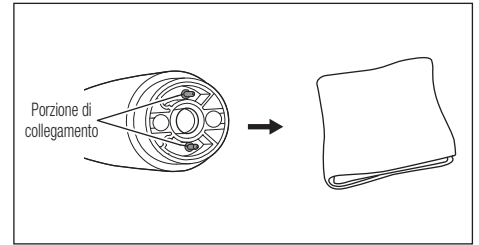Se un tampone di cotone risulta troppo spesso per pulire la porzione di collegamento, avvolgere un fazzolettino umido o qualcosa di simile intorno a un bastoncino sottile e utilizzarlo per pulire accuratamente la porzione di collegamento.




ATTENZIONE

- Quando si pulisce la porzione di collegamento, non utilizzare un bastoncino dalla punta acuminata ed evitare il terminale. In caso contrario, si potrebbero danneggiare i collegamenti, causando errori di contatto.


9-1-3 Bottiglia di irrigazione

9-1-3-1 Pulizia e disinfezione

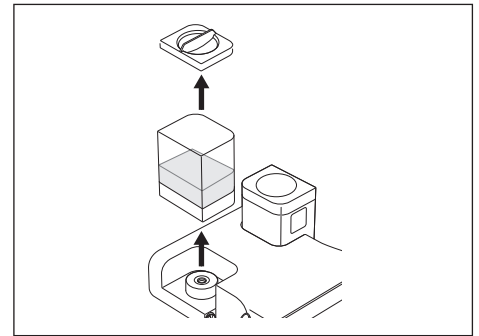
1) Rimuovere la bottiglia di irrigazione dal connettore del supporto per bottiglia di irrigazione, quindi rimuovere il tappo della bottiglia di irrigazione dalla bottiglia di irrigazione.



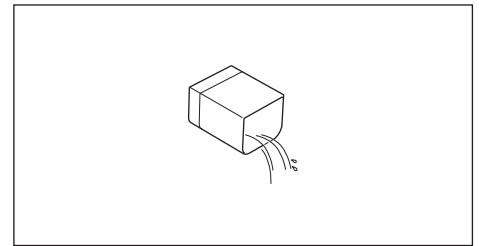
2) Far scaricare l'acqua o il disinfettante rimanente nella bottiglia di irrigazione.



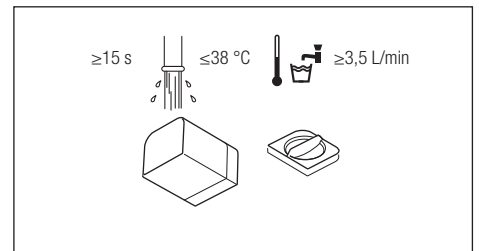3) Sciacquare la bottiglia di irrigazione e il tappo della bottiglia di irrigazione con acqua corrente.



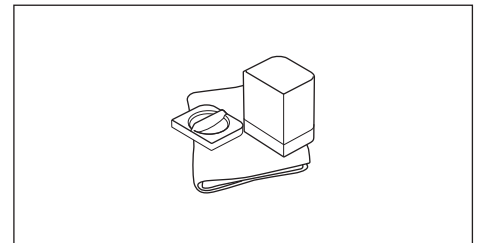4) Pulire le superfici della bottiglia di irrigazione e del tappo della bottiglia di irrigazione con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.




5) Montare la bottiglia di irrigazione sul connettore del supporto per bottiglia di irrigazione.


9-1-4 Manipolo Powder

9-1-4-1 Rimozione del beccuccio

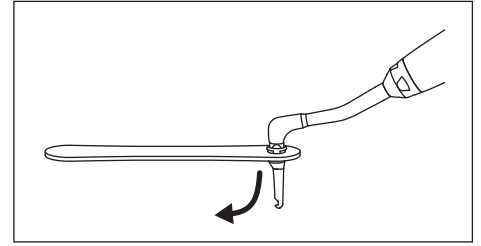- 1) Per rimuovere il beccuccio Perio Mate, utilizzare l'utensile per rimuovere il puntale Perio Mate.



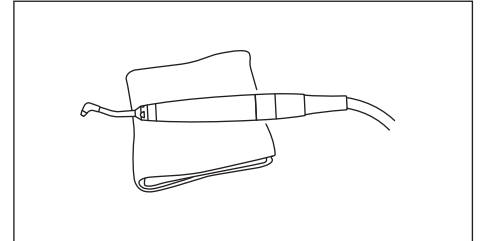- 2) Eliminare la sporcizia dalla superficie del manipolo Powder utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con acqua.



AVVERTENZA




- Un beccuccio può essere utilizzato una volta sola. Non riutilizzarlo. In caso contrario, si causeranno infezioni.
- Smaltire i beccucci Perio Mate usati come rifiuto sanitario.

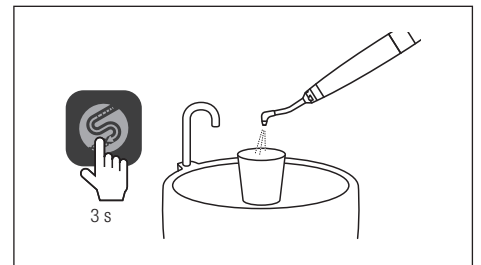
9-1-4-2 Pulizia automatica

ATTENZIONE




- Durante la pulizia automatica, l'acqua utilizzata per la pulizia fuoriesce dalla punta del manipolo Powder. Preparare un contenitore, ad esempio una tazza, per catturare l'acqua.
- Prima di avviare la pulizia automatica, toccare i tasti di selezione dell'irrigazione (▲) per regolare il livello di acqua su L5 (consultare "11-3 Impostazione del livello di acqua di base").

- 1) Rivolgere la punta del manipolo Powder verso un contenitore per catturare l'acqua, quindi toccare  per tre secondi. Si avvia la pulizia automatica. (Il tempo di pulizia è di 45 secondi.)



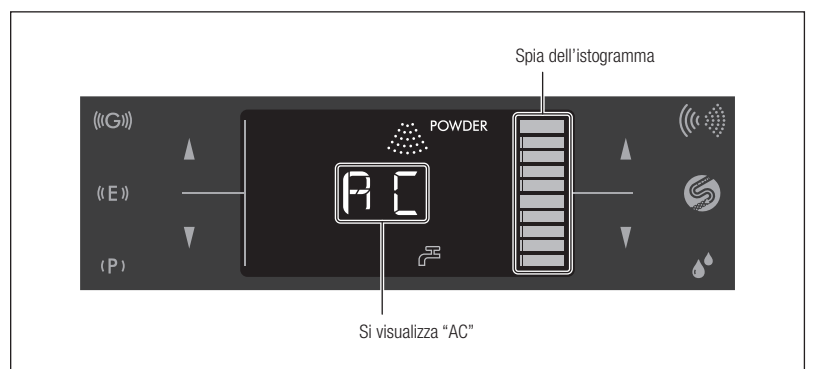
- 2) Durante la pulizia automatica, sull'LCD appare "AC". La spia dell'istogramma mostra l'avanzamento.



* Per annullare la pulizia automatica, toccare nuovamente .


Al termine della pulizia automatica, l'unità di controllo torna allo stato precedente all'avvio del ciclo di pulizia automatica.

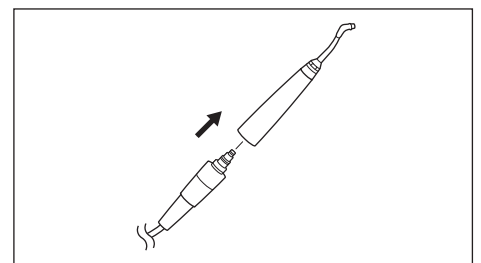- 3) Scollegare il manipolo Powder dal tubo del manipolo.




9-1-4-3 Rimozione di polvere

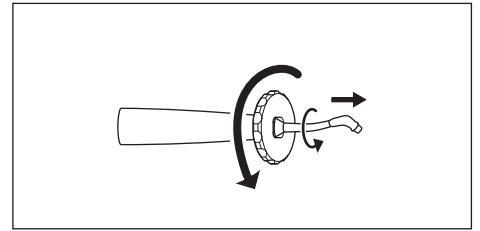1) Rimuovere il puntale dal manipolo Powder utilizzando la chiave ad anello (accessorio).



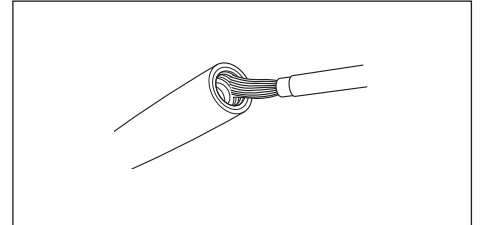2) Rimuovere la polvere che aderisce all'interno della porzione di collegamento del manipolo Powder utilizzando la spazzola di pulizia (accessorio).




AVVERTENZA


- Pulire l'interno del manipolo Powder dopo l'uso. La polvere rimanente nel manipolo Powder potrebbe solidificarsi, causando ostruzioni.

9-1-4-4 Pulizia preventiva

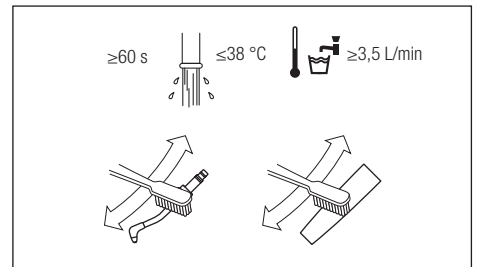
1) Pulire il manipolo Powder e il puntale con acqua corrente e una spazzola a setole morbide.



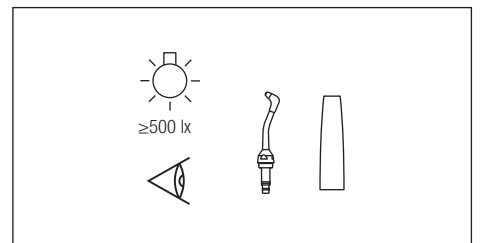2) Verificare l'eventuale presenza di sporczia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporczia, ripetere la procedura dal passaggio 1) fino a completa eliminazione.



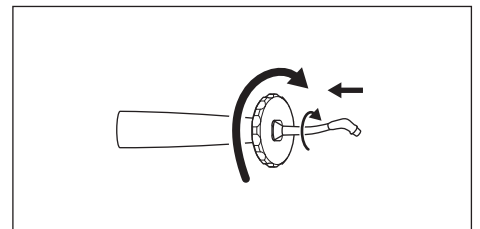3) Montare il puntale sul manipolo Powder.



ATTENZIONE

- Eseguire la pulizia a ultrasuoni almeno una volta alla settimana per evitare ostruzioni causate dalla polvere. Eseguire la pulizia a ultrasuoni prima di eseguire la pulizia automatica o dopo aver applicato la soluzione descritta in "14 Risoluzione dei problemi" ("9-3 Pulizia a ultrasuoni (settimanale)").
- Utilizzare la chiave ad anello in dotazione per montare e rimuovere i puntali. Nel montare o rimuovere un puntale, non mantenerlo dall'estremità distale. In caso contrario si potrebbe deformare il puntale.
- Non utilizzare la pulizia a ultrasuoni per pulire i manipoli Powder.

9-1-4-5 Pulizia e disinfezione

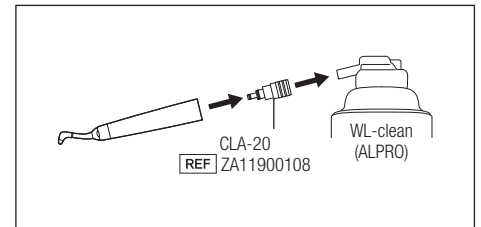


- Se l'o-ring sul CLA-20 è usurato o danneggiato, sostituirlo con uno nuovo prima dell'uso.
- Accertarsi di eseguire la pulizia preventiva prima della pulizia.
- Dopo la disinfezione, sterilizzare il manipo Powder (consultare "9-2 Sterilizzazione").
- Accertarsi di effettuare la disinfezione entro due ore dalla pulizia.
- Se si utilizza uno spray (ALPRO), accertarsi di coprire la testina del manipo Powder con un panno per evitare la dispersione del detergente e del prodotto di disinfezione. Consigliamo di utilizzare la sacchetti assorbenti assorbioolio (Y900084).
- Quando si utilizzano prodotti ALPRO, consultare il manuale del produttore.


Manuale

■ Pulizia

1) Montare CLA-20 (REF ZA11900108) sul WL-clean (ALPRO), quindi montare il manipo Powder sul CLA-20.




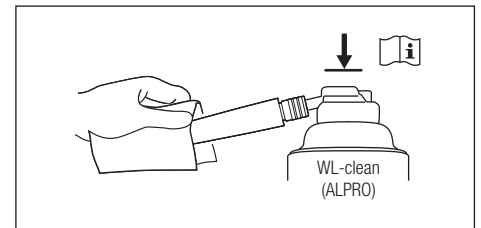2) Nebulizzare il WL-clean (ALPRO) mantenendo il WL-clean (ALPRO) e il manipo Powder.




3) Rimuovere CLA-20 e il manipo Powder dal WL-clean (ALPRO).

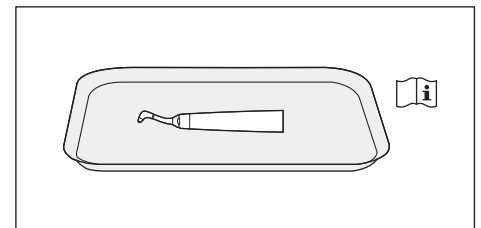4) Attendere che il WL-clean (ALPRO) faccia effetto.




■ Disinfezione

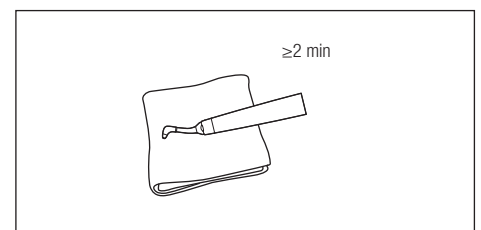
1) Pulire la superficie del manipo Powder utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.



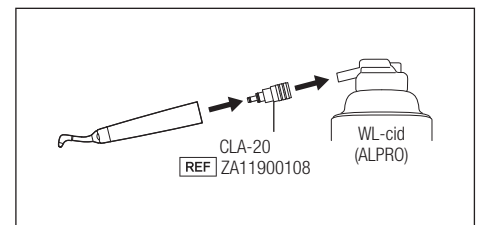
2) Montare CLA-20 (REF ZA11900108) sul WL-cid (ALPRO), quindi montare il manipo Powder sul CLA-20.



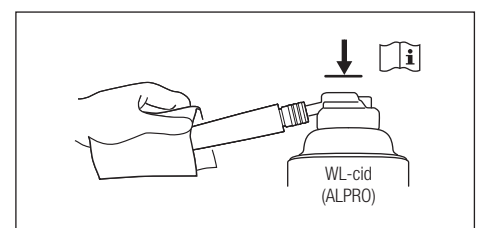
3) Nebulizzare il WL-cid (ALPRO) sul manipo Powder mantenendo il WL-cid (ALPRO) e il manipo Powder.



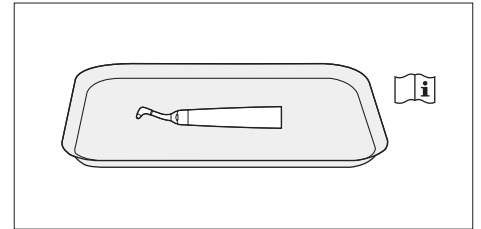- 4) Rimuovere CLA-20 e il manipolo Powder dal WL-cid (ALPRO).
- 5) Attendere che il WL-cid (ALPRO) faccia effetto.




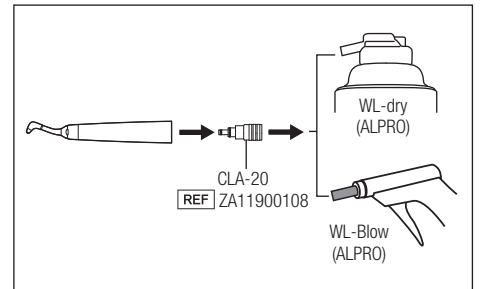- 6) Montare CLA-20 sul WL-dry (ALPRO) o sul WL-Blow (ALPRO), quindi montare il manipolo Powder sul CLA-20.




- 7) Far scaricare il disinfettante dal manipolo Powder mantenendo il WL-dry (ALPRO) o il WL-Blow (ALPRO) e il manipolo Powder.

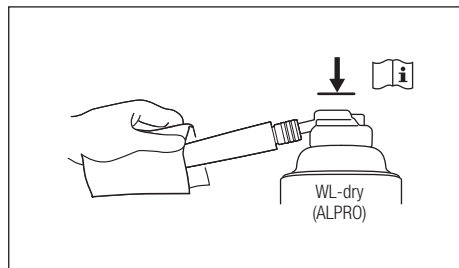
· Quando si usa il WL-dry (ALPRO):



· Quando si usa il WL-Blow (ALPRO):

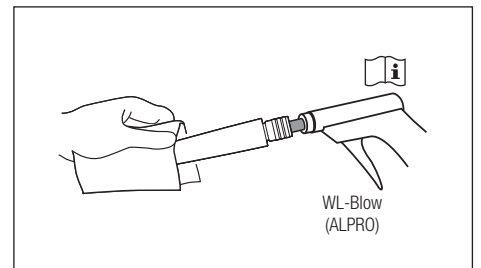

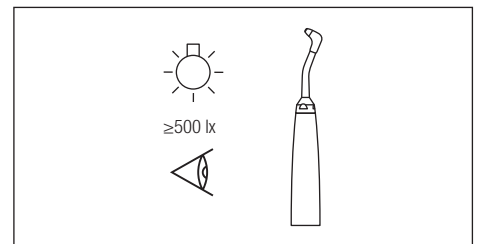- 8) Rimuovere il manipolo Powder dal WL-dry (ALPRO) o dal WL-Blow (ALPRO).
- 9) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 1) fino a eliminarla tutta.



- 10) Procedere con la sterilizzazione (consultare "9-2 Sterilizzazione").

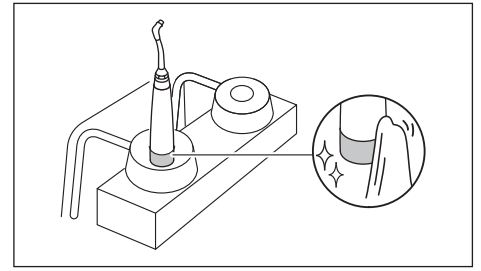
Automatica

ATTENZIONE

- Utilizzare una termodisinfettore conforme alla norma ISO 15883.
- Leggere il manuale della termodisinfettore.
- Dopo averlo pulito con la termodisinfettore, asciugare in maniera soddisfacente il manipolo Powder. L'umidità residua è causa di corrosione interna e scarsa lubrificazione.
- Al termine della disinfezione termica e del ciclo di asciugatura, estrarre immediatamente il prodotto dalla termodisinfettore (entro un'ora) e asciugarlo. L'eventuale presenza di umidità rimanente nel prodotto è causa di corrosione interna e scarsa lubrificazione.
- Se si utilizza un termodisinfettore, utilizzare l'adattatore compatibile (a cui dovrà provvedere l'utente) per pulire e disinfettare il manipolo Powder.
- Per la pulizia automatica e la disinfezione, attenersi alle istruzioni contenute nel manuale del produttore del termodisinfettore.

■ Pulizia e disinfezione


- 1) Pulire la porzione di collegamento del manipolo Powder con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante, quindi montare il manipolo Powder sull'adattatore del termodisinfettore.




Adattatore compatibile con il termodisinfettore (acquistato dall'utente)

| Produttore | REF | Collegamento di circa | Colore |
|------------|-----------|-----------------------|--------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Verde |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Verde |
| Geringe | 502887400 | 16 mm | Nero |

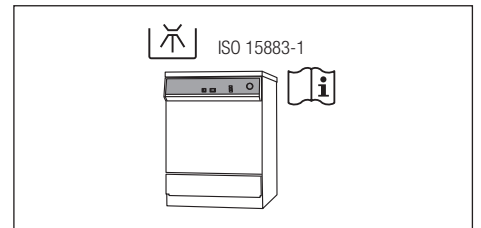
- 2) Eseguire la disinfezione termica facendo riferimento al manuale del termodisinfettore.



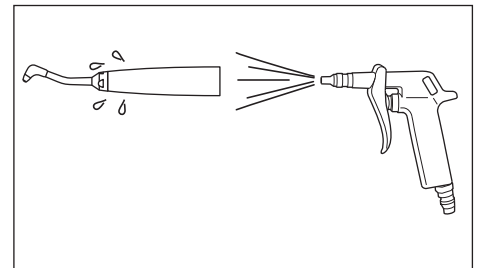- 3) Rimuovere l'umidità dalla superficie e dall'interno del manipolo Powder utilizzando una pistola di soffiaggio ad aria o un attrezzo simile.



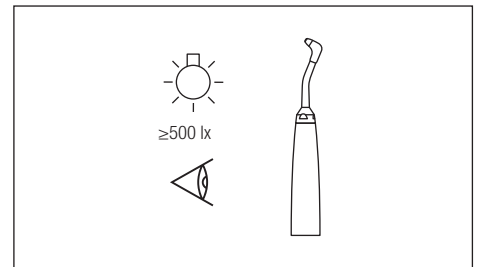- 4) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx).
Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 2) fino a eliminarla tutta.




- 5) Procedere con la sterilizzazione (consultare "9-2 Sterilizzazione").

9-1-5 Serbatoio e tubo del manipolo


Effettuare la seguente manutenzione al termine della giornata.

9-1-5-1 Rimozione di polvere

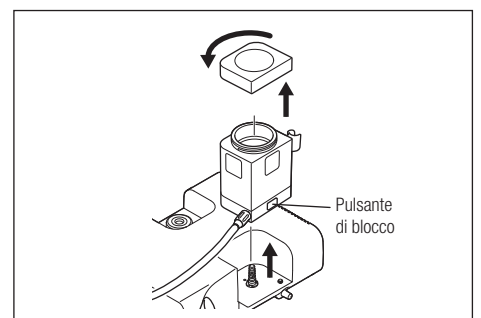- 1) Rilasciare la pressione residua dal serbatoio (consultare "8-6-4 Rilascio della pressione residua").
- 2) Premere il pulsante di blocco e quindi rimuovere il serbatoio dal connettore del supporto del serbatoio.
Rimuovere il coperchio del serbatoio.




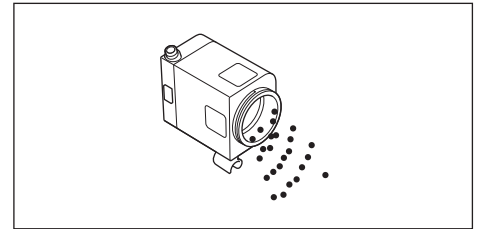3) Smaltire la polvere nel serbatoio (consultare “22 Smaltimento del prodotto”).




4) Chiudere saldamente il coperchio del serbatoio e quindi inserire il serbatoio in verticale nel connettore del supporto del serbatoio.

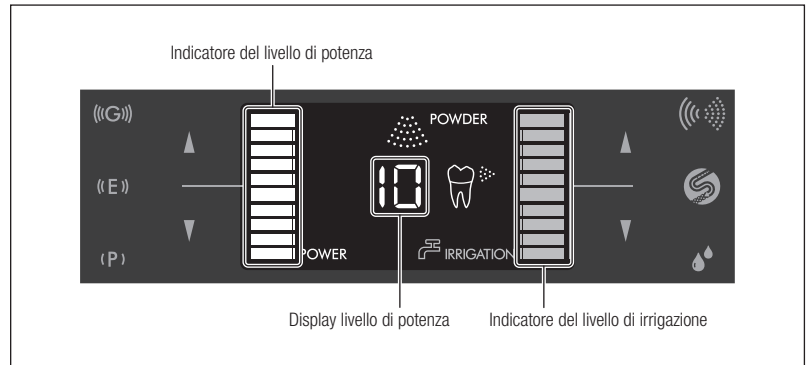5) Impostare il livello di potenza e il livello di irrigazione rispettivamente su “10” e sul massimo.



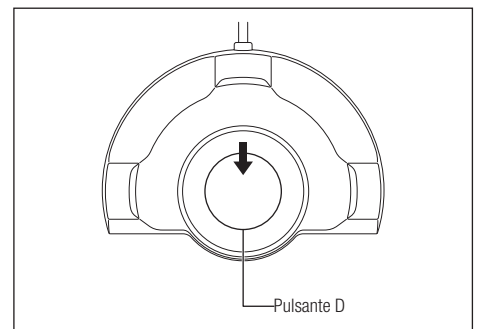6) Rivolgere il tubo del manipoLO verso una sputacchiera o un lavabo e premere 5 volte il pulsante D del pedale per più di un secondo.



7) Eseguire la pulizia automatica per far scaricare la polvere e l'acqua rimanente dal tubo del manipoLO (consultare “9-1-4-2 Pulizia automatica”).

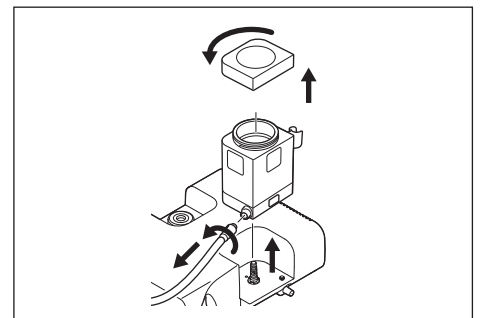
9-1-5-2 Pulizia e disinfezione

1) Rilasciare la pressione residua dal serbatoio (consultare “8-6-4 Rilascio della pressione residua”).


2) Premere il pulsante di blocco e quindi rimuovere il serbatoio dal connettore del supporto del serbatoio.

Rimuovere il coperchio del serbatoio e scollegare il tubo del manipoLO.


* Se non è possibile rimuovere il serbatoio neanche premendo il pulsante di blocco, rilasciare il pulsante di blocco (consultare “9-1-5-3 Rilascio del pulsante di blocco”).



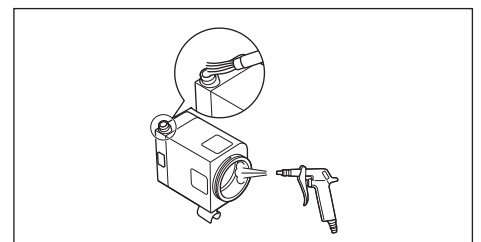3) Rimuovere la polvere rimanente nel serbatoio e nella presa del connettore del tubo del manipoLO utilizzando una pistola di soffiaggio ad aria o un attrezzo simile.




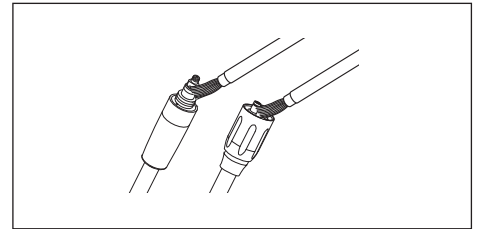4) Rimuovere la polvere rimanente da entrambe le estremità del tubo del manipolo utilizzando la spazzola di pulizia (accessorio).




5) Verificare che non rimanga polvere sulle filettature del coperchio del serbatoio. Se rimane della polvere, rimuoverla. (Consultare “Pulizia del coperchio del serbatoio”)

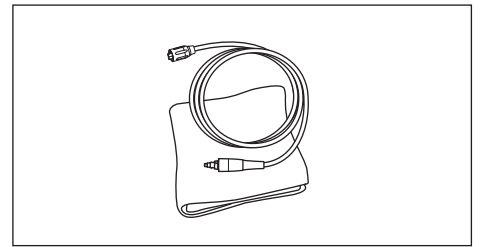
6) Pulire la superficie del tubo del manipolo utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con acqua.



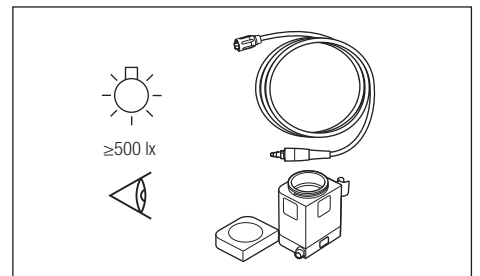7) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere la procedura dal passaggio 3) fino a completa eliminazione.



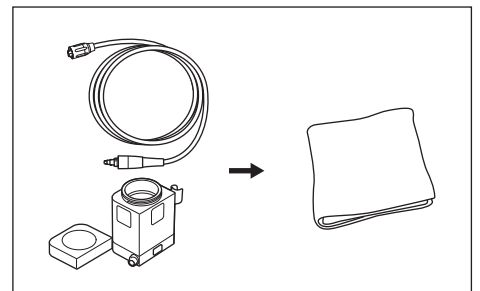8) Pulire le superfici del serbatoio, del coperchio del serbatoio e del tubo del manipolo con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.



9) Procedere con la conservazione (consultare “9-4 Conservazione”) o inserire il serbatoio in verticale nel connettore del supporto del serbatoio.



AVVERTENZA

- Fissare bene il coperchio del serbatoio. In caso contrario, il coperchio del serbatoio potrebbe rimuoversi durante l'uso e provocare danni al dispositivo o lesioni.



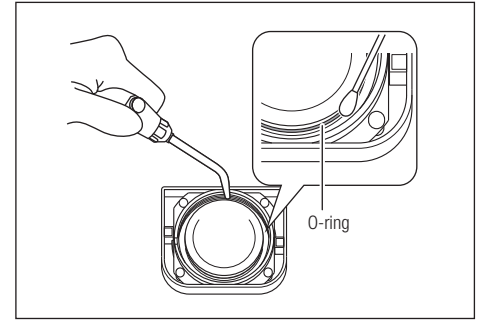
ATTENZIONE

- In caso di polvere aderente alle filettature del serbatoio e/o del coperchio del serbatoio, la chiusura del coperchio diventerà difficoltosa. La pulizia del serbatoio e del coperchio del serbatoio agevola l'apertura e la chiusura del coperchio (consultare “Pulizia del coperchio del serbatoio”).
- Se il serbatoio non funziona correttamente, contattare il proprio distributore NSK autorizzato per richiederne la riparazione.
- Dopo l'uso, rimuovere completamente la polvere che aderisce all'interno del serbatoio e pulire il serbatoio stesso prima di riportarlo.
- Non lavare il serbatoio con acqua. Ciò farebbe solidificare la polvere, causando ostruzioni. La pressione dell'aria nel serbatoio potrebbe essere alta, rendendo difficoltosa l'apertura del coperchio per qualche tempo subito l'uso. In tal caso, attendere un po' o rilasciare la pressione residua prima di aprire il coperchio (consultare “8-6-4 Rilascio della pressione residua”).
- Prima di collegare cordone del manipolo, il serbatoio e il manipolo e l'unità di controllo, è necessario asciugare bene gli attacchi del cordone e del serbatoio con un getto di aria asciutta. In caso contrario, potrebbe entrare dell'umidità nel circuito dell'aria che farebbe solidificare la polvere di pulizia all'interno del prodotto.

Pulizia del coperchio del serbatoio

In caso di polvere aderente alle filettature del serbatoio e/o del coperchio del serbatoio, la chiusura del coperchio del serbatoio diventerà difficoltosa. La pulizia del serbatoio e del coperchio del serbatoio in linea con la procedura illustrata di seguito agevola l'apertura e la chiusura del coperchio.

- 1) Rimuovere il coperchio del serbatoio.
- 2) Pulire l'interno del serbatoio, le filettature e l'orlo dell'O-Ring del coperchio del serbatoio utilizzando una spazzola o un tampone di cotone asciutto.




- 3) Rimuovere la polvere aderente soffiando dell'aria.
- 4) Procedere con la conservazione (consultare "9-4 Conservazione") o inserire il serbatoio in verticale nel connettore del supporto del serbatoio.

9-1-5-3 Rilascio del pulsante di blocco

Se non è possibile premere il pulsante di blocco e, di conseguenza, rimuovere il serbatoio, attenersi alla procedura illustrata di seguito per rilasciare il pulsante di blocco e rimuovere il serbatoio.

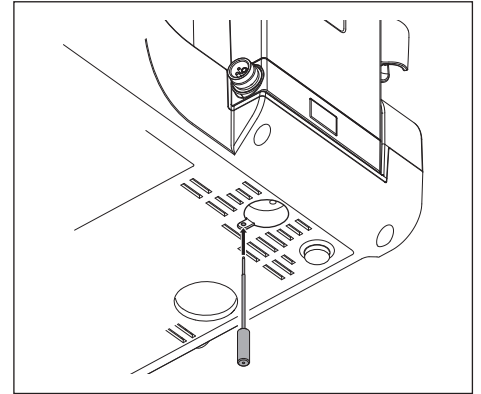- 1) Inserire completamente lo strumento di sblocco (accessorio) nel foro presente sul fondo dell'unità di controllo per rilasciare il pulsante di blocco.



- 2) Estrarre lo strumento di sblocco.
- 3) Premere il pulsante di blocco, quindi rimuovere il serbatoio.

Se non si riesce a rilasciare il pulsante di blocco neanche con la procedura di cui sopra, contattare il distributore NSK autorizzato.



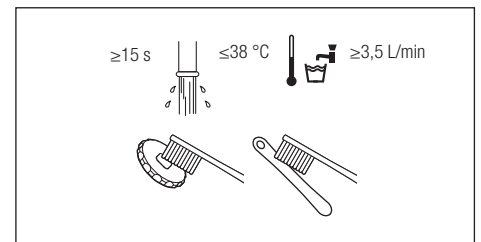
AVVERTENZA

- Non capovolgere l'unità di controllo quando si rilascia il pulsante di blocco. In caso contrario si potrebbe provocare un intasamento della polvere.
- Non torcere lo strumento di sblocco quando lo si inserisce.


9-1-6 Chiave ad anello e utensile per rimuovere il puntale Perio Mate

9-1-6-1 Pulizia e disinfezione


- 1) Pulire la chiave ad anello e l'utensile per rimuovere il puntale Perio Mate per almeno 15 secondi con acqua corrente e una spazzola a setole morbide.



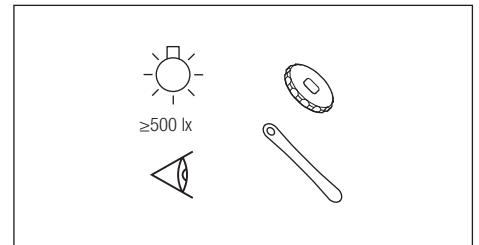2) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx).



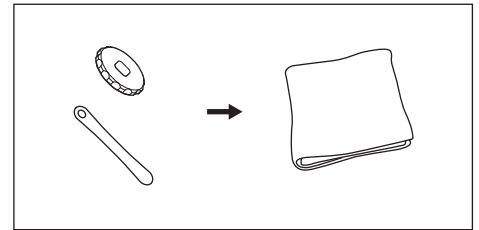3) Pulire la chiave ad anello e l'utensile per rimuovere il puntale Perio Mate con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.




4) Procedere con la sterilizzazione (consultare "9-2 Sterilizzazione").

9-1-7 Unità di controllo e pedale

9-1-7-1 Pulizia

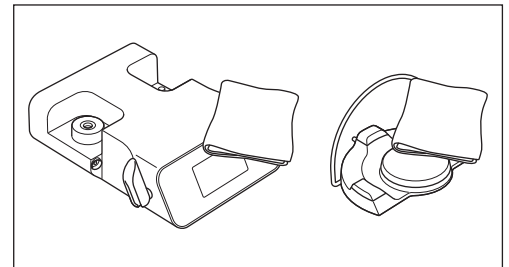- 1) Spegnerne l'alimentazione.
- 2) Eliminare la sporcizia dalle superfici dell'unità di controllo e del pedale utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con acqua.
- 3) Pulire le superfici dell'unità di controllo e del pedale con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante.



4) Procedere con la conservazione (consultare "9-4 Conservazione").

ATTENZIONE • Non utilizzare solventi come acqua ossidante elettrolitica (acqua fortemente acida o acqua super acida), prodotti chimici acidi o alcalini forti, solventi contenenti cloro, benzene o diluenti per la pulizia o l'immersione.

9-2 Sterilizzazione


L'efficacia della seguente procedura di sterilizzazione è stata verificata in conformità alla norma ISO17665.

Elementi sterilizzabili:

manipolo Ultrasonic, manipolo Powder, chiave ad anello, utensile per rimuovere il puntale Perio Mate

- 1) Inserire gli elementi in una busta per sterilizzazione conforme alla norma ISO 11607-1 e sigillarla.
- 2) Eseguire la sterilizzazione alle seguenti condizioni.

| Tipo | Spostamento di gravità (classe N) | vuoto frazionato (classe B) |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura | 132 °C | 134 °C |
| Tempo di sterilizzazione | ≥15 min | 3-18 min |

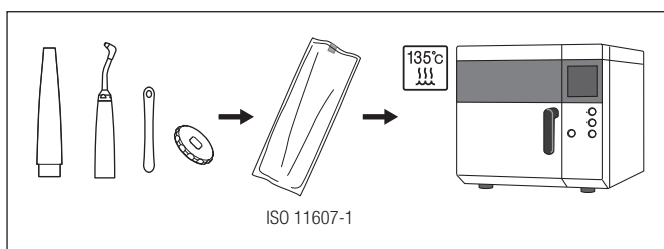

3) Procedere con la conservazione (consultare "9-4 Conservazione").

**ATTENZIONE**

- Rispettare sempre le direttive locali, gli standard, le linee guida, ecc., in materia di ricondizionamento delle apparecchiature.
- Utilizzare una busta per sterilizzazione conforme alla norma ISO 11607-1.
- Non inserire altri strumenti nella busta per sterilizzazione insieme agli elementi di questo prodotto per eseguire la sterilizzazione in autoclave. In caso contrario, si possono causare lo scolorimento della superficie del prodotto e alterazioni ai componenti interni. Prestare inoltre attenzione per evitare l'ingresso di prodotti chimici nel prodotto durante il processo in autoclave.
- Accertarsi di usare sterilizzatori che possano eseguire sterilizzazioni fino a 135 °C.
Non utilizzare uno sterilizzatore che superi i 135 °C durante il ciclo di asciugatura. Potrebbe causare un guasto del prodotto. Per i dettagli, consultare il produttore dello sterilizzatore.
- Conservare il prodotto in un ambiente non esposto a rischi di effetti avversi dovuti a pressione atmosferica, temperatura, umidità, ventilazione, luce solare, polvere, sale e atmosfera contenente zolfo.
- Non riscaldare né raffreddare il prodotto rapidamente durante la sterilizzazione. Gli sbalzi rapidi di temperatura danneggiano il prodotto.
- Non toccare il prodotto subito dopo la sterilizzazione, poiché sarà caldo.
- In relazione a questo prodotto, non è stata verificata l'efficacia di metodi di sterilizzazione (come la sterilizzazione al plasma e la sterilizzazione EOG) diversi dalla sterilizzazione a vapore.
- Al termine della sterilizzazione, estrarre il prodotto dallo sterilizzatore entro un'ora. In caso contrario potrebbe corrodersi.
- Non sterilizzare componenti diversi dagli elementi sterilizzabili.

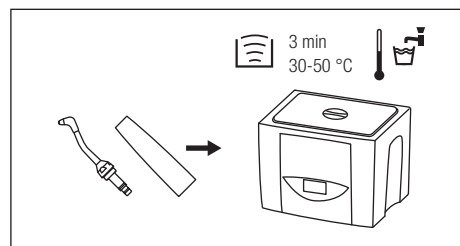
AVISO

- Consigliamo lo sterilizzatore di classe B specificato nella norma EN13060.
Per i dettagli, consultare il manuale d'uso pubblicato dal produttore dello sterilizzatore.
- Dopo varie sterilizzazioni in autoclave, il manipolo potrebbe scolorirsi a causa del calore; ciò è dovuto alle caratteristiche del prodotto e non pregiudica in alcun modo la qualità del prodotto.


9-3 Pulizia a ultrasuoni (settimanale)

Accertarsi di eseguire la pulizia e la disinfezione prima della pulizia a ultrasuoni (consultare "9-1-4 Manipolo Powder").


1) Pulire il manipolo Powder e il puntale mediante pulizia a ultrasuoni.



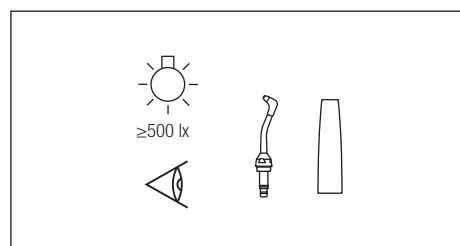
2) Verificare l'eventuale presenza di sporcizia sotto una luce adeguata (almeno 500 lx). Se è presente della sporcizia, ripetere il passaggio 1) fino a completa eliminazione dello sporco.



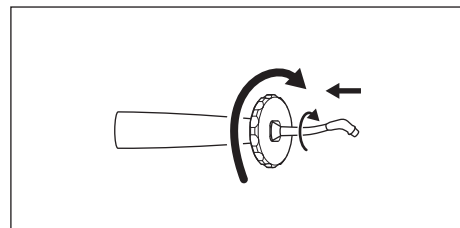3) Montare il puntale sul manipolo Powder utilizzando la chiave ad anello (accessorio).



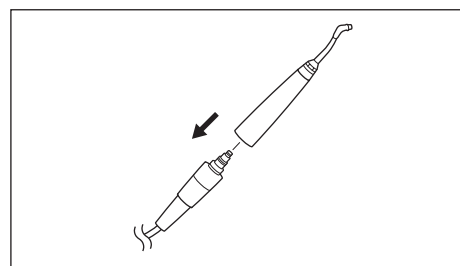4) Inserire saldamente il manipolo Powder nella spina del tubo del manipolo.



5) Eseguire la pulizia automatica e la sterilizzazione (consultare "9-1-4-2 Pulizia automatica" e "9-2 Sterilizzazione").

**ATTENZIONE**

- Dopo la pulizia a ultrasuoni, eseguire la pulizia automatica per rimuovere l'umidità interna e quindi asciugare in maniera soddisfacente il prodotto.
- Dopo la pulizia automatica, accertarsi di eseguire la sterilizzazione.
- Non utilizzare la pulizia a ultrasuoni per pulire i manipoli Ultrasonic. È causa di guasti.

9-4 Conservazione

Conservare il prodotto in un ambiente in cui possa restare disinfettato e sterilizzato fino all'utilizzo successivo.

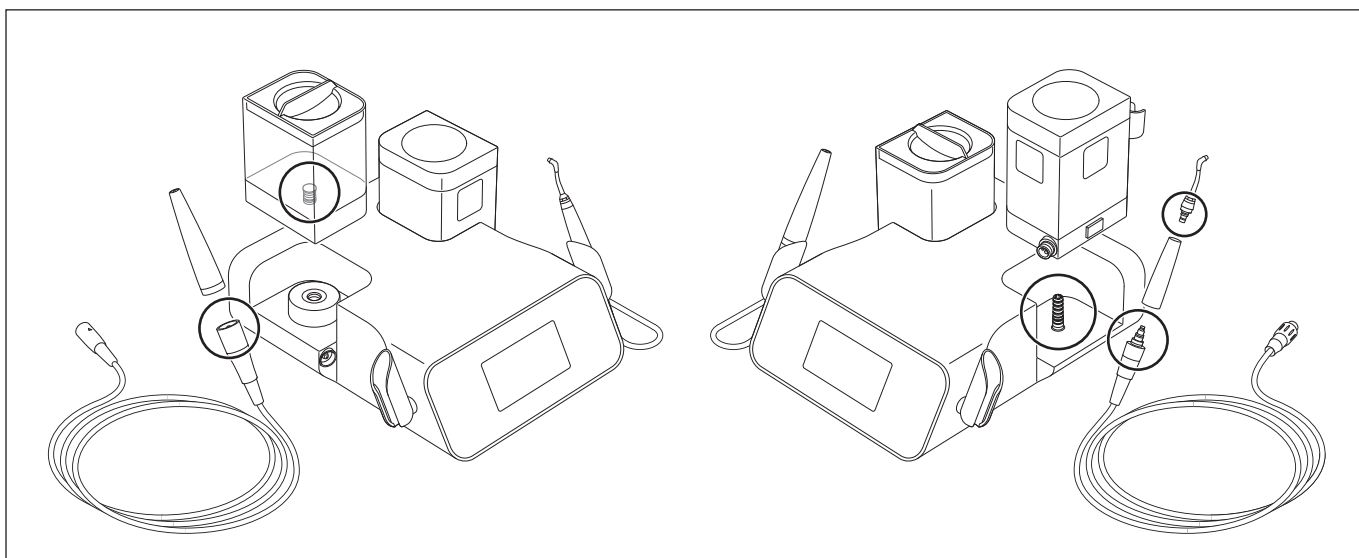
**ATTENZIONE**

- Conservare il prodotto in un ambiente non esposto a rischi di effetti avversi dovuti a pressione atmosferica, temperatura, ventilazione, luce solare, polvere, sale e atmosfera contenente zolfo.

10 Cura e manutenzione**10-1 Manutenzione degli O-ring**

Eseguire la manutenzione per ridurre l'usura degli O-ring sui componenti interessati e per evitare la perdita di acqua o aria.


* Per sostituire l'O-ring del coperchio del serbatoio, contattare il distributore NSK autorizzato.

**10-1-1 Cordone del manipolo**

- 1) Estrarre il cordone del manipolo dall'unità di controllo.
- 2) Rimuovere l'O-ring da sostituire con un ago, ecc.
- 3) Inserire il nuovo O-ring nella scanalatura da cui è stato rimosso l'O-ring usurato.

* Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli sulla sostituzione degli O-ring.

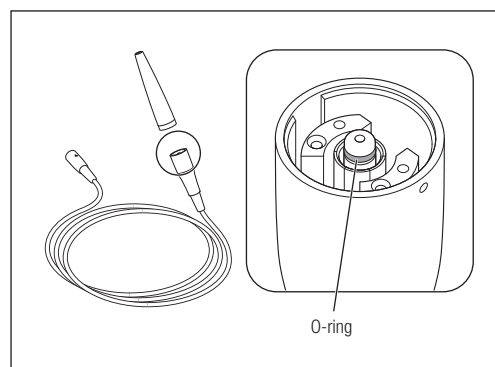
REF Y1003546



10-1-2 Tubo del manipo (per uso Prophy e Perio)

- 1) Rimuovere il tubo dal manipo Powder e dal serbatoio.
 - 2) Rimuovere gli O-ring dalla spina del tubo del manipo con un ago, ecc. Se è presente polvere nelle scanalature degli O-ring, pulire la scanalatura prima di inserire il nuovo O-ring.
 - 3) Inserire i nuovi O-ring nelle scanalature da cui sono stati rimossi gli O-ring usurati.
 - 4) Applicare una goccia di olio turbina in dotazione e strofinarlo con il dito.
- * Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli sulla sostituzione degli O-ring.

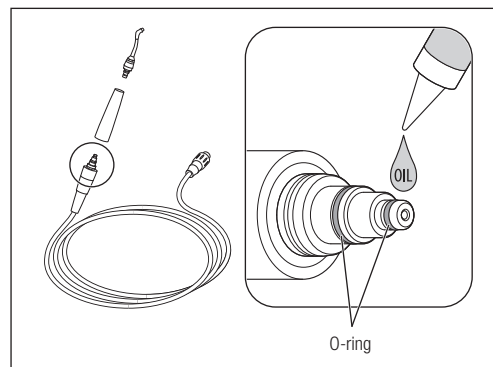REF Y1003500




ATTENZIONE

- La mancata lubrificazione della sezione dell'O-ring sul lato del manipo potrebbe causare danni alla sezione del giunto, con conseguente difficoltà di rotazione del collegamento del manipo. Ciò potrebbe causare anche la perdita di acqua.

10-1-3 Beccuccio (per Prophy e Perio)

- 1) Rimuovere il beccuccio dal manipo utilizzando l'apposita chiave in dotazione.
 - 2) Rimuovere gli O-ring dalla base del beccuccio utilizzando un ago. Pulire le scanalature dell'O-ring dagli eventuali residui di polvere prima di inserire il nuovo O-ring.
 - 3) Posizionare i nuovi O-ring nelle scanalature.
- * Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli riguardanti la sostituzione degli O-ring.

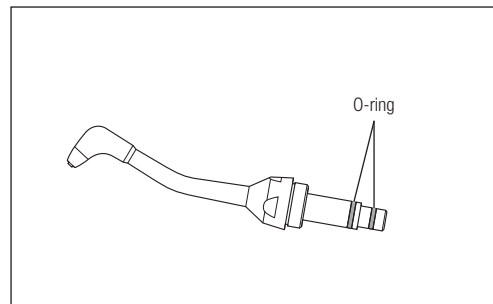
REF Y1003501



10-1-4 Bottiglia di irrigazione

- 1) Rimuovere gli O-ring dal giunto della bottiglia di irrigazione con un ago, ecc.
 - 2) Inserire i nuovi O-ring nelle scanalature da cui sono stati rimossi gli O-ring usurati.
- * Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli sulla sostituzione degli O-ring.

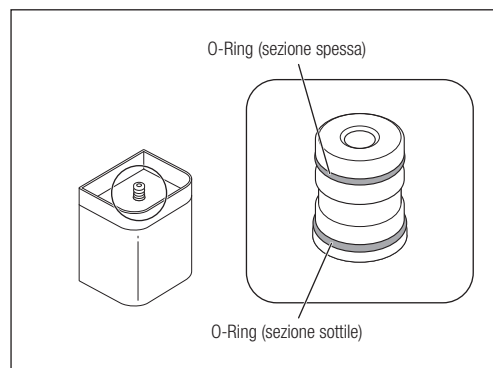REF Y1003544




ATTENZIONE

- Gli O-ring sono di diversi spessori. Assicurarli di inserirli nelle scanalature adeguate.

10-1-5 Connettore del supporto del serbatoio

- 1) Rimuovere gli O-ring dal connettore del supporto del serbatoio con un ago, ecc.
 - 2) Inserire i nuovi O-ring nelle scanalature da cui sono stati rimossi gli O-ring usurati.
- * Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli sulla sostituzione degli O-ring.

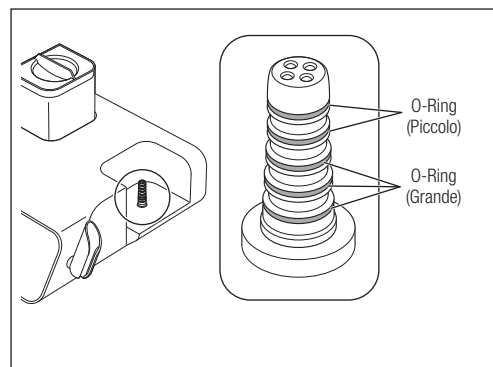REF Y1003435




ATTENZIONE


- Gli O-Ring sono di diverse dimensioni, pertanto, assicurarsi di inserirli al posto giusto.

10-2 Sostituzione del set pompa di irrigazione

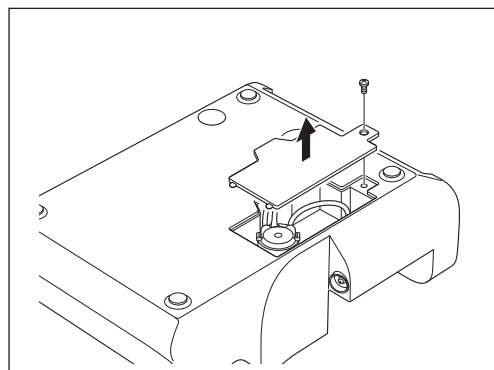
- 1) Rimuovere la bottiglia di irrigazione, il serbatoio, il cavo di alimentazione, il cordone del manopolo e il pedale dall'unità di controllo.
- 2) Girare l'unità di controllo. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere la vite sulla copertura del set pompa di irrigazione e, quindi, la copertura stessa.



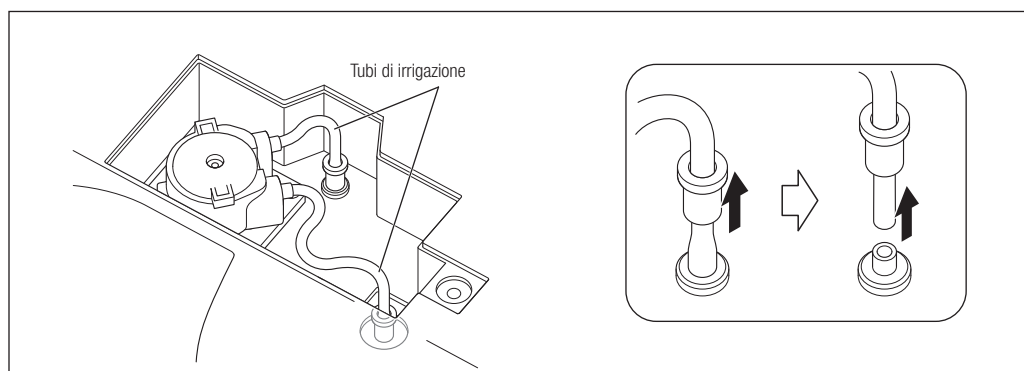
- 3) Rimuovere i due tubi di irrigazione dall'unità di controllo.



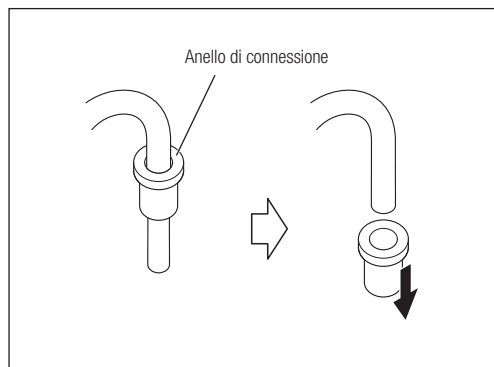
- 4) Rimuovere l'anello di connessione dal tubo di irrigazione. Non gettarlo. È possibile usare l'anello per la sostituzione del set pompa di irrigazione.



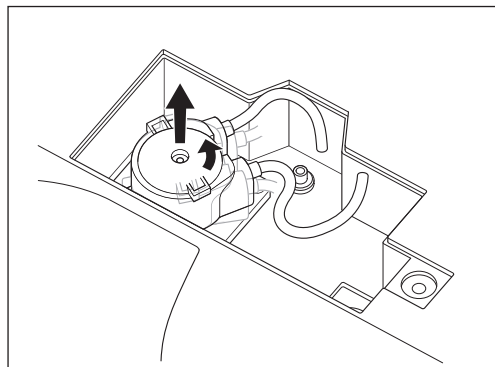
- 5) Ruotare il set pompa di irrigazione in senso antiorario finché scatta, quindi estrarlo.



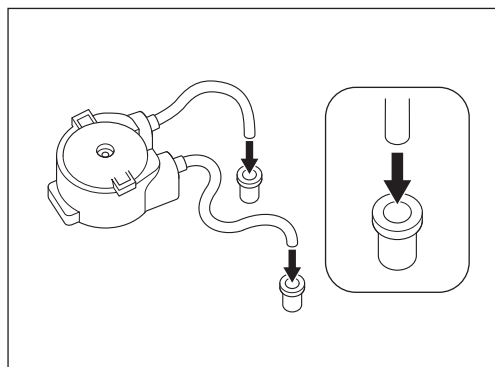
- 6) Inserire gli anelli di connessione sui tubi di irrigazione del nuovo set pompa di irrigazione (opzionale). Prestare attenzione al verso di inserimento dell'anello.



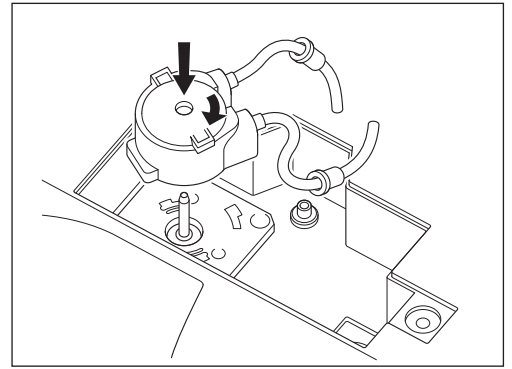- 7) Allineare il nuovo set pompa di irrigazione (opzionale) con l'albero di trasmissione. Ruotarla in senso orario finché scatta.



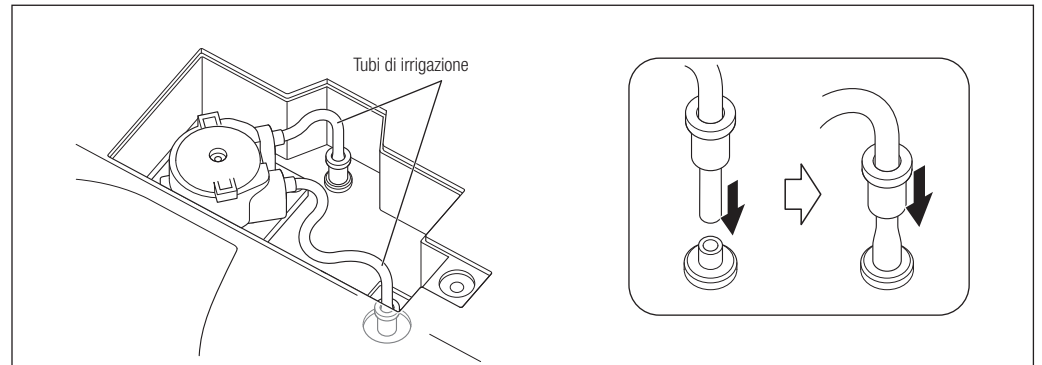- 8) Montare il tubo di irrigazione. Inserire saldamente l'anello di connessione nell'unità di controllo fino al suo inserimento completo.




- 9) Allineare il gancio della copertura del set pompa di irrigazione con il foro presente sull'unità di controllo. Montare la copertura.

* Per i dettagli sul set pompa di irrigazione opzionale, consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio".

ATTENZIONE

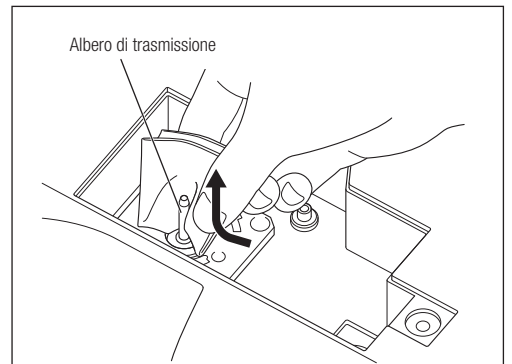- Prima di sostituire il set pompa di irrigazione, asciugare l'acqua in eccesso sulla pompa e sull'albero di trasmissione. Se l'albero di trasmissione e i rulli sono bagnati, possono essere scivoli e causare un malfunzionamento.
- Rimuovere le impurità e l'acqua dall'albero di trasmissione dal basso verso l'alto.
- Inserire delicatamente e lentamente il nuovo set pompa di irrigazione nell'albero di trasmissione per evitare di danneggiare i rulli nella pompa.
- Dopo aver sostituito il set pompa di irrigazione, farlo funzionare per circa 10 secondi con la modalità di irrigazione impostata sulla bottiglia e al massimo volume d'acqua per fare adattare il tubo di irrigazione alla nuova pompa.
- Assicurarsi di inserire il tubo in modo che non possa piegarsi o torcersi. In caso di errato inserimento del tubo, l'acqua di irrigazione potrebbe non essere erogata.
- Assicurarsi di non impigliare il tubo quando si chiude la copertura del set pompa di irrigazione.
- Utilizzare esclusivamente il set pompa di irrigazione dedicato per Varios Combi Pro. Non è possibile usare altre pompe.



AVISO

- Pulire periodicamente l'albero di trasmissione con un panno privo di lanugine inumidito con alcol disinfettante. Un albero di trasmissione sporco potrebbe causare un malfunzionamento della pompa.
- La pompa è soggetta a usura. Se il volume di irrigazione diminuisce considerevolmente, sostituire la pompa.

10-3 Sostituzione del filtro dell'acqua

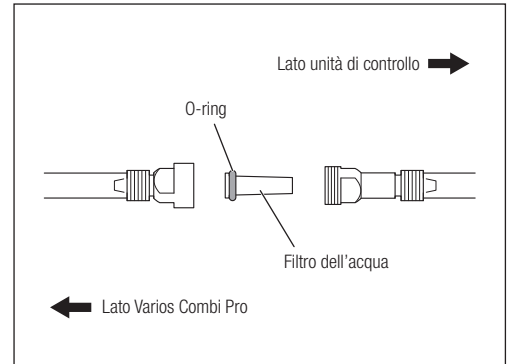
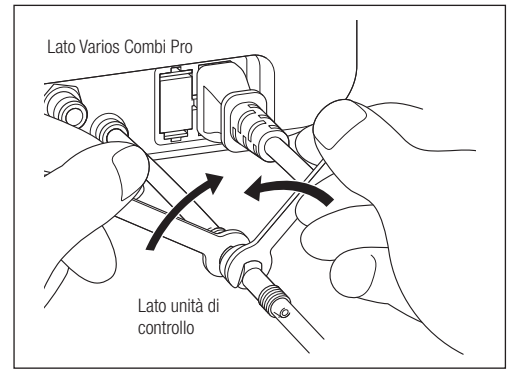
Se si usa acqua corrente, sostituire il filtro dell'acqua una volta all'anno.

Se si ritiene che il volume dell'acqua si sia ridotto, cambiare il filtro dell'acqua prima che sia trascorso un anno.

- 1) Chiudere la valvola dell'acqua dell'unità.
- 2) Poggiare l'unità di controllo su un panno, ecc., in caso di perdite di acqua.
- 3) Utilizzare due chiavi inglesi (5x8) e ruotarle come illustrato in figura.
- 4) Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'acqua quando ed estrarlo.

- 5) Inserire il nuovo filtro dell'acqua con l'O-ring sul lato Varios Combi Pro e rimontare osservando la procedura inversa a quella di montaggio.

* Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli sulla sostituzione del filtro dell'acqua opzionale.




ATTENZIONE • Assicurarsi che il filtro dell'acqua sia inserito nella direzione corretta. In caso contrario, il filtro non funziona in modo efficace.

10-4 Sostituzione del filtro dell'aria

Quando si osservano sintomi quali la riduzione del livello di potenza o frequente intasamento causato dalla polvere, rilasciare dell'acqua premendo sulla punta del filtro dell'aria nella parte inferiore dell'unità di controllo.

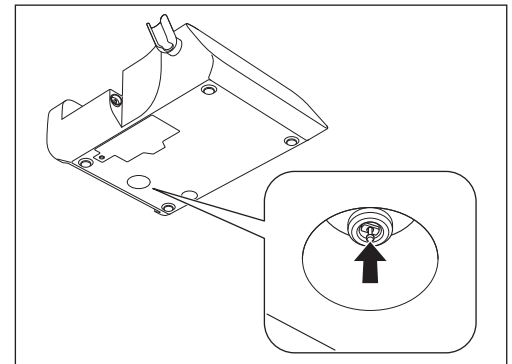
Se non è possibile ottenere un sufficiente livello di potenza a seguito di uso prolungato, l'elemento VCP potrebbe essere intasato. In tal caso, contattare il Centro di riparazione NSK autorizzato.



10-5 Sostituzione del fusibile

- 1) Spegner l'alimentazione.
- 2) Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.
- 3) Rimuovere il portafusibile situato sul retro dell'unità di controllo spingendo verso l'interno le tacche su entrambe le estremità.
- 4) Sostituire il fusibile con uno nuovo.
- 5) Inserire di nuovo il portafusibile in posizione.

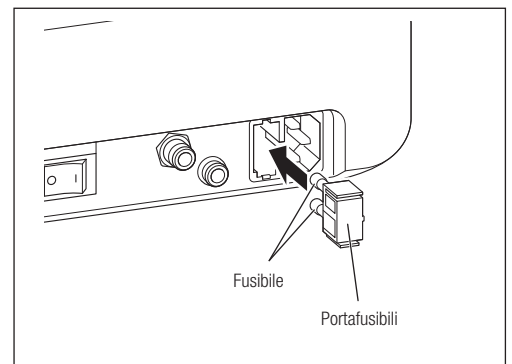* Consultare "21 Elenco dei pezzi di ricambio" per i dettagli sulla sostituzione dei fusibili.



ATTENZIONE • Utilizzare solo fusibili consigliati da NSK. Se si utilizzano altri fusibili, potrebbero verificarsi danni.
• Se si brucia un fusibile, ma non si è in grado di stabilire il motivo, contattare il distributore autorizzato NSK.

AVVISO • Se il portafusibili non fuoriesce facilmente, utilizzare un attrezzo appuntito per spingere le tacche durante l'estrazione del portafusibili.

11 Altre funzioni

11-1 Avvio programma (impostazione di fabbrica)

Il valore di impostazione di ciascuna modalità viene memorizzato nel prodotto. Questi valori possono essere ripristinati alle impostazioni predefinite.


- 1) Accendere l'interruttore di alimentazione mentre si preme il pulsante B del pedale.
- 2) Sul pannello LCD viene visualizzato "Clr". Quando viene visualizzato "Clr", rilasciare il pulsante B del pedale e premere il pulsante D per avviare l'inizializzazione.
- 3) Sul pannello LCD viene visualizzato "Fin" al termine dell'inizializzazione. Viene emesso un allarme e il prodotto si avvia in modalità normale (consultare la tabella di seguito per le impostazioni iniziali).

| | Modalità Ultrasonic | Modalità Powder | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| | | Modalità Propy | Modalità Perio |
| Selezione modalità Ultrasonic | Perio | - | |
| Livello di potenza | 1 | 1 | 1 |
| Modalità di irrigazione | Bottiglia | - | |
| | | (fissata all'acqua corrente) | |
| Volume irrigazione | 10 | 10 | 10 |

ULTRASONIC

11-2 Uso del supporto per punte (per punta Ultrasonic, opzionale)

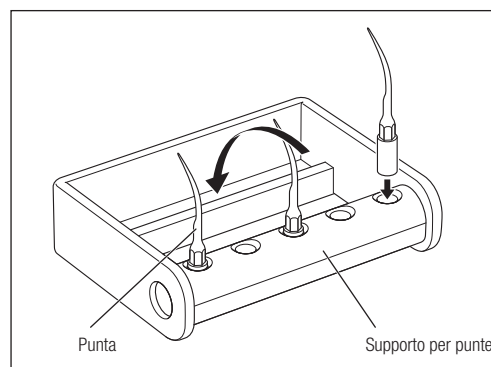- Utilizzare il supporto per punte per conservare le punte dopo la rimozione dal manipolo.
- Il supporto per punte è sterilizzabile in autoclave. È possibile sterilizzare fino a 5 punte contemporaneamente. Ruotare il supporto in direzione della freccia in modo che le punte si trovino nel telaio per la sterilizzazione.



11-3 Impostazione del livello di acqua di base

È possibile regolare il livello di acqua in base alla pressione dell'acqua erogata nell'ambiente di utilizzo. Se il volume di irrigazione è troppo elevato o troppo basso anche quando viene regolato con i tasti di selezione dell'irrigazione, seguire la procedura di seguito per regolare il livello di acqua di base.

- 1) Accendere l'interruttore di alimentazione sull'unità di controllo.
- 2) Toccare il tasto di selezione modalità operativa per selezionare la modalità Powder.
- 3) Tenere premuto il tasto di selezione modalità irrigazione per circa 2 secondi. Viene emesso un allarme e il pannello LCD passa alla modalità di regolazione del livello di acqua di base.
- 4) Toccare i tasti di selezione dell'irrigazione (▲/▼) per modificare il livello di acqua di base ("L1" - "L5"). Regolare il livello qualora necessario.
- 5) Tenere premuto il tasto di selezione modalità irrigazione per circa 2 secondi per salvare in memoria il livello selezionato. Viene emesso un allarme e il livello selezionato viene salvato, quindi il pannello LCD torna alla modalità normale.



Modalità di regolazione del livello di acqua di base [livello di acqua 4]

AVVISO • Il livello di acqua di base torna su "L4" quando si ripristinano le impostazioni predefinite del prodotto. Impostare di nuovo il livello di acqua di base dopo l'inizializzazione.

Riferimento

| Livello | Volume di acqua |
|----------------------|-----------------------|
| L5 | Elevato ↑ Basso |
| L4 (valore iniziale) | |
| L3 | |
| L2 | |
| L1 | |

12 Controlli di manutenzione periodici

Eseguire controlli di manutenzione periodici (ogni tre mesi) facendo riferimento alla scheda di controllo riportata di seguito. Contattare il distributore NSK autorizzato in caso di anomalie.

| Elementi da verificare | Dettagli |
|--|--|
| Manipolo Ultrasonic | Azionare il manipolo Ultrasonic per verificare l'assenza di anomalie quali vibrazioni, rumore, calore, ecc. Verificare inoltre che il LED si accenda e l'acqua scorra. |
| Coperchio del serbatoio | Verificare che non siano presenti graffi lunghi/profondi. |
| Spray con polvere | Dopo aver rabboccato la polvere, spruzzarla in una sputacchiera e assicurarsi che non ci siano perdite sul collegamento. |
| Spray con acqua | Dopo aver rabboccato la polvere, spruzzarla in una sputacchiera e assicurarsi che non ci siano fuoriuscite d'acqua sul collegamento. |
| Serbatoio | Verificare che non siano presenti graffi lunghi/profondi. |
| Inserimento/rimozione di manipolo, tubo del manipolo, bottiglia di irrigazione e serbatoio | Verificare che possano essere inseriti e rimossi correttamente. Se sono troppo allentati o troppo stretti, gli O-ring potrebbero danneggiarsi o deteriorarsi. Sostituire O-ring (consultare "10 Cura e manutenzione"). |

Ulteriori informazioni sulla sicurezza:

I test di sicurezza periodici devono essere eseguiti ogni due anni secondo la norma IEC 62353 (EN 62353), in conformità con la procedura di prova OM-DE0947EN.

Poiché i test di sicurezza periodici sono limitati esclusivamente a professionisti dentali addestrati e qualificati sotto il controllo di NSK, contattare il distributore NSK autorizzato.

13 Codice di errore

"Error" e un codice di errore vengono visualizzati sul pannello LCD dell'unità di controllo se il prodotto cessa di funzionare a causa di malfunzionamento, pressione eccessiva, scollegamento o funzionamento errato. Premere il pulsante D del pedale per eseguire di nuovo il controllo degli errori. Se il problema non viene rilevato, lo stato di errore viene rilasciato e il prodotto diventa operabile. Se il codice di errore continua ad essere visualizzato, consultare la tabella di seguito e adottare le misure necessarie per risolvere il problema.

| Codice di errore | Descrizione errore | Controllo/Risoluzione |
|------------------|---|---|
| 0 | Errore di sistema | Accendere di nuovo l'unità di controllo. Se l'errore non scompare, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 1 | Anomalia tensione a 24 V | |
| 2 | Anomalia tensione a 12 V | |
| 3 | Anomalia corrente pompa | Controllare il collegamento del set pompa di irrigazione. Se il problema persiste, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 4 | Anomalia pressione dell'aria | Controllare la pressione dell'aria in ingresso. Se il problema persiste, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 5 | Anomalia tensione elemento riscaldante | Accendere di nuovo l'unità di controllo. Se l'errore non scompare, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 6 | Anomalia corrente elemento riscaldante | |
| 7 | Anomalia temperatura elemento riscaldante | Controllare il circuito dell'acqua ed erogare acqua all'unità di controllo. Lasciare raffreddare l'unità di controllo prima dell'uso. Se l'errore non scompare, contattare il distributore. |
| 8 | Anomalia di comunicazione del pedale | Controllare il collegamento del pedale. Se il problema persiste, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 9 | Anomali manipolo Ultrasonic | Controllare il collegamento del manipolo. Se il problema persiste, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 12 | Anomalia di comunicazione del sensore tattile | Spegner e riaccendere l'interruttore di alimentazione. Se il problema persiste, contattare il distributore NSK autorizzato. |
| 13 | Errore di autodiagnosi dell'unità Ultrasonic | |
| 14 | Errore di sistema dell'unità Ultrasonic | |

14 Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, controllare i seguenti punti prima di contattare il distributore NSK autorizzato.

(Modalità Ultrasonic e modalità Powder)



| Problema | Causa | Rimedio |
|--|---|--|
| Emissione di un segnale acustico | Si è accesa l'alimentazione durante la pressione del pedale. | Rilasciare il pedale e accendere l'interruttore di alimentazione. |
| | Riscaldamento anomalo dell'unità di controllo | Cessare il funzionamento e lasciare raffreddare l'unità di controllo. |
| Il pannello a sfioramento non reagisce adeguatamente o il tasto toccato non viene riconosciuto correttamente. | La calibrazione è leggermente disallineata a causa di elettricità statica, rumore esogeno, ecc. | Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione. |
| | Il tasto non è stato toccato al centro. | Toccare il centro del tasto. |
| <ul style="list-style-type: none"> L'acqua non si arresta Non è possibile regolare il livello dell'acqua | Danni o usura dell'O-Ring. | Seguire la procedura in "10-1-5 Connettore del supporto del serbatoio" per sostituire l'O-Ring. |
| | Si è intasato del materiale estraneo nel percorso dell'acqua. | Eseguire la pulizia automatica. Se il problema non viene risolto, contattare il distributore NSK autorizzato. |

(Modalità Ultrasonic)



| Problema | Causa | Rimedio |
|--|---|---|
| Viene emesso un allarme e il display modalità Ultrasonic (P/E/G) e "ULTRASONIC" lampeggiano alternativamente quando si preme il pulsante D del pedale. | Il sensore integrato nel supporto del manipolo è sporco e rileva erroneamente l'inserimento del manipolo. | Pulire il sensore. |
| Vibrazione debole o assente. | La spina del cavo di alimentazione CA non è collegata alla presa di corrente o non è fornita corrente alla presa. | Controllare il collegamento. |
| | Il fusibile è bruciato. | Consultare "10-5 Sostituzione del fusibile" e sostituire il fusibile. |
| | La punta non è stata inserita saldamente. | Ruotare la chiave per punte fino a quando si avverte uno scatto e la chiave comincia a girare senza serrare ulteriormente. Se il problema persiste, sostituire la chiave per punte in quanto potrebbe essere usurata. |
| | Punta usurata. | Sostituire la punta. |
| | Le parti avvitabili del manipolo e della punta non sono pulite. | Pulirle. |
| | Le parti avvitabili del manipolo sono usurate a seguito di uso prolungato. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| | La potenza non è stata regolata correttamente rispetto al tipo di punta. | Regolare la potenza in modo che non superi il limite massimo, come indicato dalla Guida alla selezione della potenza delle punte o dall'etichetta sull'astuccio della punta. |
| | Il pedale è scollegato. | Collegare correttamente la spina del cavo del pedale. |
| | Il dispositivo vibrante nel manipolo è guasto. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| I componenti interni del pedale sono guasti. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* | |
| La punta è piegata o rotta. | Il sensore integrato nel supporto del manipolo è sporco e rileva erroneamente l'inserimento del manipolo. | Pulire il sensore. |
| | La potenza non è stata regolata correttamente rispetto al tipo di punta. | Regolare la potenza in modo che non superi il limite massimo, come indicato dalla Guida alla selezione della potenza delle punte o dall'etichetta sull'astuccio della punta. |
| La punta si stacca. | La punta non è stata inserita saldamente. | Avvitare la punta fino a quando la chiave per punte non si arresta. |

| Problema | Causa | Rimedio |
|---|--|---|
| Il manipolo emette rumore. | La potenza non è stata regolata correttamente rispetto al tipo di punta. | Regolare la potenza in modo che non superi il limite massimo, come indicato dalla Guida alla selezione della potenza delle punte o dall'etichetta sull'astuccio della punta. |
| | La punta non è stata inserita saldamente. | Ruotare la chiave per punte fino a quando si avverte uno scatto e la chiave comincia a girare senza serrare ulteriormente. Se il problema persiste, sostituire la chiave per punte in quanto potrebbe essere usurata. |
| | Il dispositivo vibrante nel manipolo o nell'unità di controllo è guasto. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| Il manipolo è surriscaldato | La potenza non è stata regolata correttamente rispetto al tipo di punta. | Regolare la potenza in modo che non superi il limite massimo, come indicato dalla Guida alla selezione della potenza delle punte o dall'etichetta sull'astuccio della punta. |
| | La punta non è stata inserita saldamente. | Ruotare la chiave per punte fino a quando si avverte uno scatto e la chiave comincia a girare senza serrare ulteriormente. Se il problema persiste, sostituire la chiave per punte in quanto potrebbe essere usurata. |
| | Le parti avvitabili del manipolo e della punta non sono pulite. | Pulirle. |
| | Le parti avvitabili del manipolo sono usurate a seguito di uso prolungato. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| | Il volume di irrigazione è insufficiente oppure l'irrigazione si è arrestata. | Irrigare con un volume adeguato. |
| | Il dispositivo vibrante nel manipolo o nell'unità di controllo è guasto. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| Nessuna irrigazione e/o irrigazione instabile (uso della bottiglia) | Il tubo di irrigazione è attorcigliato. | Raddrizzare il tubo di irrigazione attorcigliato. |
| | Sostituire il set pompa di irrigazione. | Sostituirla con un nuovo set di irrigazione (consultare 10-2 Sostituzione del set pompa di irrigazione). |
| Acqua assente o erogata debolmente (uso dell'acqua corrente). | L'acqua non arriva all'unità di controllo. | Controllare il circuito dell'acqua e la sua erogazione verso l'unità di controllo. Pressione dell'acqua: 0,1 - 0,3 MPa |
| | Il volume di irrigazione è impostato su "0". | Regolare al volume di irrigazione adeguato con la relativa impostazione. |
| | L'erogazione di acqua potrebbe essere instabile quando il volume di irrigazione è insufficiente. | Non si tratta di un malfunzionamento. Aumentare il volume di irrigazione con la relativa impostazione. |
| | Il filtro dell'acqua è intasato con corpi estranei. | Sostituirlo con un filtro dell'acqua nuovo. |
| Perdita d'acqua | C'è una perdita d'acqua dalla giuntura tra il tubo di irrigazione e il connettore. | Inserire il tubo di irrigazione nel connettore il più a fondo possibile. |
| | C'è una perdita d'acqua tra l'O-ring e il cordone del manipolo. | Sostituire l'O-ring attenendosi alle procedure di "10-1-1 Cordone del manipolo". |
| | C'è una perdita d'acqua dall'unità di controllo. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| Il LED del manipolo non si illumina. | Il manipolo non è collegato correttamente al cordone del manipolo. | Inserire il manipolo nel cordone il più a fondo possibile. |
| | Guasto nell'unità di controllo. | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |

(Modalità Powder)



| Problema | Causa | Rimedio |
|--|---|---|
| Viene emesso un allarme e "POWDER" e l'icona dei denti lampeggiano alternativamente quando si preme il pulsante D o B del pedale. | Il sensore integrato nel supporto del manipolo è sporco e rileva erroneamente l'inserimento del manipolo. | Pulire il sensore. |
| | Il serbatoio non è inserito correttamente. | Inserire il serbatoio saldamente finché non si avverte un segnale acustico di conferma. |
| Non si avverte il segnale acustico di conferma oppure l'icona che indica la modalità Prophy o la modalità Perio non viene visualizzata quando si inserisce il serbatoio. | Guasto nell'unità di controllo (scollegamento). | Contattare il distributore NSK autorizzato.* |

| Problema | Causa | Rimedio |
|--|---|---|
| Aria e polvere non vengono erogati. Oppure l'aria e la polvere vengono erogati, ma la pressione non è sufficientemente forte, così come la polvere di pulizia. | L'interno del beccuccio è intasato con polvere. | Sostituire il beccuccio. |
| | L'interno del manipolo è intasato con polvere. | Pulire la base dell'ugello con il filo di pulizia (piccolo) e l'estremità del beccuccio con la lima di pulizia. Inoltre, pulire l'interno del manipolo con il filo di pulizia (grande). Se polvere e aria non scorrono dopo la pulizia, come descritto in precedenza, eseguire la pulizia a ultrasuoni con acqua calda (Consultare "9-3 Pulizia a ultrasuoni (settimanale)"). |
| | L'interno del serbatoio è intasato con polvere. | Rimuovere la polvere dall'interno del serbatoio attenendosi alle procedure di "9-1-5 Serbatoio e tubo del manipolo". |
| | La polvere si è parzialmente solidificata con l'acqua, ecc., nel passaggio dell'aria. | Rimuovere la polvere dall'interno del passaggio attenendosi alle procedure di "9-1-4-2 Pulizia automatica". |
| | Il serbatoio della polvere è stato lasciato aperto, esponendo la polvere all'aria. | Smaltire la polvere e utilizzare nuova polvere. |
| | L'acqua contiene aria. | Aprire il filtro nel circuito di alimentazione dell'aria per scaricare il compressore e verificare che l'acqua non si accumuli all'interno del filtro dell'aria e dello scarico del compressore. |
| | L'elemento VCP è bloccato. | Contattare il rivenditore NSK autorizzato.* |
| Perdita di acqua tra il manipolo e il tubo del manipolo. | L'O-ring è graffiato. | Sostituire l'O-ring nella sezione giunto del manipolo, applicare una goccia di olio turbina in dotazione e strofinarlo con il dito (consultare "10-1-2 Tubo del manipolo (per uso Prophy e Perio)"). |
| Non è possibile rimuovere il serbatoio perché non è possibile premere il pulsante di blocco | Il pulsante è bloccato | Seguire la procedura di "Rilascio del pulsante di blocco" in "9-1-5 Serbatoio e tubo del manipolo" per rilasciare il blocco. Se il sintomo non viene risolto, contattare il distributore NSK autorizzato.* |
| Impossibile chiudere il coperchio del serbatoio. | È presente della polvere che aderisce alle filettature del serbatoio e/o del coperchio del serbatoio. | Pulire le filettature del coperchio del serbatoio (consultare "Pulizia del coperchio del serbatoio" in "9-1-5-2 Pulizia e disinfezione"). |

* Le riparazioni non possono essere effettuate in cliniche, ecc.

15 Specifiche tecniche

<Unità di controllo>

| | |
|--|--|
| Modello | Varios Combi Pro |
| Alimentazione | 100 V CA - 240 V 50/60 Hz |
| Frequenza di trasmissione | 28 - 32 kHz |
| Ingresso di potenza | 78 - 98 VA |
| Potenza max. di uscita | 11 W |
| Pressione dell'aria | 0,55 - 0,75 MPa (5,5 - 7,5 kgf/cm ²) |
| Pressione dell'acqua | 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm ²) |
| Volume bottiglia | 400 ml |
| Volume irrigazione (Modalità Ultrasonic) | 5,0 - 70,0 mL/min (Modalità di irrigazione: bottiglia/acqua corrente, pressione dell'acqua: 0,2 MPa) |
| Dimensioni | L 225 × P 290 × A 162 mm (incluse la bottiglia di irrigazione e il serbatoio) |
| Peso | 2,7 kg (bottiglia di irrigazione e serbatoio non inclusi) |

<Pedale>

| | |
|-------------------|---|
| Modello | FC-79 |
| Lunghezza cordone | 2,5 m |
| Dimensioni | L 204 × P 157 × A 128 mm (incluso supporto) |
| Peso | 415 g (incluso supporto) |

<Manipolo Ultrasonic>

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Modello | VA2-LUX-HP |
| Lunghezza cordone | 1,8m (connettore non incluso) |
| Tipo di oscillatore | Tipo di piezo |
| Luce | LED bianco |
| Dimensioni | φ20 × 103 mm (cordone non incluso) |
| Peso | 54 g (cordone non incluso) |

<Manipolo Powder>

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Modello | PROPHY-HP/PERIO-HP |
| Lunghezza tubo | 1,8 m (connettore non incluso) |
| Dimensioni | φ16 × 107 mm (cordone non incluso) |
| Peso | 33 g (cordone non incluso) |

| | Temperatura | Umidità | Pressione atmosferica |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| Ambiente di utilizzo*2 | 0 - 40°C | 35 - 75%*1 | – |
| Ambiente di trasporto e stoccaggio | -10 - 50°C | 10 - 85% | 500 - 1.060 hPa |

*1 Senza condensa

*2 L'uso di questo prodotto in condizioni diverse da quelle specificate in precedenza potrebbe causare malfunzionamento.

16 Classificazione del dispositivo

- Tipo di protezione contro le scariche elettriche:
 - Dispositivo di classe I
- Grado di protezione contro le scariche elettriche:
Parte applicata di tipo B: ⚡ (Parti applicate: punta Ultrasonic, manipolo Ultrasonic, beccuccio, manipolo Powder)
- Metodo di sterilizzazione o disinfezione consigliato dal produttore:
Consultare 9. Manutenzione dopo l'uso
- Grado di protezione contro la penetrazione d'acqua in conformità alle norme IEC 60529 in vigore:
 - Pedale: IPX1 (Protected against vertically falling water drops)
- Grado di sicurezza in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto:
 - Apparecchio NON adatto all'uso in presenza di sostanze anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto.
- Modalità di funzionamento:
 - Funzionamento continuo

17 Principio di funzionamento


































Modalità Ultrasonic

Un segnale elettrico sinusoidale a frequenza di ultrasuoni ($f > 20$ kHz) viene emesso dal generatore. Il segnale viene trasmesso alla ceramica piezoelettrica situata all'interno del trasduttore che converte il segnale stesso in vibrazioni meccaniche alla stessa frequenza di ultrasuoni del segnale elettrico. Le vibrazioni meccaniche si propagano verso l'estremità distale del trasduttore a cui è attaccato l'inserto che vibra a una frequenza a ultrasuoni e consente di eseguire l'operazione desiderata.

Modalità Powder

Spruzza polvere utilizzando la pressione dell'aria per pulire la superficie dentale.

18 Simboli

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Questo prodotto può essere sterilizzato in uno sterilizzatore a vapore a 135°C. |  | Lotto |
|  | Marchio di Conformità alla Direttiva Europea dei "Dispositivi Medicali direttiva 93/42/EEC" |  | N. di serie |
|  | Rappresentante autorizzato nella comunità europea. |  | Attenzione |
|  | Vedere il Manuale Istruzioni. |  | Temperatura |
|  | Protezione dalle gocce d'acqua. |  | Acqua corrente potabile |
|  | Marchio all'esterno dell'Apparecchio o parti dell'Apparecchio che includono energia elettromagnetica RF per diagnosi o trattamento. |  | Lampada / luce / illuminazione |
|  | Non riutilizzare. |  | Controllo visivo |
|  | Conservare in luogo asciutto. |  | Bagno a ultrasuoni |
|  | Sterilizzazione EOG |  | Limite di umidità |
|  | Datamatrix GS1 per l'identificazione unica del dispositivo. |  | Limite di pressione atmosferica |
|  | Questo prodotto può essere lavato in lavadisinfettatrice. |  | Numero di catalogo (Codice d'ordine) |
|  | Produttore. |  | Dispositivo medico |
|  | L'apparecchio e gli accessori devono essere smaltiti in ottemperanza alle direttive (2012/19/EU) sullo smaltimento dei componenti elettrici ed elettronici (WEEE). |  | Identificativo unico del dispositivo |
|  | Parte applicata di tipo B. |  | Rappresentante autorizzato per la Svizzera |
|  | Da utilizzare esclusivamente in ambienti chiusi. |  | Data di fabbricazione |
|  | Limite di temperatura. |  | Importatore |
|  | Utilizzare entro (tempo). | | |

19 Garanzia

I prodotti NSK sono garantiti da errori di fabbricazione e difetti dei materiali. NSK si riserva il diritto di analizzare e stabilire la causa di qualsiasi problema. La garanzia sarà nulla qualora il prodotto non sia stato utilizzato correttamente o per la destinazione d'uso prevista o qualora sia stato manomesso da personale non qualificato o presenti pezzi non originali NSK. I pezzi di ricambio sono disponibili per sette anni dalla messa fuori produzione del modello.

20 Elenco dei pezzi opzionali

| Modello | REF | Note |
|--|------------|---|
| Manometro multiplo MG-4H | Z109400 | |
| Supporto per punte | Z221080 | |
| Set Perio | Y1003042 | Manipolo Powder (per uso Perio) Serbatoio (per uso Perio) Tubo del manipolo (per uso Perio) Polvere Perio Mate Beccucci Perio Mate (40 pezzi) Utensile per rimuovere il puntale Perio Mate |
| Manipolo Powder (per uso Perio) | T1077001 | |
| Serbatoio (per uso Perio) | U1135019 | |
| Tubo del manipolo (per uso Perio) | T1053001 | |
| Puntale (per uso Perio) | T1077012 | |
| Polvere Perio Mate | Y900938 | 2 bottiglie, ciascuna contenente 160 g |
| Beccucci Perio Mate | Y1002741 | 40 pezzi |
| Utensile per rimuovere il puntale Perio Mate | T1043751 | |
| Valvola riduttrice di pressione dell'acqua | U1135093 | |
| CLA-20 | ZA11900108 | Adattatore di pulizia per manipolo Perio/manipolo Prophy. |

21 Elenco dei pezzi di ricambio

| Modello | REF | Note |
|--|----------|---|
| FC-79 | Z1256001 | Pedale |
| Set bottiglia VCP | U1135017 | Bottiglia e tappo (bottiglia di irrigazione, tappo della bottiglia di irrigazione) |
| Tappo bottiglia VCP | U1135116 | Solo tappo (tappo della bottiglia di irrigazione) |
| Bottiglia VCP (solo bottiglia) | U1135099 | Solo bottiglia (bottiglia di irrigazione) |
| Set O-ring (Bottiglia di irrigazione) | Y1003544 | Per O-ring sottili e spessi |
| O-ring | Y1003546 | 1 per cordone del manipolo |
| O-ring set (Connettore del serbatoio) | Y1003435 | |
| Set O-ring (Tubo del manipolo) | Y1003500 | Per O-ring sottili e spessi Componenti comuni per Prophy e Perio |
| Set O-ring (Puntale) | Y1003501 | Per O-ring sottili e spessi Componenti comuni per Prophy e Perio |
| O-ring | Y1003545 | Per il coperchio della camera |
| Cordone del manipolo | E351054 | |
| Manipolo Ultrasonic | E351050 | |
| Astuccio di sterilizzazione | Z1035001 | Per parti Ultrasonic |
| Chiave per punte (CR-10) | Z221076 | |
| Tubo dell'acqua | U1135078 | |
| Filtro acqua | U387042 | |
| Chiave inglese (5x8) | Y1001301 | 2 |
| Set pompa di irrigazione | U1135079 | Escluso anello di connessione |
| FLASH pearl | Y900698 | 4 bottiglie, ciascuna contenente 300 g |
| Set Prophy | Y1003771 | Manipolo Powder (per uso Prophy) Serbatoio (per uso Prophy) Tubo del manipolo (per uso Prophy) FLASH pearl (5 bustine) O-ring di ricambio |
| Serbatoio (per uso Prophy) | U1135018 | |
| Tubo del manipolo (per uso Prophy) | T1051001 | |
| Manipolo Powder (per uso Prophy) | T1074001 | |
| Puntale (per uso Prophy) | T1074012 | |
| Coperchio del serbatoio | U1135089 | Solo coperchio |
| Lima di pulizia | T798092 | Per l'estremità distale e l'interno del puntale |
| Filo di pulizia (S) | T798095 | Per la radice del puntale |
| Filo di pulizia (L) | T798091 | Per parti diverse da quelle precedenti |

| Modello | REF | Note |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| Spazzola di pulizia | T798093 | |
| Strumento di sblocco | U1135256 | |
| Chiave ad anello | T1074601 | |
| Olio turbina | Z016112 | |
| Tube aria | D0914406036 | |
| Fusibile | D1202220010 | Valore nominale T2AH250V |

22 Smaltimento del prodotto

Per evitare rischi per la salute degli operatori addetti allo smaltimento delle apparecchiature mediche e rischi di inquinamento ambientale causati dallo smaltimento, è necessario che la sterilità delle apparecchiature sia verificata da un chirurgo o da un dentista. Per lo smaltimento del prodotto, rivolgersi ad aziende specializzate autorizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali soggetti a controllo speciale.

23 Informazioni EMC (Compatibilità elettromagnetica)

| Linee guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche | | |
|--|-------------------------|--|
| Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del prodotto devono assicurarsi che venga usato in tale ambiente. | | |
| Test Emissioni | Conformità | Ambiente elettromagnetico - guida |
| Emissioni RF CISPR11/EN55011 | Gruppo 1 Classe B | Il prodotto utilizza energia a radiofrequenza solo per il funzionamento interno. Le emissioni di energia a radiofrequenza sono quindi molto basse ed è improbabile che provochino interferenze alle apparecchiature elettroniche presenti nelle vicinanze. Il prodotto può essere utilizzato in tutti gli ambienti, compresi quelli abitativi e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici ad uso domestico. |
| Emissioni RF CISPR11/EN55011 | Gruppo 1 Classe B | |
| Emissioni armoniche EN/IEC61000-3-2 | Classe A (eccetto 120V) | |
| Fluttuazioni di voltaggio/ emissioni di vibrazione EN/IEC61000-3-3 | Conforme (eccetto 120V) | |

| Linee guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica | | | |
|--|--|--|--|
| Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del prodotto devono assicurarsi che venga usato in tale ambiente. | | | |
| Test di immunità | Livello test EN/IEC60601 | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico - guida |
| Scarica elettrostatica (ESD) EN/IEC61000-4-2 | ±(2,4) 6kV contatto ±(2,4) 8kV aria | ±(2,4) 6kV contatto ±(2,4) 8kV aria | I pavimenti devono essere di legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%. |
| Transistor elettrico veloce/ burst EN/IEC61000-4-4 | ±2kV per linee di alimentazione ±1kV per linee entrata/uscita | ±2kV per linee di alimentazione ±1kV per linee entrata/uscita | |
| Sovraccarico EN/IEC61000-4-5 | ±1kV linea(-e) a linea(-e) ±2kV linea(-e) a terra | ±1kV linea(-e) a linea(-e) ±2kV linea(-e) a terra | La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella standard degli ambienti commerciali od ospedalieri. |
| Cali di tensione, brevi interruzione e variazioni di tensione nelle linee di ingresso dell'alimentazione EN/IEC61000-4-11 | <5% Ut (>95% di calo di Ut) per 0,5 cicli 40% Ut (60% di calo di Ut) per 5 cicli 70% Ut (30% di calo di Ut) per 0,5 cicli <5% Ut (>95% di calo di Ut) per 5 secondi | <5% Ut (>95% di calo di Ut) per 0,5 cicli 40% Ut (60% di calo di Ut) per 5 cicli 70% Ut (30% di calo di Ut) per 0,5 cicli <5% Ut (>95% di calo di Ut) per 5 secondi | La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella standard degli ambienti commerciali od ospedalieri. Se l'utilizzatore del prodotto richiede un funzionamento continuo, anche durante eventuali interruzioni dell'alimentazione, si consiglia di alimentare il prodotto attraverso un gruppo di continuità o una batteria. |
| Campo magnetico della frequenza di rete (50/60 Hz) EN/IEC61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | La potenza della frequenza dei campi magnetici dovrà essere agli stessi livelli degli ambienti commerciali od ospedalieri. |

NOTA: "Ut" è il valore di tensione di alimentazione CA prima dell'applicazione del livello di test.

| Linee guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--|
| Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del prodotto devono assicurarsi che venga usato in tale ambiente. | | | |
| Test di immunità | Livello test EN/IEC60601 | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico - guida |
| RF condotta EN/IEC61000-4-6 | 3Vrms 150 kHz - 80 MHz | 3Vrms | Non utilizzare dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili nelle vicinanze di nessun componente del prodotto, cavi compresi, se non rispettando la distanza di separazione raccomandata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione raccomandata $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz a 800MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz a 2,5GHz In cui P è il valore massimo della potenza di uscita in watt (W) indicato dal produttore del trasmettitore e (d) è la distanza di separazione consigliata in metri (m). Le intensità di campo dei trasmettitori in radiofrequenza fissi determinate da una prospezione elettromagnetica del sito(a) dovranno essere inferiori al livello di conformità in ogni intervallo di frequenza(b). Possibilità di interferenze nelle vicinanze dei dispositivi |
| RF irradiata EN/IEC61000-4-3 | 3V/m 80MHz - 2,5GHz | 3V/m | |
| NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si fa riferimento alla gamma di frequenza superiore. NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. a: le intensità di campo dei trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e i dispositivi radiomobili terrestri, le radio amatoriali, i ripetitori AM e FM e di segnali TV non possono essere previste con precisione in via teorica. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori a radiofrequenza fissi occorre svolgere un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il prodotto supera il livello di conformità per l'energia a radiofrequenza vigente indicato in precedenza, il prodotto deve essere sorvegliato per verificarne il corretto funzionamento. Se si osservano delle anomalie, può essere necessario adottare misure aggiuntive, come orientare diversamente o spostare il prodotto. b: oltre la gamma di frequenza tra 150 kHz e 80 MHz, l'intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m. | | | |



| Cavi e accessori | Lunghezza massima | Conforme a | |
|--------------------------|----------------------|---|-------------------|
| Cordone del manopolo | 2,0m (non schermato) | Emissioni RF, CISPR11 | Classe B/Gruppo 1 |
| Cavo del pedale | 2,5m (non schermato) | Emissioni armoniche (eccetto 120V) | EN/IEC61000-3-2 |
| Cavo di alimentazione CA | 3,0m (non schermato) | Fluttuazioni di voltaggio/emissioni di vibrazione (eccetto 120V) | EN/IEC61000-3-3 |
| | | Scarica elettrostatica (ESD): | EN/IEC61000-4-2 |
| | | Transistor elettrico veloce/burst: | EN/IEC61000-4-4 |
| | | Sovraccarico: | EN/IEC61000-4-5 |
| | | Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione nelle linee di ingresso dell'alimentazione: | EN/IEC61000-4-11 |
| | | Potenza frequenza(50/60Hz) campo magnetico: | EN/IEC61000-4-8 |
| | | RF condotta: | EN/IEC61000-4-6 |
| RF irradiata: | EN/IEC61000-4-3 | | |

Distanza di separazione consigliata tra i dispositivi di comunicazione in RF portatili e mobili e il prodotto

Il prodotto è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico con interferenze RF controllate. Il cliente o l'utilizzatore del prodotto possono prevenire le interferenze elettromagnetiche rispettando una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF (trasmettitori) portatili e mobili e il prodotto, come consigliato di seguito, in base alla potenza massima di uscita dell'apparecchiatura di comunicazione.

| Massima potenza nominale di uscita del trasmettitore | Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | 150 kHz - 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 80MHz - 800MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 800MHz - 2,5GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Per i trasmettitori il cui valore massimo di potenza di uscita non è incluso nell'elenco riportato, la distanza di separazione "d" consigliata in metri (m) può essere calcolata con l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, in cui "P" è il valore massimo della potenza di uscita in watt (W) indicato dal produttore del trasmettitore.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si fa riferimento alla gamma di frequenza superiore.

NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Obrigado por ter adquirido o Varios Combi Pro. Leia atentamente este Manual de instruções antes da utilização para dispor de instruções de utilização, cuidado e manutenção, prolongando a vida útil do produto através de uma utilização correta. Mantenha este Manual de instruções acessível para consulta pelos utilizadores.




O número de referência do manual de instruções dos produtos relacionados é o seguinte:

| Título do manual de instruções | N.º do manual de instruções |
|---|-----------------------------|
| Cleaning Adaptor CLA-20 For Prophy Handpiece / For Perio Handpiece | OM-DE0906MA |

– Índice –

| | |
|--|-----|
| 1. Utilizador e Utilização prevista | 271 |
| 2. Cuidados de manuseamento e utilização | 271 |
| 3. Lista de acessórios. | 275 |
| 4. Nomes dos componentes | 276 |
| 5. Instalação | 278 |
| 6. Verificar antes do tratamento | 281 |
| 7. Utilizar o modo Ultrasonic | 282 |
| 8. Utilizar o modo Powder. | 286 |
| 9. Manutenção Após a Utilização. | 291 |
| 10. Cuidados e manutenção | 309 |
| 11. Outras funções | 314 |
| 12. Verificações periódicas de manutenção | 315 |
| 13. Código de erro | 315 |
| 14. Resolução de problemas. | 316 |
| 15. Especificações | 318 |
| 16. Classificação do equipamento. | 319 |
| 17. Princípio de funcionamento. | 319 |
| 18. Símbolos | 320 |
| 19. Garantia | 320 |
| 20. Lista de peças opcionais. | 321 |
| 21. Lista de peças sobresselentes | 321 |
| 22. Eliminação do produto | 322 |
| 23. Informação CEM (Compatibilidade Eletromagnética) | 322 |

* Algumas secções estão indicadas com a(s) marca(s) abaixo para mostrar o(s) modo(s) relacionado(s) com a secção.

| | |
|--|--|
|  ULTRASONIC | Descrição relativa ao modo Ultrasonic |
|  POWDER PROPHY | Descrição relativa ao modo Prophy no modo Powder |
|  POWDER PERIO | Descrição relativa ao modo Perio no modo Powder |



1 Utilizador e Utilização prevista

Utilizador: Dentista, higienista dental

Utilização prevista: Limpeza da superfície dos dentes, remoção da placa bacteriana ou tártaro, ressecção dos dentes, expansão ou limpeza de canal radicular, remoção de substâncias estranhas, obturação do canal radicular, melhorar a colagem de restaurações fixas, incisão ou remoção do tecido periodontal

2 Cuidados de manuseamento e utilização

- Leia atentamente estas instruções e utilize o produto unicamente conforme previsto ou indicado.
- As instruções de segurança pretendem evitar perigos potenciais causadores de lesões pessoais ou de danos no aparelho.
As instruções de segurança são classificadas como se segue de acordo com a gravidade do risco.

| Classe | Grau de risco |
|--|--|
|  ATENÇÃO | Perigo que pode resultar em ferimentos graves ou danos no aparelho se as instruções de segurança não forem devidamente respeitadas. |
|  CUIDADO | Perigo que pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados ou danos no aparelho se as instruções de segurança não forem devidamente respeitadas. |
| IMPORTANTE | Especificação geral do produto destinada a evitar falhas e redução do desempenho do produto. |

⚠ ATENÇÃO

<Modo Ultrasonic e modo Powder>



- Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas. O contacto de mãos molhadas com eletricidade pode causar um choque elétrico.
- Mantenha o produto afastado de substâncias explosivas e materiais inflamáveis.
- Se o produto sobreaquecer ou se cheirar a queimado, desligue imediatamente a energia e o cabo de alimentação. Contacte um distribuidor autorizado NSK.
- PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, utilize uma tomada elétrica com ligação à terra.
- Não utilize perto de pacientes com pacemakers cardíacos uma vez que existe um perigo de afetar o pacemaker.
- O sistema funciona normalmente no ambiente onde a temperatura varia entre 0 - 40°C, humidade a 35 - 75% RH e sem condensação de humidade na unidade de controle. A utilização em condições fora destes limites pode causar avarias.
- Não permita a entrada de água ou líquido desinfetante na unidade de controle. Isto pode provocar curtos-circuitos e originar um incêndio e/ou choque elétrico.
- Colocar repetidamente o interruptor principal em ON e OFF pode queimar um fusível.
- Se gotas de água, químicos, solventes ou solução antisséptica entrarem em contacto com a unidade de controle, peça de mão, cabo da peça de mão, mangueira da peça de mão, etc, limpe-os imediatamente. Caso contrário, pode resultar em descoloração ou deformação.
- Ligue a um sistema de abastecimento público de água que fornece água potável com uma pressão entre 0,1 e 0,3 MPa. Utilizar com uma pressão de água incorreta pode resultar numa alimentação insuficiente de água, inoperabilidade ou avarias.
- Utilize um amaciador de água, etc. para baixar a dureza da água, uma vez que utilizar água com um elevado grau de dureza pode causar depósitos minerais ou calcários no circuito de água, o que pode resultar em problemas como níveis insuficientes de água, problemas de funcionamento ou avarias. Ao fazer isto, utilize um tubo de água com um filtro de água para evitar avarias no dispositivo devido às substâncias estranhas na água da torneira e consulte "10-3 Substituir o filtro de água" para substituir o filtro de água, conforme necessário.
- Não esterilize utilizando luz ultravioleta. Caso contrário, pode resultar em descoloração da peça de mão.
- Segure a ficha ao retirar o cabo da peça de mão ou a mangueira da peça de mão. Puxar o cabo ou mangueira pode causar desativação ou danos.

<Modo Ultrasonic>



- Utilize sempre a alimentação de água. Uma alimentação insuficiente de água resulta em sobreaquecimento, o que pode danificar a superfície do dente do paciente.
- Não permita que o paciente ou assistente olhe diretamente para o LED da peça de mão ou cabo da peça de mão. Caso contrário, pode prejudicar a visão.

<Modo Powder>



- Não utilize nos pacientes seguintes.
 - Com complicações médicas ou alérgicas
 - Com condições prévias como, por exemplo, distúrbios cardíacos, pulmonares e renais ou tensão arterial elevada
 - Com doenças respiratórias.
 - Com bolsas periodontais patologicamente profundas (6 mm ou mais) ou lesões da mucosa. Aplicação prolongada da pulverização para suavizar o tecido ou glândulas salivares pode causar a entrada de ar com pó no tecido mole ou glândulas salivares, resultando num enfisema.
 - Com úlceras gástricas graves.
 - Com disfunções renais.
 - Com distúrbios pulmonares ou cardíacos ou deficiências respiratórias.
 - Com válvula cardíaca artificial ou articulação artificial
 - Com alergias. Consoante a constituição do paciente, podem surgir sintomas de alergias ou estomatite em casos muito raros. Se tais sintomas forem detetados, pare imediatamente a utilização do produto e consulte um médico.
- Durante a utilização, o operador e o assistente devem usar sempre óculos e máscaras de proteção. Além disso, aspire continuamente e recolha o pó ejetado durante a utilização. Se algum pó entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente com bastante água e consulte um oftalmologista.
- Defina a pressão de ar de alimentação para 0,55 - 0,75 MPa e utilize ar limpo e seco. Utilizar com uma pressão incorreta pode resultar numa pressão (alimentação) insuficiente de pulverização, inoperabilidade ou avarias.

<Modo Propphy>



- Não pulverize diretamente para o cimento no canal radicular, esmalte descalcificado, preenchimento, margem de uma prótese ou preenchimento.

⚠ ATENÇÃO

<Modo Perio>



- Ao utilizar o modo Perio, preste atenção para não causar enfisemas à medida que o ar com pó é pulverizado para as bolsas periodontais. Se o enfisema for causado por tratamento utilizando o modo Perio, pare imediatamente a utilização do produto e consulte um médico.
- Não utilize nos pacientes seguintes. Utilizar em bolsas periodontais nestes pacientes pode resultar em bacilemia.
 - Pacientes com inflamação endocárdica
 - Pacientes com uma doença contagiosa
 - Pacientes com uma doença de imunodeficiência (neutropenia, granulocitopenia, agranulocitose, diabetes, hemofilia)
 - Pacientes em tratamento por radiação, quimioterapia ou tratamento com antibióticos
- Não utilize nos pacientes seguintes. (Exceto a utilização sem a ponta do bico)
 - Com danos ou anomalias na cavidade oral.
 - Com hiperemia, hemorragia ou inflamação na cavidade oral.
 - Com tendência a desenvolver inflamações ou feridas na membrana mucosa oral.
- Utilize este produto apenas para manutenção após tratamento periodontal básico. Nunca utilize para outros fins.
- Utilize o modo Perio apenas nas bolsas periodontais que cumprem as condições seguintes:
 - Bolsas periodontais causadas pela doenças das gengivas
 - Bolsas periodontais inferiores a 6 mm que fizeram tratamento periodontal básico
- Verifique a profundidade das bolsas periodontais com uma sonda de medição ou fotografia antes da utilização.
- Utilize apenas o pó de limpeza designado. A utilização de outros pós pode resultar em avarias, desempenho reduzido ou danos na substância óssea e dentina ou pode causar enfisemas. A NSK não é responsável por problemas que ocorrem como resultado da utilização de um pó que não aquele designado.
- A ponta do bico para o modo Perio incluída na embalagem do produto é um item estéril. Respeite as instruções seguintes durante a utilização destes produtos.
 - A ponta do bico é um item de utilização única. Não reutilize nem esterilize, caso contrário, podem ocorrer avarias no produto ou infeções.
 - Antes da utilização, certifique-se de que a embalagem NÃO está aberta nem danificada. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, não utilize a ponta do bico uma vez que pode estar danificada ou contaminada.
 - Cumpra o prazo de validade escrito na etiqueta da embalagem da ponta do bico. Não utilize produtos expirados uma vez que podem ocorrer avarias no produto ou infeções.

⚠ CUIDADO

<Modo Ultrasonic e modo Powder>



- Leia este Manual de instruções antes de utilizar o produto para compreender as funções na íntegra e guarde-o para consulta futura.
- Considere sempre a segurança do paciente ao manusear o produto.
- O utilizador final será responsável pela decisão de aplicar este produto num paciente.
- Os utilizadores são responsáveis pelo controlo operacional, pela manutenção e pela inspeção permanente do produto.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização em ambiente interior.
- Mantenha a unidade de controlo numa superfície nivelada.
- Não tente desmontar o produto nem modificar o seu mecanismo, exceto da forma recomendada pela NSK neste Manual de instruções.
- Evite quaisquer impactos no produto. Não deixe cair o produto. A barra de vidro e a peça de mão podem ficar danificados se a peça de mão ultrassónica cair.
- Os operadores e as restantes pessoas na área devem usar proteção ocular e máscara durante a utilização deste produto.
- Se o produto não funcionar corretamente, suspenda imediatamente a utilização e contacte um distribuidor autorizado NSK.
- Empurre a peça de mão por completo para o cabo da peça de mão ou mangueira da peça de mão ao efetuar a ligação.
- Não esterilize o cabo da peça de mão ou a mangueira da peça de mão em autoclave.
- Não esfregue, limpe nem mergulhe o produto em água muito ácida nem em soluções esterilizantes.
- Este produto não é entregue numa condição estéril, exceto para a ponta do bico (opção) e tem de ser esterilizado em autoclave antes da utilização. Consulte “9-2 Esterilização” para mais informações.
- Efetue inspeções regulares de funcionamento e de manutenção.
- Se o produto não for utilizado durante um período prolongado, verifique se funciona corretamente antes de voltar a utilizá-lo num paciente.
- Para evitar a inatividade clínica, recomenda-se dispor de um sistema suplementar para a eventualidade de uma avaria durante o tratamento.
- Substitua sempre o fusível por um com a mesma classificação.
- Este produto está classificado como equipamento médico elétrico. A CEM (compatibilidade eletromagnética) está descrita na documentação anexada.
- A instalação e a utilização do produto exigem cuidados especiais de compatibilidade eletromagnética em conformidade com a informação respetiva.
- Os equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis podem afetar o equipamento médico elétrico. Não utilize equipamento RF na proximidade do produto.
- A utilização de ACESSÓRIOS como peças de mão e cabos diferentes dos especificados pelo fabricante, exceto as peças de mão e os cabos comercializados pelo fabricante do produto como peças sobresselentes para componentes internos, pode provocar um aumento das EMISSÕES ou uma diminuição da IMUNIDADE deste produto.
- Este produto não deve ser utilizado próximo ou sobre outro equipamento. Caso isto não possa ser evitado, o produto deve ser vigiado para comprovar o funcionamento normal na configuração selecionada.

⚠ CUIDADO

- O sistema pode funcionar incorretamente se for utilizado na presença de ondas de interferência eletromagnética. Não instale o sistema junto de dispositivos que emitam ondas magnéticas. Desligue o interruptor principal do sistema se houver um aparelho de oscilação ultrassônica ou bisturi elétrico próximo do local de utilização.
- Para maior segurança, instale a unidade de controlo num local onde o cabo de alimentação CA possa ser retirado facilmente. (É possível desligar a unidade de controlo da fonte de alimentação retirando o cabo de alimentação CA.)

<Modo Ultrasonic>



- A temperatura da superfície da ponta pode atingir os 65°C sem utilizar água de arrefecimento. Para evitar isto, certifique-se de que utiliza água de arrefecimento.

<Modo Powder>

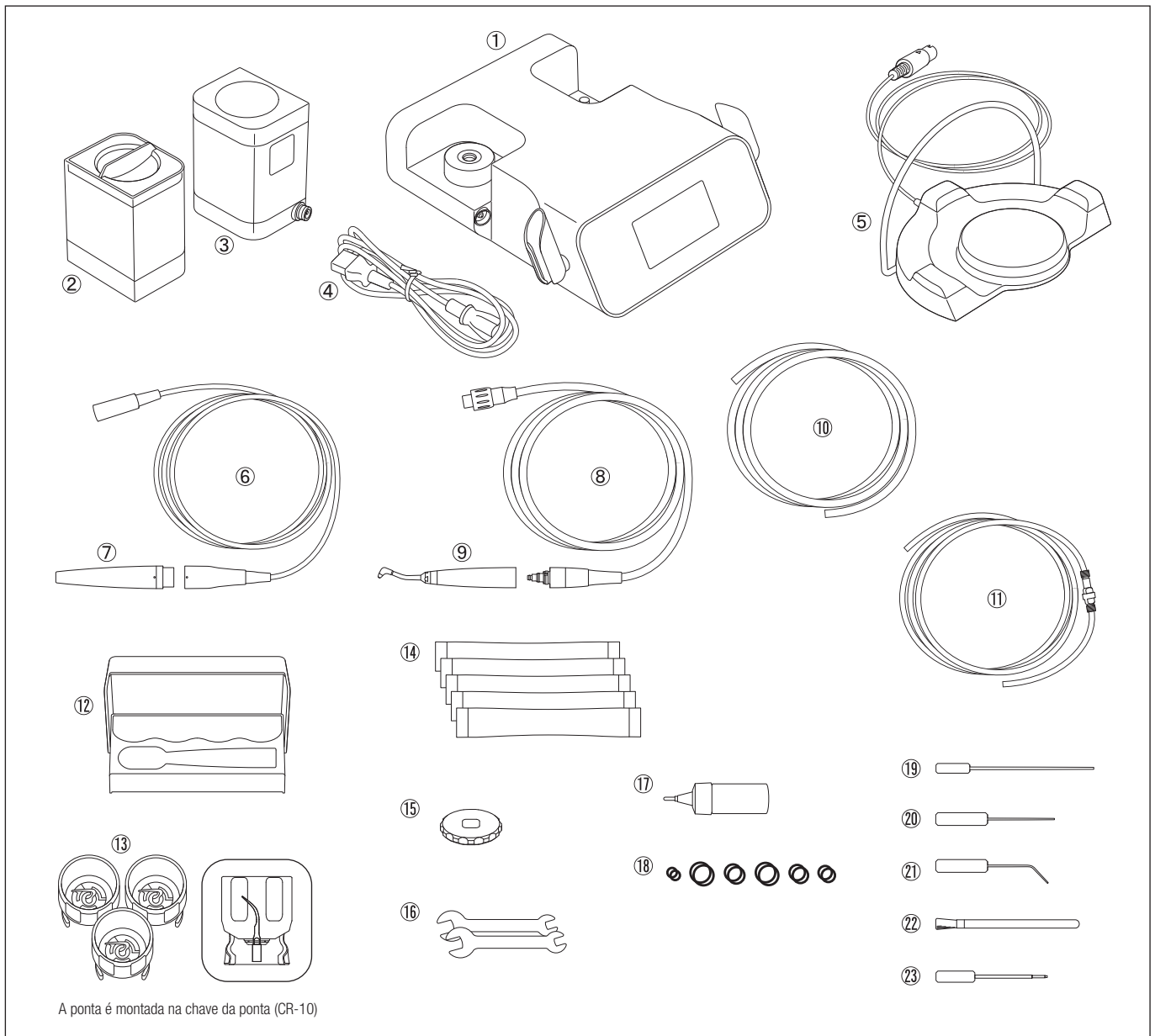


- Tenha cuidado para garantir que o pó de limpeza não entra nas áreas mucosas do paciente (olhos, nariz, etc.) que não a cavidade oral. Além disso, proteja o rosto com uma toalha ou óculos de proteção, etc, para evitar que o pó de limpeza entre em contacto com os olhos do paciente.
* Se o paciente usar lentes de contacto, peça-lhe para usar óculos de proteção ou retirar as lentes de contacto antes do tratamento.
- Antes de ligar a mangueira da peça de mão, câmara e peça de mão ou a câmara e unidade de controle, certifique-se de que retira toda a água das ligações da mangueira e da câmara com ar seco. Caso contrário, pode resultar na entrada de humidade na alimentação de ar, causando solidificação do pó de limpeza no interior do produto.
- Dependendo do ambiente de utilização, a temperatura da superfície do contra ângulo de pó pode atingir os 50°C.
- Se for colocado demasiado pó de limpeza na câmara, a quantidade certa de pó pode não ser pulverizada aquando do início da utilização.
- O pó espalha-se facilmente porque é muito fino. Encha lentamente a câmara e certifique-se de que evita que o pó se espalhe.
- O pó armazenado durante muito tempo numa embalagem aberta pode tornar-se húmido e obstruir. Utilize sempre pó novo e seco. Ao utilizar pó engarrafado (opção), aperte bem a tampa da garrafa após a utilização.
- Aplique vaselina, etc, nos lábios do paciente para evitar secura nos cantos da boca.

IMPORTANTE

- Este aparelho não requer formação específica.
- O autoclave repetido pode causar a descoloração da peça de mão ultrassônica devido ao calor. No entanto, isto deve-se a propriedades do produto e não é um problema em termos de qualidade.
- Para evitar que o pé obstrua os tubos, realize a limpeza e manutenção periódicas da mangueira de vácuo, ejetor de saliva e separador.

3 Lista de acessórios



| N.º | Nome da peça | Quantidade |
|-----|---|------------|
| 1 | Unidade de controle | 1 |
| 2 | Garrafa de irrigação | 1 |
| 3 | Câmara (Para utilização Prophy) | 1 |
| 4 | Cabo Elétrico c.a. | 1 |
| 5 | Pedal de controle | 1 |
| 6 | Cabo da Peça de Mão | 1 |
| 7 | Peça de mão ultrassónica | 1 |
| 8 | Mangueira da peça de mão (Para utilização Prophy) | 1 |
| 9 | Peça de mão de pó (Para utilização Prophy) | 1 |
| 10 | Mangueira de ar | 1 |
| 11 | Conjunto do Tubo de Água | 1 |
| 12 | Estojo de Esterilização | 1 |
| 13 | Ponta e chave da ponta (CR-10) | 3 |


* Não mostrado nas imagens acima

| N.º | Nome da peça | Quantidade |
|-----|---|------------|
| 14 | FLASH pearl | 5 |
| 15 | Chave de luneta | 1 |
| 16 | Chave de aperto (5x8) | 2 |
| 17 | Óleo de turbina | 1 |
| 18 | Anel vedante sobresselente | 6 tipos |
| 19 | Lima de limpeza (L) | 1 |
| 20 | Lima de limpeza (S) | 1 |
| 21 | Lima de limpeza | 1 |
| 22 | Escova de limpeza | 1 |
| 23 | Ferramenta de desbloqueio | 1 |
| 24 | Manual de instruções (Este manual)* | 1 |
| 25 | Guia de Potência da Ponta* | 1 |
| 26 | Cartão da Ponta* | 1 |
| 27 | Guia rápido de funcionamento do Varios Combi Pro* | 1 |


IMPORTANTE • FLASH pearl e o pó Perio-Mate (opção) utilizado no modo Powder são referidos como "Powder" neste Manual de instruções a menos que seja indicado o contrário.

- O kit Perio opcional necessita de ser comprado separadamente de modo a utilizar o modo Perio. Consulte "20 Lista de peças opcionais" para mais informações sobre o kit Perio.

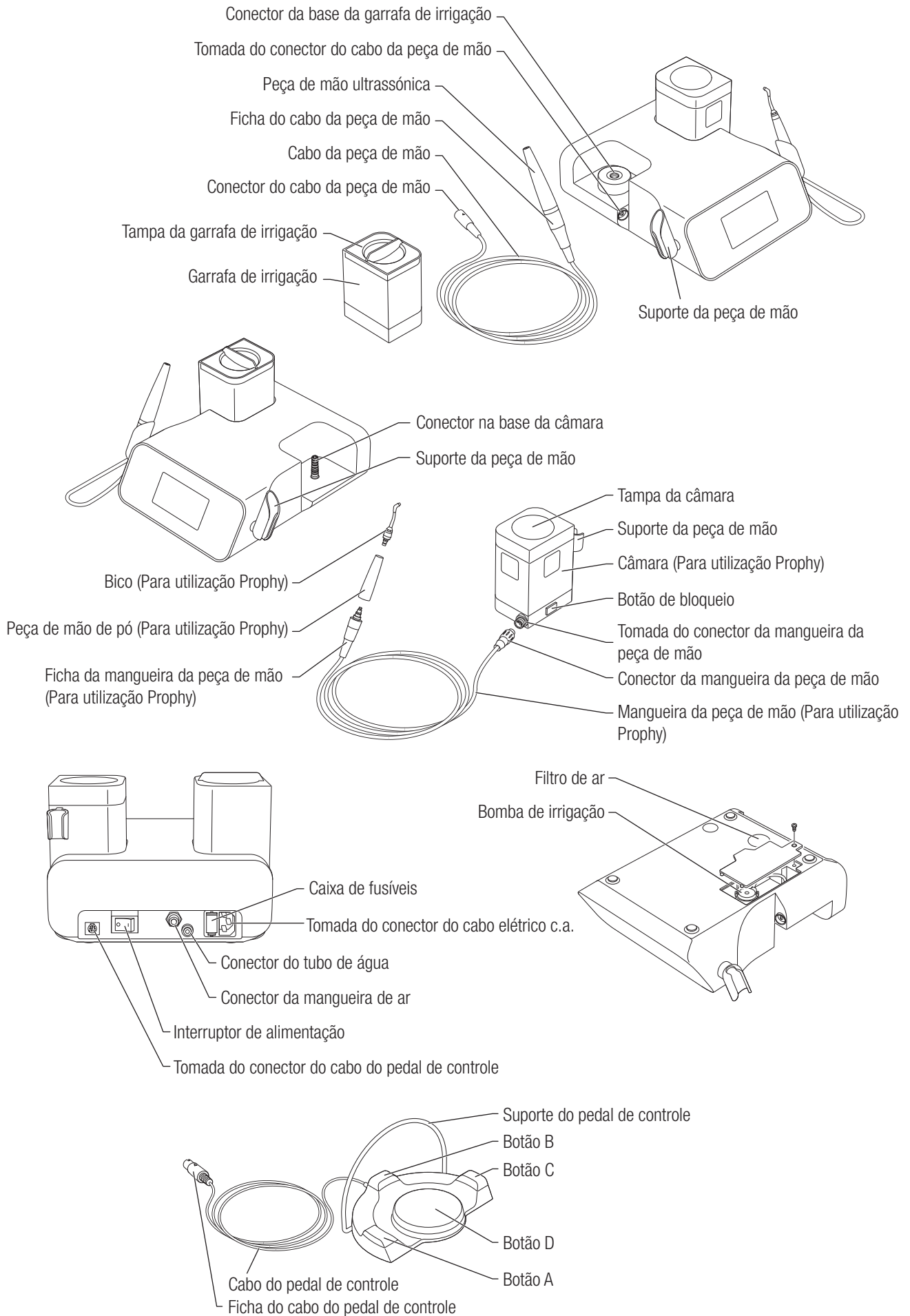4 Nomes dos componentes



4-1 Painel de controlo

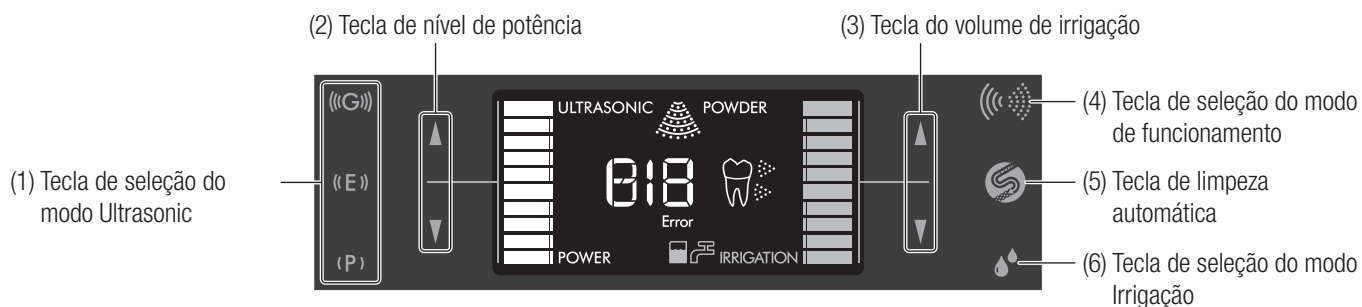

(1) Tecla de seleção do modo Ultrasonic

Comuta o modo Ultrasonic entre P (Perio), E (Endo), G (Geral). O nível de potência mais forte é G, seguido de E e P. O nível de potência, o nível de irrigação e o modo Irrigação podem ser definidos para cada modo.

(2) Tecla de nível de potência

Define o nível de potência utilizando as teclas ▲/▼.

(3) Tecla do volume de irrigação

Define o volume de irrigação utilizando as teclas ▲/▼.

(4) Tecla de seleção do modo de funcionamento

Comuta entre "Modo Ultrasonic" e "Modo Powder".

(5) Tecla de limpeza automática

Inicia a limpeza automática. Consulte "9-1-1-2 Limpeza automática" (peça de mão ultrassónica) ou "9-1-4-2 Limpeza automática" (peça de mão de pó) para mais informações.

Modo Ultrasonic:

Pulveriza água da torneira durante 15 segundos, de seguida, pulveriza água da garrafa de irrigação durante 30 segundos para limpar a peça de mão ultrassónica.

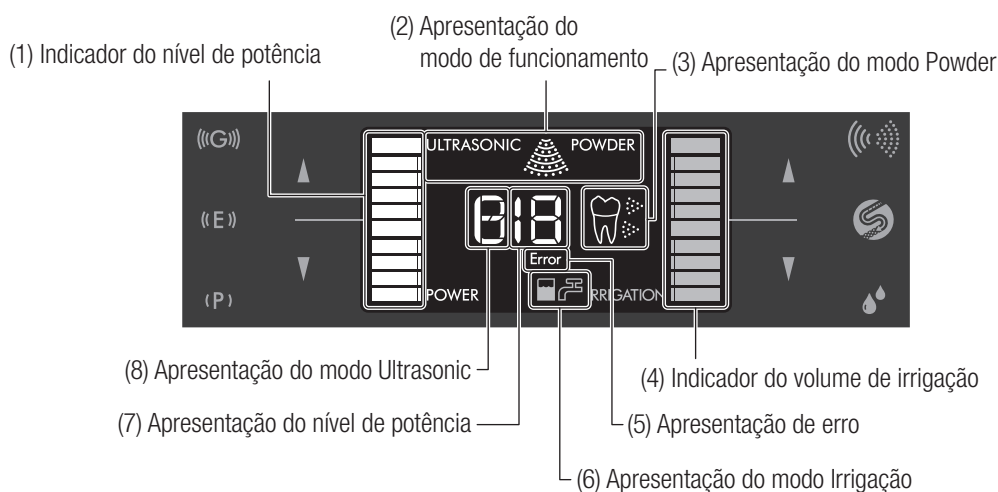
Modo Powder:

Pulveriza ar e água ao mesmo tempo durante 10 segundos e, de seguida, pulveriza apenas ar durante 35 segundos.

(6) Tecla de seleção do modo Irrigação

Comuta o modo Irrigação (garrafa ou água da torneira) para o modo Ultrasonic. É sempre utilizada água da torneira para o modo Powder.

4-2 Painel LCD



(1) Indicador do nível de potência

Apresenta a potência atual no indicador do gráfico de barras.

(2) Apresentação do modo de funcionamento

Apresenta o modo de funcionamento atual (Ultrasonic ou Powder).

(3) Apresentação do modo Powder

Apresenta a câmara definida (Prophy ou Perio) (apenas quando o modo Powder está em utilização).

(4) Indicador do volume de irrigação

Apresenta o nível de irrigação selecionado no indicador do gráfico de barras.

(5) Apresentação de erro

Apresentado quando ocorre um erro. Consulte "13 Código de erro" para mais informações.

(6) Apresentação do modo Irrigação

Apresenta o modo Irrigação (garrafa ou água da torneira) para o modo Ultrasonic. É sempre utilizada água da torneira para o modo Powder.

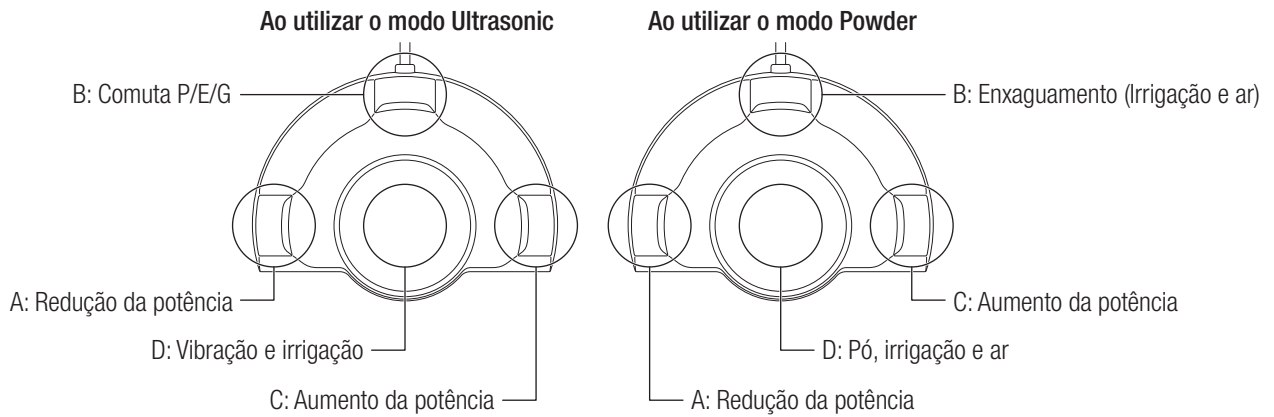
(7) Apresentação do nível de potência

Apresenta o nível de potência atual como um número.

(8) Apresentação do modo Ultrasonic

Apresenta o modo Ultrasonic atual (P/E/G).

4-3 Pedal de controle



Modo Ultrasonic

- A: Redução da potência
Reduz o nível de potência.
- B: Comuta P/E/G (Modo Ultrasonic)
Comuta o modo Ultrasonic pela ordem de P (Perio) → E (Endo) → G (Geral) → P (Perio)... sempre que o botão é premido.
- C: Aumento da potência
Aumenta o nível de potência.
- D: Vibração e irrigação
Vibra e irriga enquanto o botão é premido.

Modo Powder

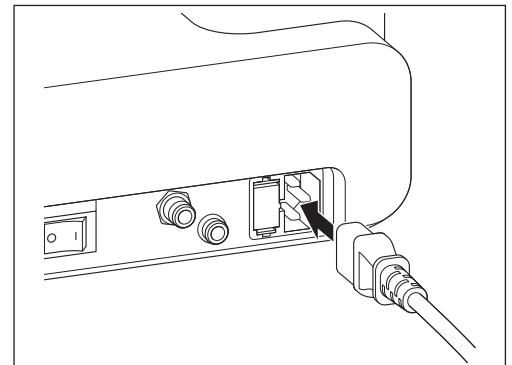
- A: Redução da potência
Reduz o nível de potência.
- B: Enxaguamento (Irrigação e ar)
Pulveriza água e ar enquanto o botão é premido.
- C: Aumento da potência
Aumenta o nível de potência.
- D: Pó, irrigação e ar
Pulveriza pó, água e ar enquanto o botão é premido.

5 Instalação

5-1 Ligar o cabo elétrico c.a.


- 1) Coloque o interruptor de alimentação em OFF antes de ligar o cabo elétrico c.a.
- 2) Introduza o cabo elétrico c.a. de modo a encaixar corretamente na tomada do conector do cabo elétrico c.a. na parte traseira da unidade de controle.
- 3) Ligue o cabo elétrico c.a. a uma tomada de parede especificada para utilização médica.

- ⚠ CUIDADO**
- Não puxe o cabo elétrico c.a.
 - Certifique-se de que o aparelho parou por completo antes de retirar ou introduzir o cabo elétrico c.a.





5-2 Ligar a mangueira de ar

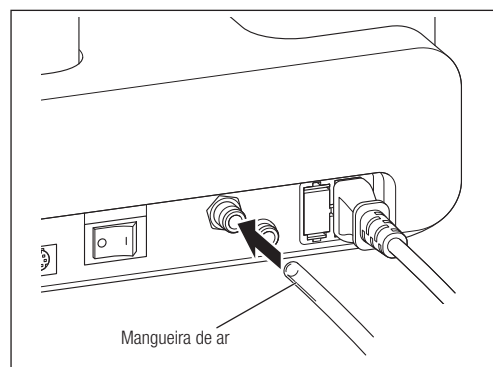1) Introduza uma extremidade da mangueira de ar no conector da mangueira de ar.



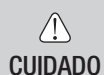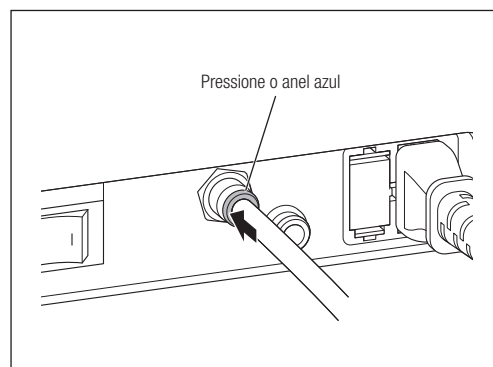
- 2) Puxe suavemente a mangueira de ar e certifique-se de que a mangueira não sai.
3) Para retirar a mangueira de ar, puxe a mangueira de ar enquanto pressiona o anel azul na direção da unidade de controle.




- Utilize ar limpo e seco. O pó pode obstruir se o ar tiver humidade ou óleo.

5-3 Ligar o pedal de controle

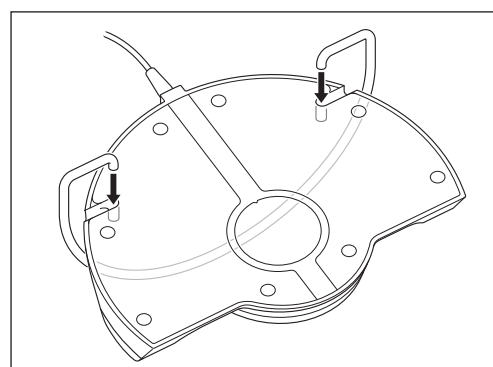1) Introduza o suporte do pedal de controle de modo a encaixar corretamente nos orifícios na parte traseira do pedal de controle.



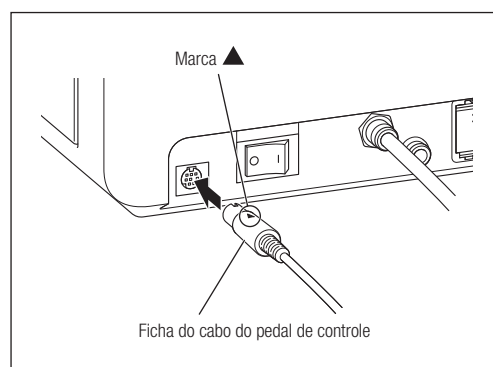2) Introduza a ficha do pedal de controle na tomada do conector do cabo do pedal de controle com a marca ▲ virada para cima.




5-4 Ligar o cabo da peça de mão (Peça de mão ultrassônica)

Ligue o conector do cabo da peça de mão à tomada do conector do cabo da peça de mão com a marca ▲ virada para cima. Introduza ao máximo.




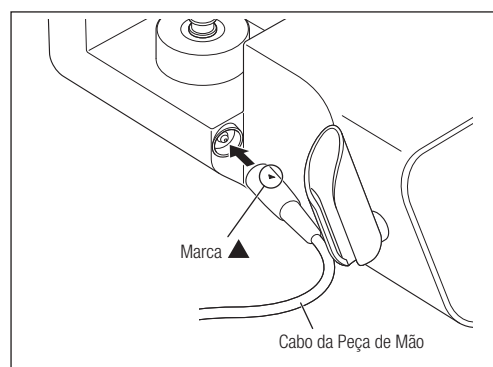- Certifique-se de que a ficha do cabo da peça de mão está limpa e seca antes da ligação.



5-5 Ligar a mangueira da peça de mão (Peça de mão de pó)

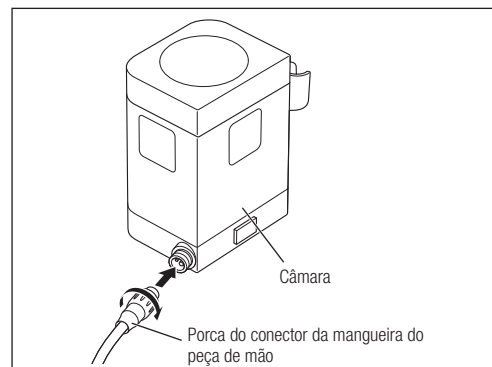- 1) Utilize ar para secar a tomada do conector da mangueira da peça de mão e conector da mangueira da peça de mão.
- 2) Introduza o conector da mangueira da peça de mão de modo a encaixar corretamente no orifício na tomada do conector da mangueira da peça de mão e aperte a porca do conector.




5-6 Ligar e desligar a peça de mão

⚠ CUIDADO • Certifique-se de que utiliza apenas a peça de mão fornecido.

ULTRASONIC

5-6-1 Peça de mão ultrassônica

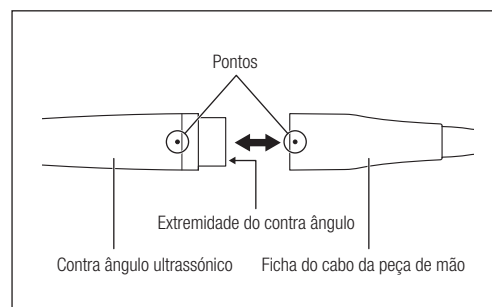- (1) Ativação
Alinhe os pontos na peça de mão ultrassônica e na ficha do cabo da peça de mão. Introduza a peça de mão a direito no conector.
- (2) Desativação
Segure a peça de mão ultrassônica e a ficha do cabo da peça de mão e retire a peça de mão.




⚠ ATENÇÃO • Para evitar um choque elétrico, não toque nos contactos elétricos posteriores da peça de mão e no cabo da peça de mão.

⚠ CUIDADO • Não torça a peça de mão ou o cabo da peça de mão ao remover a peça de mão. Caso contrário, pode danificar os contactos elétricos do conector, resultando em avarias.
• Antes de ligar o cabo da peça de mão à peça de mão, vire-se para o lado do conector da peça de mão para que a luz ilumine e verifique a extremidade da peça de mão. Se a luz transmitida pela Face da Extremidade de Fibra Ótica na extremidade estiver uniformemente clara, está a funcionar normalmente. Se estiver total ou parcialmente escura, a Face da extremidade pode estar fissurada ou partida.


5-6-2 Peça de mão de pó

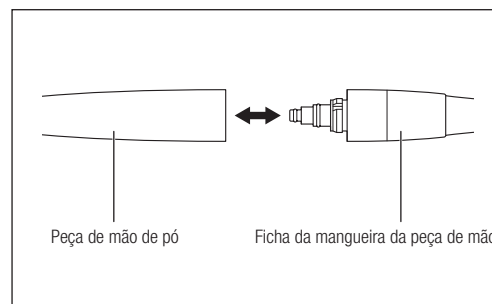- (1) Ativação
 - 1) Utilize ar para secar a ligação entre a peça de mão e a ficha da mangueira da peça de mão.
 - 2) Introduza a peça de mão de pó a direito na ficha da mangueira da peça de mão.
- (2) Desativação
Segure a peça de mão de pó e a ficha da mangueira da peça de mão e retire a peça de mão.




5-7 Ligar o tubo de água

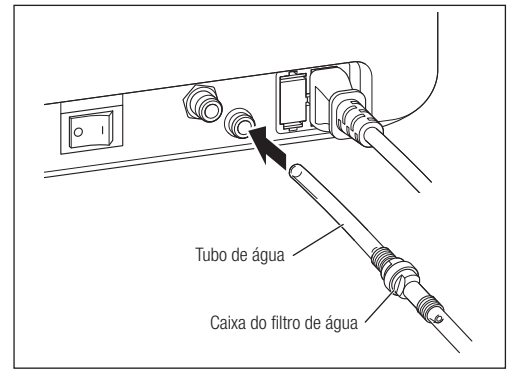- 1) Introduza uma extremidade do tubo de água (a extremidade com o filtro de água) no conector do tubo de água.
- 2) Ligue a outra extremidade do tubo de água à saída de água na unidade dentária.
- 3) Puxe suavemente o tubo de água e certifique-se de que o tubo não sai.



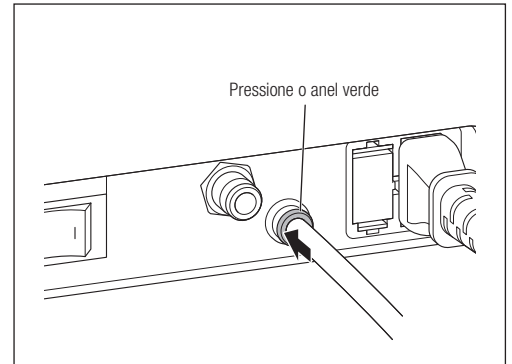- 4) Para retirar o tubo de água do conector do tubo de água, puxe o tubo de água enquanto pressiona o anel verde na direção da unidade de controle.



ATENÇÃO

- Utilize um amaciador de água, etc. para baixar a dureza da água, uma vez que utilizar água com um elevado grau de dureza pode causar depósitos minerais ou calcários no circuito de água, o que pode resultar em problemas como níveis insuficientes de água, problemas de funcionamento ou avarias. Ao fazer isto, utilize um tubo de água com um filtro de água para evitar avarias no dispositivo devido às substâncias estranhas na água da torneira e consulte "10-3 Substituir o filtro de água" para substituir o filtro de água, conforme necessário.

CUIDADO

- Se a saída de água na unidade dentária não tiver sido utilizada durante muito tempo, a água pode conter ferrugem, etc. quando é utilizada pela primeira vez. Certifique-se de que a água está limpa antes de ligar o tubo de água.
- Introduza o tubo de água no conector do tubo de água ao ligá-lo à unidade de controle. Pode sair água se o tubo não for introduzido corretamente.

6 Verificar antes do tratamento

Antes da utilização, utilize o produto sem um paciente presente para confirmar que não existe vibração anormal, ruído, calor, etc. Verifique também os pontos seguintes.

- Peça de mão ultrassônica: Luzes LED e caudais de água.
- Peça de mão de pó: Pó, ar e água são fornecidos corretamente.

Se reparar em algo anormal ao verificar ou utilizar este produto, pare imediatamente a utilização e contacte um distribuidor autorizado NSK. Ao efetuar a limpeza automática, a água no interior da mangueira/do cabo da peça de mão é ejetada, o que pode causar a paragem do fluxo da água da próxima vez que utilizar a unidade de controlo. Se isso acontecer, defina o volume de irrigação para 10 e utilize a peça de mão durante cerca de 30 segundos após o início da saída da água. Consulte "14 Resolução de problemas" caso a água não saia ao fim de mais de 20 segundos, mesmo que tenha definido o volume de irrigação para 10.

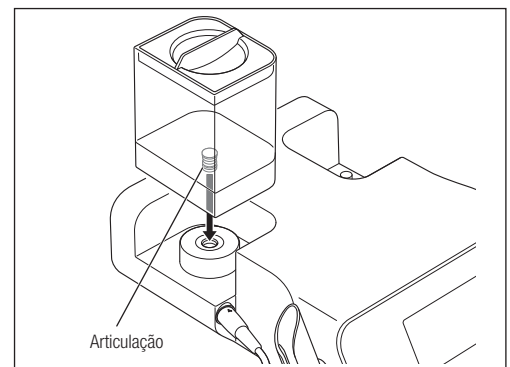
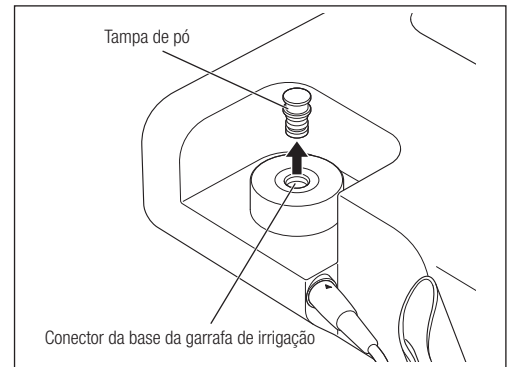
7 Utilizar o modo Ultrasonic

7-1 Instalação do sistema de água

Utilizar a garrafa

- 1) Retire a tampa do pó do conector da base da garrafa de irrigação.
- 2) Retire a tampa da garrafa de irrigação e encha a garrafa com água ou solução desinfetante até ao nível pretendido.

- 3) Feche a tampa da garrafa de irrigação e introduza a junta da garrafa a direito no conector da base da garrafa de irrigação.
Puxe a garrafa de irrigação para cima para a remover.




- Utilize apenas a garrafa da série Varios Combi Pro dedicada.
- Introduza a garrafa de irrigação a direito. Caso contrário, pode danificar o anel vedante.
- Limpe a garrafa de irrigação e a tampa da garrafa de irrigação com água limpa após a utilização e antes do armazenamento.
- Coloque a tampa de pó no conector da base da garrafa de irrigação quando a garrafa de irrigação não está instalada.
- Certifique-se de que a temperatura do líquido é inferior a 35°C.
- Não coloque ácidos fortes (como água muito ácida, água super ácida ou água com eletrólise) ou água ácida hipoclorosa na garrafa de irrigação uma vez que pode causar obstrução por água ou corrosão do metal.

Utilizar água da torneira


- 1) Certifique-se de que o tubo de água está bem ligado ao conector do tubo de água da unidade de controle. Consulte “5-7 Ligar o tubo de água” para mais informações.
- 2) Abra a válvula de água da unidade dentária e defina a pressão de água entre 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm²). Se a pressão de água exceder 0,3 MPa, utilize uma válvula de redução da pressão de água (opção) para ajustar a pressão de água para o intervalo especificado. Consulte a “20 Lista de peças opcionais” para mais informações sobre a válvula de redução da pressão de água.

7-2 Instalar a ponta

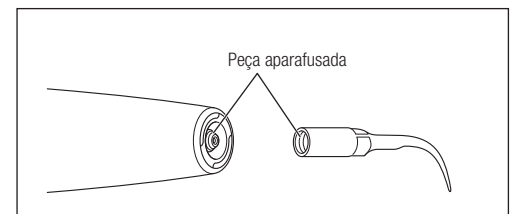
- 1) Certifique-se de que as partes de rosca da peça de mão e da ponta estão limpas.



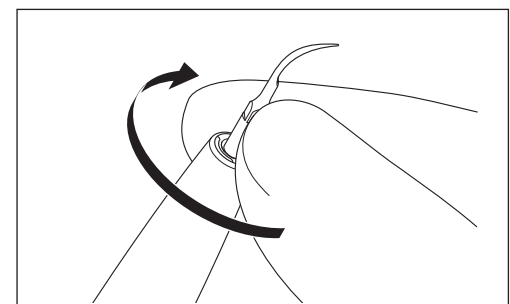- 2) Empurre a ponta para a extremidade distal da peça de mão e aparafuse a ponta até estar ligeiramente apertada.




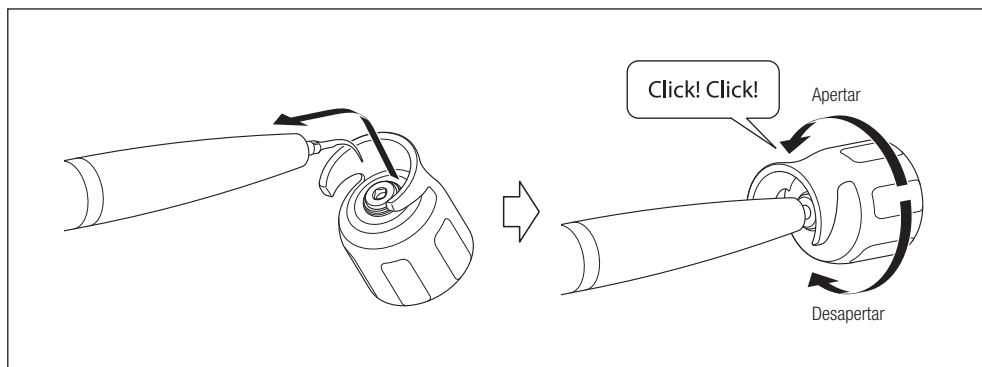3) Alinhe a forma quadrada da ponta com o orifício da chave da ponta (CR-10), de seguida, introduza a ponta no orifício. Rode a chave até ouvir um clique e não rodar mais. Durante este procedimento, segure a peça de mão de modo a que o cabo da peça de mão não fique torcido. Ao remover a ponta, rode a chave no sentido da seta "Desapertar".



ATENÇÃO

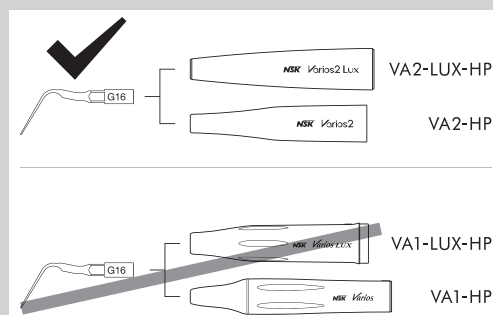- Não permita o contacto com as gengivas, mucosa e/ou pele. Caso contrário, pode resultar em ferimentos ou queimaduras.
- UTILIZE APENAS pontas genuínas da NSK ao utilizar este produto. Os problemas como danos na peça de mão, falhas e acidentes resultantes da utilização de pontas que não são da NSK não são abrangidos pela garantia. Os tipos seguintes de problemas podem ocorrer ao utilizar pontas que não são da NSK:
 - Vibração inadequada causada por parafusos incompatíveis.
 - Ingestão acidental de pontas quebradas por parte do paciente.
 - Danos ou desgaste prematuro do parafuso da peça de mão
- A ponta G16 fornecida só pode ser instalada na peça de mão Varios2 (VA2-LUX-HP/VA2-HP). Caso contrário, pode causar fratura da ponta ou riscos na superfície da denteção, prótese, etc. devido a um aumento na amplitude de vibração.



CUIDADO

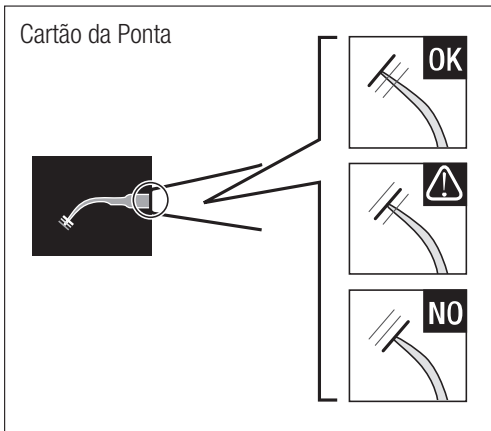
- Tenha cuidado para não torcer o cabo da peça de mão ao apertar a ponta.
- Tenha cuidado ao instalar ou remover uma ponta mais longa do que a chave da ponta (CR-10), uma vez que existe um risco de ferimentos a partir da extremidade da ponta.
- Não utilize uma ponta que tenha sido danificada, dobrada ou corroída uma vez que pode quebrar durante a utilização.
- Para evitar danos na rosca da ponta ou desencaixe da ponta, certifique-se sempre de que a ponta está introduzida no ângulo certo e bem apertada.
- Se forem encontrados resíduos na rosca da ponta, limpe imediatamente a ponta. Caso contrário, pode resultar em ruído ou vibração insuficiente.
- Não tente afiar ou dobrar a ponta uma vez que pode resultar na quebra da ponta durante a utilização, ruído ou vibração insuficiente.
- A ponta é um item de desgaste. As pontas gastas têm um risco maior de ruído, quebra ou vibração insuficiente. Substitua a ponta se ocorrer ruído ou vibração insuficiente.
- Utilize a chave da ponta (CR-10) fornecida para instalar a ponta. Rode a chave até ouvir um estalido e não rodar mais. Se a ponta não estiver suficientemente apertada, pode ocorrer vibração insuficiente ou ruído.
- Ao instalar uma ponta, use sempre luvas cirúrgicas estéreis e utilize uma ponta, peça de mão e chave da ponta (CR-10) esterilizados.
- Certifique-se de que a definição de potência não excede o nível de potência recomendado. Caso contrário, pode resultar em ruído, quebra da ponta ou ferimentos no paciente.
- Não utilize pontas que não se destinam a remover coroas metálicas ou postiças para este fim. Caso contrário, pode resultar na quebra da ponta e queda na boca do paciente.
- Retire a ponta antes de instalar ou remover a peça de mão ou o cabo da peça de mão para evitar ferimentos com a ponta.
- Se detetar vibração insuficiente durante a utilização, retire a peça de mão da boca do paciente e pressione novamente o pedal de controle. Se isto não melhorar a condição, a ponta pode desapertar durante a utilização. Certifique-se de que a ponta está bem instalada.
- Se a ponta ficar solta, fizer ruído ou não vibrar suficientemente apesar de ter sido apertada até ouvir um estalido, a chave da ponta (CR-10) pode estar gasta. A chave da ponta (CR-10) é um item de desgaste e deve ser substituída uma vez por ano.

■ Utilizar o cartão da ponta


CUIDADO

- As pontas são itens de desgaste. Utilize o cartão da ponta fornecido para verificar o estado da ponta e substitua a ponta, se necessário.

Coloque a haste da ponta no recorte do cartão da ponta. Meça o comprimento da ponta e verifique o momento da substituição. Para garantir uma utilização segura e eficiente, é aconselhável substituir as pontas quando atingirem a linha amarela (1 mm de desgaste).




Verde: Sem desgaste - Ponta OK
Não é necessário substituir a ponta.

Amarelo: Desgaste de 1 mm - A ponta apresenta algum desgaste
Recomenda-se a substituição da ponta.

Vermelho: Desgaste de 2 mm - A ponta está muito gasta
A ponta tem de ser substituída.



CUIDADO

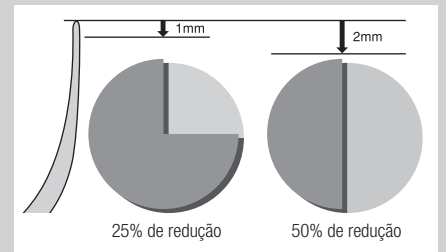- As pontas são consumíveis. A eficiência da destarterização dentária diminui aproximadamente 25% quando a parte superior da ponta tem um desgaste de 1 mm e aproximadamente 50% quando atinge 2 mm. Além disso, a condição de vibração muda consoante o desgaste, o que pode danificar a superfície do dente do paciente. Verifique periodicamente a condição de desgaste da ponta utilizando o cartão da ponta e substitua a ponta por uma nova no momento certo.



7-3 Definição do nível de potência

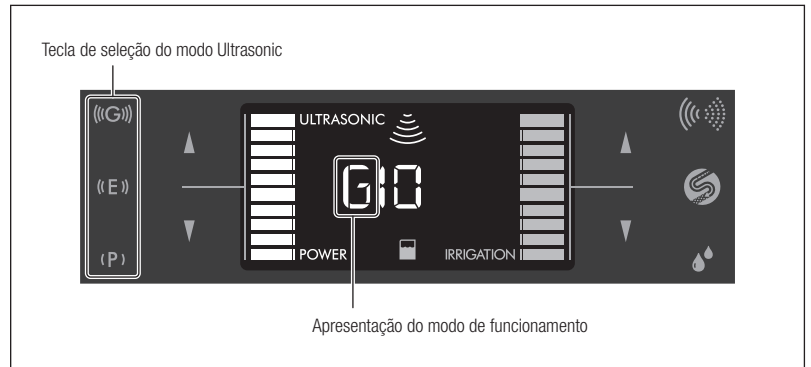1) Toque na tecla de seleção do modo Ultrasonic para selecionar o modo. O modo selecionado é apresentado no painel LCD como P/E/G.



2) Toque na tecla do nível de potência (▲/▼) para definir o nível de potência. A apresentação do nível de potência e o indicador do nível de potência aumenta ou reduz de acordo com o nível selecionado.



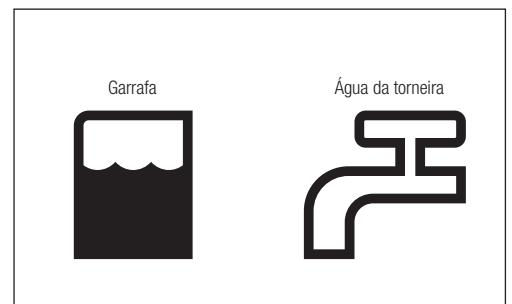
⚠ CUIDADO

- Certifique-se de que a definição de potência não excede o nível de potência recomendado. (Consulte o “Guia de potência da ponta” ou “Etiqueta da embalagem da ponta” para a potência máxima de cada ponta.)

- IMPORTANTE**
- Toque continuamente na tecla do nível de potência para aumentar ou diminuir continuamente o nível de potência. Ouve-se um alarme quando é atingido o nível máximo ou mínimo.
 - Para irrigar sem vibração da ponta, defina o nível de potência para “0 (zero)” e o volume de irrigação para 1 bar ou mais.

7-4 Definição da irrigação

Toque na tecla de seleção do modo Irrigação para selecionar o modo Irrigação (garrafa ou água da torneira). O modo selecionado é apresentado no painel LCD como um ícone.



7-5 Funcionamento

1) Pressione o botão pretendido no pedal de controle. Ouve-se um sinal sonoro, a ponta começa a vibrar e o LED na peça de mão acende-se.
2) Ajuste o volume de irrigação tocando nas teclas do volume de irrigação (▲/▼) enquanto verifica a irrigação da ponta.

⚠ CUIDADO

- Por razões de segurança, este produto não funciona quando o interruptor de alimentação é ativado enquanto o pedal de controle é pressionado. Neste caso, ouve-se um alarme e a apresentação do modo Ultrasonic (P/E/G) e "ULTRASONIC" pisca alternadamente. Liberte o pedal de controle e pressione-o novamente.
- Utilize sempre irrigação. Se não houver irrigação suficiente, a peça de mão vai sobreaquecer e pode causar ferimentos na superfície do dente do paciente.
- Certifique-se de que é pulverizada água limpa corretamente antes da utilização.
- A água pode não ser pulverizada suavemente se o volume de irrigação estiver definido para um nível baixo. Neste caso, aumente temporariamente o volume de irrigação e pressione o pedal de controle. Certifique-se de que a água é pulverizada suavemente a partir da ponta e ajuste novamente o volume de irrigação.
- Não rode forçosamente o suporte da peça de mão uma vez que isso pode danificar o suporte.

- IMPORTANTE**
- O LED da peça de mão permanece aceso durante cerca de 5 segundos após libertar o pedal de controle (Função de brilho residual).
 - As definições do modo Ultrasonic (P/E/G), nível de potência, modo Irrigação e do volume de irrigação são armazenadas após a alimentação ser desligada e as mesmas definições são aplicadas quando a alimentação é novamente ligada (Função de última memória).
 - Se o volume de irrigação for demasiado baixo com o volume de irrigação definido para 10 ou se o volume de irrigação for demasiado alto com o volume de irrigação definido para 1 enquanto o modo Irrigação está definido para água da torneira, ajuste o nível de irrigação básico. Consulte "11-3 Definição do nível de água básico" para mais informações.
 - Pode ser emitido um sinal sonoro, mas isto não representa uma avaria.

■ Durante o funcionamento da peça de mão:

Pode: Ajustar o nível de potência e o volume de irrigação

Não pode: Alterar as definições do modo Ultrasonic ou modo Irrigação e efetuar a limpeza automática

7-6 Após tratamento

Efetue a manutenção após utilização em cada paciente. Consulte "9 Manutenção Após a Utilização" para mais informações.



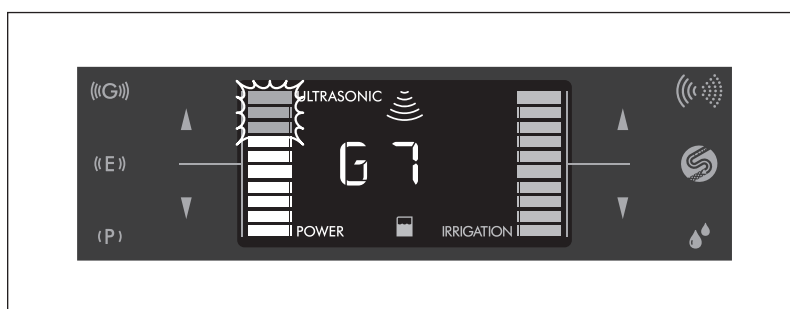
CAUIDADO

- Este produto pode funcionar incorretamente se a manutenção correta não for efetuada.

7-7 Circuito de proteção

Este produto pode sobreaquecer internamente se a unidade de controle for utilizada à potência 8 ou superior no modo G durante um período de tempo prolongado. Neste caso, o circuito de proteção reduz automaticamente a potência (Potência 7).

O indicador do gráfico de barras pisca entre 8 e 10. O indicador para de piscar quando o circuito de libertação é libertado. No entanto, neste caso, o nível de potência não aumenta automaticamente. Aumente o nível de potência manualmente, se necessário.



- IMPORTANTE**
- O nível de potência não pode ser aumentado para 8 ou mais quando o circuito de proteção tiver sido utilizado (enquanto o indicador do gráfico de barras está a piscar).
 - O indicador do gráfico de barras para de piscar quando o nível de potência é reduzido abaixo de 7. Volta a piscar se o nível de potência for aumentado para 7 enquanto a função do circuito de proteção estiver ativa.



8 Utilizar o modo Powder

O kit Perio opcional tem de ser comprado de modo a utilizar o modo Perio. Consulte "20 Lista de peças opcionais" para mais informações sobre o kit Perio.

8-1 Instalação do sistema de água

- 1) Certifique-se de que o tubo de água está bem ligado ao conector do tubo de água da unidade de controle. Consulte "5-7 Ligar o tubo de água" para mais informações.
- 2) Abra a válvula de água da unidade dentária e defina a pressão de água entre 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm²). Se a pressão de água exceder 0,3 MPa, utilize uma válvula de redução da pressão de água (opção) para ajustar a pressão de água para o intervalo especificado. Consulte a "20 Lista de peças opcionais" para mais informações sobre a válvula de redução da pressão de água.




CAUIDADO

- Utilize apenas água potável para irrigação.



8-2 Preparação do pó

- 1) Selecione a câmara e o pó a utilizar com este modo. Encha a câmara com pó até à linha "MAX" (aproximadamente 80 g de FLASH pearl ou aproximadamente 50 g de pó Perio-Mate).

| Modo | Câmara | Pó |
|-------------|------------------------|---------------|
| Modo Prophy | Para utilização Prophy | FLASH pearl |
| Modo Perio | Para utilização Perio | Pó Perio-Mate |

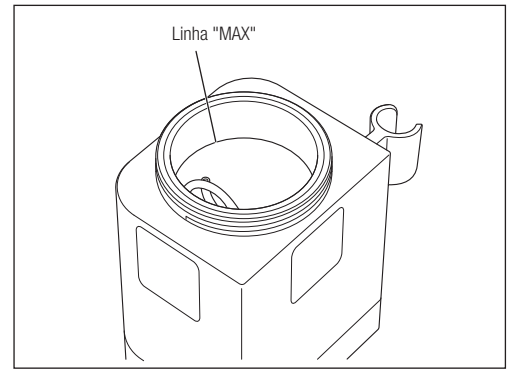

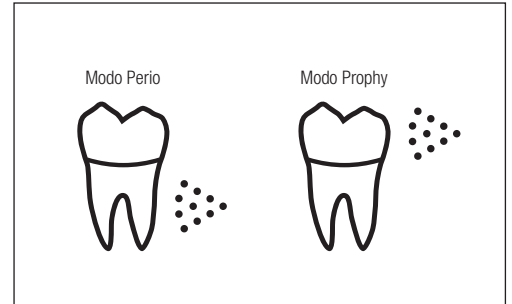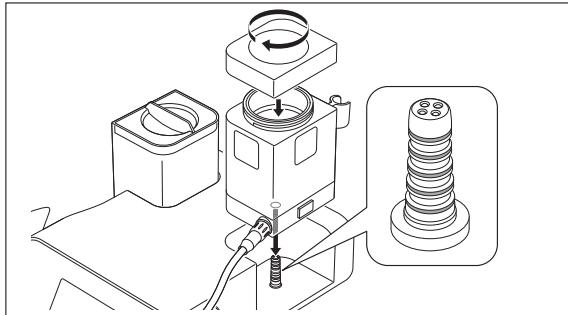- 2) Feche a tampa da câmara firmemente até que ela se encaixa completamente na câmara, e insira a câmara diretamente para a unidade de controle. O tipo de câmara introduzido é apresentado no painel LCD como um dos ícones seguintes.



ATENÇÃO

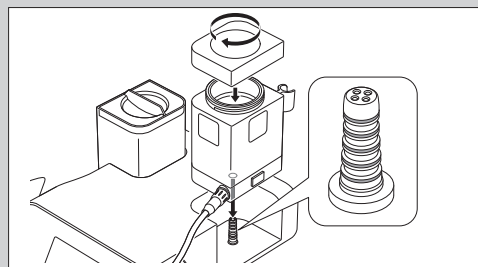
- Utilize apenas o pó designado. Utilizar outros pós pode resultar na falha do produto, danos no dente ou causar enfisemas. Além disso, pode também causar uma redução no desempenho do produto. Não somos responsáveis por falhas causadas pela utilização de outros pós.

CUIDADO

- Aperte firmemente a tampa da câmara para evitar que a tampa da câmara se solte e provoque lesões.



- Antes de introduzir a câmara na unidade de controle, certifique-se de que os anéis vedantes do conector na base da câmara não estão danificados ou gastos. Os danos/desgaste podem resultar em mau funcionamento ou falhas.



- Introduza a câmara a direito na unidade de controle. Introduzir a câmara inclinada pode danificar os anéis vedantes, resultando em falhas.
- Se for colocado demasiado pó de limpeza na câmara, a quantidade certa de pó pode não ser pulverizada imediatamente após o início da utilização.
- Não utilize pó que foi armazenado numa embalagem aberta ou pó restante. Utilizar esse pó pode causar uma obstrução no bico. Não misture pó restante com pó novo.
- Antes de introduzir a câmara, inspecione o conector na base da câmara e verifique se tem água, etc. limpe-o se estiver húmido. Caso contrário, pode causar obstrução do pó.
- Não utilize pó descolorado.
- Feche bem a tampa da câmara de pó. Caso contrário, vai atrair humidade que pode causar obstruções.
- Se o pó colar à câmara e/ou tampa da câmara, limpe-o imediatamente ou a tampa fica difícil de fechar.
- Não inverta a câmara com pó no seu interior. Caso contrário, vai resultar em obstrução do pó.
- Por motivos de segurança, este produto não funciona se o pedal de controle for pressionado quando a câmara é instalada incorretamente. Ouve-se um alarme e o ícone de dente e "POWDER" piscam alternadamente. Instale corretamente a câmara.
- O pó Perio-Mate (opção) espalha-se facilmente porque é composto por partículas muito finas. Encha lentamente a câmara para evitar que o pó se espalhe e tenha cuidado para não engolir o pó ou permitir que entre em contacto com os olhos.
- FLASH pearl é praticamente insolúvel em água. Para evitar a obstrução dos tubos utilizando FLASH pearl, uma limpeza periódica e a manutenção da mangueira de vácuo, ejetor de saliva e separador são necessárias.

8-3 Instalar/remover a ponta do bico

8-3-1 Instalar a ponta do bico

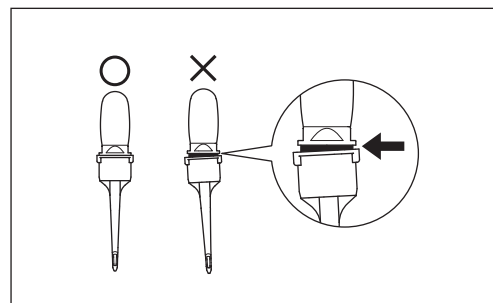
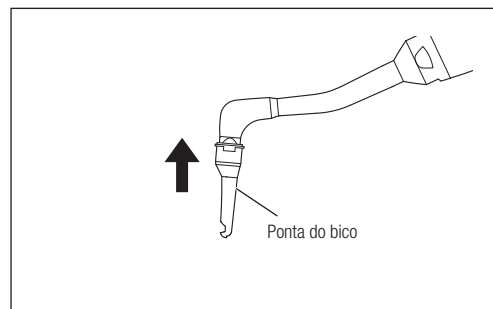
Instale bem a ponta do bico (opção) no bico da peça de mão de pó (para utilização Perio).

ATENÇÃO

- Não utilize uma ponta de bico deformada ou danificada. Pode soltar-se durante a utilização.

CUIDADO

- Certifique-se de que instala bem a ponta do bico, conforme ilustrado. Se a ponta for instalada incorretamente, vai soltar-se e pode ser acidentalmente ingerida pelo paciente.
- Ao instalar uma ponta de bico na peça de mão de pó, use sempre luvas cirúrgicas estéreis e certifique-se de que a peça de mão de pó está esterilizado.




8-3-2 Remover a ponta do bico

Utilize o extrator da ponta Perio-Mate (opção) para remover a ponta do bico e elimine a ponta do bico quando removida.

ATENÇÃO

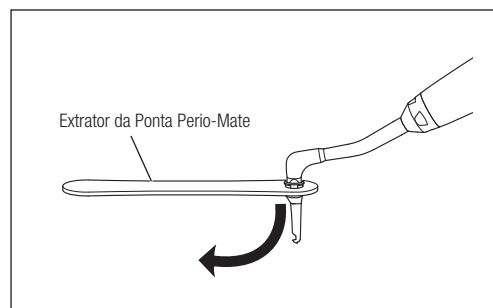
- A ponta do bico só pode ser utilizada uma vez. Não reutilize ou esterilize a ponta do bico uma vez que pode estar danificada ou contaminada. Se a ponta do bico for reutilizada, pode não funcionar corretamente devido a deformação durante a remoção ou pode soltar-se durante a utilização resultando na ingestão acidental por parte do paciente. O mesmo aplica-se a uma ponta que tenha sido removida acidentalmente.



8-4 Definição do nível de potência

Toque nas teclas do nível de potência (▲/▼) para definir o nível de potência. A apresentação do nível de potência e o indicador do nível de potência aumenta ou reduz de acordo com o nível de potência selecionado.

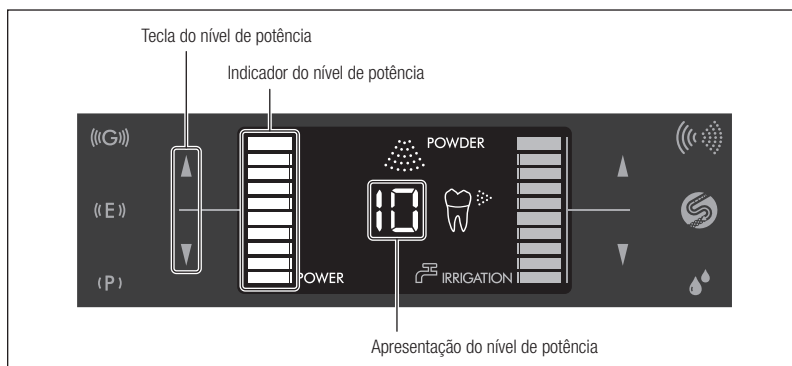IMPORTANTE • Se especificar esta definição sem instalar a câmara, é definido o nível de potência utilizado no modo Prophy.



8-5 Definição da irrigação

- 1) Toque nas teclas do volume de irrigação (▲/▼) para ajustar o volume de irrigação.
- 2) Pressione o pedal de controle para pulverizar pó numa cuspideira, etc, para confirmar que o pó, ar e água são pulverizados corretamente.
- 3) Ajuste o volume de irrigação enquanto verifica a irrigação do bico.

IMPORTANTE • Se o volume de irrigação for demasiado baixo com o volume de irrigação definido para 10 ou se o volume de irrigação for demasiado alto com o volume de irrigação definido para 1, ajuste o nível de irrigação básico. Consulte "11-3 Definição do nível de água básico" para mais informações.

- Se efetuar o ajuste sem instalar a câmara, é definido o volume de irrigação utilizado no modo Prophy.

8-6 Funcionamento

O pó, a água e o ar são fornecidos quando o botão D do pedal de controle é pressionado. A água e o ar são fornecidos quando o botão B do pedal de controle é pressionado. Cumpra as instruções de funcionamento explicadas em "8-6-1 Utilizar o modo Prophy" e "8-6-2 Utilizar o modo Perio".

ATENÇÃO

- Nunca pulverize pó na direção de um corpo incluindo o do operador e do assistente, apenas para a superfície do dente.
- Pare imediatamente a utilização se a mangueira inchar ou se o ar ou pó sair pelas ligações entre a câmara e a mangueira durante a utilização.
- Pulverize água enquanto utiliza este produto.
- Certifique-se de que utiliza um tubo de vácuo (e um tubo de descarga de saliva, se necessário) para evitar que o paciente ingira uma grande quantidade de pó. Evite a utilização contínua durante longos períodos e permita que o paciente lave a boca sempre que necessário.

CUIDADO

- Por razões de segurança, este produto não se liga quando coloca o interruptor de alimentação para ON enquanto o pedal de controle é pressionado. Ouve-se um alarme e o ícone de dente e "POWDER" piscam alternadamente. Liberte o pedal de controle, de seguida, pressione-o novamente.
- Antes do tratamento, ajuste o nível de potência e o nível de irrigação antes de utilizar no paciente.
- Reduza o nível de potência ao efetuar tratamentos em redor da gengiva marginal.
- Não pulverize verticalmente para a superfície do dente.
- Mantenha a distância entre a ponta do bico da peça de mão e a superfície do dente, conforme explicado em "8-6-1 Utilizar o modo Prophy" e "8-6-2 Utilizar o modo Perio".
- Não rode forçosamente o suporte da peça de mão uma vez que pode danificar o suporte.

IMPORTANTE • Pode ser emitido um sinal sonoro, mas isto não representa uma avaria.



8-6-1 Utilizar o modo Prophy

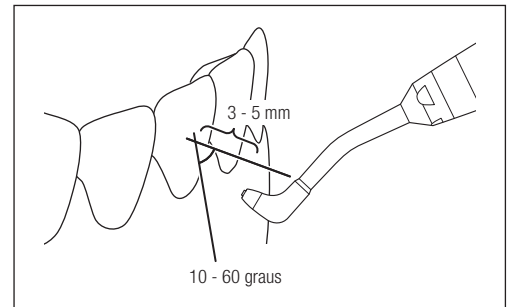
Mantenha o bico a uma distância de 3 - 5 mm da superfície do dente e a um ângulo de 10 - 60 graus.

ATENÇÃO

- Nunca aponte para tecido mole, gengivas ou para a área subgengival.

CUIDADO

- Pulverize da raiz para a borda incisal do dente.




8-6-2 Utilizar o modo Perio

■ Utilizar com a ponta do bico


Introduza a ponta do bico mais de 3 mm na bolsa periodontal.

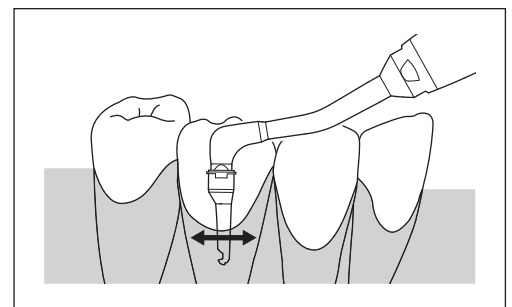O pó não pode ser pulverizado eficientemente para a bolsa periodontal se a profundidade for inferior a 3 mm.



■ Utilizar sem a ponta do bico

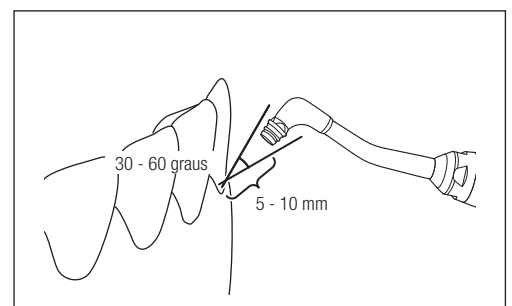Retire a ponta do bico da peça de mão para remover placa bacteriana na área subgengival e margem gengival ou para remover biofilme e manchas claras. Mantenha o bico a uma distância de 5 - 10 mm da superfície do dente e a um ângulo de 30 - 60 graus. Nunca aponte o bico diretamente para a membrana mucosa oral ou para as bolsas periodontais.



**ATENÇÃO**

- Ao utilizar sem a ponta do bico, nunca aponte para a membrana mucosa oral.
- Não utilize este produto numa área imediatamente após destartarizar a superfície do dente numa bolsa periodontal. Caso contrário, pode causar bacteremia.
- Não introduza a ponta do bico mais do que uma vez na mesma bolsa periodontal durante o mesmo tratamento.
- O pó pode ser pulverizado durante, no máximo, 5 segundos na mesma bolsa periodontal (no máximo, 20 segundos para um dente). Nunca pulverize pó durante mais tempo do que aquele especificado.
- Não force a ponta do bico numa bolsa periodontal.
- Não pulverize pó enquanto a extremidade da ponta do bico está situada na parte inferior de uma bolsa periodontal. Caso contrário, pode causar enfisemas.
- Não utilize a ponta do bico nouro local que não as bolsas periodontais.
- Definir um nível de potência demasiado alto pode causar enfisemas. Ajuste o nível de potência para um nível adequado enquanto verifica o estado do paciente.

**CUIDADO**

- O alarme ouve-se a cada 5 segundos ao utilizar o modo Perio.
- No modo Perio, o nível de potência é automaticamente reduzido para um nível inferior em comparação com a mesma definição para o modo Prophy.

8-6-3 Durante o funcionamento da peça de mão

Pode: Ajustar o nível de potência e o volume de água

Não pode: Alterar as definições do modo Irrigação e efetuar a limpeza automática

8-6-4 Libertar a pressão residual

A tampa da câmara não pode ser aberta após a utilização devido à acumulação de pressão de ar no interior da câmara, que aumenta durante a utilização. Liberte a pressão restante na câmara antes de colocar pó na câmara ou removendo a câmara da unidade de controle.

**CUIDADO**

- O pó e água restantes saem da peça de mão ao libertar a pressão residual. Prepare um recipiente como uma taça para recolher o pó e a água.

- 1) Retire a peça de mão de pó do suporte da peça de mão.
- 2) Coloque o contra ângulo no recipiente para recolher pó e água.
- 3) Toque continuamente na tecla de limpeza automática durante cerca de 1 segundo. Ouvem-se os sinais sonoros e a pressão residual começa a ser libertada.
- 4) O funcionamento para quando toda a pressão residual é libertada da câmara.

8-7 Após tratamento

Efetue a manutenção após utilização em cada paciente. Consulte "9 Manutenção Após a Utilização" para mais informações.

Se a ponta do bico (opção) for instalada no bico, retire-a e elimine-a antes da manutenção.

**CUIDADO**

- Se não efetuar a manutenção, pode resultar em avarias.

IMPORTANTE • As definições do nível de potência e do modo Irrigação são armazenadas após a alimentação ser desligada (Função de última memória).

9 Manutenção Após a Utilização

Efetue a manutenção seguinte após utilização em cada paciente.

As instruções de reprocessamento que se seguem foram criadas com base nos requisitos de ISO 17664.

Foi verificada a eficácia do reprocessamento através do seguinte procedimento.

Usar proteção ocular, máscara de proteção e luvas para segurança e prevenção de infeções.

ATENÇÃO

- Para remover resíduos, realize a seguinte manutenção imediatamente após o tratamento (no prazo de 30 minutos). A omissão da manutenção pode causar infeções, avarias prematuras e lesões térmicas resultantes do sobreaquecimento.
- Siga sempre as diretivas, normas e diretrizes locais, etc. referentes à limpeza, desinfeção e esterilização do produto.

CUIDADO

- Utilize apenas os produtos agentes de limpeza e desinfeção especificados neste manual de instruções.
- Use proteção ocular, máscara de proteção e luvas para segurança e prevenção de infeções antes de iniciar a manutenção.
- Para o reprocessamento de pontas e da chave da ponta, consulte o manual de instruções das pontas (consulte OM-Z0314E).
- Para a limpeza e desinfeção, utilize desinfetante etanol ou isopropanol que não contenha quaisquer aditivos (doravante denominado álcool desinfetante). A utilização de outros desinfetantes pode causar descoloração ou fissuração.
- Utilize álcool desinfetante adequado, em conformidade com os regulamentos e as diretrizes de cada país.
- Não use solventes como água oxidante eletrolisada (água muito ou extremamente ácida), químicos de acidez elevada ou alcalinidade elevada, solvente com cloro, benzeno ou diluente ao limpar, mergulhar ou esfregar.
- Após a desinfeção térmica, retire imediatamente o produto do dispositivo de lavagem-desinfeção (no prazo de 1 hora). Caso contrário, irá causar corrosão.
- Após a desinfeção térmica, seque o produto por completo. Os resquícios de humidade causam corrosão interna.
- Antes da desinfeção, certifique-se de que limpa o produto para remover quaisquer resíduos. Os restos de sangue no produto coagulam, causando a avaria do produto.
- Certifique-se de que utiliza a chave da ponta para instalar e retirar pontas.
- Não utilize a limpeza ultrassónica para limpar peças de mão ultrassónicas.
- Utilize ar comprimido limpo e seco para proceder à limpeza.

9-1 Limpeza e desinfeção (cada paciente)

9-1-1 Peça de mão ultrassónica

CUIDADO

- Certifique-se de que efetua a limpeza automática (limpeza do tubo de irrigação) após a utilização. A omissão da limpeza automática pode resultar na obstrução do tubo de irrigação ou no enferrujamento das peças metálicas.
- Certifique-se de que coloca água destilada ou água purificada sem impurezas na garrafa de irrigação. O uso de água com impurezas causa a obstrução do tubo de irrigação ou outros problemas.
- Certifique-se de que a peça de mão ultrassónica e o cabo da peça de mão estão bem ligados.
- Após a remoção da garrafa de irrigação, elimine imediatamente o líquido nela contido. Se permanecer na garrafa de irrigação, o líquido pode sair da mesma através da secção da junta.

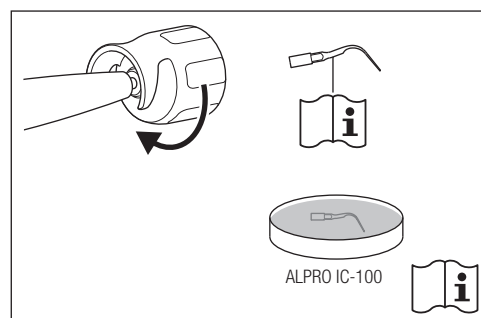
IMPORTANTE • O LED da peça de mão ultrassónica não acende durante a limpeza automática.

9-1-1-1 Retirar a ponta


1) Retire a ponta da peça de mão ultrassónica.

Retire a ponta da chave da ponta.

Para o reprocessamento de pontas e da chave da ponta, consulte o manual de instruções fornecido com as pontas (consulte OM-Z0314E).



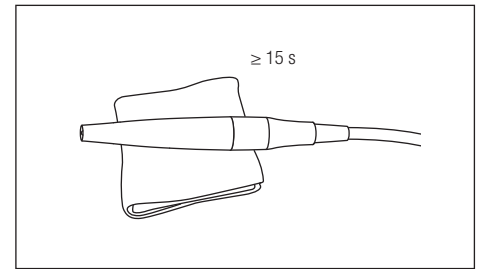- 2) Limpe a sujidade da superfície da peça de mão ultrassónica utilizando um pano sem pelos humedecido em água.




9-1-1-2 Limpeza automática


⚠
CUIDADO

- Durante a limpeza automática, a água utilizada para a limpeza sai da ponta da peça de mão ultrassónica. Prepare um recipiente como uma taça para recolher a água.

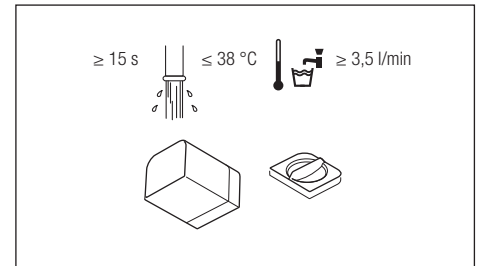
- 1) Selecione o modo de irrigação para a água da torneira e ajuste o volume de irrigação para o máximo.
2) Retire a garrafa de irrigação e limpe o interior e a tampa com água corrente.



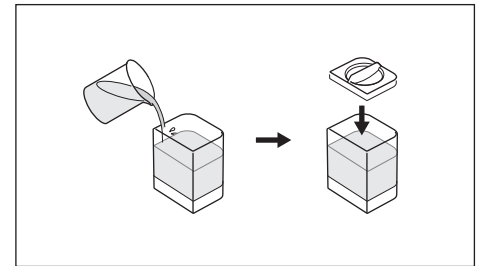
- 3) Encha a garrafa de irrigação até meio ou mais com água destilada ou água purificada e, de seguida, feche bem a tampa da garrafa de irrigação. (Não use uma solução salina.)




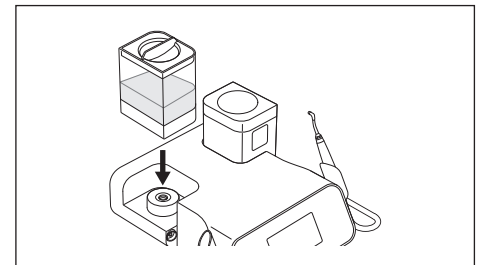- 4) Introduza a garrafa de irrigação a direito no conector na base da garrafa de irrigação.




* Se houver uma folga entre a garrafa de irrigação e a unidade de controle, pode ocorrer fuga de água.

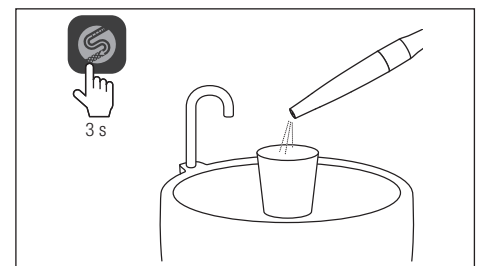- 5) Aponte a ponta da peça de mão ultrassónica para um recipiente para recolher a água e, de seguida, toque em  durante três segundos. É então iniciada a limpeza automática. (O tempo de limpeza é de 45 segundos.)




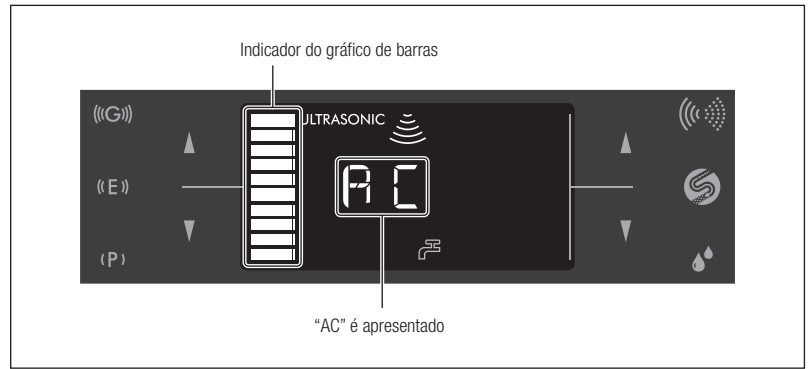- 6) Durante a limpeza automática, surge a indicação "AC" no LCD. O indicador do gráfico de barras mostra o progresso.




* Para cancelar a limpeza automática, toque novamente em . Quando a limpeza automática é concluída, a unidade de controle regressa ao estado em que se encontrava antes da limpeza automática.

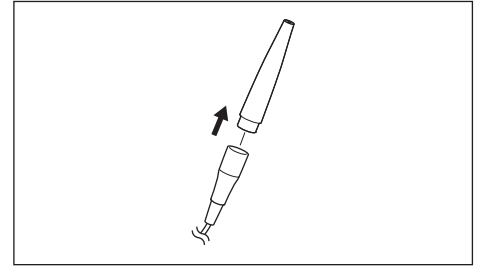- 7) Desligue a peça de mão ultrassónica do cabo da peça de mão.




9-1-1-3 Pré-limpeza

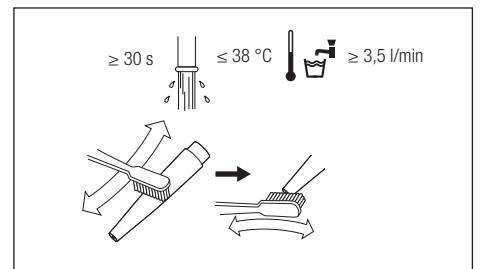
- 1) Limpe a peça de mão ultrassónica utilizando água corrente e uma escova de cerdas macias.



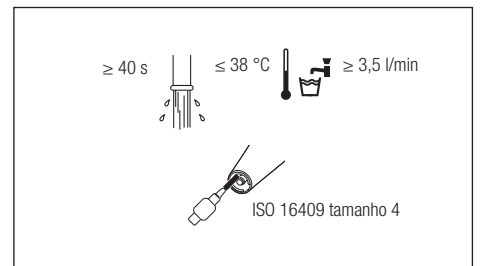
- 2) Limpe a ponta da peça de mão ultrassónica utilizando água corrente e uma escova.



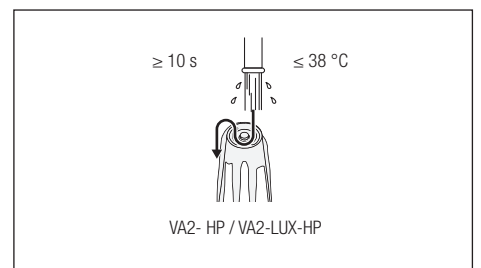
- 3) Enxague a face da extremidade da peça de mão ultrassónica.



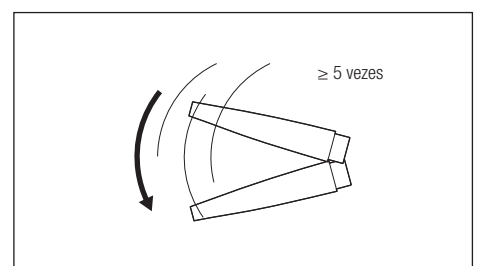- 4) Agite ligeiramente para que a água saia da peça de mão ultrassónica.



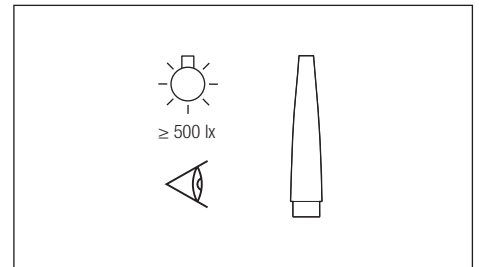5) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 1) até que seja removida.



9-1-1-4 Limpeza e desinfeção

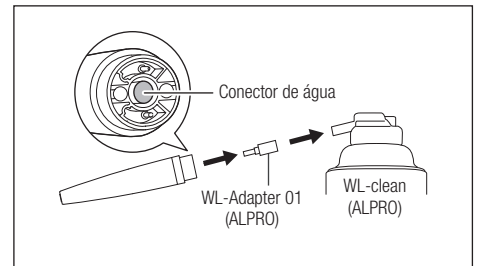
⚠ CUIDADO

- Certifique-se de que efetua uma pré-limpeza antes da limpeza e desinfeção.
- Certifique-se de que efetua a desinfeção no prazo de 2 horas após a limpeza.
- Após a desinfeção, certifique-se de que esteriliza a peça de mão ultrassónica (consulte “9-2 Esterilização”).
- Ao utilizar qualquer pulverizador (ALPRO), certifique-se de que cobre a ponta da peça de mão ultrassónica com um pano para evitar que o detergente e o agente de desinfeção se espalhem. É recomendada a utilização do “Spray Mist Absorber” (Y900084).
- Ao utilizar o pulverizador ALPRO, continue a segurar a peça de mão ultrassónica e WL-Adapter 01.
- Ao utilizar produtos ALPRO, consulte o manual do fabricante.


Manual

■ Limpeza


1) Instale o WL-Adapter 01 (ALPRO) no WL-clean (ALPRO) e ligue o conector de água na peça de mão ultrassónica à extremidade do WL-Adapter 01 (ALPRO).



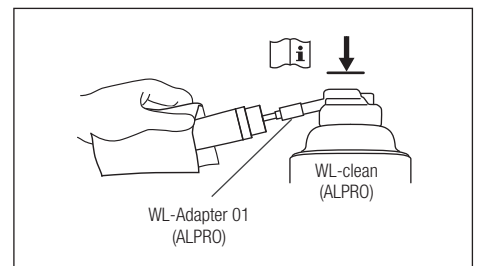2) Pulverize o WL-clean (ALPRO) enquanto segura o WL-clean (ALPRO) e a peça de mão ultrassónica.




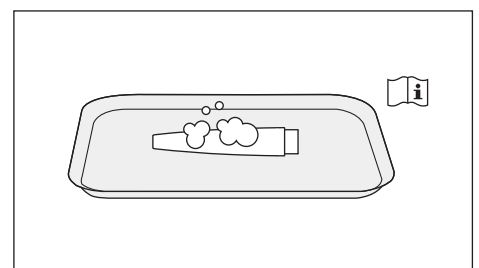3) Retire o conector de água na peça de mão ultrassónica do WL-Adapter 01 (ALPRO) e retire o WL-Adapter 01 (ALPRO) do WL-clean (ALPRO). De seguida, coloque a peça de mão ultrassónica no tabuleiro desinfectado. Pulverize o WL-clean (ALPRO) na superfície da peça de mão ultrassónica e, de seguida, aguarde que o WL-clean (ALPRO) faça efeito.




■ Desinfeção

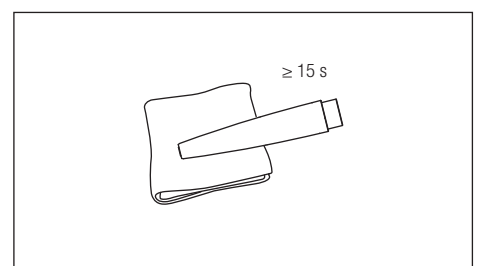
1) Limpe a superfície da peça de mão ultrassónica utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.



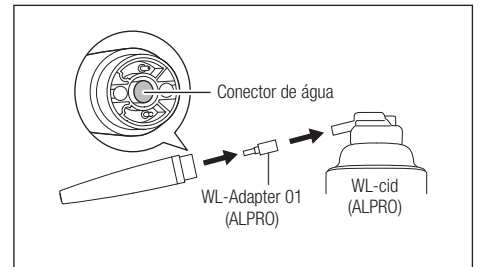2) Instale o WL-Adapter 01 (ALPRO) no WL-cid (ALPRO) e ligue o conector de água na peça de mão ultrassónica à extremidade do WL-Adapter 01 (ALPRO).



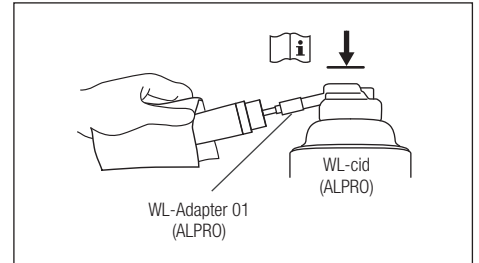
3) Pulverize o WL-cid (ALPRO) no conector de água da peça de mão ultrassónica enquanto segura a peça de mão ultrassónica e o WL-cid (ALPRO).




4) Retire o WL-Adapter 01 (ALPRO) e a peça de mão ultrassónica do WL-cid (ALPRO).

5) Retire a peça de mão ultrassónica do WL-Adapter 01 (ALPRO) e, de seguida, coloque a peça de mão ultrassónica no tabuleiro desinfetado.

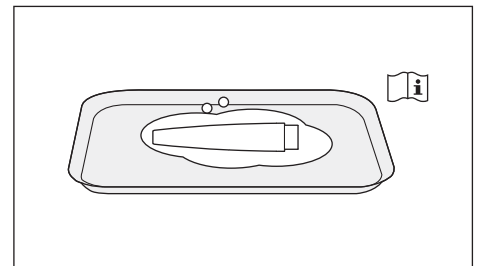6) Pulverize o WL-cid (ALPRO) na superfície da peça de mão ultrassónica e, de seguida, aguarde que o WL-cid (ALPRO) faça efeito.




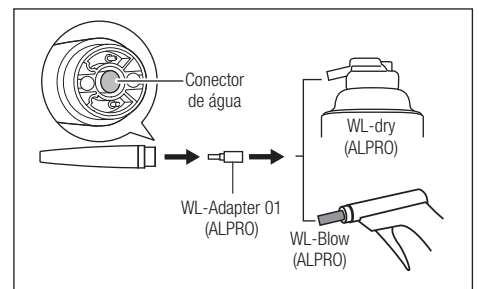7) Instale o WL-Adapter 01 (ALPRO) no WL-dry (ALPRO) ou WL-Blow (ALPRO) e ligue a parte traseira da peça de mão ultrassónica ao WL-Adapter 01 (ALPRO).




8) Drene o desinfetante da peça de mão ultrassónica enquanto segura o WL-dry (ALPRO) ou WL-Blow (ALPRO) e a peça de mão ultrassónica.

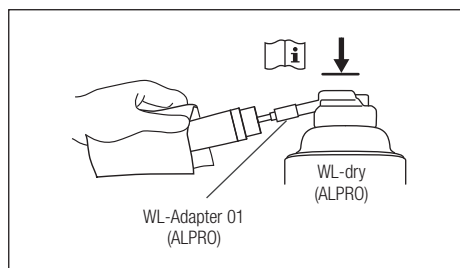· Ao utilizar WL-dry (ALPRO):




· Ao utilizar WL-Blow (ALPRO):

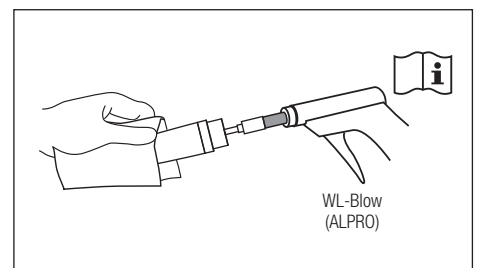

9) Retire o WL-Adapter 01 (ALPRO) e a peça de mão ultrassónica do WL-dry (ALPRO) ou WL-Blow (ALPRO).

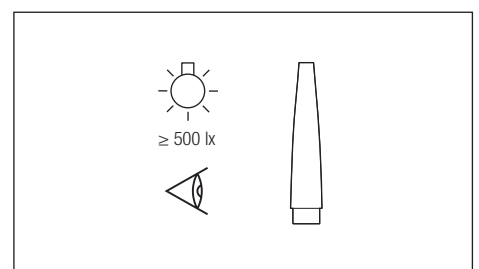10) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 1) até que seja removida.



11) Proceda à esterilização (consulte “9-2 Esterilização”).

Automática

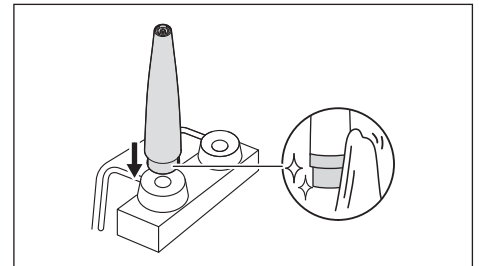


CUIDADO

- Utilize um dispositivo de lavagem-desinfecção em conformidade com a norma DIN EN ISO 15883.
- Leia o manual do dispositivo de lavagem-desinfecção.
- Dada a fragilidade da barra de vidro, preste atenção para não permitir que a ponta da peça de mão ultrassônica seja sujeita a impactos durante a limpeza.
- Uma vez concluídos a desinfecção térmica e o ciclo de secagem, retire imediatamente o produto do dispositivo de lavagem-desinfecção (no prazo de 1 hora) e, de seguida, seque-o. Os resquícios de humidade no produto causam corrosão interna ou outros problemas.
- Ao utilizar um dispositivo de lavagem-desinfecção, utilize o adaptador compatível com o mesmo (a preparar pelo utilizador) para limpar e desinfetar a peça de mão ultrassônica.
- Para limpeza automática e desinfecção, siga as instruções no manual do fabricante do dispositivo de lavagem-desinfecção.

■ Limpeza e desinfecção (exterior e interior)

- 1) Limpe a peça de ligação da peça de mão ultrassônica utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante e, de seguida, ligue a peça de mão ultrassônica ao adaptador do dispositivo de lavagem-desinfecção.




Adaptador compatível com o dispositivo de lavagem-desinfecção (a adquirir pelo utilizador)

| Fabricante | REF | Ligação aprox. | Cor |
|------------|-----------|----------------|-------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Verde |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Verde |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Preto |


- 2) Efetue a desinfecção térmica segundo o manual do dispositivo de lavagem-desinfecção.



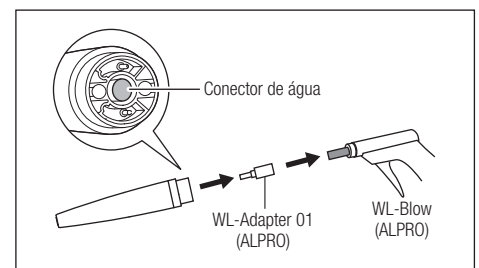
- 3) Retire a peça de mão ultrassônica do dispositivo de lavagem-desinfecção.
- 4) Instale o WL-Adapter 01 (ALPRO) no WL-Blow (ALPRO) e, de seguida, ligue a parte traseira da peça de mão ultrassônica ao WL-Adapter (ALPRO).



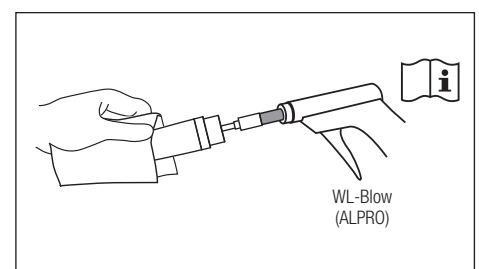- 5) Drene a humidade da peça de mão ultrassônica enquanto segura o WL-Blow (ALPRO) e a peça de mão ultrassônica.




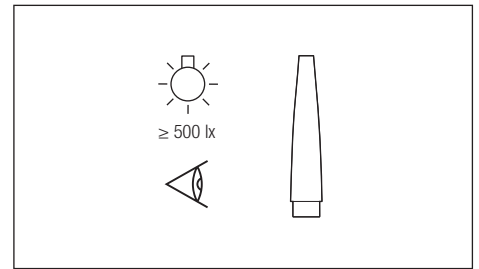- 6) Retire o WL-Adapter 01 (ALPRO) e a peça de mão ultrassônica do WL-Blow (ALPRO).
- 7) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 2) até que seja removida.



9-1-1-5 Barra de vidro

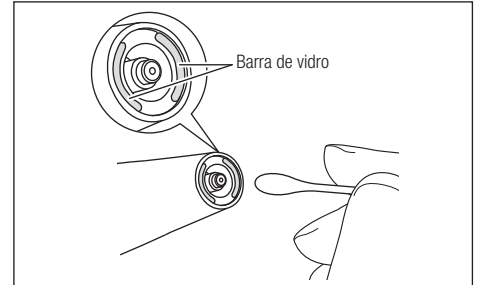Em caso de adesão de pó ou resíduos à barra de vidro, limpe cuidadosamente com uma cotonete humedecida em álcool desinfetante.




⚠ **CUIDADO**

- Não utilize uma agulha ou bisturi para limpar a barra de vidro. Tal danifica a barra de vidro, reduzindo a sua transmitância.


9-1-2 Cabo da peça de mão

Limpeza e desinfecção

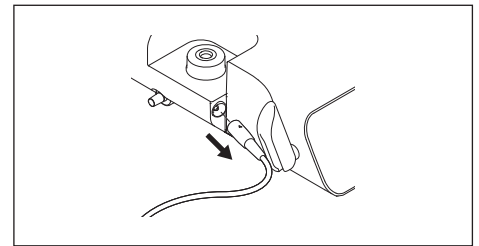
- 1) Desligue o cabo da peça de mão da unidade de controle.



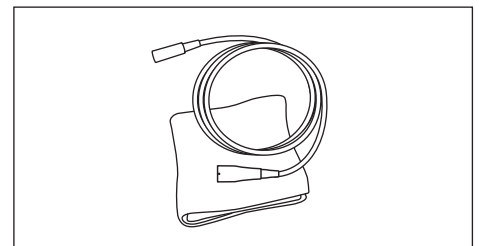
- 2) Limpe a superfície da peça de mão utilizando um pano sem pelos humedecido em água.



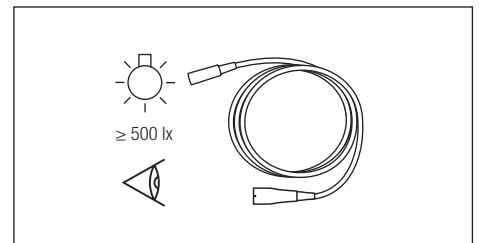- 3) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 2) até que seja removida.




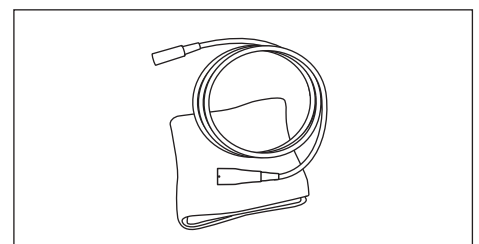- 4) Limpe a superfície do cabo da peça de mão utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.



5) Limpe a peça de ligação utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.

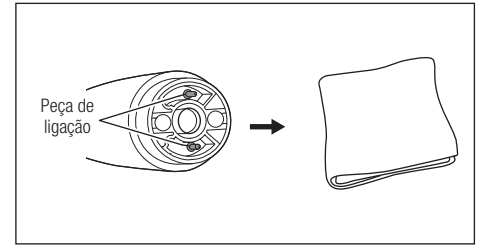Se uma cotonete for demasiado espessa para limpar a peça de ligação, envolva um lenço de papel humedecido (ou algo semelhante) num palito e utilize-o para limpar cuidadosamente a peça de ligação.




- Ao limpar a peça de ligação, não utilize um palito com uma ponta afiada nem pique o terminal. Tal pode danificar os contactos, causando mau contacto.


9-1-3 Garrafa de irrigação

9-1-3-1 Limpeza e desinfeção

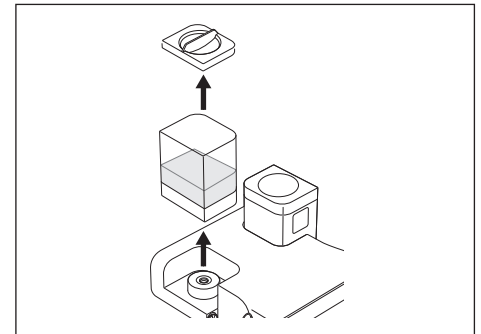
1) Retire a garrafa de irrigação do conector na base e, de seguida, remova a tampa da garrafa de irrigação.



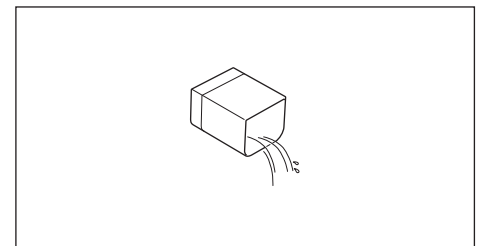
2) Drene a água ou o desinfetante restante na garrafa de irrigação.



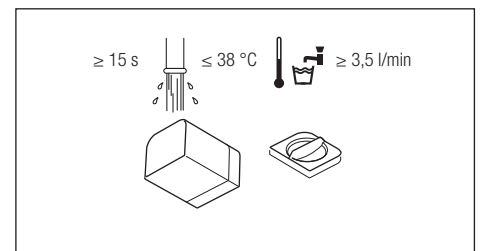3) Enxague a garrafa de irrigação e a tampa com água corrente.



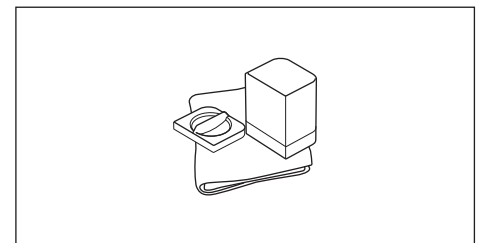4) Limpe as superfícies da garrafa de irrigação e da tampa da garrafa de irrigação utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.




5) Introduza a garrafa de irrigação no conector na base da garrafa de irrigação.


9-1-4 Peça de mão de pó

9-1-4-1 Remover a ponta do bico

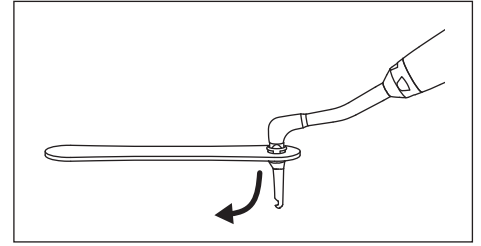1) Utilize o extrator da ponta Perio-Mate para retirar a ponta Perio-Mate.



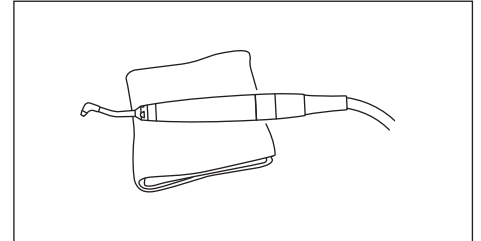2) Limpe a sujidade da superfície da peça de mão de pó utilizando um pano sem pelos humedecido em água.




ATENÇÃO

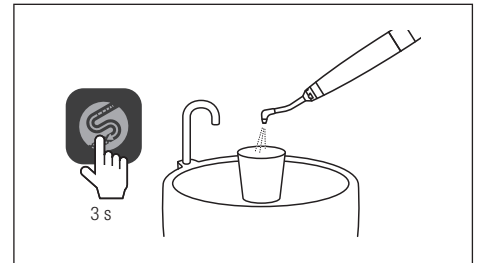
- A ponta do bico só pode ser utilizada uma vez. Não a reutilize. Tal causa infeções.
- Elimine as pontas Perio-Mate usadas como resíduos médicos.

9-1-4-2 Limpeza automática


CUIDADO

- Durante a limpeza automática, a água utilizada para a limpeza sai da ponta da peça de mão de pó. Prepare um recipiente como uma taça para recolher a água.
- Antes de iniciar a limpeza automática, toque nas teclas do volume de irrigação (▲) para ajustar o nível de água para L5 (consulte “11-3 Definição do nível de água básico”).

1) Aponte a ponta da peça de mão de pó para um recipiente para recolher a água e, de seguida, toque em  durante três segundos. É iniciada a limpeza automática. (O tempo de limpeza é de 45 segundos.)



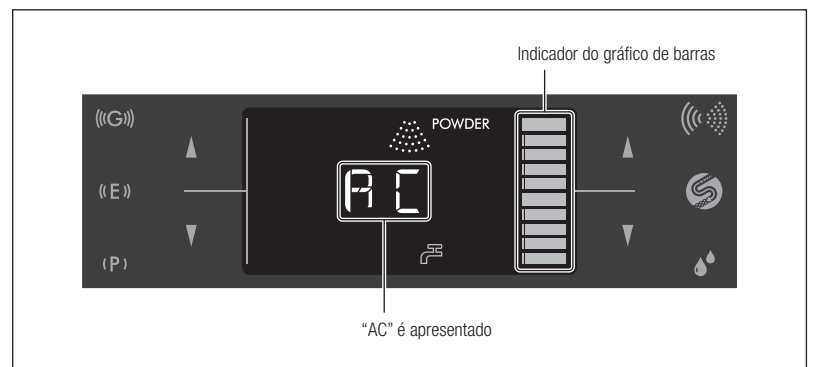
2) Durante a limpeza automática, surge a indicação “AC” no LCD. O indicador do gráfico de barras mostra o progresso.



* Para cancelar a limpeza automática, toque novamente em .


Quando a limpeza automática é concluída, a unidade de controlo regressa ao estado em que se encontrava antes do início do ciclo de limpeza automática.

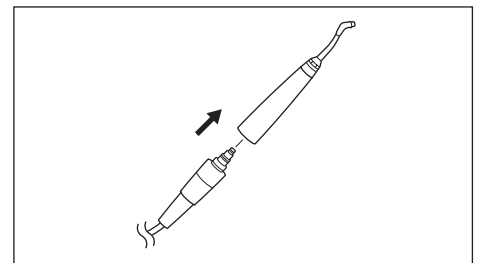3) Desligue a peça de mão de pó da mangueira.




9-1-4-3 Remover o pó

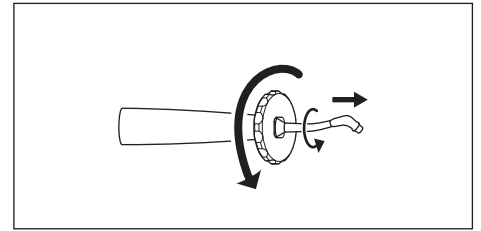1) Retire o bico da peça de mão de pó utilizando a chave de luneta (acessório).



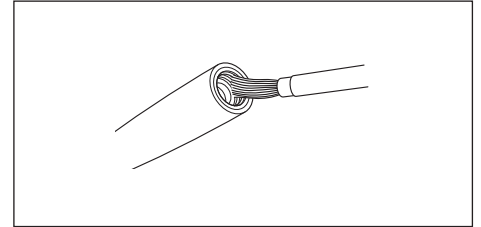2) Retire o pó que adere ao interior da peça de ligação da peça de mão de pó utilizando a escova de limpeza (acessório).




ATENÇÃO


- Certifique-se de que limpa o interior da peça de mão de pó após a utilização. O pó restante na peça de mão de pó pode endurecer, causando obstrução.

9-1-4-4 Pré-limpeza

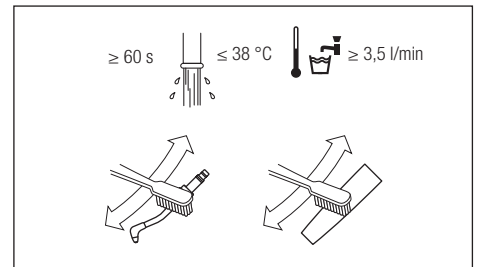
1) Limpe a peça de mão de pó e o bico utilizando água corrente e uma escova de cerdas macias.



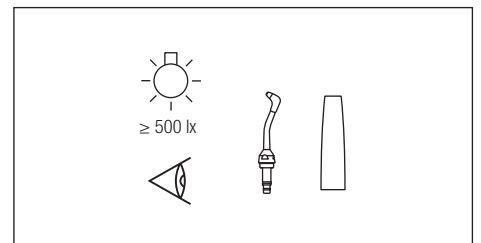2) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 1) até que seja removida.



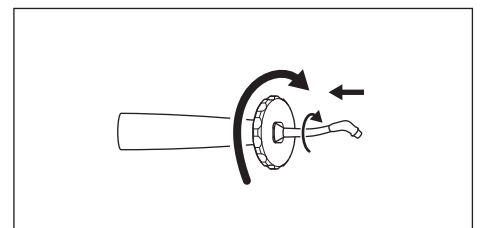3) Instale o bico na peça de mão de pó.



CUIDADO

- Efetue a limpeza ultrassônica, no mínimo, uma vez por semana para evitar obstrução por pó. Efetue a limpeza ultrassônica antes de efetuar a limpeza automática ou após aplicar a solução descrita em "14 Resolução de problemas" ("9-3 Limpeza ultrassônica (semanal)").
- Certifique-se de que utiliza a chave de luneta fornecida para instalar e retirar bicos. Ao instalar ou remover um bico, não segure a extremidade distal. Tal poderá deformar o bico.
- Não utilize a limpeza ultrassônica para limpar peças de mão de pó.

9-1-4-5 Limpeza e desinfecção



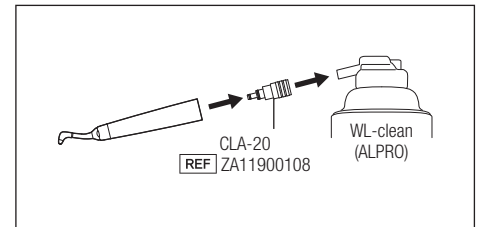
CUIDADO

- Se o anel vedante no CLA-20 estiver deteriorado ou danificado, substitua-o por um novo antes da utilização.
- Certifique-se de que efetua uma pré-limpeza antes da limpeza.
- Após a desinfecção, certifique-se de que esteriliza a peça de mão de pó (consulte "9-2 Esterilização").
- Certifique-se de que efetua a desinfecção no prazo de 2 horas após a limpeza.
- Ao utilizar qualquer pulverizador (ALPRO), certifique-se de que cobre a cabeça da peça de mão de pó com um pano para evitar que o detergente e o agente de desinfecção se espalhem. É recomendada a utilização do "Spray Mist Absorber" (Y900084).
- Ao utilizar produtos ALPRO, consulte o manual do fabricante.


Manual

■ Limpeza

1) Instale o CLA-20 (REF ZA11900108) no WL-clean (ALPRO) e, de seguida, instale a peça de mão de pó no CLA-20.




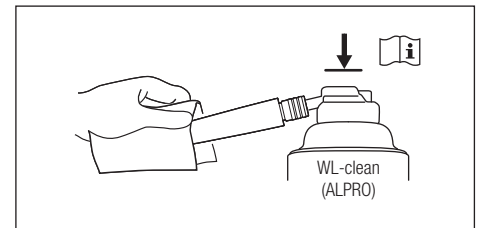2) Pulverize o WL-clean (ALPRO) enquanto segura o WL-clean (ALPRO) e a peça de mão de pó.




3) Retire o CLA-20 e a peça de mão de pó do WL-clean (ALPRO).

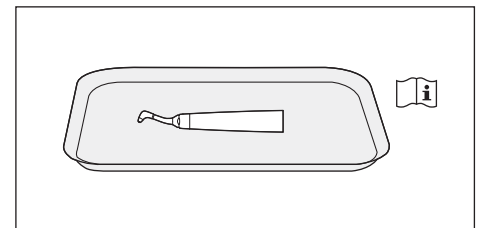4) Aguarde que o WL-clean (ALPRO) faça efeito.




■ Desinfecção

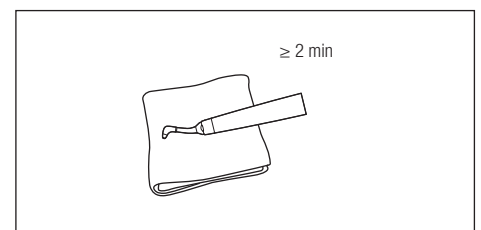
1) Limpe a superfície da peça de mão de pó utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.



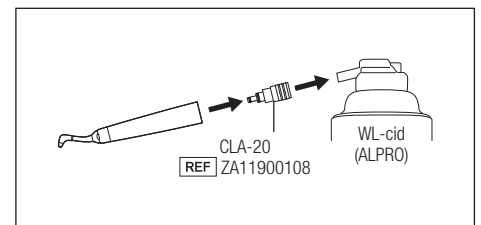
2) Instale o CLA-20 (REF ZA11900108) no WL-cid (ALPRO) e, de seguida, instale a peça de mão de pó no CLA-20.



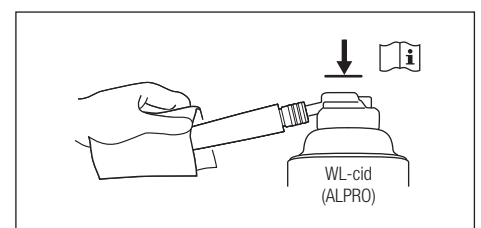
3) Pulverize WL-cid (ALPRO) na peça de mão de pó enquanto segura o WL-cid (ALPRO) e a peça de mão de pó.



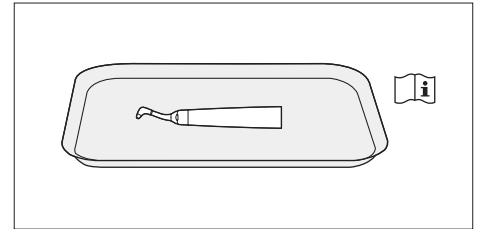- 4) Retire o CLA-20 e a peça de mão de pó do WL-cid (ALPRO).
- 5) Aguarde que o WL-cid (ALPRO) faça efeito.




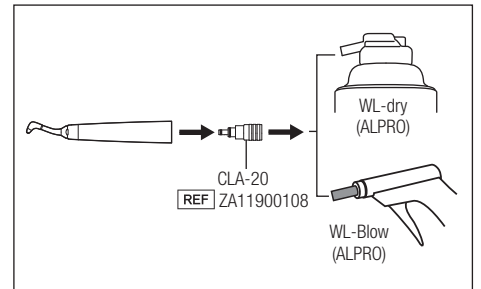- 6) Instale o CLA-20 no WL-dry (ALPRO) ou WL-Blow (ALPRO) e, de seguida, instale a peça de mão de pó no CLA-20.




- 7) Drene o desinfetante da peça de mão de pó enquanto segura o WL-dry (ALPRO) ou WL-Blow (ALPRO) e a peça de mão de pó.

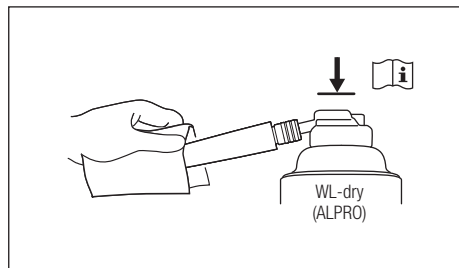
· Ao utilizar WL-dry (ALPRO):



· Ao utilizar WL-Blow (ALPRO):

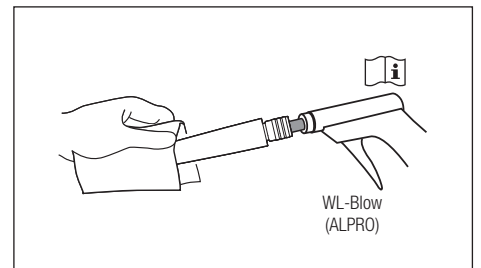

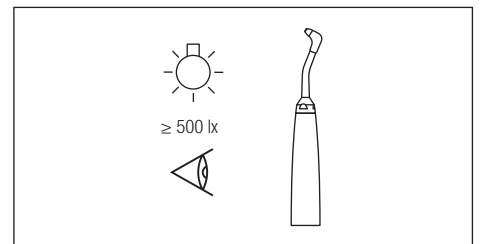- 8) Retire a peça de mão de pó do WL-dry (ALPRO) ou WL-Blow (ALPRO).
- 9) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 1) até que seja removida.



- 10) Proceda à esterilização (consulte “9-2 Esterilização”).

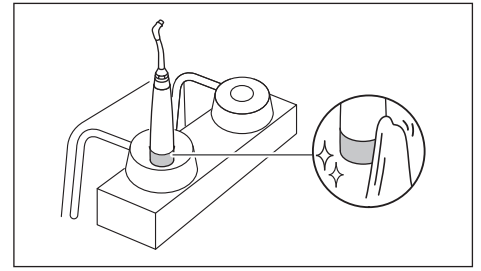
Automática

⚠ CUIDADO

- Utilize um dispositivo de lavagem-desinfecção em conformidade com a norma ISO 15883.
- Leia o manual do dispositivo de lavagem-desinfecção.
- Seque suficientemente a peça de mão de pó após a limpeza com um dispositivo de lavagem-desinfecção. Os resquícios de humidade causam corrosão interna e uma fraca lubrificação.
- Uma vez concluídos a desinfecção térmica e o ciclo de secagem, retire imediatamente o produto do dispositivo de lavagem-desinfecção (no prazo de 1 hora) e, de seguida, seque-o. Os resquícios de humidade no produto causam corrosão interna e uma fraca lubrificação.
- Ao utilizar um dispositivo de lavagem-desinfecção, utilize o adaptador compatível com o mesmo (a preparar pelo utilizador) para limpar e desinfetar a peça de mão de pó.
- Para limpeza automática e desinfecção, siga as instruções no manual do fabricante do dispositivo de lavagem-desinfecção.

■ Limpeza e desinfeção


- 1) Limpe a peça de ligação da peça de mão de pó utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante e, de seguida, ligue a peça de mão de pó ao adaptador do dispositivo de lavagem-desinfeção.




Adaptador compatível com o dispositivo de lavagem-desinfeção (a adquirir pelo utilizador)

| Fabricante | REF | Ligação aprox. | Cor |
|------------|-----------|----------------|-------|
| Miele | ADS 2 | 16 mm | Verde |
| MELAG | 63500 | 16 mm | Verde |
| Getinge | 502887400 | 16 mm | Preto |

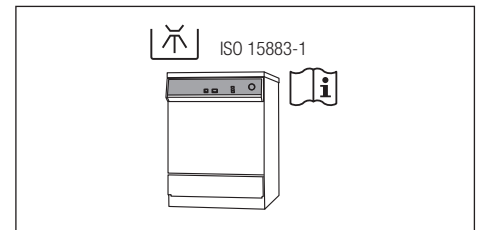
- 2) Efetue a desinfeção térmica segundo o manual do dispositivo de lavagem-desinfeção.



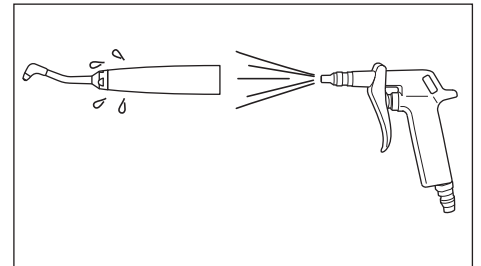- 3) Retire a humidade da superfície e do interior da peça de mão de pó utilizando uma pistola de sopro de ar ou uma ferramenta semelhante.



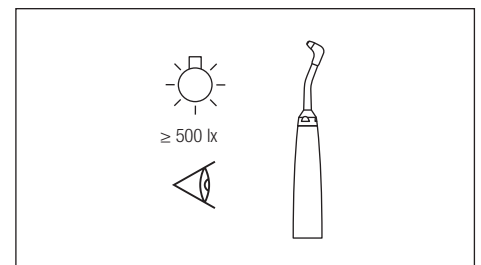- 4) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 2) até que seja removida.




- 5) Proceda à esterilização (consulte “9-2 Esterilização”).

9-1-5 Câmara e mangueira da peça de mão


Efetue a manutenção seguinte no final do dia.

9-1-5-1 Remover o pó

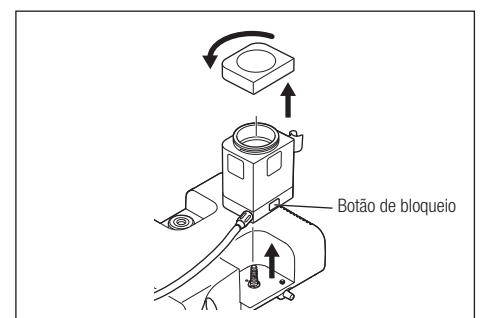- 1) Liberte a pressão residual da câmara (consulte “8-6-4 Libertar a pressão residual”).
- 2) Prima o botão de bloqueio e, de seguida, retire a câmara do conector na base da câmara.
Retire a tampa da câmara.




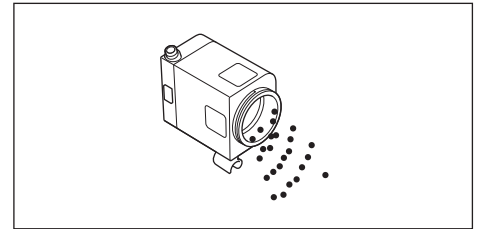3) Elimine o pó na câmara (consulte “22 Eliminação do produto”).




4) Feche bem a tampa da câmara e, de seguida, insira a câmara a direito no conector na base da câmara.

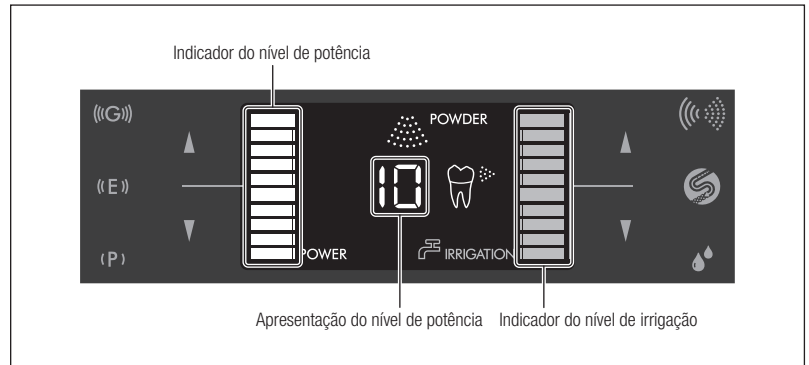5) Defina o nível de potência e o nível de irrigação para “10” e o máximo, respetivamente.



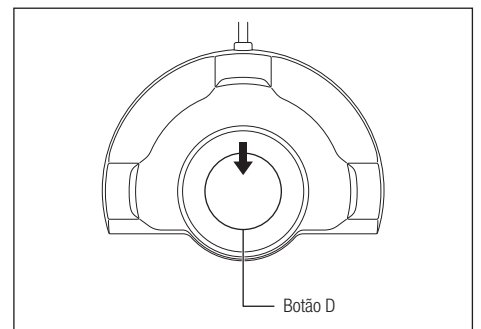6) Aponte a mangueira da peça de mão para uma cuspeira ou pia e pressione o botão D do pedal de controle para funcionar 5 vezes durante mais de um segundo.



7) Efetue a limpeza automática para drenar o pó e a água restantes (consulte 9-1-4-2 Limpeza automática).

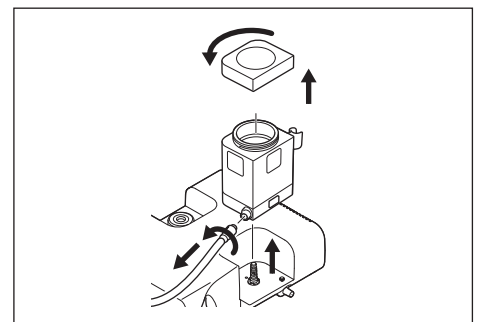
9-1-5-2 Limpeza e desinfecção

1) Liberte a pressão residual da câmara (consulte “8-6-4 Libertar a pressão residual”).


2) Prima o botão de bloqueio e, de seguida, retire a câmara do conector na base da câmara.

Retire a tampa da câmara e desligue a mangueira da peça de mão.


* Se a câmara não puder ser removida mesmo premindo o botão de bloqueio, solte o botão de bloqueio (consulte “9-1-5-3 Libertar o botão de bloqueio”).



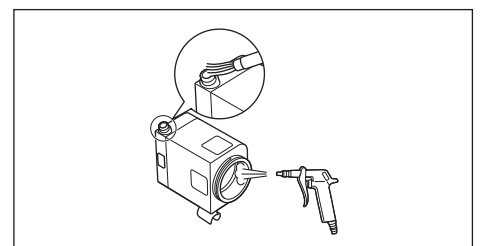
3) Retire o pó restante na câmara e na tomada do conector da mangueira da peça de mão utilizando uma pistola de sopro de ar ou uma ferramenta semelhante.



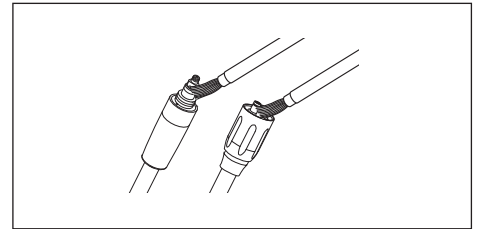
4) Retire o pó restante de ambas as extremidades da mangueira da peça de mão utilizando a escova de limpeza (acessório).



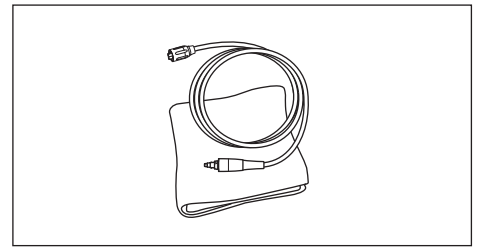
5) Certifique-se de que não há resquícios de pó nas roscas da tampa da câmara. Se houver resquícios de pó, limpe-os. (Consulte “Limpar a tampa da câmara”)
6) Limpe a superfície da peça de mão utilizando um pano sem pelos humedecido em água.



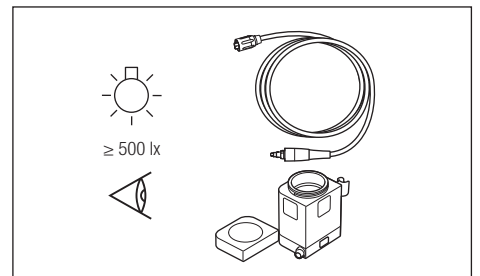7) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita a partir do passo 3) até que seja removida.



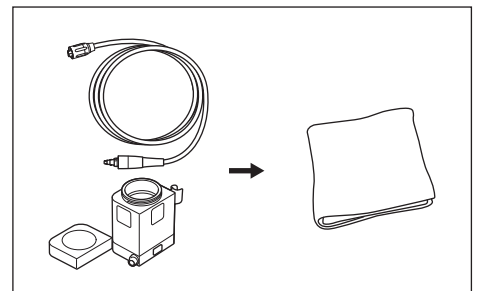8) Limpe as superfícies da câmara, da tampa da câmara e da mangueira da peça de mão utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.



9) Proceda ao armazenamento (consulte “9-4 Armazenamento”) ou insira a câmara a direito no conector na base da câmara.

ATENÇÃO

- Aperte firmemente a tampa da câmara. Caso contrário, a tampa da câmara pode soltar-se durante a utilização, o que pode provocar danos no dispositivo ou lesões.



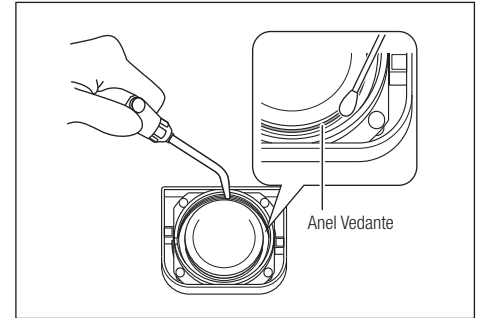
CUIDADO

- Se o pó colar às roscas da câmara e/ou da tampa da câmara, a tampa fica difícil de fechar. A limpeza da câmara e da tampa da câmara facilita a abertura e o fecho da tampa (consulte “Limpar a tampa da câmara”).
- Se a câmara avariar, certifique-se de que solicita ao seu distribuidor autorizado NSK para proceder à reparação.
- Após a utilização, remova a totalidade do pó que adere ao interior da câmara e limpe a câmara antes de a armazenar.
- Não lave a câmara com água. Tal solidifica o pó, causando obstrução. A pressão de ar na câmara pode ser elevada, dificultando a abertura da tampa durante algum tempo imediatamente após a utilização. Em tal caso, aguarde um pouco ou liberte a pressão residual antes de abrir a tampa (consulte “8-6-4 Libertar a pressão residual”).
- Antes de ligar a mangueira da peça de mão, câmara e peça de mão ou a câmara e unidade de controle, certifique-se de que retira toda a água das ligações da mangueira e da câmara com ar seco. Caso contrário, pode resultar na entrada de humidade na alimentação de ar, causando a solidificação do pó de limpeza no interior do produto.

Limpar a tampa da câmara

Se o pó colar às roscas da câmara e/ou da tampa da câmara, a tampa fica difícil de fechar. A limpeza da câmara e da tampa da câmara seguindo o procedimento abaixo facilita a abertura e o fecho da tampa.

- 1) Retire a tampa da câmara.
- 2) Limpe o interior da câmara, roscas e a borda do anel vedante da tampa da câmara utilizando uma escova ou uma cotonete seca.




- 3) Retire o pó que adere soprando ar.
- 4) Proceda ao armazenamento (consulte "9-4 Armazenamento") ou insira a câmara a direito no conector na base da câmara.

9-1-5-3 Libertar o botão de bloqueio

Se não for possível premir o botão de bloqueio, tornando impossível retirar a câmara, siga o procedimento abaixo para soltar o botão de bloqueio e retire a câmara.

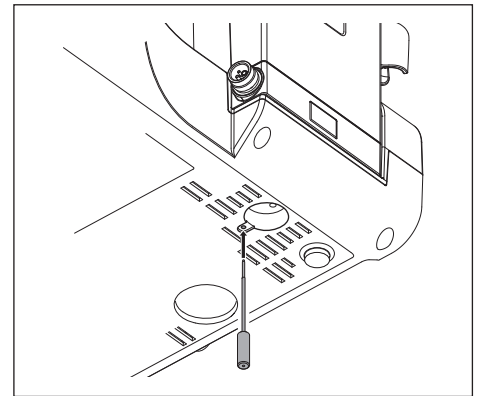- 1) Insira a ferramenta de desbloqueio (acessório) completamente no orifício na parte inferior da unidade de controle para soltar o botão de bloqueio.



- 2) Puxe a ferramenta de desbloqueio para retirá-la.
- 3) Prima o botão de bloqueio e, de seguida, remova a câmara.
Caso não consiga libertar o botão de bloqueio através do procedimento acima, contacte o seu distribuidor autorizado NSK.

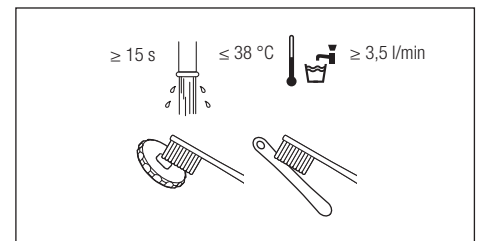


- Não vire a unidade de controle ao contrário ao libertar o botão de bloqueio. Caso contrário, vai resultar em obstrução do pó.
- Não torça a ferramenta de desbloqueio ao introduzi-la.


9-1-6 Chave de luneta e extrator da ponta Perio-Mate

9-1-6-1 Limpeza e desinfecção


- 1) Limpe a chave de luneta e o extrator da ponta Perio-Mate durante 15 segundos ou mais utilizando água corrente e uma escova de cerdas macias.



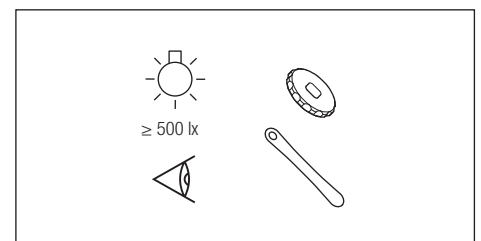- 2) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais).



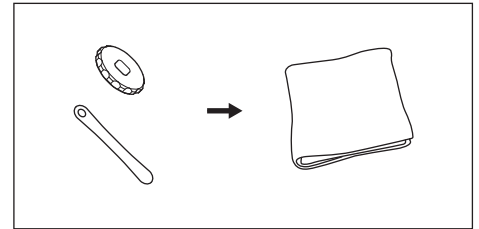- 3) Limpe a chave de luneta e o extrator da ponta Perio-Mate utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.




- 4) Proceda à esterilização (consulte “9-2 Esterilização”).

9-1-7 Unidade de controle e pedal de controle

9-1-7-1 Limpeza

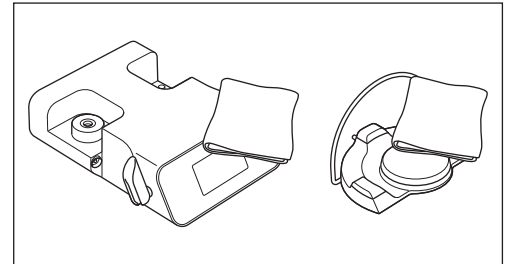- 1) Desligue a alimentação.
- 2) Limpe a sujidade das superfícies da unidade de controle e do pedal de controle utilizando um pano sem pelos humedecido em água.
- 3) Limpe as superfícies da unidade de controlo e do pedal de controle utilizando um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante.



- 4) Proceda ao armazenamento (consulte “9-4 Armazenamento”).



- Não use solventes como água oxidante eletrolisada (água muito ou extremamente ácida), químicos de acidez elevada ou alcalinidade elevada, solvente com cloro, benzeno ou diluente ao limpar, mergulhar ou esfregar.

9-2 Esterilização


A eficácia do procedimento de esterilização que segue foi verificada em conformidade com a norma ISO17665.

Itens esterilizáveis:

Peça de mão ultrassónica, peça de mão de pó, chave de luneta, extrator da ponta Perio-Mate

- 1) Introduza os itens num estojo de esterilização em conformidade com a norma ISO 11607-1 e feche o estojo.
- 2) Efetue a esterilização nas condições seguintes.

| Tipo | Deslocamento gravitacional (Classe N) | Pré-vácuo (Classe B) |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Temperatura | 132 °C | 134 °C |
| Tempo de esterilização | ≥15 min. | 3-18 min. |

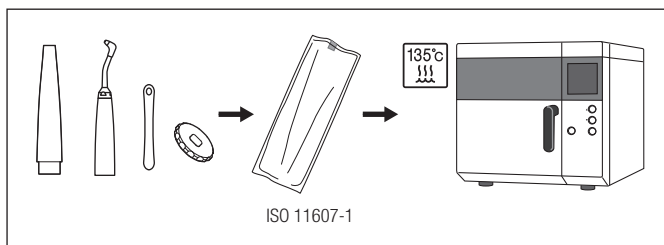

- 3) Proceda ao armazenamento (consulte “9-4 Armazenamento”).

⚠
CUIDADO

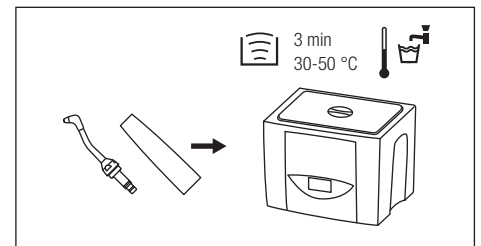
- Siga sempre as diretivas, normas e diretrizes locais, etc. referentes ao reprocessamento de equipamento.
- Utilize um estojo de esterilização em conformidade com a norma ISO 11607- 1.
- Não coloque outros instrumentos juntamente com os itens deste produto num estojo de esterilização para efetuar a esterilização em autoclave. Tal descolora a superfície do produto e afeta as peças internas. Além disso, preste atenção para não permitir a entrada de químicos no produto durante o processo em autoclave.
- Certifique-se de que utiliza esterilizadores que funcionem até 135 °C.
Não utilize um esterilizador cuja temperatura exceda os 135 °C durante o ciclo de secagem. Tal pode causar a falha do produto. Para mais informações, consulte o fabricante do esterilizador.
- Armazene o produto num local onde não haja o risco de efeitos adversos da pressão atmosférica, temperatura, humidade, ventilação, luz solar, pó, sal e atmosfera sulfúrica.
- Não aqueça nem arrefeça o produto rapidamente durante a esterilização. As variações súbitas de temperatura provocam a deterioração do produto.
- Não toque no produto imediatamente após a esterilização, uma vez que vai estar quente.
- Relativamente a este produto, não foi verificada a eficácia de outros métodos de esterilização (como a esterilização por plasma ou esterilização EOG) além da esterilização a vapor.
- Após a esterilização estar concluída, retire o produto do esterilizador no prazo de 1 hora. Caso contrário, pode causar corrosão.
- Não esterilize peças não esterilizáveis.

- IMPORTANTE**
- Recomendamos o esterilizador de Classe B estipulado na norma EN13060.
Para mais informações, consulte o manual de instruções lançado pelo fabricante do esterilizador.
 - Embora a peça de mão possa descolorar devido ao calor após esterilizações repetidas em autoclave, tal deve-se às características do produto e não indica qualquer problema na qualidade do mesmo.


9-3 Limpeza ultrassónica (semanal)

Certifique-se de que efetua a limpeza e desinfeção antes da limpeza ultrassónica (consulte “9-1-4 Peça de mão de pó”).


- 1) Limpe a peça de mão de pó e o bico utilizando a limpeza ultrassónica.



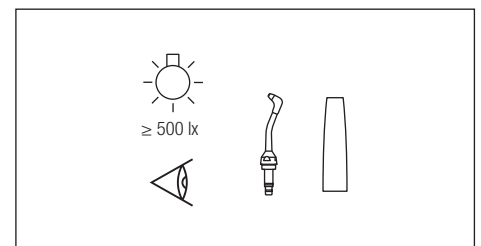
- 2) Verifique a existência de sujidade sob iluminação adequada (500 lx ou mais). Se houver sujidade, repita o passo 1) até que seja removida.



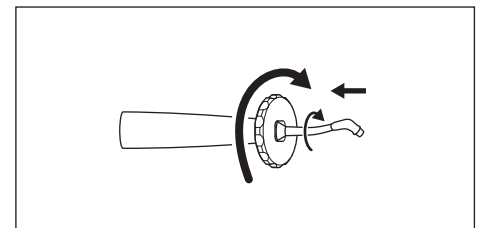- 3) Instale o bico na peça de mão de pó utilizando a chave de luneta (acessório).



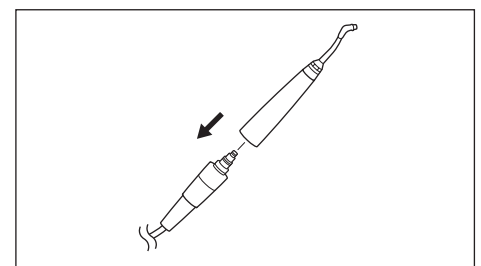- 4) Introduza a peça de mão de pó a direito na ficha da mangueira da peça de mão.



- 5) Efetue a limpeza automática e a esterilização (consulte “9-1-4-2 Limpeza automática” e “9-2 Esterilização”).

**CUIDADO**

- Após a limpeza ultrassônica, efetue a limpeza automática para remover a umidade interna e, de seguida, seque suficientemente o produto.
- Após a limpeza automática, certifique-se de que efetua a esterilização.
- Não utilize a limpeza ultrassônica para limpar peças de mão ultrassônicas. Tal causa falhas.

9-4 Armazenamento

Armazene o produto num ambiente em que seja mantido desinfetado e esterilizado até à próxima utilização.

**CUIDADO**

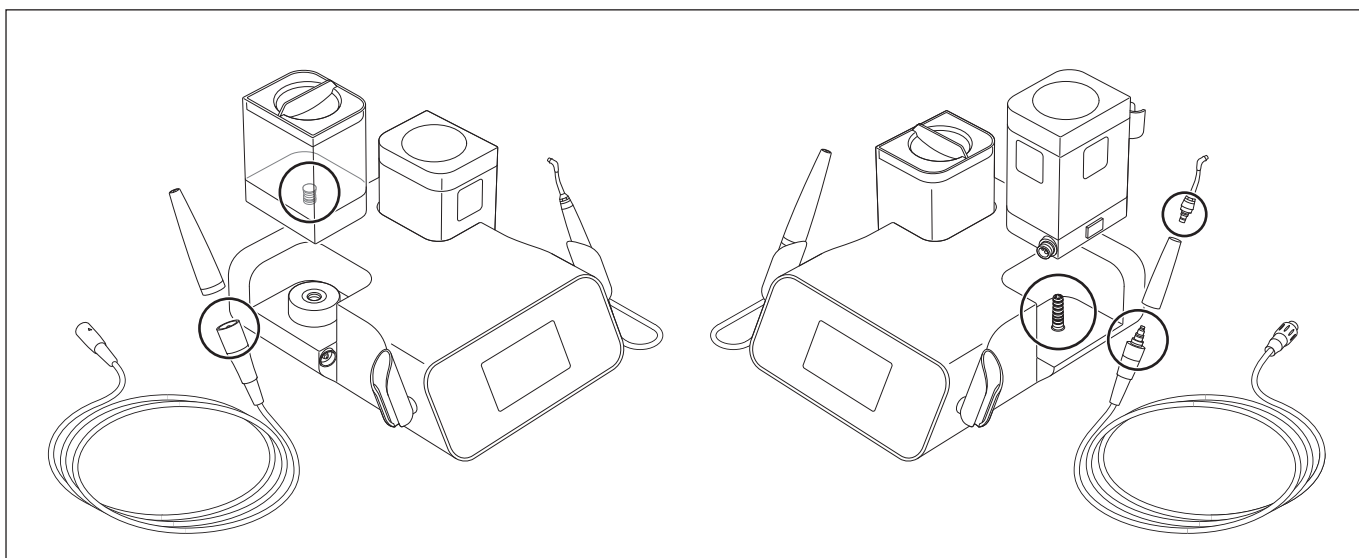
- Armazene o produto num local onde não haja o risco de efeitos adversos da pressão atmosférica, temperatura, ventilação, luz solar, pó, sal e atmosfera sulfúrica.

10 Cuidados e manutenção

10-1 Manutenção dos anéis vedantes

Efetue a manutenção para reduzir o desgaste dos anéis vedantes nas peças pretendidas e evitar fugas de água ou ar.

* Para substituir o anel vedante da tampa da câmara, contacte o seu distribuidor autorizado NSK.




10-1-1 Cabo da Peça de Mão

- 1) Retire o cabo da peça de mão da unidade de controle.
- 2) Retire o anel vedante a substituir utilizando uma agulha, etc.
- 3) Coloque um anel vedante novo na ranhura onde o anel vedante antigo foi removido.

* Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre anéis vedantes sobresselentes.

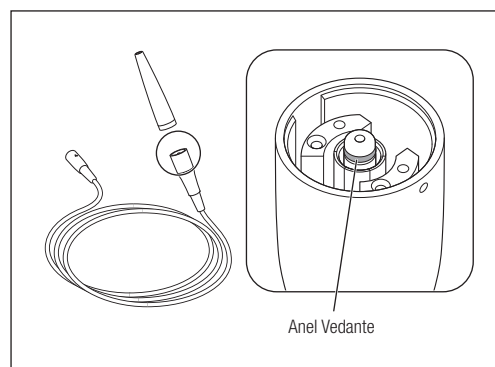
REF Y1003546



10-1-2 Mangueira da peça de mão (para utilização Prophy e utilização Perio)

- 1) Retire a mangueira da peça de mão de pó e da câmara.
 - 2) Retire os anéis vedantes da ficha da mangueira da peça de mão utilizando uma agulha, etc. Se houver pó nas ranhuras do anel vedante, limpe a ranhura antes de introduzir o novo anel vedante.
 - 3) Coloque os anéis vedantes novos nas ranhuras onde os anéis vedantes antigos foram removidos.
 - 4) Aplique uma gota do óleo de turbina fornecido e espalhe com o dedo.
- * Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre anéis vedantes sobresselentes.

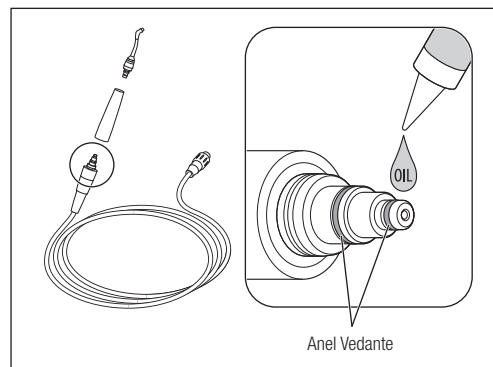REF Y1003500




⚠ CUIDADO

- A falta de lubrificação da secção do anel vedante no lado da peça de mão pode causar danos na secção da junta, resultando em dificuldades na rotação da ligação da peça de mão. Pode também causar fugas de água.

10-1-3 Conector (para uso Prophy e uso Perio)

- 1) Passe pelo Anel chave fornecida a partir do final do bico, afrouxe o bocal e remova o bocal da peça de mão.
 - 2) Remova os anéis de vedação a partir da raiz do bocal, utilizando uma agulha, etc. Se houver pó nas ranhuras dos anéis, limpe as ranhuras antes de inserir os novos anéis.
 - 3) Coloque os anéis vedantes novos nas ranhuras onde os anéis vedantes antigos foram removidos.
- * Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre anéis vedantes sobresselentes.

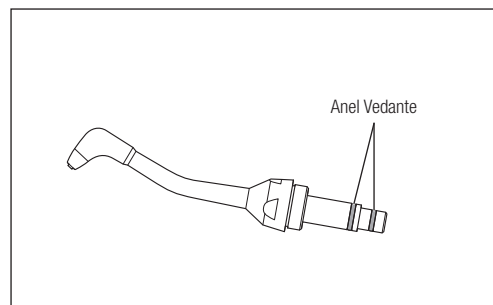
REF Y1003501



10-1-4 Garrafa de irrigação

- 1) Retire os anéis vedantes da junta da garrafa de irrigação utilizando uma agulha, etc.
 - 2) Coloque os anéis vedantes novos nas ranhuras onde os anéis vedantes antigos foram removidos.
- * Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre anéis vedantes sobresselentes.

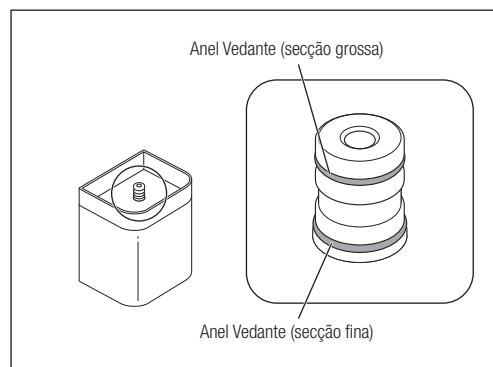REF Y1003544




⚠ CUIDADO

- Os anéis vedantes têm espessuras diferentes. Certifique-se de que as coloca na ranhura correta.

10-1-5 Conector na base da câmara

- 1) Retire os anéis vedantes do conector na base da câmara utilizando uma agulha, etc.
 - 2) Coloque os anéis vedantes novos nas ranhuras onde os anéis vedantes antigos foram removidos.
- * Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre anéis vedantes sobresselentes.

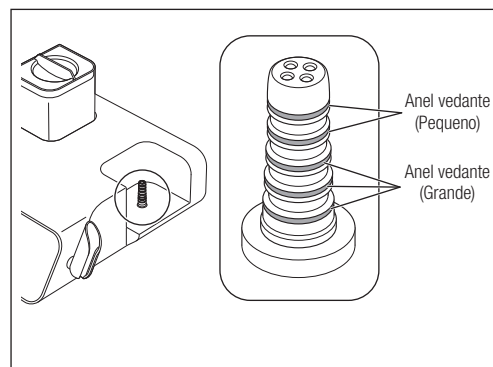REF Y1003435




⚠ CUIDADO


- Uma vez que o tamanho dos anéis vedantes é diferente, certifique-se de que os substitui na localização certa.

10-2 Substituir a bomba de irrigação

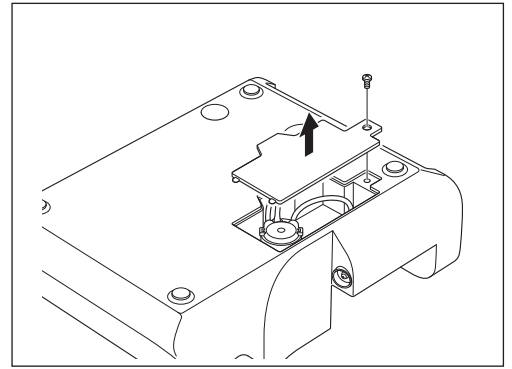
- 1) Retire a garrafa de irrigação, a câmara, o cabo de alimentação, o cabo da peça de mão e o pedal de controle da unidade de controle.
- 2) Vire a unidade de controle. Utilize uma chave de estrela para remover o parafuso na tampa da bomba de irrigação e retire a tampa.



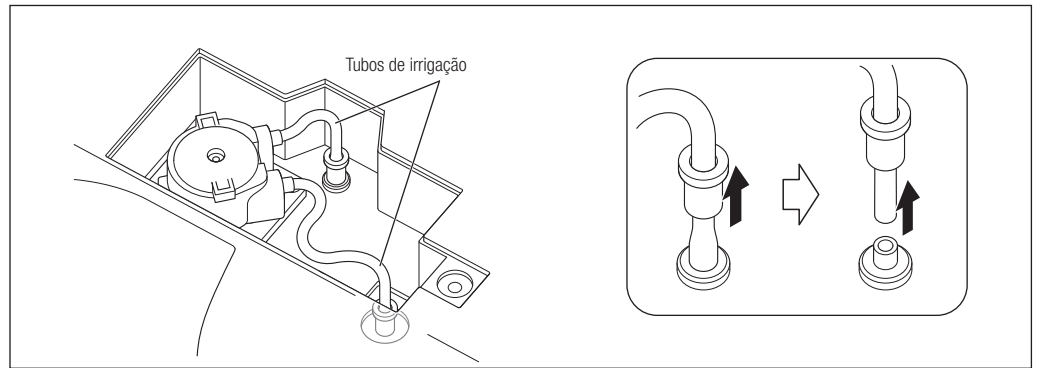
- 3) Retire os dois tubos de irrigação da unidade de controle.



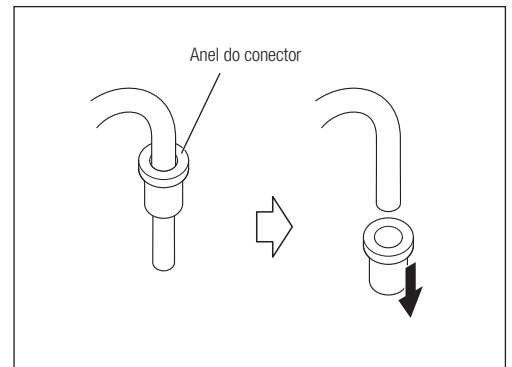
- 4) Retire o anel conector do tubo de irrigação. Não o elimine. Pode utilizar o anel na bomba de irrigação de substituição.



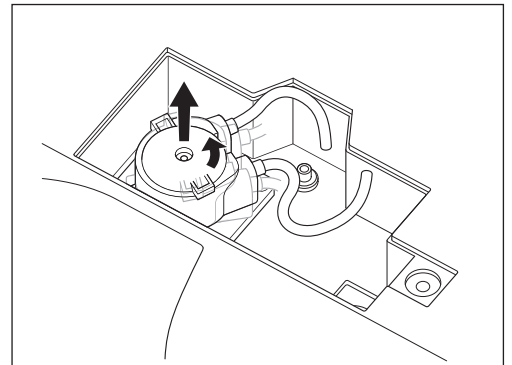
- 5) Rode a bomba de irrigação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até prender com um clique e, de seguida, retire-a.



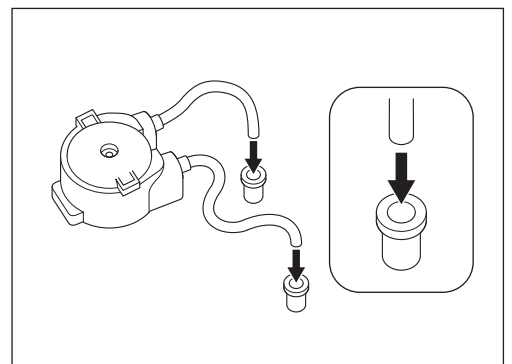
- 6) Instale os anéis conectores nos tubos de irrigação da nova bomba de irrigação (opção). Certifique-se de que o anel está bem orientado.



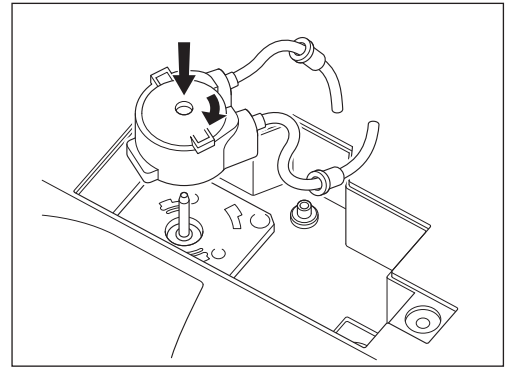7) Alinhe a bomba de irrigação nova (opção) com o eixo motor. Rode no sentido dos ponteiros do relógio até prender com um clique.



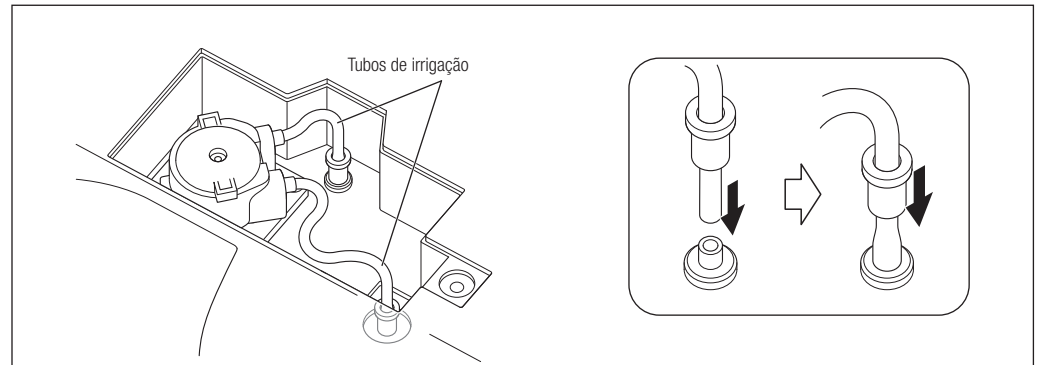8) Instale o tubo de irrigação. Pressione bem o anel conector na unidade de controle até estar totalmente inserido.




9) Alinhe o gancho da tampa da bomba de irrigação e o orifício na unidade de controle. Instale a tampa.

* Para mais informações sobre a bomba de irrigação opcional, consulte “21 Lista de peças sobresselentes”.

⚠
CUIDADO

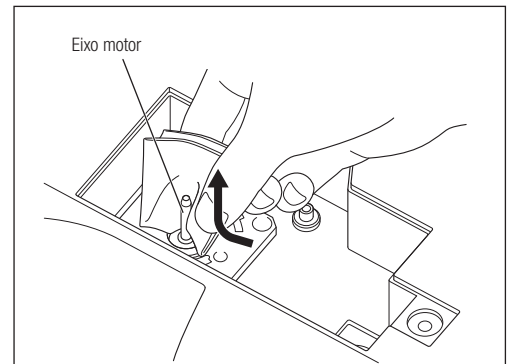- Antes de substituir a bomba de irrigação, limpe a água em excesso da bomba e do eixo motor. Um eixo motor e rolos húmidos podem ficar escorregadios e causar um funcionamento inadequado.
- Limpe a sujidade e a água do eixo motor de baixo para cima.
- Introduza a bomba de irrigação de substituição a direito no eixo motor de forma lenta e suave para evitar danos nos rolos da bomba.
- Após substituir a bomba de irrigação, utilize o produto durante cerca de 10 segundos com o modo Irrigação definido para garrafa e o volume de irrigação definido para o máximo para o tubo de irrigação se adaptar à nova bomba.
- Certifique-se de que não existem dobras no tubo de irrigação. Se o tubo for colocado incorretamente, a água de irrigação pode não ser fornecida.
- Certifique-se de que o tubo não fica preso sob a tampa da bomba de irrigação ao fechar a tampa da bomba de irrigação.
- Utilize apenas a bomba de irrigação para o Varios Combi Pro. As outras bombas não podem ser utilizadas.




- IMPORTANTE**
- Limpe periodicamente o eixo motor com um pano sem pelos humedecido em álcool desinfetante. Os resíduos no eixo motor podem causar o funcionamento incorreto da bomba.
 - A bomba é um item de desgaste. Se o volume de irrigação diminuir significativamente, substitua a bomba.

10-3 Substituir o filtro de água


Se utilizar água da torneira, substitua o filtro da água todos os anos.
Se achar que o volume de água baixou, substitua o filtro da água antes de ter passado um ano.

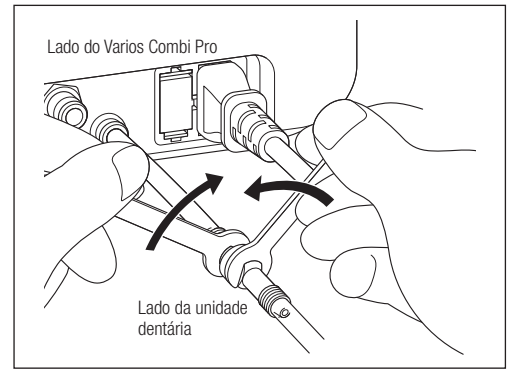- 1) Feche a válvula de água da unidade dentária.
- 2) Coloque a unidade de controle num pano, etc, em caso de fugas de água.
- 3) Utilize duas chaves (5x8) e rode nos sentidos mostrados na figura.
- 4) Retire a caixa do filtro de água e o filtro de água.



- 5) Coloque o novo filtro de água com o anel vedante no lado do Varios Combi Pro e volte a montar seguindo os passos de desmontagem de forma inversa.

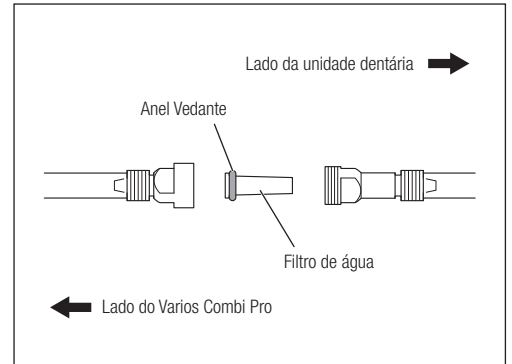* Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre o filtro de água opcional.




⚠ CUIDADO • Certifique-se de que o filtro de água está colocado na orientação correta. Caso contrário, o filtro não vai funcionar eficientemente.

10-4 Verificar o filtro de ar

Quando os sintomas como nível de potência reduzido ou obstrução frequente são detetados, liberte água pressionando a ponta do filtro de ar na parte inferior da unidade de controle.

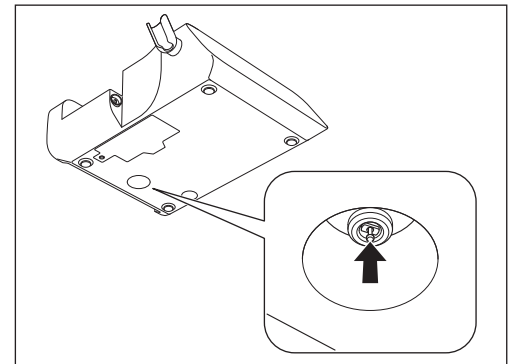
Se não for obtido um nível de potência suficiente como resultado de utilização prolongada, o elemento VCP pode estar obstruído. Se isto acontecer, entre em contato com seu Revendedor Autorizado NSK.



10-5 Substituir o fusível

- 1) Coloque o interruptor de alimentação na posição OFF.
- 2) Desligue o cabo elétrico c.a. da tomada de parede.
- 3) Retire o suporte do fusível situado na parte traseira da unidade de controle e, ao mesmo tempo, mantenha os pregos em ambas as extremidades introduzidos.
- 4) Substitua o fusível por um novo.
- 5) Pressione o suporte do fusível até encaixar na posição.

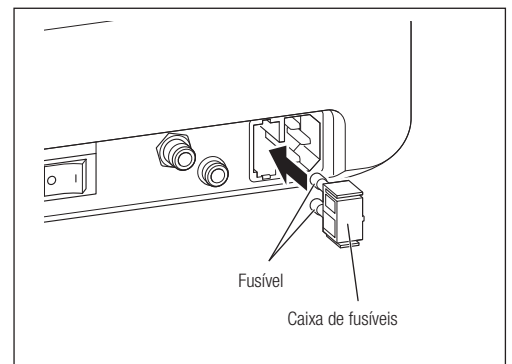* Consulte "21 Lista de peças sobresselentes" para mais informações sobre fusíveis sobresselentes.



⚠ CUIDADO • Utilize apenas fusíveis recomendados pela NSK. Podem ocorrer falhas se forem utilizados outros fusíveis.
• Se um fusível fundir mas não souber porquê, contacte um distribuidor autorizado NSK.

IMPORTANTE • Se a caixa de fusíveis não sair facilmente, utilize um acessório de ponta dura para pressionar os pregos enquanto retira a caixa de fusíveis.

11 Outras funções

11-1 Programa inicializado (Definição de fábrica)

Os valores de definição para cada um dos modos estão armazenados neste produto. Estes valores podem ser inicializados para as definições de fábrica.


- 1) Coloque o interruptor de alimentação para ON enquanto pressiona o botão B do pedal de controle.
- 2) "Clr" é apresentado no painel LCD. Enquanto "Clr" é apresentado, liberte o botão B do pedal de controle e, de seguida, pressione o botão D para a inicialização.
- 3) "Fin" é apresentado no painel LCD quando a inicialização é concluída. Ouve-se um alarme e o produto inicia no modo normal. (Consulte a tabela abaixo para as definições iniciais.)

| | Modo Ultrasonic | Modo Powder | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| | | Modo Propy | Modo Perio |
| Seleção do modo Ultrasonic | Perio | - | |
| Nível de potência | 1 | 1 | 1 |
| Modo Irrigação | Garrafa | - | |
| Volume de irrigação | 10 | 10 | 10 |

ULTRASONIC

11-2 Utilizar o suporte da ponta (para ponta ultrassônica, opção)

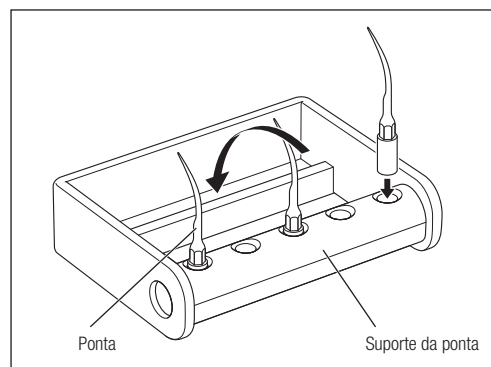- Utilize o suporte da ponta para armazenar as pontas após retirá-las da peça de mão.
- O suporte da ponta pode ser esterilizado em autoclave. Podem ser esterilizadas até 5 pontas ao mesmo tempo. Rode o suporte no sentido da seta para que as pontas sejam colocadas na estrutura para esterilização.



11-3 Definição do nível de água básico

O nível de água básico pode ser ajustado consoante a pressão da alimentação de água no ambiente de utilização. Se o volume de irrigação for demasiado grande ou demasiado pequeno mesmo quando ajustado através das teclas do volume de irrigação, siga o procedimento abaixo para ajustar o nível de água básico.

- 1) Coloque o interruptor de alimentação da unidade de controle para ON.
- 2) Toque na tecla de seleção do modo de funcionamento para selecionar o modo Powder.
- 3) Toque continuamente na tecla de seleção do modo Irrigação durante 2 segundos. Ouvem-se alarmes e o painel LCD muda para o modo de ajuste do nível de água básico.
- 4) Toque nas teclas do volume de irrigação (▲/▼) para alterar o nível de água básico ("L1" - "L5"). Ajuste o nível, conforme necessário.
- 5) Toque continuamente na tecla de seleção do modo Irrigação durante 2 segundos para guardar o nível selecionado na memória. Ouve-se um alarme e o nível selecionado é guardado e, de seguida, o painel LCD muda para o modo normal.



Modo de ajuste do nível de água básico [Nível de água 4]

Referência

| Nível | Volume de água |
|--------------------|------------------------|
| L5 | Grande ↑ Pequeno |
| L4 (Valor inicial) | |
| L3 | |
| L2 | |
| L1 | |

IMPORTANTE • O nível de água básico regressa a "L4" quando este produto é inicializado para as definições de fábrica. Defina novamente o nível de água básico após inicialização.

12 Verificações periódicas de manutenção

Consulte a folha de verificação abaixo e efetue verificações periódicas de manutenção a cada três meses. Contacte um distribuidor autorizado NSK sempre que detetar anomalias.

| Pontos a verificar | Descrição |
|---|--|
| Peça de mão ultrassónica | Utilize a peça de mão ultrassónica para se certificar de que não existe vibração anormal, ruído, calor, etc. Verifique também as luzes LED e os caudais de água. |
| Tampa da câmara | Certifique-se de que não existem riscos grandes/profundos. |
| Pulverização de pó | Após encher a câmara de pó, pulverize pó para uma cuspeira, etc, e certifique-se de que o pó não sai das ligações exceto da ligação da ponta do bico. |
| Pulverização de água | Após encher a câmara de pó, pulverize pó para uma cuspeira, etc e certifique-se de que a água não sai das ligações exceto da ligação da ponta do bico. |
| Câmara | Certifique-se de que não existem riscos grandes/profundos. |
| Instalar/remover a peça de mão, a mangueira da peça de mão, a garrafa de irrigação e a câmara | Certifique-se de que podem ser instalados e retirados suavemente. Se estiverem soltos ou demasiado apertados, os anéis vedantes podem ficar danificados ou deteriorados. Substitua os anéis vedantes. (Consulte "10 Cuidados e manutenção".) |

Informações de segurança adicionais:

Os testes de segurança periódicos serão efetuados a cada dois anos de acordo com IEC 62353 (EN 62353), em conformidade com o procedimento de teste OM-DE0947EN.

Uma vez que os testes de segurança periódicos estão exclusivamente limitados aos instaladores dentários profissionais com formação e qualificação sob o controlo da NSK, contacte o distribuidor autorizado NSK.

13 Código de erro

"Error" e um código de erro são apresentados no painel LCD da unidade de controle se este produto parar de funcionar devido a avaria, pressão excessiva, desativação ou utilização incorreta. Pressione o botão D do pedal de controle para efetuar novamente a verificação dos erros. Se o problema não for detetado, o estado do erro é eliminado e este produto fica operacional. Se o código de erro ainda estiver apresentado, consulte a tabela abaixo e tome os passos necessários para resolver o problema.

| Código de erro | Descrição do erro | Verificação/solução |
|----------------|---|--|
| 0 | Erro do sistema | Ligue a unidade de controle novamente. Se o erro não desaparecer, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 1 | Anomalia na tensão de 24 V | |
| 2 | Anomalia na tensão de 12 V | |
| 3 | Anomalia na potência da bomba | Verifique a ligação da bomba de irrigação. Se o problema persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 4 | Anomalia na pressão do ar | Verifique a pressão de ar de admissão. Se o problema persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 5 | Anomalia na tensão de aquecimento | Ligue a unidade de controle novamente. Se o erro não desaparecer, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 6 | Anomalia na potência de aquecimento | |
| 7 | Anomalia na temperatura de aquecimento | Verifique o circuito da água e alimente água à unidade de controle. Permita que a unidade de controle arrefeça antes de a utilizar. Se o erro não desaparecer, contacte um distribuidor. |
| 8 | Anomalia na comunicação do pedal de controle | Verifique a ligação do pedal de controle. Se o problema persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 9 | Anomalia da peça de mão ultrassónica | Verifique a ligação da peça de mão. Se o problema persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 12 | Anomalia na comunicação do sensor tátil | Coloque o interruptor de alimentação para OFF e novamente para ON. Se o problema persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK. |
| 13 | Erro na autoverificação da unidade ultrassónica | |
| 14 | Erro do sistema da unidade ultrassónica | |

14 Resolução de problemas

Se tiver problemas, verifique o seguinte antes de contactar um distribuidor autorizado NSK.

(Modo Ultrasonic e Modo Powder)



| Problema | Causa | Solução |
|--|--|--|
| Emissão de um bip | A alimentação foi ligada enquanto o pedal de controle estava premido. | Solte o pedal de controle e coloque o interruptor de alimentação para ON. |
| | Aquecimento anormal da unidade de controle. | Interrompa o funcionamento e permita que a unidade de controle arrefeça. |
| O painel tátil não reage bem ou a tecla premida não é reconhecida corretamente. | A calibração está ligeiramente desalinhada devido a eletricidade estática, ruído exógeno, etc. | Coloque o interruptor de alimentação para OFF e novamente para ON. |
| | A tecla não foi premida no centro. | Toque no centro da tecla. |
| <ul style="list-style-type: none"> A água não para O nível de água não pode ser ajustado | Danos ou desgaste do anel vedante. | Siga o procedimento em "10-1-5 Conector na base da câmara" para substituir o anel vedante. |
| | Obstrução por materiais estranhos no circuito de água. | Efetue a limpeza automática. Se o sintoma persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK. |

(Modo Ultrasonic)



| Problema | Causa | Solução |
|--|---|---|
| São ouvidos sons de alarme, e a apresentação do modo Ultrasonic (P/E/G) e "ULTRASONIC" ficam em intermitência alternada quando o botão D do pedal de controle é pressionado. | O sensor integrado no suporte da peça de mão está sujo e deteta erroneamente a introdução da peça de mão. | Limpe o sensor. |
| Pouca/Nenhuma vibração. | A ficha do cabo elétrico c.a. não está ligada à tomada de parede ou não está a ser abastecida eletricidade pela tomada de parede. | Verifique a ligação. |
| | O fusível está queimado. | Consulte "10-5 Substituir o fusível" e substitua o fusível. |
| | A ponta não está bem apertada. | Rode a chave da ponta (CR-10) até fazer um som de clique e não rodar mais. Se o problema persistir, substitua a chave da ponta (CR-10), uma vez que pode estar gasta. |
| | Ponta gasta. | Substitua a ponta. |
| | As peças aparafusadas da peça de mão e da ponta não estão limpas. | Limpe-as. |
| | As peças aparafusadas da peça de mão estão gastas como resultado de um longo período de utilização. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| | A alimentação não foi ajustada corretamente para a ponta. | Ajuste a alimentação de forma a não exceder o nível de potência máximo referido no guia de potência da ponta ou na etiqueta da embalagem da ponta. |
| | O pedal de controle está desligado. | Ligue a ficha do cabo do pedal de controle corretamente. |
| | Falha do dispositivo de vibração na peça de mão. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| | Falha de componentes internos do pedal de controlo. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| A ponta está dobrada ou partida. | A alimentação não foi ajustada corretamente para a ponta. | Ajuste a alimentação de forma a não exceder o nível de potência máximo referido no guia de potência da ponta ou na etiqueta da embalagem da ponta. |
| | | |
| A ponta cai. | A ponta não está bem apertada. | Aperte a ponta até a chave da ponta (CR-10) fazer um som de clique. |

| Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Ruído proveniente da peça de mão. | A alimentação não foi ajustada corretamente para a ponta. | Ajuste a alimentação de forma a não exceder o nível de potência máximo referido no guia de potência da ponta ou na etiqueta da embalagem da ponta. |
| | A ponta não está bem apertada. | Rode a chave da ponta (CR-10) até fazer um som de clique e não rodar mais. Se o problema persistir, substitua a chave da ponta (CR-10), uma vez que pode estar gasta. |
| | Falha de vibração no contra ângulo ou na unidade de controle. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| A peça de mão está a sobreaquecer. | A alimentação não foi ajustada corretamente para a ponta. | Ajuste a alimentação de forma a não exceder o nível de potência máximo referido no guia de potência da ponta ou na etiqueta da embalagem da ponta. |
| | A ponta não está bem apertada. | Rode a chave da ponta (CR-10) até fazer um som de clique e não rodar mais. Se o problema persistir, substitua a chave da ponta (CR-10), uma vez que pode estar gasta. |
| | As peças aparafusadas da peça de mão e da ponta não estão limpas. | Limpe-as. |
| | As peças aparafusadas da peça de mão estão gastas como resultado de um longo período de utilização. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| | O volume de irrigação é insuficiente ou a irrigação parou. | Irrigue a um volume adequado. |
| | Falha de vibração na peça de mão ou na unidade de controle. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| Sem fornecimento de irrigação e/ou fornecimento de irrigação instável (ao utilizar a garrafa) | O tubo de irrigação está torcido. | Endireite o tubo de irrigação torcido. |
| | Está na altura de substituir a bomba de irrigação. | Substitua por uma bomba de irrigação nova (Consulte 10-2 Substituir a bomba de irrigação). |
| Pouca/Nenhuma alimentação de água. (ao utilizar água da torneira) | Não está a ser alimentada água à unidade de controle. | Verifique o circuito da água de modo a que seja alimentada água à unidade de controle. Pressão de alimentação de água: 0,1 - 0,3 MPa |
| | O volume de irrigação está definido para "0". | Ajuste para o volume de irrigação adequado utilizando a definição do volume de irrigação. |
| | A alimentação de água pode ser instável quando o volume de irrigação é insuficiente. | Tal não representa uma avaria. Aumente o volume de irrigação na definição do volume de irrigação. |
| | O filtro de água está obstruído com substâncias estranhas. | Substitua o filtro de água por um novo. |
| Fuga de água. | O tubo de irrigação não está ligado corretamente. | Introduza o tubo de irrigação completamente no conector de irrigação. |
| | O anel vedante no cabo da peça de mão está gasta ou danificada. | Substitua por uma junta circular nova seguindo os procedimentos em "10-1-1 Cabo da Peça de Mão". |
| | O circuito da água na unidade de controle está danificado. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| O LED da peça de mão não fica ativo. | A peça de mão não está ligado ao cabo da peça de mão corretamente. | Introduza a peça de mão completamente no cabo da peça de mão. |
| | Falha na unidade de controle. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |

(Modo Powder)



| Problema | Causa | Solução |
|---|---|--|
| São ouvidos alarmes, e "POWDER" e o ícone de dente ficam em intermitência alternada quando o botão D ou B do pedal de controle é pressionado. | O sensor integrado no suporte da peça de mão está sujo e deteta erroneamente a introdução do contra ângulo. | Limpe o sensor. |
| | A câmara não está bem instalada. | Instale bem a câmara até ouvir o som de confirmação. |
| Não é possível ouvir o som de confirmação, ou o ícone que indica o modo Prophy ou o modo Perio não é apresentado quando a câmara é instalada. | Falha na unidade de controle (desativação). | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |

| Problema | Causa | Solução |
|--|---|--|
| Sem abastecimento de ar e pó. Ou o ar e o pó são abastecidos mas a pressão não é suficientemente forte e o pó de limpeza também é fraco. | O interior da ponta do bico está obstruído com pó. | Substitua a ponta do bico. |
| | O interior da peça de mão está obstruído com pó. | Limpe a base do bico com o fio de limpeza (pequeno) fornecido e a extremidade com a lima de limpeza. Além disso, limpe o interior da peça de mão com o fio de limpeza (grande). Se o pó e o ar não fluírem após serem limpos conforme descrito acima, execute a limpeza ultrassônica com água quente. (Consulte "9-3 Limpeza ultrassônica (semanal)".) |
| | O interior da câmara está obstruído com pó. | Remova o pó do interior da câmara seguindo os procedimentos em "9-1-5 Câmara e mangueira da peça de mão". |
| | O pó solidificou parcialmente com a água, etc. na passagem de ar. | Remova o pó do interior da passagem seguindo os procedimentos em "9-1-4-2 Limpeza automática". |
| | O recipiente do pó foi deixado aberto, expondo o pó ao ar. | Elimine o pó e use pó novo. |
| | Mistura de água no ar de alimentação. | Abra o filtro no circuito de alimentação de ar para drenar o compressor, e verifique se não ocorreu acumulação de água no interior do filtro de ar e do dreno do compressor. |
| | O elemento VCP está intupido. | Contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| Fuga de água entre a peça de mão e a mangueira. | O anel vedante está riscado. | Substitua o anel vedante na secção de articulação da peça de mão, aplique um pingo do óleo de turbina fornecido e espalhe-o com o dedo. (Consulte "10-1-2 Mangueira da peça de mão (para utilização Prophy e utilização Perio)".) |
| Não é possível retirar a câmara porque o botão de bloqueio não pode ser premido | O botão está bloqueado | Siga o procedimento "Libertar o botão de bloqueio" em "9-1-5 Câmara e mangueira da peça de mão" para libertar o bloqueio. Se o sintoma persistir, contacte um distribuidor autorizado NSK.* |
| Não é possível fechar a tampa da câmara. | Adesão de pó às roscas da câmara e/ou tampa da câmara. | Limpe as roscas da tampa da câmara (consulte "Limpar a tampa da câmara" em "9-1-5-2 Limpeza e desinfecção"). |

* Não pode ser corrigido em clínicas, etc.

15 Especificações

<Unidade de controle>

| | |
|---------------------------------------|--|
| Modelo | Varios Combi Pro |
| Fonte de alimentação | CA 100 V - 240 V 50/60 Hz |
| Frequência de acionamento | 28 - 32 kHz |
| Entrada de potência | 78 - 98VA |
| Saída máxima | 11 W |
| Pressão de alimentação de ar | 0,55 - 0,75 MPa (5,5 - 7,5 kgf/cm ²) |
| Pressão de alimentação de água | 0,1 - 0,3 MPa (1,0 - 3,0 kgf/cm ²) |
| Volume da garrafa | 400 ml |
| Volume de irrigação (Modo Ultrasonic) | 5,0 - 70,0 mL/min (Modo de irrigação: água de garrafa/torneira, Pressão da entrada de água: 0,2 MPa) |
| Dimensões | L225 × P290 × A162 mm (Incluindo garrafa de irrigação e câmara) |
| Peso | 2,7 kg (Garrafa de irrigação e câmara não incluídas) |

<Pedal de controle>

| | |
|---------------------|---|
| Modelo | FC-79 |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Dimensões | L204 × P157 × A128 mm (incluindo suporte) |
| Peso | 415 g (incluindo suporte) |

<Peça de mão Ultrassónica>

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Modelo | VA2-LUX-HP |
| Comprimento do cabo | 1,8 m (conector não incluído) |
| Tipo de oscilação | Tipo Piezo |
| Luz | LED branco |
| Dimensões | φ20 × 103 mm (cabo não incluído) |
| Peso | 54 g (cabo não incluído) |

<Peça de mão de pó>

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Modelo | PROPHY-HP/PERIO-HP |
| Comprimento da mangueira | 1,8 m (conector não incluído) |
| Dimensões | φ16 × 107 mm (cabo não incluído) |
| Peso | 33 g (cabo não incluído) |

| | Temperatura | Humidade | Pressão atmosférica |
|--------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| Ambiente de utilização*2 | 0 - 40°C | 35 - 75%*1 | – |
| Ambiente de armazenagem e transporte | -10 - 50°C | 10 - 85% | 500 - 1.060 hPa |

*1 Sem condensação

*2 A utilização deste produto em condições diferentes das especificadas acima pode causar avarias.

16 Classificação do equipamento

- Tipo de proteção contra descargas elétricas:
 - Equipamento de classe I
- Grau de proteção contra descargas elétricas:
Peça aplicada do tipo B: ⚡ (Peças aplicadas: ponta ultrassónica, peça de mão ultrassónica, ponta do bico, peça de mão de pó)
- Método de esterilização ou desinfeção recomendado pelo fabricante:
Consulte 9. Manutenção Após a Utilização
- Grau de proteção contra a penetração de água segundo a edição atual da norma CEI 60529:
 - Pedal de controle: IPX1 (Protegido contra quedas de água na vertical)
- Grau de segurança da utilização em presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigénio ou óxido nitroso:
 - Equipamento NÃO adequado para utilização na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
- Modo de funcionamento:
 - Funcionamento contínuo

17 Princípio de funcionamento

Modo Ultrasonic

O gerador fornece um sinal elétrico sinusoidal a frequência ultrassónica ($f > 20$ kHz). Este sinal é aplicado à "cerâmica piezoelétrica" no interior do transdutor. A cerâmica piezoelétrica converte este sinal em vibrações mecânicas. Estas vibrações estão à mesma frequência ultrassónica que o sinal elétrico. As vibrações mecânicas são propagadas para a extremidade distal do transdutor. O inserto "TIP" (Ponta), que está instalado na extremidade distal do transdutor, vibra a frequências ultrassónicas e para atingir a finalidade do equipamento.

Modo Powder

Pulveriza pó utilizando a pressão do ar para limpar a superfície dos dentes.

18 Símbolos

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Este produto pode ser esterilizado num esterilizador a vapor a 135°C. |  | Código de lote |
|  | Em conformidade com a Diretiva Europeia CE relativa a Equipamento Médico 93/42/CEE. |  | Número de série |
|  | Representante autorizado na União Europeia. |  | Cuidado |
|  | Consulte as instruções de funcionamento. |  | Temperatura |
|  | Protegido contra pingos |  | Água potável |
|  | Símbolo no exterior do equipamento ou das peças do equipamento que incluem transmissores RF ou que utilizam energia eletromagnética RF para diagnóstico ou tratamento |  | Lâmpada/luz/iluminação |
|  | Não reutilizável. |  | Verificação visual |
|  | Manter seco. |  | Banho ultrassónico |
|  | Esterilização EOG |  | Limitação de humidade |
|  | GS1 DataMatrix identificador exclusivo do dispositivo. |  | Limite de pressão atmosférica |
|  | Este produto pode ser lavado com um dispositivo de lavagem-desinfecção. |  | Número de catálogo (Order cord) |
|  | Fabricante. |  | Dispositivo médico |
|  | Para a eliminação do instrumento e acessórios, consulte a Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (WEEE) (2012/19/UE) |  | Identificador exclusivo do dispositivo |
|  | Peça aplicada do tipo B. |  | Representante autorizado para a Suíça |
|  | Exclusivamente para utilização em interiores. |  | Data de fabrico |
|  | Limite de temperatura. |  | Importador |
|  | Data de validade | | |

19 Garantia

Os produtos NSK dispõem de garantia contra erros de fabrico e defeitos de material. A NSK reserva-se o direito de analisar e determinar a causa de qualquer problema. A garantia é anulada se o produto não for utilizado corretamente ou para o efeito a que se destina, ou se tiver sido desmontado por pessoas sem qualificação, ou se tiverem sido instaladas peças que não da NSK. As peças sobresselentes permanecem disponíveis durante sete anos depois da descontinuação do modelo.

20 Lista de peças opcionais

| Modelo | REF | Notas |
|--|------------|---|
| Calibrador MG-4H Multi | Z109400 | |
| Suporte da ponta | Z221080 | |
| Set Perio | Y1003042 | Peça de mão de pó (Para utilização Perio) Câmara (Para utilização Perio) Mangueira da peça de mão (Para utilização Perio) Pó Perio-Mate Ponta de plástico Perio-Mate (40 peças) Extrator da Ponta Perio-Mate |
| Peça de mão de pó (Para utilização Perio) | T1077001 | |
| Câmara (Para utilização Perio) | U1135019 | |
| Mangueira da peça de mão (Para utilização Perio) | T1053001 | |
| Bico (Para utilização Perio) | T1077012 | |
| Pó Perio-Mate | Y900938 | 2 garrafas, cada garrafa contém 160 g |
| Ponta de plástico Perio-Mate | Y1002741 | 40 peças |
| Extrator da Ponta Perio-Mate | T1043751 | |
| Válvula de redução da pressão de água | U1135093 | |
| CLA-20 | ZA11900108 | Adaptador de limpeza para peça de mão Perio/Prophy. |

21 Lista de peças sobresselentes

| Modelo | REF | Notas |
|---|----------|--|
| FC-79 | Z1256001 | Pedal de controle |
| Conjunto de garrafa VCP | U1135017 | Garrafa e tampa (garrafa de irrigação, tampa da garrafa de irrigação) |
| Tampa da garrafa VCP | U1135116 | Apenas tampa (tampa da garrafa de irrigação) |
| Garrafa VCP (apenas garrafa) | U1135099 | Apenas garrafa (garrafa de irrigação) |
| Conjunto de anéis vedantes (Garrafa de irrigação) | Y1003544 | Um anel vedante grosso e um fino |
| Anel Vedante | Y1003546 | 1 para o cabo da peça de mão |
| Anel vedação set (Conector base da câmara) | Y1003435 | |
| Anel vedação set (Mangueira da peça de mão) | Y1003500 | Um de cada, grosso e fino Peças comuns para uso Prophy e uso Perio |
| Anel vedação set (Conector) | Y1003501 | Um de cada, grosso e fino Peças comuns para uso Prophy e uso Perio |
| Anel Vedante | Y1003545 | Para a tampa da câmara |
| Cabo da Peça de Mão | E351054 | |
| Peça de mão ultrassônica | E351050 | |
| Estojo de Esterilização | Z1035001 | Para peças ultrassônicas |
| Chave da Ponta (CR-10) | Z221076 | |
| Conjunto do Tubo de Água | U1135078 | |
| Filtro de água | U387042 | |
| Chave de aperto (5x8) | Y1001301 | 2 |
| Bomba de irrigação | U1135079 | Anel do conector não incluído |
| FLASH pearl | Y900698 | 4 garrafas, cada garrafa contém 300 g |
| Set Prophy | Y1003771 | Peça de mão de pó (Para utilização Prophy) Câmara (Para utilização Prophy) Mangueira da peça de mão (Para utilização Prophy) FLASH pearl (5 sachês) Anel vedante sobressalente |
| Câmara (Para utilização Prophy) | U1135018 | |
| Mangueira da peça de mão (Para utilização Prophy) | T1051001 | |
| Peça de mão de pó (Para utilização Prophy) | T1074001 | |
| Bico (Para utilização Prophy) | T1074012 | |
| Tampa da câmara | U1135089 | Apenas tampa |
| Lima de limpeza | T798092 | Para a extremidade distal e o interior do bico |
| Fio de limpeza (S) | T798095 | Para a raiz do bico |
| Fio de limpeza (L) | T798091 | Para peças que não as indicadas acima |
| Escova de limpeza | T798093 | |

| Modelo | REF | Notas |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| Ferramenta de desbloqueio | U1135256 | |
| Chave de luneta | T1074601 | |
| Óleo de turbina | Z016112 | |
| Mangueira de ar | D0914406036 | |
| Fusível | D1202220010 | Valor nominal T2AH250V |


22 Eliminação do produto

De forma a evitar os riscos sanitários para os operadores encarregados da eliminação de equipamento médico e os riscos de contaminação ambiental, a esterilização do equipamento deve ser confirmada por um cirurgião ou dentista. Solicite a eliminação do produto a empresas especializadas e autorizadas para o tratamento de resíduos industriais controlados.

23 Informação CEM (Compatibilidade Eletromagnética)

| Informação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas | | |
|--|-------------------------|---|
| O instrumento deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do instrumento deve certificar-se de que este é utilizado em tal ambiente. | | |
| Ensaio de emissões | Cumprimento | Ambiente eletromagnético - Informação |
| Emissões de RF CISPR11/EN55011 | Grupo 1 Classe B | O instrumento utiliza energia de RF apenas para a sua função interna. Como tal, as emissões de RF são bastante baixas e não é provável que causem qualquer interferência no equipamento eletrónico nas proximidades. |
| Emissões de RF CISPR11/EN55011 | Grupo 1 Classe B | Este instrumento é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e os diretamente ligados à rede pública de eletricidade de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos. |
| Emissões harmónicas EN/CEI61000-3-2 | classe A (exceto 120 V) | |
| Flutuações de tensão/ emissões de tremulação EN/CEI61000-3-3 | Cumprido (exceto 120 V) | |

| Informação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética | | | |
|--|--|--|---|
| O instrumento deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do instrumento deve certificar-se de que este é utilizado em tal ambiente. | | | |
| Ensaio de imunidade | Nível de ensaio EN/IEC60601 | Nível de cumprimento | Ambiente eletromagnético - Informação |
| Descarga eletrostática (ESD) EN/CEI61000-4-2 | $\pm(2,4)6$ kV contacto $\pm(2,4)8$ kV ar | $\pm(2,4)6$ kV contacto $\pm(2,4)8$ kV ar | Os pisos devem ser de madeira, betão ou cerâmica. Se forem revestidos com um material sintético, a humidade relativa deve ser, pelo menos, 30%. |
| Transiente elétrico rápido/ rajada EN/CEI61000-4-4 | ± 2 kV para linhas de potência ± 1 kV para linhas de entrada/ saída | ± 2 kV para linhas de potência ± 1 kV para linhas de entrada/ saída | A qualidade da alimentação elétrica deve ser a prevista para um ambiente hospitalar ou comercial. |
| Sobretensão EN/CEI61000-4-5 | ± 1 kV linha(s) para linha(s) ± 2 kV linha(s) para terra | ± 1 kV linha(s) para linha(s) ± 2 kV linha(s) para terra | A qualidade da alimentação elétrica deve ser a prevista para um ambiente hospitalar ou comercial. |
| Quedas de tensão, interrupções breves e variações de tensão nas linhas de entrada de potência EN/CEI61000-4-11 | <5% Ut (>95% de queda em Ut) durante 0,5 ciclos 40% Ut (60% de queda em Ut) durante 5 ciclos 70% Ut (30% de queda em Ut) durante 0,5 ciclos <5% Ut (>95% de queda em Ut) durante 5 segundos | <5% Ut (>95% de queda em Ut) durante 0,5 ciclos 40% Ut (60% de queda em Ut) durante 5 ciclos 70% Ut (30% de queda em Ut) durante 0,5 ciclos <5% Ut (>95% de queda em Ut) durante 5 segundos | A qualidade da alimentação elétrica deve ser a prevista para um ambiente hospitalar ou comercial. Se o utilizador do instrumento exigir o funcionamento contínuo durante interrupções de energia elétrica, recomenda-se que o instrumento seja alimentado por uma bateria ou fonte de alimentação sem interrupções. |
| Frequência de potência (50/60 Hz) do campo magnético EN/CEI61000-4-8 | 3 A/m | 3 A/m | Os campos magnéticos da frequência de potência devem situar-se em níveis característicos de um ambiente comercial ou hospitalar comum. |
| NOTA: 'Ut' é a tensão de rede CA antes da aplicação do nível de teste. | | | |

| Informação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---|
| O instrumento deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do instrumento deve certificar-se de que este é utilizado em tal ambiente. | | | |
| Ensaio de imunidade | Nível de ensaio EN/ IEC60601 | Nível de cumprimento | Ambiente eletromagnético - Informação |
| RF conduzida EN/CEI61000-4-6 | 3 Vrms 150 kHz a 80 MHz | 3 Vrms | Os equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis não devem ser utilizados perto de qualquer parte do produto, incluindo cabos, a uma distância inferior à distância de separação recomendada calculada com a equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz Em que P é a potência de saída nominal máxima do transmissor em watts (W) segundo o fabricante e (d) a distância recomendada em metros (m). As intensidades de campo de transmissores RF fixos determinadas por uma análise eletromagnética do local(a) devem ser inferiores ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência(b). Pode ocorrer interferência na proximidade de equipamento com este símbolo:  |
| RF irradiada EN/CEI61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz | 3 V/m | |
| NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência superior. | | | |
| NOTA 2: Estas indicações não se aplicam a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas. | | | |
| a: As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (móveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Deve ser considerada uma análise eletromagnética do local para avaliar o ambiente eletromagnético criado por transmissores fixos RF. Se a intensidade de campo medida no local onde o instrumento é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima indicado, o instrumento deve ser vigiado para comprovar o funcionamento normal. Se verificar um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como a reorientação ou o reposicionamento do instrumento. | | | |
| b: No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m. | | | |

| Cabos e acessórios | Comprimento máximo | Cumprimento de |
|---------------------------|----------------------|--|
| Cabo da Peça de Mão | 2,0 m (não blindado) | Emissões de RF CISPR11 Classe B/Grupo 1 |
| Cabo do pedal de controle | 2,5 m (não blindado) | Emissões harmónicas, (exceto 120 V) EN/CEI61000-3-2 Flutuações de tensão/emissões de tremulação, (exceto 120 V) EN/CEI61000-3-3 |
| Cabo Elétrico c.a. | 3,0 m (não blindado) | Descarga eletrostática (ESD): EN/CEI61000-4-2 Transiente elétrico rápido/rajada: EN/CEI61000-4-4 Sobretensão: EN/CEI61000-4-5 Quedas de tensão, interrupções breves e variações de tensão nas linhas de entrada de potência: EN/CEI61000-4-11 Frequência de potência (50/60 Hz) do campo magnético: EN/CEI61000-4-8 RF conduzida: EN/CEI61000-4-6 RF irradiada: EN/CEI61000-4-3 |

Distâncias recomendadas entre o equipamento de comunicações RF portátil e móvel e o aparelho


O aparelho deve ser utilizado num ambiente eletromagnético com interferências RF irradiadas controladas. O cliente ou o utilizador do aparelho podem ajudar a prevenir as interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações RF portátil e móvel (transmissores) e o próprio aparelho da forma recomendada seguidamente, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.


| Potência de saída nominal máxima do transmissor | Distância de acordo com a frequência do transmissor em m | | |
|---|--|--|---|
| | 150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Nos transmissores cuja potência de saída nominal máxima não está descrita acima, a distância de separação recomendada "d" em metros (m) pode ser calculada com a equação aplicável à frequência do transmissor, em que "P" é potência de saída máxima nominal do transmissor em watts (W) segundo o fabricante.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência superior.

NOTA 2: Estas indicações não se aplicam a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

NAKANISHI INC.  www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH 
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

Specifications are subject to change without notice.



Visit our
website

2022-12-08 CACC1212 005E